

Popis výrobku

Prodlužovací pásy Liko Extension Loop jsou určeny ke snadné úpravě příslušenství Liko. Připevňují se ke smyčkám a popruhům, aby se jejich délka dala nastavit dle potřeby.

Prodlužovací pásy Extension Loop mají dvě různé délky a jsou v zelené nebo šedé barvě. Vybraná délka závisí na tom, jak velkou úpravu chcete provést.


















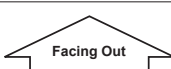


V tomto dokumentu je zvedaná osoba označena jako „pacient“ a osoba, která při zvedání pomáhá, je označena jako „ošetřovatel“.

DŮLEŽITÉ!

Zvedání a přenášení pacientů vždy znamená určitou míru rizika. Před použitím si přečtěte návod k použití zvedáku i zvedacího příslušenství. Je důležité úplně porozumět obsahu návodu k použití. Toto zařízení smí obsluhovat pouze vyškolený personál. Ověřte si, že zvedací příslušenství je vhodné pro použitý zvedák. Při používání dbejte opatrnosti. Jako ošetřující personál vždy zodpovídáte za bezpečnost pacienta. Musíte být vždy dobře informováni o stavu pacienta a jeho schopnosti zvládnout situace zahrnující zvedání. Pokud je vám něco nejasné, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Popis symbolů

V tomto dokumentu nebo na výrobku se můžete setkat s těmito symboly.

Symbol	Popis
	Výstraha: Tato situace vyžaduje zvláštní péči a pozornost
	Před použitím si prostudujte návod k použití.
	Značka CE
	Zákonný výrobce
	Datum výroby
	Identifikátor produktu
	Sériové číslo
	Zdravotnický prostředek
	Nepoužívat suché čištění
	Nežehlit
	Sušení v sušičce
	Zákaz sušení v bubnové sušičce
	Praní Symbol je vždy v kombinaci s doporučenou teplotou ve °C a °F.
	Neobsahuje latex
	Pravidelné prohlídky
	Nebělte
	Sušte na šňůře ve stínu
	Směr vzhůru a symbol na vnější části vybavení.
	Symbol na vnější části vybavení.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) RRMDD (21) 012345678910</small>	Čárový kód datové matice GS1, který může obsahovat následující informace. (01) Číslo globální obchodní položky (11) Datum výroby (21) Sériové číslo

Bezpečnostní pokyny

Před zvedáním mějte na paměti následující body:

- Upozorňujeme, že symetrie závěsu se změní, když připojíte prodlužovací pásy k jednotlivým smyčkám. Změna symetrie závěsu může ovlivnit bezpečnost, takže při testovací fázi je třeba opatrnost a musí ji provádět autorizovaná předepisující osoba.
- Před zvedáním zkontrolujte, zda jsou prodlužovací pásy dobře připevněny k závěsu či zvedacímu příslušenství. Obzvláště po praní buďte pozorní.
- Přestože jsou závěsné hrazdy Liko vybaveny západkami, je třeba dbát zvláštní opatrnosti. Předtím než pacienta zvednete z podkladové plochy, ale až ve chvíli, kdy jsou plně napnuty popruhy vesty, zkontrolujte, zda jsou popruhy správně připevněny k hákům závěsné hrazdy.
- Pracujte vždy ergonomicky. Využívejte pacientovy schopnosti aktivně se účastnit na jednotlivých činnostech.
- Pokud se pacientský vak nepoužívá, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

 **Nesprávné připevnění pacientského závěsného vaku k závěsné hrazdě by mohlo pacientovi způsobit zranění.**

 **Ruční otáčení pacienta na lůžku může způsobit poranění ošetřovateli.**

 Zdravotnický prostředek třídy I

Změny výrobků

Výrobky Liko prochází neustálým vývojem, a proto si vyhrazujeme právo na změnu výrobku bez předchozího upozornění. Informace o aktualizaci výrobní řady Liko™ poskytne autorizovaný zástupce společnosti Hill-Rom.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Společnost Liko je certifikovaná podle normy řízení kvality ISO 9001 a jejího ekvivalentu v oboru zdravotnických prostředků, ISO 13485. Společnost Liko je také certifikovaná podle normy pro ochranu životního prostředí ISO 14001.

Upozornění pro uživatele a/nebo pacienty v EU

Všechny závažné příhody, ke kterým dojde v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, musí být hlášeny výrobci a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.

Péče a údržba

Před každým použitím produkt zkontrolujte. Zkontrolujte následující prvky, zda nejsou opotřebené a poškozené:

- Popruhy
- Švy

⚠ Nepoužívejte poškozené zvedací příslušenství.

Pokud něčemu nerozumíte, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Pokyny k praní: Viz štítek výrobku na prodlužovacím pásku a přiložený dodatek „Pacientské vaky Liko – péče a údržba“.

Pravidelné prohlídky

Výrobek musí být prohlížen minimálně každých 6 měsíců. Častější prohlídky mohou být vyžadovány, pokud jsou výrobky používány nebo čistěny častěji, než je obvyklé. O tyto protokoly požádejte svého zástupce společnosti Hill-Rom.

Předpokládaná životnost

Pokud je produkt vyroben ze zelené tkané polyesterové tkaniny, má očekávanou životnost 5 let. Pokud je produkt vyroben z šedého polyesteru, má očekávanou životnost 3 roky. Předpokládaná životnost je založena na 10 použitích denně a praní jednou týdně, podle pokynů k praní. Společnost Hill-Rom doporučuje, aby byl produkt používán jen po dobu předpokládané životnosti.


Pokyny pro recyklaci

Celý prodlužovací pásek by měl být tříděn jako spalitelný odpad.


Společnost Hill-Rom poskytuje svým uživatelům vyhodnocení a pokyny k bezpečné manipulaci a likvidaci jejich zařízení a pomáhá tak s prevencí poranění, mimo jiné pořezání, propíchnutí kůže, odřenin. Poskytuje také pokyny k požadovanému čištění a dezinfekci zdravotnického prostředku po použití a před jeho likvidací. Zákazníci by se měli řídit všemi místními a národními zákony a směrnicemi, které se týkají bezpečné likvidace zdravotnických prostředků a příslušenství.

V případě pochybnosti má uživatel nejprve kontaktovat technickou podporu společnosti Hill-Rom a vyžádat si protokoly bezpečné likvidace.

Sestavení

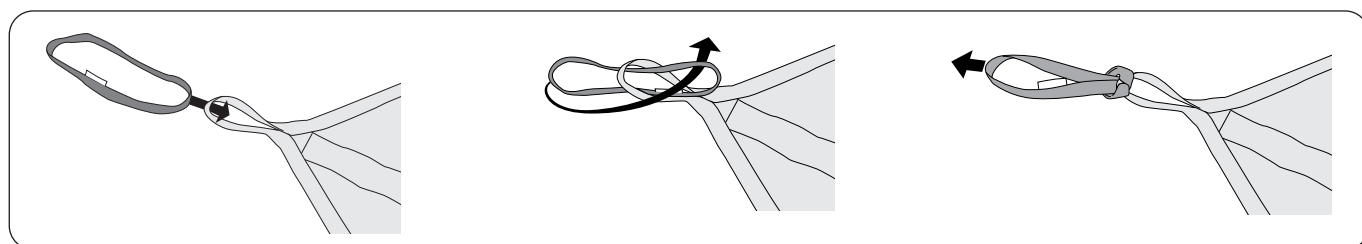


Oblasti použití

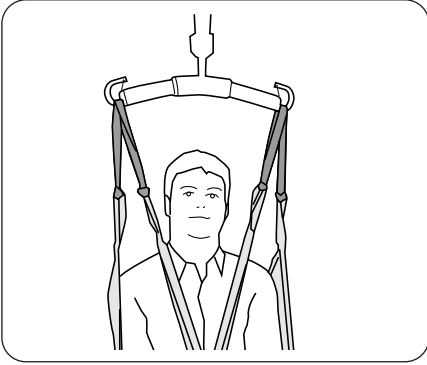


1. Zvětšení vzdálenosti mezi hlavou a závěsnou hrazdou

Prodlužte **všechny** smyčky pásků závěsného vaku / zvedacího příslušenství, aby se zvětšila vzdálenost mezi hlavou pacienta a závěsnou hrazdou. Upozorňujeme, že čím delší prodlužovací pásky použijete, tím vyšší je konstrukční výška závěsu, což může ztížit zvedání na požadovanou úroveň.

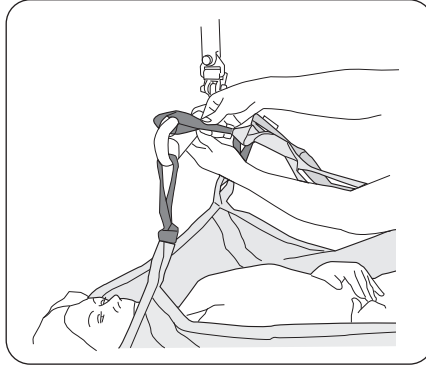


2. Zjednodušení připojení k závěsné hrazdě

POkud smyčky popruhů závěsů / zvedacího příslušenství nedosáhnou až k závěsné hrazdě – prodlužte **všechny** smyčky popruhů závěsu, aby se připojení zjednodušilo. Přílišné prodloužení může znesnadnit zvednutí pacienta na požadovanou úroveň.

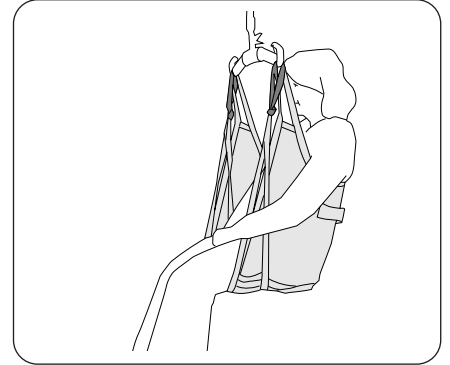


3. Vzpřímenější poloha vsedě

Když připojíte podpěry nohou na závěs přesahující pod obě nohy, můžete někdy potřebovat prodloužit smyčky podpěr nohou, aby bylo dosaženo vzpřímenější polohy vsedě.

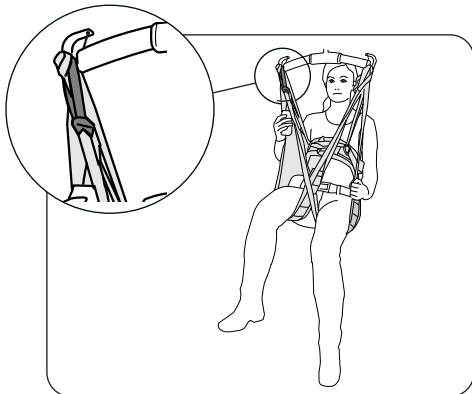


4. Méně ohýbání v kyčlích

Prodloužením smyčky podpěr nohou závěsu dosáhnete otevřenější úhel kyčlí. To lze provést na jedné nebo obou smyčkách podpěr nohou dle potřeby.

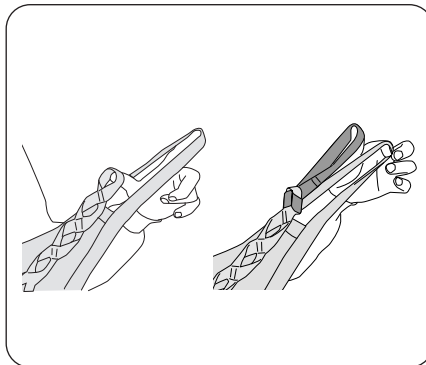

5. Nastavení délky smyčky popruhu


Jsou-li smyčky popruhů závěsu / zvedacího příslušenství příliš krátké, prodlužte je. Prodlužovací pásek lze připojit k jedné z vnějších smyček popruhu dle potřeby.

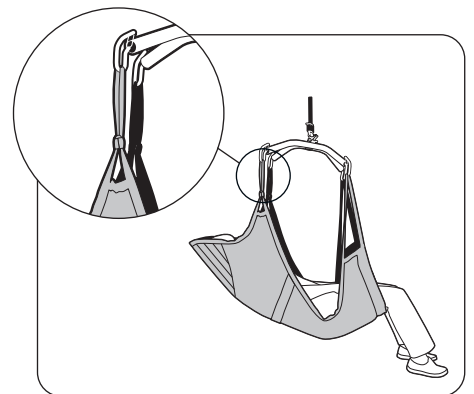

6. V kombinaci se systémem Comfort Sling Plus/Comfort Sling

Když kombinujete Comfort Sling Plus Mod. 300/310/350/360 nebo Comfort Sling Mod. 30/31/35/36 s hrazdami Liko Sling Cross-bars nebo Side Bars, musíte **vždy** prodloužit horní smyčky popruhů závěsu. Tato kombinace umožňuje více zakloněnou polohu vsedě s menším ohybem kyčelního kloubu. Viz pokyny k použití závěsů.

Přehled Liko™ Extension Loop

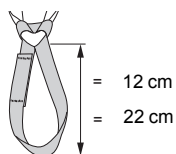

Název	Č. výrobku	Prodloužení	Maximální zatížení
Extension Loop, zelený, 12 cm	3691102	12 cm	150 kg/smyčka
Extension Loop, zelený, 22 cm	3691103	22 cm	150 kg/smyčka
Extension Loop, šedý, 12 cm	3691302	12 cm	150 kg/smyčka
Extension Loop, šedý, 22 cm	3691303	22 cm	150 kg/smyčka

Schválené kombinace

Prodlužovací pásy Liko Extension Loop jsou určeny k použití pouze v kombinaci se zvedacím příslušenstvím Liko. Schválili jsme kombinaci s následujícím zvedacím příslušenstvím podle oblasti použití (1–6) popsanych na straně 5.

	Oblast použití 1*	Oblast použití 2*	Oblast použití 3	Oblast použití 4	Oblast použití 5	Oblast použití 6
Universal Sling, Mod. 00/02	2	2	2	2	4	4
Ultra Sling, Mod. 06 - viz návod k použití výrobku	-	-	-	-	-	-
Original Sling, Mod. 10/11	2	2	2	2	4	4
Original High Back Sling, Mod. 20/21	2	2	2	2	4	4
Silhouette Sling, Mod. 22	2	2	2	2	4	4
Solo High Back Sling, Mod. 25	2	2	2	2	4	4
Soft Original High Back Sling, Mod. 26	2	2	2	2	4	4
Comfort Sling, Mod. 30/31/35/36	2	2	4	4	4	1
Comfort Sling Plus, Mod. 300/310/350/360	2	2	4	4	4	1
Hygiene Sling, Mod. 40/41/45/46	2	4	3	3	2	4
HygieneVest, Mod. 50/55	2	4	2	2	2	4
MasterVest, Mod. 60/64	2	4	4	4	2	4
Vest for Standing Shell, Mod. 67	2	2	4	4	2	4
Amputee Sling Mod. 70/75	2	2	3	3**	4	4
Lift Pants, Mod. 92	2	4	4	4	2	4
Ultra Lift Pants, Mod. 920	2	4	4	4	2	4
Liko Straps, Prod. No. 3590115	3	3	4	4	4	4
Head Support	2	2	4	4	4	4
Stat RepoSheet Original	4	4	4	4	4	4
Sabina - příslušenství						
SupportVest, Mod. 91	4	2	4	4	4	4
Solo SupportVest, Mod. 911	4	2	4	4	4	4
SafetyVest, Mod. 93/94	4	2	4	4	2	4
ComfortVest, Mod. 95	4	2	4	4	2	4
Seatstrap	4	2	4	4	2	4
Stretcher - příslušenství						
LiftSheet Octo, Mod 83	4	2	4	4	4	4
Solo Octo LiftSheet, Mod 83	4	2	4	4	4	4
LiftStrap Octo, Mod 83	4	2	4	4	4	4
Cross Strap Octo, Mod 83	4	2	4	4	4	4
LiftSheet XL, Mod 84	4	2	4	4	4	4
LiftStrap XL, Mod 84	4	2	4	4	4	4

Vysvětlivky: 1 = Musí se použít 2 = Může se použít 3 = Může se použít, ale pozor na změnu geometrie závěsu 4 = Není relevantní / Není doporučeno

* Prodlužte všechny smyčky pásu produktu.

** Se zkříženými podpěrami nohou.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švédsko
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom