


Liko™ Extension Loop

Gebruiksaanwijzing

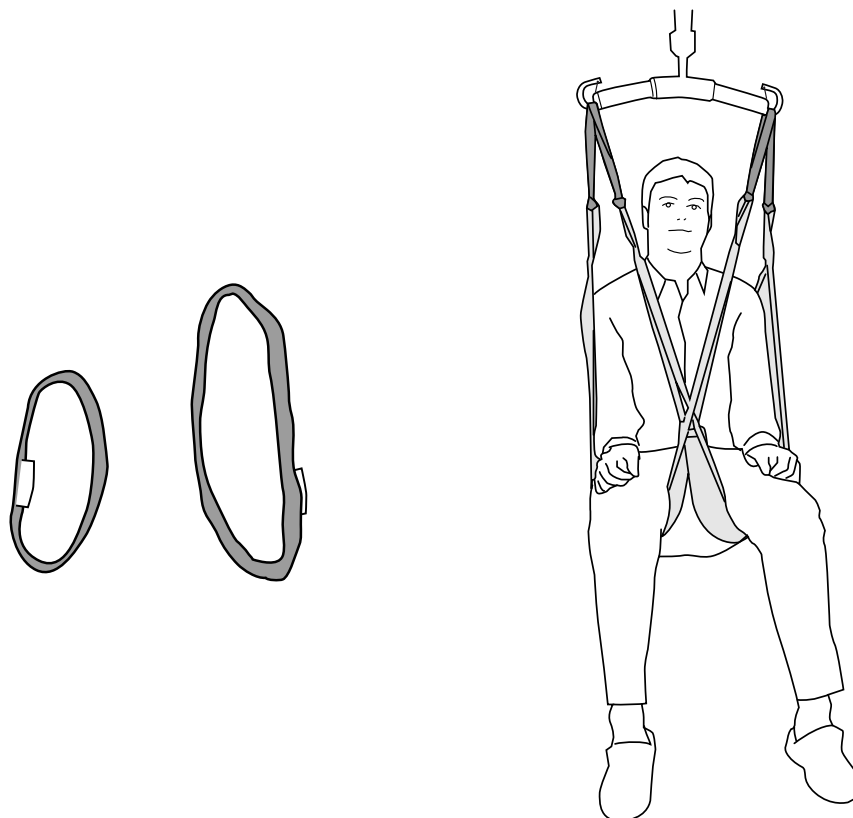

Productbeschrijving

Liko's Extension Loops zijn bedoeld voor eenvoudige aanpassingen aan het assortiment accessoires van Liko. Ze worden aan bandlussen en lussenbanden bevestigd om de lengte naar wens aan te passen.

De Extension Loops zijn verkrijgbaar in twee verschillende lengten en in de kleuren groen of grijs. De lengte die u kiest, is afhankelijk van de mate waarin u een aanpassing wilt maken.





















In dit document wordt de persoon die wordt opgetild de patiënt genoemd en de persoon die hierbij helpt de zorgverlener.

BELANGRIJK

Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen voor zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn voor de lift die u wilt gebruiken. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. U moet weten of de patiënt het tillen aankan. Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Symboolbeschrijving

Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing: deze situatie vereist extra zorg en aandacht
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing
	CE-markering
	Juridisch fabrikant
	Productiedatum
	Productidentificatie
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Niet stomen
	Niet strijken
	Drogen in de droogtrommel
	Niet drogen in de droogtrommel
	Wassen Het symbool komt altijd voor in combinatie met de aanbevolen temperatuur in °C en °F.
	Latexvrij
	Periodieke inspectie
	Niet bleken
	Drogen aan de waslijn in de schaduw
	Omhoog gericht en symbool aan de buitenkant van de apparatuur.
	Symbool aan de buitenkant van de apparatuur.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) JJMDD (21) 012345678910</small>	GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten. (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer


Veiligheidsinstructies

Bedenk vóór het tillen het volgende:

- houd er rekening mee dat de geometrie van de tilband verandert wanneer u de Extension Loops aan afzonderlijke bandlussen bevestigt. Een wijziging in de geometrie van de tilband kan de veiligheid beïnvloeden, dus wees voorzichtig tijdens de testfase die door een bevoegde voorschrijver moet worden uitgevoerd.
- controleer voor elke tilbeweging of de Extension Loops correct aan de tilband/tilaccessoires zijn bevestigd. Let vooral goed op na het wassen.
- hoewel de tiljucken van Liko zijn uitgerust met clips, moet er extra voorzichtig te werk worden gegaan. Controleer voordat de patiënt daadwerkelijk getild wordt maar terwijl de banden volledig gestrekt zijn, of de banden correct aan de haken van het tiljuk zijn bevestigd.
- werk altijd ergonomisch. Gebruik de mogelijkheden van de patiënt om actief aan de verplaatsing mee te werken.
- stel de tilband, als deze niet wordt gebruikt, niet bloot aan direct zonlicht.

 **Een onjuiste bevestiging van de tilband aan het tiljuk kan ernstig letsel bij de patiënt veroorzaken.**

 **Handmatig draaien van de patiënt in bed kan letsel bij de zorgverlener veroorzaken.**

 Medisch hulpmiddel, productklasse I

Productwijzigingen

Producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en informatie over productverbeteringen.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko is gecertificeerd conform de ISO 9001-kwaliteitscertificatie en de daaraan gelijkwaardige ISO 13485-kwaliteitscertificatie voor de medische-hulpmiddelenindustrie. Liko is ook gecertificeerd conform de milieustandaard ISO 14001.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Verzorging en onderhoud

Controleer het product vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigingen:

- banden
- zomen

⚠ **Gebruik geen beschadigde tilaccessoires.**

Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Wasinstructies: zie hiervoor het productlabel van de Extension Loop en de bijgevoegde bijlage 'Verzorging en onderhoud Liko-tilbanden'.

Periodieke inspectie

Het product moet minstens om de 6 maanden worden geïnspecteerd. Frequentere inspectie is mogelijk nodig als de producten vaker dan normaal worden gebruikt of gewassen. Voor protocollen kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.

Verwachte levensduur

Als het product is gemaakt van groen geweven polyesterweefsel, heeft het product een verwachte levensduur van 5 jaar. Als het product is gemaakt van grijs polyester, heeft het product een verwachte levensduur van 3 jaar. De verwachte levensduur is gebaseerd op 10 keer per dag gebruiken en één keer per week wassen volgens de wasinstructies. Hill-Rom adviseert het product alleen tijdens de verwachte levensduur te gebruiken.


Recyclinginstructies

De gehele Extension Loop moet worden gesorteerd als brandbaar afval.


Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan het afvoeren. Klanten moeten zich houden aan alle federale, landelijke, regionale en/of lokale wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.

In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hill-Rom voor advies over protocollen over veilig afvoeren.

Montage

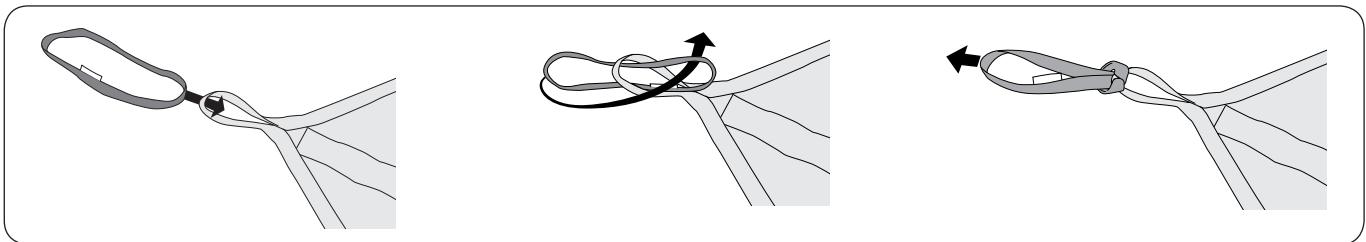


Toepassingen

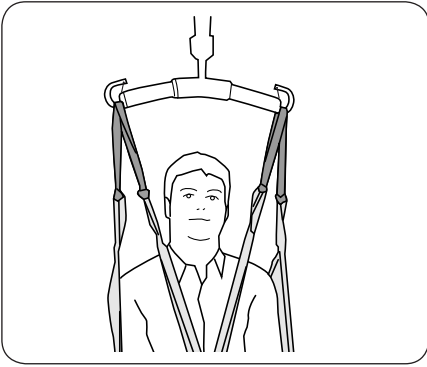


1. De afstand tussen hoofd en tiljuk vergroten

Verleng **alle** bandlussen van de tilbanden/tilaccessoires om de afstand tussen het hoofd van de patiënt en het tiljuk te vergroten. Houd er rekening mee dat hoe langer de gebruikte Extension Loops zijn, hoe hoger de constructiehoogte van de tilband is, waardoor het moeilijker wordt om de tilband naar het gewenste niveau te tillen.

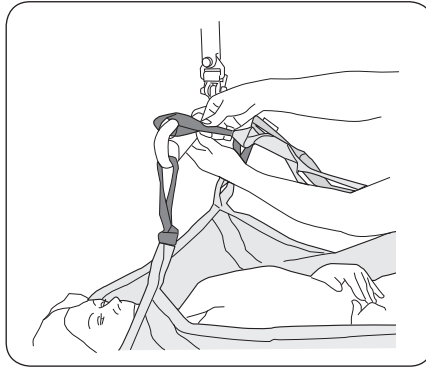


2. Verbinding met het tiljuk eenvoudiger maken

Verleng **alle** bandlussen van de tilband als de bandlussen van de tilband/het tilaccessoire niet tot aan het tiljuk reiken, zodat de aansluiting makkelijker verloopt. Als de bandlussen te lang zijn kan het moeilijk worden om de patiënt op het gewenste niveau te tillen.

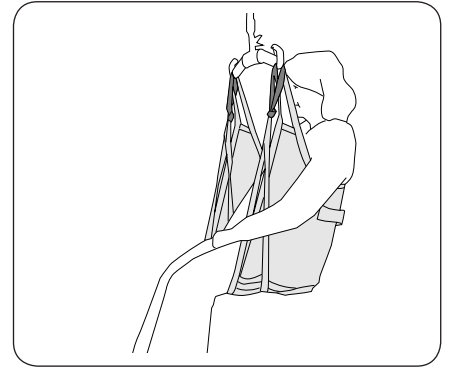


3. Rechtere zithouding

Wanneer u de beensteunen op een tilband onder beide benen bevestigt, moet u soms de beensteunlussen verlengen voor een rechtere zithouding.

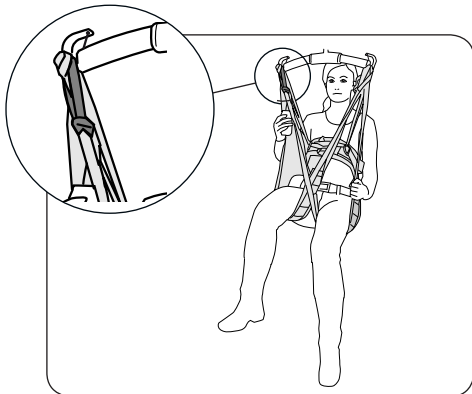


4. Minder kanteling in de heupen

Verleng de beensteunlus van de tilband voor een open heuphoek. Dit kan bij één of beide beensteunlussen worden gedaan.

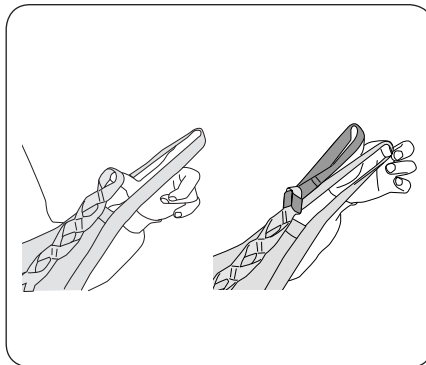

5. Instelling van de lengte van de lussenband


Verleng de lussenbanden van de tilband/tilaccessoires als deze te kort zijn. De Extension Loop kan indien nodig worden bevestigd aan een van de buitenste lussen op de lusband.

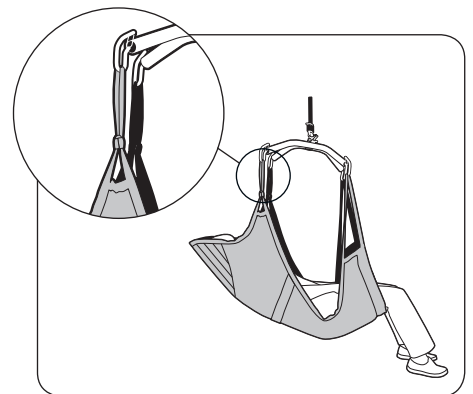

6. In combinatie met de Comfort Sling Plus/Comfort Sling

Wanneer u de Comfort Sling Plus-modellen 300/310/350/360 of de Comfort Sling-modellen 30/31/35/36 combineert met de Sling Cross-bars of Sling SideBars van de Liko, moet u de bovenste bandlussen van de tilband **altijd** verlengen. Deze combinatie zorgt voor een meer achteroverliggende zithouding met minder kanteling in het heupgewricht. Zie de gebruiksaanwijzing van de tilbanden.

Overzicht van de Liko™ Extension Loop

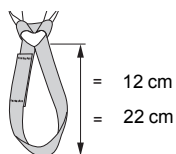

Naam	Productnr.	Verlenging	Maximale belasting
Extension Loop, groen, 12 cm	3691102	12 cm	150 kg/lus
Extension Loop, groen, 22 cm	3691103	22 cm	150 kg/lus
Extension Loop, grijs, 12 cm	3691302	12 cm	150 kg/lus
Extension Loop, grijs, 22 cm	3691303	22 cm	150 kg/lus

Goedgekeurde combinaties

Liko's Extension Loops mogen alleen samen met Liko's assortiment tilaccessoires worden gebruikt. Wij keuren combinaties met de volgende tilaccessoires goed in overeenstemming met de toepassingen (1 - 6) die worden beschreven op pagina 5.

	Toepas- singen 1*	Toepas- singen 2*	Toepas- singen 3	Toepas- singen 4	Toepas- singen 5	Toepas- singen 6
Universal Sling, mod. 00/02	2	2	2	2	4	4
Ultra Sling, mod. 06 - zie de gebruiksaanwijzing van het product	-	-	-	-	-	-
Original Sling, mod. 10/11	2	2	2	2	4	4
Original High Back Sling, mod. 20/21	2	2	2	2	4	4
Silhouette Sling, mod. 22	2	2	2	2	4	4
Solo High Back Sling, mod. 25	2	2	2	2	4	4
Soft Original High Back Sling, mod. 26	2	2	2	2	4	4
Comfort Sling, mod. 30/31/35/36	2	2	4	4	4	1
Comfort Sling Plus, mod. 300/310/350/360	2	2	4	4	4	1
Hygiene Sling, mod. 40/41/45/46	2	4	3	3	2	4
HygieneVest, mod. 50/55	2	4	2	2	2	4
MasterVest, mod. 60/64	2	4	4	4	2	4
Vest for Standing Shell, mod. 67	2	2	4	4	2	4
Amputee Sling, mod. 70/75	2	2	3	3**	4	4
Lift Pants, mod. 92	2	4	4	4	2	4
Ultra Lift Pants, mod. 920	2	4	4	4	2	4
Liko Straps, Prod.nr. 3590115	3	3	4	4	4	4
Head Support	2	2	4	4	4	4
Stat RepoSheet Original	4	4	4	4	4	4
Sabina - accessoires						
SupportVest, mod. 91	4	2	4	4	4	4
Solo SupportVest, mod. 911	4	2	4	4	4	4
SafetyVest, mod. 93/94	4	2	4	4	2	4
ComfortVest, mod. 95	4	2	4	4	2	4
Seatstrap	4	2	4	4	2	4
Stretcher - accessoires						
LiftSheet Octo, mod. 83	4	2	4	4	4	4
Solo Octo LiftSheet, mod. 83	4	2	4	4	4	4
LiftStrap Octo, mod. 83	4	2	4	4	4	4
Cross Strap Octo, mod. 83	4	2	4	4	4	4
LiftSheet XL, mod. 84	4	2	4	4	4	4
LiftStrap XL, mod. 84	4	2	4	4	4	4

Toelichting: 1 = moet worden gebruikt 2 = kan worden gebruikt 3 = kan worden gebruikt, maar let erop dat de geometrie van de tilband is gewijzigd 4 = niet relevant/niet aanbevolen

* Verleng alle bandlussen van het product.

** Met gekruiste beensteunen.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Zweden
+46 (0)920 474700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

