

Περιγραφή προϊόντος

Το Liko HygieneSling έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στην τοποθέτηση και αφαίρεση εσωρούχων κατά την ανύψωση προς/από την τουαλέτα. Αυτές οι καταστάσεις ανύψωσης είναι συχνά δύσκολες για τους φροντιστές. Χάρη στο μεγάλο άνοιγμα γύρω από τους γλουτούς, η διαδικασία τοποθέτησης και αφαίρεσης εσωρούχων μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανύψωσης. Το HygieneSling εφαρμόζεται εύκολα, ακόμα και αν ο ασθενής έχει τοποθετηθεί σφιχτά στο αναπηρικό αμαξίδιο. Τα χέρια του ασθενούς θα πρέπει να βρίσκονται πάντα εκτός του HygieneSling για να διασφαλίζεται η ασφάλεια.

Ο σάκος HygieneSling βολεύει συνήθως ασθενείς με μακριά παντελόνια και ασθενείς που φοράνε φούστες ή κολάν.

Είναι απαραίτητο να υπάρχει καλή σταθερότητα του σώματος για τη σωστή τοποθέτηση του ασθενούς στο HygieneSling. Είναι συχνά αρκετά κατάλληλο για ασθενείς με κάποιου βαθμού σωματική δυσκαμψία. Το Μοντ. 41 είναι εξοπλισμένο με ζώνη. Με τη ζώνη σωστά τοποθετημένη και τα χέρια έξω από τον σάκο, ο ασθενής προστατεύεται από ολίσθηση εκτός του σάκου.

Όλα τα μεγέθη είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρα με πράσινη απόχρωση και ενισχυμένο υποστήριγμα ποδιών με κοτλέ επένδυση.

Για άτομα με υποβαθμισμένη ισορροπία ή σε περίπτωση που ο χρήστης πρέπει να έχει το ένα χέρι εντός του σάκου, συνιστάται η χρήση του Liko HygieneSling with SafetyBelt, Μοντ. 45. Αυτά τα μοντέλα διαθέτουν ζώνη ασφαλείας που συγκρατεί και ανυψώνει τον ασθενή από το επάνω μέρος του σώματος, εάν ο ασθενής κατέβει σε πολύ χαμηλή θέση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανύψωσης.

Εναλλακτική για ασθενείς με χαμηλό μυϊκό τόνο

Για ανυψώσεις από/προς την τουαλέτα σε ασθενείς με αδύναμο μυϊκό τόνο (και ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη του επάνω μέρους του σώματός τους), συνιστάται η χρήση του Liko HygieneVest Μοντ. 55. Το μοντέλο 55 είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο υποστήριγμα κεφαλής.

⚠ Τα χέρια του ασθενούς πρέπει να παραμένουν εκτός του HygieneSling Μοντ. 41 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανύψωσης, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ολίσθησης από τον σάκο.

Κατάλληλοι γερανοί

Το HygieneSling μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους γερανούς οροφής και τους φορητούς γερανούς της Liko. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των γερανών οροφής LikoGuard™, Likorall™ και Multirall™ ή των φορητών γερανών Golvo™, Viking™, Uno™ και Liko™ M220/M230.

Σε αυτό το έγγραφο, το άτομο που ανυψώνεται αναφέρεται ως ασθενής και το άτομο που τον βοηθάει αναφέρεται ως φροντιστής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!





















Η ανύψωση και μεταφορά ενός ασθενούς ενέχει πάντα κάποιον βαθμό κινδύνου. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για τον γερανό και τα εξαρτήματα ανύψωσης ασθενούς πριν από τη χρήση. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως τα περιεχόμενα του εγχειριδίου χρήσης. Ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα ανύψωσης είναι κατάλληλα για τον γερανό που χρησιμοποιείται. Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση. Ως φροντιστές, είστε πάντα υπεύθυνοι για την ασφάλεια του ασθενούς. Θα πρέπει να γνωρίζετε την κατάσταση του ασθενούς και την ικανότητά του να ανταπεξέρχεται στην κατάσταση ανύψωσης. Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή συμβόλων.....	3
Οδηγίες ασφάλειας	4
Φροντίδα και συντήρηση.....	4
Ορισμοί	4
Πώς να συνδέσετε έναν σάκο σε διαφορετικές κρεμάστρες	5
Πώς να συνδέσετε έναν σάκο HygieneSling σε μια κρεμάστρα με 4 άγκιστρα (διπλές κρεμάστρες).....	7
Μεταφορά από το αναπηρικό αμαξίδιο στην τουαλέτα	7
Μεταφορά από την τουαλέτα στο αναπηρικό αμαξίδιο	8
Συμβουλές για δοκιμαστική τοποθέτηση	9
Εναλλακτικοί σάκοι για ανύψωση προς και από την τουαλέτα	10
Εξαρτήματα	10
Επισκόπηση του Liko HygieneSling, Μοντ. 41.....	10
Συνιστώμενοι συνδυασμοί.....	10

Περιγραφή συμβόλων

Τα σύμβολα αυτά εμφανίζονται σε αυτό το έγγραφο ή/και στο προϊόν.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση, σε αυτήν την κατάσταση απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή.
	Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση
	Σήμανση CE
	Νόμιμος κατασκευαστής
	Ημερομηνία κατασκευής
	Αναγνωριστικό προϊόντος
	Σειριακός αριθμός
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
	Απαγορεύεται το σιδέρωμα
	Στέγνωμα σε στεγνωτήριο
	Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο ρούχων
	Πλύσιμο Το σύμβολο εμφανίζεται πάντα σε συνδυασμό με συνιστώμενη θερμοκρασία σε °C και °F.
	Χωρίς λατέξ
	Περιοδικός έλεγχος
	Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό
	Στέγνωμα σε σχοινί υπό σκιά
	Κατεύθυνση προς τα επάνω και σύμβολο στο εξωτερικό του εξοπλισμού.
	Σύμβολο στο εξωτερικό του εξοπλισμού.
	Γραμμωτός κώδικας μήτρας δεδομένων GS1 που μπορεί να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες. (01) Διεθνής κωδικός μονάδων εμπορίας (11) Ημερομηνία παραγωγής (21) Σειριακός αριθμός:

Οδηγίες ασφάλειας

Πριν από την ανύψωση, λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

- Ένα υπεύθυνο άτομο στο ίδρυμα που εργάζεστε θα αποφασίσει, εξετάζοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά, εάν απαιτείται ένας ή περισσότεροι φροντιστές.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος που έχει επιλεγεί καλύπτει τις ανάγκες του ασθενούς όσον αφορά το μοντέλο, το μέγεθος, το ύφασμα και τον σχεδιασμό.
- Το συνολικό μέγιστο φορτίο για ένα σύστημα ανύψωσης καθορίζεται πάντα από το προϊόν στο σύστημα που έχει το μικρότερο καθορισμένο μέγιστο φορτίο.
- Χρησιμοποιείτε ξεχωριστό σάκο για κάθε ασθενή, για λόγους ασφάλειας και υγιεινής.
- Σχεδιάστε τον τρόπο ανύψωσης, έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν ασφαλέστερα και ομαλά.
- Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα ανύψωσης αιωρείται κάθετα και μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα.
- Παρόλο που οι κρεμάστρες της Liko διαθέτουν μάνταλα, θα πρέπει να υπάρχει η δέουσα προσοχή. Πριν από την ανύψωση του ασθενούς από την επιφάνεια όπου βρίσκεται, αλλά μετά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες έχουν συνδεθεί κατάλληλα στα άγκιστρα της κρεμάστρας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής κάθεται με ασφάλεια μέσα στον σάκο πριν τον μεταφέρετε σε άλλη τοποθεσία.
- Ποτέ μην ανυψώνετε τον ασθενή από την επιφάνεια που βρίσκεται σε μεγαλύτερο ύψος από αυτό που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανύψωσης και μεταφοράς.
- Ποτέ μην αφήνετε τον ασθενή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της ανύψωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί στο αναπηρικό αμαξίδιο, στο κρεβάτι, στο φορείο κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανύψωσης/μεταφοράς.
- Φροντίστε να εργάζεστε πάντα εργονομικά. Αξιοποιήστε την ικανότητα ενεργής συμμετοχής του ασθενούς στις λειτουργίες.
- Όταν ο σάκος δεν χρησιμοποιείται, μην τον αφήνετε εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως.
- Συνιστάται η αφαίρεση του σάκου μετά τη μεταφορά.

 **Η λανθασμένη τοποθέτηση του σάκου στην κρεμάστρα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στον ασθενή.**

 **Η μη αυτόματη αλλαγή θέσης του ασθενούς στο κρεβάτι μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στον φροντιστή.**

 Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ www.hillrom.com/patents

Είναι δυνατό να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Βλ. παραπάνω διεύθυνση Internet.

Οι εταιρείες της Hill-Rom είναι οι ιδιοκτήτες των ευρωπαϊκών, αμερικανικών, και άλλων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που εκκρεμούν.

Αλλαγές προϊόντων

Τα προϊόντα της Liko αναπτύσσονται συνεχώς και για τον λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών σε αυτά χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom της περιοχής σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τις αναβαθμίσεις των προϊόντων.

Design and Quality by Liko in Sweden

Η Liko διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 και κατά το αντίστοιχο πρότυπο για τη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO 13485.

Η Liko διαθέτει, επίσης, πιστοποίηση κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001.

Ειδοποίηση προς χρήστες ή/και ασθενείς στην ΕΕ

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με αυτήν τη συσκευή θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Φροντίδα και συντήρηση

Ελέγχετε τον σάκο πριν από κάθε χρήση. Ελέγχετε τα παρακάτω σημεία για φθορά και ζημιά:

- Ύφασμα
- Ιμάντες
- Ραφές
- Θηλιές ανάρτησης
- Κούμπωμα

⚠ Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ανύψωσης που έχουν υποστεί βλάβη.

Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.

Οδηγίες πλυσίματος: Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος του σάκου και στο εσωκλειόμενο παράρτημα "Φροντίδα και συντήρηση των σάκων της Liko".

Περιοδικός έλεγχος

Το προϊόν θα πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες. Εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ή πλένονται σε μεγαλύτερη συχνότητα από την κανονική, ενδέχεται να απαιτούνται συχνότεροι έλεγχοι. Βλ. το πρωτόκολλο της Liko "Περιοδικός έλεγχος Υφασμάτινα προϊόντα Liko". Για πρωτόκολλα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom στην περιοχή σας.

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 1-5 έτη με κανονική χρήση. Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής εξαρτάται από το ύφασμα, τη συχνότητα χρήσης, τη διαδικασία πλυσίματος και το βάρος των ασθενών που μεταφέρονται.

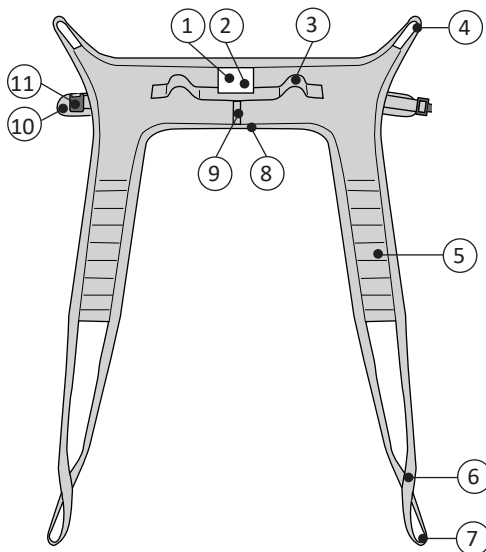
Οδηγίες ανακύκλωσης

Ολόκληρο το προϊόν συμπεριλαμβανομένων ενισχύσεων, υλικού επένδυσης, κ.λπ. θα πρέπει να ταξινομηθεί ως καύσιμα απόβλητα.

Η Hill-Rom αξιολογεί και παρέχει καθοδήγηση στους χρήστες των προϊόντων της σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την ασφαλή απόρριψη των συσκευών της ώστε να βοηθήσει με την αποτροπή τραυματισμών όπως (αναφέρονται ενδεικτικά): εγκοπές, διατρήσεις του δέρματος, γδαρσίματα αλλά και σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος που απαιτούνται μετά τη χρήση και πριν από την απόρριψή του. Οι πελάτες θα πρέπει να τηρούν το σύνολο των ομοσπονδιακών, πολιτειακών, περιφερειακών ή/και τοπικών νομοθεσιών και κανονισμών όσον αφορά την ασφαλή απόρριψη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξαρτημάτων.

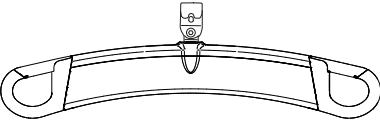
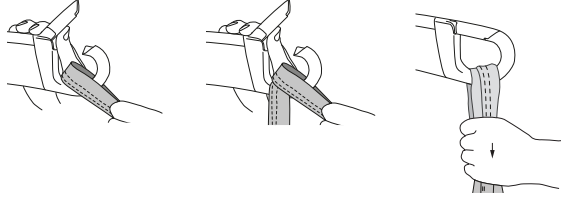
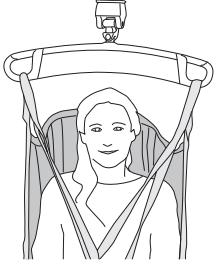
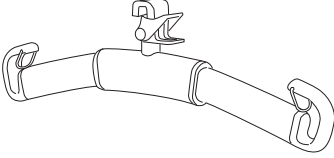
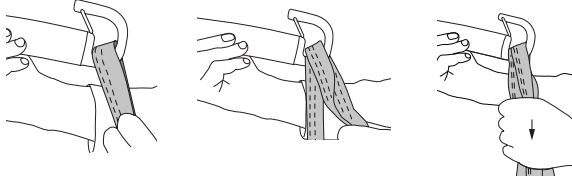

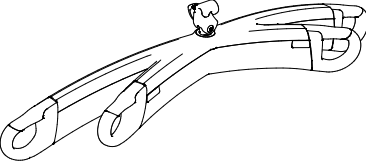
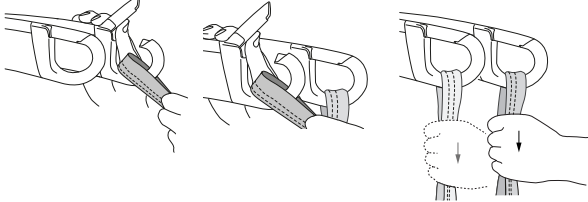
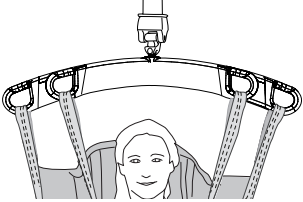
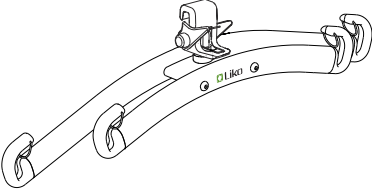
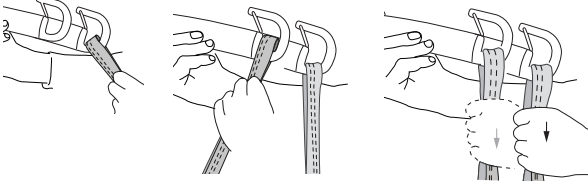
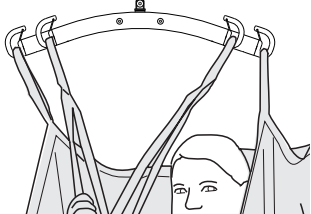
Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τη Hill-Rom για οδηγίες σχετικά με πρωτόκολλα ασφαλούς απόρριψης.

Ορισμοί




1. Ετικέτα προϊόντος
2. Σειριακός αριθμός
3. Λαβή
4. Επάνω θηλιά ιμάντα
5. Υποστήριγμα ποδιού
6. Θέση βράχυνσης
7. Έξω θηλιά υποστηρίγματος ποδιού
8. Κάτω άκρο
9. Ένδειξη μεγέθους
10. Ζώνη
11. Κούμπωμα (Δοκιμασμένο για αντοχή έως 200 κιλά από τον προμηθευτή του κουμπώματος)


Πως να συνδέσετε έναν σάκο σε διαφορετικές κρεμάστρες

Κρεμάστρα	Θηλιές σάκου σε άγκιστρα κρεμάστρας	Σωστό
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		

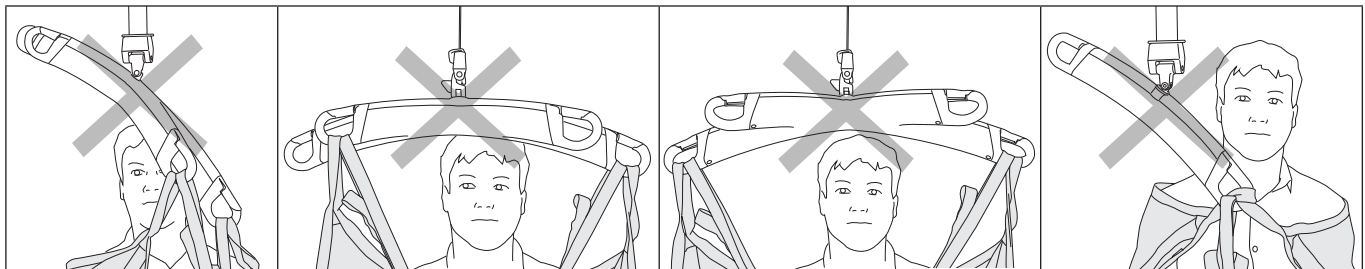Λάθος!




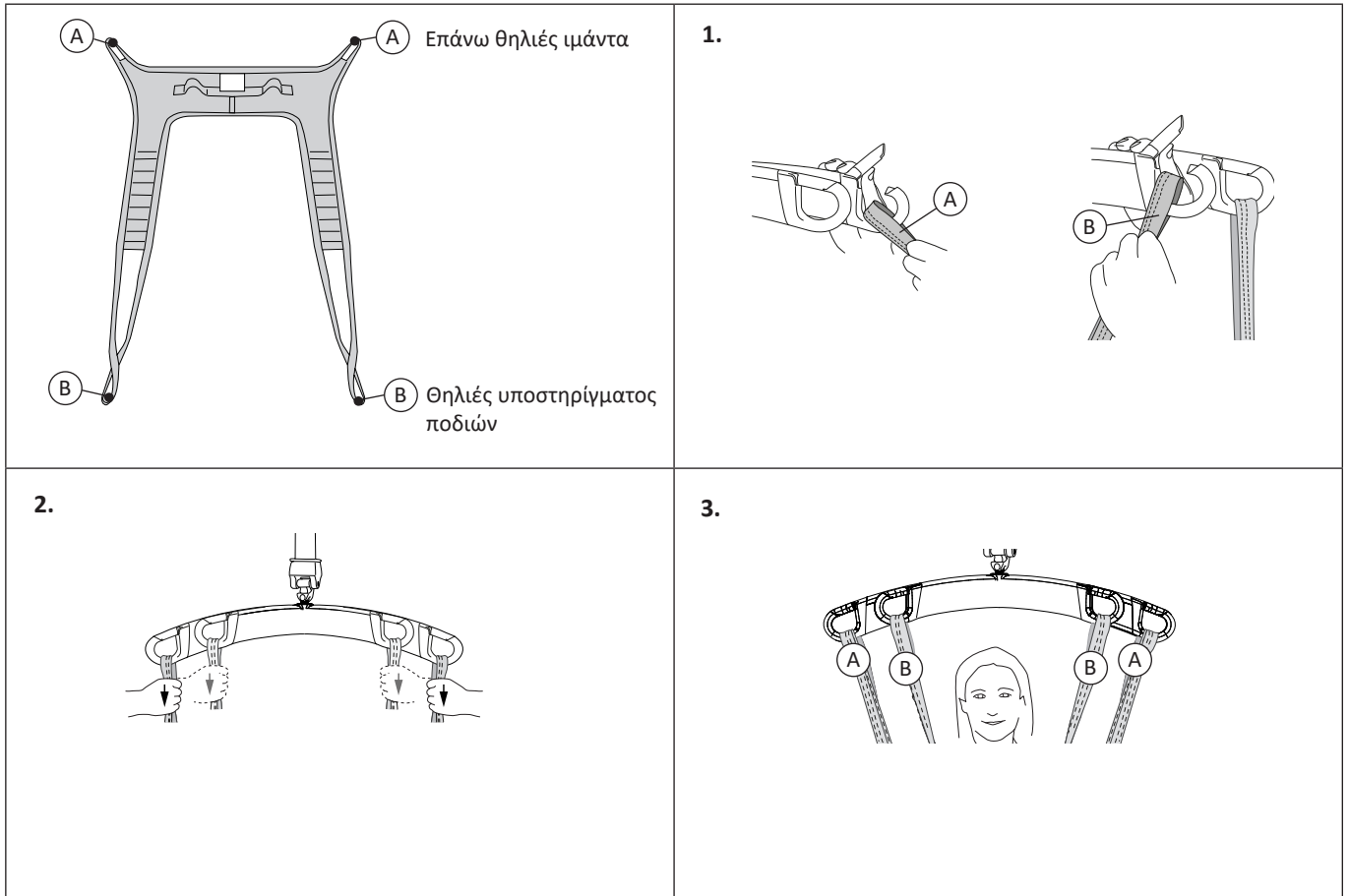Πως να συνδέσετε ένα σάκο HygieneSling σε μια κρεμάστρα με 4 άγκιστρα (διπλές κρεμάστρες)



Ανύψωση από το αναπηρικό αμαξίδιο στην τουαλέτα

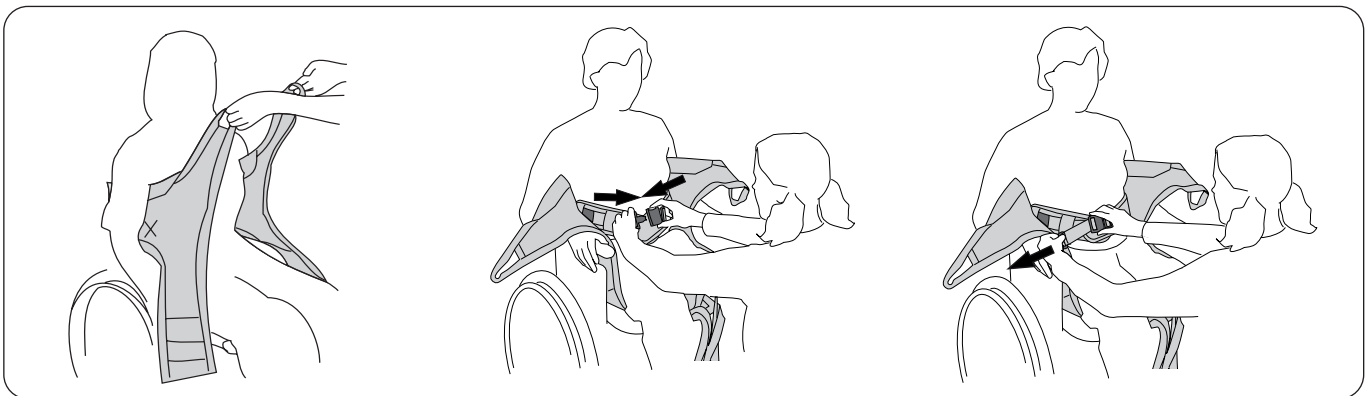Προετοιμαστείτε για την αφαίρεση των εσωρούχων, π.χ. ξεκουμπώνοντας κουμπιά και χαλαρώνοντας κορδόνια.




Τοποθετήστε το HygieneSling με την ετικέτα προϊόντος στο κέντρο της πλάτης του ασθενούς. Το επάνω άκρο με επένδυση θα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από τις μασχάλες.

⚠ Τα χέρια έξω!

Δέστε τη ζώνη.


Ρυθμίστε τη ζώνη έτσι ώστε να εφαρμόζει γύρω από το επάνω μέρος του σώματος του ασθενούς.

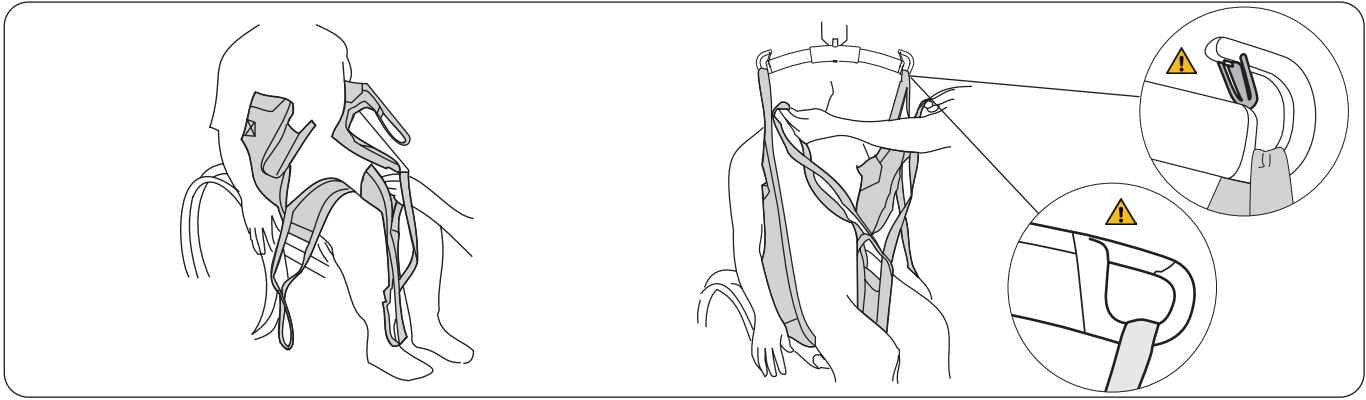⚠ Μην σφίγγετε και άλλο τη ζώνη όταν ανυψωθεί ο ασθενής, καθώς μια τέτοια ενέργεια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η ζώνη να σφίξει πολύ κατά το χαμήλωμα.



Τοποθετήστε τα υποστηρίγματα ποδιών κάτω από τα πόδια του ασθενούς. Διασταυρώστε τα υποστηρίγματα ποδιών περνώντας τη μία θηλιά του υποστηρίγματος ποδιού μέσα από την άλλη.

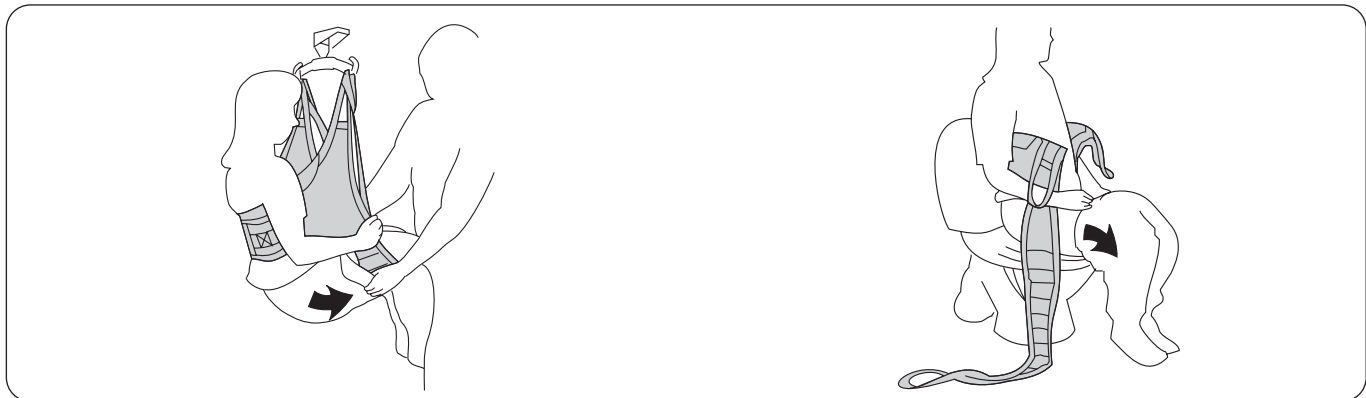Συνδέστε πρώτα τις επάνω θηλιές μάντα και έπειτα τις θηλιές των υποστηριγμάτων ποδιών στην κρεμάστρα. Βλ. σελίδες 6-7 για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση των θηλιών σάκου σε διαφορετικές κρεμάστρες.




Ανυψώστε τον ασθενή. Κατεβάστε το εσώρουχο όσο περισσότερο γίνεται.

Χαμηλώστε τον ασθενή στην τουαλέτα. Διπλώστε στην άκρη τα υποστηρίγματα ποδιών και κατεβάστε και άλλο το εσώρουχο για καλύτερη προσβασιμότητα.

Επιστροφή από την τουαλέτα στο αναπηρικό αμαξίδιο

Ακολουθούν δύο περιγραφές σχετικά με το πως να τοποθετηθούν ξανά τα ρούχα μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα. Η επιλογή εξαρτάται από τα ρούχα και τη φυσική κατάσταση του ασθενούς.

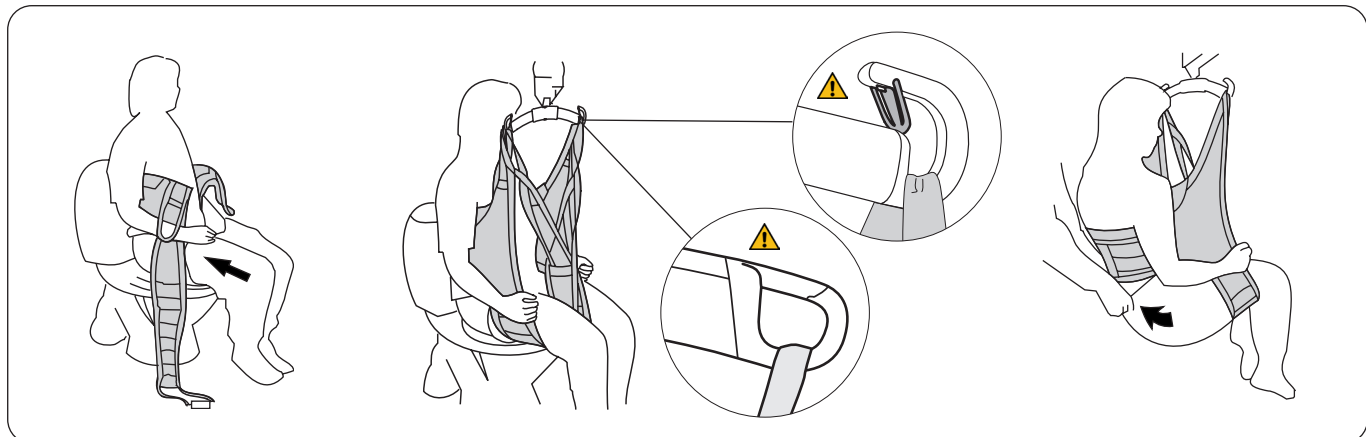Εναλλακτική 1: Υποστηρίγματα ποδιών εκτός εσωρούχων. Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για ανελαστικά εσώρουχα.



Ανεβάστε το εσώρουχο όσο περισσότερο γίνεται.


Τοποθετήστε τα υποστηρίγματα ποδιών κάτω από τα πόδια αλλά έξω από το εσώρουχο.

⚠ Τα χέρια έξω!

Συνδέστε πρώτα τις επάνω θηλιές μάντα στην κρεμάστρα και έπειτα τις θηλιές των υποστηριγμάτων ποδιών. Βλ. σελίδες 6-7 για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση των θηλιών σάκου σε διαφορετικές κρεμάστρες. Ανυψώστε τον ασθενή.

Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε ένα προστατευτικό ακράτειας στο εσωτερικό του εσωρούχου πριν το ανεβάσετε στη θέση του επάνω από τους γλουτούς. Πραγματοποιήστε τη μεταφορά και χαμηλώστε τον ασθενή στο αναπηρικό αμαξίδιο.

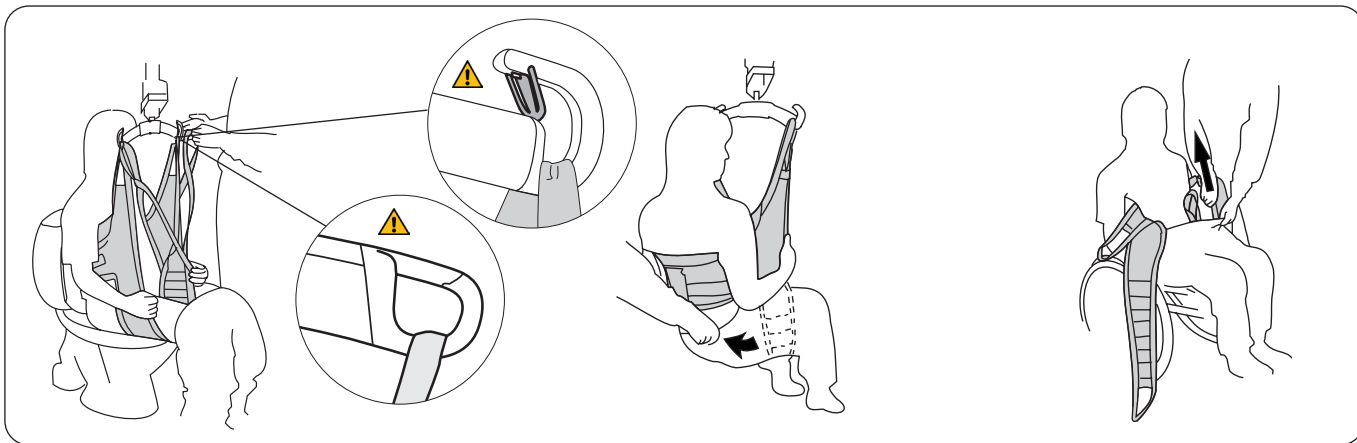Εναλλακτική 2: Πρώτα υποστηρίγματα ποδιών – εσώρουχο εξωτερικά. Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για ελαστικά εσώρουχα.



Τοποθετήστε το HygieneSling στον ασθενή σύμφωνα με τις οδηγίες στη σελίδα 5. Συνδέστε πρώτα τις επάνω θηλιές μάντα στην κρεμάστρα και έπειτα τις θηλιές των υποστηρίγμάτων ποδιών. Βλ. σελίδες 6-7 για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση των θηλιών σάκου σε διαφορετικές κρεμάστρες. Αнуψώστε τον ασθενή.

Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε μια πάνα ακράτειας μέσα στα σταυρωτά υποστηρίγματα ποδιών.

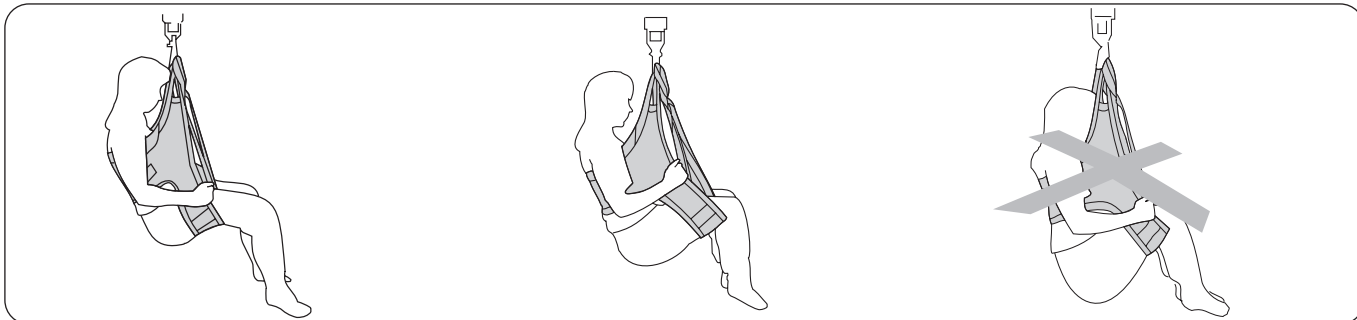
Ανεβάστε το εσώρουχο πάνω από τους γλουτούς και τον σάκο αφού ο ασθενής έχει ανυψωθεί και κάθεται ακόμη στο σάκο HygieneSling. Χαμηλώστε τον ασθενή στο αναπηρικό αμαξίδιο.

Βγάλτε προσεκτικά τα υποστηρίγματα ποδιών από το εσώρουχο και απομακρύνετε τον σάκο HygieneSling.

Συμβουλές για δοκιμαστική τοποθέτηση

⚠ Η καθιστή θέση εξαρτάται από το σημείο τοποθέτησης των υποστηρίγμάτων ποδιών κάτω από τα πόδια του ασθενούς. Σε άτομα με αδύναμο μυϊκό τόνο, τα υποστηρίγματα ποδιών θα πρέπει να τοποθετούνται ψηλά προς τη βουβωνική χώρα, έτσι ώστε ο/η ασθενής να μην κάθεται πολύ χαμηλά στον σάκο.

Οι ασθενείς με αδύναμο μυϊκό τόνο κάθονται συνήθως καλύτερα σε HygieneSling μικρότερου μεγέθους. Σε χρήστες με δυνατό μυϊκό τόνο, ισχύει το αντίθετο. Κάθονται καλύτερα σε μεγαλύτερο HygieneSling, υπό την προϋπόθεση ότι το υποστήριγμα πλάτης είναι αρκετά ψηλά και τα υποστηρίγματα ποδιών είναι αρκετά κοντά στο λύγισμα των γονάτων.



Τα υποστηρίγματα ποδιών θα πρέπει να είναι τοποθετημένα στις περισσότερες περιπτώσεις όσο το δυνατόν πιο κοντά στη βουβωνική χώρα, ιδίως σε ασθενείς με πολύ αδύναμο μυϊκό τόνο. Σε αυτήν την περίπτωση, το μικρότερο μέγεθος μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή.

Τα υποστηρίγματα ποδιών μπορούν να τοποθετηθούν στο λύγισμα των γονάτων για όσους έχουν δυνατό μυϊκό τόνο. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η τοποθέτηση και η αφαίρεση ρούχων, και μειώνεται η σπαστικότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, το μεγαλύτερο μέγεθος μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή.

Μια υπερβολικά χαμηλή και όχι άνετη θέση καθίσματος οφείλεται είτε στο γεγονός ότι τα υποστηρίγματα ποδιών είναι πολύ κοντά στο λύγισμα των γονάτων είτε στο γεγονός ότι ο σάκος είναι υπερβολικά μεγάλος. Δοκιμάστε μικρότερο μέγεθος.

Θέση βράχυνσης

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη η βράχυνση των υποστηρίγμάτων ποδιού για τον ασθενή, προκειμένου να καθίσει καλά μέσα στο σάκο HygieneSling.

Η θέση βράχυνσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά για να ελεγχθεί το σωστό μήκος. Ωστόσο, η παρατεταμένη χρήση της μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις ραφές. Εάν θέλετε να βραχύνετε τα υποστηρίγματα ποδιών για μακροχρόνια χρήση, συνιστούμε να δέσετε έναν κόμπο στη θηλιά υποστηρίγματος ποδιού ώστε να βραχυνθεί περίπου 10 εκατοστά. Έπειτα, η εξωτερική θηλιά υποστηρίγματος ποδιού θα πρέπει να συνδεθεί στην κρεμάστρα.

Εναλλακτικοί σάκοι για ανύψωση προς και από την τουαλέτα

Στη μεγάλη γκάμα σάκων που προσφέρουμε, υπάρχουν πολλά μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις ανύψωσης που σχετίζονται με την τουαλέτα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hillrom.com. Ακολουθούν δείγματα πιθανών εναλλακτικών σάκων:

Liko HygieneSling with SafetyBelt, Μοντ. 45

Liko HygieneVest High Back, Μοντ. 55

Liko MasterVest, Μοντ. 60

Liko MasterVest με μπροστινό κλείσιμο, Μοντ. 64

Εξαρτήματα

Extension Loop, πράσινο, 12 cm

Extension Loop, πράσινο 22 cm

Extension Loop, γκρι, 12 cm

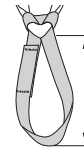
Extension Loop, γκρι, 22 cm

Αρ. προϊόντος 3691102

Αρ. προϊόντος 3691103

Αρ. προϊόντος 3691302

Αρ. προϊόντος 3691303



- 2 = 12 cm

- 3 = 22 cm

Επισκόπηση, Liko™ HygieneSling, Μοντ. 41

Όνομα	Αρ. προϊόντος	Μέγεθος		Βάρος ασθενούς ¹	Μέγιστο φορτίο ²
Liko HygieneSling	3541133	XS	Πολύ μικρό	< 30 κιλά	200 κιλά
Liko HygieneSling	3541134	S	Μικρό	25-50 κιλά	200 κιλά
Liko HygieneSling	3541135	M	Μεσαίο	40-90 κιλά	200 κιλά
Liko HygieneSling	3541136	L	Μεγάλο	80-120 κιλά	200 κιλά
Liko HygieneSling	3541137	XL	Πολύ μεγάλο	> 100 κιλά	300 κιλά

¹ Το ενδεικνυόμενο βάρος ασθενούς αποτελεί μια απλή οδηγία – ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις.

² Για διατήρηση του μέγιστου φορτίου, απαιτείται γερανός/εξαρτήματα που προορίζονται για το ίδιο ή μεγαλύτερο φορτίο.

Ένα μέγεθος που είναι υπερβολικά μεγάλο οδηγεί σε κίνδυνο να γλιστρήσει ο ασθενής, ενώ ένα μέγεθος που είναι υπερβολικά μικρό μπορεί να κόβει στη βουβωνική χώρα και να προκαλεί δυσφορία. Δείτε πρόσθετες πληροφορίες στην ενότητα Συμβουλές για δοκιμαστική τοποθέτηση, σελίδα 9.

Υλικό: Το HygieneSling διατίθεται σε πολυεστέρα.

Συνιστώμενοι συνδυασμοί

Συνιστώμενοι συνδυασμοί του σάκου Liko HygieneSling με κρεμάστρες της Liko:	Mini 220	Κρεμάστρες Sling bar 350 ³	Standard 450	Κρεμάστρες Sling bar 450 ¹	Κρεμάστρες Twin bars 670 ²
HygieneSling Μοντ. 41, XS	1	1	2	2	4
HygieneSling Μοντ. 41, S	1	1	2	1	4
HygieneSling Μοντ. 41, M	1	1	1	1	4
HygieneSling Μοντ. 41, L	1	1	1	1	2
HygieneSling Μοντ. 41, XL	2	1	1	1	2

Επεξήγηση:

1 = Συνιστάται

2 = Μπορεί να λειτουργήσει

3 = Δεν συνιστάται

4 = Ακατάλληλος

¹ Η κρεμάστρα Sling bar 450 σχετίζεται με μια κρεμάστρα Universal SlingBar 450 με αρ. πρ. 3156075, 3156085 και 3156095 καθώς και μια κρεμάστρα SlingGuard 450 με αρ. πρ. 3308020 και 3308520.

² Η κρεμάστρα Twin bar 670 σχετίζεται με την κρεμάστρα Universal TwinBar 670 με αρ. προϊόντος 3156077 και 3156087, καθώς και με την SlingGuard 670 Twin με αρ. προϊόντος 3308040 και 3308540.

³ Η κρεμάστρα Sling bar 350 σχετίζεται με την κρεμάστρα Universal SlingBar 350 με αρ. προϊόντος 3156074, 3156084 και 3156094.

Οι συνδυασμοί των Liko HygieneSling και Cross-bar, Cross-bar 450/670 ή Side bar δεν είναι κατάλληλοι.

Άλλοι συνδυασμοί

Οι συνδυασμοί εξαρτημάτων/προϊόντων διαφορετικών από αυτά που συνιστά η Liko μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια του ασθενούς.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Σουηδία
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom