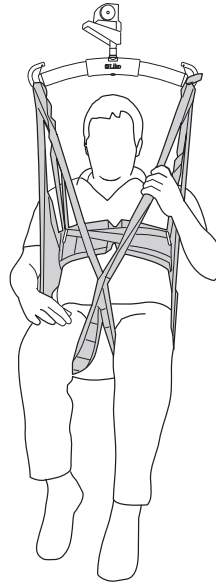


Käyttöohje



Malli 45

Tuotekuvas

Tämä käyttöohje koskee Liko HygieneSling with SafetyBelt -nostokangasta, mutta tekstissä käytetään vain nimitystä Liko HygieneSling -nostokangas.

Liko HygieneSling -nostokangas on suunniteltu helpottamaan vaatteiden pukemista ja riisumista, kun avustettava nostetaan WC-istuimelle ja -istuimelta. Tällaiset nostotilanteet ovat usein raskaita ja vaikeita avustajille. HygieneSling-nostokankaan ansiosta pukeminen ja riisuminen voidaan tehdä varsinaisen noston aikana, sillä nostokankaan istuinosassa on väljä aukko. Kokemus on osoittanut, että HygieneSling-nostokangas soveltuu käytettäväksi myös silloin, kun avustettavalla on päällään pitkät housut tai hame ja sukkahousut.

Liko HygieneSling -nostokangasta on helppo käyttää myös silloin, kun pyörätuolin ympärillä on rajoitetusti tilaa.

Liko HygieneSling -nostokangas on usein sopivin vaihtoehto avustettaville, joilla esiintyy tietynasteista jäykkyyttä.

HygieneSling-nostokangas on valmistettu vihreästä polyesterikankaasta, ja sen jalkatuet on vahvistettu ja pehmustettu vakosamettikankaalla.

Avustettavalla tulisi olla suhteellisen hyvä keskivartalon ja pään stabiileetti, jotta hän voi istua mukavasti ja tukevasti HygieneSling-nostokankaassa. Jos avustettavalla on heikko lihastonus, on suositeltavaa käyttää pienempää HygieneSling-nostokangasta tai HygieneVest-liivin mallia 55.

Jos avustettavalla on taipumus valua alaspäin nostokankaassa, turvavyö jakaa paineen tasaisesti ja antaa lisätukea noston aikana.

HygieneSling-nostokangasta voidaan käyttää Likon katonostimien ja liikutettavien nostimien kanssa. Valittavana ovat LikoGuard™-, Likorall™- ja Multirall™-katonostimet sekä liikuteltavat nostimet Golvo™, Viking™, Uno™ ja Liko™ M220/M230.

Tässä käyttöohjeessa nostettavaa henkilöä kutsutaan avustettavaksi ja häntä auttavaa henkilöä avustajaksi.

TÄRKEÄÄ!





















Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue nostimen ja nostovaruusteiden käyttöohje ennen käyttöä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Tätä välinettä saa käyttää vain koulutettu henkilökunta. Varmista, että nostovaruusteet soveltuvat käytettävään nostimeen. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan turvallisuudesta. Sinun on oltava tietoinen avustettavan edellytyksistä suoritua nostotilanteesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Sisällysluettelo

Symbolien kuvaus.....	3
Turvaohjeet	4
Hoito ja kunnossapito.....	5
Määritelmät	5
Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin	6
HygieneSling-nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuseen nostokaareen (kaksoisnostokaaret)	7
Nostaminen pyörätuolista WC-istuimelle.....	8
Pyörätuoliin paluu WC-istuimelta.....	9
Koesovitusohjeet.....	10
Erilaisia tapoja jalkatukien kiinnittämiseen	10
Lyhennysasento	11
SafetyBelt-turvavyön kuvaus	11
Hihnan pituuden säätäminen avustettavan vyötärömitan mukaan	12
Vaihtoehtoiset nostokankaat nostoihin WC-istuimelle ja -istuimelta.....	12
Yleiskuvaus: Liko™ HygieneSling -nostokangas, malli 45	13
Suosittelut käyttöyhdistelmät.....	13

Symbolien kuvaus

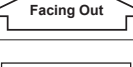Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja.

Symboli	Kuvaus
	Varoitus: tämä tilanne edellyttää erityistä varovaisuutta ja huomiota.
	Lue käyttöohje ennen käyttöä
	CE-merkintä
	Laillinen valmistaja
	Valmistuspäivämäärä
	Tuotetunniste
	Sarjanumero
	Lääkinnällinen laite
	Kemiallinen pesu kielletty
	Silitys kielletty
	Rumpukuivaus
	Rumpukuivaus kielletty
	Pesu Symbolin yhteydessä näkyy aina suositeltu pesulämpötila (°C ja °F).
	Lateksiton
	Määräaikaistarkastus
	Valkaisu kielletty
	Ripusta kuivumaan varjoon
	Suunta ylöspäin; välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli
	Välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli
 <small>(01) 0100887761997127 (11) VVKKPP (21) 012345678910</small>	GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja: (01) kansainvälinen tuotenumero (11) tuotantopäivä (21) sarjanumero

Turvaohjeet

Huomioi seuraavat asiat ennen nostamista:

- Hoitoyksikön vastuuhenkilön tulee arvioida avustajien tarvittava lukumäärä tapauskohtaisesti.
- Varmista, että nostokangas sopii malliltaan, kooltaan, materiaaliltaan ja tyypiltään avustettavan tarpeisiin.
- Nostojärjestelmän enimmäiskuormituksen määrittää aina se järjestelmän tuote, jonka määritetty enimmäiskuormitus on pienin.
- Turvallisuus- ja hygieniasyistä nostokankaat on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.
- Suunnittele nostotilanne ennen nostamista, jotta kaikki tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja joustavasti.
- Tarkista, että nostovarusteet riippuvat pystysuorassa ja pääsevät liikkumaan esteettömästi.
- Vaikka Likon nostokaarissa on salvat, on erityistä varovaisuutta kuitenkin noudatettava. Ennen avustettavan nostamista alustalta ja hihnojen kiristämistä on tärkeää varmistaa, että hihnat on kiinnitetty nostokaaren koukkuihin oikein.
- Varmista, että avustettava istuu tukevasti nostokankaassa, ennen kuin siirto toiseen paikkaan aloitetaan.
- Älä koskaan nosta avustettavaa korkeammalle kuin siirron toteuttamiseksi on välttämätöntä.
- Älä käytä kädensijoja nostamiseen! Liian suuri kädensijoihin kohdistuva voima voi aiheuttaa nostokankaan repeytymisen.
- Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa nostotilanteessa.
- Varmista, että pyörätuolin, sängyn, paarien jne. pyörät ovat lukittuina nosto-/siirtohetkellä.
- Käytä aina ergonomisia työmenetelmiä. Hyödynnä avustettavan kykyä osallistua aktiivisesti toimenpiteisiin.
- Kun nostokangasta ei käytetä, älä jätä sitä suoraan auringonvaloon.
- Nostokankaan poistaminen siirron jälkeen on suositeltavaa.

 **Nostokankaan puutteellinen kiinnitys nostokaareen voi aiheuttaa avustettavalle vakavia vammoja.**

 **Avustettavan käsivarainen kääntäminen sängyssä voi aiheuttaa avustajalle vammoja.**

 Lääkinnällinen luokan I laite

PATENTTI www.hillrom.com/patents

Saattaa kuulua yhden tai useamman patentin piiriin. Katso edellä mainittu verkko-osoite.

Hill-Rom-yritykset ovat eurooppalaisten, yhdysvaltalaisien ja muiden patenttien ja odottavien patenttihakemusten omistajia.

Tuotemuutokset

Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakoilmoitusta. Ohjeita ja lisätietoja tuotepäivityksistä saa Hill-Romin edustajalta.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko on laatusertifioitu standardin ISO 9001 ja vastaavan lääkintäteknikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO 13485 mukaisesti. Liko on myös ympäristösertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.

Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan asianmukaiselle viranomaiselle.

Hoito ja kunnossapito

Tarkista nostokangas ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat osat kulumisen ja vaurioiden varalta:

- Kangas
- Hihnat
- Saumat
- Lenkit

⚠ Älä käytä vahingoittuneita nostovarusiteita.

Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Pesuohteet: Katso nostokankaan tuotelappu ja mukana oleva liite ”Liko-nostokankaiden hoito ja kunnossapito”.

Määräaikaistarkastus

Tuote on tarkastettava vähintään kuuden kuukauden välein. Jos tuotetta käytetään tai pestään normaalia enemmän, tarkastus on tehtävä tätäkin useammin. Lisäohjeita saat Hill-Romin edustajalta.

Odotettu käyttöikä

Tuotteen odotettu käyttöikä on normaalikäytössä 1–5 vuotta. Käyttöikään vaikuttavat kangas, käyttötiheys, pesumenetelmä ja kuormien paino.

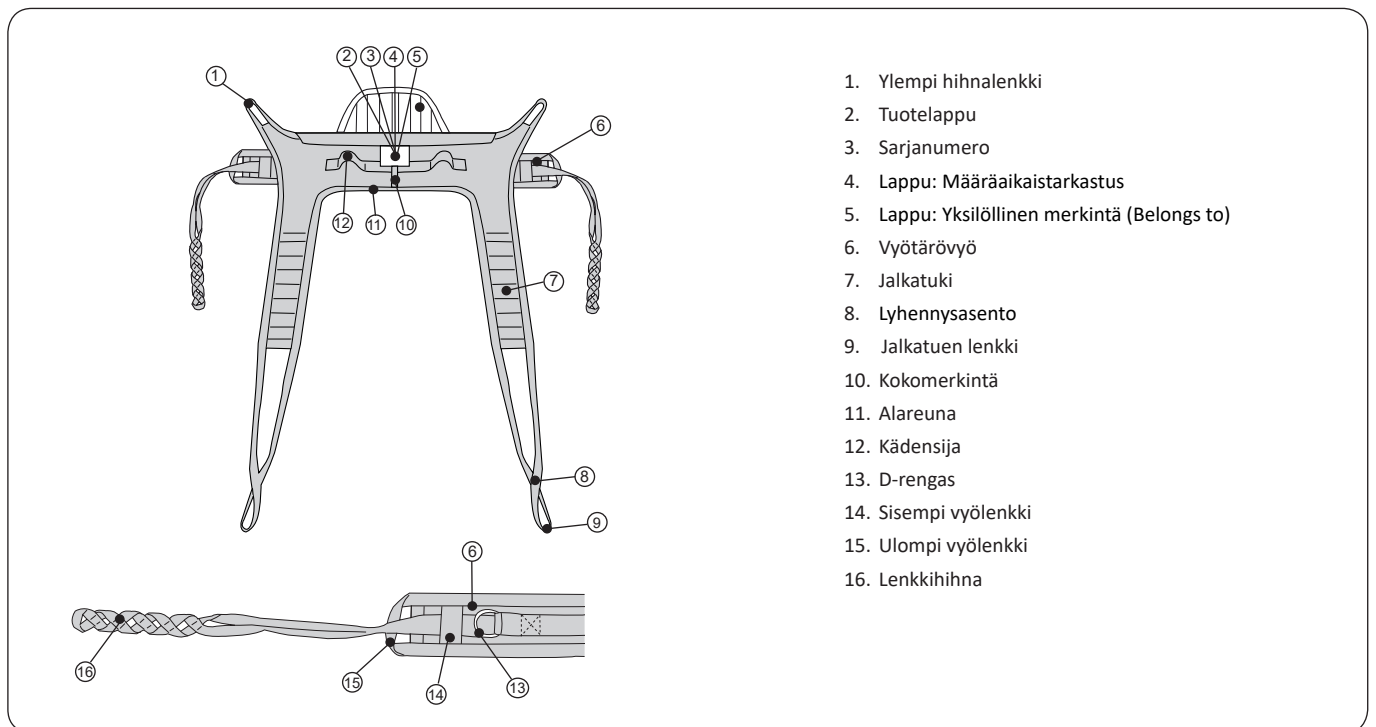
Kierrätysohjeet

Koko nostokangas, mukaan lukien säleet, pehmusteet jne., on lajiteltava poltettavaan jätteisiin.

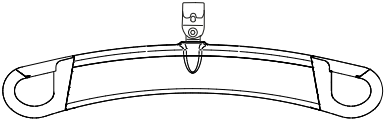
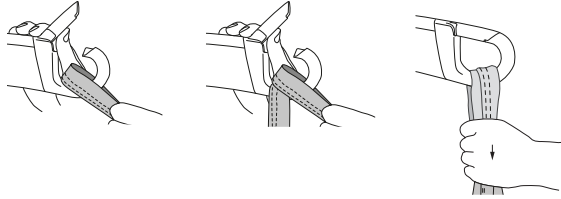
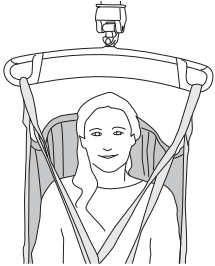
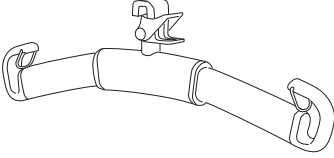
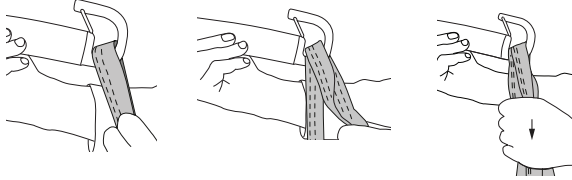

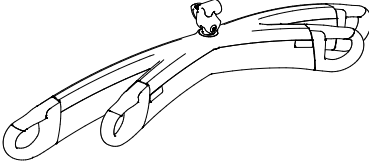
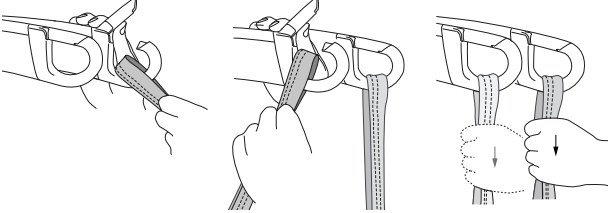
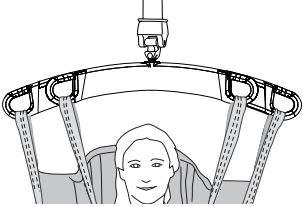
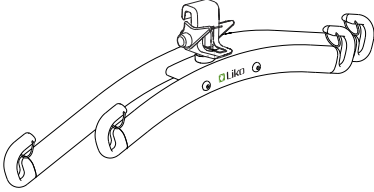
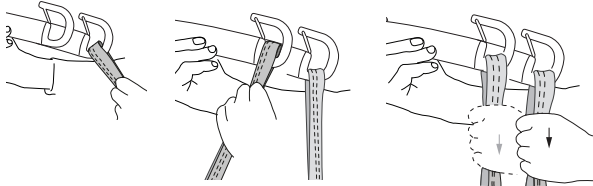
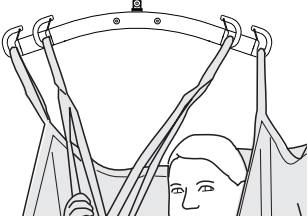
Hill-Rom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä auttaakseen ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinällisten laitteiden puhdistamisessa ja desinfioimisessa käytön jälkeen ja ennen hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, alueellisia ja paikallisia säännöksiä.

Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteyttä Hill-Romin tekniseen tukeen ja pyydettyä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.


Määritelmät




Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin

Nostokaari	Nostokankaan lenkit nostokaaren koukkuihin	Oikein
 <p data-bbox="193 499 357 533">SlingGuard™</p>		
 <p data-bbox="213 792 336 826">Universal</p>		
 <p data-bbox="161 1077 392 1111">SlingGuard™ Twin</p>		
 <p data-bbox="177 1373 368 1406">Universal Twin</p>		

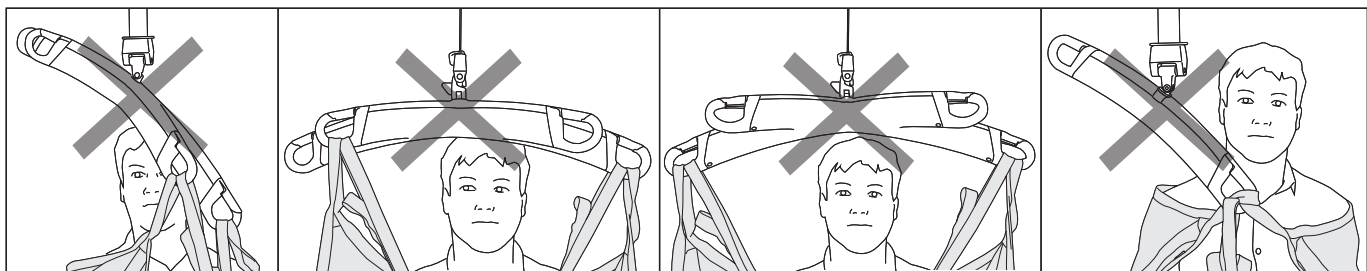Väärin!




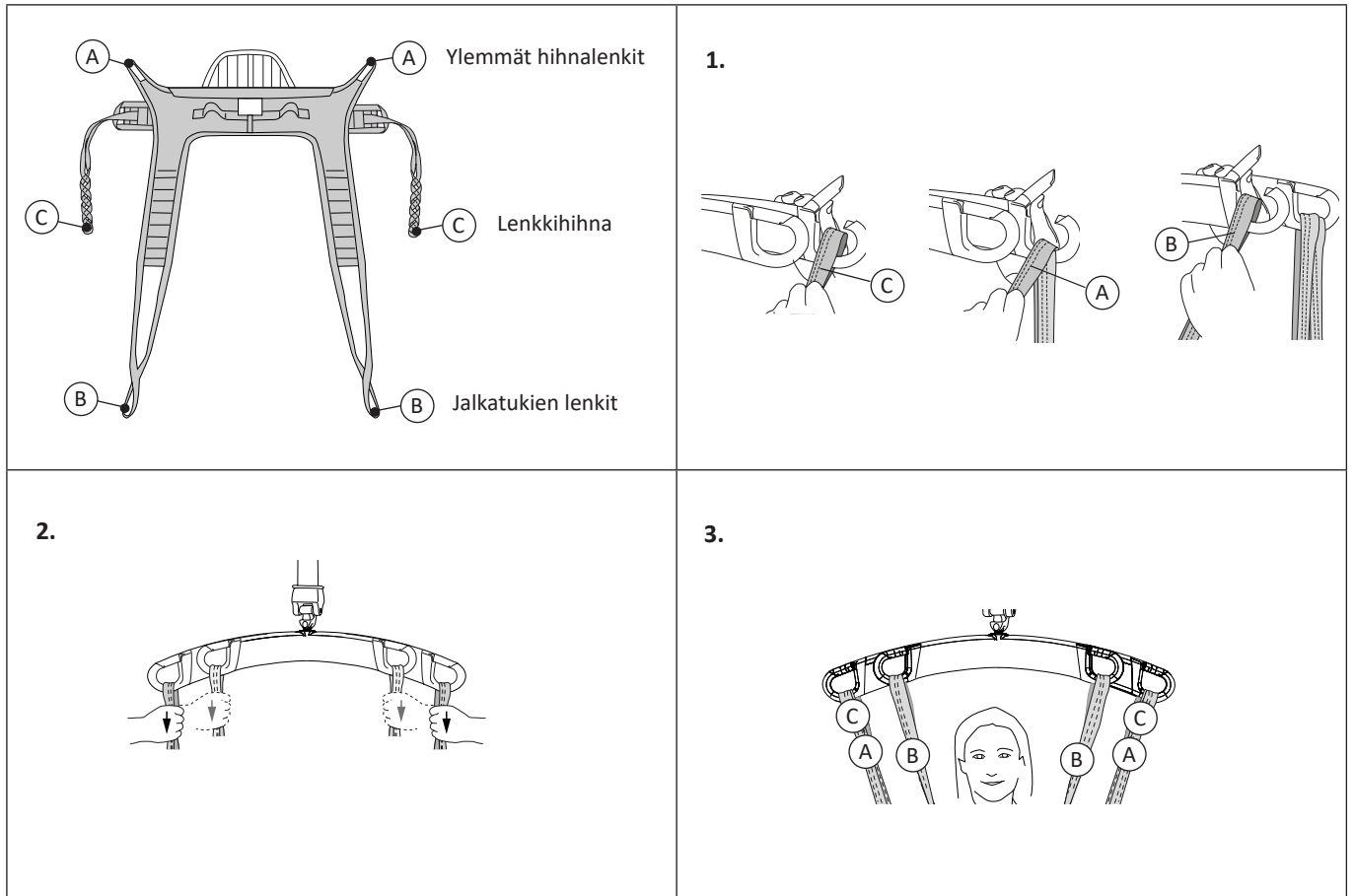HygieneSling-nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuiseen nostokaareen (kaksoisnostokaaret)



Nostaminen pyörätuolista WC-istuimelle

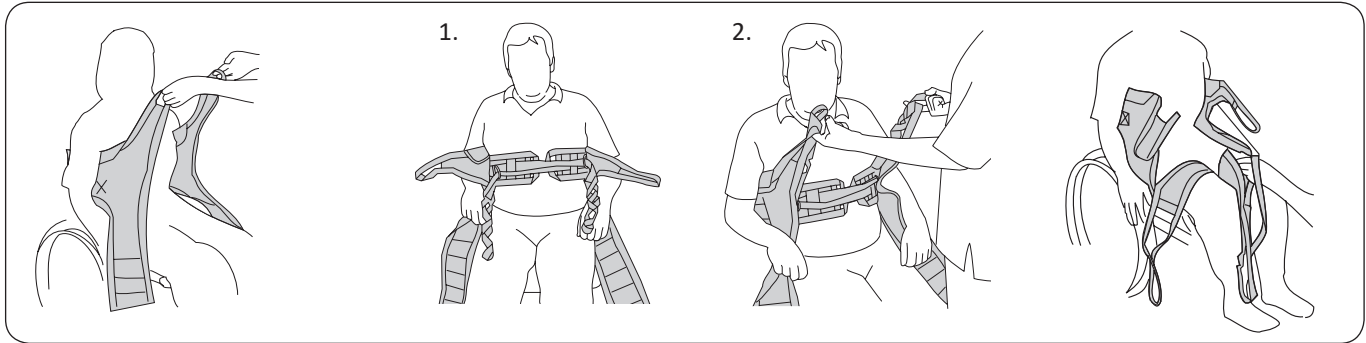
Tutustu ensin turvavyön toimintaan, käyttöön ja säätöihin. Tee alkuvalmistelut avustettavan riisumista varten avaamalla napit ja vetoketjut.



Aseta HygieneSling-nostokangas suunnilleen puoliväliin avustettavan selän taakse siten, että tuotelappu osoittaa ulospäin. Pehmustetun yläreunan tulisi asettua suoraan kainaloiden alle.

1. Vedä oikeanpuoleinen hihnalenkki vasemmanpuoleisen D-renkaan läpi. Vedä vasemmanpuoleinen hihnalenkki oikeanpuoleisen D-renkaan läpi.
2. Testaa, mitkä lenkit ovat sopivimmat, vetämällä HygieneSling-nostokankaan ylemmää hihnalenkkiä ja yhtä lenkkihinnan lenkkiä samanaikaisesti yllä olevan kuvan mukaisesti.

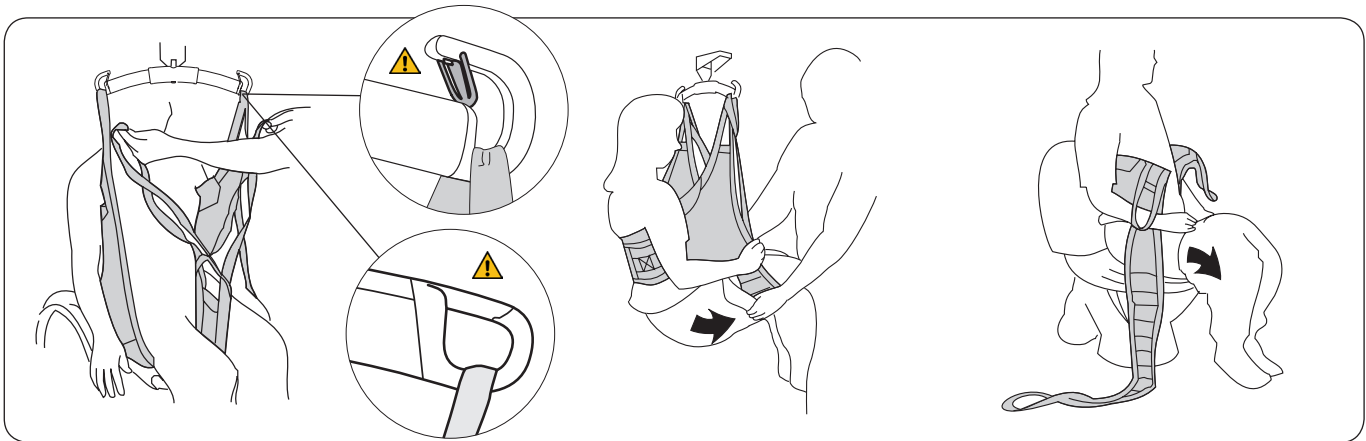Aseta jalkatuet avustettavan reisien alle. Aseta jalkatuet ristikkäin pujottamalla toinen jalkatuen lenkki toisen lävitse.



Siirrä nostokaarta eteenpäin ja kiinnitä ensin lenkkihihnat. Kiinnitä sitten ylemmät hihnalenkit ja lopuksi jalkatukien lenkit. Katso sivuilta 6–7 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin.


Nosta avustettava. Vedä avustettavan housut mahdollisimman alas.

Laske avustettava WC-istuimelle. Taita jalkatuet sivuun ja vedä housuja vielä alemmas.

Pyörätuoliin paluu WC-istuimelta

Seuraavassa esitellään kaksi tapaa avustettavan pukemiseen WC-käynnin jälkeen. Sopiva toimintatapa valitaan avustettavan kunnan ja vaatetuksen mukaan.

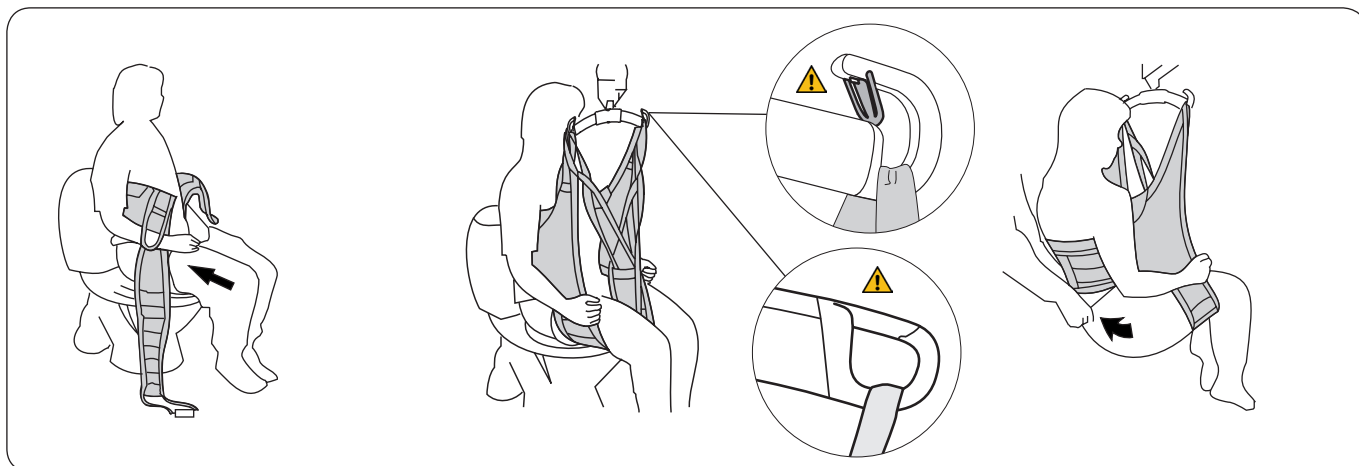Toimintatapa 1: Jalkatuet housujen ulkopuolella. Soveltuu silloin, kun housut eivät ole joustavaa kangasta.




Vedä housut mahdollisimman pitkälle ylös nivusia kohti.

Aseta jalkatuet jalkojen alle mutta housujen ulkopuolelle. Kiinnitä kaikki lenkit. Katso sivuilta 6–7 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettava.

Jos käytetään inkontinenssisuojaa, aseta se paikalleen ennen housujen vetämistä kokonaan ylös. Siirrä ja laske avustettava tuoliin.

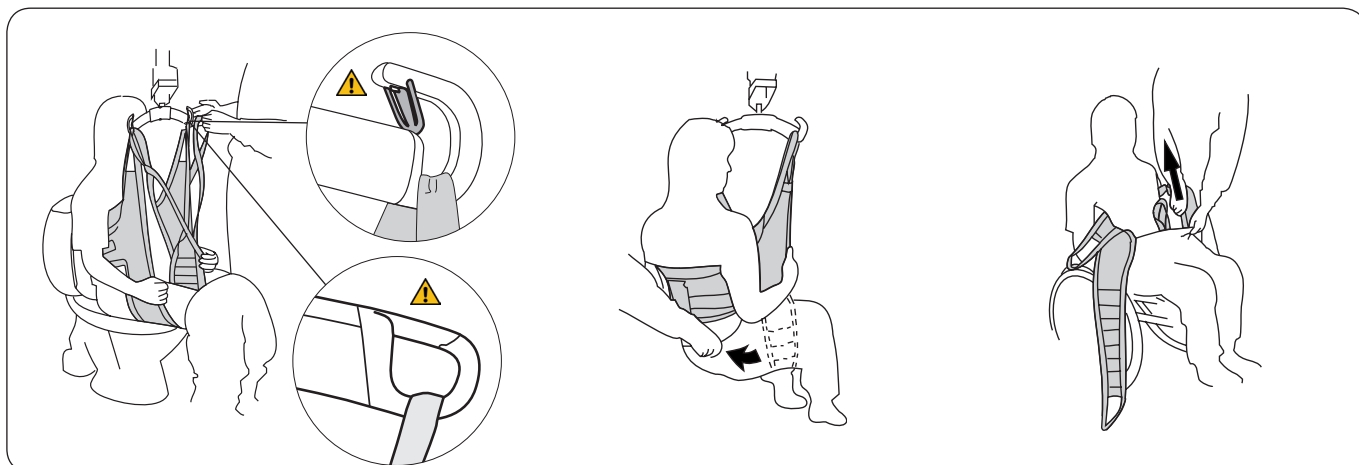Toimintatapa 2: Jalkatuet ensin – housut ulkopuolella. Soveltuu silloin, kun housut ovat joustavaa kangasta.



Aseta HygieneSling-nostokangas sivun 8 ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä kaikki lenkit. Katso sivuilta 6–7 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettava. Jos käytetään inkontinenssisuojaa, aseta se ristikkäin menevien jalkatukien sisäpuolelle.

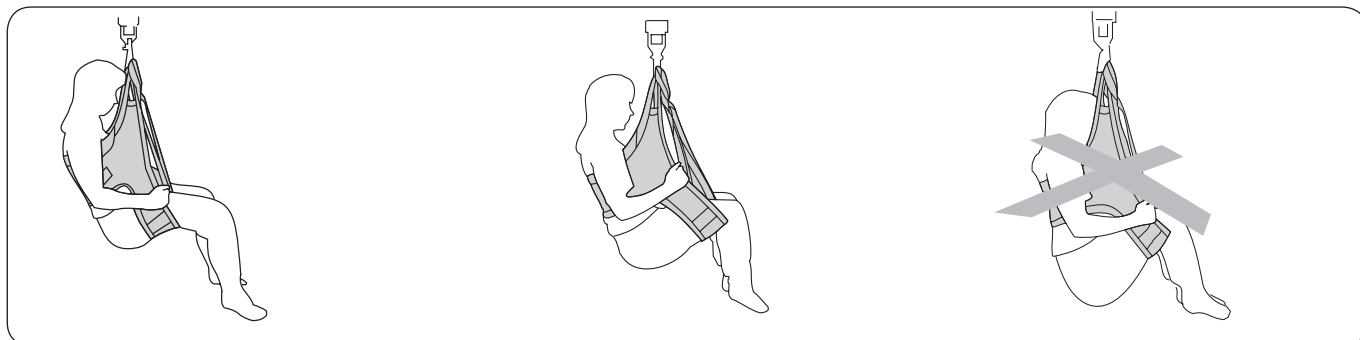
Vedä housut istuinosan ja nostokankaan yli avustettavan istuessa vielä HygieneSling-nostokankaassa. Laske avustettava tuoliin.

Irrota nostokangas nostokaaresta. Vedä jalkatuet varovasti pois housujen sisältä ja poista HygieneSling-nostokangas.

Koesovitusohjeet

⚠ Istuma-asento riippuu siitä, mihin kohtaan jalkatuet asetetaan avustettavan jalkojen alle. Jos avustettavan lihastonus on heikko, jalkatuet on sijoitettava ylemmäs nivusia kohti, jotta avustettava ei istu liian alhaalla nostokankaassa.

Jos avustettavan lihastonus on heikko, hän saa yleensä paremman asennon pienemmässä HygieneSling-nostokankaassa. Jos avustettavan lihastonus on hyvä, tilanne on päinvastainen. Tällöin avustettava saa paremman asennon suuremmissa HygieneSling-nostokankaassa edellyttäen, että selkätuki asettuu riittävän korkealle ja että jalkatuet ovat riittävän lähellä polvitaiteita.



Useimmissa tapauksissa, varsinkin jos avustettavalla on heikko lihastonus, jalkatuet on asetettava mahdollisimman lähelle nivusia.

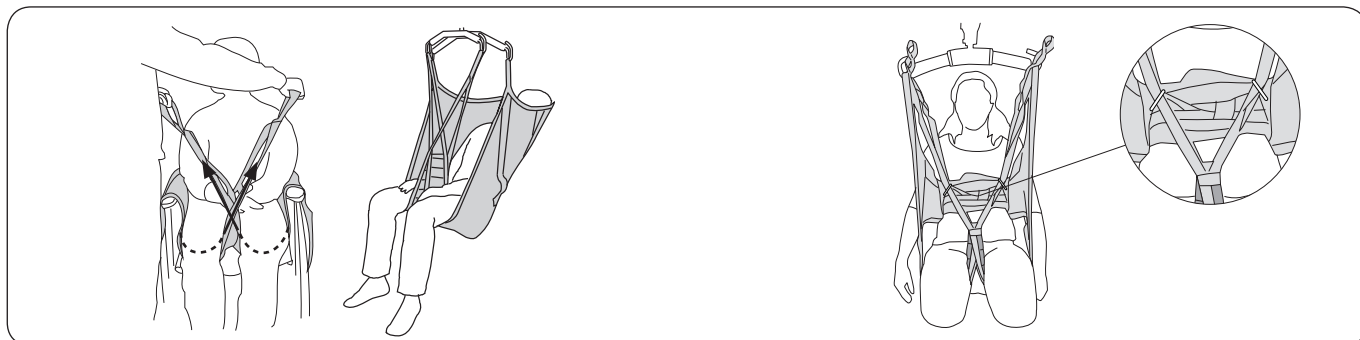
Jos avustettavan lihastonus on hyvä, jalkatuet voidaan asettaa lähemmäksi polvia. Tämä helpottaa pukemista ja riisumista sekä auttaa vähentämään lihasjäykkyyttä.

Syvälle vajoava ja epämukava istuma-asento johtuu liian lähelle polvia asetetuista jalkatuista ja/tai liian suuresta nostokankaasta. Kokeile pienempää kokoa.

Erilaisia tapoja jalkatukien kiinnittämiseen

Ennen kiinnitystavan valintaa on aina arvioitava mahdolliset riskit yksilökohtaisesti.


Seuraava ohje on yleisluonteinen, sillä samat periaatteet koskevat useita nostokangasmalleja.



Jalkatuet ristikkäin.

Yleisin tapa asetella nostokangas. Yksi jalkatuen lenkki pujotetaan toisen läpi ennen lenkkien kiinnittämistä nostokaareen.

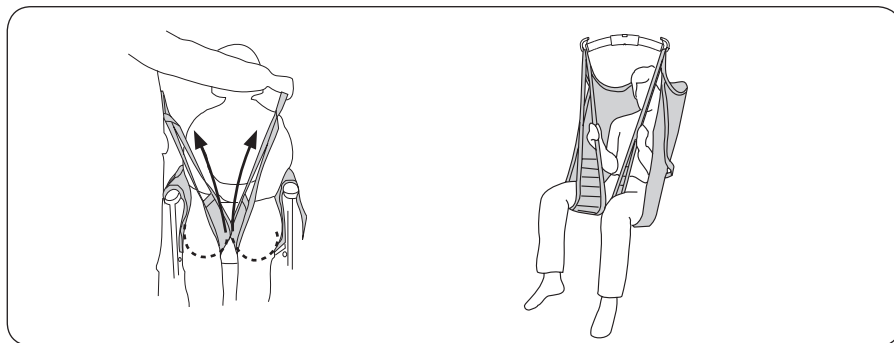Joissakin tapauksissa, esimerkiksi kun avustettava on amputoitu, voi olla hyvä vetää jalkatukien lenkit metallisten D-renkaiden läpi ennen kiinnittämistä nostokaareen. Tämä estää jalkatukia liukumasta eteenpäin jalkoja pitkin.



Kumpikin jalkatuki kiinnitettynä erikseen nostokaareen.

Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, jos avustettava on erityisen herkkä genitaalialueelta.

⚠ Suurempi liukumisen riski.



Lyhennysasento

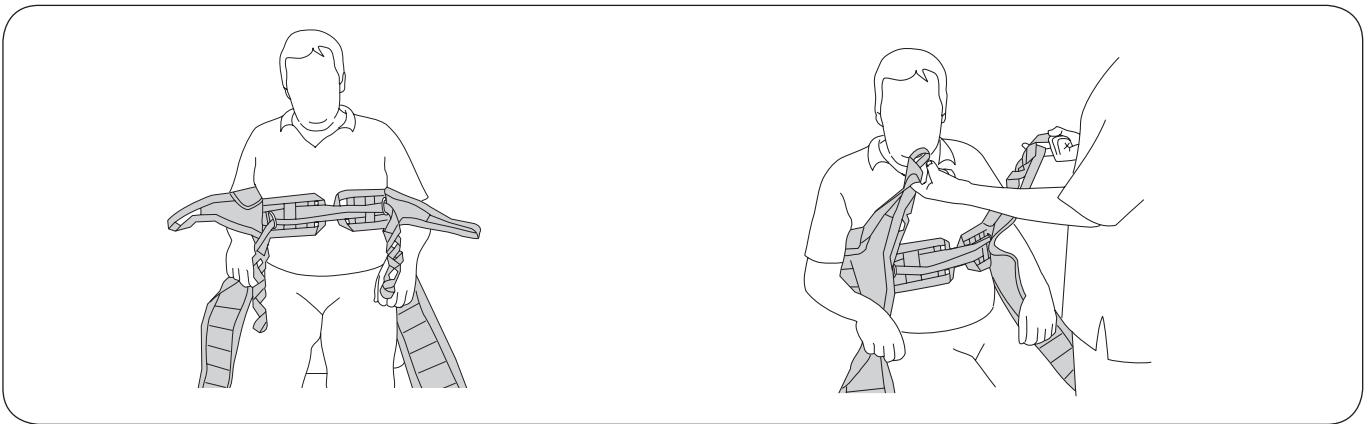
Joissakin tapauksissa voi olla hyvä lyhentää jalkatukien lenkkejä, jotta avustettava saa tukevan asennon nostokankaassa. Lyhennysasentoa voidaan käyttää tilapäisesti oikean pituuden löytämiseksi, mutta pitkittynyt käyttö voi vahingoittaa saumakohtia. Jos haluat lyhentää jalkatukien lenkkejä pitkäaikaista käyttöä varten, on suositeltavaa, että solmit lenkkiin solmun, jolloin se lyhenee noin 10 cm. Tässä tapauksessa ulompi jalkatuen lenkki kiinnitetään nostokaareen.

SafetyBelt-turvavyön kuvaus

Turvavyö antaa lisätukea avustettaville, joilla on heikko lihastonus. Vyö tukee avustettavan ylävartaloa, jos avustettavalla on taipumus valua alaspäin nostokankaassa noston aikana.

Turvavyötä ei kuitenkaan saa kiristää niin tiukalle, että se nostaa avustettavan vartaloa ylöspäin. Toisin sanoen avustettavaa ei saa nostaa turvavyön varassa, ennen kuin HygieneSling-nostokankaan ylempien hihnalenkkien nostovaikutus alkaa. Jos näin tapahtuu, avustettava voi kallistua ikävästi taaksepäin.

Lenkkihihnojen säätäminen




Lenkkihihnat on asetettava ristiin ja vedettävä D-renkaiden läpi ennen valitun hihnalenkin ripustamista nostokaareen.

Lenkkihihnojen kireys ylävartalon ympärillä määräytyy sen mukaan, mitkä lenkit on kiinnitetty nostokaareen. Voit säätää sopivan kireyden kokeilemalla nostoa eri lenkeistä samaan aikaan, kun käytät HygieneSling-nostokankaan ylempiä hihnalenkkejä. Sisempi lenkki lisää kireyttä, kun taas ulompi lenkki vähentää kireyttä.

Oikein säädettyjen lenkkihihnojen pitäisi tuntua hieman HygieneSling-nostokankaan ylempiä hihnalenkkejä löysemmiltä.


Merkintäliuskat

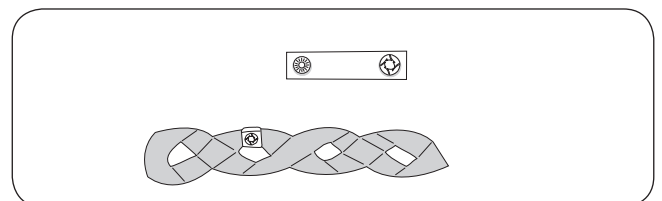Tätä hyödyllistä lisävarustetta käytetään lenkkien merkitsemiseen silloin, kun tietylle henkilölle on löydetty sopivat säädöt. Näin avustajat löytävät heti oikean lenkin nostokaareen kiinnittämistä varten.



Hihnan pituuden säätäminen avustettavan vyötärömitan mukaan

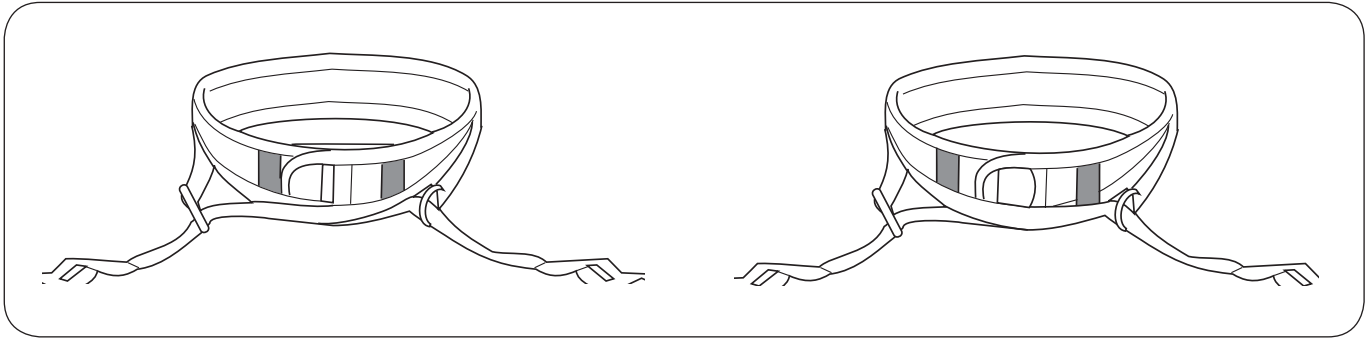Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi vyön pituutta voidaan tarvittaessa säätää avustettavan vyötärömitan mukaan.




Vaihtoehto A: Erittäin hoikat avustettavat

Vedä lenkkihihnat ulos sisemmistä vyölenkeistä ennen niiden pujottamista metallirenkaiden läpi. Tämä mahdollistaa maksimikireyden.

Vaihtoehto B: Keskikokoiset avustettavat

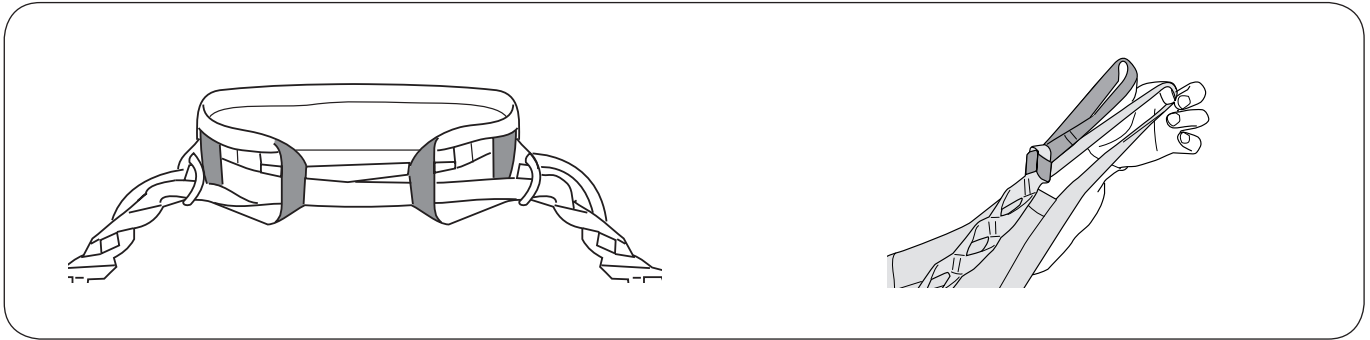Vedä vain yksi lenkkihihna ulos sisemmästä vyölenkistä. Aseta lenkkihihnat ristiin ja pujota ne metallirenkaiden läpi.



Vaihtoehto C Kookkaat potilaat

Pujota lenkkihihnat sekä sisempien että ulompien vyölenkkien läpi ennen niiden pujottamista metallirenkaiden läpi.

Hyödyllinen vinkki: Lenkkihihnoja voidaan pidentää Liko Extension Loop -jatkolenkkien avulla, jos avustettavan ympärysmitta on vielä suurempi.

Vaihtoehtoiset nostokankaat nostoihin WC-istuimelle ja -istuimelta

Laajassa nostokangasvalikoimassamme on monia malleja, joita voidaan käyttää nostoihin WC-käyntien yhteydessä. Lisätietoja saat osoitteesta www.hillrom.com. Seuraavassa luetellaan joitakin mahdollisia vaihtoehtoisia nostokankaita:

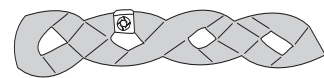
- Liko HygieneSling with Belt, malli 41
- Liko HygieneVest™ High Back, malli 55
- Liko MasterVest™, malli 60
- Liko MasterVest™, jossa kiinnitys edessä, malli 64

Lisävarusteet

Merkintäliuskat

- Merkintäliuskat, punainen, 4 kpl
- Merkintäliuskat, oranssi, 4 kpl
- Merkintäliuskat, keltainen, 4 kpl
- Merkintäliuskat, sininen, 4 kpl
- Merkintäliuskat, musta, 4 kpl


- Tuotenumero 3666033
- Tuotenumero 3666034
- Tuotenumero 3666035
- Tuotenumero 3666036
- Tuotenumero 3666037



Extension Loop

- Extension Loop, vihreä, 12 cm
- Extension Loop, vihreä, 22 cm
- Extension Loop, harmaa, 12 cm
- Extension Loop, harmaa, 22 cm

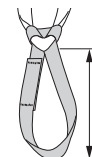- Tuotenumero 3691102
- Tuotenumero 3691103
- Tuotenumero 3691302
- Tuotenumero 3691303



- 2 = 12 cm
- 3 = 22 cm

Yleiskuvaus: Liko™ HygieneSling -nostokangas, malli 45

Tuote	Tuotenro	Koko	Avustettavan paino ¹	Enimmäiskuormitus ²
Liko HygieneSling	3545134	S	25–50 kg	200 kg
Liko HygieneSling	3545135	M	40–90 kg	200 kg
Liko HygieneSling	3545136	L	80–120 kg	200 kg
Liko HygieneSling	3545137	XL	> 100 kg	300 kg

¹ Ilmoitetut avustettavien painot ovat suuntaa antavia. Eroja voi esiintyä.

² Enimmäiskuormituksen edellytyksenä on, että nostin/lisävarusteet kestävät vähintään saman suuruisen kuormituksen.

Materiaali: HygieneSling-nostokangas on valmistettu polyesteristä.

Suosittelut käyttöyhdistelmät

Suosittelut Liko HygieneSling -nostokankaan ja Likon nostokaarien yhdistelmät:	Mini 220	Nostokaari 350 ³	Standard 450	Nostokaari 450 ¹	Nostokaari 600 ⁴	Kaksoisnostokaari 670 ²
Liko HygieneSling, malli 45, S	1	1	2	1	3	4
Liko HygieneSling, malli 45, M	1	1	1	1	3	3
Liko HygieneSling, malli 45, L	1	1	1	1	2	2
Liko HygieneSling, malli 45, XL	2	1	1	1	2	2

¹ Nostokaari 450 viittaa Universal SlingBar 450 -nostokaareen (tuotenumerot 3156075, 3156085 ja 3156095) ja SlingGuard 450 -nostokaareen (tuotenumerot 3308020 ja 3308520).

² Kaksoisnostokaari 670 viittaa Universal TwinBar 670 -nostokaareen (tuotenumerot 3156077 ja 3156087) ja SlingGuard 670 Twin -nostokaareen (tuotenumerot 3308040 ja 3308540).

³ Nostokaari 350 viittaa Universal SlingBar 350 -nostokaareen (tuotenumerot 3156074, 3156084 ja 3156094).

⁴ Nostokaari 600 viittaa Universal SlingBar 600 -nostokaareen (tuotenumerot 3156076 ja 3156086).

Liko HygieneSling -nostokankaan ja Cross-Bar-ristikkonostokaaren, Cross-Bar 450/670 -ristikkonostokaaren tai SideBars-sivukaarien yhdistelmät ovat epäsoivia.


Selitys: 1 = Suositeltava, 2 = Mahdollinen, 3 = Ei suositeltava, 4 = Sopimaton

Muut yhdistelmät

Muiden kuin Likon suosittelemien lisävarusteiden tai tuotteiden yhdistelmäkäyttö voi vaarantaa avustettavan turvallisuuden.



www.hillrom.com

 Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Ruotsi
+46 (0)920 474 700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

