

Brugsanvisning
















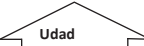
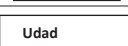

LiftSheet XL er beregnet til løft og forflytning af brugere i vandret stilling. Det er kun beregnet til brug i kombination med FlexoStretch™ tilbehøret med varenr. 3156057 og UltraStretch™ tilbehøret med varenr. 3156058. LiftSheet XL har 2 varianter, Normal og Høj. Maks. belastning: 400 kg.

VIGTIGT!

Løft og forflytning af en bruger medfører altid en vis risiko. Læs brugsanvisningen til både brugerliften og FlexoStretch tilbehøret eller UltraStretch tilbehøret før brug. Det er vigtigt at have læst og forstået indholdet i brugsanvisningen. Udstyret bør kun anvendes af oplært personale. Udvis forsigtighed og omsorg ved brug. Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed. Hvis noget er uklart, skal du kontakte producenten eller leverandøren.

Symbolbeskrivelse

Disse symboler findes i dette dokument og/eller på produktet.

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Denne situation kræver ekstra omhu og opmærksomhed.
	CE-mærke
	Juridisk producent
	Produktionsdato
	Læs brugsanvisningen før brug
	Produktidentifikation
	Serienummer
	Medicinsk udstyr
	Må ikke renses kemisk
	Må ikke stryges
	Må ikke tørres i tørretumbler
	Vask Symbolet er altid i kombination med den anbefalede temperatur i °C og °F.
	Latexfri
	Må ikke bleges
	Periodisk eftersyn
	Retning opad og symbol på ydersiden af produktet
	Symbol på ydersiden af produktet.
	GS1 datamatrixstregkode, der kan indeholde følgende oplysninger: (01) Globalt handelsvarenummer (11) Produktionsdato (21) Serienummer

Sikkerhedsanvisninger

Produktændringer

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til at foretage produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt din repræsentant fra Hill-Rom for rådgivning og information om produktopgraderinger.

Design and Quality by Liko in Sweden

Administrationssystemet for både produktion og udvikling af produktet er certificeret i henhold til ISO9001 og dens pendant for medicinske anordninger, ISO13485. Administrationssystemet er endvidere certificeret i henhold til miljøstandarden ISO14001.

Meddelelse til brugere og/eller patienter i EU

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente myndighed i brugerens og/eller patientens medlemsstat.

Eftersyn og vedligeholdelse

Efterse produktet før hver brug. Kontrollér følgende punkter for slid og beskadigelse:

- Stof
- Sømme
- Løkker

⚠ Anvend ikke beskadiget lifttilbehør.

Hvis noget er uklart, bedes du kontakte fabrikanten eller leverandøren.

Vaskeanvisning

Se løftetilbehørets produktmærke samt det vedhæftede bilag "Vedligeholdelsesanvisninger til Likos løftesejl".

Periodisk eftersyn

Produktet skal efterses mindst hver 6. måned. Det kan være nødvendigt med mere hyppige eftersyn, hvis produktet anvendes eller vaskes oftere end normalt. For protokoller bedes du kontakte din Hill-Rom-repræsentant.

Forventet levetid

Produktet har en forventet levetid på 5 år. Den forventede levetid er baseret på, at produktet anvendes til 10 løft pr. dag, og vaskes en gang om ugen iht. vaskeanvisningen. Hill-Rom anbefaler, at produktet kun anvendes under sin forventede levetid.

Anvisninger for genanvendelse


Hele LiftSheet skal sorteres som brændbart affald.

Hill-Rom evaluerer og giver vejledning til sine brugere om sikker håndtering og bortskaffelse af sit udstyr for at hjælpe med at forebygge skader, herunder bl.a. snitsår, punkteringer af hud og hudafskrabninger, og om eventuel nødvendig rengøring og desinfektion af det medicinske udstyr efter brug og før bortskaffelse. Kunderne skal overholde alle nationale, regionale og/eller lokale love og bestemmelser, som vedrører sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr og tilbehør.

I tvivlsspørgsmål skal brugeren af enheden først kontakte Hill-Roms tekniske support for at få vejledning angående protokoller for sikker bortskaffelse.

Oversigt over Liko™ LiftSheet™ XL

Betegnelse	Varenr.	Materiale	Længde (a)	Maks. belastning
LiftSheet XL, Normal	3684105	Polyester	165 cm	400 kg
LiftSheet XL, Høj	3684106	Polyester	185 cm	400 kg

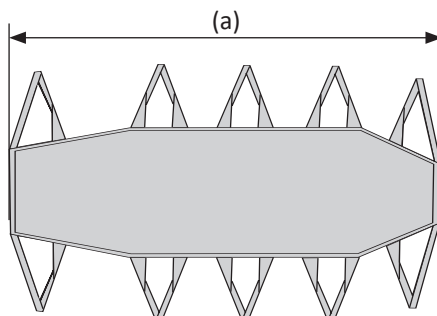

www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sverige
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom