


Μοντ. 60



Μοντ. 64

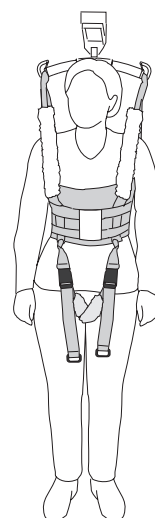

Μοντ. 60
με υπομήρια και
επενδεδυμένες θήκες

Περιγραφή προϊόντος

Το γιλέκο Liko MasterVest είναι ένας πολυχρηστικός σάκος με ευρεία γκάμα χρήσεων, λόγου χάρη, βοηθάει τον ασθενή να στέκεται και να περπατάει ή να επισκέπτεται την τουαλέτα.

Το γιλέκο MasterVest υποστηρίζει τον ασθενή γύρω από το επάνω μέρος του σώματος, καθώς και κάτω από τους βραχίονες. Το γιλέκο MasterVest απαιτεί από τους ασθενείς να μπορούν να στηρίζονται σε κάποιον βαθμό στα πόδια τους.

Το γιλέκο Liko MasterVest σας επιτρέπει να επιτυγχάνετε ορισμένους δύσκολους στόχους, για παράδειγμα:

- οι ασθενείς λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια ώστε να ασκούνται ή να στηρίζονται στα πόδια τους, και
- οι φροντιστές αποφεύγουν κινδύνους που σχετίζονται με την ανύψωση βαριών φορτίων.

Η ανύψωση και μεταφορά ασθενών από και προς την τουαλέτα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς για τον φροντιστή. Το MasterVest διευκολύνει την ομαλή και απλή μεταφορά από και προς την τουαλέτα.

Εφόσον το γιλέκο MasterVest καλύπτει μόνο το επάνω μέρος του σώματος, το κάτω μέρος του σώματος είναι εύκολα προσβάσιμο για ντύσιμο και γδύσιμο.

Μπροστινό κλείσιμο MasterVest, Μοντ. 64

Το μοντέλο με μπροστινό κλείσιμο του γιλέκου Liko MasterVest Μοντ. 64 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασθενείς που μπορούν να φορούν και να αφαιρούν το γιλέκο μόνοι τους.

Το γιλέκο MasterVest με μπροστινό κλείσιμο διαθέτει δύο ρυθμιζόμενες αγκράφες ασφαλείας στο στήθος. Αυτές συνιστώνται επίσης σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η προσαρμογή της τάσης και η ρύθμιση της πίεσης στο στήθος.

MasterVest με υπομήρια

Το υπομήριο συγκρατεί το γιλέκο MasterVest στη θέση του και χρησιμοποιείται συνήθως στις ασκήσεις βάδισης.

Σε αυτό το έγγραφο, το άτομο που ανυψώνεται αναφέρεται ως ασθενής και το άτομο που τον βοηθάει αναφέρεται ως φροντιστής.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η ανύψωση και μεταφορά ενός ασθενούς ενέχει πάντα κάποιον βαθμό κινδύνου. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για τον γερανό και τα εξαρτήματα ανύψωσης ασθενούς πριν από τη χρήση. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως τα περιεχόμενα του εγχειριδίου χρήσης. Ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα ανύψωσης είναι κατάλληλα για τον γερανό που χρησιμοποιείται. Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση. Ως φροντιστές, είστε πάντα υπεύθυνοι για την ασφάλεια του ασθενούς. Θα πρέπει να γνωρίζετε την κατάσταση του ασθενούς και την ικανότητά του να ανταπεξέρχεται στην κατάσταση ανύψωσης. Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή συμβόλων	3
Οδηγίες ασφάλειας	4
Φροντίδα και συντήρηση	5
Ορισμοί	5
Πως να συνδέσετε έναν σάκο σε διαφορετικές κρεμάστρες	6
Πώς να συνδέσετε έναν σάκο MasterVest σε μια κρεμάστρα Twin Bar	7
Ανύψωση από καθιστή θέση	8
Δοκιμή του γιλέκου Liko MasterVest	9
Εξαρτήματα	11
Επισκόπηση γιλέκου Liko™ MasterVest™ Μοντ. 60, 64	12
Συνιστώμενοι συνδυασμοί	12

Περιγραφή συμβόλων

Τα σύμβολα αυτά εμφανίζονται σε αυτό το έγγραφο ή/και στο προϊόν.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση. Χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται πρόσθετη φροντίδα και προσοχή.
	Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση
	Σήμανση CE
	Νόμιμος κατασκευαστής
	Ημερομηνία κατασκευής
	Αριθμός αναφ.
	Σειριακός αριθμός
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
	Απαγορεύεται το σιδέρωμα
	Στέγνωμα σε στεγνωτήριο
	Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο ρούχων
	Πλύσιμο Το σύμβολο εμφανίζεται πάντα σε συνδυασμό με συνιστώμενη θερμοκρασία σε °C και °F.
	Χωρίς λατέξ
	Περιοδικός έλεγχος
	Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό
	Στέγνωμα σε σχοινί υπό σκιά
	Κατεύθυνση προς τα επάνω και σύμβολο στο εξωτερικό του εξοπλισμού.
	Σύμβολο στο εξωτερικό του εξοπλισμού.
 (01) 0100887761997127 (11) YMMDD (21) 012345678910	Γραμμωτός κώδικας μήτρας δεδομένων GS1 που μπορεί να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες. (01) Διεθνής κωδικός μονάδων εμπορίας (11) Ημερομηνία παραγωγής (21) Σειριακός αριθμός:

Οδηγίες ασφάλειας

Πριν από την ανύψωση, λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

- Ένα υπεύθυνο άτομο στο ίδρυμα που εργάζεστε θα αποφασίσει, εξετάζοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά, εάν απαιτείται ένας ή περισσότεροι φροντιστές.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος που έχει επιλεγεί καλύπτει τις ανάγκες του ασθενούς όσον αφορά το μοντέλο, το μέγεθος, το ύφασμα και τον σχεδιασμό.
- Δοκιμάστε τη συσκευή χαμηλώματος έκτακτης ανάγκης στον γερανό που χρησιμοποιείτε ώστε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
- Ρυθμίστε το μέγιστο ύψος έτσι ώστε να είναι αδύνατο ο ασθενής να ανυψωθεί πολύ ψηλά.
- Χρησιμοποιείτε ξεχωριστό σάκο για κάθε ασθενή, για λόγους ασφάλειας και υγιεινής.
- Πριν από την ανύψωση, σχεδιάστε τη λειτουργία ανύψωσης, έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν ασφαλέστερα και ομαλότερα.
- Πριν από την ανύψωση, βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα ανύψωσης αιωρείται κάθετα και μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα.
- Παρόλο που οι κρεμάστρες των σάκων της Liko διαθέτουν μάνδαλα, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις παρακάτω περιπτώσεις: πριν από την ανύψωση του ασθενούς από την επιφάνεια που βρίσκεται και κατά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες έχουν συνδεθεί σωστά στα άγκιστρα της κρεμάστρας.
- Ποτέ μην ανυψώνετε τον ασθενή από την επιφάνεια που βρίσκεται σε μεγαλύτερο ύψος από αυτό που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανύψωσης και μεταφοράς.
- Ποτέ μην αφήνετε τον ασθενή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της ανύψωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί στο αναπηρικό αμαξίδιο, στο κρεβάτι, στο φορείο κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανύψωσης/μεταφοράς.
- Φροντίστε να εργάζεστε πάντα εργονομικά. Αξιοποιήστε την ικανότητα ενεργής συμμετοχής του ασθενούς στις λειτουργίες.
- Όταν ο σάκος δεν χρησιμοποιείται, μην τον αφήνετε εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως.

Η λανθασμένη τοποθέτηση του σάκου στην κρεμάστρα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στον ασθενή.

Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ www.hillrom.com/patents

Είναι δυνατό να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Βλ. παραπάνω διεύθυνση Internet.

Οι εταιρείες της Hill-Rom είναι οι ιδιοκτήτες των ευρωπαϊκών, αμερικανικών, και άλλων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που εκκρεμούν.

Αλλαγές προϊόντων

Τα προϊόντα της Liko αναπτύσσονται συνεχώς και για τον λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών σε αυτά χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom της περιοχής σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τις αναβαθμίσεις των προϊόντων.

Design and Quality by Liko in Sweden

Η Liko διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 και κατά το αντίστοιχο πρότυπο για τη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO 13485. Η Liko διαθέτει, επίσης, πιστοποίηση κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001.

Ειδοποίηση προς χρήστες ή/και ασθενείς στην ΕΕ

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με αυτήν τη συσκευή θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Φροντίδα και συντήρηση

Ελέγχετε τον σάκο πριν από κάθε χρήση. Ελέγχετε τα παρακάτω σημεία για φθορά και ζημιά:

- Ύφασμα
- Ιμάντες
- Ραφές
- Θηλιές
- Κουμπώματα

⚠ Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ανύψωσης που έχουν υποστεί βλάβη.

Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.

Εάν ο σάκος χρησιμοποιείται για μπάνιο ή ντους: Μετά τη χρήση στο μπάνιο και στο ντους, ο σάκος πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να στεγνώσει το συντομότερο δυνατό.

Οδηγίες πλυσίματος: Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος του σάκου και στο εσωκλειόμενο παράρτημα "Φροντίδα και συντήρηση των σάκων της Liko". Τα ασφαλή κουμπώματα στο Μοντ. 64 θα πρέπει να είναι κλειστά κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.

Περιοδικός έλεγχος

Το προϊόν θα πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες. Εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ή πλένονται σε μεγαλύτερη συχνότητα από την κανονική, ενδέχεται να απαιτούνται συχνότεροι έλεγχοι. Για πρωτόκολλα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom στην περιοχή σας.

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Μοντ. 60: Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 1-5 έτη με κανονική χρήση.

Μοντ. 64: Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 1-4 έτη με κανονική χρήση.

Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από το ύφασμα, τη συχνότητα χρήσης, τη διαδικασία πλυσίματος και το βάρος των ασθενών που μεταφέρονται.


Οδηγίες ανακύκλωσης

Ολόκληρος ο σάκος, συμπεριλαμβανομένων ενισχύσεων, υλικού επένδυσης κ.λπ., θα πρέπει να ταξινομηθεί ως καύσιμα απόβλητα.


Η Hill-Rom αξιολογεί και παρέχει καθοδήγηση στους χρήστες των προϊόντων της σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την ασφαλή απόρριψη των συσκευών της ώστε να βοηθήσει με την αποτροπή τραυματισμών όπως (αναφέρονται ενδεικτικά): εγκοπές, διατρήσεις του δέρματος, γδαρσίματα αλλά και σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος που απαιτούνται μετά τη χρήση και πριν από την απόρριψή του. Οι πελάτες θα πρέπει να τηρούν το σύνολο των ομοσπονδιακών, πολιτειακών, περιφερειακών ή/και τοπικών νομοθεσιών και κανονισμών όσον αφορά την ασφαλή απόρριψη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξαρτημάτων.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τη Hill-Rom για οδηγίες σχετικά με πρωτόκολλα ασφαλούς απόρριψης.

Ορισμοί

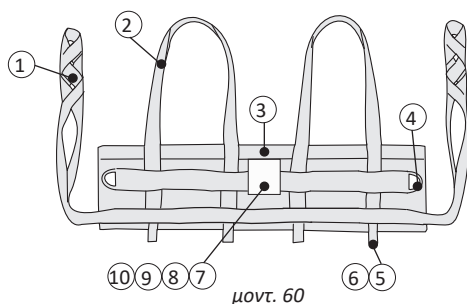












μοντ. 60

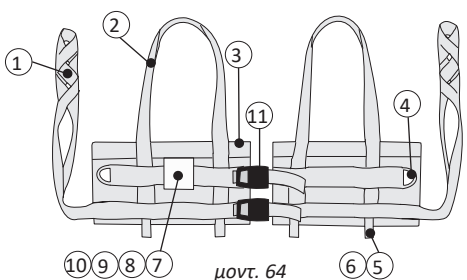


μοντ. 64

1. Θηλιές ιμάντων
2. Ιμάντες ώμων
3. Επάνω άκρη
4. Δακτύλιοι σχήματος D
5. Θηλιές υπομήριων
6. Ένδειξη μεγέθους
7. Ετικέτα προϊόντος
8. Σειριακός αριθμός
9. Ετικέτα: Περιοδικός έλεγχος
10. Ετικέτα: Επισήμανση ατόμου (Belongs to)
11. Ασφαλή κουμπώματα





Πως να συνδέσετε έναν σάκο σε διαφορετικές κρεμάστρες

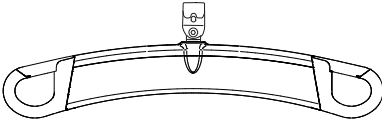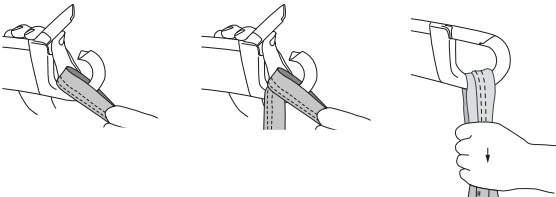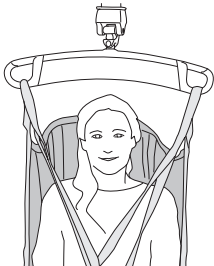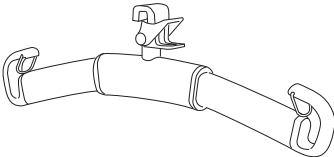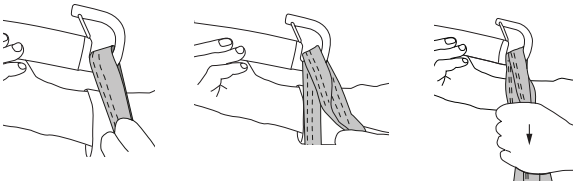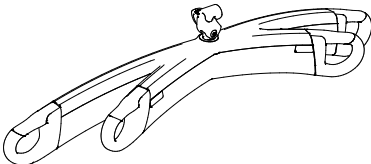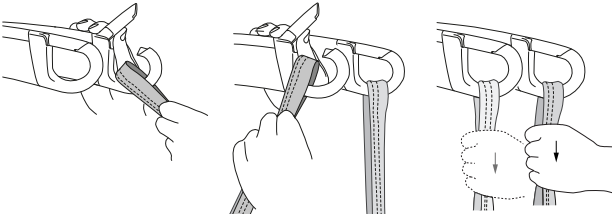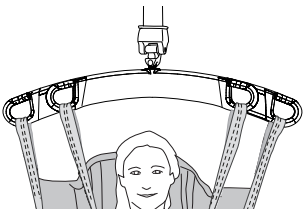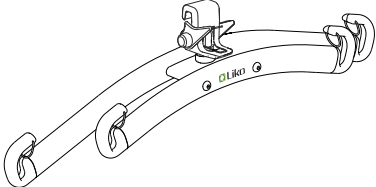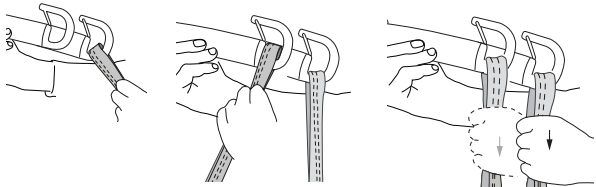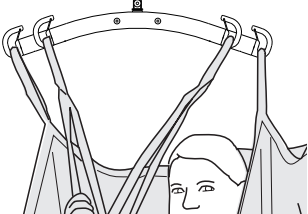Κρεμάστρα	Θηλιές σάκου σε άγκιστρα κρεμάστρας	Σωστό
 SlingGuard™		
 Universal		
 SlingGuard™ Twin		
 Universal Twin		


Λάθος!

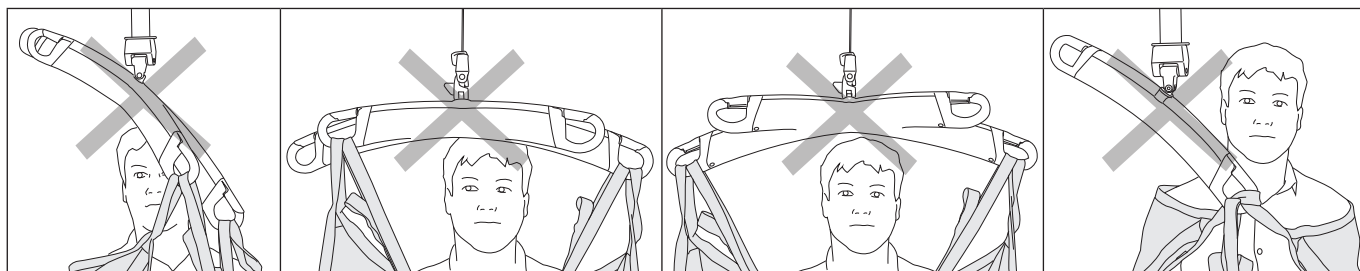

Πώς να Συνδέσετε έναν σάκο MasterVest σε μια κρεμάστρα Twin Bar

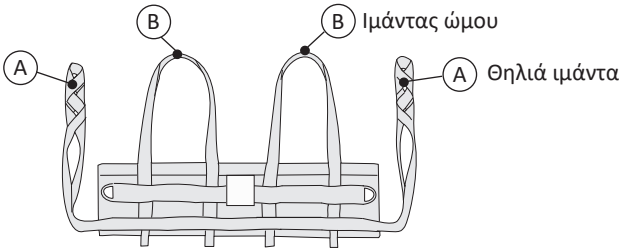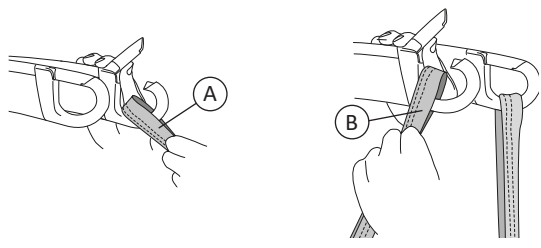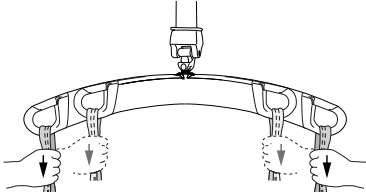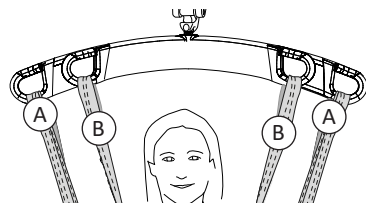 Α Θηλιά μάντα Β Ιμάντας ώμου	1. 
2. 	3. 


Ανύψωση από καθιστή θέση

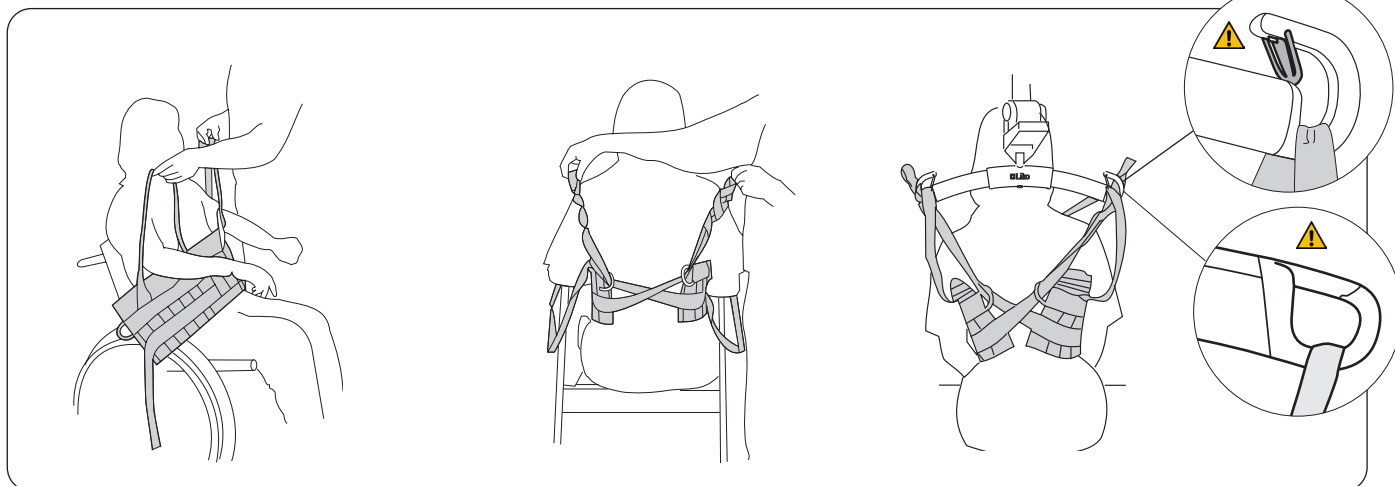

Φορέστε το γιλέκο MasterVest από το μπροστινό μέρος. Ο ασθενής τοποθετεί τα χέρια του μέσα από τους ιμάντες ώμων.

Πίσω από την πλάτη: Τραβήξτε κάθε θηλιά ιμάντα κατά πλάτος της πλάτης και τραβήξτε τον μέσα από το μεταλλικό δακτύλιο σε σχήμα D στην αντίθετη πλευρά, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Με την κρεμάστρα πίσω από την πλάτη του ασθενούς, προσαρτήστε τις θηλιές ιμάντων, χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη θηλιά, βλ. σελίδα 9-10. Προσαρτήστε τους ιμάντες ώμων στον κρεμάστρα. Βλ. σελίδες 6-7 για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση των θηλιών σάκου σε διαφορετικές κρεμάστρες.

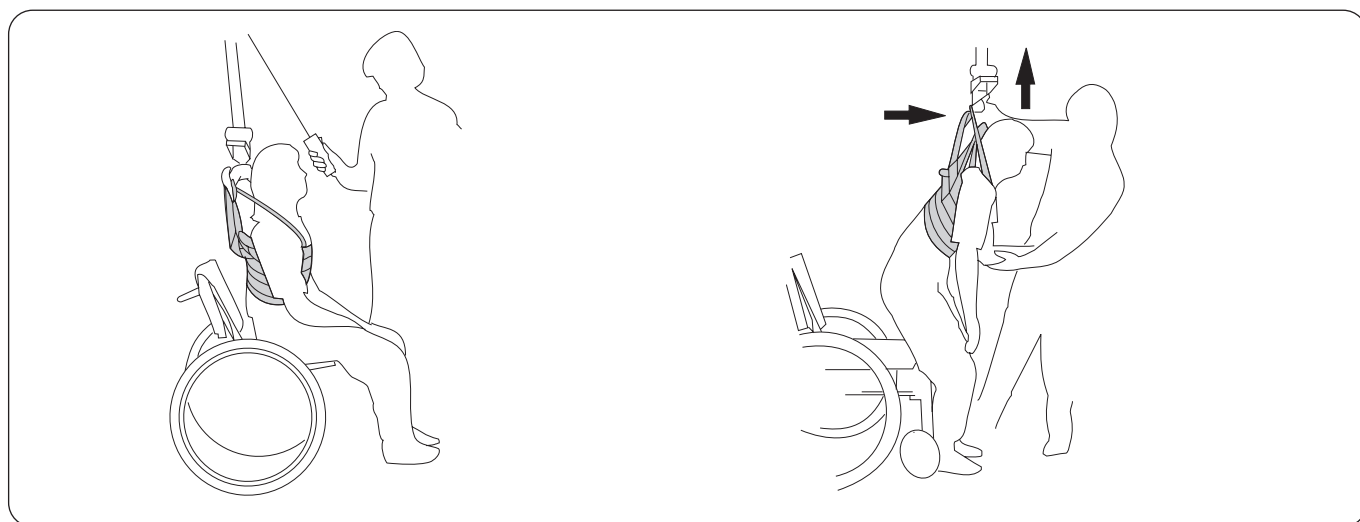


Πριν από την ανύψωση: Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια του ασθενούς βρίσκονται σταθερά στο δάπεδο, ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος καθώς ανυψώνεται η κρεμάστρα. Ανυψώστε ελαφρώς την κρεμάστρα για να σφίξετε τους ιμάντες (χωρίς να ανυψώσετε τον ασθενή από το κάθισμα) και βεβαιωθείτε ότι η κατανομή πίεσης γύρω από το επάνω μέρος του σώματος του ασθενούς είναι σωστή.

Κατά τη διάρκεια της ανύψωσης: Τραβήξτε την κρεμάστρα προς τα εμπρός, ώστε το βάρος του ασθενούς να μετατοπιστεί ομαλά μέχρι να σταθεί όρθιος και να έχει ισορροπία. Χαμηλώστε ελαφρώς την κρεμάστρα για να εκτονώσετε την πίεση γύρω από το στήθος. Τώρα, ο ασθενής έχει την ευκαιρία να τοποθετήσει το βάρος στα πόδια του και να κάνει ασκήσεις ισορροπίας.


Δοκιμή του γιλέκου Liko MasterVest

Επιλογή του κατάλληλου μεγέθους


Για τη σωστή λειτουργία του γιλέκου MasterVest, το πλάτος του γιλέκου πρέπει να είναι ανάλογο με την περιφέρεια του επάνω μέρους του σώματος του ασθενούς. Συνεπώς, είναι σημαντικό να επιλέξετε το σωστό μέγεθος και να προσδιορίσετε προσεκτικά τη σωστή θηλιά στη θηλιά ιμάντα.

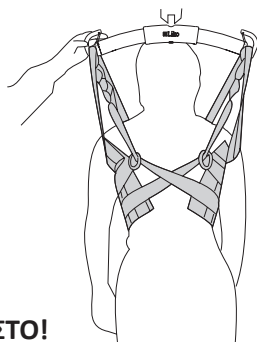

ΣΩΣΤΟ!

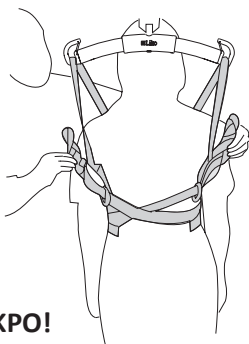

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ!

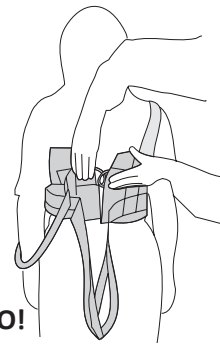

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ!

Το μέγεθος είναι σωστό όταν το διάκενο μεταξύ των μεταλλικών δακτυλίων σχήματος D είναι μεταξύ 5 cm και 30 cm. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του γιλέκου, τόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι το διάκενο.

Το μέγεθος είναι πολύ μικρό όταν η απόσταση μεταξύ των μεταλλικών δακτυλίων σχήματος D είναι πολύ μεγάλη, οι θηλιές ιμάντα δεν φτάνουν μέχρι την κρεμάστρα, και η πίεση γύρω από στήθος είναι πολύ μεγάλη.

Το μέγεθος είναι πολύ μεγάλο όταν οι μεταλλικοί δακτύλιοι σχήματος D έρχονται σε επαφή. Το γιλέκο είναι πολύ φαρδύ και δεν σφίγγει κατά την ανύψωση, αλλά ολισθαίνει προς τα επάνω. Ένα πολύ μεγάλο γιλέκο δημιουργεί υπερβολική πίεση κάτω από τις μασχάλες.


Προσαρμογή των θηλιών ιμάντων

Η θηλιά που συνδέεται στην κρεμάστρα καθορίζει πόσο σφίγγει το γιλέκο γύρω από το στήθος. Εάν το γιλέκο γλιστράει προς τα επάνω - δοκιμάστε μια εσωτερική θηλιά ή μικρότερο μέγεθος γιλέκου.

Εάν το γιλέκο είναι πολύ στενό γύρω από το στήθος - δοκιμάστε εξωτερική θηλιά ή μεγαλύτερο μέγεθος γιλέκου.

Εάν δύο διαφορετικά άτομα δοκιμάσουν το ίδιο μέγεθος, το πιο λεπτό άτομο θα χρειαστεί εσωτερική θηλιά, ενώ το πιο μεγάλος άνθρωπος θα χρειαστεί εξωτερική θηλιά. Το γιλέκο MasterVest προσαρμόζεται σωστά όταν οι ιμάντες ώμων και οι θηλιές ιμάντων είναι εξίσου τεντωμένες κατά την ανύψωση του ασθενούς.


Δοκιμή των θηλιών ιμάντων

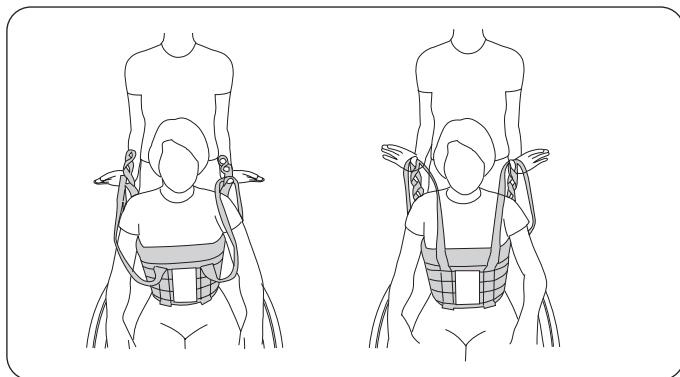

Για να βρείτε ποιες θηλιές παρέχουν την καλύτερη εφαρμογή, δοκιμάστε τις θηλιές ιμάντων τραβώντας διαφορετικές θηλιές κατά μήκος των ιμάντων ώμων.


Για να δοκιμάσετε τη σωστή προσαρμογή των θηλιών ιμάντων, σταθείτε πίσω από τον ασθενή και περάστε τους ιμάντες ώμων και τις θηλιές ιμάντων από τους αντίχειρες και σηκώστε προς τα επάνω έως ότου τεντώσουν οι ιμάντες. Το γιλέκο MasterVest εφαρμόζει σωστά όταν οι θηλιές ιμάντων και οι ιμάντες ώμων είναι το ίδιο τεντωμένοι σε ανυψωμένη θέση.

Κλιπς θηλιών

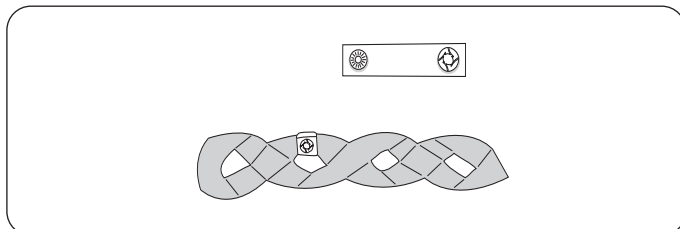

Αυτό το πρακτικό εξάρτημα χρησιμοποιείται για την επισήμανση των θηλιών που δοκιμάστηκαν για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Διευκολύνει τους φροντιστές να επιλέξουν τη σωστή θηλιά για να συνδέσουν την κρεμάστρα.

Στάση του σώματος

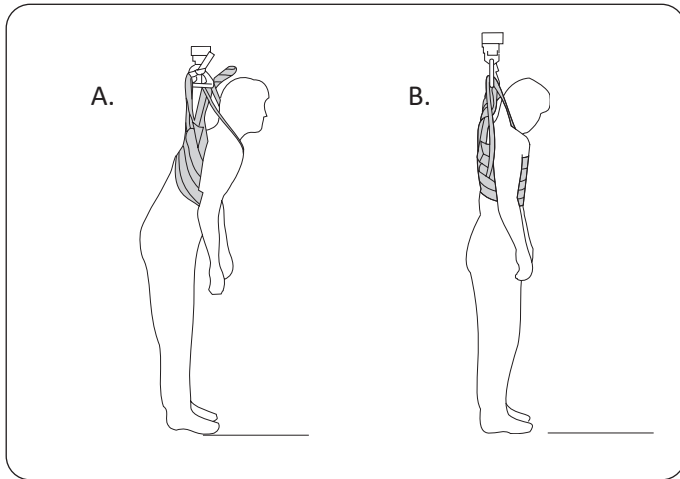


Ένα άτομο μπορεί συχνά να χωράει σε δύο διαφορετικά μεγέθη του γιλέκου MasterVest, αλλά οι θηλιές ιμάντων πρέπει να προσαρμόζονται σωστά σε κάθε μέγεθος. Τα αποτελέσματα διαφέρουν όσον αφορά τη στάση του σώματος και την κατανομή της πίεσης γύρω από το στήθος.

Α. Με μεγαλύτερο μέγεθος γιλέκου MasterVest πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία από τις εσωτερικές θηλιές στη θηλιά ιμάντα. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στον ασθενή να σκύβει μπροστά και να ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο κάτω μπροστινό μέρος του στήθους.

Β. Με μικρότερο μέγεθος γιλέκου MasterVest πρέπει να προσαρτήσετε μία από τις εξωτερικές θηλιές της θηλιάς ιμάντα στην κρεμάστρα, για να επιτύχετε ίση τάση και στους τέσσερις ιμάντες. Σε αυτήν την περίπτωση, η στάση του σώματος είναι πιο ευθυτενής και η πίεση κατανέμεται πιο ομοιόμορφα γύρω από το στήθος.

Μπροστινό κλείσιμο MasterVest, Μοντ. 64

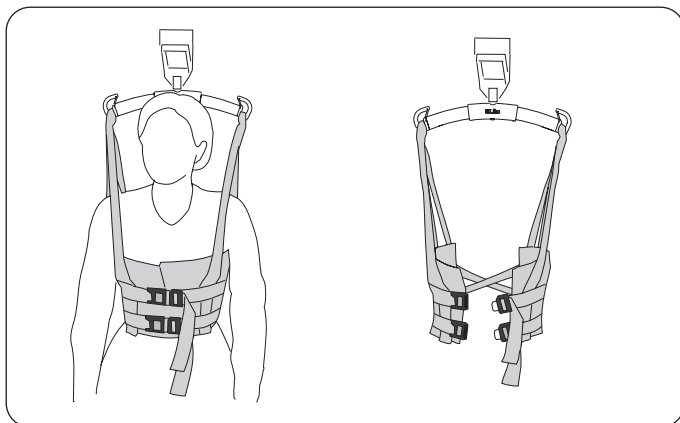

Το γιλέκο MasterVest είναι επίσης διαθέσιμο και με μπροστινό κλείσιμο.

Το γιλέκο MasterVest με μπροστινό κλείσιμο διαθέτει δύο ρυθμιζόμενα ασφαλή κουμπώματα στο μπροστινό μέρος. Ελέγξτε το σωστό μέγεθος γιλέκου και τη σωστή θέση των θηλιών ιμάντων, ακόμα και όταν οι ίδιοι οι ασθενείς φορούν το γιλέκο MasterVest. Μετά τη σωστή προσαρμογή του γιλέκου MasterVest, μπορεί να αναρτηθεί από την κρεμάστρα ενώ ο ασθενής το φοράει.

Γιλέκο Liko MasterVest από δίχτυ με πλαστική επικάλυψη

Τα πιο συνηθισμένα μεγέθη του γιλέκου MasterVest διατίθενται σε δίχτυ με πλαστική επικάλυψη. Η τριβή από το υλικό αντισταθμίζει την τάση του γιλέκου να ολισθαίνει προς τα επάνω. Για το μπάνιο μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα γιλέκο MasterVest σε δίχτυ με πλαστική επικάλυψη.

Πρόβλημα κατά τη δοκιμή;

Πρόβλημα: Το γιλέκο ολισθαίνει προς τα πάνω και κάτω από τους βραχίονες του ασθενούς.

Ρυθμίστε το γιλέκο MasterVest χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες από τις παρακάτω συστάσεις:

- Ρυθμίστε τη θηλιά ιμάντα χρησιμοποιώντας μια εσωτερική θηλιά.
- Επιλέξτε μικρότερο μέγεθος.
- Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα γιλέκο Liko MasterVest από δίχτυ με πλαστική επικάλυψη.
- Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το υπομήριο.
- Κρατήστε το γιλέκο στη θέση του πίσω από την πλάτη ενώ ανυψώνετε τον ασθενή πιέζοντας τον αντίχειρά σας προς τα κάτω στις σταυρωτές θηλιές ιμάντων.
- Ζητήστε από τον ασθενή να κρατάει τα χέρια του κάτω κατά την ανύψωση.

Εξαρτήματα

Leg Harness

Αρ. πρ. 3666004-06

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό υπομήριο με το γιλέκο Liko MasterVest, ώστε να μην ολισθαίνει το γιλέκο επάνω στο σώμα. Το υπομήριο μπορεί να φορεθεί ενώ ο ασθενής είναι καθισμένος και, μετά την ανύψωση του ασθενούς, μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση και την τάση του υπομήριου. Οι ιμάντες του υπομήριου μπορούν να σταυρωθούν ή να είναι παράλληλοι μέσω της βουβωνικής χώρας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το υπομήριο ταιριάζει στα γιλέκα με σειριακό αριθμό 736166. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προηγούμενα μοντέλα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom.

Επενδεδυμένη θήκη για τον ιμάντα ώμου

Αρ. πρ. 3666021

Επενδεδυμένες θήκες διατίθενται ως προαιρετικός εξοπλισμός για την εκτόνωση πίεσης στους μπροστινούς ιμάντες ώμων.


Οι επενδεδυμένες θήκες είναι εξοπλισμένες με βέλκρο κατά μήκος της μίας πλευράς για εύκολη εφαρμογή.

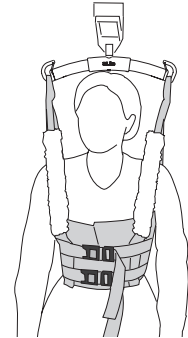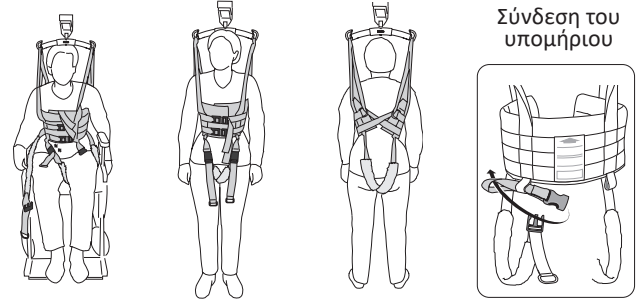

Κλιπς θηλιών

Κλιπς θηλιών, κόκκινα, 4 τεμ.
Κλιπς θηλιών, πορτοκαλί, 4 τεμ.
Κλιπς θηλιών, κίτρινα, 4 τεμ.
Κλιπς θηλιών, μπλε, 4 τεμ.
Κλιπς θηλιών, μαύρα, 4 τεμ.


Αρ. πρ. 3666033
Αρ. πρ. 3666034
Αρ. πρ. 3666035
Αρ. πρ. 3666036
Αρ. πρ. 3666037

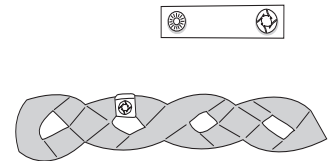

Extension Loop

Extension Loop, πράσινο, 12 cm
Extension Loop, πράσινο 22 cm
Extension Loop, γκσρι, 12 cm
Extension Loop, γκρι, 22 cm

Αρ. προϊόντος 3691102
Αρ. προϊόντος 3691103
Αρ. προϊόντος 3691302
Αρ. προϊόντος 3691303

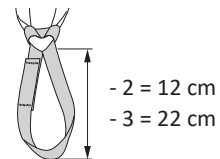

Επισκόπηση γιλέκου Liko™ MasterVest™ Μοντ. 60, 64

Προϊόν	Αρ. προϊόντος	Μέγεθος	Σωματικό βάρος kg ¹	Μέγιστο φορτίο ²
MasterVest Μοντ. 60	3560113	XS	20-40 kg	200 kg
MasterVest Μοντ. 60	3560114	S	40-60 kg	200 kg
MasterVest Μοντ. 60	3560115	M	60-80 kg	200 kg
MasterVest Μοντ. 60	3560116	L	80-100 kg	200 kg
MasterVest Μοντ. 60	3560117	XL	100-130 kg	300 kg
MasterVest Μοντ. 60	3560118	XXL	>120 kg	300 kg
MasterVest Μοντ. 64	3564114	S	40-60 kg	200 kg
MasterVest Μοντ. 64	3564115	M	60-80 kg	200 kg
MasterVest Μοντ. 64	3564116	L	80-100 kg	200 kg
MasterVest Μοντ. 64	3564117	XL	100-130 kg	200 kg
MasterVest Μοντ. 64	3564118	XXL	>120 kg	200 kg

¹ Το ενδεικνυόμενο βάρος ασθενούς αποτελεί μια απλή οδηγία – ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις.

² Για διατήρηση του μέγιστου φορτίου, απαιτείται γερανός/εξαρτήματα που προορίζονται για το ίδιο ή μεγαλύτερο φορτίο.

Υλικό: Το MasterVest διατίθεται σε πολυεστέρα.

Συνιστώμενοι συνδυασμοί

Συνιστώμενοι συνδυασμοί γιλέκων Liko MasterVest με κρεμάστρες Liko:	Mini 220	Κρεμάστρα Sling bar 350 ³	Standard 450	Κρεμάστρα Sling bar 450 ¹	Κρεμάστρα Sling bar 600 ⁴	Κρεμάστρες Twin bars 670 ²
Γιλέκο MasterVest, XS	1	1	2	1	3	4
Γιλέκο MasterVest, S	2	1	1	1	3	4
Γιλέκο MasterVest, M	2	1	1	1	3	4
Γιλέκο MasterVest, L	2	1	1	1	3	2
Γιλέκο MasterVest, XL	3	1	1	1	2	2
Γιλέκο MasterVest, XXL	3	2	1	1	2	2

¹ Η κρεμάστρα Sling bar 450 σχετίζεται με την κρεμάστρα Universal SlingBar 450 με αρ. πρ. 3156075, 3156085 και 3156095 καθώς και μια κρεμάστρα SlingGuard 450 με αρ. πρ. 3308020 και 3308520.

² Η κρεμάστρα Twin bar 670 σχετίζεται με την κρεμάστρα Universal Twin Bar 670 με αρ. προϊόντος 3156077 και 3156087, καθώς και με την SlingGuard 670 Twin με αρ. προϊόντος 3308040 και 3308540.

³ Η κρεμάστρα Sling bar 350 σχετίζεται με την κρεμάστρα Universal SlingBar 350 με αρ. προϊόντος 3156074, 3156084 και 3156094.

⁴ Η κρεμάστρα Sling bar 600 σχετίζεται με την κρεμάστρα Universal SlingBar 600 με αρ. προϊόντος 3156076 και 3156086.

Επεξήγηση: 1 = Συνιστάται, 2 = Μπορεί να λειτουργήσει, 3 = Δεν συνιστάται, 4 = Ακατάλληλος

Τα διαφορετικά πλάτη της κρεμάστρας δημιουργούν διαφορετικά επίπεδα πίεσης στο στήθος. Δοκιμάστε διάφορες εναλλακτικές λύσεις μέχρι να βρείτε εκείνη που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε ασθενή.

Άλλοι συνδυασμοί

Δεν είναι κατάλληλοι συνδυασμοί του γιλέκου Liko MasterVest με Cross-bar, Cross-bar 450/670 ή Side bars.

Οι συνδυασμοί αξεσουάρ/προϊόντων διαφορετικών από αυτά που συνιστά η Liko μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια του ασθενούς.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Σουηδία
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers

Hill-Rom