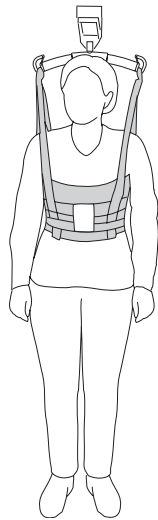



Használati útmutató



60-as modell



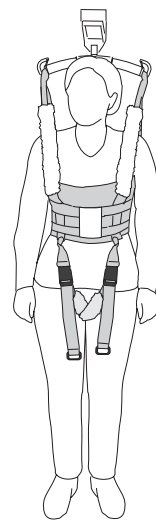64-es modell



60-as modell
beülő hevederrel és párnázott
hevedertokokkal

Termékismertető

A Liko MasterVest egy sokoldalú hám széleskörű alkalmazási lehetőségekkel, például álló helyzet és járás támogatásakor vagy a wc látogatásakor történő használatra.

A MasterVest hámok a felsőtest köré illetve a karok alá simulva járulnak hozzá a beteg stabilitásához. A MasterVest hámok olyan betegeknek alkalmazhatók, akik képesek testsúlyuk részleges megtartására álló helyzetben.

A Liko MasterVest hámok használatával a nehezebb feladatok is egyszerűbben megoldhatók válnak, mint például:

- a betegeknek megfelelő támasz biztosítása gyakorlatozáskor és álló helyzetben a testsúly megtartásakor, valamint
- az ápolók mentesülnek a nehéz teher emelésével együtt járó kockázatoktól.

A betegek felemelése és a wc-re majd onnan visszahelyezése az ápolóknak komoly sérüléseket okozhat. A MasterVest hámok segítségével a wc-re majd az onnan visszahelyezés zökkenőmentessé és egyszerűvé válik.

Mivel a MasterVest hám csupán a felsőtest egy részét fedi le, felöltözköskor illetve levetkőzöskor az alsótest könnyen hozzáférhető marad.

Elöl nyitható MasterVest hám, 64-es modell

Az elöl nyitható, 64-es Liko MasterVest modellek azon betegek számára alkalmasak, akik segítség nélkül, saját maguk is képesek fel- illetve levenni a hámot.

Az elöl nyitható MasterVest hámok két szabályozható biztonsági kapoccsal rendelkeznek, amelyek a mellkasra simulnak. Használatuk olyan esetekben is javasolt, amikor a szorosság és a mellkasra ható nyomás szabályozására van szükség.

MasterVest hám beülő hevederrel

A beülő heveder a MasterVest hám rögzítésére szolgál általános esetben járás gyakorlásakor szokás alkalmazni.

Ebben a dokumentumban, a „beteg” alatt a felemelt személy, míg az „ápoló” alatt a segítséget nyújtó személy értendő.

FONTOS!


Bármely személy felemelésekor és elmozdításakor minden esetben számolni kell egy bizonyos fokú kockázati tényezővel. Használat előtt olvassa el a betegemelő berendezés és az emelőtartozékok használati útmutatóját. A használati útmutató tartalmát fontos teljes egészében megérteni. A berendezés működtetését kizárólag szakképzett személyeknek javasoljuk. Ügyeljen arra, hogy az emelőtartozékok és a működtetett betegemelő berendezés egymással összeillőek legyenek. Használat közben legyen körültekintő és óvatos. Ápolóként minden esetben Ön a felelős a beteg biztonságáért. Tájékoztatódjon arról, hogy a beteg képes-e elfogadni azt, hogy felemelt helyzetbe kerül. Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a forgalmazóval.

Tartalomjegyzék

Jelmagyarázat	3
Biztonsági utasítások	4
Ápolás és karbantartás	5
Definíciók.....	5
Hámok felhelyezése különböző típusú akasztórudakra	6
A MasterVest felhelyezése Twin Bar akasztórudakra	7
Emelés ülő helyzetből.....	8
A Liko MasterVest ellenőrzése.....	9
Tartozékok	11
A Liko™ MastertVest™ áttekintése, 60-as és 64-es modell.....	12
Javasolt kombinációk.....	12

Jelmagyarázat

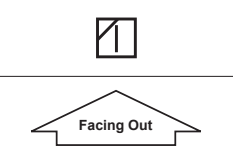A dokumentumban és/vagy a terméken a következő szimbólumokkal találkozhatunk.

Jel	Leírás
	Vigyázat! A használat során legyen rendkívül óvatos és körültekintő.
	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót
	CE jelzés
	Hivatalos gyártó
	Gyártás időpontja
	Referenciaszám
	Sorozatszám
	Orvostechnikai eszköz
	Vegytisztítása tilos
	Nem vasalható
	Gépi szárítás
	Dobos szárítás tilos
	Mosás A szimbólum mindig az ajánlott hőmérséklet °C-ban kifejezett értékével együtt szerepel.
	Latexmentes
	Rendszeres ellenőrzés
	Ne fehéritse
	Árnyékban, függesztve szárítandó
	Felfelé mutató nyíl és szimbólum a berendezés külső oldalán.
	Szimbólum a berendezés külső oldalán.
	GS1 DataMatrix kód, amely a következő információt tartalmazhatja: (01) Globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) (11) Gyártás dátuma (21) Sorozatszám

Biztonsági utasítások

Emelés előtt vegye figyelembe a következőket:

- A beteggondozó intézményen ill. szervezeten belül egy felelős személynek kell eldöntenie azt minden egyedi esetre vonatkozólag, hogy az adott esetben a gondozáshoz egy vagy több ápolóra van-e szükség.
- Ügyeljen arra, hogy a kiválasztott hám a beteg szükségleteinek megfelelő típusú, méretű, anyagú és kialakítású legyen.
- Ellenőrizze le a betegemelőn található vészleeresztő szervet, és győződjön meg annak megfelelő működéséről.
- Állítsa be a maximális magasságot úgy, hogy lehetetlenné tegye a betegnek a túlságosan magasra történő emelését.
- Biztonsági és tisztasági okokból kifolyólag minden betegnél saját, személyes hámot használjon.
- Emelés előtt tervezze meg az emelési műveletet azért, hogy végrehajtása a lehető legbiztonságosabban és zökkenőmentesen megtörténhessen.
- Emelés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az emelőtartozékok függőlegesen fel vannak függesztve és mozgásukat semmi sem korlátozza.
- Habár a Liko akasztórúdjai biztonsági zárnyelvek találhatók, fordítson külön figyelmet a következőkre: a betegnek az alsó felületről történő felemelése előtt, de miután a hevederek már teljesen megfeszültek, győződjön meg arról, hogy a hevederek megfelelően rá vannak-e akasztva az akasztórúd kampóira.
- A beteget soha ne emelje annál magasabbra az alsó felülettől, mint amennyire arra az adott emelési és áthelyezési művelet során szükség van.
- Emelési művelet közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a beteget.
- Ügyeljen arra, hogy emelési vagy szállítási művelet közben a kerekesszéken, ágyon, kerek hordágyon stb. található kerek lefékezett állapotban legyenek.
- Ügyeljen arra, hogy ésszerű erőfeszítés kifejtésével dolgozzon. Használja fel a beteg képességeit arra, hogy a műveletekben ő is aktívan részt vegyen.
- Ha a hám használaton kívül van, akkor azt olyan helyre helyezze, ahol közvetlen napfény nem érheti.

Ha nem rögzítik megfelelően a hámot az akasztórúdhhoz, a beteg súlyosan megsérülhet.

I. osztályba sorolt orvostechnikai eszköz

SZABADALOM www.hillrom.com/patents

A termékre egy vagy több szabadalom vonatkozhat. Lásd a fenti internetes címet.

Az Európában, az Egyesült Államokban és máshol bejegyzett szabadalmak illetve szabadalmaztatás alatt álló elemek tulajdonosai a Hill-Rom vállalatok.

Termékmódosítások

A Liko termékei állandó fejlesztés alatt állnak. Ezen oknál fogva fenntartjuk számunkra a termékek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Ha a termékek továbbfejlesztésével kapcsolatos tanácsokra vagy információkra van szüksége, lépjen kapcsolatba a helyi Hill-Rom forgalmazóval.

Design and Quality by Liko in Sweden

A Liko az ISO 9001 szabványnak és az orvostechnikai eszközök gyártásával kapcsolatos ISO 13485 szabványnak megfelelő minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik. A Liko ezen kívül megfelel az ISO 14001 környezetvédelmi szabvány rendelkezéseinek is.

Tájékoztatás EU-s felhasználók és/vagy betegek számára

A jelen eszközzel kapcsolatos minden súlyos balesetet jelenteni kell a gyártónak, valamint azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó és/vagy a beteg tartósan le van telepedve.

Ápolás és karbantartás

A hámot minden használat előtt vizsgálja meg. Vizsgálja meg a következő elemeket, hogy azok kopottak vagy sérültek-e:

- szövet
- hevederek
- varrás
- hurkok
- csatok

⚠ Sérült emelőtartozékokat ne használjon.

Ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a forgalmazóval.

Ha a hámot fürdetéskor vagy zuhanyzáskor használják: Fürdőszobai vagy tisztálkodási helyzeteket követően a hámot úgy kell elhelyezni, hogy az minél hamarabb megszáradjon.

Mosási utasítások: Lásd a hámon található termékcímkét és a „Liko hámok ápolása és karbantartása” függelékét. A 64-es modell biztonsági csatjait mosás során le kell zárni.

Rendszeres ellenőrzés

A termék minőségét félévente legalább egyszer ellenőrizni kell. Ennél gyakoribb ellenőrzésekre is szükség lehet, ha a termékek a megszokottnál gyakrabban vannak használva, illetve mosva. Az eljárásokért forduljon a Hill-Rom képviselőjéhez.

Várható élettartam

60-as modell Rendeltetésszerű használat esetén a termék várható élettartama 1–5 év.

64-es modell Rendeltetésszerű használat esetén a termék várható élettartama 1–5 év.

A várható élettartam időtartama a szövetől, a használat gyakoriságától, a mosási módszertől és a hordozott súlytól függ.

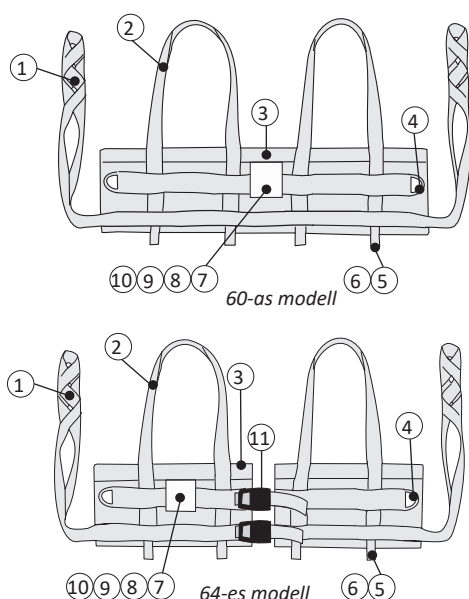
Újrahasznosítással kapcsolatos utasítások

A teljes hámot, beleértve a léceket, a párnázóanyagot stb. éghető hulladékként kell besorolni.

A Hill-Rom vizsgálja az eszközök biztonságos kezelésének és ártalmatlanításának módját, és ezzel kapcsolatban útmutatást ad a felhasználóknak a sérülések elkerülése érdekében, ideértve többek között a bőrt érő vágásokat, szúrásokat és horzsolásokat. Emellett a Hill-Rom az orvostechnikai eszköz használat utáni és ártalmatlanítás előtti kötelező tisztítására és fertőtlenítésére vonatkozóan is iránymutatást ad. Az ügyfelek kötelesek az orvostechnikai eszközökre és tartozékokra vonatkozó minden szövetségi, állami, regionális és/vagy helyi törvénynek és szabályozásnak megfelelően eljárni.












Ha kétségei vannak, akkor az eszköz felhasználójának először fel kell vennie a kapcsolatot a Hill-Rom műszaki támogatásával a biztonságos leselejtezési protokollokkal kapcsolatos útmutatásért.

Definíciók




1. Hurkolt hevederek
2. Vállhevederek
3. Felső szegély
4. D-gyűrűk
5. Hurkok a beülő hevederhez
6. Méretjelzés
7. Termékcímke
8. Sorozatszám
9. Címke: Rendszeres ellenőrzés
10. Címke: Személyes jelzés (Tulajdonos)
11. Biztonsági csatok

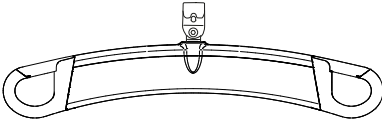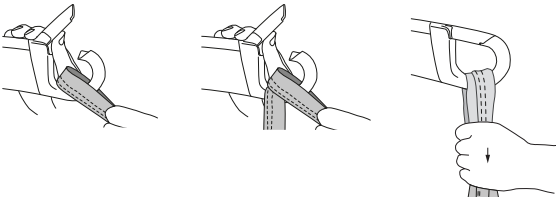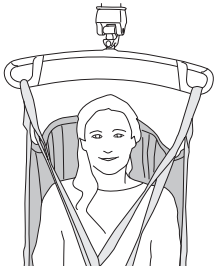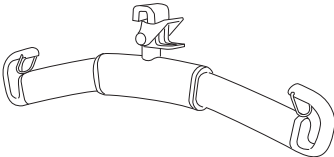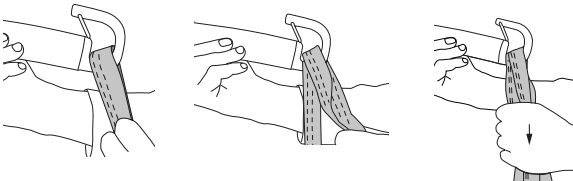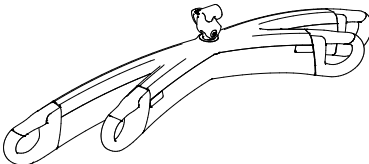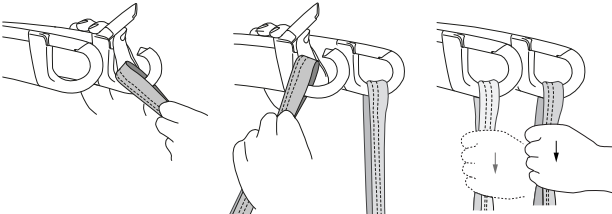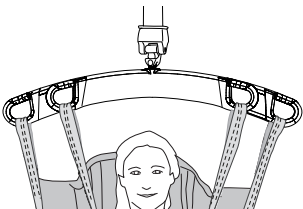
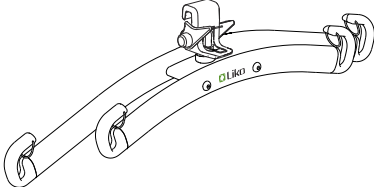
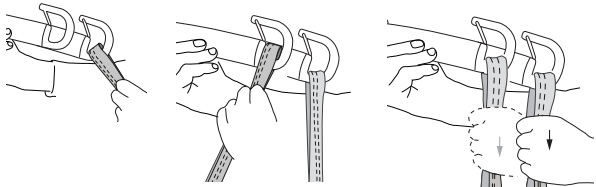
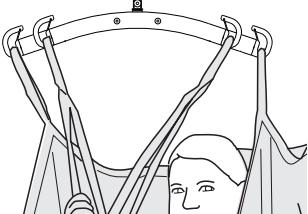
Hámok felhelyezése különböző típusú akasztórudakra

Akasztórúd	Hevederek felhelyezése az akasztórúd kampóira	Helyes
 SlingGuard™		
 Universal		
 SlingGuard™ Twin		
 Universal Twin		

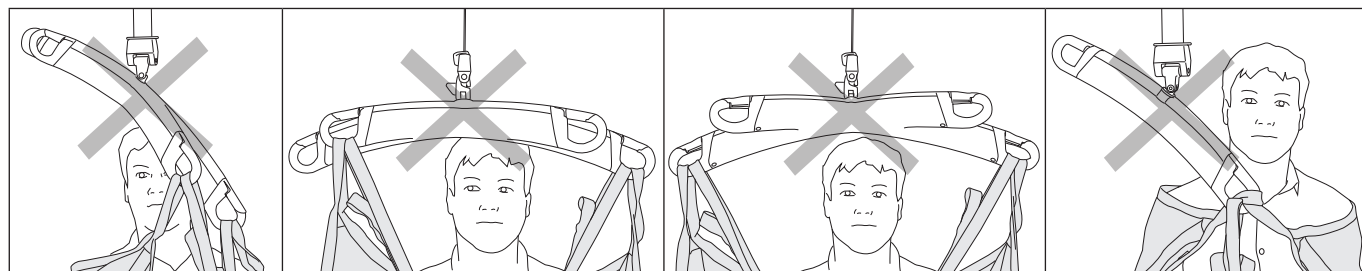
Helytelen!



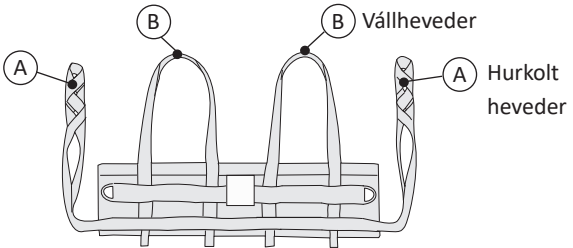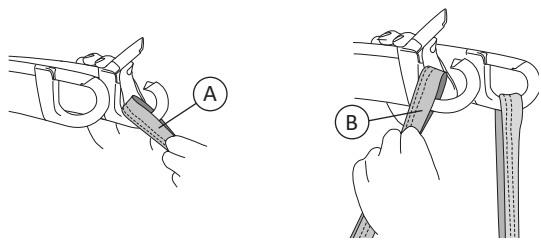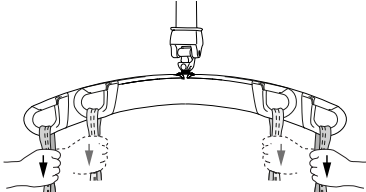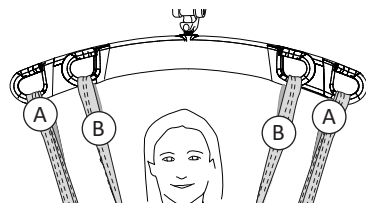A MasterVest felhelyezése Twin Bar akasztórudakra

 B Vállheveder A Hurkolt heveder	1. 
2. 	3. 

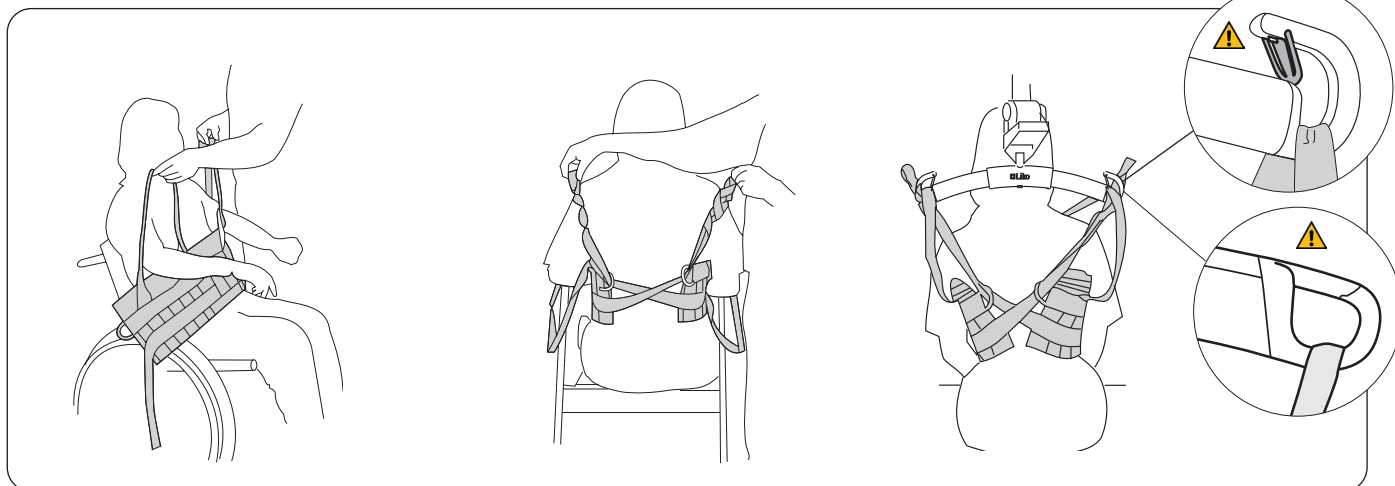
Emelés ülő helyzetből



Helyezze fel a mellkasra a MasterVest hámot. A beteg kezét húzza keresztül a vállhevedereken.

Hátul: Vezesse át a hát mentén mindkét hurkolt hevedert, majd az ábrán látható módon húzza át mindkettőt a szemközti fém D-gyűrűn.

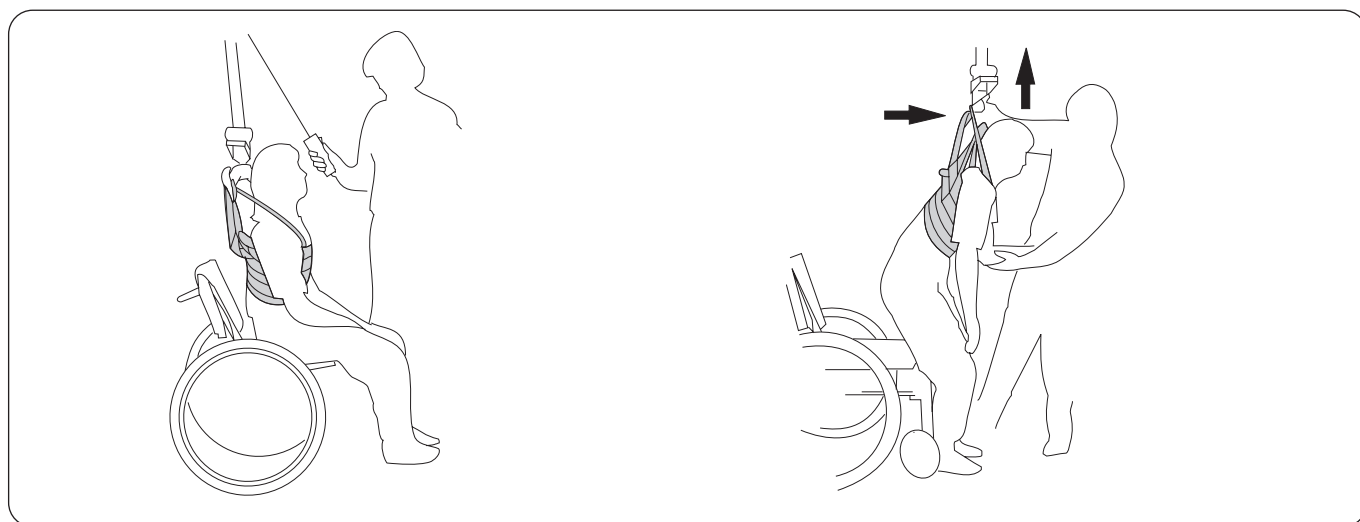A megfelelő hurok kiválasztásával erősítse fel a hurkolt hevedert úgy, hogy közben az akasztórúd a beteg háta mögött helyezkedjen el, lásd 9–10. oldal. Helyezze fel a vállhevedereket az akasztórúdra. A 6–7. oldalon talál útmutatást azzal kapcsolatban, hogy hogyan rögzítse a hám hevederjeit a különböző típusú akasztórudakra.




Emelés előtt: Ellenőrizze, hogy a beteg lába szilárdan a padlón van-e, és elbírja a súlyt az akasztórúd felemelésekor. Emelje meg kissé az akasztórúdat a hevederek meghúzásához (anélkül, hogy felemelné a beteget a székről), és ellenőrizze, hogy a beteg felsőteste körüli nyomáeloszlás megfelelő-e.

Emelés közben: Húzza előre az akasztórúdat a beteg testsúlyának egyenletes áthelyeződéséhez, amíg a beteg függőleges és kiegyensúlyozott helyzetben nem lesz. Kissé engedje le az akasztórúdat, hogy enyhítse a mellkasra nehezedő nyomást. Ezután a betegnek lehetősége lesz arra, hogy terhelje lábait, és egyensúlyt fejlesztő edzést végezzen.

A Liko MasterVest megfelelőségének ellenőrzése

Megfelelő méret kiválasztása

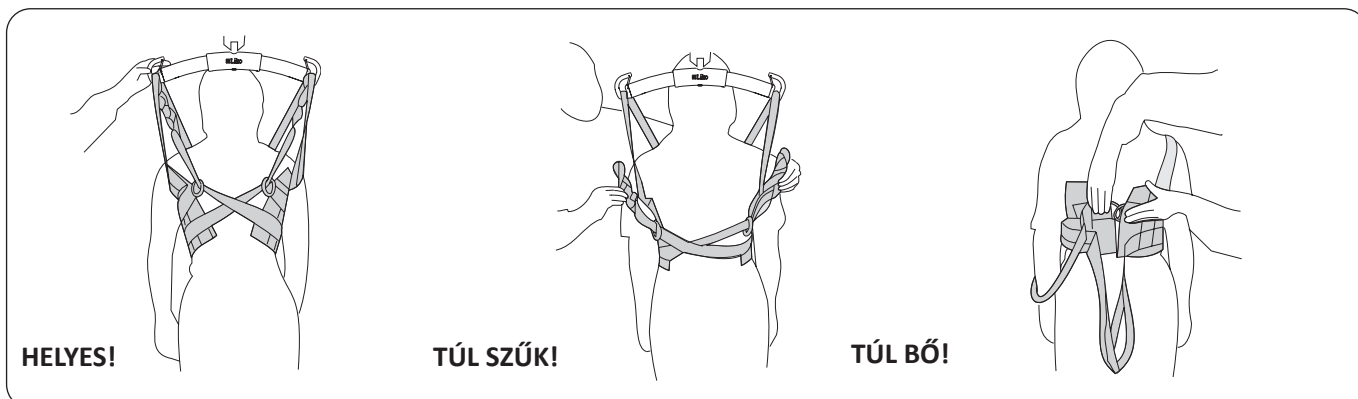Ahhoz, hogy a MasterVest hám megfelelően be tudja tölteni a feladatát, a hám szélességének arányosnak kell lennie a beteg felsőtestének méreteivel. Fontos tehát megfelelő méretű hámot választani és körültekintően megválasztani azt a hurkot a hurkolt hevederen, amely a beteg testméretének is megfelel.



A méret akkor megfelelő, ha a fém D-gyűrűk 5–30 cm távolságban vannak egymástól. Nagyobb méretű hámok esetén a távolság is nagyobb lehet.

Ha a fém D-gyűrűk közötti távolság túl nagy, ha a hurkolt hevederek nem elég hosszúak ahhoz, hogy az akasztórúdra akaszthatók legyenek, és ha a mellkasra gyakorolt nyomás túl nagy, akkor a használni szándékozott mellény túl szűk.

A méret túl nagy, ha a fém D-gyűrűk egymáshoz érnek. Ha a hám túl széles, és emelés közben nem feszít, hanem felfelé csúszik. Túl bő hám használata esetén a hónalj alatti részre túl nagy nyomás helyeződik.

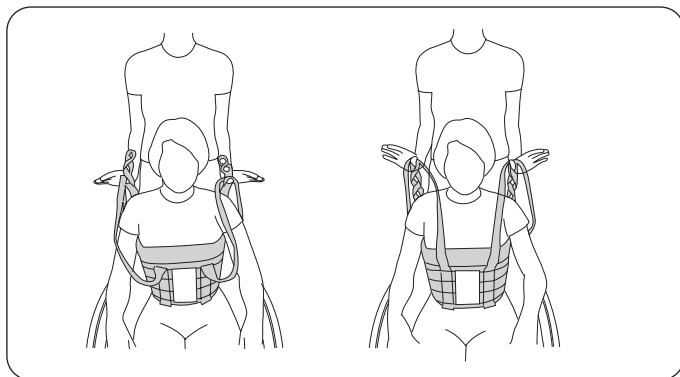
A hurkolt hevederek beállítása

Azt, hogy a hám milyen szorosra fog összehúzódni a mellkason az határozza meg, hogy melyik hurok kerül rá az akasztórúdra. Ha a hám felcsúszik, akkor próbálkozzon egy belsőbb hurokkal vagy kisebb méretű hámmal.

Ha a hám a mellkason túl szorosan feszül, próbálkozzon egy külső hurokkal vagy nagyobb méretű hámmal.

Ha két különböző személy húzza fel ugyanazt a hámot, akkor a karcsúbb személynél egy belső hurok, míg a teltebb személynél egy külső hurok használatára lesz szükség. A MasterVest hám akkor van megfelelően felhelyezve, ha a beteg felemelésekor a vállhevederek és a hurkolt hevederek egyformán feszesek.


A hurkolt hevederek kiválasztása



Ahhoz, hogy ki tudja választani a legmegfelelőbb hurkot, próbálkozzon a hurkolt hevedereken lévő különböző hurkok és a vállhevederek meghúzásával, és így meggyőződhet arról, hogy melyik hurok használata lesz a legmegfelelőbb.


Annak leellenőrzéséhez, hogy a hurkolt hevederen a megfelelő hurkot sikerült-e kiválasztani, álljon a beteg háta mögé, akassza rá a vállhevedereket és a hurkolt hevedereket a hüvelykujjaira majd emelje fel őket addig, amíg a hevederek meg nem feszülnek. A MasterVest hám mérete akkor megfelelő, ha a beteg felemelésekor a vállhevederek és a hurkolt hevederek egyformán feszesek.

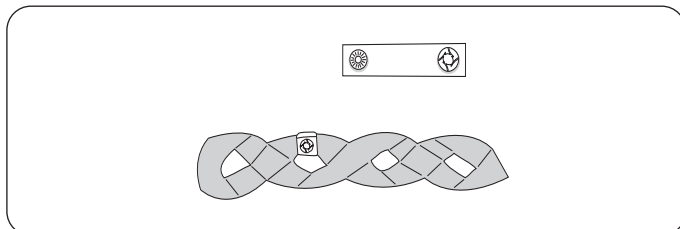Hevederkapcsok



Ezzel a praktikus eszközzel megjelölhető az a hurok, amely egy adott személynél már ki lett próbálva és az ő testméretéhez az alkalmas. Ennek segítségével az ápoló azonnal felismerheti azt, hogy az akasztórúdra melyik huroknak kell felkerülnie.

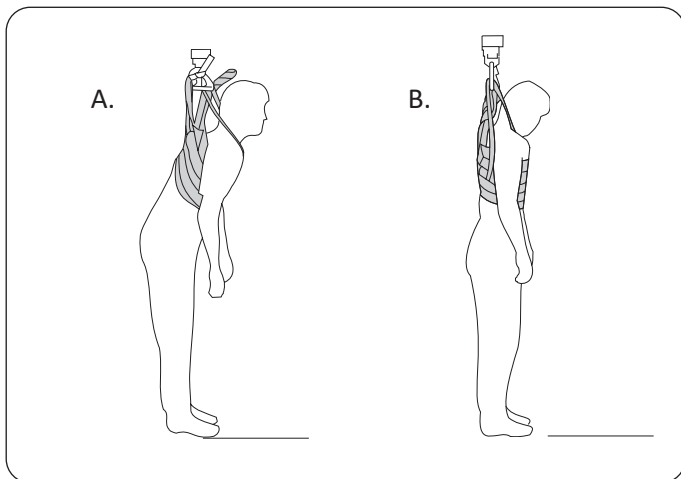Testtartás




Egy személy számára gyakran két különböző méretű MasterVest hám is alkalmas lehet, de úgy, hogy a hurkolt hevedereket mindkét hám esetében az adott mérethez kell igazítani. Az eredmények a testtartásra vonatkozólag és a mellkason eloszló nyomásra nézve lesznek észlelhetőek.

A. Nagyobb méretű MasterVest hám használata esetén a hurkolt heveder egyik belső hurokjának használatára lesz szükség. Az ilyen kialakítás a beteg számára előredőlési lehetőséget nyújt, és ezzel a mellkas alulsó-mellső részére nagyobb nyomás helyeződik.

B. Kisebb méretű MasterVest hám használata esetén a hurkolt heveder egyik külső hurokját kell felakasztani az akasztórúdra ahhoz, hogy mind a négy heveder egyformán feszüljön. Ilyen esetben a testtartás egyenesebb és a nyomás egyenletesebben eloszlik a mellkason.

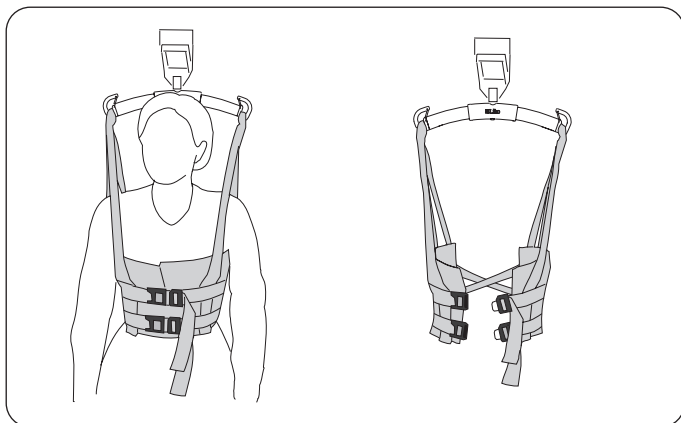Elöl nyitható MasterVest hám, 64-es modell



A MasterVest kapható elől nyitható változatban is.

Az elől nyitható MasterVest hámok mellkasi részén két szabályozható biztonsági kapocs található. A megfelelő hám-méretet és a hurkolt hevederek helyzetét le kell tesztelni akkor is, ha a betegek a MasterVest hámot önmaguk helyezik fel. A MasterVest hám megfelelő beigazítását követően az szabadon lóghat az akasztórúdról, és így a beteg azt a saját testére erősítheti.

Műanyag bevonatos hálóból készült Liko MasterVest

A leggyakoribb méretekben kapható MasterVest hámok rendelkezésre állnak műanyag bevonatos hálóból készült változatban is. Az anyag súrlódási tulajdonsága megakadályozza a hám felcsúszását. A műanyag bevonatos hálóból készült MasterVest hámok fürdetéskor is használhatók.

Teszteléskor jelentkező problémák

Probléma: A hám felcsúszik a beteg karjai alól.

Állítson a MasterVest hám szabályozó elemeinek legalább egyikén a következő javaslatok alapján:

- Egy belső hurok kiválasztásával húzza szorosabbra a hámot.
- Válasszon kisebb méretű hámot.
- Próbálkozzon egy műanyag bevonatos hálóból készült Liko MasterVest hámmal.
- Próbálkozzon a beülő heveder használatával.
- A beteg emelése közben, tartsa rögzítve a hámot úgy, hogy a hüvelykujjával lenyomva tartja a keresztezett hurkolt hevedereket.
- Utasítsa a beteget arra, hogy emelés közben karjait tartsa leengedve.

Tartozékok

Beülő heveder

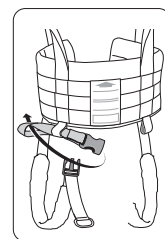
Termékszám: 3666004-06

A Liko MasterVest hámokhoz egy speciális beülő heveder is hozzáerősíthető, amely megakadályozza a háms felcsúszását a testen. Ez már akkor felhelyezhető, amikor a beteg ülő helyzetben van, majd a felemelést követően a beülő heveder a megfelelő pozícióba igazítható és ott szorosra húzható. A beülő hevederen lévő szíjak keresztezhetik egymást vagy párhuzamosan vonulhatnak át a lágyéki részen.

MEGJEGYZÉS: A beülő heveder a 736166-as sorozatszámú hámtól kezdve használható. A korábbi modellekkel kapcsolatos további információkért forduljon a helyi Hill-Rom forgalmazóhoz.




A beülő heveder felerősítése



Párnázott tok, vállhevederhez Termékszám: 3666021

A mellső vállhevederek által keltett nyomás enyhítéséhez kiegészítő tartozékként párnázott tokok is kaphatók.

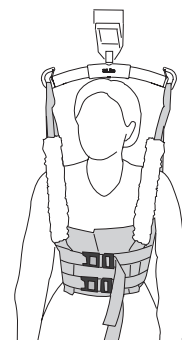
A felhelyezés és levétel megkönnyítéséhez a párnázott tokokon Velcro tépőzárak találhatók.



Hevederkapcsok

Hevederkapcsok, piros, 4 db
Hevederkapcsok, narancs, 4 db
Hevederkapcsok, sárga, 4 db
Hevederkapcsok, kék, 4 db
Hevederkapcsok, fekete, 4 db.

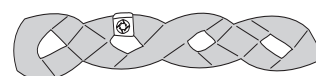
Termékszám: 3666033
Termékszám: 3666034
Termékszám: 3666035
Termékszám: 3666036
Termékszám: 3666037



Extension Loop

Extension Loop, zöld, 12 cm
Extension Loop, zöld, 22 cm
Extension Loop, szürke, 12 cm
Extension Loop, szürke, 22 cm

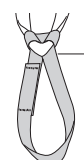Termékszám: 3691102
Termékszám: 3691103
Termékszám: 3691302
Termékszám: 3691303



- 2 = 12 cm
- 3 = 22 cm

A Liko™ MastertVest™ áttekintése, 60-as és 64-es modellek

Termék	Termékszám	Méret	Testtömeg kg ¹	Maximális teherbírás ²
MasterVest 60-as modell	3560113	XS	20–40 kg	200 kg
MasterVest 60-as modell	3560114	S	40–60 kg	200 kg
MasterVest 60-as modell	3560115	M	60–80 kg	200 kg
MasterVest 60	3560116	L	80–100 kg	200 kg
MasterVest 60-as modell	3560117	XL	100–130 kg	300 kg
MasterVest 60	3560118	XXL	> 120 kg	300 kg
MasterVest 64	3564114	S	40–60 kg	200 kg
MasterVest 64	3564115	M	60–80 kg	200 kg
MasterVest 64	3564116	L	80–100 kg	200 kg
MasterVest 64	3564117	XL	100–130 kg	200 kg
MasterVest 64-es modell	3564118	XXL	> 120 kg	200 kg

¹ A beteg súlyára vonatkozó feltüntetett értékek csupán irányadók – eltérések előfordulhatnak.

² Ahhoz, hogy a maximális teherbírás megfeleljen a táblázatban feltüntetett értéknek, azonos maximális teherbírású vagy attól nehezebb terheket is elbíró emelőkre illetve tartozékokra van szükség.

Anyag: A MasterVest poliészter változatban is elérhető.

Javasolt kombinációk

A Liko MasterVest hámok és a Liko akasztórudak javasolt kombinációi:	Mini 220	Sling bar 350 ³	Standard 450	Sling bar 450 ¹	Sling bar 600 ⁴	Twin bar 670 ²
MasterVest, XS	1	1	2	1	3	4
MasterVest, S	2	1	1	1	3	4
MasterVest, M	2	1	1	1	3	4
MasterVest, L	2	1	1	1	3	2
MasterVest, XL	3	1	1	1	2	2
MasterVest, XXL	3	2	1	1	2	2

¹ A SlingBar 450 akasztórúdnál feltüntetett értékek az Universal SlingBar 450 akasztórudakra (termékszám: 3156075, 3156085 és 3156095) valamint a SlingGuard 450 (termékszám: 3308020 és 3308520) akasztórudakra is érvényesek.

² A Twin bars 670 akasztórudaknál feltüntetett értékek a Universal TwinBar 670 akasztórudakra (termékszám: 3156077 és 3156087), valamint a SlingGuard 670 Twin (termékszám: 3308040 és 3308540) akasztórudakra vonatkoznak.

³ A Sling bar 350 akasztórúdnál feltüntetett értékek a Universal SlingBar 350 (termékszám: 3156074, 3156084 és 3156094) akasztórúdra vonatkoznak.

⁴ A Sling bar 600 akasztórúdnál feltüntetett értékek a Universal SlingBar 600 (termékszám: 3156076 és 3156086) akasztórúdra vonatkoznak.

Magyarázat: 1 = Javasolt, 2 = Használható, 3 = Nem javasolt, 4 = Alkalmatlan

A különböző hosszúságú akasztórudak használatával a mellkasra gyakorolt nyomás is más lesz. Próbálkozzon a különféle párosításokkal addig, amíg megtalálja az adott személy számára a leginkább alkalmas kombinációt.

Más kombinálási lehetőségek

A Liko MasterVest hámok a Cross-bar és Cross-bar 450/670 keresztrudakkal vagy a Side bars akasztórudakkal együtt nem használhatók.

A Liko által jóvá nem hagyott és nem javasolt termékek illetve tartozékok kombinációi veszélyeztethetik a beteg biztonságát.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Svédország
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers

Hill-Rom