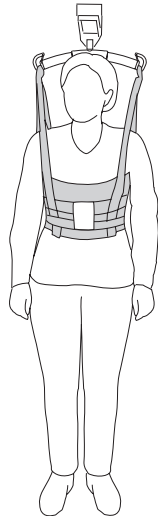



# Liko MasterVest, model 60, 64




## Gebruiksaanwijzing



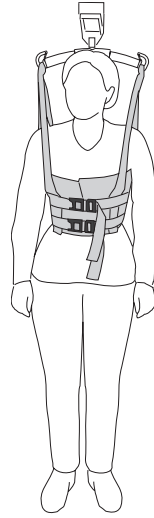model 60



model 64

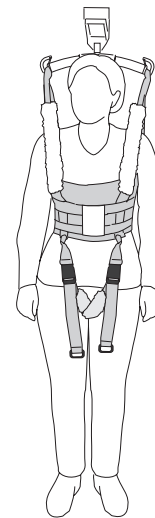

model 60  
met Leg Harness en  
gecapitonneerde stukken

## Productbeschrijving

### Beoogd gebruik

Bedoeld voor gebruik in de volgende omgevingen: gezondheidszorg, intensive care, spoedeisende hulp, revalidatie, rehabilitatie en thuiszorg.

Het **Liko** MasterVest is een veelzijdige tilband met een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld hulp bij het staan en lopen of naar het toilet gaan.

Het MasterVest ondersteunt de patiënt rond het bovenlichaam en onder de armen. Voor het MasterVest is het wel vereist dat patiënten gedeeltelijk zelf hun gewicht op hun eigen benen kunnen dragen.

Met het **Liko** MasterVest kunt u bepaalde moeilijk te realiseren doelen bereiken, bijvoorbeeld:

- patiënten krijgen de juiste hulp bij oefeningen en het dragen van hun gewicht op hun eigen benen, en
- zorgverleners vermijden risico's die gepaard gaan met zwaar tillen.

Patiënten tillen en van en naar het toilet brengen kan bij de zorgverlener tot ernstig letsel leiden. Het MasterVest zorgt voor een soepele en eenvoudige transfer van en naar het toilet.

Aangezien het MasterVest alleen het bovenlichaam bedekt, is het onderlichaam gemakkelijk toegankelijk voor aan- en uitkleden.

### MasterVest met voorsluiting, model 64

De uitvoering met voorsluiting van het **Liko** MasterVest, model 64 kan worden gebruikt voor patiënten die het vest zelf kunnen aan- en uittrekken.

Het MasterVest met voorsluiting is voorzien van twee verstelbare veiligheidsgespen over de borst. Deze worden ook aanbevolen in gevallen waarin het nodig is om de spanning aan te passen en de druk op de borst te regelen.

### MasterVest met Leg Harness

Het Leg Harness houdt het MasterVest op zijn plaats en wordt vaak gebruikt bij looptrainingen.

### Geschikte liften

Het MasterVest kan met alle plafondliften en mobiele liften van **Liko** worden gebruikt. U kunt kiezen uit de **LikoGuard**-plafondlift, de **Likorall**-plafondlift en de **Multirall**-plafondlift of de **Golvo** mobiele lift, de **Viking** mobiele lift, de **Uno** mobiele lift en de **Liko M220/M230** mobiele lift.

*In dit document wordt de persoon die wordt opgetild de patiënt genoemd en de persoon die hierbij helpt de zorgverlener.*

### BELANGRIJK!

Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met een bepaald risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzing voor zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzing begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door een getrainde zorgverlener. Voor de training moet een zorgverlener de gebruiksaanwijzing lezen en begrijpen. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn voor de lift die u wilt gebruiken. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. U moet weten of de patiënt het tillen aankan. Neem contact op met de fabrikant of de leverancier als er iets onduidelijk is.

# Inhoudsopgave

Beoogd gebruik .....	1
Veiligheidsinformatie .....	3
Verklaring van symbolen .....	4
Verzorging en inspectie .....	5
Definities .....	5
De juiste tilbandmaat kiezen .....	6
Afmetingen .....	7
Instructies voor het bevestigen van een MasterVest aan verschillende tiljukken .....	8
Instructies voor het bevestigen van een MasterVest aan een twinbar .....	9
Tillen vanuit een zittende positie .....	10
Het <b>Liko</b> MasterVest testen .....	11
Aanbevolen tilaccessoires .....	13
Optionele onderdelen .....	13
Overzicht <b>Liko</b> MasterVest, model 60, 64 .....	14
Aanbevolen combinaties .....	14

# Veiligheidsinformatie


## Houd vóór het tillen rekening met het volgende:

- Een verantwoordelijke persoon binnen uw organisatie moet per geval besluiten of er een of meerdere zorgverleners nodig zijn.
- Zorg ervoor dat de gekozen tilband wat betreft model, maat, materiaal en ontwerp voldoet aan de behoeften van de patiënt.
- Test het nooddaalapparaat op de lift die u gebruikt om er zeker van te zijn dat deze goed werkt.
- Pas de maximale hoogte aan zodat het onmogelijk is om een patiënt te hoog te tillen.
- Was de tilband na elk gebruik om de veiligheid van de patiënt en de hygiëne te waarborgen.
- Plan het tillen voordat het wordt uitgevoerd zodat het zo veilig en soepel mogelijk verloopt.
- Controleer vóór het tillen of het tilaccessoire verticaal hangt en vrij kan bewegen.
- Hoewel de tiljukken van Liko zijn voorzien van clips moet er toch voorzichtig worden gewerkt: controleer, voordat de patiënt daadwerkelijk getild wordt maar terwijl de banden gestrekt zijn, of de lussen correct aan de haken van het tiljuk zijn bevestigd.
- Til een patiënt nooit hoger dan nodig is voor het verplaatsen.
- Controleer of de wielen van de rolstoel, het bed, de brancard enzovoort tijdens het tillen/verplaatsen op de rem staan.
- Werk altijd ergonomisch. Maak gebruik van de mogelijkheden van de patiënt om de patiënt actief aan de verplaatsing te laten meewerken.

 Een onjuiste bevestiging van de tilband aan het tiljuk kan ernstig letsel bij de patiënt veroorzaken.

 Het handmatig draaien van de patiënt in bed kan letsel bij de zorgverlener veroorzaken.

 Zorg ervoor dat de patiënt en de zorgverlener tijdens het tillen uit de buurt blijven van knelpunten en bewegende delen.  
Er bestaat verwondingsgevaar.

 Controleer of de patiënt risico loopt op beknelling en houd de patiënt goed in de gaten. Zorg ervoor dat het hoofd en de ledematen van de patiënt zich tijdens het tillen niet in of tussen de lussen van de tilband bevinden. Als een of meer van deze instructies niet wordt nageleefd, kan dat tot ernstig of dodelijk letsel leiden.

 Als een tilband versleten is, ongelijk wordt aangebracht of niet zorgvuldig wordt verwijderd, kan dit leiden tot beknelling of licht letsel.


 De tilband mag niet worden gebruikt, opgeborgen of vervoerd in de buurt van huisdieren, ongedierte of kinderen zonder toezicht!

 Laat een patiënt die is opgetild nooit zonder toezicht achter.

 Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van de tilband.

 Bewaar de tilband niet op een plek waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals een radiator, een open haard of een fornuis/oven!

 De tilband is niet getest voor gebruik in een MRI-omgeving (Magnetic Resonance Imaging). Verplaats de patiënt naar een compatibel ligvlak voor het uitvoeren van een MRI en verwijder het product uit de MRI-ruimte.

 Medisch hulpmiddel, productklasse I

**OCTROOI [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Kan beschermd zijn door één of meer octrooien. Raadpleeg de bovenstaande website.**

De Hillrom-ondernemingen zijn eigenaar van Europese, Amerikaanse en andere octrooien en aangevraagde octrooien.

## Productwijzigingen

Liko-producten worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw Hillrom-vertegenwoordiger voor advies en informatie over upgrades van producten.

## Design and Quality by Liko in Sweden






























Liko is gecertificeerd volgens ISO 9001 en de variant voor producenten van medische hulpmiddelen ISO 13485. Liko is ook gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001.

## Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie in de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

## Verklaring van symbolen

Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Waarschuwing: deze situatie vereist extra zorg en aandacht. Dit symbool is een gele driehoek met een zwarte rand en een zwart uitroepteken in het midden.		
	Recyclebaar		
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing. Dit symbool is een blauwe cirkel met een witte afbeelding van een persoon die een boek leest.		
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing		<b>Let op!</b> Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
	CE-markering. Conformiteitsmarkering voor medische hulpmiddelen in de Europese Unie, medisch hulpmiddel van klasse I.		
	Geautoriseerde vertegenwoordiger in Zwitserland.		
	Wettelijke fabrikant		Productiedatum
	Productidentificatie		Medisch hulpmiddel
	Serienummer		Unieke hulpmiddelidentificatie
	Niet stomen		Drogen aan de waslijn in de schaduw
	Niet strijken		Niet bleken
	Drogen in de droogtrommel		Niet wassen
	Niet drogen in de droogtrommel		
	Wassen Dit symbool wordt altijd weergegeven in combinatie met de aanbevolen temperatuur in °C en °F.		
	Latexvrij		
	Periodieke inspectie		
	Product niet gebruiken (alleen bij Solo-producten en alleen zichtbaar na wassen wanneer het gebruik verboden is)		Naam patiënt
	Voor gebruik bij één patiënt (alleen bij Solo-producten)		
	Naar boven gericht en symbool aan de buitenkant van de apparatuur.		Symbool aan de buitenkant van de apparatuur.
 (01) 0100887761997127 (11) JJMMDD (21) 012345678910	GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten: (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer		

## Verzorging en inspectie

Controleer de tilband vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigen:

- materiaal
- banden
- zomen
- lussen
- gespen

**⚠ Gebruik beschadigde tilaccessoires niet.**

Neem contact op met de fabrikant of de leverancier als er iets onduidelijk is.

**Als de tilband wordt gebruikt in het bad of de douche:** na gebruik in het bad en de douche moet de tilband zo worden geplaatst dat deze zo snel mogelijk droogt.

**Instructies voor wassen en desinfecteren:** zie hiervoor het productlabel van de tilband en de bijgevoegde bijlage 'Verzorging en onderhoud Liko-tilbanden'. De veiligheidsgespen op model 64 moeten tijdens het wassen gesloten zijn.

**Materiaal:** het MasterVest is gemaakt van polyester.

### Periodieke inspectie

Het product moet ten minste elke zes maanden worden geïnspecteerd. Frequentere inspectie is mogelijk nodig als de producten vaker dan normaal worden gebruikt of gewassen. Voor protocollen kunt u contact opnemen met uw Hillrom-vertegenwoordiger.

### Verwachte gebruiksduur

model 60: het product heeft een verwachte levensduur van vijf jaar bij normaal gebruik.

model 64: het product heeft een verwachte levensduur van vier jaar bij normaal gebruik.

De levensduur is afhankelijk van het materiaal, de gebruiksfrequentie, de wasprocedure en het vervoerde gewicht. Hillrom raadt aan het product alleen tijdens de verwachte gebruiksduur te gebruiken.

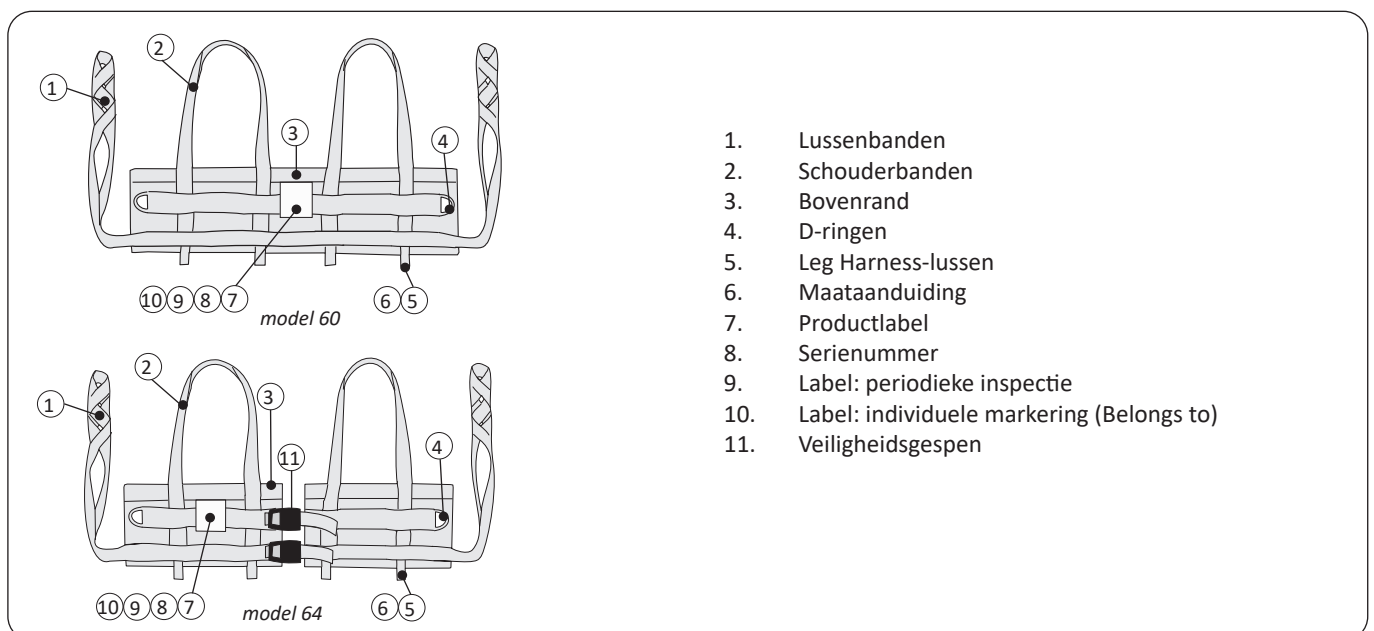
### Recyclinginstructies

De hele tilband, inclusief baleinen, vulmateriaal, enz., moet gescheiden worden afgevoerd als brandbaar afval.

Hillrom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de hulpmiddelen om letsel zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan het afvoeren. Klanten moeten zich houden aan alle nationale, provinciale, gemeentelijke en/of plaatselijke wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.

In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hillrom voor advies over protocollen voor veilig afvoeren.

## Definities




## De juiste tilbandmaat kiezen

**⚠ Gebruik alleen een tilband met de juiste maat voor de patiënt. De juiste maat moet worden beoordeeld door een getrainde zorgverlener. De patiënt kan bekneld raken of stikken.**


Door de omtrek van de patiënt en de vestbreedte van de tilband te meten, kunt u de juiste tilbandmaat kiezen. Vergelijk de meetwaarde van de patiënt (zie de meetinstructies) met de meetwaarde van de tilband (zie de tabel of de meetinstructies).
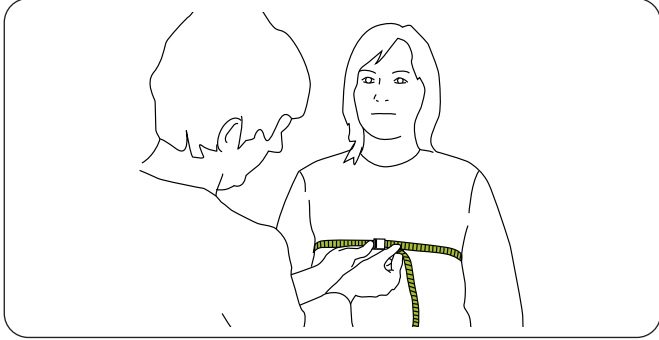
### Meet de borstomtrek van de patiënt als volgt:




Meet de omtrek van de borst van de patiënt (onder de borsten bij vrouwen).

### Meet de vestbreedte van de tilband als volgt:

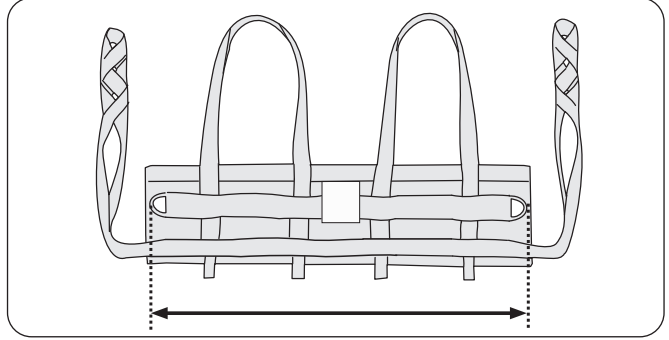


Meet de afstand tussen de uitersten van de metalen lussen. De meting vindt u ook in 'Afmetingen', zie pagina 7.


### De juiste maat kiezen:

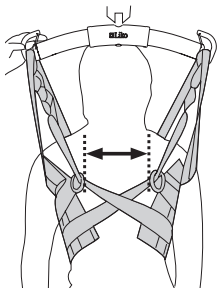

5-30 cm

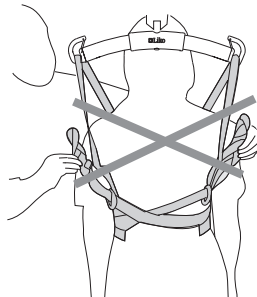


meer dan 30 cm

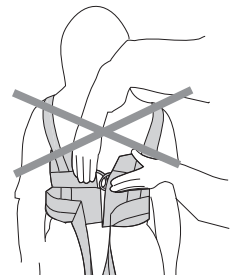

minder dan 5 cm

Kies een tilband met vest waarvan de breedte 5-30 cm minder is dan de borstomtrek van de patiënt. De afstand tussen de metalen lussen moet 5-30 cm zijn wanneer het vest op de patiënt is aangebracht en de schouderbanden volledig zijn aangetrokken. De afstand tussen de metalen lussen kan groter zijn bij grotere tilbanden. Zorg ervoor dat u de juiste maat tilband kiest en pas de lussenbanden zorgvuldig aan.

## Afmetingen

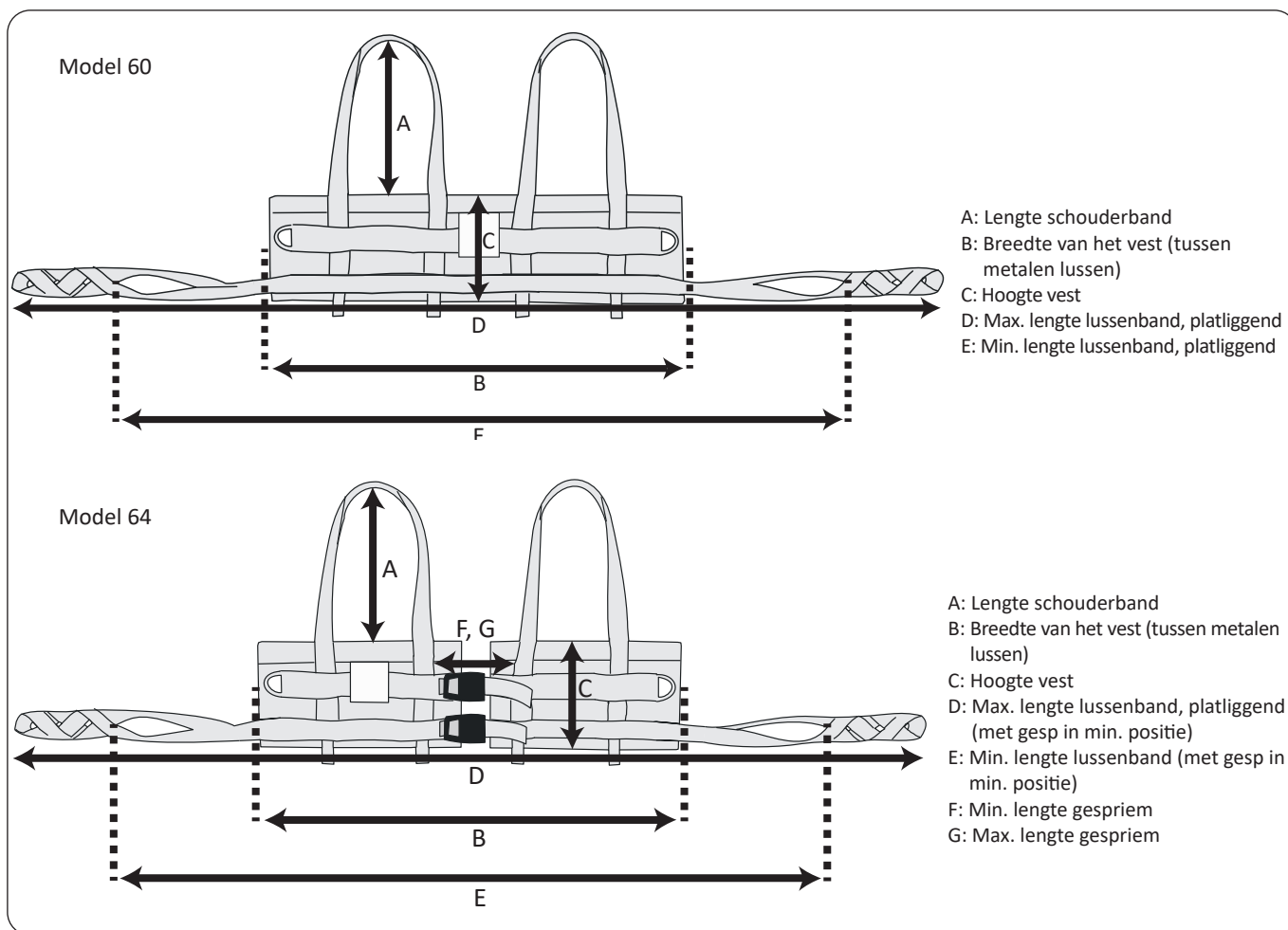

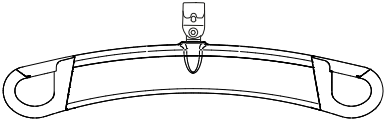
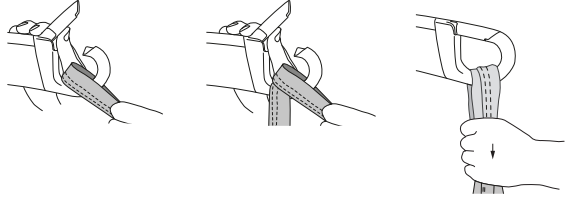
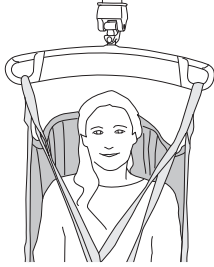
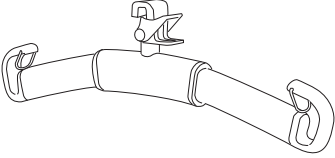
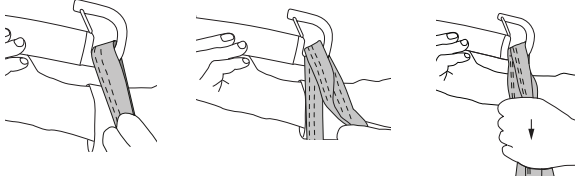

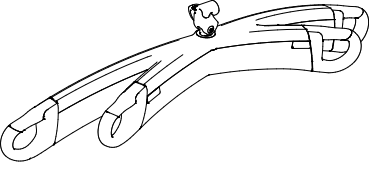
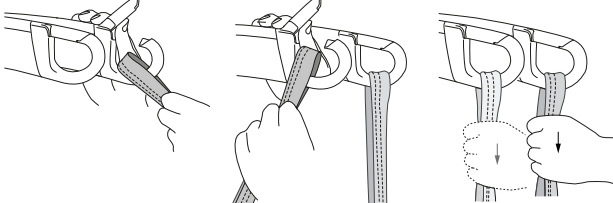
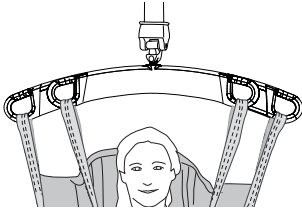
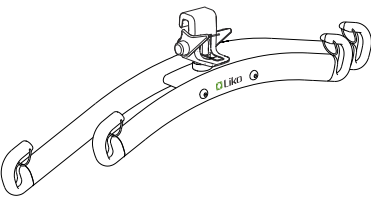
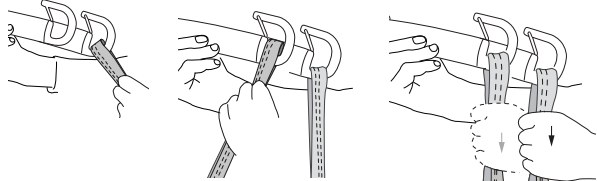
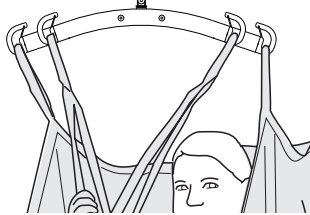
Model 60 afmetingen in centimeter

MAAT	A	B	C	D	E	Maximale belasting (kg)	Productnr.
XS	43	60	18	204	170	200	3560113
S	48	70	23	190	156	200	3560114
M	38	80	23	197	164	200	3560115
L	39	90	22	207	174	200	3560116
XL	39	100	22	233	198	300	3560117
XXL	38	110	23	250	218	300	3560118


Model 64 afmetingen in centimeter

MAAT	A	B	C	D	E	F	G	Maximale belasting (kg)	Productnr.
S	39	70	22	182	149	10	35	200	3564114
M	38	80	22	190	157	11	36	200	3564115
L	38	90	22	201	167	12	39	200	3564116
XL	38	100	23	215	182	17	46	200	3564117
XXL	39	110	22	239	205	16	43	200	3564118

# Instructies voor het bevestigen van een MasterVest aan verschillende tiljukken

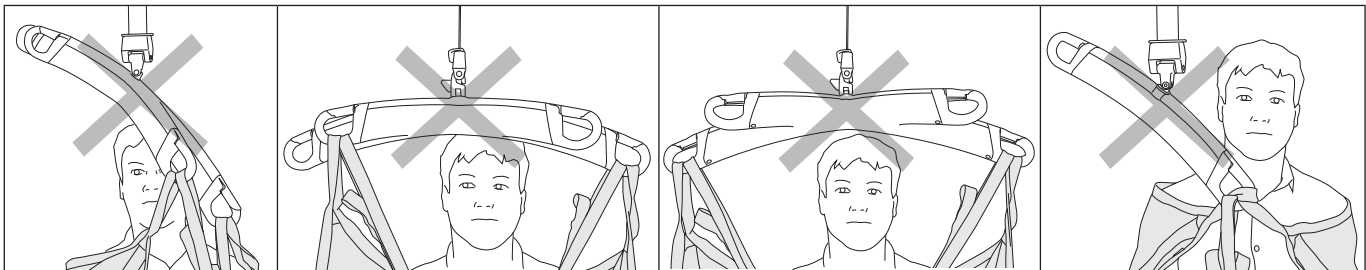
Tiljuk	Tilbandlussen aan tiljukhaken	Goed
 <p data-bbox="207 492 351 526">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="215 784 343 817">Universal</p>		
 <p data-bbox="175 1064 383 1097">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="183 1355 375 1388">Universal Twin</p>		

## Fout!






# Instructies voor het bevestigen van een MasterVest aan een twinbar

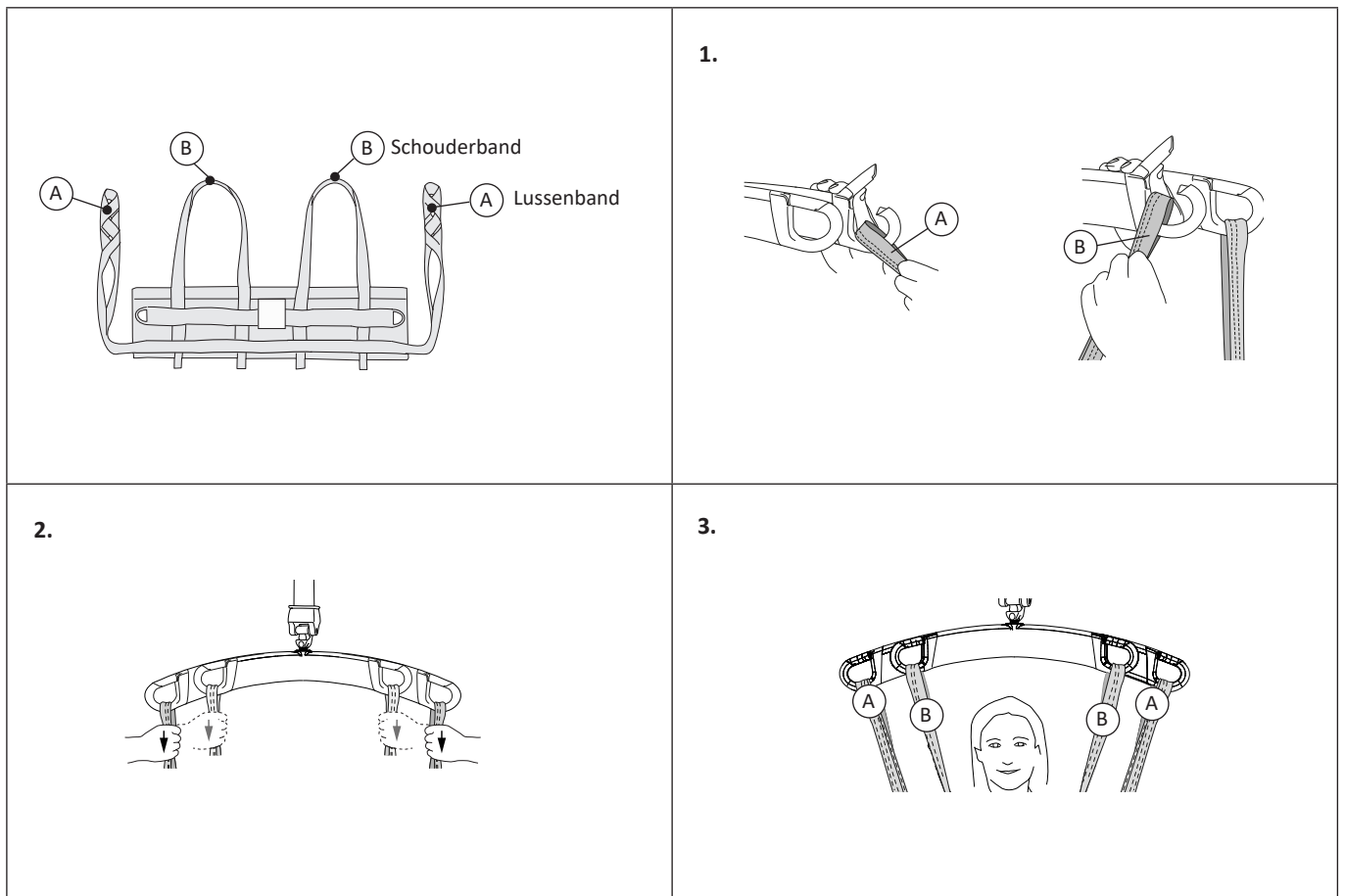


## Tillen vanuit een zittende positie

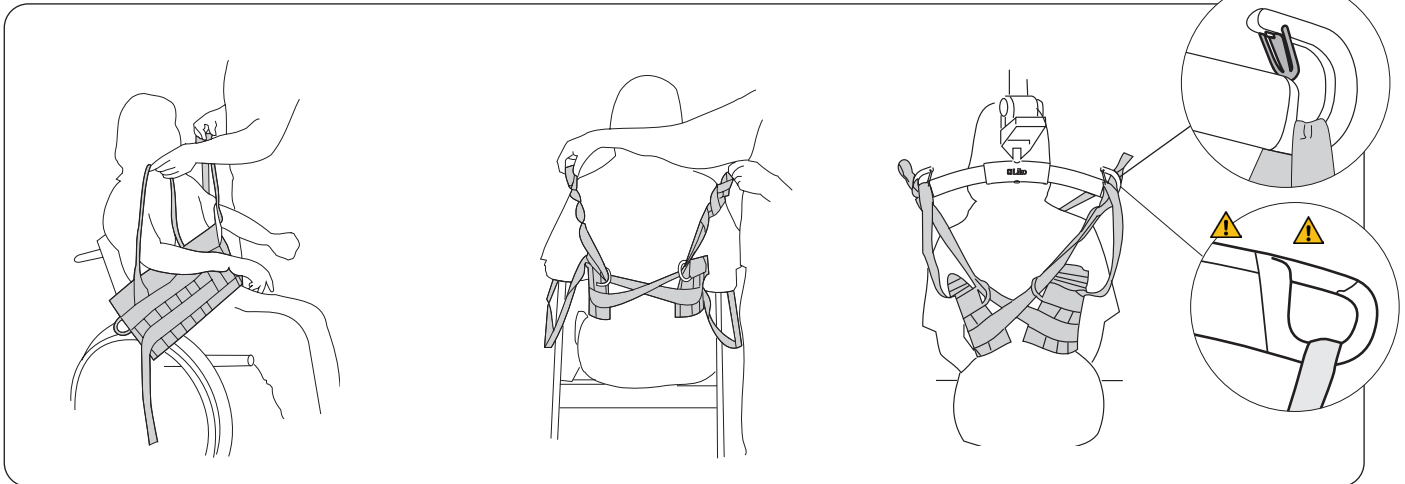

Trek het MasterVest vanaf de voorkant aan. De armen van de patiënt worden door de schouderbanden geleid.

Achter de rug: haal elke lussenbanden over de rug heen en trek deze door de metalen D-ring aan de andere kant, zoals wordt weergegeven in de afbeelding.

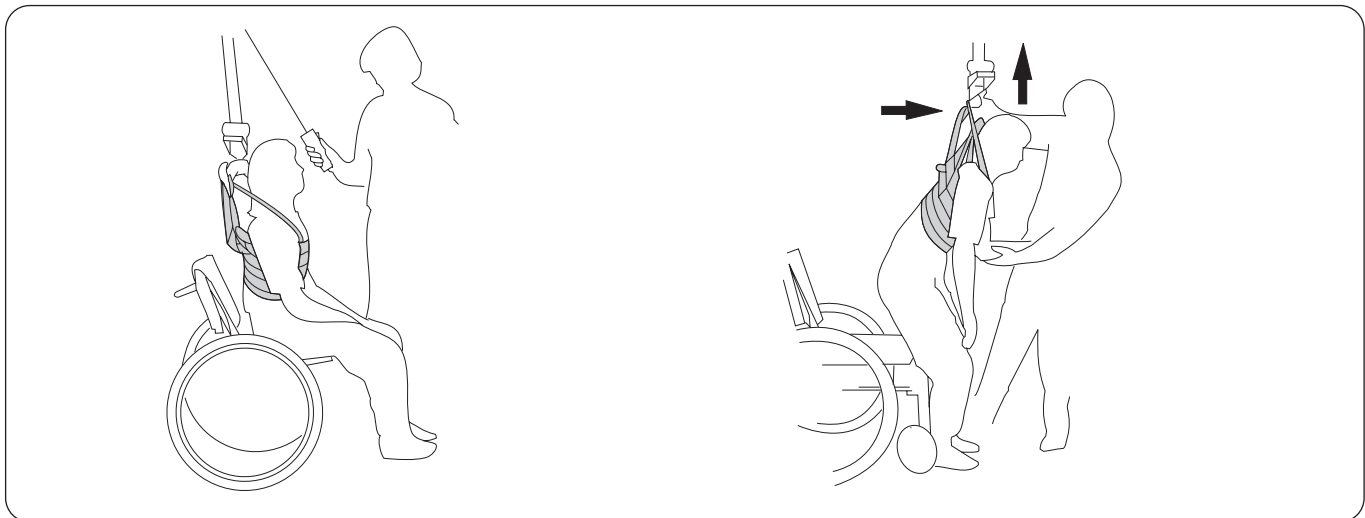Bevestig de lussenbanden met behulp van een geschikte lus, met het tiljuk achter de rug van de patiënt; zie pagina 'Het afstellen van de lussenbanden' op pagina 11-12. Bevestig de schouderbanden aan het tiljuk. Zie pagina 8-9 voor instructies voor het bevestigen van de tilbandlussen aan verschillende tiljukken.



**Vóór het tillen:** controleer of de voeten van de patiënt stevig op de vloer staan, zodat hij/zij gewicht kan dragen als het tiljuk omhoog wordt gebracht. Breng het tiljuk iets omhoog om de banden strak te trekken (zonder de patiënt van de stoel te tillen) en controleer of de drukverdeling rond het bovenlichaam van de patiënt correct aanvoelt.

**Tijdens het tillen:** trek het tiljuk naar voren zodat het gewicht van de patiënt soepel wordt overgebracht totdat hij/zij rechtop staat en in evenwicht is. Laat het tiljuk iets zakken om de druk rond de borst te ontlasten. Nu kan de patiënt gewicht op de benen dragen en beginnen met balanstreining.

# Het LIKO MasterVest testen

## Het afstellen van de lussenbanden

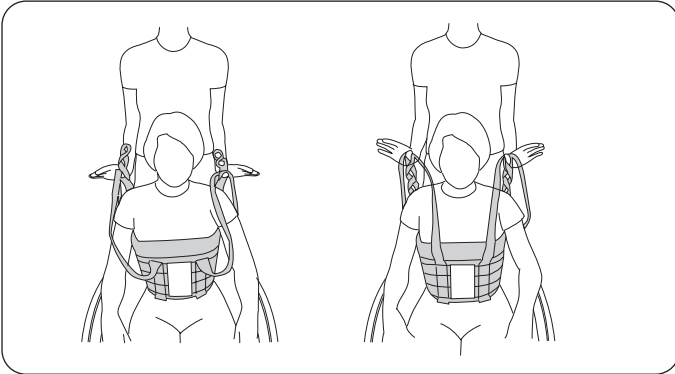
De lus die u aan het tiljuk bevestigt, bepaalt hoe strak het vest rond de borst komt te zitten.

Als het vest omhoog schuift, probeer dan een interne lus of een kleiner vest te gebruiken.

Als het vest te strak om de borst zit, probeer dan een externe lus of een groter vest te gebruiken.

Als twee verschillende mensen dezelfde maat proberen, heeft de slankere persoon een interne lus nodig, terwijl een forsere persoon een externe lus nodig heeft. Het MasterVest is correct afgesteld wanneer de schouderbanden en de lussenbanden even strak zitten wanneer de patiënt wordt opgetild.


## De lussenbanden testen



Om te bepalen welke lussen het beste passen, test u de lussenbanden door verschillende lussen te proberen in combinatie met de schouderbanden.


Om te controleren of de lussenbanden goed zijn bevestigd, gaat u achter de patiënt staan, steekt u uw duimen door de schouderbanden en lussenbanden tilt u deze op tot de banden strak getrokken zijn. Het MasterVest past goed als de lussenbanden en schouderbanden even strak zitten als ze worden opgetild.

## Lusclips

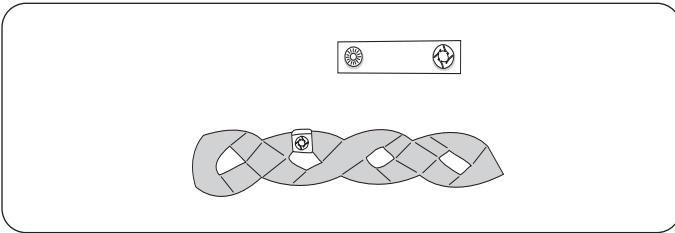

Dit praktische accessoire wordt gebruikt voor het markeren van de lussen die bij een bepaalde persoon goed passen. Hiermee kunnen zorgverleners gemakkelijker de juiste lus kiezen om aan het tiljuk te bevestigen.

## Lichaamshouding

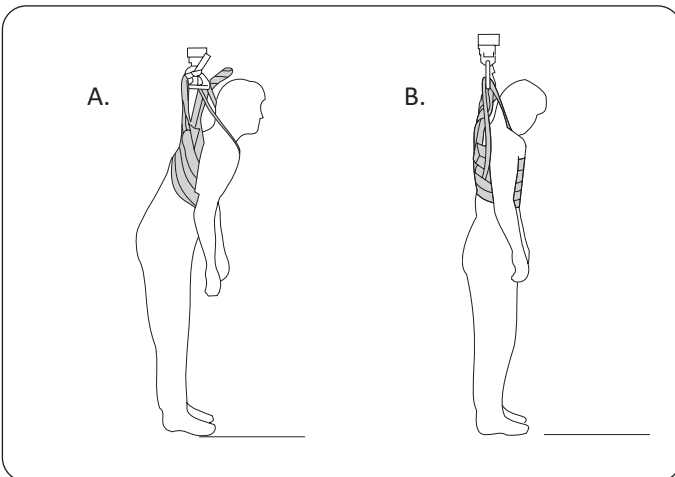


Een persoon kan vaak twee verschillende maten van het MasterVest passen, maar de lussenbanden moeten correct worden aangepast aan elke maat. De resultaten zijn afhankelijk van de lichaamshouding en de drukverdeling rond de borstkas.

A. Voor een grotere maat MasterVest moet u een van de binnenste lussen van de lussenbanden gebruiken. Hierdoor kan de patiënt naar voren buigen en wordt er meer druk uitgeoefend op het onderste voorste deel van de borst.

B. Voor een kleinere maat MasterVest moet u een van de buitenste lussen van de lussenbanden aan het tiljuk bevestigen om gelijke spanning op alle vier de banden te krijgen. In dit geval is de lichaamshouding meer rechtop en wordt de druk gelijkmatiger over de borst verdeeld.



## MasterVest met voorsluiting, model 64

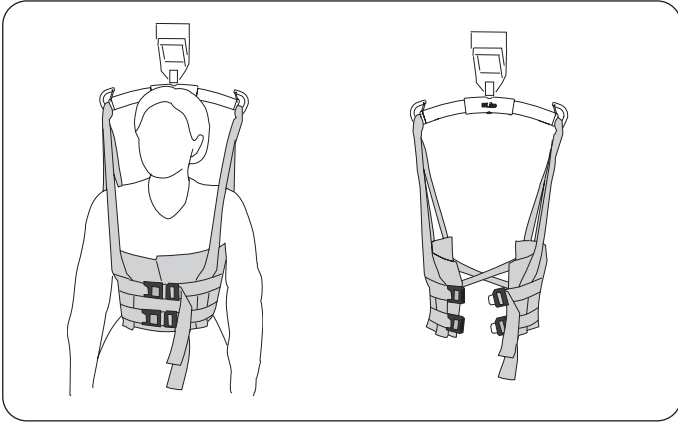

Het MasterVest is ook verkrijgbaar in een uitvoering met voorsluiting.

Het MasterVest met voorsluiting is aan de voorkant voorzien van twee verstelbare veiligheidsgespen. Controleer of de maat van het vest en de positie van de lussenbanden goed zijn, zelfs als de patiënt zelf het MasterVest aantrekt. Nadat het MasterVest correct is afgesteld, kan het aan het tiljuk hangen terwijl de patiënt het aantrekt.

- ⚠️ Zorg ervoor dat de patiënt de gespen zelf kan openen of steun heeft van een zorgverlener om het vest te verwijderen. Zo wordt ongemak voorkomen als het vest niet wordt verwijderd wanneer de activiteit is voltooid.
- ⚠️ Als het leg harness niet is gesloten of als er te veel spanning op de gespen wordt uitgeoefend waardoor deze open gaan, kan het vest omhoog glijden en ongemak veroorzaken.

### Probleem tijdens testen?

**Probleem:** Het vest schuift omhoog onder de oksels van de patiënt.

Stel het MasterVest af met een of meer van de volgende suggesties:


- Pas de lussenbanden aan door een binnenlus te gebruiken.
- Kies een kleinere maat.
- Probeer het Leg Harness te gebruiken.
- Houd het vest achter de rug op zijn plaats terwijl u de patiënt optilt door uw duim omlaag te drukken op de gekruiste lussenbanden.
- Laat de patiënt zijn/haar armen omlaag houden tijdens het tillen.

## Aanbevolen tilaccessoires

### Extension Loop

Extension Loop, groen, 12 cm  
Extension Loop, groen, 22 cm  
Extension Loop, grijs, 12 cm  
Extension Loop, grijs, 22 cm

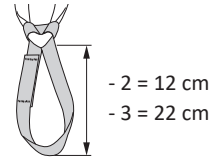productnr. 3691102  
productnr. 3691103  
productnr. 3691302  
productnr. 3691303




## Optionele onderdelen

### Leg Harness

productnr. 3666004-06

Met het **Liko** MasterVest kan een speciaal Leg Harness worden gebruikt om te voorkomen dat het vest omhoog glijdt over het lichaam. Het harnas kan worden aangetrokken terwijl de patiënt zit, en na het optillen van de patiënt kunt u de positie en spanning van het harnas aanpassen. De harnasbanden kunnen gekruist of parallel door het kruis lopen.

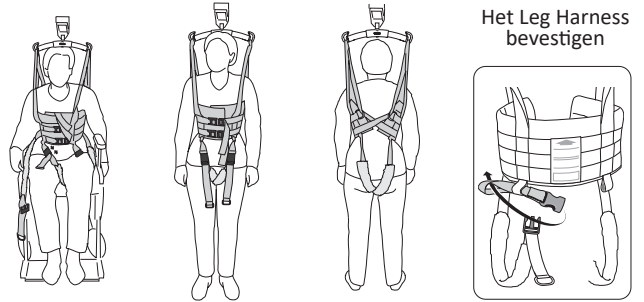LET OP! Het Leg Harness past op vesten vanaf serienummer 736166. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hillrom voor meer informatie over eerdere modellen.




### Gecapitonnerde stukken voor schouderband

productnr. 3666021

Er zijn gecapitonnerde stukken leverbaar als accessoire om de druk op de voorste schouderbanden te verlichten.

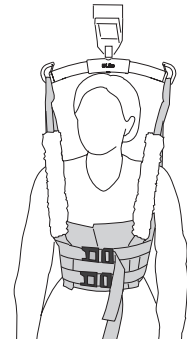
De gecapitonnerde stukken zijn op een zijde voorzien van een klittenband en zijn daardoor gemakkelijk aan te brengen.



### Lusclips

Lusclips, rood, 4 stuks  
Lusclips, oranje, 4 stuks  
Lusclips, geel, 4 stuks  
Lusclips, blauw, 4 stuks  
Lusclips, zwart, 4 stuks

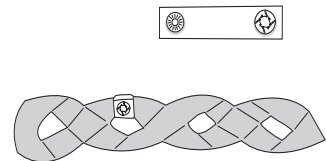productnr. 3666033  
productnr. 3666034  
productnr. 3666035  
productnr. 3666036  
productnr. 3666037



## Overzicht LIKO MasterVest, model 60, 64

Product	Productnr.	Maat	Lichaamsgewicht <sup>1</sup>	Maximale belasting <sup>2</sup>
MasterVest, model 60	3560113	XS	20-40 kg	200 kg
MasterVest, model 60	3560114	S	40 - 60 kg	200 kg
MasterVest, model 60	3560115	M	60 - 80 kg	200 kg
MasterVest, model 60	3560116	L	80-100 kg	200 kg
MasterVest, model 60	3560117	XL	100-130 kg	300 kg
MasterVest, model 60	3560118	XXL	120-300 kg	300 kg
MasterVest, model 64	3564114	S	40 - 60 kg	200 kg
MasterVest, model 64	3564115	M	60 - 80 kg	200 kg
MasterVest, model 64	3564116	L	80-100 kg	200 kg
MasterVest, model 64	3564117	XL	100-130 kg	200 kg
MasterVest, model 64	3564118	XXL	120-200 kg	200 kg

<sup>1</sup> Het aangegeven patiëntgewicht is slechts een richtlijn. Afwijkingen zijn mogelijk.

<sup>2</sup> Om de maximale belasting te behouden, moeten liften/accessoires met dezelfde of een hogere maximale belasting worden gebruikt.

### Aanbevolen combinaties

Aanbevolen combinaties met het Liko MasterVest met Liko-tiljucken:	Mini 220	Universal SlingBar 350	Standard 450	Universal SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 600	Universal Twinbar 670	SlingGuard 670
MasterVest, XS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Toelichting:** ✓ = aanbevolen

Hoewel deze tabel als richtlijn dient, is het belangrijk om te erkennen dat bepaalde combinaties van tilbanden en tiljucken in verschillende omstandigheden ongeschikt kunnen zijn. Goedgekeurde combinaties in de matrix moeten nog steeds worden beoordeeld en gevalideerd door een getrainde zorgprofessional.

Verschillende breedtes van de tiljucken zorgen voor verschillende drukniveaus op de borst. Probeer verschillende alternatieven uit totdat u de optie vindt die het meest geschikt is voor de individuele patiënt.

### Andere combinaties

Combinaties met het Liko MasterVest en de Cross-Bar, Cross-Bar 450/670 of SideBars zijn niet geschikt.

Combinaties van accessoires/producten die anders zijn dan aanbevolen door Liko kunnen leiden tot risico's voor de veiligheid van de patiënt.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, M220, M230, Multirall, Uno en Viking zijn handelsmerken van Baxter International Inc. of zijn dochterondernemingen.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Zweden  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**