



## Návod na použitie



Mod. 60

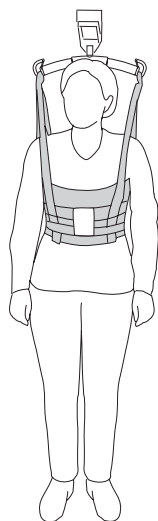

Mod. 64

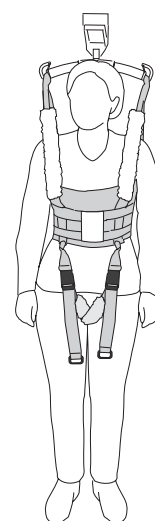

Mod. 60  
s postrojom na nohy  
a obalmi s vypchávkami

## Popis produktu

Vesta Liko MasterVest je univerzálnym vakom so širokou škálou použití, napr. ako pomoc pri státí a chôdzi alebo pri návšteve toalety.

Vesta MasterVest podopiera pacienta okolo hornej časti tela, ako aj pod pažami. Pri veste MasterVest sa vyžaduje, aby boli pacienti schopní uniesť váhu na nohách.

Vesta Liko MasterVest vám umožňuje dosiahnuť určité ťažko dosiahnuteľné ciele, napr.:

- pacientom dáva vhodnú pomoc pri cvičení a nosení hmotnosti na svojich nohách
- ošetrovatelia sa vyhnú rizikám spojeným s ťažkým zdvíhaním.

Pri zdvíhaní pacienta a jeho prechode na záchod a zo záchodu môže ošetrovateľ utrpieť závažné poranenia. Vesta MasterVest uľahčuje hladký a jednoduchý prechod pacienta na záchod a zo záchodu.

Keďže vesta MasterVest pokrýva len hornú časť tela, spodná časť tela je ľahko prístupná na obliekanie a vyzliekanie.

### Vesta MasterVest s predným zapínaním, mod. 64

Model vesty Liko MasterVest s predným zapínaním, mod. 64 je možné použiť u pacientov, ktorí si dokážu vestu sami obliecť a vyzliecť.

Vesta MasterVest je vybavená dvomi nastaviteľnými bezpečnostnými sponami krížom cez hrudník. Ich použitie sa odporúča aj v prípadoch, keď je potrebné nastaviť napnutie a upraviť tlak na hrudníku.

### MasterVest s postrojom na nohy

Postroj na nohy drží vestu MasterVest na svojom mieste a často sa používa pri návziku chôdze.

*V tomto dokumente sa zdvíhaná osoba označuje ako pacient a asistujúca osoba sa označuje ako ošetrovateľ.*

### DÔLEŽITÉ!

Zdvíhanie a prenášanie pacienta vždy so sebou prináša určitú úroveň rizika. Pred použitím si prečítajte návod na použitie patientskeho zdvíhaka aj zdvíhacieho príslušenstva. Je dôležité, aby ste úplne pochopili obsah návodu na použitie. Toto vybavenie by mal používať iba vyškolený personál. Zabezpečte, aby bolo zdvíhacie príslušenstvo vhodné pre používaný zdvíhák. Počas používania postupujte dôkladne a opatrne. Ako ošetrovateľ ste vždy zodpovedný za bezpečnosť pacienta. Musíte si uvedomiť schopnosť pacienta zvládnuť zdvíhanie. Ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa.

# Obsah

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Popis symbolov .....                                      | 3  |
| Bezpečnostné pokyny .....                                 | 4  |
| Starostlivosť a údržba .....                              | 5  |
| Definície .....                                           | 5  |
| Ako upevniť vak na rôznych ramenách na vak .....          | 6  |
| Ako upevniť MasterVest k dvojramenu .....                 | 7  |
| Zdvíhanie zo sediacej polohy .....                        | 8  |
| Skúšanie vesty Liko MasterVest .....                      | 9  |
| Príslušenstvo .....                                       | 11 |
| Prehľad viest Liko™ MasterVest™, mod. 60, 64 60, 64 ..... | 12 |
| Odporúčané kombinácie .....                               | 12 |

## Popis symbolov

V tomto dokumente a/alebo na produkte je možné nájsť tieto symboly.

| Symbol                                                                                                                                           | Popis                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Varovanie. Je potrebná zvýšená opatrnosť a pozornosť.                                                                                                           |
|                                                                 | Pred použitím si prečítajte návod na použitie                                                                                                                   |
|                                                                 | Označenie CE                                                                                                                                                    |
|                                                                 | Zákonný výrobca                                                                                                                                                 |
|                                                                 | Dátum výroby                                                                                                                                                    |
|                                                                 | Ref. číslo                                                                                                                                                      |
|                                                                 | Sériové číslo                                                                                                                                                   |
|                                                                 | Zdravotnícka pomôcka                                                                                                                                            |
|                                                                 | Nečistite chemicky                                                                                                                                              |
|                                                                 | Nežehlite                                                                                                                                                       |
|                                                                 | Sušenie v sušičke                                                                                                                                               |
|                                                                | Nesušiť v bubnovej sušičke                                                                                                                                      |
|                                                               | Pranie<br>Symbol je uvedený vždy spolu s odporúčanou teplotou v °C a °F.                                                                                        |
|                                                               | Bez latexu                                                                                                                                                      |
|                                                               | Pravidelná kontrola                                                                                                                                             |
|                                                               | Nepoužívajte bielidlo                                                                                                                                           |
|                                                               | Sušenie na šnúre v tieni                                                                                                                                        |
|                                                               | Smer nahor a symbol na vonkajšej strane zariadenia.                                                                                                             |
|                                                               | Symbol na vonkajšej strane zariadenia.                                                                                                                          |
| <br>(01) 0100887761997127<br>(11) RRMMDO<br>(21) 012345678910 | Čiarový kód dátovej matice GS1, ktorý môže obsahovať nasledovné informácie.<br>(01) Globálne číslo obchodnej položky<br>(11) Dátum výroby<br>(21) Sériové číslo |

## Bezpečnostné pokyny

### Skôr, ako začnete so zdvíhaním, si uvedomte nasledujúce body:

- Zodpovedná osoba vo vašej organizácii by mala podľa jednotlivých prípadov rozhodnúť o tom, či je potrebný jeden alebo viacerí ošetrovatelia.
- Zabezpečte, aby zvolený vak spĺňal potreby pacienta z hľadiska modelu, veľkosti, tkaniny a prevedenia.
- Vyskúšajte núdzové spúšťanie na zdvíhaku, ktorý používate, aby ste sa uistili, že správne funguje.
- Upravte maximálnu výšku, aby nebolo možné zdvihnúť pacienta príliš vysoko.
- Z bezpečnostných a hygienických dôvodov používajte individuálne vaky.
- Pred zdvíhaním naplánujte zdvíhaciu procedúru tak, aby mohla byť vykonaná čo najbezpečnejšie a najhladšie.
- Pred zdvíhaním skontrolujte, či zdvíhacie príslušenstvo visí vertikálne a dokáže sa voľne pohybovať.
- Hoci sú ramená pre vaky Liko vybavené západkami, musíte dávať mimoriadny pozor: predtým, ako pacienta zdvihnete z podkladu; keď sú popruhy úplne napnuté, zabezpečte, aby boli správne pripojené k hákom ramena pre vak.
- Pacienta nikdy nezdvíhajte z podkladu vyššie, než je potrebné pre dokončenie procedúry zdvíhania a prenášania.
- Keď je pacient zdvihnutý, nenechávajte ho nikdy bez dozoru.
- Zabezpečte, aby boli počas zdvíhania/premiestňovania kolesá na invalidnom vozíku, lôžku, ležadle atď. zabrzdené.
- Vždy pracujte ergonomicky. Využívajte pacientovu schopnosť aktívne sa zapájať do úkonov.
- Keď sa vak nepoužíva, odložte ho na miesto mimo pôsobenia priameho slnečného svetla.

### Nesprávne uchytenie vaku na rameno môže spôsobiť vážne poranenie pacienta.

 Zdravotnícka pomôcka triedy I

**PATENT [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Na produkt sa môže vzťahovať jeden alebo viac patentov. Pozri vyššie uvedenú internetovú adresu.**

Spoločnosti Hill-Rom sú majiteľmi európskych, amerických (USA) a ďalších patentov a podaných patentových prihlášok.

### **Zmeny produktu**

Produkty Liko sa neustále vyvíjajú a v dôsledku toho si vyhradujeme právo na uskutočnenie zmien produktov bez predchádzajúceho upozornenia. Rady a informácie týkajúce sa inovácií produktov vám poskytne zástupca spoločnosti Hill-Rom.

### **Design and Quality by Liko in Sweden**

Liko má certifikát kvality v súlade s normou ISO 9001 a jej ekvivalentom v priemysle zdravotníckych pomôcok, normou ISO 13485. Liko má certifikáciu aj podľa normy o životnom prostredí ISO 14001.

### **Upozornenie pre používateľov a/alebo pacientov v EÚ**

Akákoľvek vážna nehoda, ktorá nastala v súvislosti so zariadením, by mala byť oznámená výrobcu a príslušným orgánom členského štátu, kde má používateľ a/alebo pacient trvalé bydlisko.

## Starostlivosť a údržba

Pred každým použitím skontrolujte vak. Skontrolujte nasledujúce miesta, či nedošlo k opotrebovaniu a poškodeniu:

- Tkaninu
- Popruhy
- Švy
- Slučky
- Spony

**⚠ Poškodené zdvíhacie príslušenstvo nepoužívajte.**

Ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa.

**Ak sa vak používa pri kúpaní alebo sprchovaní:** Po použití vaku pri kúpaní alebo sprchovaní treba vak uložiť tak, aby čo najskôr vyschol.

**Pokyny na pranie:** Pozri štítok produktu vaku a priložený dodatok „Starostlivosť a údržba o vaky Liko“. Bezpečnostné spony na mod. 64 musia byť počas prania zatvorené.

### Pravidelná kontrola

Produkt sa musí kontrolovať minimálne raz za 6 mesiacov. Častejšie kontroly sa môžu vyžadovať, ak sa produkty používajú alebo perú častejšie, ako je bežné. Ak chcete získať dokumenty, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Hill-Rom.

### Očakávaná životnosť

Mod. 60 Produkt má pri bežnom používaní očakávanú životnosť 1 – 5 rokov.

Mod. 64 Produkt má pri bežnom používaní očakávanú životnosť 1 – 5 rokov.

Dĺžka očakávanej životnosti závisí od tkaniny, frekvencie používania, spôsobu prania a záťažovej hmotnosti.


### Pokyny na recykláciu

Celý vak vrátane líšt, výplňového materiálu a pod., by sa mal vytriediť ako horľavý odpad.

Spoločnosť Hill-Rom vyhodnocuje a používateľom poskytuje návod na bezpečné zaobchádzanie a likvidáciu svojich zariadení na pomoc pri prevencii zranení, okrem iného vrátane: porezania a prepichnutia kože, odrenín, a akéhokoľvek požadovaného čistenia a dezinfekcie zdravotníckeho zariadenia po použití a pred jeho likvidáciou. Zákazníci by mali dodržiavať všetky federálne, štátne, regionálne a/alebo miestne zákony a predpisy týkajúce sa bezpečnej likvidácie zdravotníckych zariadení a príslušenstva.












V prípade pochybností sa musí používateľ zariadenia najskôr obrátiť na technickú podporu spoločnosti Hill-Rom a získať pokyny k protokolom o bezpečnej likvidácii.

## Definície

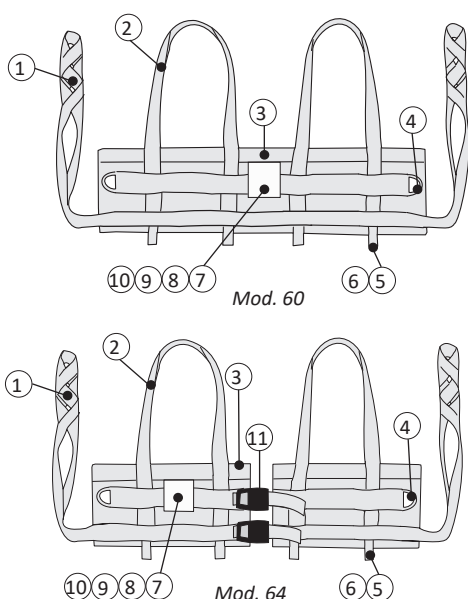


1. Slučkový popruh
2. Ramenné popruhy
3. Horný okraj
4. D-krúžky
5. Slučky postroja na nohy
6. Označenie veľkosti
7. Štítok produktu
8. Sériové číslo
9. Štítok: Pravidelná kontrola
10. Štítok: Individuálne označenie (komu patrí)
11. Bezpečnostné spony





## Ako upevniť vak na rôznych ramenách na vak
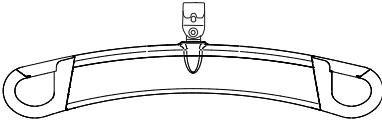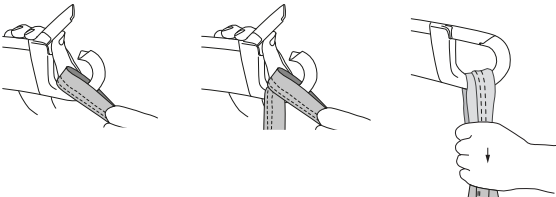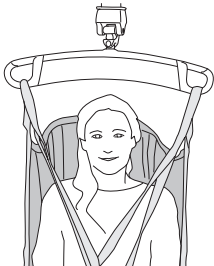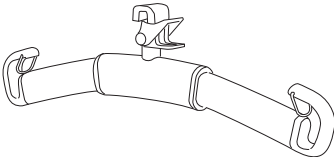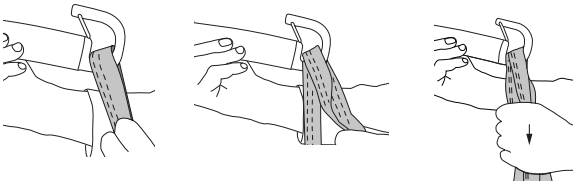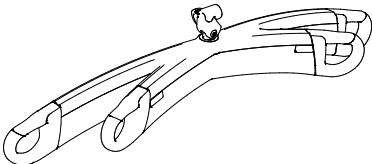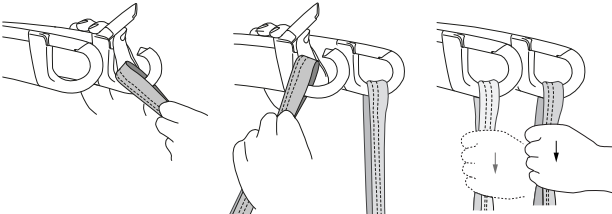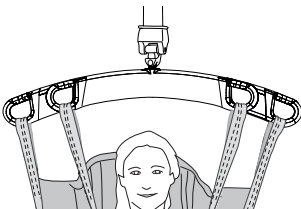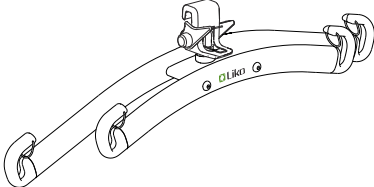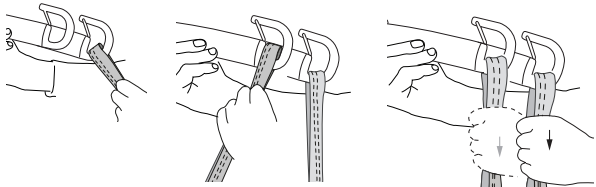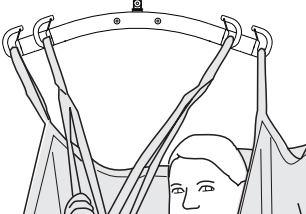
| Rameno na vak                                                                                             | Slučky vaku na háky ramena na vak                                                    | Správne                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>SlingGuard™</p>       |    |    |
|  <p>Universal</p>        |    |    |
|  <p>SlingGuard™ Twin</p> |   |   |
|  <p>Universal Twin</p>  |  |  |


## Nesprávne!

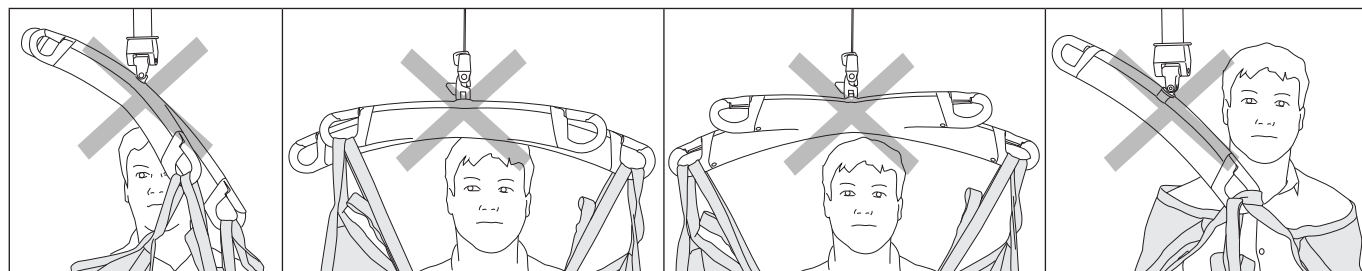

## Ako upevniť MasterVest k dvojramenu
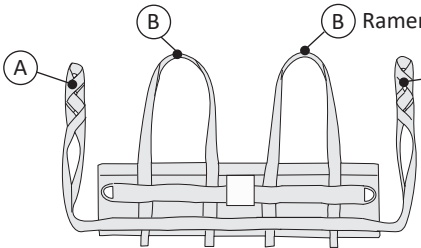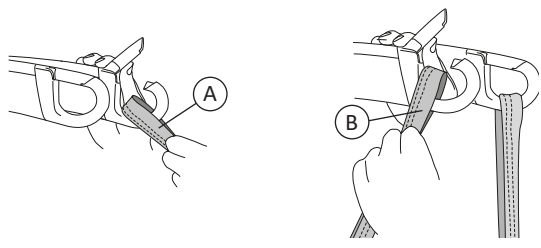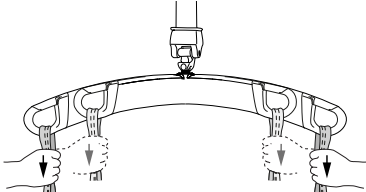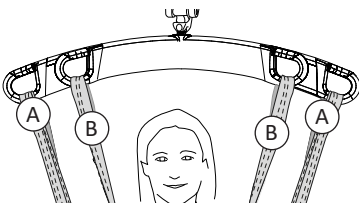
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p data-bbox="550 302 726 336">Ramenné popruhy</p> <p data-bbox="662 347 821 380">Slučkový popruh</p> | <p data-bbox="853 212 885 246">1.</p>   |
| <p data-bbox="175 694 207 728">2.</p>                                                                  | <p data-bbox="853 694 885 728">3.</p>  |


## Zdvíhanie zo sediacej polohy

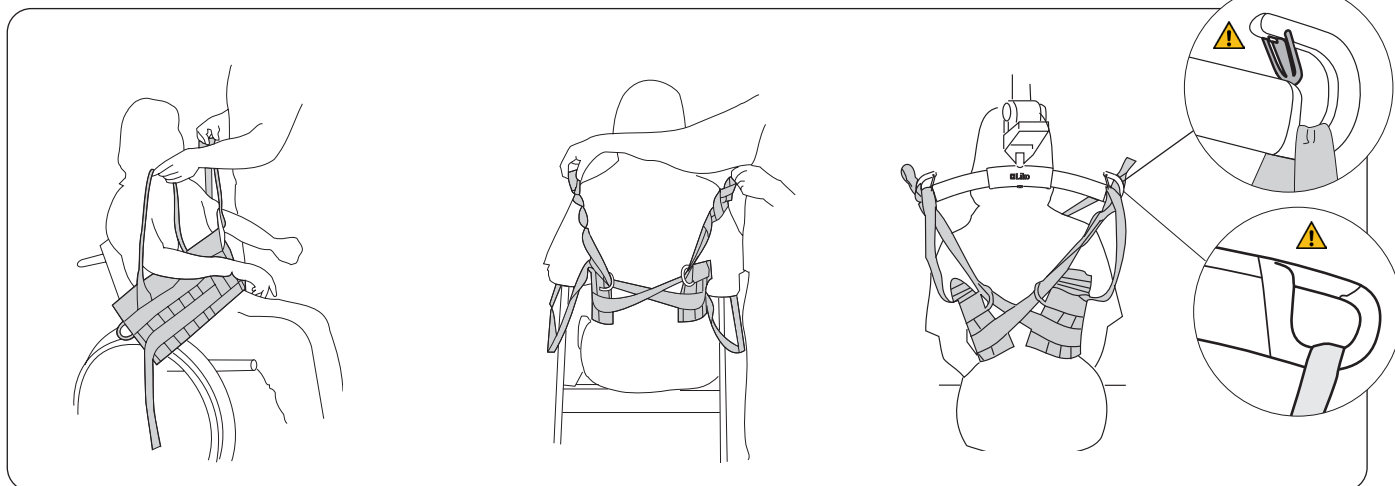

Oblečte vestu MasterVest spredu. Paže pacienta sú položené cez ramenné popruhy.

Za chrbtom: Každý slučkový popruh pretiahnite cez chrbát a prevlečte ho cez kovový D-kružok na opačnej strane, ako ukazuje obrázok.

Zaistite, aby bolo rameno na vak za chrbtom pacienta, a pomocou vhodnej slučky upevnite slučkové popruhy, pozri strany 9 a 10. Ramenné popruhy upevnite k ramenu na vak. Na stranách 6 – 7 nájdete pokyny na pripevnenie slučiek vaku na rôzne ramená na vaky.

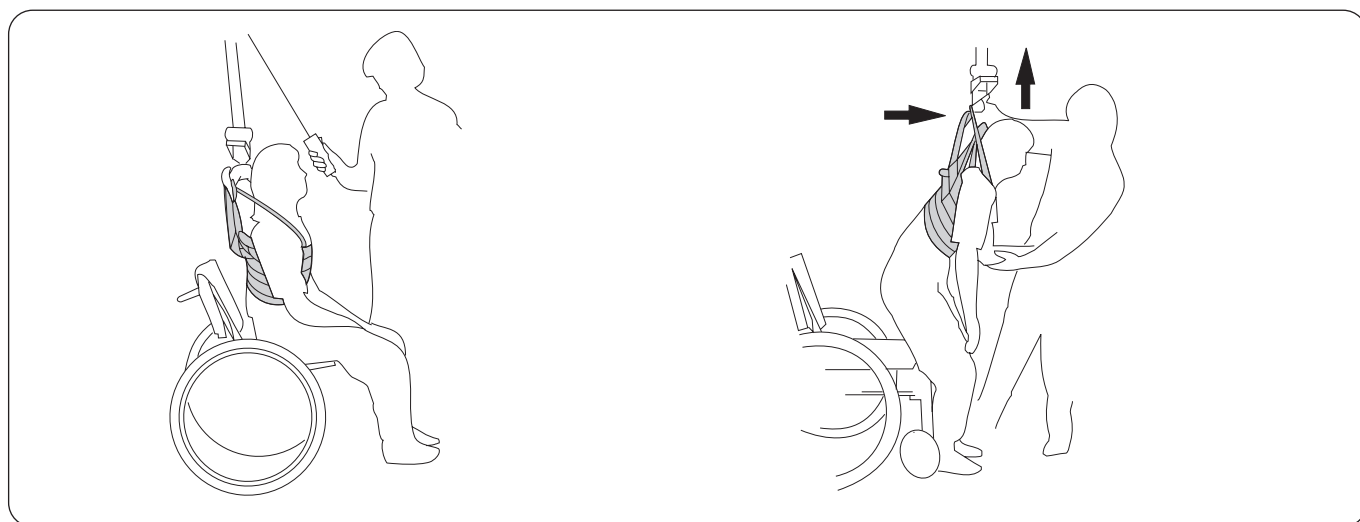

**Pred zdvíhaním:** skontrolujte, či má pacient chodidlá pevne na podlahe, aby dokázal po zdvihnutí ramena na vak uniesť príslušnú váhu. Rameno na vak mierne zdvihnite, aby ste utiahli popruhy (bez zdvihnutia pacienta zo sedadla), a skontrolujte, či je tlak okolo hornej časti tela pacienta rozložený pohodlne.


**Počas zdvíhania:** potiahnite rameno na vak dopredu, aby sa váha pacienta hladko prenášala, kým sa nepostaví do vzpriamenej polohy a nedosiahne rovnováhu. Rameno na vak mierne spustíte, aby sa uvoľnil tlak okolo hrudníka. Teraz má pacient možnosť preniesť váhu na nohy a pracovať na precvičovaní rovnováhy.



## Skúšanie vesty Liko MasterVest

### Výber správnej veľkosti

Ak chcete, aby vesta MasterVest náležite plnila svoj účel, jej šírka musí byť v správnom pomere k obvodu hornej časti tela pacienta. Z tohto dôvodu je dôležitý výber správnej veľkosti a starostlivé určenie správnej slučky na slučkovom popruhu.

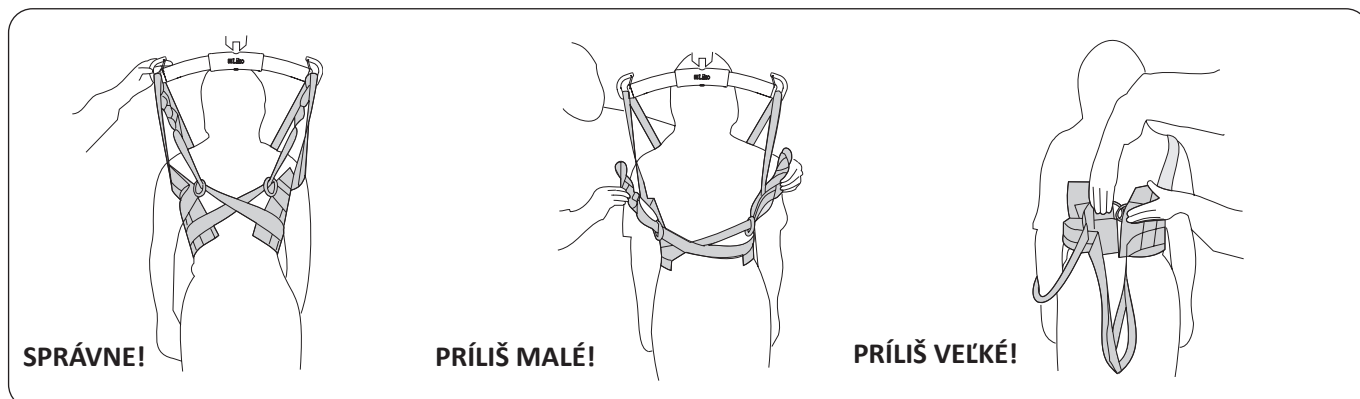

Správnu veľkosť má vesta vtedy, keď je medzera medzi kovovými D-krúžkami 5 cm až 30 cm. Čím je vesta väčšia, tým širšia môže byť medzera.

Veľkosť je príliš malá vtedy, keď je medzera medzi kovovým D-krúžkom príliš široká, slučkové popruhy nedočiahnu po rameno pre vak a tlak okolo hrude je príliš silný.

Veľkosť je príliš malá vtedy, keď je medzera medzi kovovým D-krúžkom príliš široká, slučkové popruhy nedočiahnu po rameno na vak a tlak okolo hrude je príliš silný.


### Nastavenie slučkových popruhov

Slučka, na ktorú zavesíte na rameno pre vak, určuje, do akej miery bude vesta sťahovať hrud'. Ak sa vesta šmýka nahor – skúste vnútornú slučku alebo menšiu veľkosť vesty.

Ak je vesta okolo hrude príliš úzka – skúste vonkajšiu slučku alebo väčšiu veľkosť vesty.


Ak si rovnakú veľkosť vyskúšajú dve rôzne osoby, štíhlejšia z nich bude potrebovať vnútornú slučku a urastenejšia vonkajšiu slučku. Vesta MasterVest je nastavená správne vtedy, keď sú ramenné a slučkové popruhy pri zdvíhaní pacienta rovnomerne napnuté.

### Skúšanie slučkových popruhov

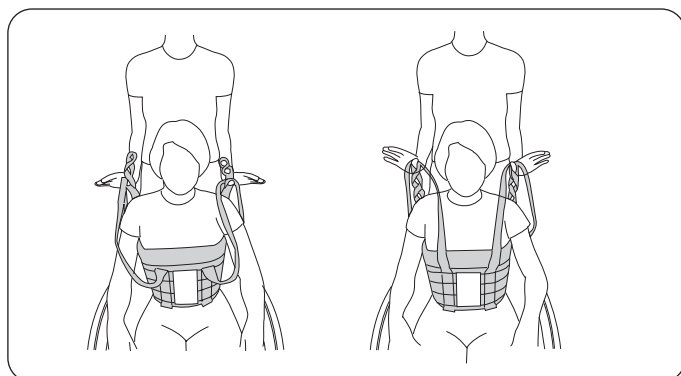


Na zistenie, ktoré slučky najlepšie pasujú, vyskúšajte slučkové popruhy potáhaním za rôzne slučky spolu s ramennými popruhmi. Pri skúšaní správneho nastavenia slučkových popruhov sa postavte za pacienta a zavesíte ramenné popruhy a slučkové popruhy na vaše palce a zdvíhajte hore, až kým nebudú popruhy napnuté. Vesta MasterVest sedí správne vtedy, keď sú slučkové popruhy a ramenné popruhy pri zdvíhaní napnuté rovnomerne.

### Spony pre slučky

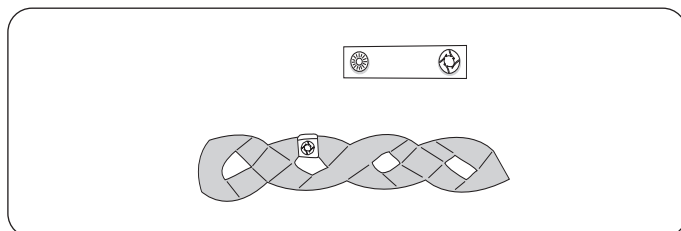

Toto je praktické príslušenstvo, ktoré sa používa na označenie slučiek, ktoré boli pre určitú osobu odskúšané. Pre ošetrovateľov je jednoduchšie zvoliť správnu slučku na pripojenie k ramenu pre postroj.

## Telesný postoj

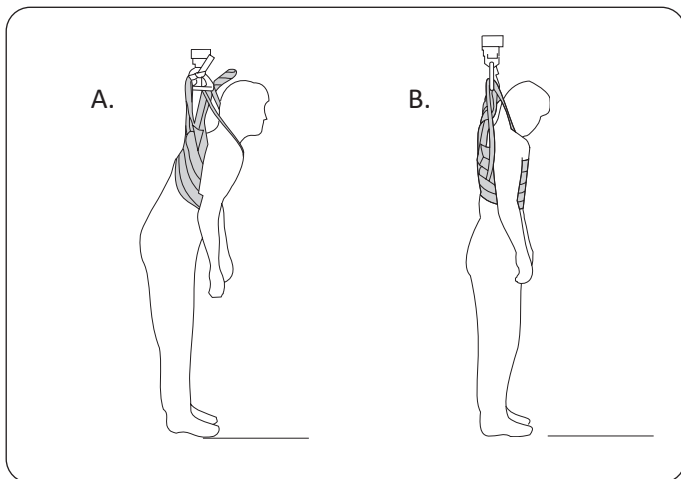

Často sa stáva, že jednému človeku sú dobré dve veľkosti vesty MasterVest, pri obidvoch veľkostiach však treba správne nastaviť slučkové popruhy.

Výsledky sa líšia podľa držania tela a rozloženia tlaku okolo hrudníka.


A. Väčšia vesta MasterVest si vyžaduje použitie vnútorných slučiek na slučkovom popruhu.

Takéto upevnenie umožňuje, aby sa pacient predklonil, pričom pôsobí väčším tlakom na prednú dolnú časť hrudníka.

B. Menšia vesta MasterVest si vyžaduje upevnenie jednej z vonkajších slučiek slučkového popruhu k ramenu na vak, čím sa dosiahne rovnomerné napnutie všetkých štyroch popruhov.

V tomto prípade je držanie tela vzpriamenejšie a tlak okolo hrudníka je rozložený rovnomernejšie.

## Vesta MasterVest s predným zapínaním, mod. 64 64

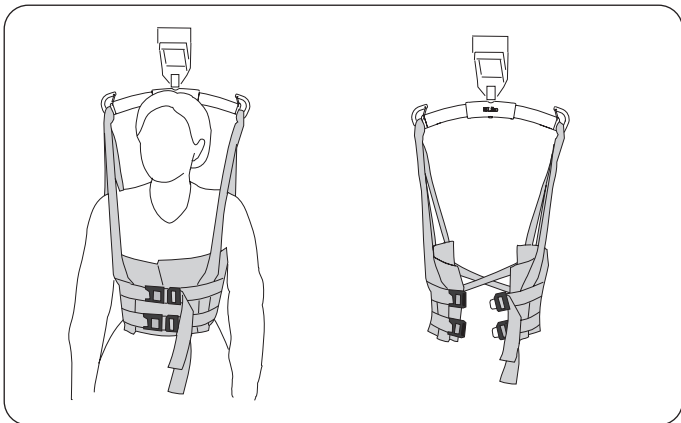

Vesta MasterVest je k dispozícii aj ako model s predným zapínaním.

Vesta MasterVest s predným zapínaním je vybavená dvomi nastaviteľnými bezpečnostnými sponami v prednej časti. Skúšku správnej veľkosti vesty a správnej polohy slučkových popruhov môžete vykonať aj v prípade, keď si pacient oblečie vestu MasterVest sám. Po správnom nastavení môže vesta MasterVest pri obliekaní visieť za rameno na vak.

## Vesta Liko MasterVest z poplastovanej sieťoviny

Najbežnejšie veľkosti vesty MasterVest sú k dispozícii v sieťovom prevedení potiahnutom plastom. Trenie materiálu pôsobí proti tendencii vesty šmýkať sa smerom nahor.

## Problém počas skúšania?

**Problem:** Problém: Vesta sa pod pacientovými rukami šmýka.

Upravte vestu MasterVest pomocou jedného alebo viacerých z týchto spôsobov:

- Upravte slučkový popruh použitím vnútornej slučky.
- Zvoľte menšiu veľkosť.
- Skúste vyskúšať vestu Liko MasterVest z poplastovanej sieťoviny.
- Skúste vyskúšať postroj na nohy.
- Pri zdvíhaní pacienta držte vestu na mieste za chrbtom tlačení svojho palca nadol na prekřížených slučkových popruhoch.
- Pacientovi povedzte, aby ruky pri zdvíhaní držal dole.

## Príslušenstvo

### Postroj na nohy


Obj. č. 3666004-06

Ak chcete zabrániť tomu, aby sa vesta šmýkala po tele smerom nahor, môžete spolu s ňou použiť špeciálny postroj na nohy Liko MasterVest. Postroj môžete nasadiť sediacemu pacientovi a po jeho zdvihnutí môžete nastaviť polohu a napnutie postroja. Popruhy postroja môžu ísť v oblasti rozkroku krížom cez seba alebo rovnobežne vedľa seba.

POZNÁMKA: The leg harness fits vests from serial number 736166. Ďalšie informácie vám poskytne zástupca spoločnosti Hill-Rom.



Pripevnenie postroja na nohy

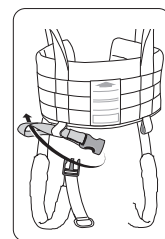


### Obal s vypchávkami pre ramenný popruh

Obj. č. 3666021

Obaly s vypchávkami sú príslušenstvom, ktoré je k dispozícii na odľahčenie tlaku na predné popruhy.


Obaly s vypchávkami sú kvôli ľahšej aplikácii vybavené suchým zipsom pozdĺž jednej strany.

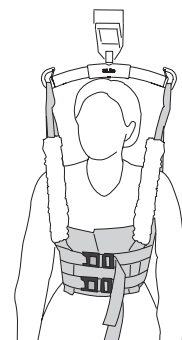

### Spony pre slučky

Spony pre slučky, červené, 4 ks  
Spony pre slučky, oranžové, 4 ks  
Spony pre slučky, žlté, 4 ks  
Spony pre slučky, modré, 4 ks  
Spony pre slučky, čierne, 4 ks


obj. č. 3666033  
obj. č. 3666034  
obj. č. 3666035  
obj. č. 3666036  
obj. č. 3666037

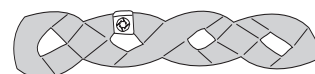

### Predlžovacia slučka

Extension Loop, zelená, 12 cm  
Extension Loop, zelená, 22 cm  
Extension Loop, sivá, 12 cm  
Extension Loop, sivá, 22 cm

č. prod. 3691102  
č. prod. 3691103  
č. prod. 3691302  
č. prod. 3691303

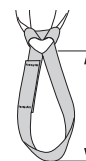

– 2 = 12 cm  
– 3 = 22 cm

## Prehľad viest Liko™ MasterVest™, mod. 60, 64

| Produkt                   | Č. prod. | Veľkosť | Body Weight kg <sup>1</sup> | Maximálna záťaž <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------|---------|-----------------------------|------------------------------|
| 50/55, MasterVest mod. 60 | 3560113  | XS      | 20-40 kg                    | 200 kg                       |
| 50/55, MasterVest mod. 60 | 3560114  | S       | 40 – 60 kg                  | 200 kg                       |
| 50/55, MasterVest mod. 60 | 3560115  | M       | 60 – 80 kg                  | 200 kg                       |
| 50/55, MasterVest mod. 60 | 3560116  | L       | 80 – 120 kg                 | 200 kg                       |
| 50/55, MasterVest mod. 60 | 3560117  | XL      | 100-130 kg (220-286 lbs.)   | 300 kg                       |
| 50/55, MasterVest mod. 60 | 3560118  | XXL     | > 120 kg                    | 300 kg                       |
| 50/55, MasterVest mod. 64 | 3564114  | S       | 40 – 60 kg                  | 200 kg                       |
| 50/55, MasterVest mod. 64 | 3564115  | M       | 60 – 80 kg                  | 200 kg                       |
| 50/55, MasterVest mod. 64 | 3564116  | L       | 80 – 120 kg                 | 200 kg                       |
| 50/55, MasterVest mod. 64 | 3564117  | XL      | 100-130 kg (220-286 lbs.)   | 200 kg                       |
| 50/55, MasterVest mod. 64 | 3564118  | XXL     | > 120 kg                    | 200 kg                       |

<sup>1</sup> Indikovaná hmotnosť pacienta je len orientačná – môžu existovať odchýlky.

<sup>2</sup> Na zachovanie maximálnej záťaže sa vyžadujú zdvihačky/príslušenstvo určené pre rovnakú alebo vyššiu záťaž.

**Materiál:** HygieneSling je dostupné v polyesterovej verzii.

### Odporúčané kombinácie

| Odporúčané kombinácie viest Liko MasterVest s ramenami pre vaky Liko: | Mini 220 | Rameno na vak 350 <sup>3</sup> | Standard 450 | Rameno na vak 450 <sup>1</sup> | Rameno na vak 600 <sup>4</sup> | Dvojramená 670 <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| MasterVest, XS                                                        | 1        | 1                              | 2            | 1                              | 3                              | 4                           |
| MasterVest, S                                                         | 2        | 1                              | 1            | 1                              | 3                              | 4                           |
| MasterVest, M                                                         | 2        | 1                              | 1            | 1                              | 3                              | 4                           |
| MasterVest, L                                                         | 2        | 1                              | 1            | 1                              | 3                              | 2                           |
| MasterVest, XL                                                        | 3        | 1                              | 1            | 1                              | 2                              | 2                           |
| MasterVest, XXL                                                       | 3        | 2                              | 1            | 1                              | 2                              | 2                           |

<sup>1</sup> Rameno na vak 450 sa týka ramena Universal SlingBar 450 obj. č. 3156075, 3156085 a 3156095 a tiež SlingGuard 450 obj. č. 3308020 a 3308520.

<sup>2</sup> Dvojramená 670 sa vzťahujú na Universal TwinBar 670, č. prod. 3156077 a 3156087, a tiež SlingGuard 670 Twin, č. prod. 3308040 a 3308540.

<sup>3</sup> Rameno na vak 350 sa vzťahuje na Universal SlingBar 350 č. prod. 3156074, 3156084 a 3156094.

<sup>4</sup> Rameno na vak 600 sa vzťahuje na Universal SlingBar 600 č. prod. 3156076 a 3156086.

**Vysvetlenie:** 1 = Odporúčané, 2 = Môže fungovať, 3 = Neodporúčané, 4 = Nevhodné

Dôsledkom rôznych širokých ramien na vak sú rôzne úrovne tlaku na hrudník. Skúšajte rozličné alternatívy, kým nenájdete šírku, ktorá najlepšie vyhovuje príslušnému pacientovi.

### Iné kombinácie

Kombinácia vesty Liko MasterVest s prekríženým ramenom Cross-bar, Cross-bar 450/670 alebo ramenami Side bar nie sú vhodné.

Kombinácie príslušenstva/produktov iných ako tých, ktoré odporúča spoločnosť Liko, môžu spôsobovať riziká pre bezpečnosť pacienta.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Švédsko  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers

Hill-Rom