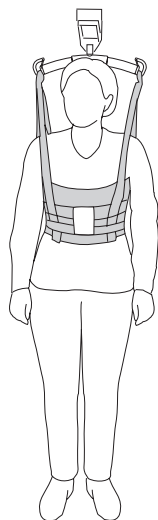


Liko MasterVest, mod. 60, 64




Navodila za uporabo



Model 60



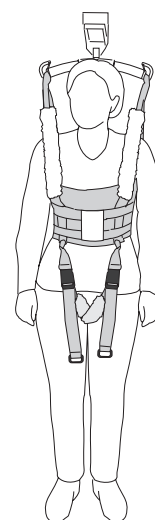Mod. 64



Mod. 60
z mednožnim pasom in
obloženimi podlogami

Opis izdelka

Predvidena uporaba

Namenjen je uporabi v naslednjih okoljih: zdravstveno varstvo, intenzivna nega, urgencia, rehabilitacija, okolje za rehabilitacijo in zdravstvena oskrba na domu.

Liko MasterVest je prilagodljiva vreča s številnimi možnostmi uporabe, npr. za pomoč pri stanju in hoji ali odhodu na stranišče.

MasterVest nudi pacientom nudi podporo v zgornjem delu telesa in pod rokami. Pacienti morajo biti za uporabo vreče MasterVest sposobni vsaj delno nositi težo na nogah.

Liko MasterVest pomaga dosegati težko uresničljive cilje, npr.:

- pacienti dobijo ustrezno pomoč pri telesni vadbi in prenašanju teže na nogah, in
- negovalci se izognejo tveganjem, povezanim s težkim dviganjem.

Dvigovanje in premeščanje pacientov na stranišče in z njega lahko privede do resnih poškodb negovalca. MasterVest olajša pot do stranišča in z njega.

Ker MasterVest pokriva samo zgornji del telesa, je spodnji del preprosto dosegljiv za oblačenje in slačenje.

MasterVest z zapiranjem spredaj, mod. 64

Model **Liko MasterVest** z zapiranjem spredaj, mod. 64, je primeren za paciente, ki si telovnik lahko sami nadenejo in snamejo.

MasterVest se na prsnem delu zapenja z dvema nastavljivima varnostnima zaponkama. Zaponki se priporočata tudi za prilagajanje napetosti in uravnavanje pritiska na prsni koš.

MasterVest z mednožnim pasom

Mednožni pas drži vrečo MasterVest na mestu in se običajno uporablja pri vadbi hoje.

Ustrezna dvigala

Vreča MasterVest se lahko uporablja z vsemi stropnimi in mobilnimi dvigali **Liko**. Uporabite lahko stropna dvigala **LikoGuard**, **Likorall** in **Multirall** ali mobilna dvigala **Golvo**, **Viking Uno** in **Liko M220/M230**.

V tem dokumentu je oseba, ki se jo dviga, imenovana pacient, oseba, ki ji pomaga, pa negovalec.

POMEMBNO!

Dvigovanje in premikanje pacienta vedno pomenita določeno stopnjo tveganja. Pred uporabo dvigala in opreme za dviganje pacienta preberite navodila za njuno uporabo. Pomembno je, da v celoti razumete vsebino navodil za uporabo. Opremo lahko uporablja le usposobljen negovalec. Da bi bil negovalec usposobljen, mora prebrati in razumeti navodila za uporabo. Poskrbite, da je oprema za dviganje primerna za dvigalo, ki ga uporabljate. Med uporabo bodite skrbni in previdni. Kot negovalec ste vedno odgovorni za pacientovo varnost. Vedeti morate, v kolikšni meri je pacient zmožen sodelovati pri dviganju. V primeru nejasnosti se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja.

Kazalo vsebine

Predvidena uporaba	1
Varnostne informacije	3
Opis simbolov	4
Nega in vzdrževanje.....	5
Opredelitev pojmov.....	5
Kako izbrati velikost vreče	6
Mere.....	7
Namestitev vreče MasterVest na različne prečne nosilce	8
Namestitev vreče MasterVest na nosilec Twin Bar.....	9
Dviganje iz sedečega položaja	10
Preizkušanje vreče Liko MasterVest	11
Priporočena oprema za dviganje.....	13
Izbirni sestavni deli	13
Pregled vreče Liko MasterVest, mod. 60, 64	14
Priporočene kombinacije.....	14

Varnostne informacije


Pred dviganjem upoštevajte naslednje:


- Odgovorna oseba v vaši organizaciji se mora na osnovi posameznega primera odločiti, ali je potreben en negovalec ali več.
- Prepričajte se, da izbrana vreča ustreza potrebam pacienta glede modela, velikosti, tkanine in zasnove.
- Preizkusite pripomoček za spuščanje v sili na dvigalu, ki ga uporabljate, da se prepričate, ali deluje pravilno.
- Nastavite najvišjo višino, da bolnika ne bo mogoče dvigniti previsoko.
- Za zagotavljanje pacientove varnosti in higiene vrečo operite, preden jo uporabite pri drugem pacientu.
- Pred dviganjem načrtujte postopek dviganja, tako da ga boste izvedli čim bolj varno in preprosto.
- Pred dviganjem se prepričajte, da oprema za dviganje visi navpično in se lahko prosto premika.
- Čeprav so Likovi prečni nosilci opremljeni z zaponkami, ravnajte previdno: pred dviganjem pacienta s spodnje površine, vendar po tem, ko so pasovi povsem iztegnjeni, se prepričajte, da so jermeni pravilno priključeni na kavlje prečnega nosilca.
- Pacienta nikoli ne dvigajte višje, kot je potrebno za izvedbo postopka dviganja in premikanja.
- Poskrbite, da bodo kolesa na invalidskem vozičku, postelji, nosilih z zložljivim podvozjem itd. med dviganjem/premikanjem zaklenjena.
- Vedno delajte ergonomično. Izkoristite pacientove zmožnosti aktivnega sodelovanja pri postopku.

 Zaradi nepravilne namestitve vreče na prečni nosilec se lahko pacient hudo poškoduje.

 Zaradi ročnega premikanja pacienta na postelji se lahko poškoduje negovalec.

 Med dviganjem morata pacient in negovalec biti pozorna na točke, kjer lahko pride do uščipa, in na premične dele. Nastanejo lahko telesne poškodbe.


 Ocenite, kakšno je tveganje, da bi se pacient ukleščil, in ga primerno nadzirajte. Med dviganjem pacientova glava in udi ne smejo biti v zankah vreče ali med njimi. Če teh navodil ne upoštevate, lahko povzročite hude telesne poškodbe ali smrt.

 Pri uporabi obrabljene vreče lahko pride do uščipov ali manjši poškodb, če vrečo na pacienta namestite neenakomerno ali je ne odstranite pravilno.

 Z vrečo ne rokujte in je ne shranjujte ali prevažajte v bližini domačih ali drugih živali ter otrok brez nadzora odraslih!

 Pacienta med dviganjem nikoli ne pustite brez nadzora!

 Otrok ne puščajte samih v bližini vreče!

 Vreče ne shranjujte na mestih, kjer bi bila izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali virom toplote, kot so radiator, ognjišče ali štedilnik/pečica!

 Vreča ni bila preizkušena za uporabo pri slikanju z magnetno resonanco (MRI). Pacienta premestite na združljivo površino za izvedbo MRI in izdelek odstranite iz prostora za MRI.

 Medicinski pripomoček razreda I

PATENT www.hillrom.com/patents

Izdelek je lahko zaščiten z enim ali več patenti. Glejte zgoraj navedeni spletni naslov.

Podjetja družbe Hillrom so lastniki evropskih, ameriških in drugih patentov ter nerešenih patentnih prijav.

Spremembe izdelka

Izdelke Liko nenehno razvijamo, zato si pridržujemo pravico do sprememb izdelka brez predhodnega obvestila. Za nasvet in informacije o nadgradnjah izdelka se obrnite na zastopnika družbe Hillrom.

Design and Quality by Liko in Sweden






























Izdelek Liko je potrjen glede kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 in enakovrednim standardom za medicinske pripomočke, ISO 13485. Liko je prav tako potrjen v skladu z okoljskim standardom ISO 14001.

Obvestilo za uporabnike in/ali paciente v EU

O resnih incidentih, do katerih pride v povezavi s tem pripomočkom, morate obvestiti proizvajalca in pristojni organ v državi članici bivanja uporabnika in/ali pacienta.

Opis simbolov

Te simbole lahko najdete v tem dokumentu in/ali na izdelku.

Simbol	Opis	Simbol	Opis
	Opozorilo: to stanje zahteva posebno previdnost in pozornost. Ta simbol je rumeni trikotnik s črno obrobo in črnim klikajem v sredini.		
	Izdelek je mogoče reciklirati.		
	Pred uporabo preberite navodila za uporabo. Ta simbol je moder krog z belo podobo osebe, ki bere knjigo.		
	Pred uporabo preberite navodila za uporabo		Pozor! Glejte navodila za uporabo.
	Oznaka CE. Oznaka EU za skladnost medicinskega pripomočka, medicinski pripomoček razreda I.		
	Pooblaščen zastopnik za Švico		
	Zakoniti proizvajalec		Datum proizvodnje
	Identifikator izdelka		Medicinski pripomoček
	Serijska številka		Edinstvena identifikacija pripomočka
	Kemično čiščenje ni dovoljeno		Sušenje v senci
	Likanje ni dovoljeno		Ne belite
	Sušenje v stroju		Ne perite
	Ne sušite v sušilnem stroju		
	Pranje Simbol je vedno prikazan v kombinaciji s priporočeno temperaturo v °C in °F.		
	Brez lateksa		
	Redni pregledi		
	Izdelka ne uporabljajte (Samo na izdelkih Solo in vidno samo po umivanju, ko je uporaba prepovedana)		Ime pacienta
	Uporaba na samo enem pacientu (samo na izdelkih Solo)		
	V smeri navzgor in simbol na zunanji strani opreme.		Simbol na zunanji strani opreme.
	Črtna koda GS1 Data Matrix, ki lahko vsebuje naslednje informacije. (01) Globalna trgovinska identifikacijska številka (11) Datum proizvodnje (leto, mesec, dan) (21) Serijska številka		

Nega in vzdrževanje

Vrečo pred vsako uporabo pregledajte. Preverite, ali so naslednji deli obrabljeni ali poškodovani:

- Tkanina
- Pasovi
- Šivi
- Zanke
- Zaponke

⚠ Ne uporabljajte poškodovane opreme za dviganje.

V primeru nejasnosti se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja.

Kadar vrečo uporabljate za kohanje ali prhanje: po uporabi v kadi in pod tušem morate vrečo namestiti tako, da se čim prej posuši.

Navodila za čiščenje in razkuževanje: na vreči si oglejte označbo izdelka in priloženi dodatek »Nega in vzdrževanje vreč Liko«. Varnostne zaponke na mod. 64 morajo biti med pranjem zaprte.

Material: vreča MasterVest je izdelana iz poliestra.

Redni pregledi

Izdelek je treba pregledati vsaj enkrat na 6 mesecev. Če se izdelek uporablja ali pere pogosteje kot običajno, bodo morda potrebni pogostejši pregledi. Za dodatne informacije o protokolih se obrnite na zastopnika družbe Hillrom.

Pričakovana življenjska doba

Model 60: izdelek ima ob pravilni uporabi pričakovano uporabno dobo 5 let.

Model 64: izdelek ima ob pravilni uporabi pričakovano uporabno dobo 4 let.

Življenjska doba je odvisna od tkanine, pogostosti uporabe, postopka pranja in obremenitve. Družba Hillrom priporoča, da se izdelek uporablja samo v času pričakovane življenjske dobe.

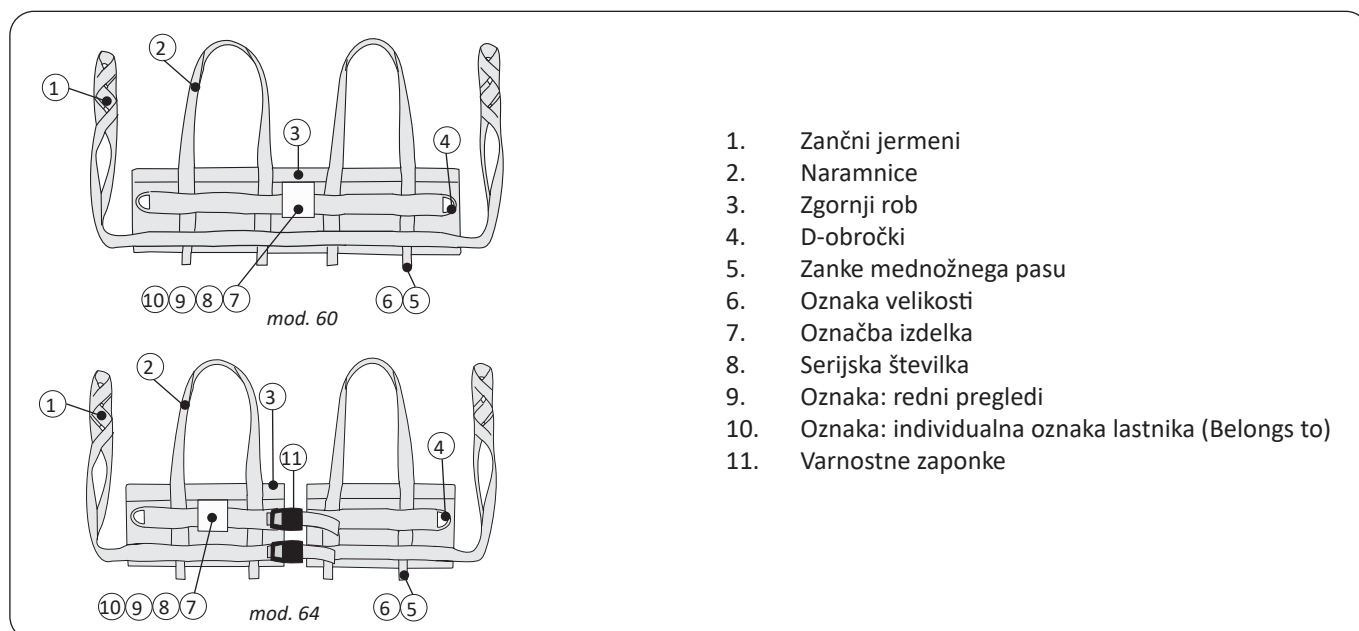
Navodila za recikliranje

Celotno vrečo, vključno z opornicami, podložnim materialom itd., je treba odložiti med vnetljive odpadke.

Družba Hillrom svojim uporabnikom zagotavlja oceno in navodila za varno ravnanje s pripomočki in njihovim odlaganjem za preprečitev poškodb, kot so na primer ureznine, predrtje kože in odrgnine, zagotavlja pa tudi navodila o obveznem čiščenju in razkuževanju medicinskih pripomočkov po uporabi in pred odlaganjem. Kupci morajo upoštevati vse zvezne, državne, regionalne in/ali lokalne zakone oziroma predpise, ki urejajo varno odlaganje medicinskih pripomočkov in dodatne opreme.

Če ste kot uporabnik pripomočka v dvomih, se lahko najprej obrnete na tehnično podporo Hillrom, kjer lahko dobite informacije o protokolih varnega odlaganja.

Opredelitev pojmov




Kako izbrati velikost vreče

⚠ Uporabite samo vrečo, ki je ustrezne velikosti za pacienta. Pravilno velikost oceni usposobljen negovalec. Lahko pride do ukleščanja ali zadušitve pacienta.


Pri izbiri velikosti vreče upoštevajte obseg pacienta in mere širine telovnika na vreči. Mere pacienta (glejte navodila za merjenje) primerjajte z merami vreče (glejte tabelo ali navodila za merjenje).

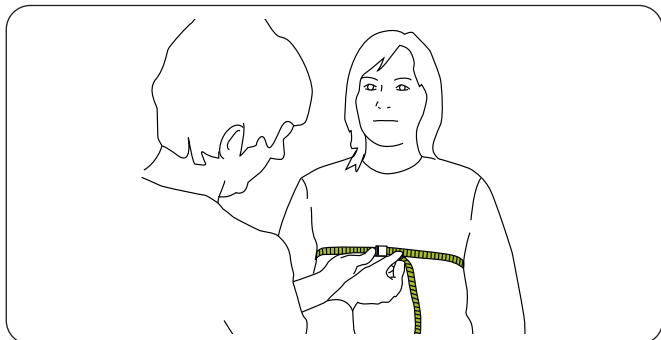Obseg prsnega koša pacienta izmerite na naslednji način:




Izmerite obseg pacientovega prsnega koša (pod prsmi pri ženskah).

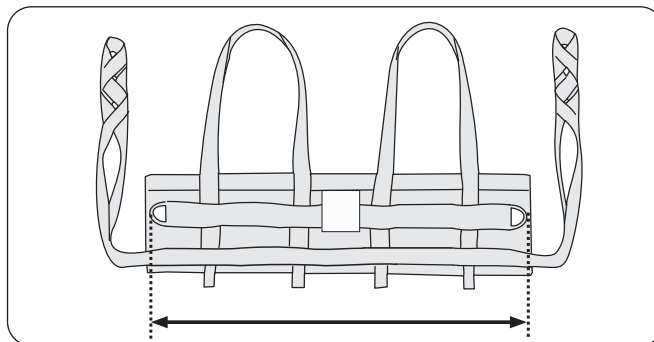Širino telovnika na vreči izmerite na naslednji način:




Izmerite zunanjo razdaljo med kovinskimi zankami. Mere lahko najdete tudi v razdelku »Mere«, glejte stran 7.

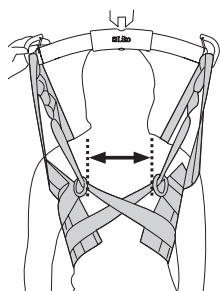
Izbira pravilne velikosti:



5–30 cm

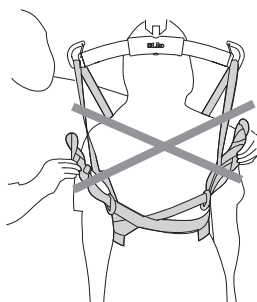


več kot 30 cm

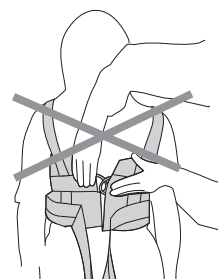

manj kot 5 cm

Izberite vrečo z merami širine telovnika, ki je 5–30 cm manjša od obsega pacientovega prsnega koša. Vrzel med kovinskimi zankami mora biti od 5 do 30 cm, ko je telovnik na pacientu in so naramnice popolnoma raztegnjene. Pri večjih vrečah je lahko vrzel med kovinskimi zankami večja. Prepričajte se, da ste izbrali pravo velikost vreče, in skrbno prilagodite zanke jermene.

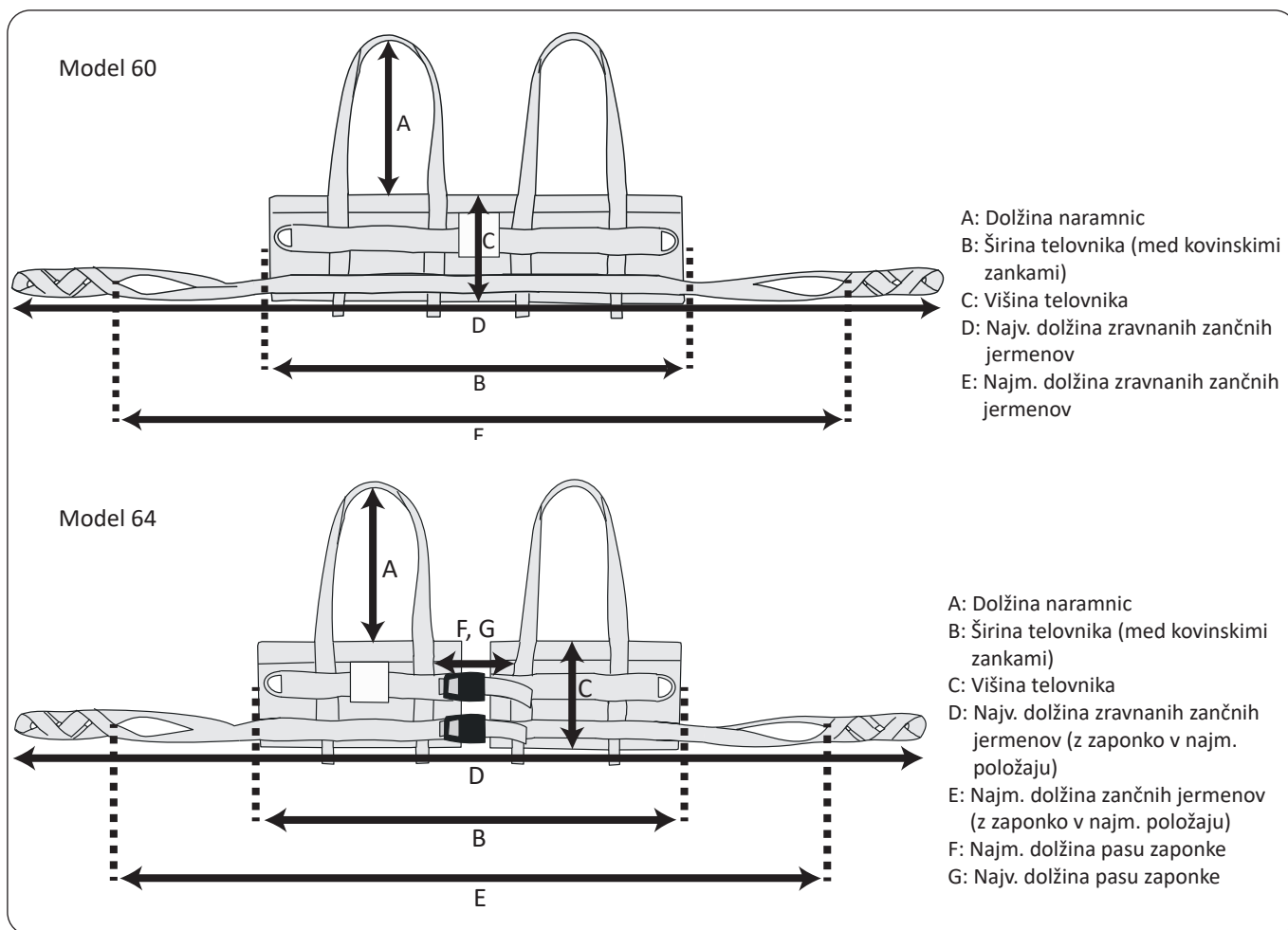Mere



Mere v centimetrih, model 60

VELIKOST	A	B	C	D	E	Največja obremenitev (kg)	Št. izdelka
XS	43	60	18	204	170	200	3560113
S	48	70	23	190	156	200	3560114
M	38	80	23	197	164	200	3560115
L	39	90	22	207	174	200	3560116
XL	39	100	22	233	198	300	3560117
XXL	38	110	23	250	218	300	3560118

Mere v palcih, model 60

VELIKOST	A	B	C	D	E	Največja obremenitev (lb)	Št. izdelka
XS	17	24	7	80	67	440	3560113
S	19	28	9	75	61	440	3560114
M	15	32	9	78	65	440	3560115
L	15	35	9	92	78	440	3560116
XL	15	39	9	92	78	660	3560117
XXL	15	43	9	98	86	660	3560118

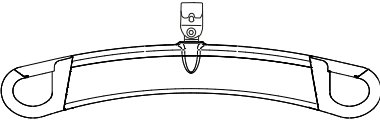
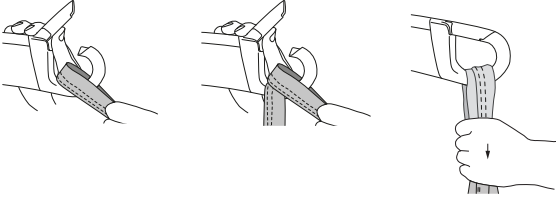
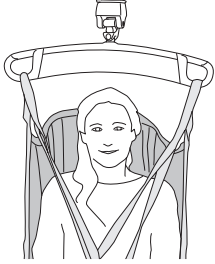
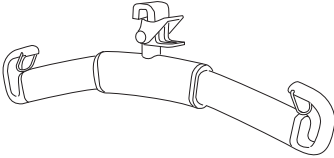
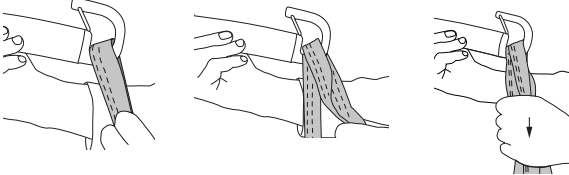

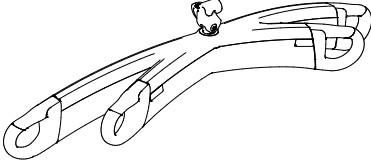
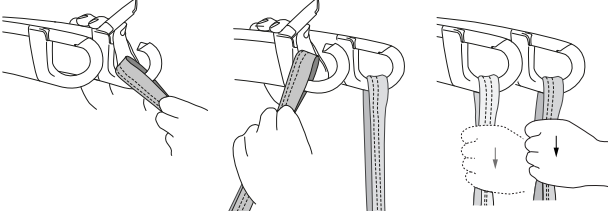
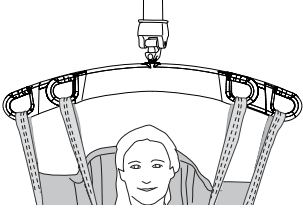
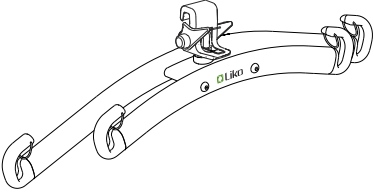
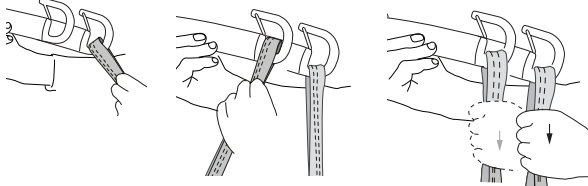
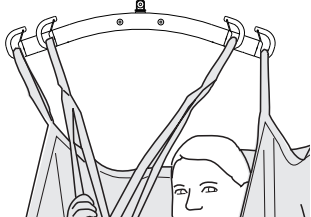
Mere v centimetrih, model 64

VELIKOST	A	B	C	D	E	F	G	Največja obremenitev (kg)	Št. izdelka
S	39	70	22	182	149	10	35	200	3564114
M	38	80	22	190	157	11	36	200	3564115
L	38	90	22	201	167	12	39	200	3564116
XL	38	100	23	215	182	17	46	200	3564117
XXL	39	110	22	239	205	16	43	200	3564118


Mere v palcih, model 64

VELIKOST	A	B	C	D	E	F	G	Največja obremenitev (lb)	Št. izdelka
S	15	28	9	72	59	4	14	440	3564114
M	15	32	9	75	62	4	14	440	3564115
L	15	35	9	79	66	5	15	440	3564116
XL	15	39	9	85	72	7	18	440	3564117
XXL	15	43	9	94	81	6	17	440	3564118


Namestitev vreče MasterVest na različne prečne nosilce

Prečni nosilec	Zanke vreče na kavljih prečnega nosilca	Pravilno
 <p style="text-align: center;">SlingGuard</p>		
 <p style="text-align: center;">Universal</p>		
 <p style="text-align: center;">SlingGuard Twin</p>		
 <p style="text-align: center;">Universal Twin</p>		

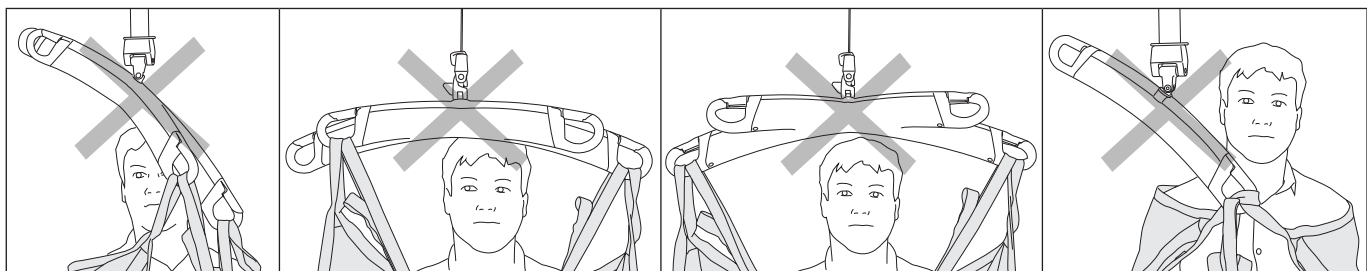
Napačno!



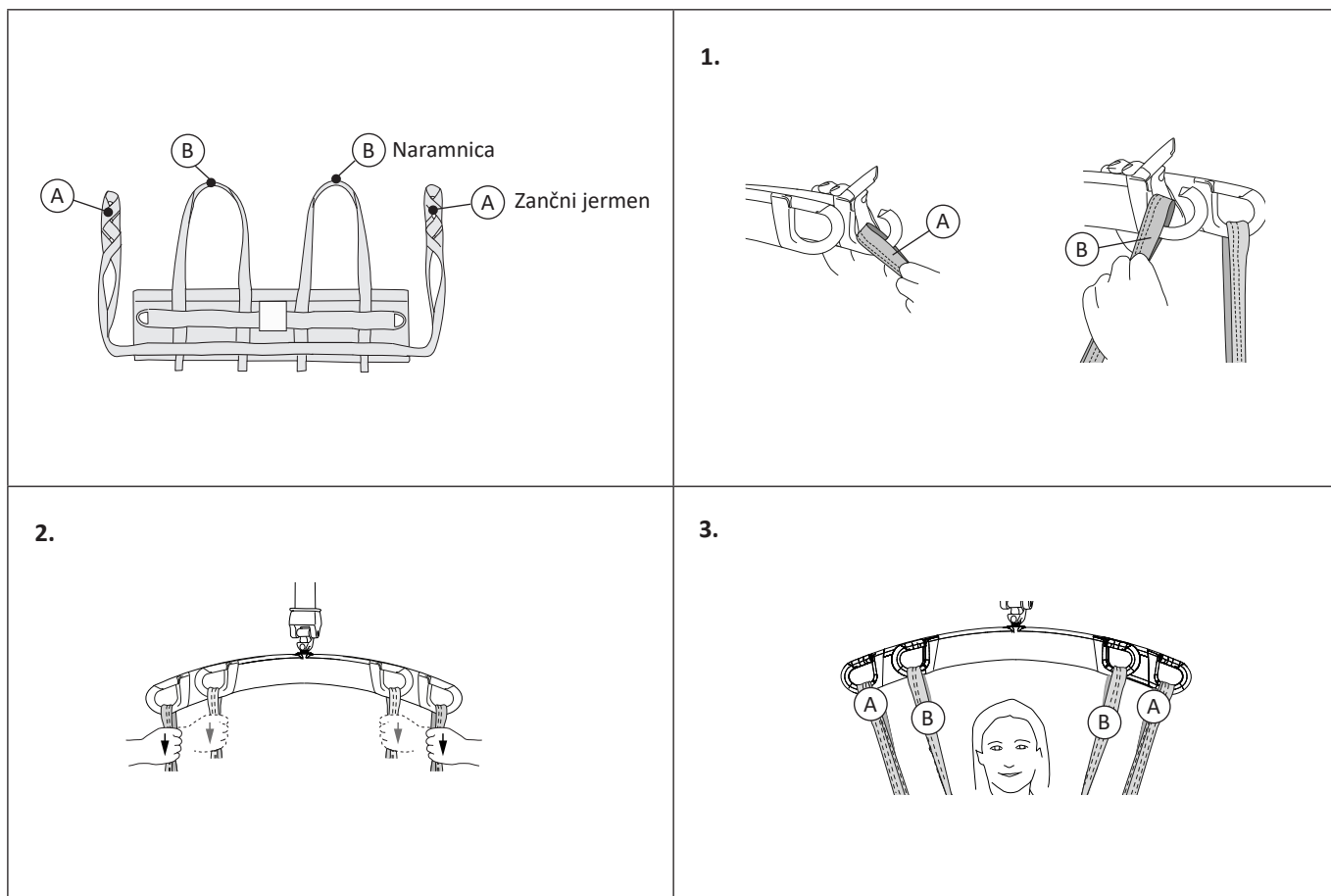Namestitev vreče MasterVest na nosilec Twin Bar




Dviganje iz sedečega položaja

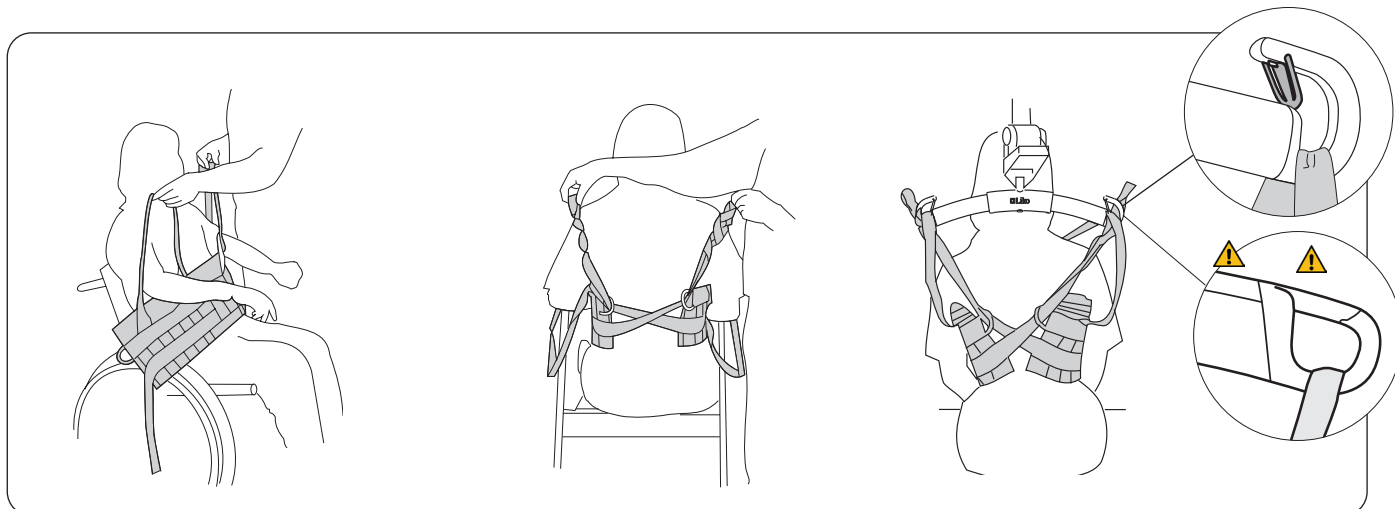

Nadenite MasterVest s sprednje strani. Pacientove roke morajo biti vstavljene skozi naramnici.

Za hrbtom: vsak zračni jermen povlecite čez hrbet in skozi kovinski D-obroček na nasprotni strani, kot je prikazano na sliki.

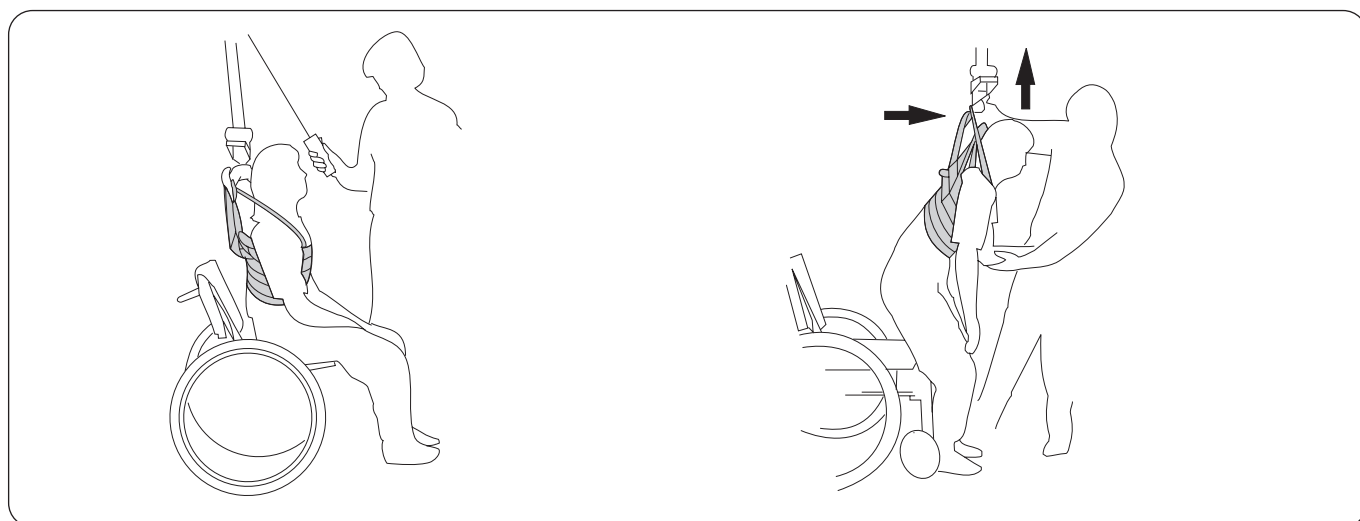Pritrdite zračne jermene, pri čemer naj bo drog prečnega nosilca za pacientovim hrbtom; glejte »Nastavitev zračnih jermenov« na strani 11-12. Pritrdite naramnice na prečni nosilec. Za navodila o priključitvi zank pasu na različne prečne nosilce glejte strani 8–9.



Pred dviganjem: prepričajte se, da pacient trdno stoji na tleh, da lahko nosi težo pri dviganju prečnega nosilca. Rahlo dvignite drog, da se pasovi napnejo (pacient naj se ne dvigne s sedeža), in preverite, ali je pritisk primerno porazdeljen okoli zgornjega dela pacientovega telesa.

Med dviganjem: prečni nosilec vlecite naprej, tako da počasi prenašate pacientovo težo, dokler ne stoji pokonci in stabilno. Nekoliko spustite prečni nosilec, da popustite pritisk okoli prsnega koša. Pacient ima zdaj priložnost, da težo prenese na noge in se vadi v ravnotežju.

Preizkušanje vreče Liko MasterVest

Nastavitev zračnih jermenov

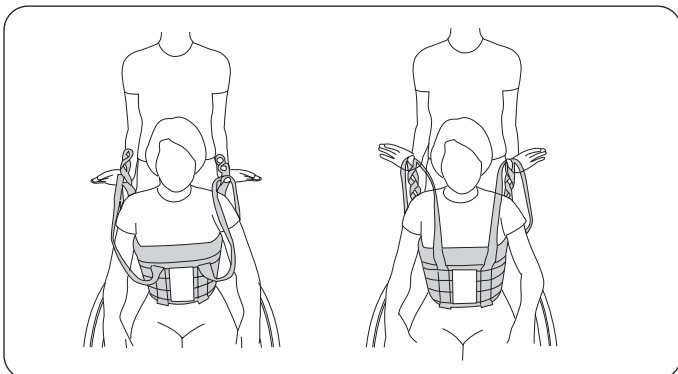
Zanka, ki jo pritrdite na drog prečnega nosilca, določa, kako tesno se telovnik oprime prsnega koša.

Če telovnik zdrsne navzgor, poskusite uporabiti notranjo zanko ali manjši telovnik.

Če se telovnik preveč tesno oprime prsnega koša, poskusite uporabiti zunanjo zanko ali večji telovnik.

Pri enako velikem telovniku morajo vitkejše osebe uporabljati notranjo zanko, večje osebe pa zunanjo. MasterVest je pravilno nastavljen, ko so naramnice in zračni jermeni pri dviganju pacienta enako napeti.


Preizkušanje zračnih jermenov



Če želite izvedeti, katera zanka zagotavlja najboljše prileganje, preizkusite zračne jermene, tako da potegnete različne zanke skupaj z naramnicami.


Če želite pomeriti, ali se zračni jermeni prilegajo, stopite za pacienta ter zataknete naramnice in zračne jermene na palca ter dvigajte, dokler pasovi niso napeti. MasterVest se pravilno prilega, ko so med dviganjem zračni jermeni in naramnice enako napeti.

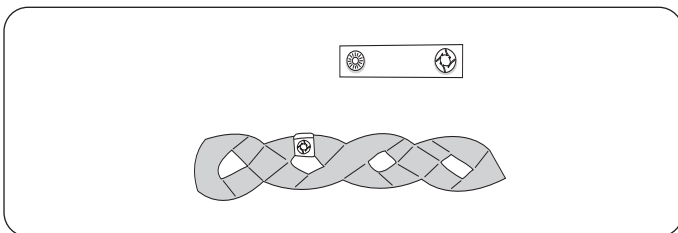Zaponke za zanke



S tem praktičnim pripomočkom lahko označite zanke, ki ste jih pomerili za določeno osebo. Negovalci tako lažje izberejo pravo zanko, na katero bodo nastavili prečni nosilec.

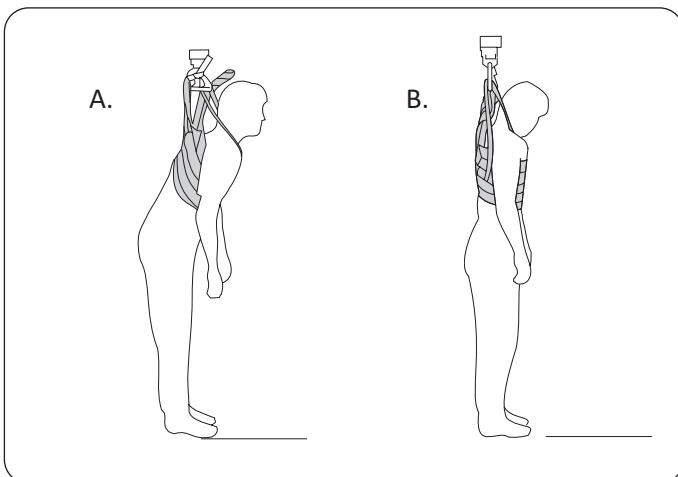Telesna drža




Posameznemu pacientu se lahko prilegata dve velikosti pripomočka MasterVest, vendar je treba ustrezno prilagoditi tudi zračne jermene. Rezultati so odvisni od telesne drže in porazdelitve pritiska po prsnem košu.

A. Pri večjem pripomočku MasterVest morate uporabiti eno notranjih zank na zračnem jermenu. Pacient se tako lahko nagne naprej in več pritiska potisne na spodnji del prsnega koša.

B. Pri manjšem pripomočku MasterVest morate eno zunanjih zank zračnega jermena pritrditi na prečni nosilec, da bodo vsi štirje jermeni enakomerno napeti. V tem primeru je telesna drža pokončnejša in pritisk enakomernije porazdeljen po prsnem košu.



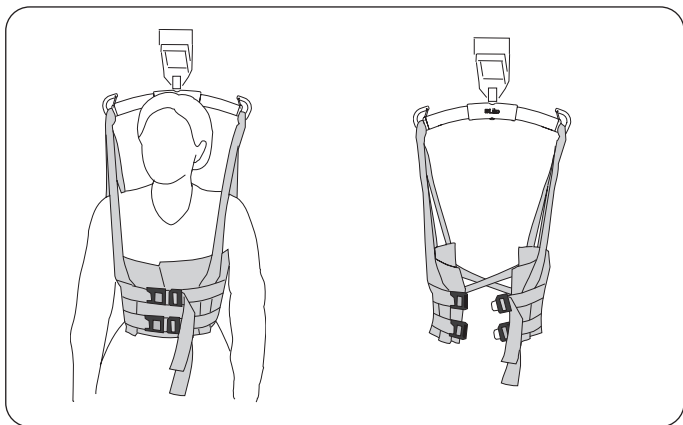MasterVest z zapiranjem spredaj, mod. 64



Na voljo so tudi modeli MasterVest z zapiranjem spredaj.

MasterVest se na prsnem delu zpenja z dvema nastavljivima varnostnima zaponkama. Ali je velikost telovnika primerna in ali so zančni jermeni pravilno nameščeni, preverite tudi kadar si pacienti telovnik nadenejo sami. Ko je telovnik MasterVest pravilno nastavljen, lahko visi s prečnega nosilca, ko si ga pacient oblači.

- ⚠️ Prepričajte se, da lahko pacient sam odpne zaponke oziroma mu pri odstranjevanju telovnika pomaga negovalec, da pacientu ne postane neudobno, če jopiča po končani dejavnosti ne odstranite.
- ⚠️ Če mednožni pas ni zaprt ali so zaponke pod preveliko napetostjo in se odpnejo, lahko telovnik zdrsne navzgor, zaradi česar je pacientu neudobno.

Težave med pomerjanjem?

Težava: telovnik zdrsne pod pazduhe pacienta.

Upoštevajte enega ali več naslednjih predlogov za nastavitve pripomočka MasterVest:

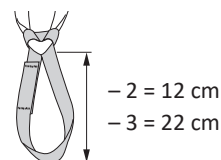
- Nastavite zančni jermen z notranjo zanko.
- Izberite manjšo velikost.
- Poskusite uporabiti mednožni pas.
- Med dviganjem pacienta držite telovnik za hrbtom, tako da s palcem pritiskate na prekrizane jermene zank.
- Med dviganjem naj pacient drži roke navzdol.

Priporočena oprema za dviganje

Extension Loop

Extension Loop, zelena, 12 cm
Extension Loop, zelena, 22 cm
Extension Loop, siva, 12 cm
Extension Loop, siva, 22 cm

Št. izdelka 3691102
Št. izdelka 3691103
Št. izdelka 3691302
Št. izdelka 3691303




Izbirni sestavni deli

Mednožni pas Leg Harness

Št. izdelka 3666004-06

S telovnikom **Liko** MasterVest lahko uporabljate poseben mednožni pas, ki preprečuje drsenje telovnika navzgor. Pas lahko nadenete, ko pacient sedi. Položaj in napetost pasu pa lahko prilagodite, ko pacienta dvignete. Jermene pasu lahko prekrižate ali vzporedno speljete skozi mednožje.

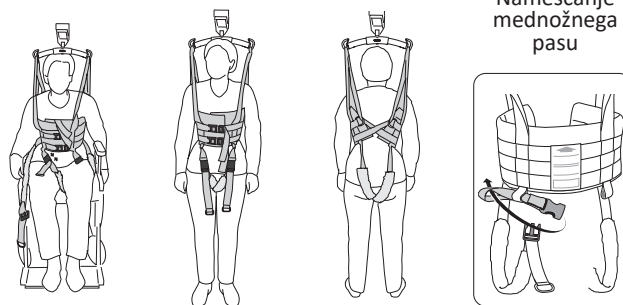OPOMBA! Mednožni pas je primeren za telovnike od serijske številke 736166 dalje. Za dodatne informacije o starejših modelih se obrnite na predstavnika podjetja Hillrom.




Obložene podloge za naramnice

Št. izdelka. 3666021

Obložene podloge so na voljo kot dodatna oprema za pomoč pri popuščanju pritiska na sprednjem delu naramnic.

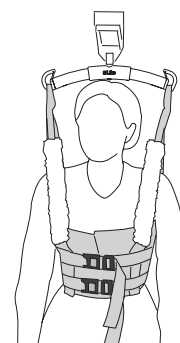
Obložene podloge imajo vzdolž ene strani sprimni trak za preprosto uporabo.



Zaponke za zanke

Zaponke za zanke, rdeče, 4 kosi
Zaponke za zanke, oranžne, 4 kosi
Zaponke za zanke, rumene, 4 kosi
Zaponke za zanke, modre, 4 kosi
Zaponke za zanke, 4 kosi

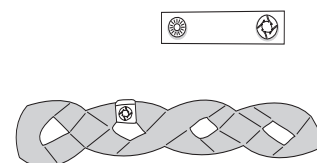Št. izdelka 3666033
Št. izdelka 3666034
Št. izdelka 3666035
Št. izdelka 3666036
Št. izdelka. 3666037



Pregled vreče LIKO MasterVest, mod. 60, 64

Izdelek	Št. izdelka	Velikost	Teža ¹	Največja obremenitev ²
MasterVest, mod. 60	3560113	XS	20–40 kg	200 kg
MasterVest, mod. 60	3560114	S	40–60 kg	200 kg
MasterVest, mod. 60	3560115	M	60–80 kg	200 kg
MasterVest, mod. 60	3560116	L	80–100 kg	200 kg
MasterVest, mod. 60	3560117	XL	100–130 kg	300 kg
MasterVest, mod. 60	3560118	XXL	120–300 kg	300 kg
MasterVest, mod. 64	3564114	S	40–60 kg	200 kg
MasterVest, mod. 64	3564115	M	60–80 kg	200 kg
MasterVest, mod. 64	3564116	L	80–100 kg	200 kg
MasterVest, mod. 64	3564117	XL	100–130 kg	200 kg
MasterVest, mod. 64	3564118	XXL	120–200 kg	200 kg

¹ Navedena teža pacienta je samo okvirna – lahko pride do odstopanj.

² Za ohranitev največje obremenitve morate uporabiti dvigalo/opremo, namenjeno za enako obremenitev ali večjo.

Priporočene kombinacije

Priporočene kombinacije za uporabo telovnika Liko MasterVest z drogovi prečnih nosilcev Liko:	Mini 220	Universal SlingBar 350	Standard 450	Universal SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670
	MasterVest, XS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MasterVest, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Razlaga: ✓ = priporočeno

Ta tabela je v pomoč pri izbiri, vendar je treba upoštevati, da so lahko zaradi različnih okoliščin kombinacije vreč in prečnih nosilcev neprimerne. Odobrene kombinacije v matrici mora še vedno oceniti in potrditi usposobljeni zdravstveni delavec.

Pritisk na prsni koš je pri različnih širinah prečnih nosilcev različen. Preizkušajte različne možnosti, dokler ne najdete najprimernejše možnosti za posameznega pacienta.

Druge kombinacije

Kombinacije z Liko MasterVest in Cross-bar, Cross-bar 450/670 ali Side bar niso primerne.

Drugačne kombinacije opreme in izdelkov, kot jih priporoča podjetje Liko, lahko predstavljajo tveganje za varnost pacienta.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, M220, M230, Multirall, Uno in Viking so blagovne znamke družbe Baxter International Inc. ali njenih podružnic.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švedska
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom