

Pacientský závěsný vak Liko™ Original HighBack Sling s vysokými zády, Mod. 200, 210



Návod k použití



Popis výrobku

Pacientský vak Original HighBack Sling (s vysokými zády) je základní model, který je určen k přizpůsobení pacientovi bez individuálních úprav a je jedním z našich nejpoužívanějších závěsů.

Zajišťuje lehce zakloněnou sedící polohu a vynikající podporu celého těla, která je správná pro pacienty se sníženou stabilitou trupu. Správně připevněný a pečlivě vybraný vak dává pacientovi výjimečný pocit bezpečí a také vysoký stupeň pohodlí.

Použití vaku Original HighBack Sling je také doporučeno při zvedání z podlahy nebo při spouštění na podlahu, neboť poskytuje pohodlnou podporu hlavy v poloze vsedě i vleže.

Velikosti

Pacientský vak Original HighBack Sling je k dispozici v různých velikostech. Pro zajištění maximálního pohodlí a bezpečnosti pacienta je důležitý výběr správné velikosti. Při použití příliš velkého vaku se zvyšuje riziko vyklouznutí pacienta, zatímco příliš malý vak se může zařezávat do třísel a způsobit nepohodlí.

U velkých velikostí může být správnou volbou kombinace s dvojitou hrazdou 670.

Tkaniny

Pacientský vak Original HighBack Sling je k dispozici v různých typech tkanin. Protože se vak OriginalSling po dokončeném přemístění pacienta obvykle neponechává pod pacientem, doporučujeme používat model z polyesteru. Tato tkanina je trvanlivá a má nízké tření a díky tomu se závěs snadno navléká a také snadno odstraňuje.

Pacientský vak Original HighBack je také k dispozici ze síťového polyesteru. Tato tkanina se doporučuje, když se závěs po přemístění pacienta ponechává na místě nebo upřednostňujete-li vzdušnější alternativu.

Pro koupání a sprchování je k dispozici model z plastovaného síťového polyesteru, který propouští vodu a lze jej snadno otřít. Tento materiál rychle vysychá a nestudí pacienta jako vlhké savé tkaniny.

Pokud dáváte přednost pevnému otíratelnému materiálu, je k dispozici také model z látky s plastovým povrchem.

Zvedací popruhy vaku jsou vždy vyrobeny z odolného polyesteru.

Podpěry nohou

Pacientský vak Original HighBack Sling je k dispozici s různými modely podpěr nohou. Nejběžnější jsou vyztužené podpěry nohou. Výztuž zajišťuje vysoké pohodlí, rozkládá tlak a brání mačkání závěsu pod stehny.

Jeden model je vyroben z jednoduché tkaniny bez vyztužení podpěr nohou, díky tomu je závěs flexibilnější a snadno se udržuje.

V tomto dokumentu je zvedaná osoba označena jako „pacient“ a osoba, která při zvedání pomáhá, je označena jako „ošetřovatel“.

DŮLEŽITÉ!

Zvedání a přenášení pacientů vždy znamená určitou míru rizika. Před použitím si přečtěte návod k použití zvedáku i zvedacího příslušenství. Je důležité úplně porozumět obsahu návodu k použití. Toto zařízení smí obsluhovat pouze vyškolený personál. Ověřte si, že zvedací příslušenství je vhodné pro použitý zvedák. Při používání dbejte opatrnosti. Jako ošetřující personál vždy zodpovídáte za bezpečnost pacienta. Musíte být vždy dobře informováni o stavu pacienta a jeho schopnosti zvládnout situace zahrnující zvedání. Pokud je vám něco nejasné, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Obsah

Popis symbolů	3
Bezpečnostní pokyny	4
Péče a údržba	5
Definice	5
Způsob upevnění patientského závěsného vaku k různým závěsným hrazdám	6
Způsob upevnění patientského vaku Original HighBack Sling k závěsné hrazdě se 4 háky (dvojitě hrazdy a křížové závěsné hrazdy)	7
Zvedání ze sedu	8
Spouštění do sedu	9
Odstranění vaku z křesla / invalidního vozíku	9
Zvedání z lůžka.....	10
Aplikace vaku vleže na lůžku.....	10
Aplikace vaku vsedě na lůžku	10
Zvedání a spouštění na lůžko	11
Odstranění vaku vleže na lůžku	11
Odstranění vaku vsedě na lůžku	11
Zvedání z podlahy	12
Spouštění na podlahu	12
Rady pro uchycení vaku.....	13
Různé polohy vsedě.....	13
Různé způsoby připojení podpěry nohou.....	13
Proč pacient ve vaku nesedí správně?	14
Poloha pro zkrácení	14
Příslušenství.....	14
Přehled výrobků Liko Original HighBack Sling, Mod 200, 210	15
Kombinace.....	15

Popis symbolů

V tomto dokumentu nebo na výrobku se můžete setkat s těmito symboly.

Symbol	Popis
	Výstraha. Používá se v situacích, které vyžadují zvláštní péči a pozornost.
	Před použitím si prostudujte návod k použití.
	Značka CE
	Zákonný výrobce
	Datum výroby
	Referenční číslo
	Sériové číslo
	Zdravotnický prostředek
	Nepoužívat suché čištění
	Nežehlit
	Sušení v sušičce
	Nesušte v sušičce
	Praní Symbol je vždy v kombinaci s doporučenou teplotou ve °C a °F.
	Neobsahuje latex
	Pravidelné prohlídky
	Nepoužívejte bělidlo
	Sušte na šňůře ve stínu
	Směr vzhůru a symbol na vnější části vybavení.
	Symbol na vnější části vybavení.
	Čárový kód datové matice GS1, který může obsahovat následující informace. (01) Číslo globální obchodní položky (11) Datum výroby (21) Sériové číslo

Bezpečnostní pokyny

Před zvedáním mějte na paměti následující body:

- Zodpovědná osoba na vašem pracovišti by měla individuálně rozhodnout, zda je k určitému zvedání/přesunu potřeba jedna nebo více osob;
- Zkontrolujte, zda zvolený vak odpovídá potřebám pacienta, co se týče typu, velikosti, materiálu a konstrukce;
- Z bezpečnostních a hygienických důvodů používejte individuální patientské vaky;
- Předtím, než pacienta zvednete, si naplánujte postup zvedání tak, aby proběhlo co nejbezpečněji a nejpohodlněji;
- Před zvednutím pacienta zkontrolujte, zda zvedací příslušenství visí svisle a zda se může volně pohybovat;
- Přestože jsou závěsné hrazdy Liko vybaveny západkami, je třeba dbát zvláštní opatrnosti. Předtím než pacienta zvednete z podkladové plochy, ale až ve chvíli, kdy jsou plně napnuty popruhy vesty, zkontrolujte, zda jsou popruhy správně připevněny k hákům závěsné hrazdy.
- Před přesunem pacienta na jiné místo zkontrolujte, zda sedí bezpečně v závěsu;
- Nikdy nezvedejte pacienta nad podkladovou plochu výše, než je nutné k dokončení pohybu zvednutí a přesunu;
- Během zvedání nikdy nenechávejte pacienta bez dozoru;
- Zkontrolujte, zda jsou během zvedání či přemísťování zabrzděna všechna kolečka invalidního vozíku, lůžka nebo lehátka;
- Pracujte vždy ergonomicky. Využívejte pacientovy schopnosti aktivně se účastnit na jednotlivých činnostech.
- Pokud se vak nepoužívá, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Po provedení přesunu se doporučuje patientský vak odstranit. Pokud je z nějakých důvodů výhodnější vak po přesunu ponechat, doporučuje se použít patientský vak ze síťového polyesteru.

 **Nesprávné připevnění patientského závěsného vaku k závěsné hrazdě by mohlo pacientovi způsobit zranění.**

 **Ruční otáčení pacienta na lůžku může způsobit poranění ošetřovateli.**

 Zdravotnický prostředek třídy 1

PATENT www.hillrom.com/patents

Na tento výrobek se může vztahovat jeden nebo více patentů. Viz výše uvedenou internetovou adresu.

Společnosti skupiny Hill-Rom jsou držiteli evropských, amerických a jiných patentů a předkladateli projednávaných patentových přihlášek.

Design and Quality by Liko in Sweden

Výrobky Liko prochází neustálým vývojem, a proto si vyhrazujeme právo na změnu výrobku bez předchozího upozornění. Informace o aktualizaci výrobní řady Liko™ poskytne autorizovaný zástupce společnosti Hill-Rom.

Upozornění pro uživatele a/nebo pacienty v EU

Všechny závažné příhody, ke kterým dojde v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, musí být hlášeny výrobci a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.

Péče a údržba

Před každým použitím zkontrolujte závěs. Zkontrolujte následující prvky, zda nejsou opotřebené a poškozené:

- Tkanina;
- Popruhy;
- Švy;
- Závěsné smyčky;

⚠ Nepoužívejte poškozené zvedací příslušenství.

Pokud něčemu nerozumíte, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Pokud se patientský vak používá ve vaně nebo ve sprše: po použití ve vaně nebo ve sprše je nutno vak uložit tak, aby co nejrychleji vyschl.

Pokyny pro praní: viz štítek výrobku na vaku a přiložený dodatek „Patientské vaky Liko – péče a údržba“.

Pravidelné prohlídky

Výrobek musí být prohlížen minimálně každých 6 měsíců. Častější prohlídky mohou být vyžadovány, pokud jsou výrobky používány nebo čištěny častěji, než je obvyklé. Viz protokol „Pravidelné prohlídky textilních výrobků společnosti Liko“. O tyto protokoly požádejte svého zástupce společnosti Hill-Rom.

Předpokládaná životnost

Výrobek má předpokládanou životnost 1–5 let za normálního použití. Životnost se liší podle tkaniny, četnosti použití, postupu praní a nošené hmotnosti.


Pokyny pro recyklaci

Celý produkt včetně dlah, výplňového materiálu atd. by měl být tříděn jako spalitelný odpad.

Společnost Hill-Rom poskytuje svým uživatelům vyhodnocení a pokyny k bezpečné manipulaci a likvidaci jejich zařízení a pomáhá tak s prevencí poranění, mimo jiné pořezání, propíchnutí kůže, odřenin. Poskytuje také pokyny k požadovanému čištění a dezinfekci zdravotnického prostředku po použití a před jeho likvidací. Zákazníci by se měli řídit všemi místními a národními zákony a směrnicemi, které se týkají bezpečné likvidace zdravotnických prostředků a příslušenství.















V případě pochybnosti má uživatel nejprve kontaktovat technickou podporu společnosti Hill-Rom a vyžádat si protokoly bezpečné likvidace.

Definice

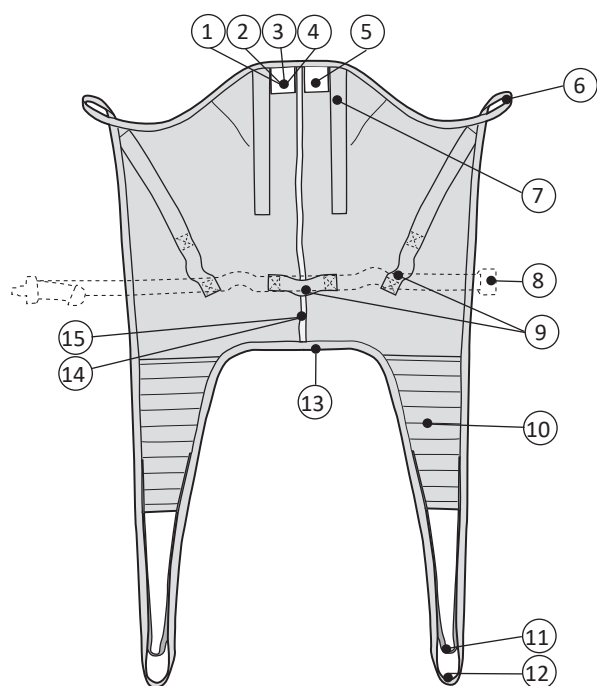


1. Štítek výrobku
2. Štítek: Rok a měsíc výroby ()
3. Štítek: Sériové číslo (S/N)
4. Štítek: Individuální značení (Belongs to)
5. Štítek: Pravidelná prohlídka
6. Horní smyčka popruhu
7. Podpěra hlavy s výztuhami
8. Pásek (velikost XS, S)
9. Rukojeť
10. Podpěra nohy
11. Poloha pro zkrácení
12. Smyčka podpěry nohy
13. Dolní okraj
14. Střední zádový popruh
15. Označení velikosti





Způsob upevnění patientského závěsného vaku k různým závěsným hrazdám

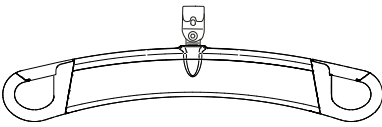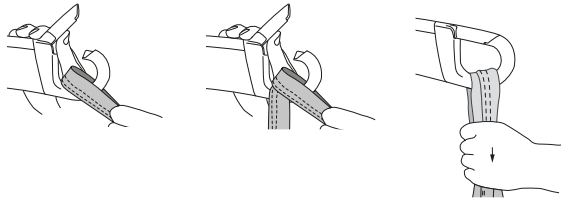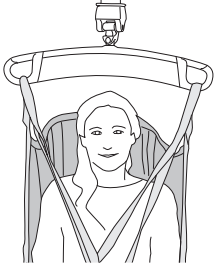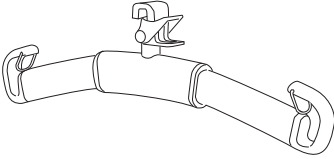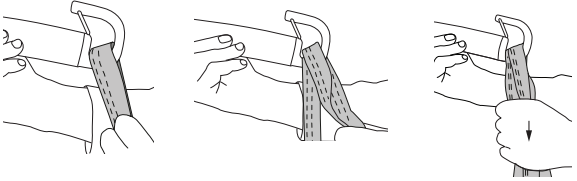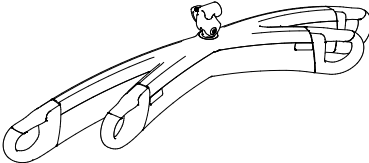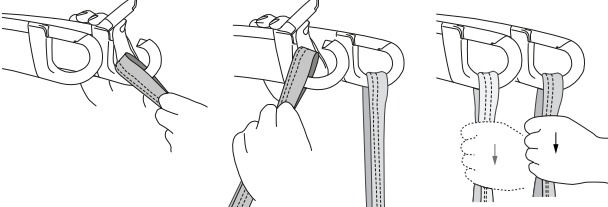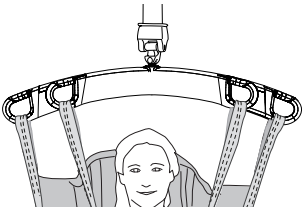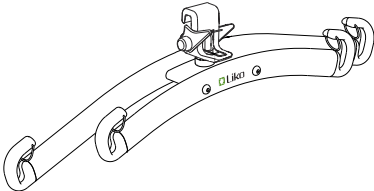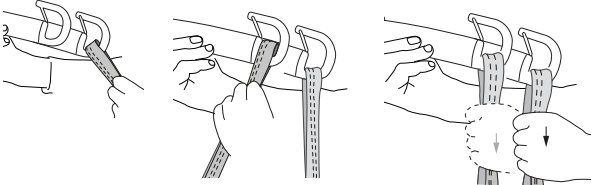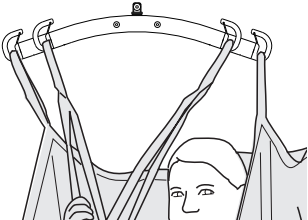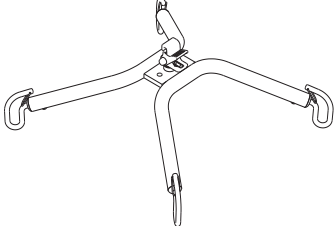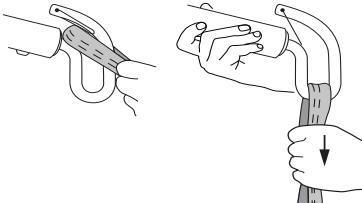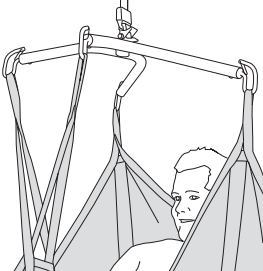Závěsná hrazda	Smyčky patientského vaku k hákům závěsné hrazdy	Správně
 SlingGuard™		
 Univerzální		
 SlingGuard™ Twin		
 Univerzální dvojité hrazda		
 Křížová hrazda		

Špatně!

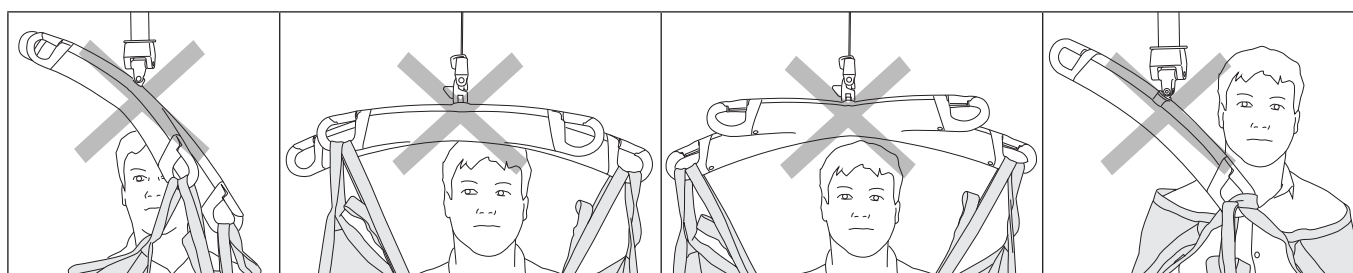


Způsob upevnění patientského vaku Original HighBack Sling k závěsné hrazdě se 4 háky (dvojitá hrazdy a křížové závěsné hrazdy)

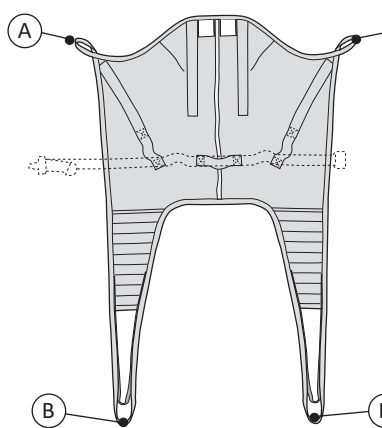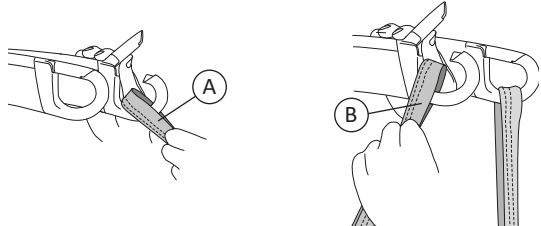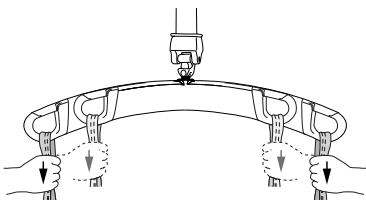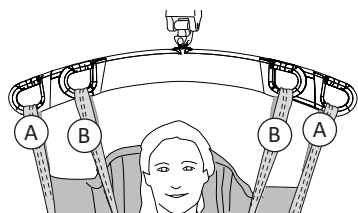 A Horní smyčka popruhu B Smyčky podpěr nohou	1. 
2. 	3.  Na ilustracích 1, 2 a 3 je zobrazena dvojitá hrazda, ale postup se týká i použití křížové závěsné hrazdy.


Zvedání ze sedu

Pro umístění patientského vaku podle ergonomických principů jsou potřeba dva ošetřovatelé. Během aplikace vaku je potřeba pacienta obvykle naklonit dopředu a proto je důležité, aby před ním stál ošetřovatel, který eventuálně zabrání jeho pádu.

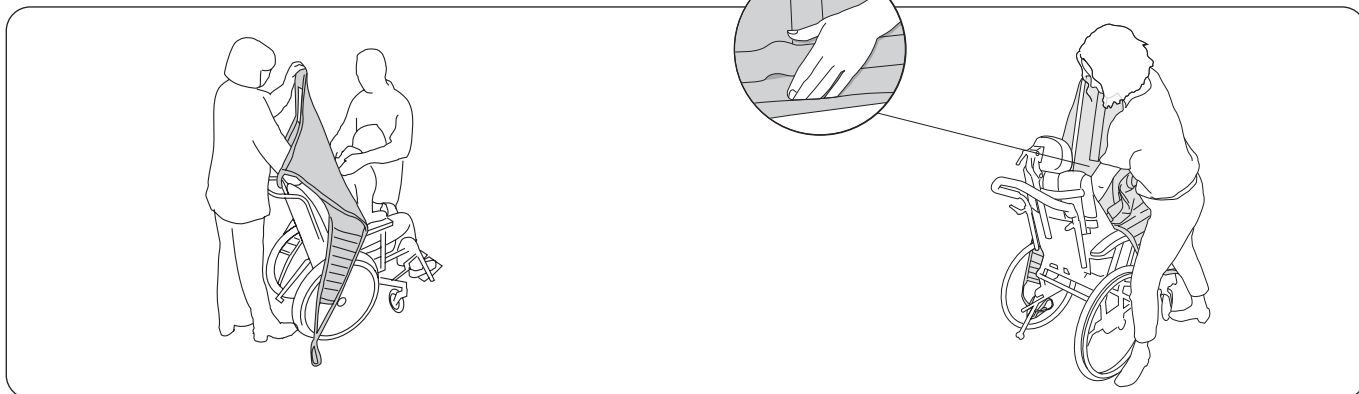


Pacientský vak umístěte za záda pacienta tak, aby štítek výrobku směřoval ven. Dolní okraj vaku si oviňte kolem konečků prstů, abyste si usnadnili jeho umístění.

Dolní okraj vaku zatlačte dlaní směrem dolů až na úroveň kostrče pacienta – **pozor, je velmi důležité**. **Tip:** Správné umístění je jednodušší, pokud se pacient (s vaší pomocí) nakloní mírně dopředu.

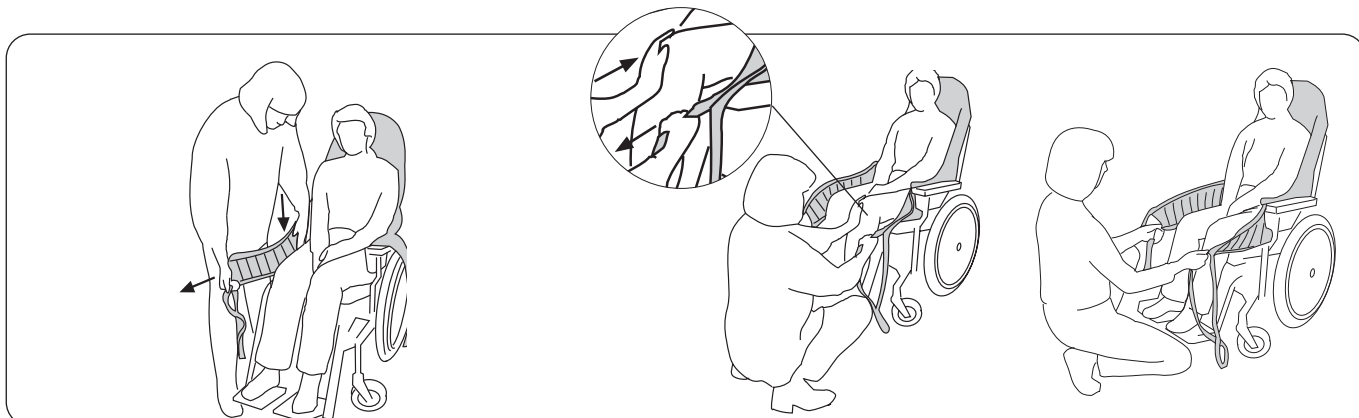


Vytáhněte podpěry nohou vaku dopředu podél vnější strany stehen pacienta. Dlaň ruky dejte mezi záda pacienta a vak a tlačte dolní okraj podpěry nohy směrem k sedáku. Druhou rukou přitom za podpěry nohou táhněte vpřed, aby se napnuly.

Potáhněte podpěry nohou směrem dopředu, aby se vyhladily veškeré záhyby v zadní části. Zkontrolujte, zda obě podpěry nohou vyčnívají ve stejné délce. **Tip:** Když pacienta jemně uchopíte pod kolenem, budou se podpěry nohou lépe potahovat dopředu.

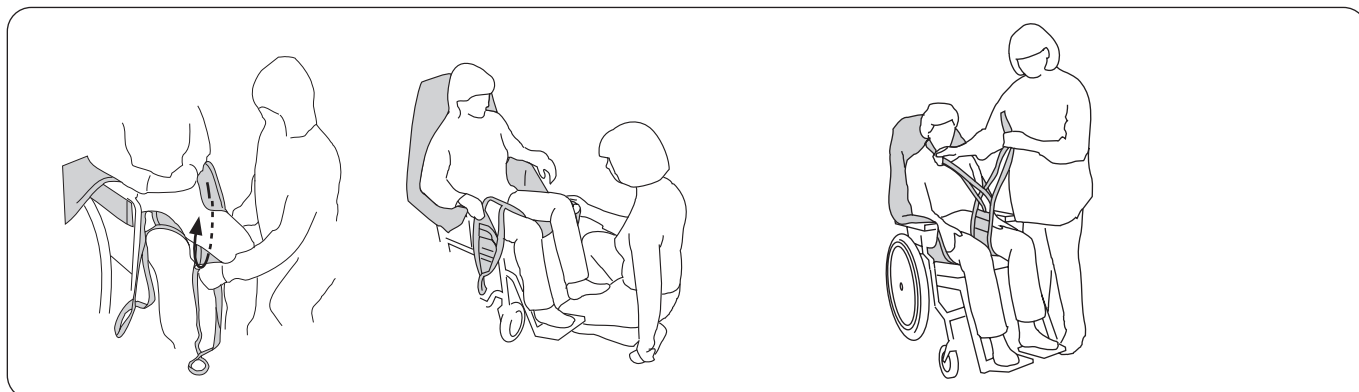

Umístěte podpěry nohou pod každé stehno. Zkontrolujte, zda je tkanina vyhlazená a zda obepíná správným způsobem celé stehno. **Tip:** Podpěry nohou se aplikují snadněji, když se nohy pacienta mírně nadzvednou ze sedáku. To lze učinit tak, že chodidla pacienta položíte na opěrku chodidel nebo na svou vlastní nohu (viz obrázek).

Připravte spojení podpěr nohou. Nejběžnějším způsobem aplikace závěsu je způsob se zkříženými podpěrami nohou. Alternativní metody viz strana 13.

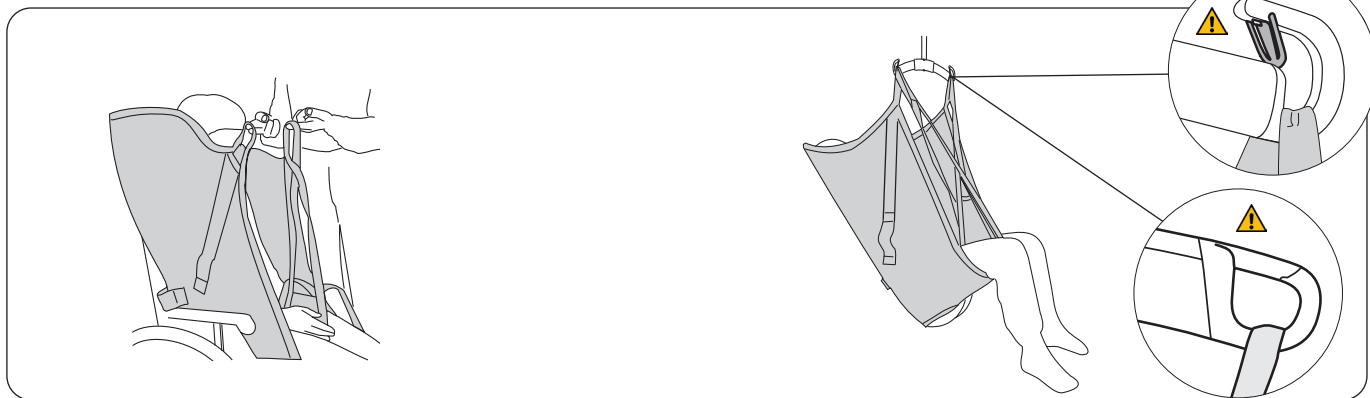


Tip: Před zvednutím pacienta zkontrolujte, zda jsou všechny nosné smyčky stejně dlouhé, tj. zda jsou při narovnání ve stejné výšce. Pokud ve stejné výšce nejsou, upravte pozici vaku.

Nejdříve k hákům závěsné hrazdy připojte horní smyčky popruhu a poté smyčky podpěry nohou. Pokyny pro upevnění smyček patientského vaku k odlišným závěsným hrazdám najdete na straně 6-7. Zvedněte pacienta.

Spouštění do sedu

Při přemísťování pacienta na invalidní vozík je důležité, abyste pacienta posadili dostatečně dozadu, aby na vozíku seděl správně. To lze docílit několika způsoby.

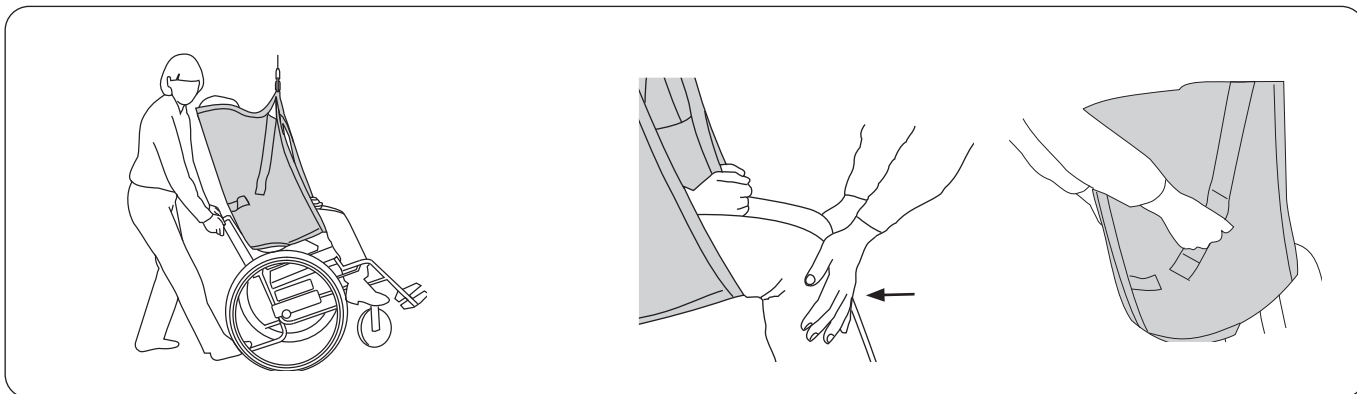

Při přemísťování pacienta na invalidní vozík: Během spouštění pacienta nakloňte vozík dozadu. V poslední fázi spouštění nechte hýždě pacienta sklouznout dolů k opěrce zad. Úhel naklonění invalidního vozíku ovládejte svou nohou na sklápěcí podpěře.

Alternativně: Během spouštění mírně zatlačte pod kolena pacienta tak, aby se hýždě nasměrovaly směrem k opěrce zad vozíku. Má-li vak rukojeti, lze je použít k navádění.

⚠ Rukojeti nepoužívejte ke zvedání! Pokud se na rukojeti působí nadměrnou silou, může se vak roztrhnout.

Odstranění vaku z křesla / invalidního vozíku

Po provedení přesunu doporučujeme vak odstranit. Pokud je z nějakých důvodů lepší vak po přesunu ponechat na vozíku, doporučujeme používat vak ze síťového polyesteru.



Opatrně odstraňte podpěry nohou. Nejšetrnější způsob (PS) je jejich vytáhnutí za smyčky při jejich vedení pod tkaninovou částí podpěry nohy.


Pacientský vak odstraňte opatrným tažením podpěry nohy vzhůru.

Zvedání z lůžka

Pacientský vak lze aplikovat různými způsoby podle stavu pacienta. Používá se buď u pacienta ležícího nebo sedícího na lůžku. Při použití moderní tlakové matrace, může být výhodou matraci plně nahustit, aby byla aplikace vaku snazší.


Pamatujte na svůj vlastní postoj při práci a na pohodlí pacienta. Využijte funkce lůžka pro spouštění a zvedání. Správný postoj při práci se dosáhne, pokud je matrace v úrovni loketních kloubů ošetřovatele, když má ruce spuštěné podél těla. Je třeba provést individuální posouzení počtu ošetřovatelů nutných pro danou operaci, a to podle náročnosti pro ošetřovatele.

Aplikace vaku vleže na lůžku

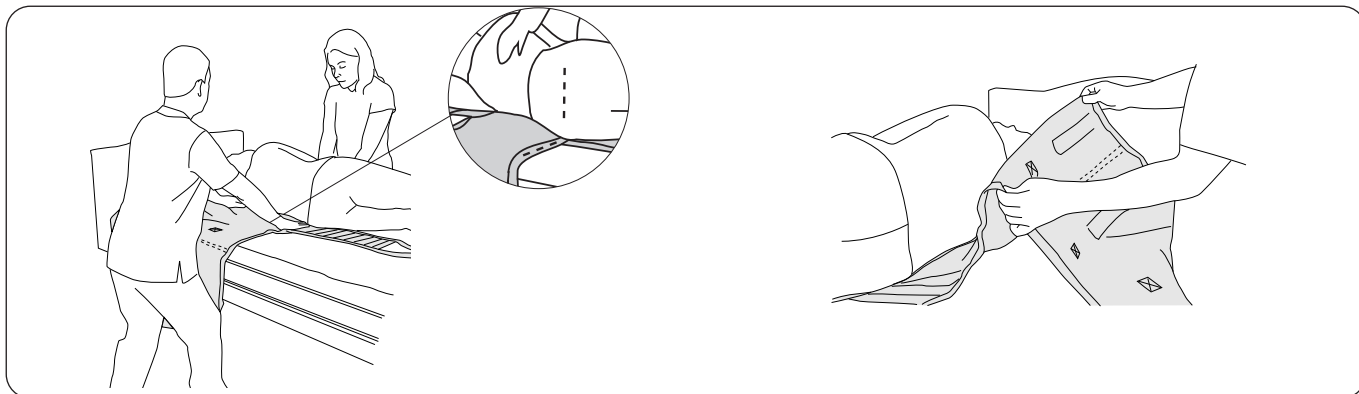

Otočte pacienta na bok. Tato operace je usnadněna, pokud je pacient schopen chytit se postranice lůžka, ke které je otáčen. Zasuňte okraj vaku pod pacienta tak, aby se dolní okraj **dostal na úroveň kostrče**.

Pacientský vak složte tak, aby „střední zádový popruh“ odpovídal páteři pacienta. Zkontrolujte, zda přehyb pokrývá okraj vaku, který směřuje k zadům pacienta, aby se snížilo tření. Opatrně pacienta otočte zpět a vytáhněte vak na druhé straně. Při této technice použití je potřeba pacienta otočit pouze jednou.

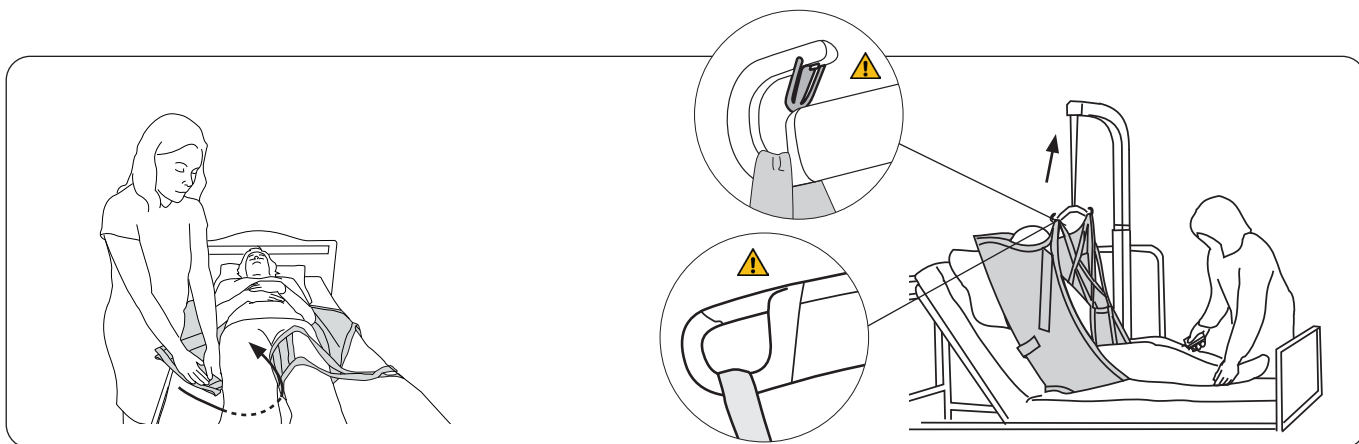

Umístěte podpěry nohou pod obě nohy. To lze nejlépe provést tak, že podpěru nohy během podsunutí pod koleno zatlačíte proti matraci. Zkontrolujte, zda je tkanina vyhlazená a zda správným způsobem obepíná celé stehno. Podpěry nohou lze připojit různými způsoby; viz strana 13.

Zvedněte záhlaví lůžka. Nejdříve k hákům závěsné hrazdy připojte horní smyčky popruhu a poté smyčky podpěr nohou. Pokyny pro upevnění smyček patientského vaku k odlišným závěsným hrazdám najdete na straně 6-7. Zvedněte pacienta.

Aplikace vaku vsedě na lůžku

Zvedněte záhlaví lůžka. Vak položte na lůžko štítkem výrobku dolů k matraci. Zasuňte okraj vaku pod záda pacienta tak, aby se dolní okraj **dostal na úroveň kostrče**. **Poznámka!** Aplikace vaku se usnadní, když se pacient nakloní (nebo jej nakloníte) dopředu.

Zvedání a spouštění na lůžko


Po provedení přesunu doporučujeme patientský vak odstranit. Pokud je z nějakých důvodů výhodnější vak po přesunu ponechat na lůžku, doporučujeme používat vak ze síťového polyesteru.

Pamatujte na svůj vlastní postoj při práci a na pohodlí pacienta. Využijte funkce lůžka pro spouštění a zvedání. Správný postoj při práci se dosáhne, pokud je matrace v úrovni loketních kloubů ošetřovatele, když má ruce spuštěné podél těla. Je třeba provést individuální posouzení počtu ošetřovatelů nutných pro danou operaci, a to podle náročnosti pro ošetřovatele.


Odstranění vaku vleže na lůžku




Umístěte pacienta nad lůžko. Pro větší pohodlí pacienta nadzvedněte záhlaví lůžka. Spusťte pacienta na lůžko. Spusťte záhlaví lůžka.

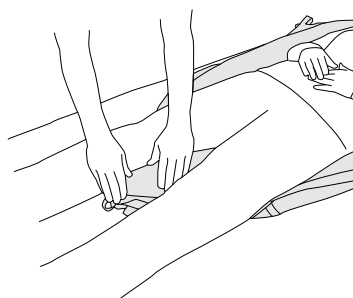

Umístěte smyčky podpěry nohou pod vlastní podpěry mezi nohy pacienta.

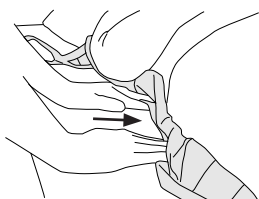


Uchopte okraj vaku. Vak zastrčte dolů pod jeho zbytek a tlačte jej proti matraci a pod pacienta.

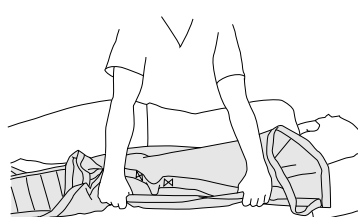


Opatrně otočte pacienta na bok. Uchopte vak, který leží pod ním, a opatrně jej vytáhněte.


Odstranění vaku vsedě na lůžku

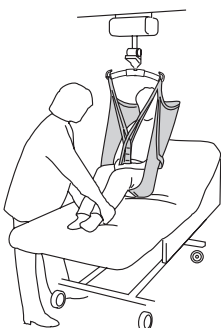

Umístěte pacienta nad lůžko. Zvedněte záhlaví lůžka tak, aby měl pacient pohodlí. Spusťte pacienta na lůžko.

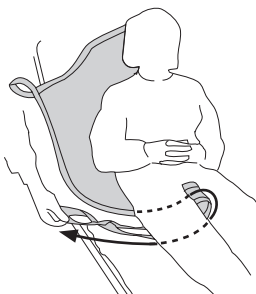

Odstraňte podpěry nohou tak, že táhnete za smyčky podpěry nohou, a to jejich vedením pod tkaninovou částí podpěry. **Tip:** Je to snadnější, když má pacient ohnuté nohy.


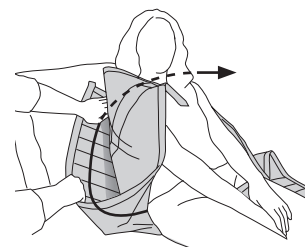


Pacientský vak vyjměte zatažením jedné podpěry nohou dozadu za vak a křížem na druhou stranu.

Zvedání z podlahy


Níže je popsáno zvedání z podlahy pomocí mobilního zvedáku Golvo. Stejná technika je vhodná také pro zvedání pomocí jiných mobilních a stacionárních zvedáků Liko. Přečtěte si návod k použití zvedáku, který chcete použít.

Tip: Pro pacienta může být pohodlné dát mu pod hlavu polštář.

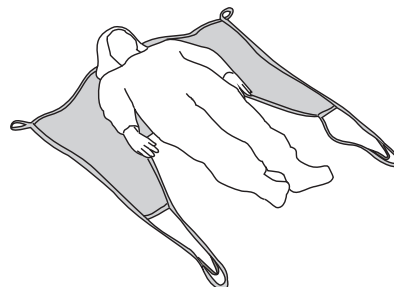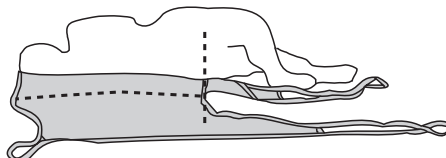


Opatrně otočte pacienta na bok a zasuňte okraj vaku pod pacienta tak, aby se dolní okraj **dostal na úroveň kostrče**. Vak složte tak, aby poté, co pacienta opatrně otočíte zpět, střední zádový popruh odpovídal páteři pacienta. Opatrně vytáhněte vak na druhé straně.

Zkontrolujte, zda patientský vak leží symetricky pod pacientem; podle potřeby jeho polohu upravte. Umístěte podpěry nohou pod nohy.

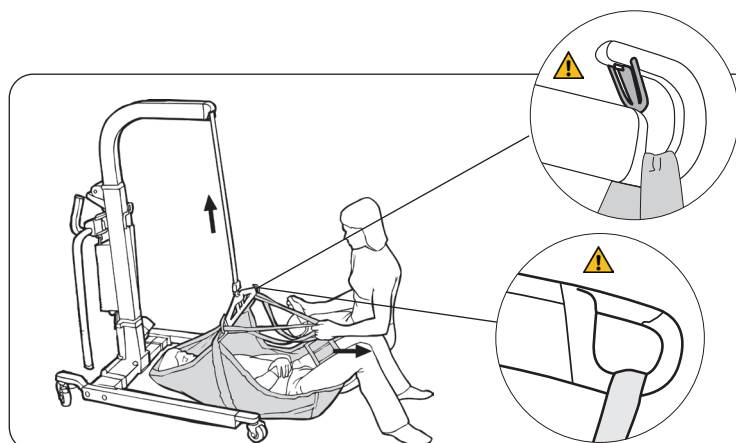


Uhladte podpěry nohou pod nohama pacienta. Podpěry nohou neumísťujte do třísel pacienta, abyste mu nepůsobili nepohodlí. Je to snadnější, když pacient ohne nohy. Pokyny pro upevnění smyček patientského vaku k odlišným závěsným hrazdám najdete na straně 6-7.

⚠ Mobilní zvedák by měl být zabrzděn, pokud při zvedání směřuje hlava pacienta ke zvedáku.

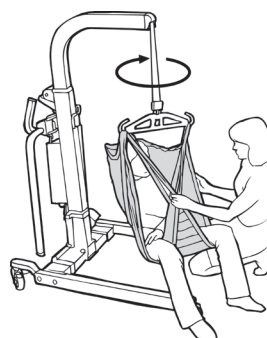

Zvedněte pacienta z podlahy. Pacienta lze mírně pootočit, aby se jeho hlava nedostala příliš blízko ke stojanu.


Spouštění na podlahu

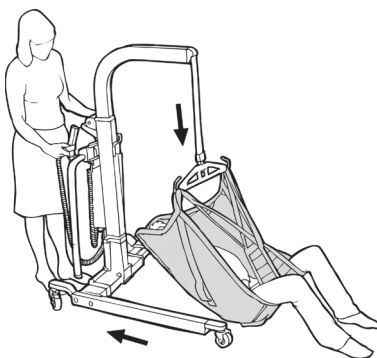

Při spouštění na podlahu by kolečka zvedáku neměla být uzamčená. Když se pacient dotkne podlahy, je nutné zvedák zatlačit dozadu, aby vznikl prostor pro hlavu. **Tip:** Pokud spouštíte na tenčí cvičnou matraci, můžete zvedák zatlačit pod tuto matraci tak, aby matrace tvořila měkkou ochranu mezi zvedákem a pacientem. Pokud potřebujete vak odstranit, viz „Odstranění vaku vleže na lůžku“ na straně 10.

Rady pro uchycení vaku

Různé polohy vsedě

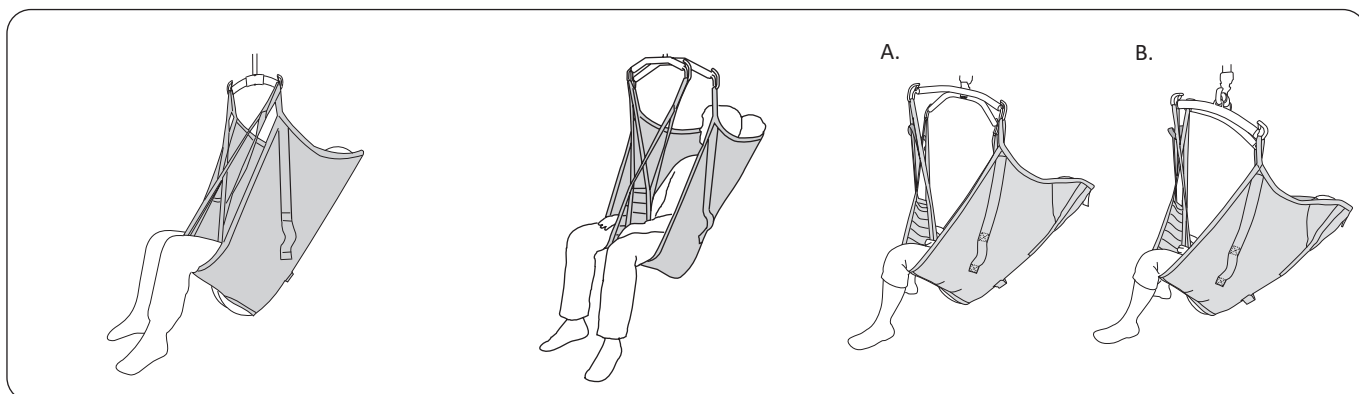

Pacientský vak Liko Original HighBack Sling zajišťuje pomocí **dvojbodového zavěšení** mírně zakloněnou sedící polohu a současně výbornou podporu hlavy a cca 90stupňový úhel v kyčelním kloubu.

Pacientský vak Liko Original HighBack Sling v kombinaci s **dvojitou hrazdou 670** zajišťuje větší šířku v ramenou než v místě podpěry nohou, což je pohodlné, pokud je pacient velký nebo citlivý na tlak na ramena.


A. V kombinaci s křížovou hrazdou Liko **Cross-bar** získáte o trochu více zakloněnou pozici a větší úhel. Doplňte malým polštářkem, který umístíte za hlavu.

B. V kombinaci s dvojitou rovnoběžnou závěsnou hrazdou **SideBars** je dosaženo trochu více zakloněné pozice a větší šířky v ramenou, než v oblasti podpěry nohou, což je pohodlné, je-li pacient citlivý na tlak na ramena.

Různé způsoby připojení podpěry nohou

Předtím, než zvolíte alternativu připojení, je třeba provést individuální vyhodnocení situace a zvážit možná rizika.

V následujícím textu jsou uvedeny všeobecné rady, protože pro několik modelů závěsu platí stejné principy.

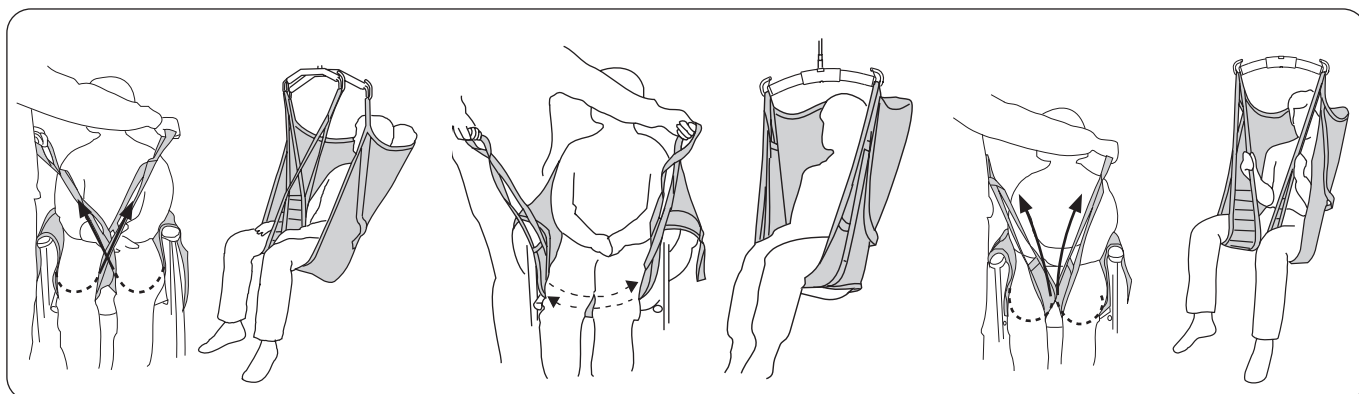

Zkřížené podpěry nohou.

Nejpoužívanější způsob aplikace patientského vaku: před připojením smyček k závěsné hrazdě se jedna smyčka podpěry nohou protáhne skrz druhou.

Překrytí pod oběma stehny.

Tato varianta může být vhodná například při zvedání pacienta po amputaci nohou.
Tip: Aby se sedící pacient příliš nenakláněl, lze k podpěrám nohou připevnit prodlužovací smyčky.

Každá podpěra nohy se k závěsné hrazdě připevňuje zvlášť.

Tato varianta může být vhodná při zvedání pacienta se zvláště citlivou oblastí genitálií.


⚠ Zvýšené riziko vyklouznutí.

Proč pacient v závěsu nesedí správně?


V následujícím textu jsou uvedeny všeobecné rady, protože pro několik modelů závěsu platí stejné principy.

ŠPATNĚ!


A.

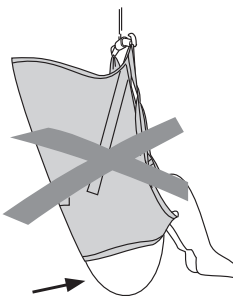

B.

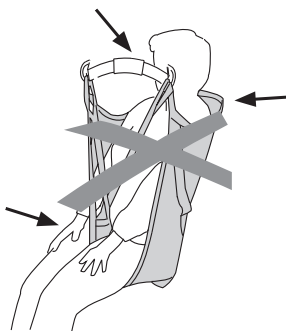

SPRÁVNĚ!

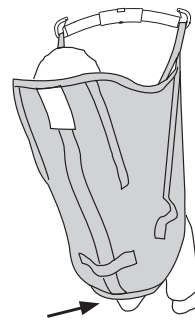


A. Riziko vyklouznutí. Hýždě visí dolů. Pacientský vak je pravděpodobně příliš velký. Může se také jednat o následek toho, že vak nebyl dostatečně natažen dolů pod záda pacienta.

Před zvednutím pacienta zkontrolujte, zda je dolní okraj napnutý a zda tkanina správným způsobem obepíná celé stehno.


B. Vak, který je příliš malý, může způsobit, že se podpěry nohou zařezávají do třísel a způsobují nepohodlí a dále, že závěsná hrazda je příliš blízko k obličeji a/nebo zádům a neposkytuje dostatečnou podporu.

Dolní okraj vaku je na stejné úrovni jako kostrč. Podpěry nohou jsou správně umístěny pod stehny.

Poloha pro zkrácení

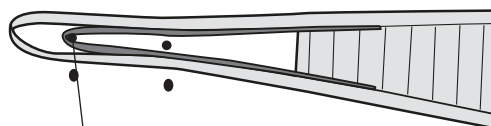

Poloha pro zkrácení

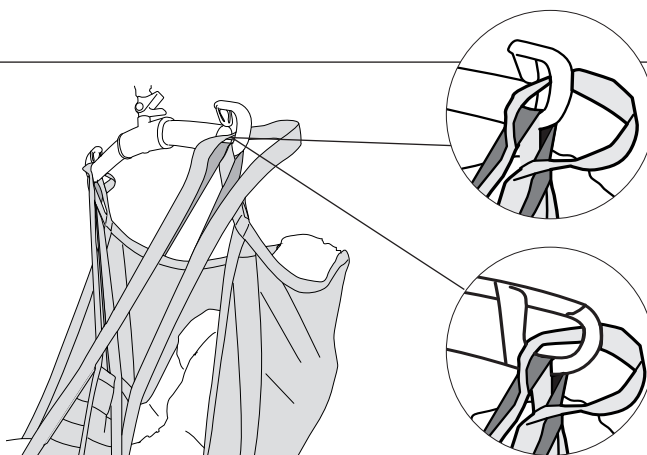

Naše modely patientských závěsných vaků jsou pečlivě navrženy tak, aby tlak sedícího pacienta byl vždy rovnoměrně rozložený mezi nohy a záda tak, aby byl pacient během přenášení dobře podepřený. V některých případech však může být vhodnější použít vnitřní usazení, tzn. „polohu pro zkrácení“, na smyčce podpěry nohou, aby se změnila pozice sedu pacienta.


Poznámka: Toto **neplatí**, pokud máte starší model vaku Original HighBack, model 20/21, se starší konstrukcí polohy pro zkrácení. Pro popis postupu zkrácení pro model 20/21 se prosím obraťte na společnost Hill-Rom a vyžádejte si návod pro daný model.

Když se používá poloha pro zkrácení, doporučujeme, abyste (kvůli lepší zrakové kontrole smyček) k háku závěsné hrazdy připevnili i vnější smyčku podpěry nohou.

Příslušenství

Prodlužovací pásek, zelený, 12 cm
Prodlužovací pásek, zelený 22 cm
Prodlužovací pásek, šedý, 12 cm
Prodlužovací pásek, šedý, 22 cm

Č. výr. 3691102
Č. výr. 3691103
Č. výr. 3691302
Č. výr. 3691303

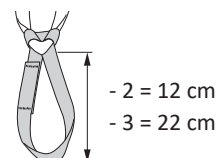


Přehled výrobků Liko™ Original HighBack Sling, Mod 200, 210

Výrobek	Č. výrobku	Velikost	Hmotnost pacienta ¹	Max. zatížení ²	
Original HighBack Sling	3520 - - 3	XS	Extra malá	15 – 20 kg	200 kg
Original HighBack Sling	3520 - - 4	S	Malá (dítě)	20 – 30 kg	200 kg
Original HighBack Sling	3521 - - 5	MS	Malá střední (drobný dospělý)	30 – 50kg	200 kg
Original HighBack Sling	3520 - - 5	M	Střední	40 – 80 kg	200 kg
Original HighBack Sling	3520 - - 6	L	Velká	70 – 120 kg	200 kg
Original HighBack Sling	3520 - - 7	XL	Extra velká	110 – 250 kg	500 kg
Original HighBack Sling	3520 - - 8	XXL	Extra extra velká	200 – kg	500 kg

¹ Uvedená hmotnost pacienta je pouze informativní – mohou existovat odchylky.

² Aby platilo toto maximální zatížení, musí mít zvedák i příslušenství stejné nebo vyšší povolené zatížení.

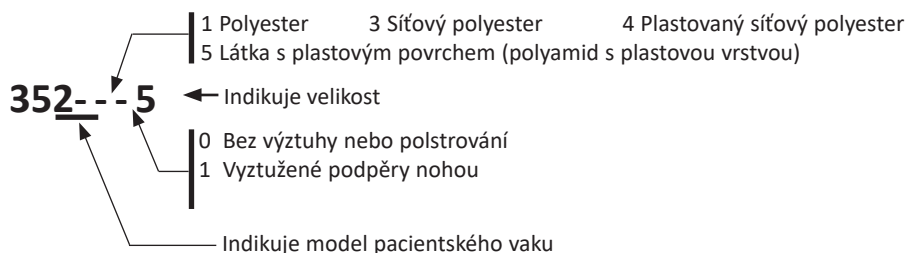

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace vaků Original HighBack Sling použitých se zkříženými podpěrami nohou a závěsnými hrazdami Liko:

	Mini 220	Závěsná hrazda 350 ⁴	Standardní 450	Závěsná hrazda 450 ²	Závěsná hrazda 600 ⁵	Dvojitá hrazda 670 ³	Křížová závěsná hrazda 450	Křížová závěsná hrazda 670	Univ. závěsné hrazdy + univerzální 350	Závěsné hrazdy + standardní 450	Univ. závěsné hrazdy + univerzální 450
Original Highback Sling, XS	2	1	1	1	4	3	1	3	1	2	1
Original Highback Sling, S	2	1	1	1	3 ¹	3	1	3	1	2	1
Original Highback Sling, MS	3	2	1	1	3 ¹	2	1	1	1	2	1
Original Highback Sling, M	3	2	1	1	3 ¹	1	1	1	1	1	1
Original Highback Sling, L	3	3	1	1	3 ¹	1	2	1	1	1	1
Original Highback Sling, XL	4	3	2	1	3 ¹	1	2	1	2	1	1
Original Highback Sling, XXL	4	4	4	3	3 ¹	2	4	1	4	2	2

¹ Může způsobit předčasné opotřebení závěsu.

² Závěsnou hrazdou 450 se rozumí Universal SlingBar 450 č. výrobku 3156075, 3156085 a 3156095 a také SlingGuard 450 č. výrobku 3308020 a 3308520.

³ Dvojitými hrazdami 670 se rozumí Universal TwinBar 670 č. výrobku 3156077 a 3156087 a také SlingGuard 670 Twin č. výrobku 3308040 a 3308540.

⁴ Jako závěsná hrazda 350 se označuje Universal SlingBar 350 č. výrobku 3156074, 3156084 a 3156094 a také SlingGuard 350 č. výrobku 3308010 a 3308510.

⁵ Jako závěsná hrazda 600 se označuje Universal SlingBar 600 č. výrobku 3156076 a, 3156086 a také SlingGuard 600 č. výrobku 3308030 a 3308530.

Vysvětlivky: 1 = Doporučeno, 2 = Může fungovat, 3 = Nedoporučeno, 4 = Nevhodné

Další kombinace

Kombinace příslušenství/výrobků jiných, než je zde doporučeno společností Liko s sebou může nést bezpečnostní riziko pro pacienta.



www.hillrom.com



Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

