

## Navodila za uporabo



## Opis izdelka

**Vreča Liko Original HighBack je osnovni model, ki je zasnovan tako, da se prilagodi bolniku brez posameznih nastavitev, in je ena izmed naših najbolj uporabljenih vreč.**

Predvidena je za rahlo nagnjen sedeč položaj in odlično oporo za celotno telo, kar je dobro za bolnike s slabšo stabilnostjo glave in trupa. Ustrezno nameščena in previdno uporabljena vreča zagotavlja bolniku izjemen občutek varnosti, kot tudi visoko stopnjo udobja.

Vreča Original HighBack je priporočljiva za dviganje na tla ali s tal, ker zagotavlja udobno oporo za glavo v sedečem in ležečem položaju.

### Velikosti

Vreča Original HighBack je na voljo v različnih velikostih. Pomembno je, da izberete pravo velikost za dosego najvišje stopnje udobja in varnosti. Prevelika vreča poveča nevarnost zdrsa bolnika iznje, premajhna pa se lahko zareže v dimlje in povzroči bolečine.

Pri večših velikostih može biti dobrou voljbo kombinácia s dvojramenom 670.

### Tkanina

Vreča Original HighBack je na voljo iz različnih tkanin. Ker vreča Original HighBack običajno po premiku ne ostane pod bolnikom, priporočamo takšno iz poliestra. Ta tkanina je trpežna in ima nizko trenje, zaradi česar je vrečo preprosto namestiti in odstraniti.

*V tem dokumentu je oseba, ki se jo dviga, imenovana bolnik, oseba, ki ji pomaga, pa negovalec.*

### POMEMBNO!

Dviganje in premik pacienta vedno pomeni določeno stopnjo tveganja. Pred uporabo preberite navodila za uporabo dvigala za paciente in opreme za dviganje. Pomembno je, da v celoti razumete vsebino navodil za uporabo. Opremo lahko uporablja le usposobljeno osebje. Poskrbite, da je oprema za dviganje primerna za dvigalo, ki ga uporabljate. Med uporabo bodite skrbni in previdni. Kot negovalec ste vedno odgovorni za pacientovo varnost. Vedeti morate, v kolikšni meri je pacient zmožen sodelovati pri dviganju. V primeru nejasnosti se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja.

Vreča Original HighBack je na voljo tudi iz mrežastega poliestra. Ta tkanina je priporočena v primerih, ko po premiku vreča ostane na mestu ali ko je zaželeno zračnejša različica.

Za kopanje in tuširanje je na voljo plastificirana mrežna zasnova, ki je prepustna za vodo in jo je preprosto obrisati. Ta material se hitro posuši in bolnika ne hladi na način, kot bi ga vlažna, vpojna tkanina.

Če bi raje vrečo iz trdnega pralnega materiala, je na voljo tudi zasnova iz plastificirane tkanine.

Dvižni jermeni vreče so vedno izdelani iz trpežnega poliestra.

### Podpori za noge

Vreča Original HighBack je na voljo s podporama za noge v različnih zasnovah. Najbolj običajne so ojačene podpore za noge. Ojačitev zagotavlja izjemen udobje, porazdeli pritisk in preprečuje, da bi se vreča zmečkala pod stegni.





















Ena zasnova ima preprosto tkanino brez ojačitve v podpori za noge, zaradi česar je vreča bolj pripravna in njena nega preprostejša.

# Vsebina

Opis simbolov .....	3
Varnostna navodila .....	4
Nega in vzdrževanje.....	5
Definicije .....	5
Ako upevniť vak na rôznych ramenách pre vak .....	6
Ako upevniť vak Original HighBack Sling na ramene pre vak so 4 hákmi (dvojramenných a krížových ramenách) .....	7
Dviganje iz sedečega položaja .....	8
Dviganje v sedeč položaj.....	9
Odstranjevanje vreče s stola/vozička .....	9
Dviganje s postelje.....	10
Nameščanje vreče med ležanjem na postelji .....	10
Nameščanje vreče med sedenjem na postelji .....	10
Dviganje na posteljo .....	11
Odstranjevanje vreče, ko bolnik leži na postelji .....	11
Odstranjevanje vreče, ko bolnik sedi na postelji .....	11
Dviganje s tal .....	12
Dviganje na tla.....	12
Nasvet za namestitev.....	13
Različni položaji sedenja.....	13
Različni načini priključitve podpore za noge.....	13
Bolnik ne sedi dobro v vreči – Zakaj? .....	14
Položaj za skrajšanje .....	14
Dodatna oprema .....	14
Pregled vreče Liko Original HighBack, Mod. 200, 210 .....	15
Kombinacije .....	15

## Opis simbolov

Te simbole lahko najdete v tem dokumentu in/ali na izdelku.

Simbol	Opis
	Opozorilo. Uporablja se, kadar sta potrebni posebna skrb in previdnost.
	Pred uporabo preberite navodila za uporabo
	Oznaka CE
	Zakoniti proizvajalec
	Datum proizvodnje
	Referenčna številka
	Serijska številka
	Medicinski pripomoček
	Kemično čiščenje ni dovoljeno
	Likanje ni dovoljeno
	Sušenje v stroju
	Sušenje v stroju ni dovoljeno
	Pranje Simbol je vedno prikazan v kombinaciji s priporočeno temperaturo v °C in °F.
	Brez lateksa
	Redni pregledi
	Brez belila
	Sušenje v senci
	V smeri navzgor in simbol na zunanji strani opreme.
	Simbol na zunanji strani opreme.
 (01) 0100887761997127 (11) LLMMD (21) 012345678910	Črtna koda GS1 Data Matrix, ki lahko vsebuje naslednje informacije. (01) Globalna trgovinska identifikacijska številka (11) Datum proizvodnje (leto, mesec, dan) (21) Serijska številka

# Varnostna navodila

## **⚠ Pred dviganjem upoštevajte naslednje:**

- Odgovorna oseba v vaši organizaciji se mora na osnovi posameznega primera odločiti, ali je potreben en negovalec ali več.
- Prepričajte se, da izbrana vreča ustreza potrebam bolnika glede modela, velikosti, tkanine in zasnove.
- Zaradi varnostnih in higienskih razlogov uporabite posamezne vreče.
- Pred dviganjem načrtujte postopek dviganja, tako da ga boste izvedli čim bolj varno in preprosto.
- Pred dviganjem se prepričajte, da oprema za dviganje visi navpično in se lahko prosto premika.
- Čeprav so prečni nosilci znamke Liko opremljeni z varovali, bodite zelo previdni. Preden pacienta dvignete s podlage, vendar ko so pasovi povsem raztegnjeni, se prepričajte, da so pasovi ustrezno priključeni na kavljke prečnega nosilca.
- Pred premikom na drugo mesto se prepričajte, da bolnik varno sedi v vreči.
- Pacienta nikoli ne dvigajte višje, kot je potrebno za izvedbo postopka dviganja in premikanja.
- Pacienta med dviganjem nikoli ne pustite brez nadzora.
- Poskrbite, da bodo kolesa na invalidskem vozičku, postelji, nosilih z zložljivim podvozjem itd. med dviganjem/premikanjem zaklenjena.
- Vedno delajte ergonomično. Izkoristite pacientove zmožnosti aktivnega sodelovanja pri postopku.
- Ko vreče ne uporabljate, je ne odložite na neposredno sončno svetlobo.
- Priporočamo, da po premiku pacienta vrečo odmaknete. Če odklik vreče po premiku iz kakršnih koli razlogov ne bi bil izvedljiv, priporočamo uporabo vreče iz mrežastega poliestra.

**⚠ Zaradi nepravilne namestitve vreče na prečni nosilec se lahko pacient hudo poškoduje.**

**⚠ Zaradi ročnega premikanja pacienta na postelji se lahko poškoduje negovalec.**

**CE** Medicinski pripomoček razreda I

**PATENT [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Izdelek je lahko zaščiten z enim patentom ali več. Glejte zgoraj navedeni spletni naslov.**

Podjetja Hill-Rom so lastniki evropskih, ameriških in drugih patentov ter prijav patentov v teku.

## **Design and Quality by Liko in Sweden**

Izdelke Liko nenehno razvijamo, zato si pridržujemo pravico do sprememb izdelka brez predhodnega obvestila. Za nasvet in informacije o nadgradnjah izdelka se obrnite na zastopnika podjetja Hill-Rom.

## **Obvestilo za uporabnike in/ali paciente v EU**

O resnih incidentih, do katerih bi prišlo v zvezi z uporabo tega pripomočka, morate obvestiti proizvajalca in pristojen organ v državi članici bivanja uporabnika in/ali pacienta.

## Nega in vzdrževanje

Vrečo pred vsako uporabo pregledajte. Preverite, ali so naslednji deli obrabljeni ali poškodovani:

- Tkanina
- Jermeni
- Šivi
- Nosilne zanke

**⚠ Ne uporabljajte poškodovane opreme za dviganje.**

V primeru nejasnosti se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja.

**Kadar vrečo uporabljate za kopanje ali prhanje:** po uporabi v kadi in pod tušem morate vrečo namestiti tako, da se čim prej posuši.

**Navodila za pranje:** glejte navodila na etiketi izdelka in priloženi dodatek »Nega in vzdrževanje vreč Liko«.

### Redni pregledi

Izdelek je treba pregledati vsaj enkrat na 6 mesecev. Če se izdelek uporablja ali pere pogosteje kot običajno, bodo morda potrebni pogostejši pregledi. Glejte Likov protokol "Redni pregledi tekstilnih izdelkov Liko". Za dodatne informacije o protokolih se obrnite na zastopnika podjetja Hill-Rom.

### Pričakovana uporabna doba

Izdelek ima ob pravilni uporabi pričakovano uporabno dobo 1–5 let. Pričakovana uporabna doba je odvisna od tkanine, pogostosti uporabe, postopka pranja in obremenitve.

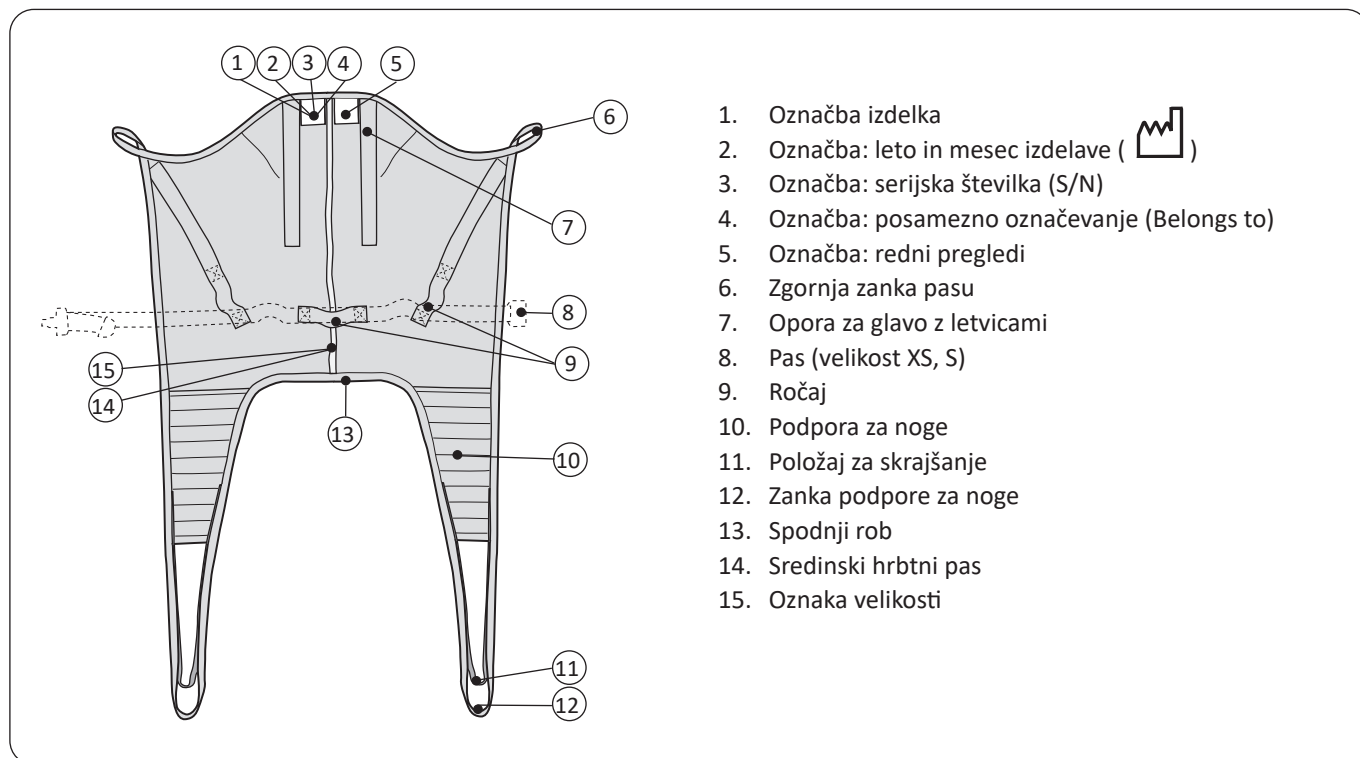
### Navodila za recikliranje

Celoten izdelek, vključno z opornicami, podložnim materialom itd., je treba odstraniti med vnetljive odpadke.

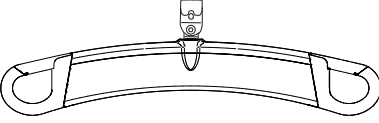
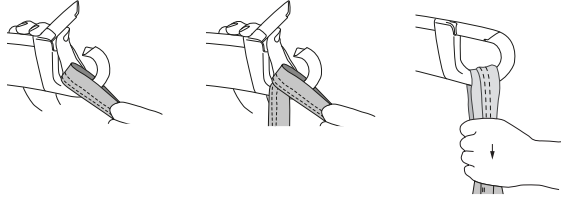
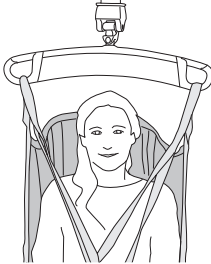
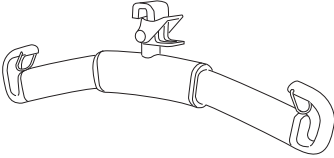
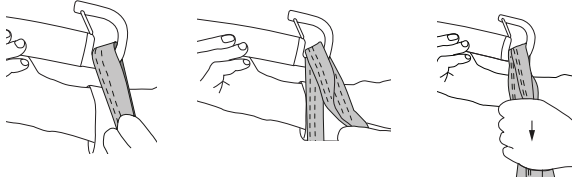

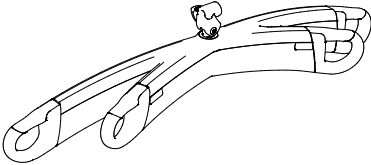
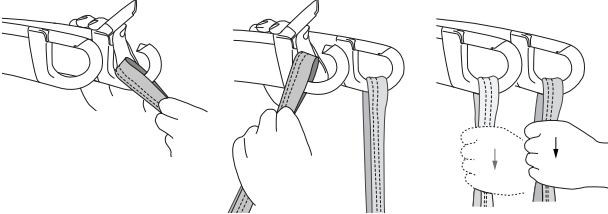
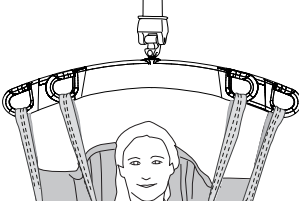
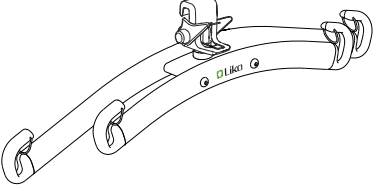
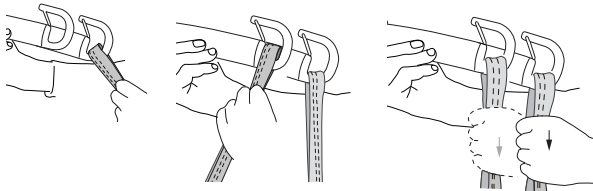
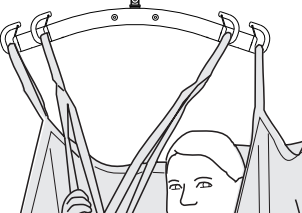
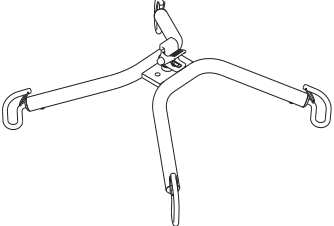
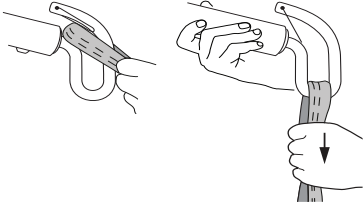
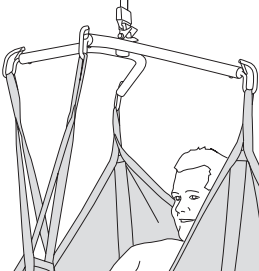
Podjetje Hill-Rom svojim uporabnikom zagotavlja oceno in navodila za varno ravnanje z njegovimi pripomočki in njihovim odlaganjem za preprečitev poškodb, kot so na primer ureznine, predrtje kože in odrgnine, zagotavlja pa tudi navodila o obveznem čiščenju in razkuževanju medicinskih pripomočkov po uporabi in pred odlaganjem. Kupci morajo upoštevati vse zvezne, državne, regionalne in/ali lokalne zakone oziroma predpise, ki urejajo varno odlaganje medicinskih pripomočkov in dodatne opreme.

Uporabnik pripomočka se lahko v dvomih najprej obrne na tehnično podporo Hill-Rom, kjer lahko dobi informacije o protokolih varnega odlaganja.


## Definicije






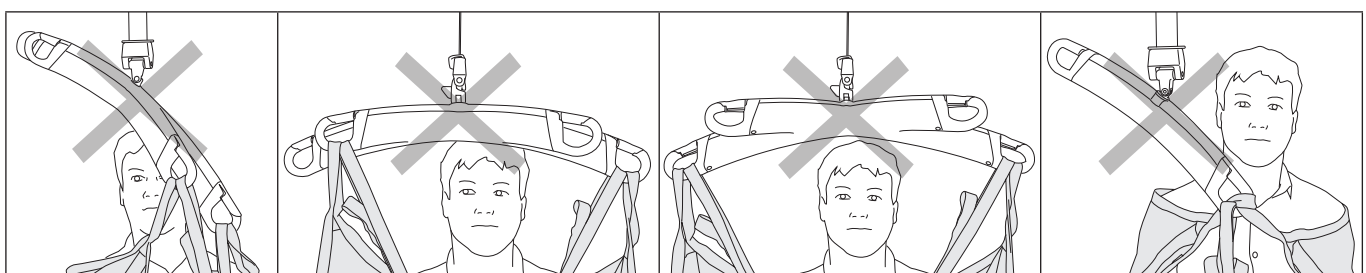
## Ako upevniť vak na rôznych ramenách pre vak

Rameno pre vak	Slučky (oká) vaku na hákoch ramena pre vak	Správne
 <p data-bbox="193 501 357 533">SlingGuard™</p>		
 <p data-bbox="213 792 336 824">Universal</p>		
 <p data-bbox="161 1077 392 1108">SlingGuard™ Twin</p>		
 <p data-bbox="177 1375 368 1406">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="213 1675 336 1706">Cross-bar</p>		

### Napačno!




## Ako upevniť vak Original HighBack Sling na ramene pre vak so 4 hákmi (dvojramenných a krížových ramenách)

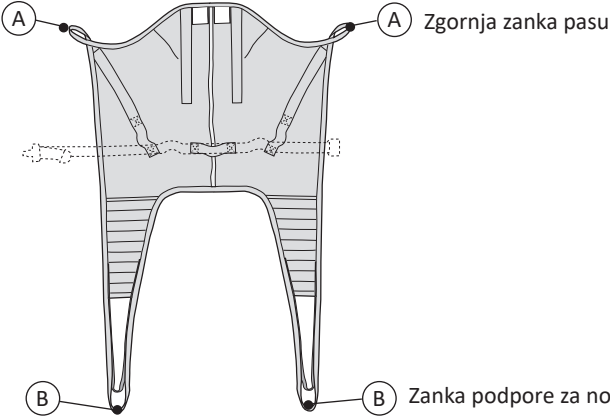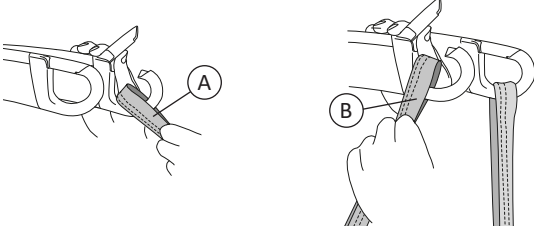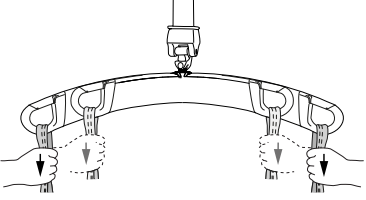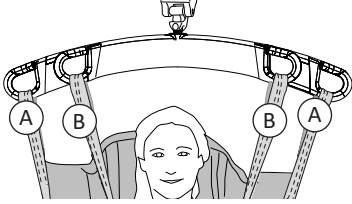 <p>A Zgornja zanka pasu</p> <p>B Zanka podpore za noge</p>	<p>1.</p> 
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>Na obrázkoch 1, 2 a 3 je znázornené dvojrameno, to isté platí však aj pre krížové rameno.</p>


## Dviganje iz sedečega položaja

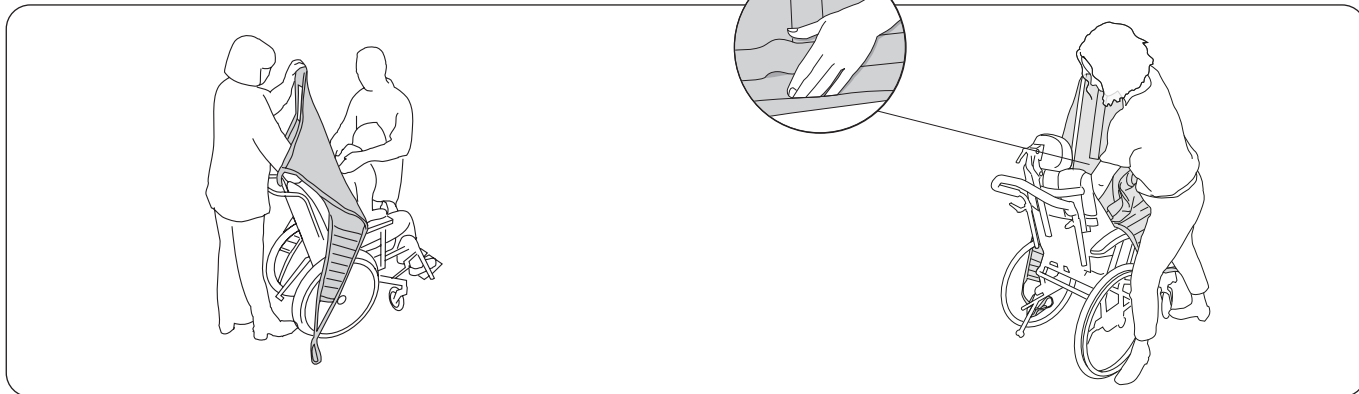Dva negovalca sta potrebna za namestitev vreče v skladu z ergonomskimi načeli. Bolnik je med uporabo običajno nagnjen naprej in negovalec mora stati pred njim, da prepreči, da bi ta padel naprej.




Vrečo namestite za bolnikov hrbet, tako da bo označba izdelka obrnjena navzven. Spodnji rob vreče zganite čez konice prstov, da jo lažje potisnete na mesto.

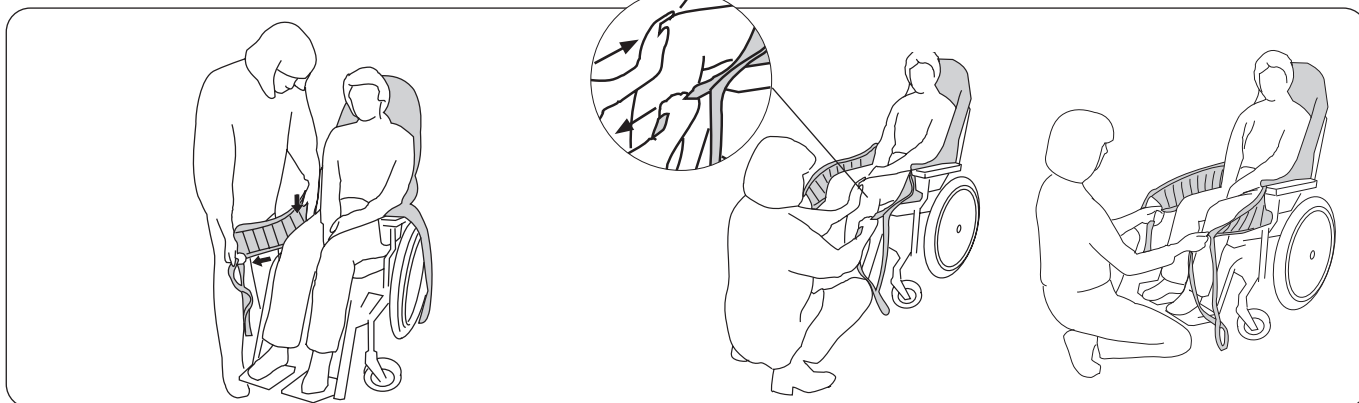Z dlanjo potisnite spodnji rob vreče navzdol do bolnikove trtice - **to je zelo pomembno**. **Nasvet:** prava namestitev je lažja, če se bolnik rahlo nagne naprej.



Povlecite podporo za noge naprej vzdolž zunanje dela bolnikovih stegen. Z dlanjo sezite med telo in vrečo ter potisnite spodnji rob podpore za noge navzdol proti sedežu. Sočasno z drugo roko povlecite podporo za noge naprej, da jo raztegnete.

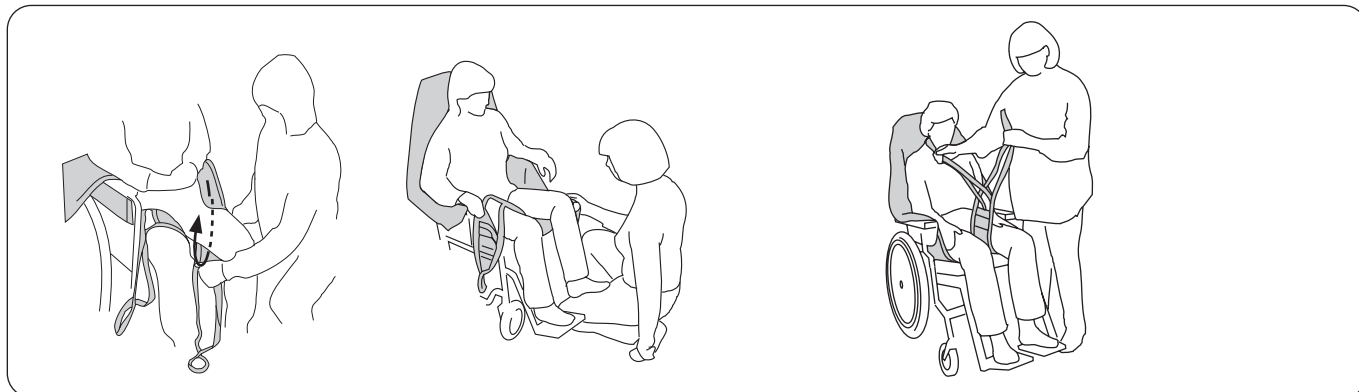Povlecite podporo za noge naprej, da zgladite morebitne gube na hrbtnem delu. Preverite, da obe podpori za noge segata do iste točke. **Nasvet:** podporo za noge lažje povlečete naprej, če nežno primete pod pogačico.




Pod vsako stegno namestite eno podporo za noge. Poskrbite, da bo blago ravno in bo segalo ustrezno okrog noge. **Nasvet:** podpori za noge lažje namestite, če bolnikove noge malce dvignete od sedišča. To lahko naredite tako, da položite bolnikova stopala na opori za stopala ali vaše noge, kot je prikazano na sliki.

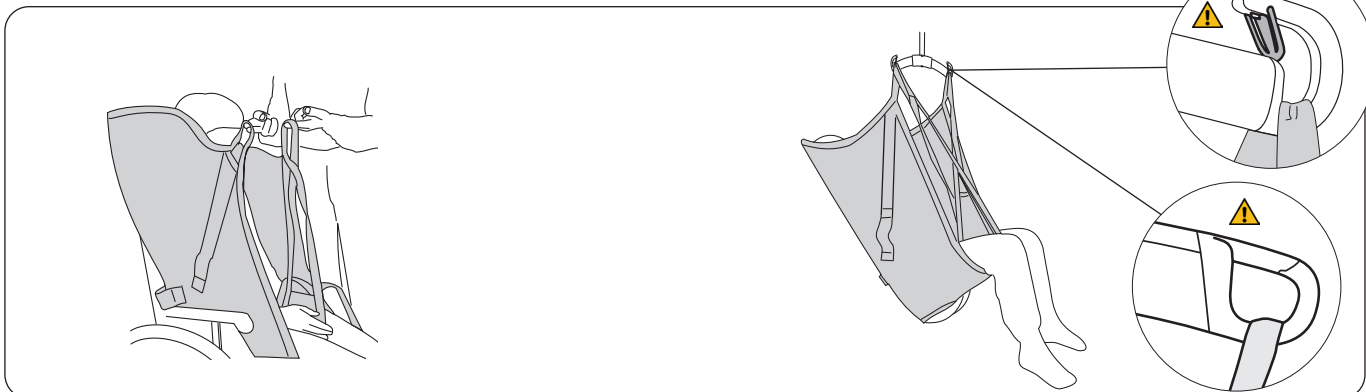Pripravite priključek podpor za noge. Najbolj običajen način nameščanja vreče je s prekrižanima podporama za noge. Za druge načine si oglejte stran 13.








**Nasvet:** preverite, ali so vse zanke obešanja enako dolge, t.j. da so pred dviganjem na isti višini, ko so napete. Nastavite položaj vreče, če niso na isti višini.

Na kavlja droga prečnega nosilca najprej priključite zgornji zanki pasu, nato zanki podpore za noge. Pozri stranu 6 – 7 s pokynmi k spôsobu pripevnenia ôk vaku k rôznym ramenám pre vak. Pacienta zdvihnite.

## Dviganje v sedeč položaj

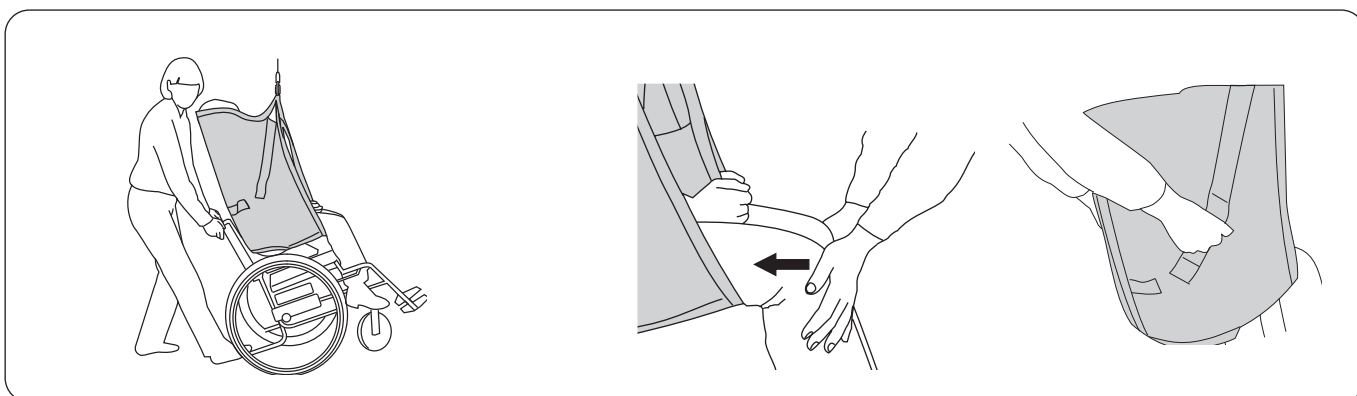Pri posedanju bolnika v invalidski voziček je pomembno, da se bolnik usede dovolj nazaj, da udobno sedi. To je mogoče doseči na več načinov.




*Pri posedanju bolnika v invalidski voziček:* voziček med spuščanjem bolnika nagnite nazaj. Zadnjica naj v zadnjem delu postopka zdrsne navzdol po naslonu. Z nogo na podpori za nagibanje nadzorujte kot invalidskega vozička.

*Druga možnost:* med spuščanjem rahlo pritisnite pod bolnikovimi kolena, da zadnjico potisnete proti naslonu stola. Če ima vreča ročaje, jih lahko uporabite za vodenje.

**⚠ Ročaje ne uporabljajte za dviganje! Zaradi prekomernega pritiskanja na ročaje se lahko vreča strga.**
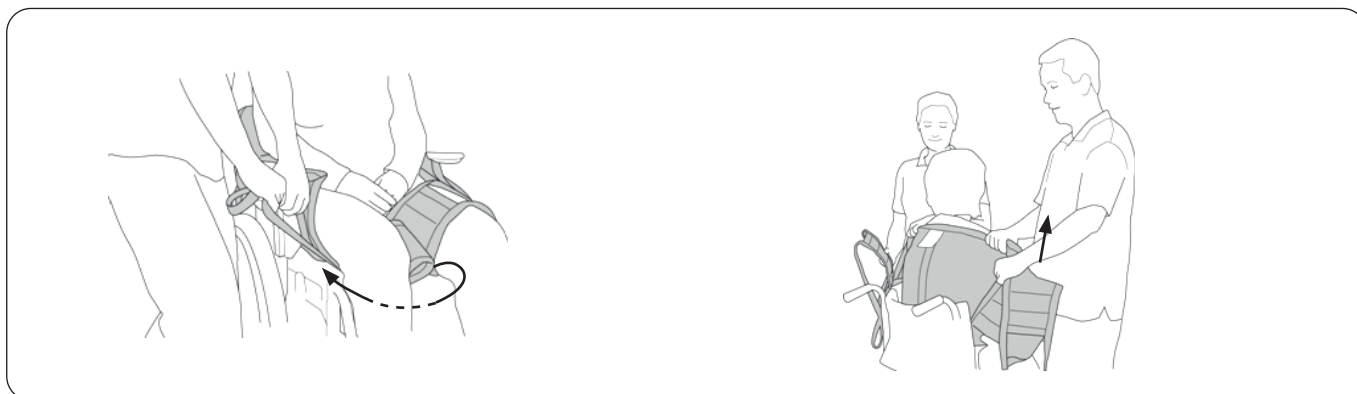
## Odstranjevanje vreče s stola/vozička

Po premiku priporočamo odstranitev vreče. Če je iz določenih razlogov vrečo zaželeno pustiti na postelji, priporočamo uporabo vreče iz mrežastega poliestra.




Previdno odstranite podporo za noge. Na najnežnejši način lahko to naredite tako, da izvlečete zanki podpore za noge pod delom iz blaga podpore za noge.

Vrečo odstranite tako, da podporo za noge previdno povlečete navzgor.

## Dviganje s postelje

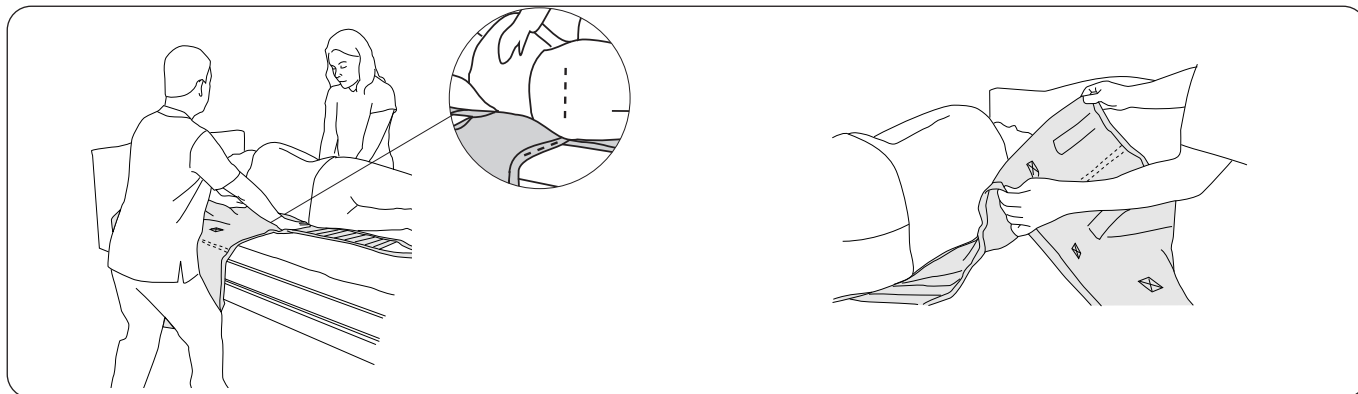
Vrečo lahko namestite na različne načine, odvisno od stanja bolnika. Lahko jo namestite tako, da bolnik leži ali sedi na postelji. Če uporabljate napredno vzmetnico za razbremenitev pritiska, jo lahko maksimalno napihnete, da olajšate namestitev vreče. Ne pozabite na svojo držo pri delu in udobje bolnika. Uporabite funkcije dvigavanja in spuščanja postelje. Ustrezna drža pri delu je dosežena, ko je vzmetnica poravnana s členki negovalca ob povsem spuščениh rokah. Odvisno od bremena za negovalca je treba na osnovi posameznega primera ovrednotiti, koliko negovalcev je potrebnih za opravilo.

### Nameščanje vreče med ležanjem na postelji



Bolnika obrnite na bok. To opravilo je lažje, če bolnik pomaga tako, da se prime za posteljno ograjo na strani, v katero ga je treba obrniti. Rob vreče položite ob bolnikov hrbet, tako da bo spodnji rob **poravnán s trtíco**.

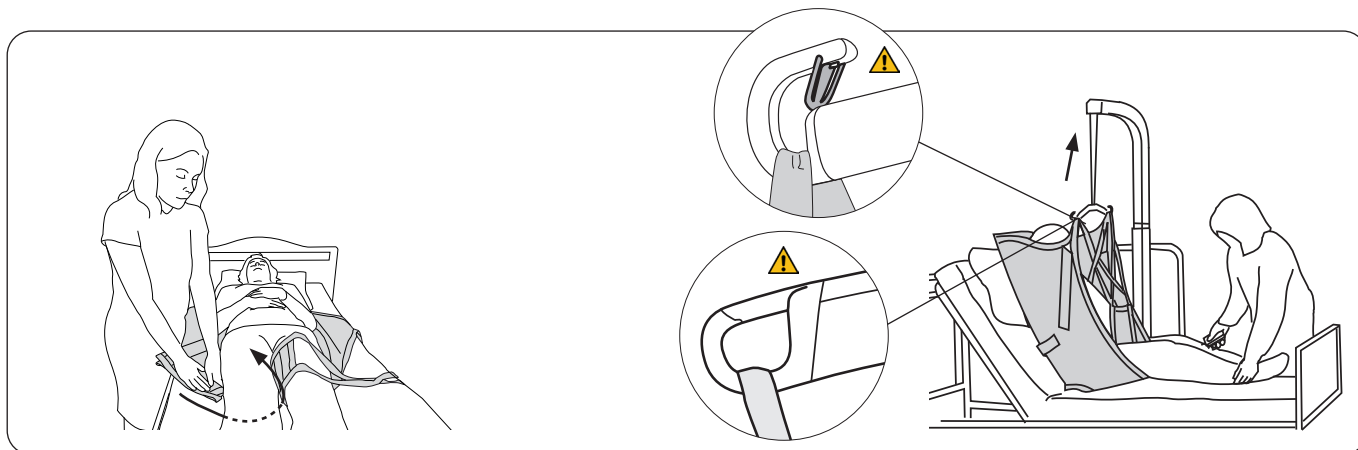Preganite vrečo, tako da se bo »sredinski hrbtíni pas« prilegal bolnikovi hrbtenici. Prepričajte se, da pregib pokriva rob vreče, ki je na hrbtnem delu bolnika, da zmanjšate trenje. Bolnika nežno obrnite nazaj in vrečo izvlecite na drugi strani. S to tehniko je treba bolnika obrniti samo enkrat.



Pod noge vstavite podporo za noge. To najbolje naredite tako, da podporo za noge pritisnete navzdol ob vzmetnico in jo ob tem potiskate pod koleno. Poskrbite, da bo blago ravno in bo segalo ustrezno okrog noge. Podporo za noge lahko namestite na različne načine, oglejte si stran 13.

Dvignite vzglavje postelje. Na kavlja droga prečnega nosilca najprej priključite zgornji zanki pasu, nato pa zanki podporo za noge. Pozri stranu 6 – 7 s pokynmi k spôsobu pripevnenia ôk vaku k rôznym ramenám pre vak. Pacienta zdvihnite.

### Nameščanje vreče med sedenjem na postelji

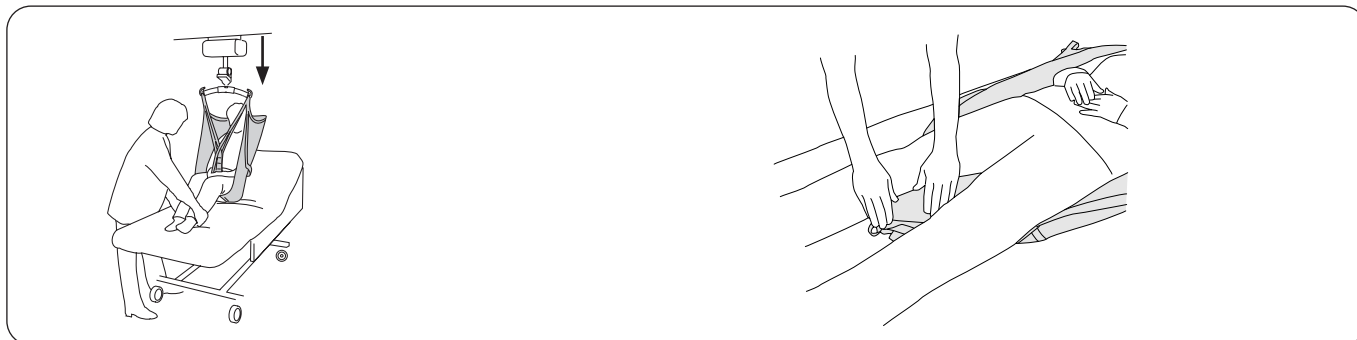
Dvignite vzglavje za bolnikom. Vrečo položite na posteljo, tako da bo označba izdelka obrnjena navzdol proti vzmetnici. Vrečo potisnite navzdol za bolnikov hrbet, tako da bo spodnji rob **poravnán s trtíco**. **Opomba!** Namestitev je lažja, če se bolnik nagne/je nagnjen naprej.

## Dviganje na posteljo

Po premiku priporočamo odstranitev nosilke. Če je iz določenih razlogov nosilko zaželeno pustiti na postelji, priporočamo uporabo vreče iz mrežastega poliestra.


Ne pozabite na svojo držo pri delu in udobje bolnika. Uporabite funkcije dviganja in spuščanja postelje. Ustrezna drža pri delu je dosežena, ko je vzmetnica poravnana s členki negovalca ob povsem spuščanih rokah. Odvisno od bremena za negovalca je treba na osnovi posameznega primera ovrednotiti, koliko negovalcev je potrebnih za opravilo.

### Odstranjevanje nosilke, ko bolnik leži na postelji



Bolnika pomaknite nad posteljo. Dvignite vzglavje za bolnikovo udobje. Bolnika spustite na posteljo. Spustite vzglavje.

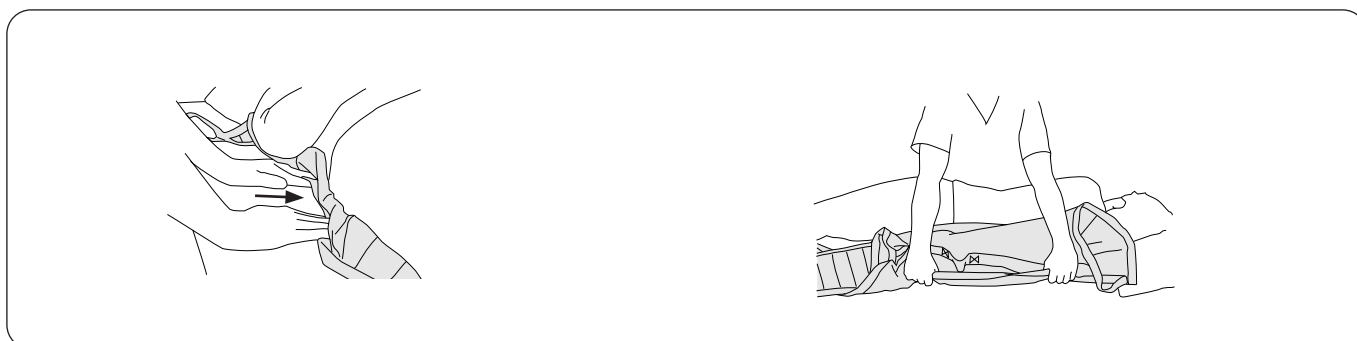
Zanki podpore za noge namestite pod podporo za noge med bolnikovimi nogami.



Primite rob vreče. Spodvijte vrečo. Vrečo pritisnite ob vzmetnico in pod bolnika.

Bolnika previdno obrnite na bok. Vrečo primite od spodaj in jo previdno odstranite.

### Odstranjevanje vreče, ko bolnik sedi na postelji

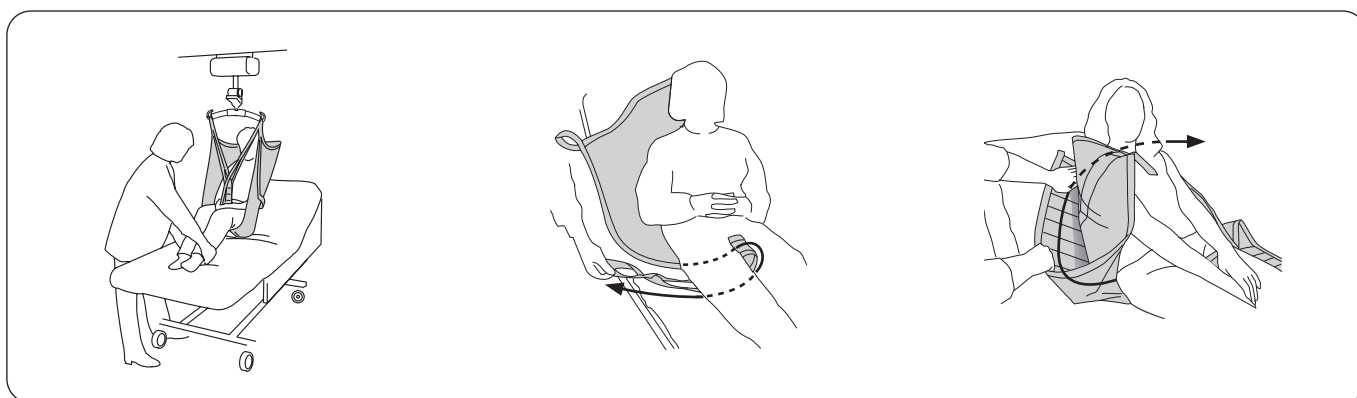

Bolnika pomaknite nad posteljo. Dvignite vzglavje za bolnikovo udobje. Bolnika spustite na posteljo.


Odstranite podpori za noge, tako da izvlečete zanki podpore za noge pod delom iz blaga podpore za noge. **Nasvet:** to dejanje je lažje, če ima bolnik noge skrčene.

Odstranite vrečo, tako da povlečete eno od podpor za noge za vrečo in preko na drugo stran.

## Dviganje s tal

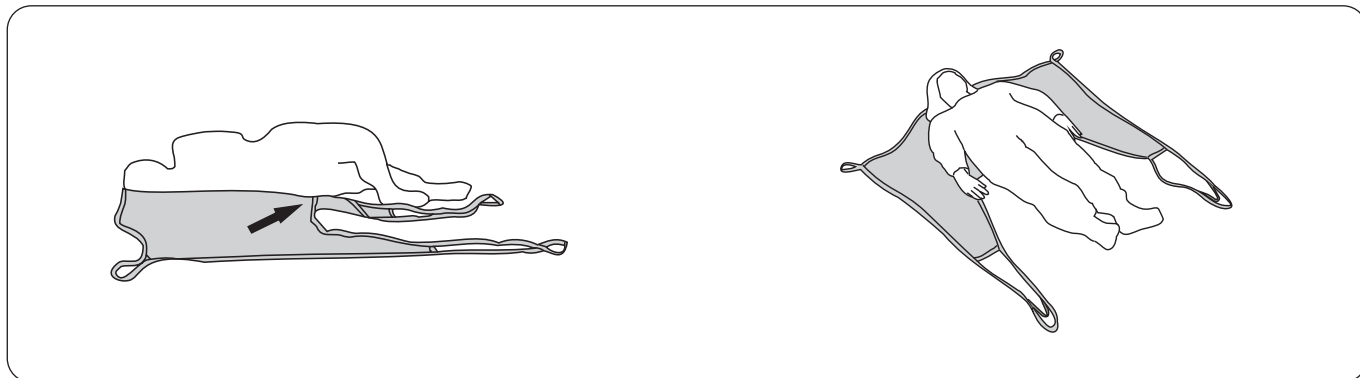Dviganje s tal z Likovim premičnim dvigalom Golvo je opisano spodaj. Ista tehnika je primerna tudi za dviganje z drugimi Likovimi premičnimi in nepremičnimi dvigali. Preberite navodila za uporabo uporabljenega dvigala.


**Nasvet:** blazina pod bolnikovo glavo bi bila udobna.



Bolnika previdno obrnite na bok in vstavite rob vreče pod bolnika, tako da bo spodnji rob **poravnan s trtico**. Vrečo prepognite, tako da se bo sredinski hrbtni pas prilegal bolnikovi hrbtenici, ko bolnika nežno obrnete nazaj. Previdno povlecite vrečo ven na drugi strani.

Preverite, ali vreča leži simetrično pod bolnikom; po potrebi nastavite položaj.

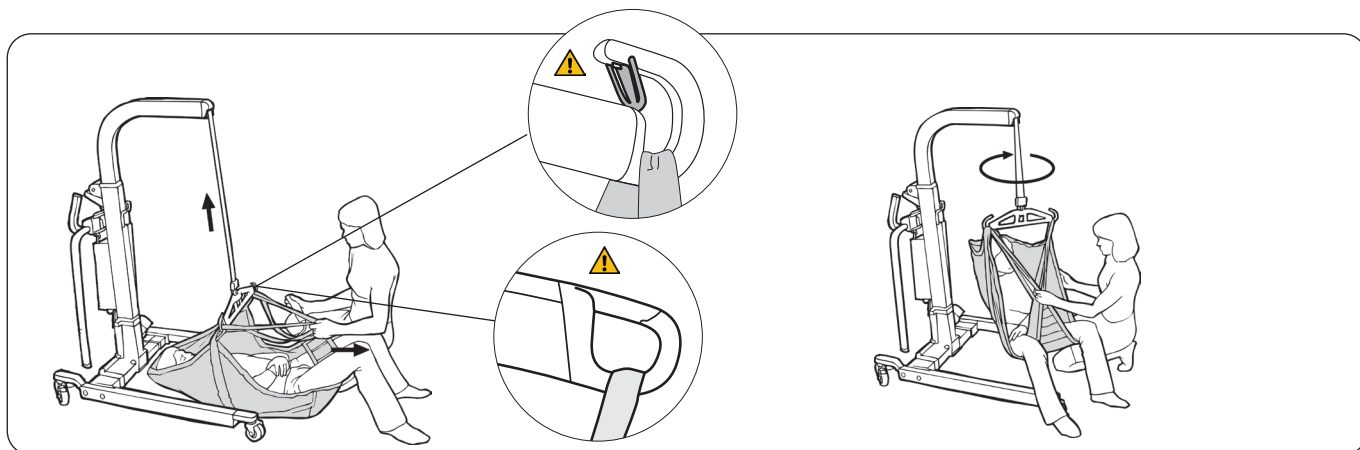Pod noge dajte podpori za noge.




Zgladite podpori za noge pod bolnikovimi nogami. Podpori za noge držite proč od dimelj, da bolniku ne bo neugodno. To dejanje je lažje, če ima bolnik noge skrčene. Pozri stranu 6–7 s pokynmi k spôsobu pripevnenia ôk vaku k rôznym ramenám pre vak.

Bolnika dvignite s tal. Bolnika lahko malce obrnete, da glava ne bi prišla preblizu drogu.

**⚠ Premično dvigalo mora biti zaklenjeno, ko dvigujete bolnika z glavo ob dvigalu.**

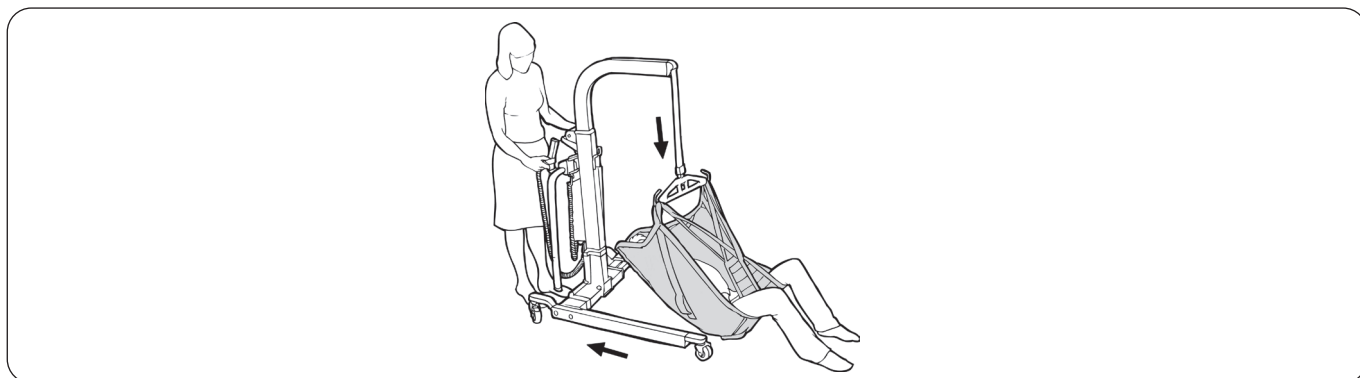
## Dviganje na tla



Pri dviganju na tla kolesa dvigala ne smejo biti zaklenjena. Ko se bolnik dotakne tal, je treba dvigalo povleči nazaj, da je zagotovljen prostor za glavo. **Nasvet:** če se dviganje izvaja na tanjšo podlago za vadbo, lahko dvigalo potisnete pod to podlago, tako da podlaga deluje kot mehka zaščita med dvigalom in bolnikom. Če je treba vrečo odstraniti, si oglejte »Odstranjevanje vreče, ko bolnik leži na postelji, stran 10.

## Nasvet za namestitev
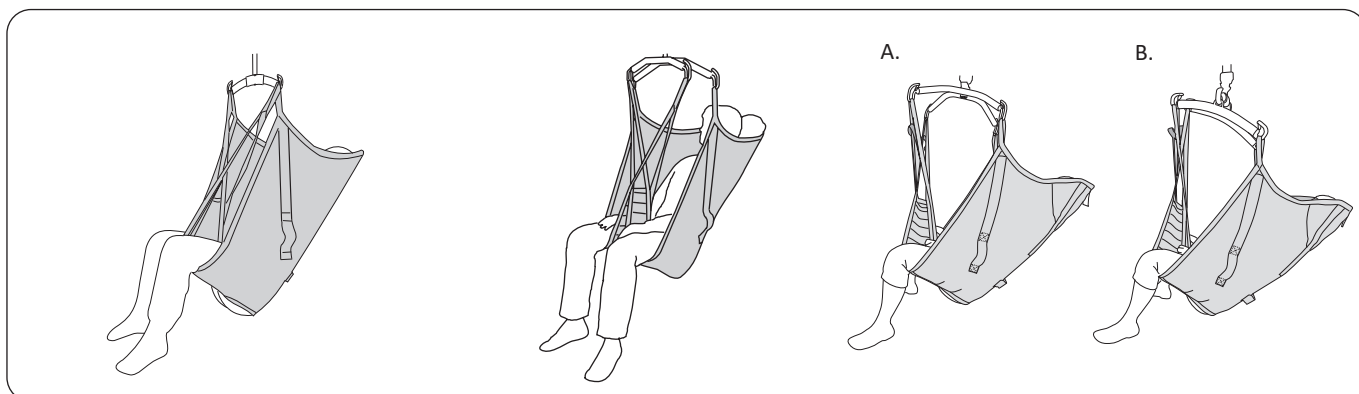
### Različni položaji sedenja



Vreča Liko Original HighBack na **dvotočkovnem obešanju** zagotavlja rahlo nagnjen sedeč položaj z odlično oporo za glavo in pribl. 90-stopinjski kot v kolčnem sklepu.

Pri väčších veľkostiach môže byť dobrou voľbou kombinácia s dvojramenom 670.


Vreča Liko Original HighBack v kombinaciji z **dvojramená 670** zagotavlja večjo širino v ramah kot podpori za noge, kar je primerno v primeru, če je bolnik velik ali občutljiv na pritisk na rame.

A. V kombinaciji z Liko **Cross-bar** sta dosežena malce bolj nagnjen položaj in večji kot. Skupaj z majhno blazino za glavo.

B. V kombinaciji s **SideBars** sta zagotovljena malce bolj nagnjen položaj in večja širina v ramah kot podpori za noge, kar je primerno v primeru, če je bolnik občutljiv na pritisk na rame.

### Različni načini priključitve podpore za noge

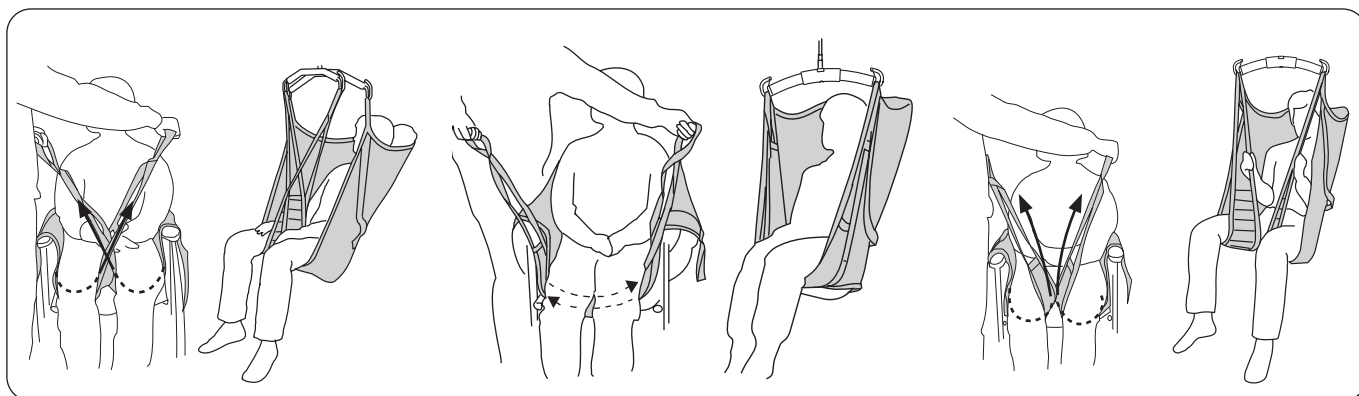Pred izbiro druge možnosti priključitve je treba opraviti posamezno ocenitev za predvidenje morebitnih tveganj. V nadaljevanju je splošni nasvet, ker veljajo za več modelov vreč ista načela.



#### Prekrižana podpora za noge.

Najpogostejši način nameščanja vreče. Pred priključitvijo zank na drog prečnega nosilca se eno zanko podpore za noge spelje skozi drugo.

#### Prekrivanje pod obema stegnoma.

To je lahko primerno npr. pri dviganju bolnika z amputiranimi nogami. **Nasvet:** da bi preprečili preveč nagnjen sedeč položaj bolnika, je mogoče na zanke podpore za noge priključiti zanke za podaljšanje.

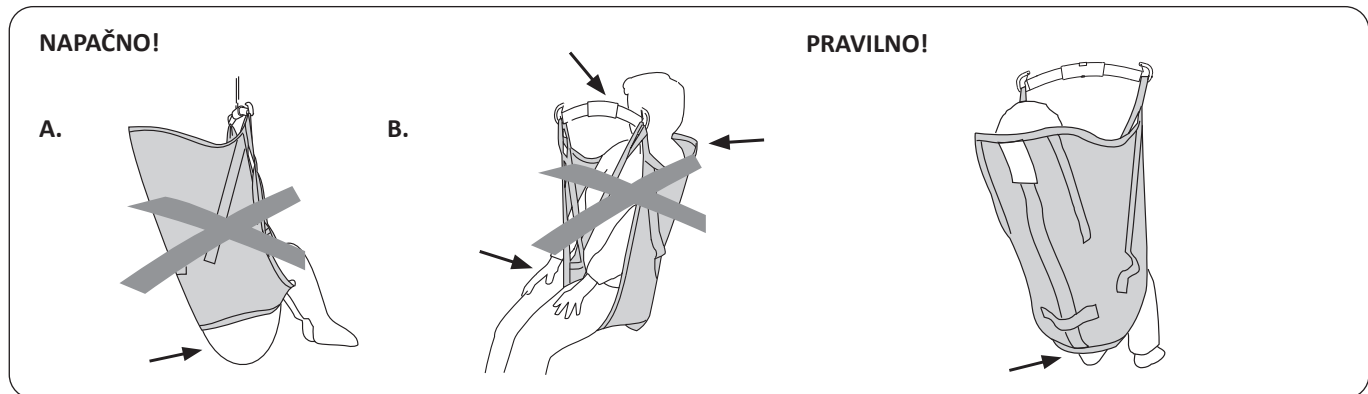
#### Vsaka podpora za noge je ločeno priključena na drog prečnega nosilca.

To je lahko primerno pri dviganju bolnikov s posebej občutljivimi spolovili.

**⚠ Povečana nevarnost zdrsa iz vreče.**

## Bolnik ne sedi dobro v vreči – Zakaj?

V nadaljevanju je splošni nasvet, ker veljajo za več modelov vreč ista načela.




**A. Nevarnost zdrsa iz vreče.** Zadnjica visi navzdol. Vreča je morda prevelika. Vzrok je lahko tudi dejstvo, da vreče niste povlekli dovolj navzdol po bolnikovem hrbtu.

Pred dviganjem preverite, ali je spodnji rob napet in se blago pravilno prilega okrog nog.

**B. Premajhna vreča** je lahko vzrok, da podpori za noge režeta v dimlje, zaradi česar je bolniku neugodno, drog prečnega nosilca pa je preblizu obrazu in/ali hrbtu, zato je podpora nezadostna.

Spodnji rob vreče je na isti višini kot trtica. Podpori za noge sta pravilno nameščeni pod nogami.

## Položaj za skrajšanje

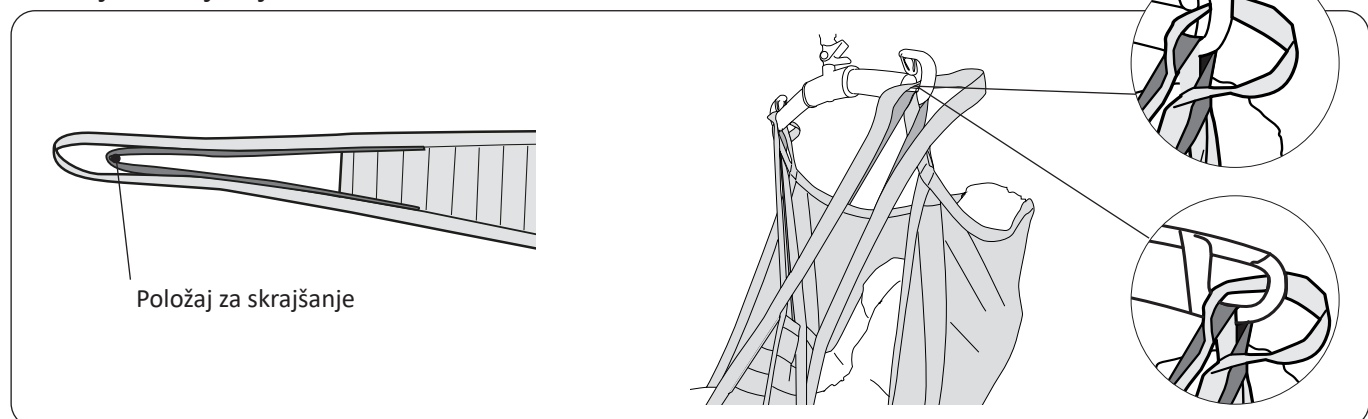

Naši modeli vreč so skrbno zasnovani tako, da je pri bolniku v sedečem položaju pritisk dobro porazdeljen med nogami in hrbtnim delom za dobro oporo med premiki. Vendar pa je v določenih primerih bolj zaželeno uporabiti notranjo nastavitev, »položaj za skrajšanje«, na zanki podpore za noge za spremembo bolnikovega sedečega položaja.


**Opomba:** to **ne** velja, če imate starejši model vreče Original HighBack, mod. 20/21, s predhodno zasnovano položaja za skrajšanje. Za opis postopka krajšanja za mod. 20/21 se obrnite na podjetje Hill-Rom, da si zagotovite navodila za uporabo tega modela.

V primerih, ko je uporabljen položaj za skrajšanje, priporočamo, da na kavelj droga prečnega nosilca priključite tudi zunanjo zanko podpore za noge, da imate boljši vidni nadzor nad zankama.

## Dodatna oprema

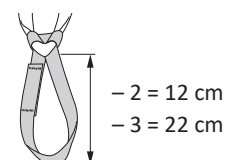Extension Loop, zelena, 12 cm  
Extension Loop, zelena 22 cm  
Extension Loop, siva, 12 cm  
Extension Loop, siva, 22 cm

Št. izd. 3691102  
Št. izd. 3691103  
Št. izd. 3691302  
Št. izd. 3691303




## Pregled vreče Liko™ Original HighBack, Mod. 200, 210

Izdelek	Št. izdelka	Velikost		Teža bolnika <sup>1</sup>	Največja obremenitev <sup>2</sup>
Vreča Original HighBack	35200 - - 3	XS	Izjemno majhna	15-20 kg	200 kg
Vreča Original HighBack	35200 - - 4	S	Majhna (otroci)	20-30 kg	200 kg
Vreča Original HighBack	35210 - - 5	MS	Srednje ozka (vitki odrasli)	30-50 kg	200 kg
Vreča Original HighBack	35200 - - 5	M	Srednja	40-80 kg	200 kg
Vreča Original HighBack	35200 - - 6	L	Velika	70-120 kg	200 kg
Vreča Original HighBack	35200 - - 7	XL	Izredno velika	110-250 kg	500 kg
Vreča Original HighBack	35200 - - 8	XXL	Izredno izredno velika	200- kg	500 kg

<sup>1</sup> Navedena teža bolnika je samo smernica – lahko pride do odstopanj.
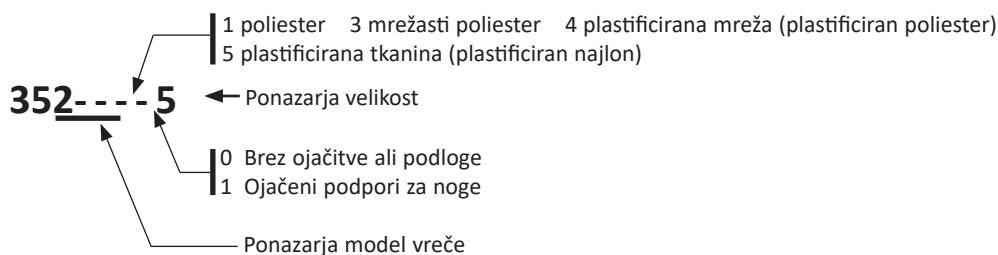
<sup>2</sup> Za ohranitev največje obremenitve morate uporabiti dvigalo/opremo, namenjeno za enako obremenitev ali večjo.



### Odporučane kombinacije

Priporočene kombinacije vreče Liko Original HighBack, uporabljene s prekrizanimi podporama za noge in drogovi prečnih nosilcev Liko:

	Mini 220	Napenjalo 350 <sup>4</sup>	Standard 450	Napenjalo 450 <sup>2</sup>	Napenjalo 600 <sup>5</sup>	Dvojrarnena 670 <sup>3</sup>	Nosilec Sling Cross-bar 450	Nosilec Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	SideBars + Standard 450	Univ. SideBars + Universal 450
Vreča Original HighBack, XS	2	1	1	1	4	3	1	3	1	2	1
Vreča Original HighBack, S	2	1	1	1	3 <sup>1</sup>	3	1	3	1	2	1
Vreča Original HighBack, MS	3	2	1	1	3 <sup>1</sup>	2	1	1	1	2	1
Vreča Original HighBack, M	3	2	1	1	3 <sup>1</sup>	1	1	1	1	1	1
Vreča Original HighBack, L	3	3	1	1	3 <sup>1</sup>	1	2	1	1	1	1
Vreča Original HighBack, XL	4	3	2	1	3 <sup>1</sup>	1	2	1	2	1	1
Vreča Original HighBack, XXL	4	4	4	3	3 <sup>1</sup>	2	4	1	4	2	2

<sup>1</sup> Lahko povzroči prezgodnjo obrabo vreče.

<sup>2</sup> Napenjalo 450 ustreza enoti Universal SlingBar 450, št. izdelka 3156075, 3156085 in 3156095, in tudi enoti SlingGuard 450, št. izdelka 3308020 in 3308520.

<sup>3</sup> Dvojrarnena 670 sa vzťahujú na Universal TwinBar 670 obj. č. 3156077 a 3156087 a tiež SlingGuard 670 Twin obj. č. 3308040 a 3308540.

<sup>4</sup> Napenjalo 350 se nanaša na Universal SlingBar 350 št. izd. 3156074, 3156084 in 3156094 ter tudi na SlingGuard 350 št. izd. 3308010 in 3308510.

<sup>5</sup> Napenjalo 600 ustreza enoti Universal SlingBar 600, št. izdelka 3156076, 3156086 in tudi enoti SlingGuard 600, št. izdelka 3308030 in 3308530.


**Razlaga:** 1 = priporočeno, 2 = lahko deluje, 3 = ni priporočeno, 4 = neprimerno

### Druge kombinacije

Kombinacije druge opreme/izdelkov od tistih, ki jih priporoča podjetje Liko, lahko predstavljajo tveganje za varnost bolnika.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

 Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sweden  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

