

Popis výrobku

Sedací pás SeatStrap je příslušenství, které se umísťuje pod hýždě pacienta, jehož úlohou je pacientovi pomoci při první fázi zvedání se. Je vhodný pro pacienty, kteří potřebují pomoc se zvedáním jejich hýždí při zvedání se. Zabraňuje to sklouznutí nosné vesty nahoru, což by mohlo vyvolat nežádoucí tlak pod pažemi.

Sedací pás Sabina SeatStrap je určen pouze k použití se zvedákem ze sedu do stoje Liko Sabina™. Sedací pás SeatStrap lze používat pouze spolu s jednou z vest značky Liko. Kromě toho musí být zvedací zařízení doplněno o hrazdu Sabina SeatStrap SlingBar.

Doprovodná plastová výztuha usnadňuje umístění sedacího pásu SeatStrap. Plastová výztuha je vložena do látkové kapsy na spodní straně pásu SeatStrap, její rolí je usnadnit umístění pásu SeatStrap pod pacientovy hýždě.





















V tomto dokumentu je zvedaná osoba označena jako „pacient“ a osoba, která při zvedání pomáhá, je označena jako „ošetřovatel“.

UPOZORNĚNÍ!

Zvedání a přenášení pacientů vždy znamená určitou míru rizika. Před použitím si přečtěte návod k použití zvedáku i zvedacího příslušenství. Je důležité úplně porozumět obsahu návodu k použití. Toto zařízení smí obsluhovat pouze vyškolený personál. Ověřte si, že zvedací příslušenství je vhodné pro použitý zvedák. Při používání dbejte opatrnosti. Jako ošetřující personál vždy zodpovídáte za bezpečnost pacienta. Musíte být vždy dobře informováni o stavu pacienta a jeho schopnosti zvládnout situace zahrnující zvedání. Pokud je vám něco nejasné, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Popis symbolů

V tomto dokumentu nebo na výrobku se můžete setkat s těmito symboly.

Symbol	Popis
	Výstraha: Tato situace vyžaduje zvláštní péči a pozornost.
	Před použitím si prostudujte návod k použití.
	Značka CE
	Zákonný výrobce
	Datum výroby
	Identifikátor produktu
	Sériové číslo
	Zdravotnický prostředek
	Nepoužívat suché čištění
	Nežehlit
	Sušení v sušičce
	Zákaz sušení v bubnové sušičce
	Praní Symbol je vždy v kombinaci s doporučenou teplotou ve °C a °F.
	Neobsahuje latex
	Pravidelné prohlídky
	Nebělte
	Sušte na šňůře ve stínu
	Směr vzhůru a symbol na vnější části produktu.
	Symbol na vnější části produktu.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) RR0MDD (21) 012345678910</small>	Čárový kód datové matice GS1, který může obsahovat následující informace. (01) Číslo globální obchodní položky (11) Datum výroby (21) Sériové číslo

Bezpečnostní pokyny

Před zvedáním mějte na paměti následující body:

- Zodpovědná osoba na vašem pracovišti musí individuálně rozhodnout, zda je k určitému zvedání/přesunu potřeba jeden nebo více ošetřovatelů.
- Naplánujte si postup zvedání tak, aby proběhlo co nejbezpečněji a nejpohodlněji.
- Přestože jsou závěsné hrazdy Liko vybaveny západkami, je třeba dbát zvláštní opatrnosti. Předtím než pacienta zvednete z podkladové plochy (jakmile jsou plně napnuty popruhy vesty), zkontrolujte, zda jsou popruhy správně připevněny k hákům závěsné hrazdy.
- Během zvedání nikdy nenechávejte pacienta bez dozoru.
- Zkontrolujte, zda jsou během zvedání či přemísťování zabrzděna všechna kolečka invalidního vozíku, lůžka nebo lehátka.
- Pracujte vždy ergonomicky. Využívejte pacientovy schopnosti aktivně se účastnit na jednotlivých činnostech.

 Zdravotnický prostředek třídy I

Změny výrobků

Výrobky Liko prochází neustálým vývojem, a proto si vyhrazujeme právo na změnu výrobku bez předchozího upozornění. Informace o aktualizaci produktů Liko™ poskytne autorizovaný zástupce společnosti Hill-Rom.

Design and Quality by Liko in Sweden

Společnost Liko je certifikovaná podle normy řízení kvality ISO 9001 a jejího ekvivalentu v oboru zdravotnických prostředků, ISO 13485. Společnost Liko je také certifikovaná podle normy pro ochranu životního prostředí ISO 14001.

Upozornění pro uživatele a/nebo pacienty v EU

Všechny závažné příhody, ke kterým dojde v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, musí být hlášeny výrobcí a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.

Péče a údržba

Před každým použitím zkontrolujte závěs. Zkontrolujte následující prvky, zda nejsou opotřebené a poškozené:

- Tkanina
- Popruhy
- Švy
- Smyčky

Nepoužívejte poškozené zvedací příslušenství.

Pokud něčemu nerozumíte, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Pokyny k praní: Viz štítek výrobku pásu SeatStrap a přiložený dodatek „Pacientské vaky Liko – péče a údržba“.

Před čištěním vyjměte plastovou výztuhu (viz. str. 4). Plastovou výztuhu je nutné čistit dezinfekcí.

Pravidelné prohlídky

Výrobek musí být prohlížen minimálně každých 6 měsíců. Častější prohlídky mohou být vyžadovány, pokud jsou výrobky používány nebo čištěny častěji, než je obvyklé. O tyto protokoly požádejte svého zástupce společnosti Hill-Rom.

Předpokládaná životnost

Výrobek má předpokládanou životnost 1-5 let. Předpokládaná životnost je založena na 10 použitích denně a praní jednou týdně, podle pokynů k praní. Společnost Hill-Rom doporučuje, aby byl produkt používán jen po dobu předpokládané životnosti.


Pokyny pro recyklaci

Pás SeatStrap je nutné vytřídit jako spalitelný odpad.

Společnost Hill-Rom poskytuje svým uživatelům vyhodnocení a pokyny k bezpečné manipulaci a likvidaci jejich zařízení a pomáhá tak s prevencí poranění, mimo jiné pořezání, propíchnutí kůže, odřenin. Poskytuje také pokyny k požadovanému čištění a dezinfekci zdravotnického prostředku po použití a před jeho likvidací. Zákazníci by se měli řídit všemi místními a národními zákony a směrnicemi, které se týkají bezpečné likvidace zdravotnických prostředků a příslušenství.

V případě pochybnosti má uživatel nejprve kontaktovat technickou podporu společnosti Hill-Rom a vyžádat si protokoly bezpečné likvidace.

Nasazení

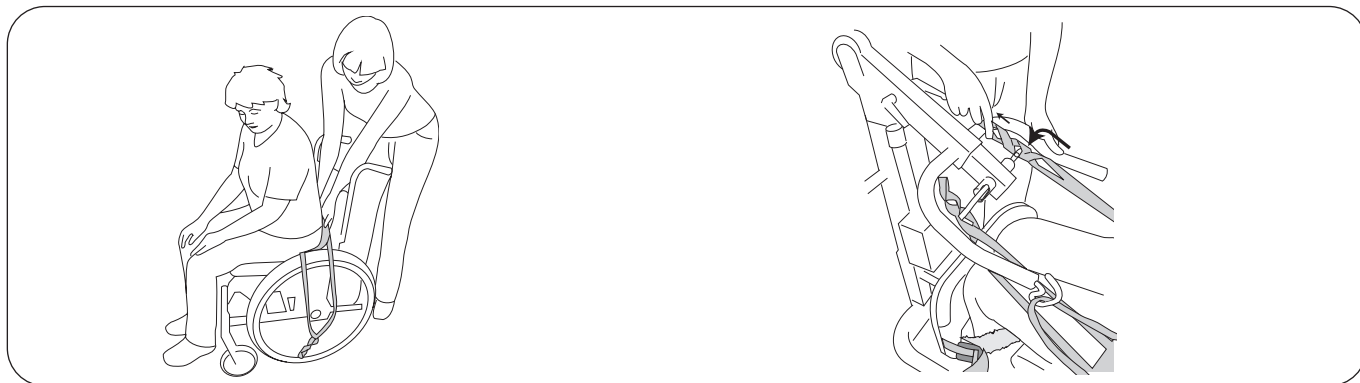


Spusťte pás SeatStrap pod hýždě co nejvíce je to možné.

Tip: Plastová výztuha usnadňuje nasazení.

Nasadte podpůrnou vestu. Přiblížte se ke zvedáku ze sedu do stoje Sabina. Připojte poutka vesty ke hrazdě. Další pokyny naleznete v návodu k použití vesty a zvedáku.

Napněte popruhy na pásu SeatStrap a připojte vhodné smyčky ke hrazdě SeatStrap SlingBar.


Vstávání ze sedu

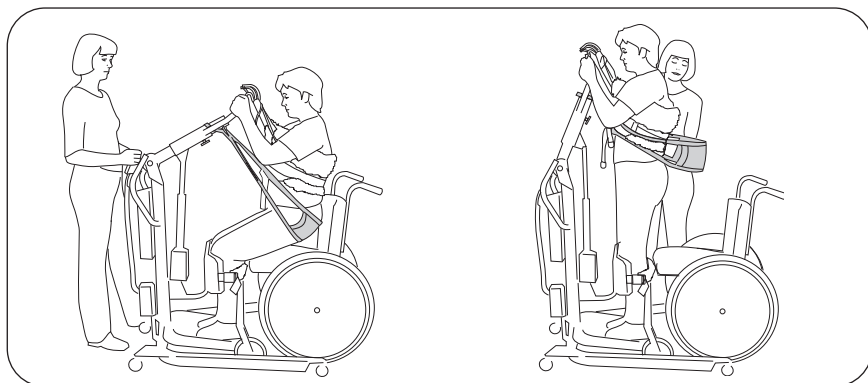

Zahajte vstávání. Pás SeatStrap napomáhá při první fázi zvedání.

Po zvednutí dojde k uvolnění zátěže z pásu SeatStrap, který pak lze jednoduše posunout na stranu, aby nepřekážel například při návštěvě toalet.

Spouštění do sedu

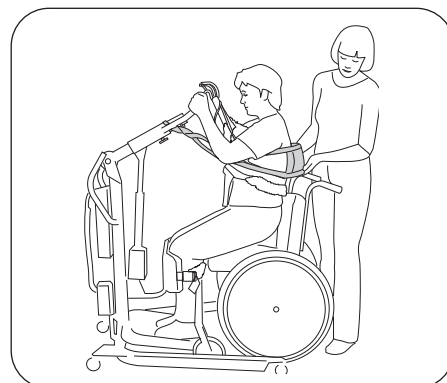


Při spouštění je pacient snadněji umístěn do správné polohy na invalidním vozíku, pokud pás SeatStrap není použit.

Přehled pásu Liko™ Sabina™ SeatStrap

Název	Č. výrobku	Materiál	Délka (část z látky)	Max. zatížení
Pás Sabina SeatStrap	3591115	Polyester, Síťovina s plastovým povrchem	50 cm	200 kg

Plastová výztuha

Plastová výztuha (polyuretanová) je dodávána spolu s pásem SeatStrap a je určena ke zjednodušení jeho umístění.

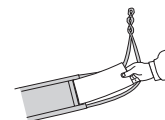

Kombinace

Pás Sabina SeatStrap je určen pouze k použití se zvedákem ze sedu do stoje Liko Sabina™ a s hrazdou Sabina SeatStrap SlingBar. Kombinace příslušenství/výrobků jiných, než je doporučeno společností Liko, s sebou může nést bezpečnostní riziko pro pacienta.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švédsko
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom