

## Produktbeskrivelse

SeatStrap er tilbehør, som placeres under brugerens bagdel for at hjælpe under første del af oprejsningen. Den er egnet til brugere, der har brug for hjælp til at få bagdelen løftet under oprejsning. Dette forhindrer støttevesten i at glide op, hvilket kan forårsage uønsket tryk under armene.

Sabina SeatStrap er kun beregnet til brug med en Liko Sabina™ stålif. SeatStrap bruges altid sammen med en af Likos støtteveste. Desuden skal liften suppleres med Sabina SeatStrap SlingBar.

Den medfølgende plastafstivning gør det lettere at anvende SeatStrap. Plastafstivningen sættes ind i stoflommen i bunden af SeatStrap og gør det nemmere at sætte SeatStrap ind under brugerens bagdel.





















*I dette dokument henvises der til den person, der skal løftes, som brugeren, og den person, som hjælper til, kaldes for medhjælperen.*

### VIGTIGT!

Løft og forflytning af en bruger medfører altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til liften og løftetilbehøret før brug. Det er vigtigt at have læst og forstået indholdet i brugsanvisningen. Udstyret bør kun anvendes af oplært personale. Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes. Udvis forsigtighed og omsorg ved brug. Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed. Du skal være velinformeret om brugerens evne til at klare løftesituationen. Hvis noget er uklart, skal du kontakte producenten eller leverandøren.

# Symbolbeskrivelse

Disse symboler findes i dette dokument og/eller på produktet.

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Denne situation kræver ekstra omhu og opmærksomhed.
	Læs brugsanvisningen før brug
	CE-mærke
	Juridisk producent
	Produktionsdato
	Produktidentifikation
	Serienummer
	Medicinsk udstyr
	Må ikke renses kemisk
	Må ikke stryges
	Tørretumbling
	Må ikke tørres i tørretumbler
	Vask Symbolet er altid i kombination med den anbefalede temperatur i °C og °F.
	Latexfri
	Periodisk eftersyn
	Må ikke bleges
	Tørring på snor i skyggen
	Retning opad og symbol på ydersiden af produktet.
	Symbol på ydersiden af produktet.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) AAAMMD (21) 012345678910</small>	GS1 datamatrixstregkode, der kan indeholde følgende oplysninger. (01) Globalt handelsvarenummer (11) Produktionsdato (21) Serienummer

# Sikkerhedsanvisninger

## Vær opmærksom på følgende, før du løfter:

- Hvorvidt det er nødvendigt med én eller flere medhjælpere, skal vurderes ud fra den enkelte situation af den ansvarlige medarbejder i din virksomhed.
- Planlæg løftet, så det kan foregå så sikkert og nemt som muligt.
- Selv om Likos løftebøjler er forsynet med afkrogningsbeskyttelse, skal der udvises særlig forsigtighed. Inden brugeren løftes fra underlaget, men efter at båndene er blevet strakt helt ud, skal det kontrolleres, at båndene er hægtet korrekt på løftebøjlers kroge.
- Efterlad aldrig en bruger uden opsyn under en løftesituation.
- Sørg for, at hjulene på kørestolen, sengen, båren osv. er låst under løftet/forflytningen.
- Arbejd altid ergonomisk. Udnyt brugerens evne til at deltage aktivt i løftet.

 Medicinteknisk klasse I produkt

## Produktændringer

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til at foretage produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt din repræsentant fra Hill-Rom for rådgivning og information om produktopgraderinger.

## Design and Quality by Liko in Sweden

Liko er certificeret iht. ISO 9001 og den tilsvarende standard for medicinsk udstyr ISO 13485. Liko er også certificeret iht. miljøstandarden ISO 14001.

## Meddelelse til brugere og/eller patienter i EU

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente myndighed i brugerens og/eller patientens medlemsstat.

# Eftersyn og vedligeholdelse

Kontrollér altid løftesejlet inden brug. Kontrollér følgende punkter for slid og beskadigelse:

- Stof
- Bånd
- Sømme
- Løkker

## Anvend ikke beskadiget lifttilbehør.

Hvis noget er uklart, bedes du kontakte fabrikanten eller leverandøren.

**Vaskeanvisning:** Se SeatStraps produktmærkat og det vedhæftede bilag "Vedligeholdelsesanvisninger til Likos løftesejls". Fjern plastafstivningen inden vask (se side 4). Plastafstivningen skal rengøres med desinfektionsmidler.

## Periodisk eftersyn

Produktet skal efterses mindst hver 6. måned. Hyppigere eftersyn kan være nødvendige, såfremt produktet anvendes eller vaskes oftere end normalt. For protokoller bedes du kontakte din Hill-Rom-repræsentant.

## Forventet levetid

Produktet har en forventet levetid på 1-5 år. Den forventede levetid er baseret på, at produktet anvendes til 10 løft pr. dag, og vaskes en gang om ugen iht. vaskeanvisningen. Hill-Rom anbefaler, at produktet kun anvendes under sin forventede levetid.


## Anvisninger for genanvendelse

SeatStrap skal sorteres som brændbart affald.

Hill-Rom evaluerer og giver vejledning til sine brugere om sikker håndtering og bortskaffelse af sit udstyr for at hjælpe med at forebygge skader, herunder bl.a. snitsår, punkteringer af hud og hudafskrabninger, og om eventuel nødvendig rengøring og desinfektion af det medicinske udstyr efter brug og før bortskaffelse. Kunderne skal overholde alle nationale, regionale og/eller lokale love og bestemmelser, som vedrører sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr og tilbehør.

I tvivlsspørgsmål skal brugeren af enheden først kontakte Hill-Roms tekniske support for at få vejledning angående protokoller for sikker bortskaffelse.

## Påsætning

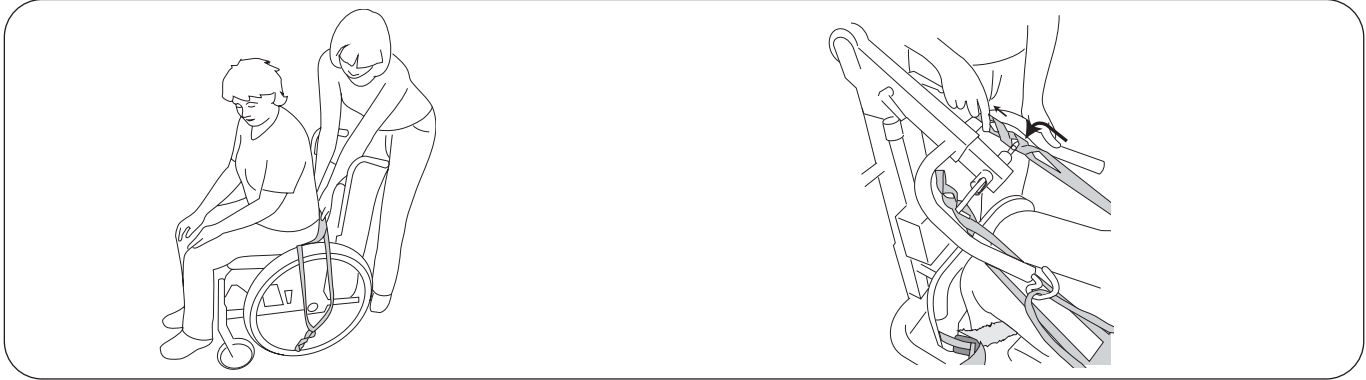


Sænk SeatStrap så langt ned under bagdelen som muligt.  
**Tip:** Plastafstivningen letter påsætningen.

Påsæt støttevesten. Nærm dig Sabina stâliften. Tilslut vestens båndløgker til løftebøjlen. For yderligere instruktioner henvises der til brugsanvisningen for den anvendte vest og lift.

Stræk båndene på SeatStrap, og tilslut passende båndløgker til SeatStrap Slingbar.


## Løft

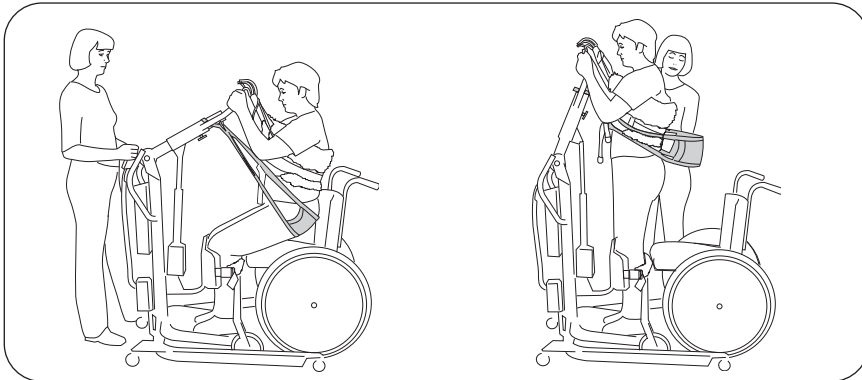

Start løftet. SeatStrap hjælper i første del af oprejsningen.

I løftet position belastes SeatStrap ikke og kan let skubbes til siden for at lette f.eks. toiletbesøg.

## Tilbage til siddende stilling

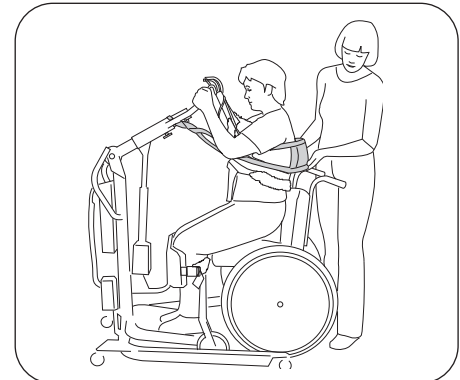


Under sænkningen er det nemmere at placere brugeren i den rigtige position i kørestolen, hvis SeatStrap ikke anvendes.

## Oversigt over Liko™ Sabina™ SeatStrap

Betegnelse	Varenr.	Materiale	Længde (stofdel)	Maks. belastning
Sabina SeatStrap	3591115	Polyester, plastbehandlet net	50 cm	200 kg

### Plastafstivning

Der følger en plastafstivning (polyethylen) med SeatStrap, som er beregnet til at lette påsætningen.

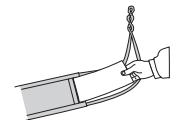

### Kombinationer

Sabina SeatStrap er kun beregnet til brug med en Liko Sabina™ stâliften og Sabina SeatStrap SlingBar.

Kombinationer af andet tilbehør/andre produkter end dem, der anbefales af Liko, kan medføre risici for brugerens sikkerhed.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)