

Produktbeskrivelse

Setebåndet er et tilbehør som plasseres under brukerens bakende for å hjelpe til under den første delen av oppreisningen. Det passer til brukere som trenger hjelp til å få bakenden opp under oppreisning. Dette hindrer at støttevesten glir opp, noe som kan føre til uønsket trykk under armene.

Sabina SeatStrap er kun utformet for bruk sammen med Liko Sabina™-løftere for overgang fra sittende til stående stilling. Setebåndet brukes alltid sammen med én av Likos støttevester. Videre må løfteren fullføres med Sabina-setebåndsbøyle.

Den medfølgende avstivningen i plast forenkler plasseringen av setebåndet. Avstivningen i plast føres inn i tøylokken i bunnen av setebåndet, og gjør det enklere å feste setebåndet under brukerens bakende.





















I dette dokumentet blir personen som løftes, referert til som brukeren, og personen som hjelper, blir referert til som medhjelperen.

VIKTIG!

Løfting og overflytting av en bruker innebærer alltid et visst risikonivå. Les bruksanvisningen for både brukerløfteren og løftertilbehøret før bruk. Det er viktig å forstå innholdet i bruksanvisningen fullt ut. Utstyret skal bare brukes av kvalifisert personell. Kontroller at løftetilbehøret er egnet for løfteren som brukes. Vær varsom og forsiktig under bruk. Som en medhjelper er du alltid ansvarlig for brukerens sikkerhet. Du må være oppmerksom på pasientens evne til å klare seg gjennom løftesituasjonen. Hvis noe er uklart, må du ta kontakt med produsenten eller leverandøren.

Symbolbeskrivelse

Disse symbolene finnes i dette dokumentet eller på produktet.

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Denne situasjonen krever ekstra forsiktighet og oppmerksomhet.
	Les bruksanvisningen før bruk
	CE-merke
	Rettslig produsent
	Produksjonsdato
	Produkt-ID
	Serienummer
	Medisinsk utstyr
	Må ikke renses
	Må ikke strykes
	Tørking i tørketrommel
	Ikke tørk i tørketrommel
	Vasking Symbolet står alltid sammen med anbefalt temperatur i °C og °F.
	Lateksfri
	Periodisk inspeksjon
	Ikke blek
	Lufttørking på snor i skyggen
	Retning oppover og symbol på utsiden av produktet.
	Symbol på utsiden av produktet.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) AAAMMD (21) 012345678910</small>	GS1 Data Matrix-strekkode som kan inneholde følgende informasjon. (01) GTIN (Globalt handelsartikkelnummer) (11) Produksjonsdato (21) Serienummer

Sikkerhetsforskrifter

Vær obs på følgende før løfting:

- En ansvarlig person i organisasjonen skal i hvert enkelt tilfelle avgjøre om det er behov for én eller flere medhjelpere.
- Planlegg løfteoperasjonen slik at den kan utføres så sikkert og behagelig som mulig.
- Selv om Likos løftebøyer er utstyrt med avkrokningsbeskyttelse, må det utvises ekstra varsomhet. Før brukeren løftes fra underlaget, men etter at stroppene er strukket helt ut, må du kontrollere at stroppene er heftet på løftebøylekrokene på riktig måte.
- La aldri en bruker være uten tilsyn under en løftesituasjon.
- Kontroller at hjulene på rullestolen, sengen, båren osv. er låst under løftet/forflytningen.
- Arbeid alltid ergonomisk. Bruk pasientens evne til å delta aktivt i betjeningen.

Medisinsk utstyr, produktklasse I

Produktendringer

Siden Likos produkter er under kontinuerlig utvikling, forbeholder vi oss retten til å gjøre produktendringer uten forutgående varsel. Kontakt Hill-Rom-representanten din hvis du vil ha råd og informasjon om produktoppgraderinger.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 og tilsvarende for bransjen for medisinsk utstyr, ISO 13485. Liko er også sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001.

Merknad til brukere og/eller pasienter i EU

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med utstyret, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren er basert.

Tilsyn og vedlikehold

Kontroller løfteseilet før hver bruk. Kontroller følgende punkter med hensyn til slitasje og skader:

- tøy
- stropper
- sømmer
- løkker

Bruk ikke skadet løftetilbehør.

Hvis noe er uklart, ber vi deg ta kontakt med produsenten eller leverandøren.

Vaskeanvisninger: Se produktetiketten på setebåndet og det vedlagte tillegget «Tilsyn og vedlikehold for Likos løfteseil» Fjern avstivningen i plast før vask (se side 4). Avstivningen i plast bør rengjøres med desinfiseringsmidler.

Periodisk inspeksjon

Produktet må kontrolleres minst én gang hver 6. måned. Hyppigere kontroller kan være nødvendig hvis produktene brukes eller vaskes oftere enn normalt. Ta kontakt med Hill-Rom-representanten din angående protokoller.

Forventet holdbarhet

Produktet har en forventet holdbarhet på 1–5 år. Forventet holdbarhet er basert på 10 bruk per dag og vasking én gang per uke, i henhold til vaskeanvisningene. Hill-Rom anbefaler at produktet kun brukes i løpet av den forventede holdbarheten.


Instruksjoner for resirkulering

Setebåndet skal sorteres som brennbart avfall.

Hill-Rom vurderer og gir veiledning til sine brukere om sikker håndtering og avhending av utstyret for å bidra til å forebygge skader, herunder kutt, skrubbsår og perforering av huden, samt eventuell nødvendig rengjøring og desinfisering av det medisinske utstyret etter bruk og før avhending. Kunder skal følge alle føderale, delstatlige, regionale eller lokale lover og forskrifter som gjelder for sikker avhending av medisinsk utstyr og tilbehør.

I tvilstilfeller må brukeren av utstyret først ta kontakt med Hill-Rom teknisk støtte for veiledning angående protokoller for sikker avhending.


Plassering

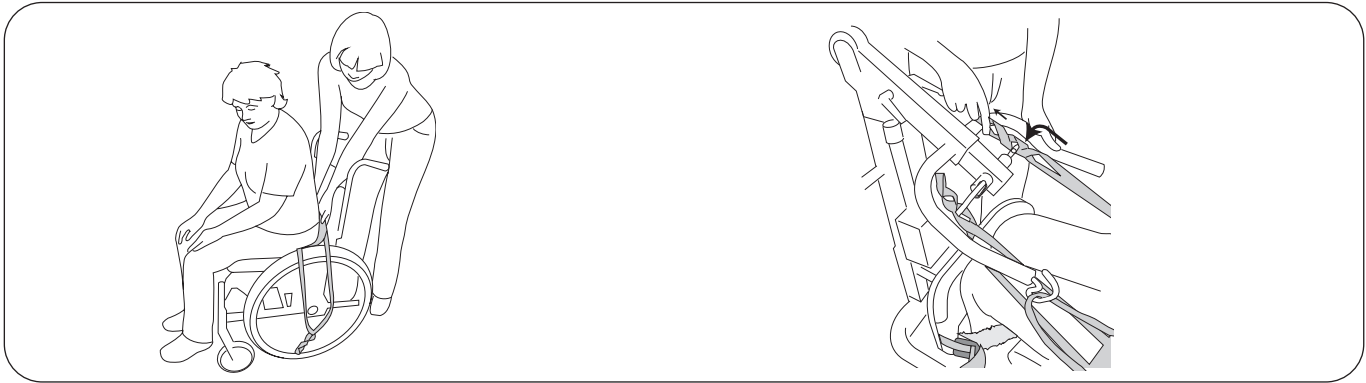

Senk setebåndet så langt ned under bakenden som mulig.
Tips: Avstivningen i plast forenkler plasseringen.

Plasser støttevesten. Kjør mot Sabina-løfteren for overgang fra sittende til stående stilling. Fest vestens båndløkker til løftebøylen. Hvis du vil ha ytterligere instruksjoner, kan du se i bruksanvisningen for vesten og løfteren som brukes. Strekk stroppene på setebåndet, og fest passende løkkebånd til setebåndsbøylen.


Oppreisning

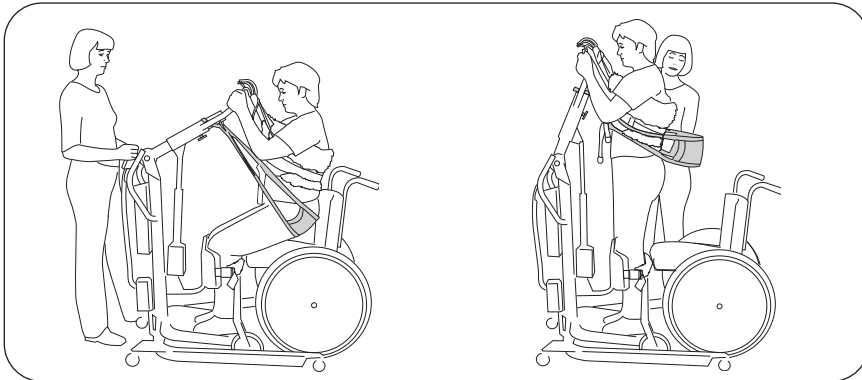

Start oppreisningen. Setebåndet hjelper til under den første delen av oppreisningen.

I oppreist stilling mister setebåndet belastningen, og det kan enkelt skyves til siden for å forenkle for eksempel toalettbesøk.

Tilbake til sittende stilling

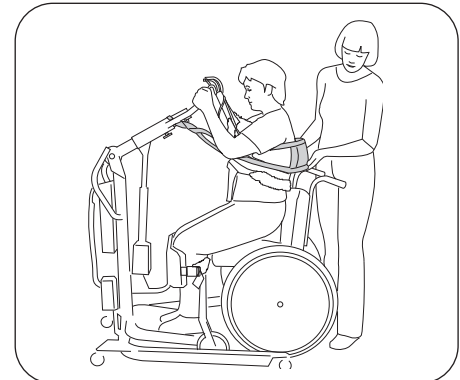


Ved senking plasseres brukeren lettere i riktig stilling i rullestolen hvis setebåndet ikke brukes.

Oversikt over Liko™ Sabina™ SeatStrap

Navn	Art.nr.	Materiale	Lengde (stoffdel)	Maks. last
Sabina SeatStrap	3591115	Polyester, plastbelagt stoff	50 cm	200 kg

Avstivning i plast

En avstivning i plast (polyetylen) leveres med setebåndet, og er ment for å forenkle plasseringen.

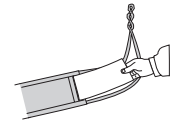

Kombinasjoner

Sabina SeatStrap er bare beregnet på bruk sammen med Liko Sabina™-løftere for overgang fra sittende til stående stilling og Sabina setebåndsbøyle.

Kombinasjoner av andre tilbehør/produkter enn de som er anbefalt av Liko, kan føre til fare for brukerens sikkerhet.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sverige
+ 46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom