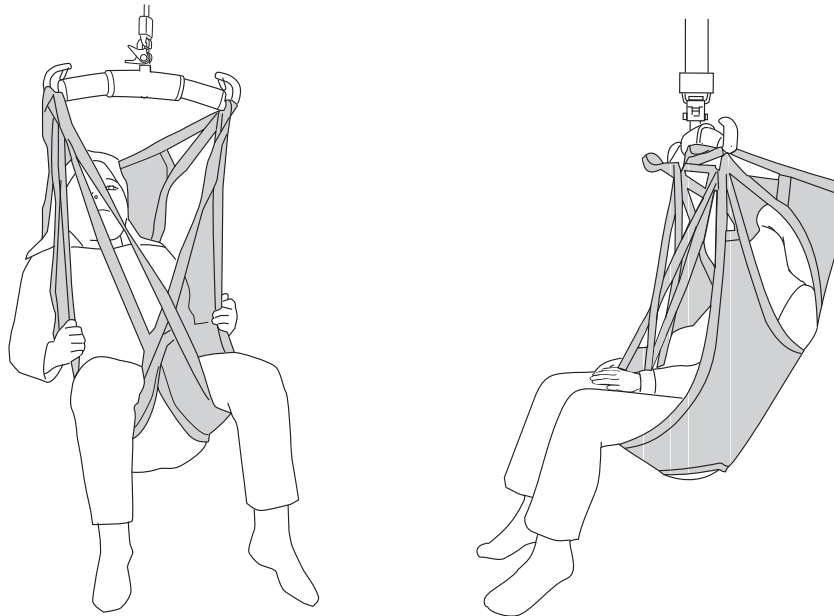


## Käyttöohje



## Tuotekuvaus

### **Liko SilhouetteSling on joustava nostokangas, joka mukautuu vartalon muotoihin ja vaatii vain vähän tilaa pyörätuolissa.**

Se mahdollistaa hieman takakenoisen istuma-asennon ja tukee erinomaisesti koko vartaloa, minkä ansiosta se soveltuu erityisesti avustettaville, joiden pään ja ylävartalon stabiliteetti on heikentynyt. Avustettava voi pitää kätensä nostokankaan sisä- tai ulkopuolella. Pääntuki on säädettävissä.

Muotoilun ja materiaalin ansiosta SilhouetteSling-nostokangas soveltuu erityisen hyvin avustettavan nostamiseen muotoiltuihin istuimiin, koska nostokangas jätetään yleensä pyörätuoliin noston jälkeen. Siksi sitä käytetään paljon hoito- ja kuntoutustilanteissa, joissa erityiset istuma-alustat ja muotoillut istuimet ovat hyvin tavallisia.

SilhouetteSling-nostokangasta voidaan käyttää myös kylvyn ja suihkun yhteydessä.

Oikein sovitettuna ja käytettynä nostokangas antaa avustettavalle suuren turvallisuuden ja mukavuuden tunteen.

### **Koot**

SilhouetteSling-nostokankaasta on saatavana eri kokovaihtoehtoja. On tärkeää valita oikean kokoinen nostokangas, jotta se on avustettavalle mahdollisimman miellyttävä ja turvallinen. Liian suuresta nostokankaasta avustettava saattaa liukua ulos, kun taas liian pieni nostokangas voi olla epämiellyttävä tiukka nivusista.

### **Kankaat**

Silhouette-nostokangas on valmistettu mukavan tuntuista ja joustavasta verkkopolyesteristä, joka päästää läpi myös vartalon lämmön ja kosteuden.

*Tässä käyttöohjeessa nostettavaa henkilöä kutsutaan avustettavaksi ja häntä auttavaa henkilöä avustajaksi.*

### **TÄRKEÄÄ!**


















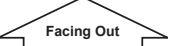


Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue nostimen ja nostovälineiden käyttöohje ennen käyttöä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Tätä välinettä saa käyttää vain koulutettu henkilökunta. Varmista, että nostovälineet soveltuvat käytettävään nostimeen. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan turvallisuudesta. Sinun on oltava tietoinen avustettavan edellytyksistä suoriutua nostotilanteesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

# Sisällysluettelo

Symbolien kuvaus.....	3
Turvaohjeet .....	4
Hoito ja kunnossapito.....	5
Määritelmät.....	5
Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin.....	6
SilhouetteSling-nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuiseen nostokaareen (kaksoisnostokaaret ja Cross-Bar-ristikkonostokaaret).....	7
Nostaminen istuma-asennosta.....	8
Nostaminen istuma-asentoon .....	9
Nostokankaan poistaminen tuolista/pyörätuolista .....	9
Nostaminen sängystä .....	10
Nostaminen sänkyyn .....	11
Nostokankaan poistaminen istuma-asennossa sängyssä .....	11
Nostokankaan poistaminen makuuasennossa sängyssä .....	11
Kiinnitysohje .....	12
Erilaisia tapoja jalkatukien kiinnittämiseen .....	12
Pääntuen säätö.....	12
Erilaisia istuma-asentoja nostokaaren valinnan mukaan .....	12
Avustettava ei istu hyvin nostokankaassa – mistä se voisi johtua? .....	13
Lyhennysasento .....	13
Lisävarusteet .....	14
Tuotekuvaus – Liko™ SilhouetteSling -nostokangas, malli 22 .....	14
Suosittelut käyttöyhdistelmät.....	14

# Symbolien kuvaus

Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja.

Symboli	Kuvaus
	Varoitus. Varoittaa tilanteista, joissa on noudatettava erityistä varovaisuutta.
	Lue käyttöohje ennen käyttöä
	CE-merkintä
	Laillinen valmistaja
	Valmistuspäivämäärä
	Viitenumero
	Sarjanumero
	Lääkinnällinen laite
	Kemiallinen pesu kielletty
	Silitys kielletty
	Rumpukuivaus
	Rumpukuivaus kielletty
	Pesu Symbolin yhteydessä näkyy aina suositeltu pesulämpötila (°C ja °F).
	Lateksiton
	Määräaikaistarkastus
	Valkaisu kielletty
	Ripusta kuivumaan varjoon
	Suunta ylöspäin; välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli
	Välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli
	GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja: (01) kansainvälinen tuotenumero (11) tuotantopäivä (21) sarjanumero

# Turvaohjeet

## **Huomioi seuraavat asiat ennen nostamista:**

- Hoitoyksikön vastuuhenkilön on arvioitava avustajien tarvittava lukumäärä tapauskohtaisesti.
- Varmista, että nostokangas sopii malliltaan, kooltaan, materiaaliltaan ja tyypiltään avustettavan tarpeisiin.
- Turvallisuus- ja hygieniasyistä nostokankaat on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.
- Suunnittele nostotilanne ennen nostamista, jotta kaikki tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja joustavasti.
- Tarkista, että nostotarvikkeet riippuvat pystysuorassa ja pääsevät liikkumaan esteettömästi.
- Vaikka Likon nostokaarissa on salvat, on erityistä varovaisuutta kuitenkin noudatettava. Ennen avustettavan nostamista alustalta ja hihnojen kiristämistä on tärkeää varmistaa, että hihnat on kiinnitetty nostokaaren koukkuihin oikein.
- Varmista, että avustettava istuu tukevasti nostokankaassa, ennen kuin siirto toiseen paikkaan aloitetaan.
- Älä koskaan nosta avustettavaa korkeammalle kuin siirron toteuttamiseksi on välttämätöntä.
- Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa nostotilanteessa.
- Varmista, että pyörätuolin, sängyn, paarien jne. pyörät ovat lukittuina nosto-/siirtohetkellä.
- Käytä aina ergonomisia työmenetelmiä. Hyödynnä avustettavan kykyä osallistua aktiivisesti toimenpiteisiin.
- Kun nostokangasta ei käytetä, älä jätä sitä suoraan auringonvaloon.

 **Nostokankaan puutteellinen kiinnitys nostokaareen voi aiheuttaa avustettavalle vakavia vammoja.**

 **Avustettavan käsivarainen kääntäminen sängyssä voi aiheuttaa avustajalle vammoja.**

 Lääkinnällinen luokan I laite

**PATENTTI [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Saattaa kuulua yhden tai useamman patentin piiriin. Katso edellä mainittu verkko-osoite.**

Hill-Rom-yritykset ovat eurooppalaisten, yhdysvaltalaisen ja muiden patenttien ja odottavien patenttihakemusten omistajia.

## **Tuotemuutokset**

Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakoilmoitusta. Ohjeita ja lisätietoja tuotepäivityksistä saa Hill-Romin edustajalta.

## **Design and Quality by Liko in Sweden**

Liko on laatusertifioitu standardin ISO 9001 ja vastaavan lääkintätekniikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO 13485 mukaisesti. Liko on myös ympäristösertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.

## **Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa**

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan asianmukaiselle viranomaiselle.

## Hoito ja kunnossapito

Tarkista nostokangas ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat osat kulumisen ja vaurioiden varalta:

- Kangas
- Hihnat
- Saumat
- Lenkit

**⚠ Älä käytä vahingoittuneita nostovaruksia.**

Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

**Pesuohteet:** Katso nostokankaan tuotelappu ja mukana oleva liite ”Liko-nostokankaiden hoito ja kunnossapito”.

### Määräaikaistarkastus

Tuote on tarkastettava vähintään kuuden kuukauden välein. Jos tuotetta käytetään tai pestään normaalia enemmän, tarkastus on tehtävä tätäkin useammin. Katso Likon käytäntö ohjeesta ”Liko-tekstiilituotteiden määräaikaistarkastus”. Lisäohjeita saat Hill-Romin edustajalta.

### Odotettu käyttöikä

Tuotteen odotettu käyttöikä on normaalikäytössä 1–3 vuotta. Käyttöikään vaikuttavat kangas, käyttötiheys, pesumenetelmä ja kuormien paino.

### Kierrätysohjeet

Koko nostokangas, mukaan lukien säleet, pehmusteet jne., on lajiteltava poltettaviin jätteisiin.

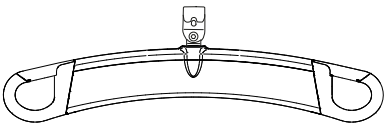
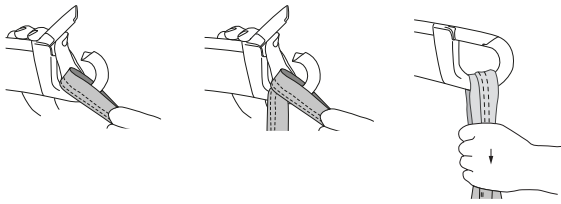

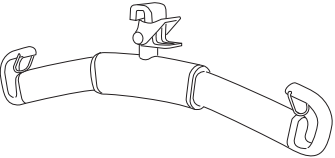
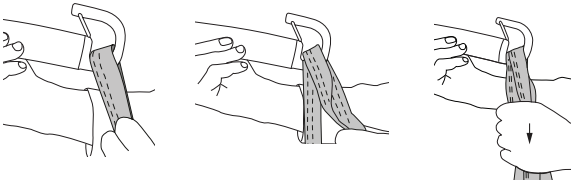

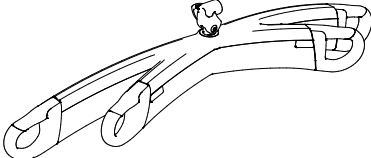
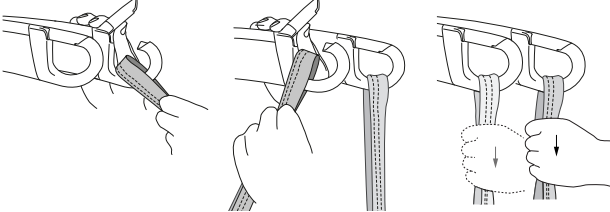
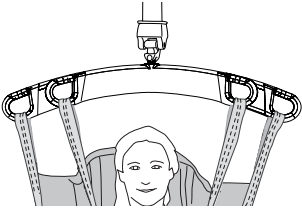
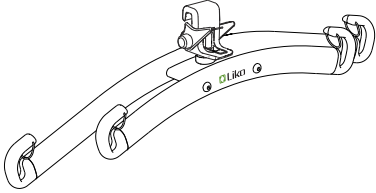
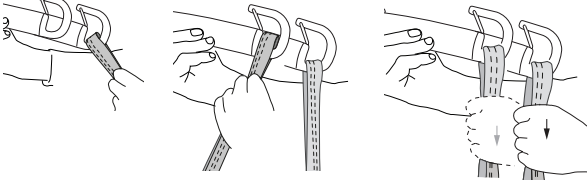
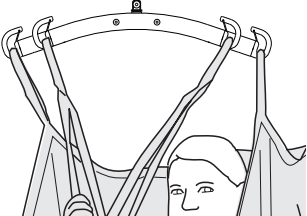
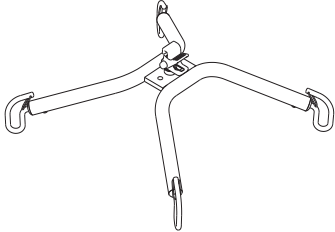
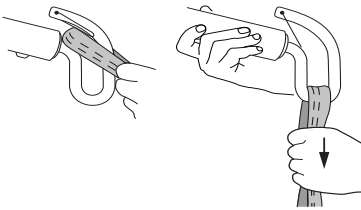
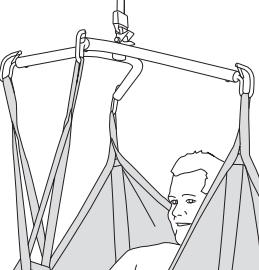
Hill-Rom opastaa käyttäjiä laitteiden turallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä ja auttaa näin ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinnällisten laitteiden puhdistamisessa ja desinfiomisessa käytön jälkeen ja ennen hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinnällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, alueellisia ja paikallisia säännöksiä.

Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteys Hill-Romin tekniseen tukeen ja pyydyttävä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.


## Määritelmät






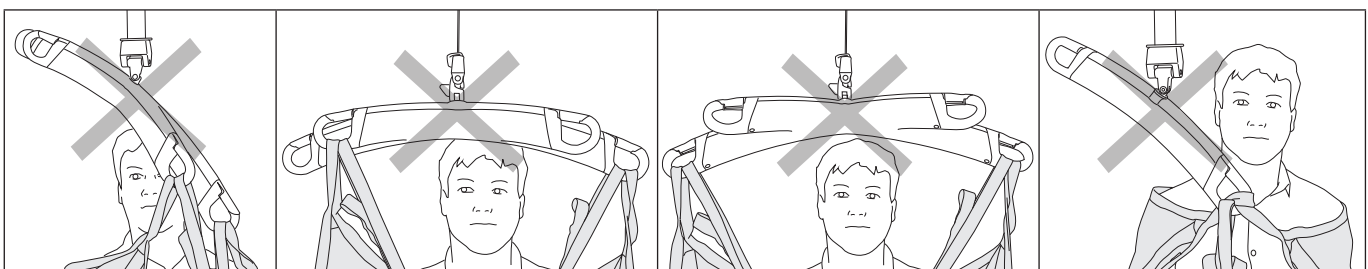
## Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin

Nostokaari	Nostokankaan lenkit nostokaaren koukkuihin	Oikein
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-Bar</p>		

### Väärin!



# SilhouetteSling-nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuiseen nostokaareen (kaksoisnostokaaret ja Cross Bar -ristikkonostokaaret)

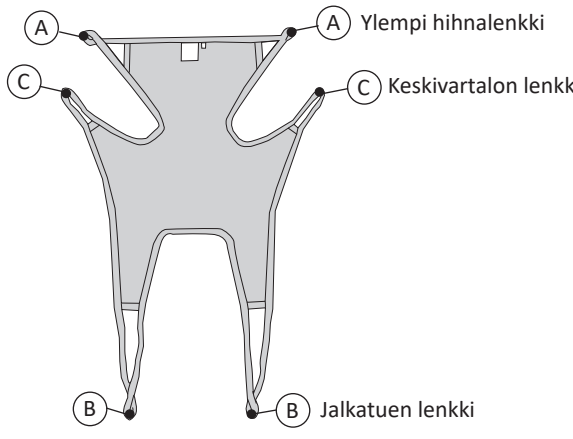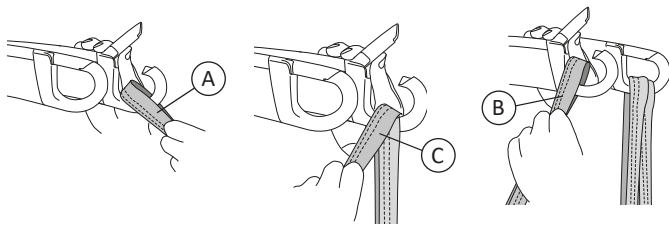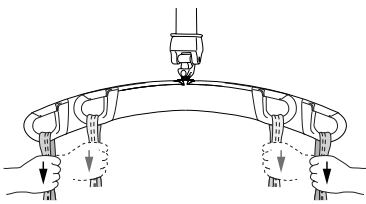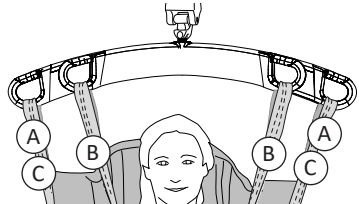 <p>A Ylempi hihnalenkki B Jalkatuen lenkki C Keskivartalon lenkki</p>	<p>1.</p> 
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>Kuvissa 1, 2 ja 3 näkyy kaksoisnostokaari, mutta tämä koskee myös Cross-Bar-ristikkonostokaarta.</p>


## Nostaminen istuma-asennosta

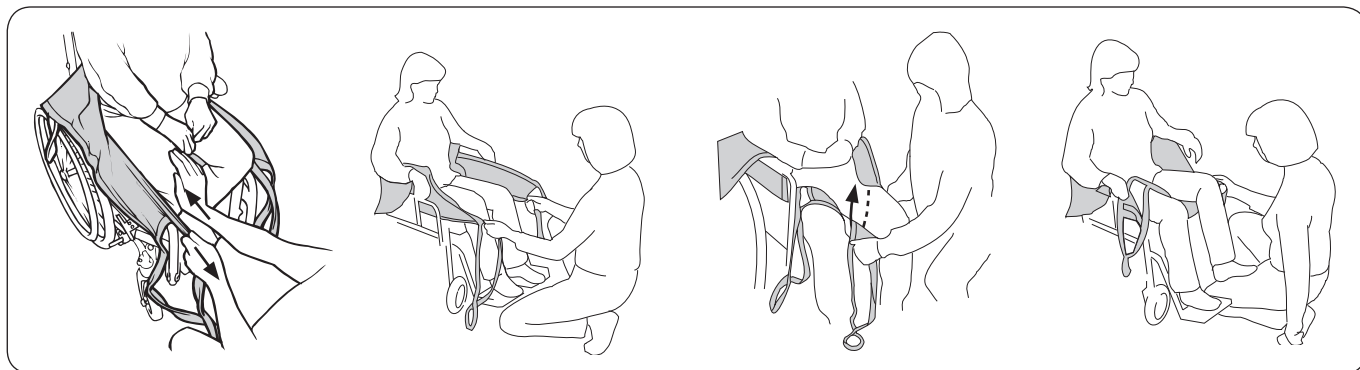Yleensä avustettavaa kallistetaan hieman eteenpäin, jolloin on tärkeää, että avustaja seisoo avustettavan edessä, jotta tämä ei kaadu eteenpäin.




Aseta nostokangas avustettavan selän taakse siten, että tuotelappu osoittaa ulospäin. Taita nostokankaan alareuna sormenpäiden ympäri ja ohjaa nostokangas paikalleen. Paina kämmenellä nostokankaan alareuna avustettavan häntäluun tasolle. **Tämä on erittäin tärkeää.** Vinkki: nostokankaan asettamista helpottaa, jos avustettava itse kumartuu tai häntä kallistetaan hieman eteenpäin.

Vedä nostokankaan jalkatuet sivuilta eteen avustettavan reisien viereen. Aseta kämmen avustettavan vartalon ja nostokankaan väliin ja paina jalkatuen alareunaa alas istuinta kohti. Venytä samalla jalkatukea vetämällä sitä toisella kädellä eteenpäin.



Suorista mahdolliset rypyt takaa vetämällä jalkatukia eteen. **Vinkki:** jalkatuki on helpompi vetää eteen, kun pidät kevyesti kiinni avustettavan polvilumpion alta. Tarkista, että molemmat jalkatuet ulottuvat yhtä pitkälle eteen.

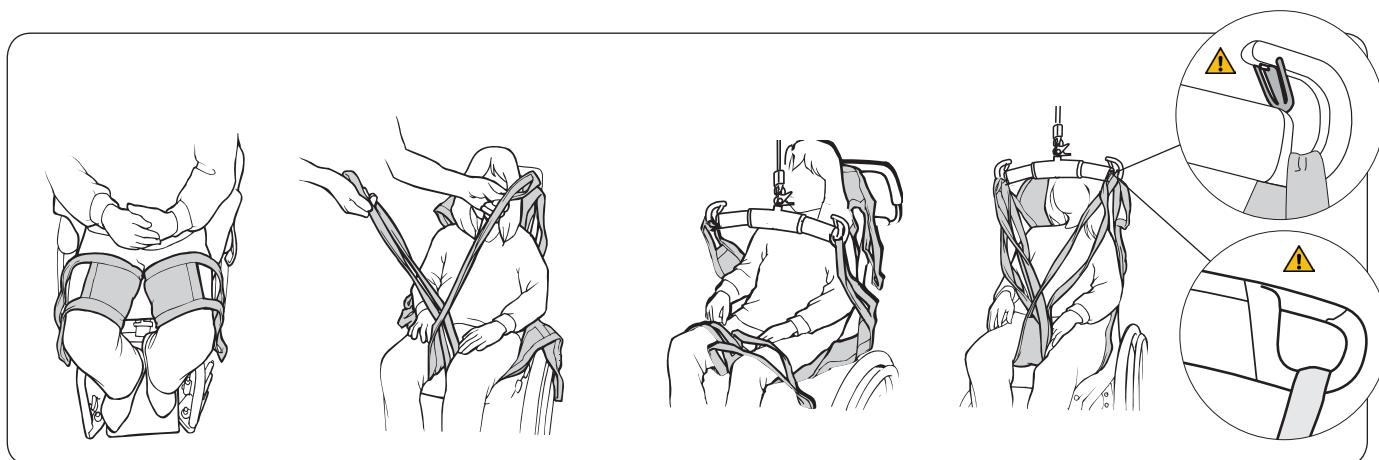Aseta jalkatuet reisien alle. **Vinkki:** Jalkatukien asettamista helpottaa, jos avustettavan jalkoja nostetaan hieman irti istuimesta. Se onnistuu asettamalla avustettavan jalat tuolin jalkalevyille tai oman jalkasi päälle kuvan mukaisesti.




Varmista, että kangas on suorassa ja tukee jalkaa kunnolla. Valmistele jalkatukien kiinnitys. Yleisin tapa kiinnittää jalkatuet on asettaa ne ristikkäin. Katso vaihtoehtoiset kiinnitystavat sivulta 12.

Kiinnitä ensin keskivartalon lenkit nostokaareen. Avustettavan käsivarret voidaan sijoittaa nostokankaan sisä- tai ulkopuolelle. Liitä sitten ylemmät hihnalenkit nostokaaren koukkuihin. Valitse lenkit avustettavan tarpeiden mukaan, ks. **Pääntuen säätö** sivulla 12. Kiinnitä lopuksi jalkatukien lenkit nostokaareen. Katso sivuilta 6–7 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettava.



## Nostaminen istuma-asentoon

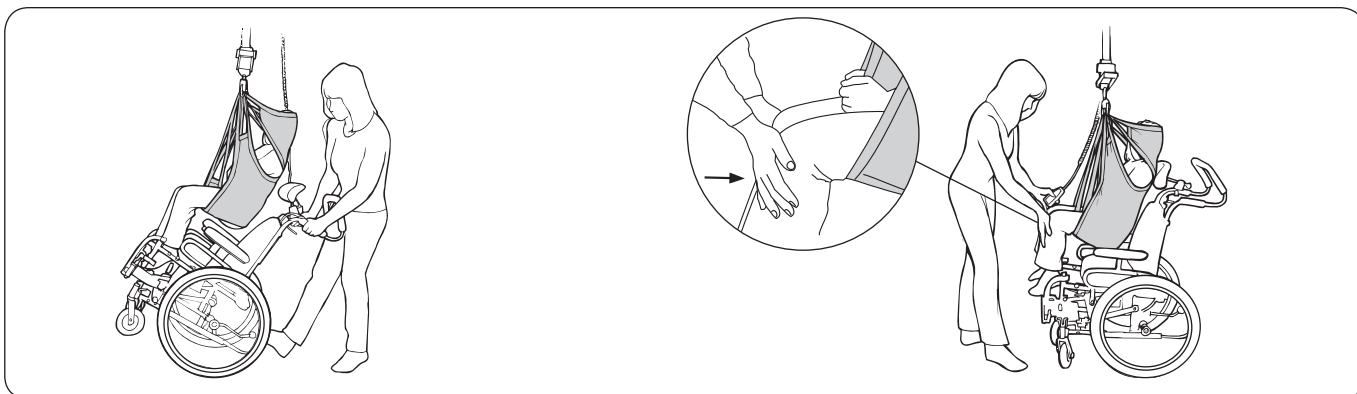Kun avustettava asetetaan pyörätuoliin, on tärkeää, että hänet saadaan istumaan mahdollisimman taakse tuolissa. Tämä voidaan toteuttaa monella eri tavalla.



*Kun avustettava asetetaan pyörätuoliin:* Kallista tuolia taaksepäin avustettavan alas laskemisen aikana. Anna avustettavan pakaroiden liukua loppuksi alas selkänojaan saakka. Säädä pyörätuolin kallistuskulmaa pitämällä jalkaasi kaatumistuen päällä.

*Vaihtoehto:* Alas laskemisen aikana työnnä avustettavaa kevyesti polvien alta niin, että pakarot asettuvat selkänojaa vasten.

Useimmiten SilhouetteSling-nostokangas jätetään tuoliin noston jälkeen ja hihnalenkit sekä jalkatuet taitetaan sivuun tuolin reunoilla.

### Nostokankaan poistaminen tuolista/pyörätuolista



Poista jalkatuki varovasti. Hellävaraisinta on vetää jalkatuen lenkit pois jalkatuen kangasosan alta.

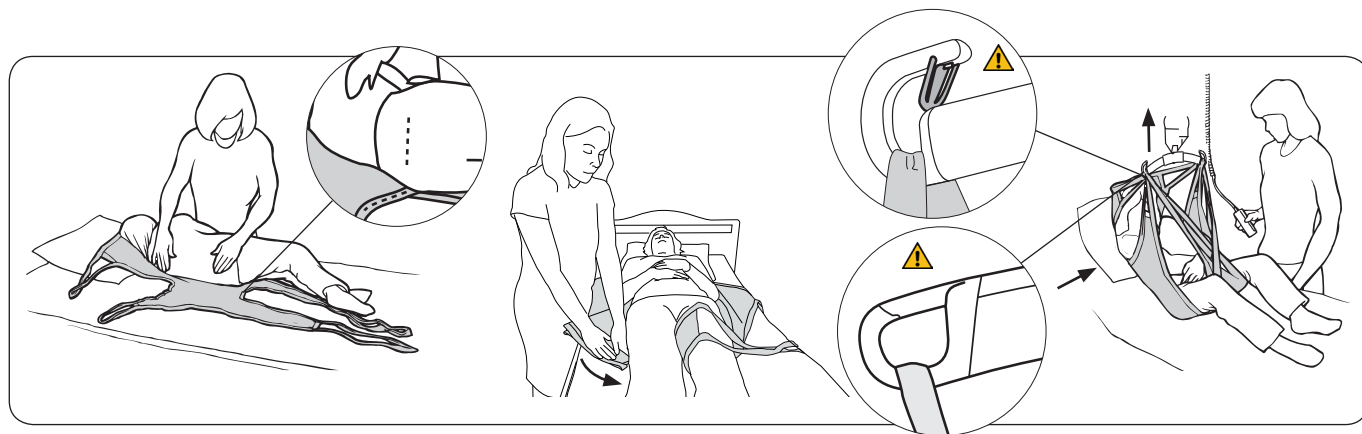
Poista nostokangas vetämällä varovasti ylöspäin.

## Nostaminen sängystä

Suosittellemme nostokankaan asettamista paikalleen, kun avustettava makaa vaakasuorassa, koska tällöin se on yksinkertaisin käsitellä. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi jos avustettavan ei ole mahdollista maata vaakasuorassa, nostokangas voidaan asettaa avustettavan istuessa sängyllä (katso alla oleva kohta **Nostokankaan vaihtoehtoinen käyttömenetelmä**).

Ota huomioon oma työasentosi ja avustettavan mukavuus. Käytä sängyn nosto- ja laskutoimintoja.

**⚠ Jos vuoteen pään puoleista osaa ei ole mahdollista nostaa tai laskea, ole varovainen noston alkuvaiheissa, jotta avustettavan niska ei pääse taivuttamaan. Silloin avustajan on tuettava avustettavan päätä käsivarisesti.**



Käännä avustettava itseäsi kohti, jotta hän ei pääse putoamaan sängystä. Aseta nostokankaan reuna avustettavan alle siten, että alareuna on **samalla tasolla häntäluun kanssa**. Pääntuen yläreuna ei saa olla pään alapuolella, sillä muuten pää ei saa riittävästi tukea noston aikana. Laskosta nostokangas niin, että sen keskikohta kulkee avustettavan selkäranka pitkin, kun hänet käännetään varovasti takaisin selinmakuulle. Vedä nostokangas varovasti esiin toiselta puolelta.

Aseta jalkatuet jalkojen alle. Se tapahtuu helpoimmin painamalla jalkatukea patjaa vasten ja työntämällä se samanaikaisesti avustettavan reiden alle. Varmista, että kangas on suorassa ja tukee jalkaa kunnolla. Jalkatuet voidaan kiinnittää eri tavoilla, katso sivu 12.

Korota sänkyä pään puolelta. Kiinnitä nostokaareen ensin keskivartalon lenkit ja sitten ylemmät hihnalenkit. Valitse lenkit avustettavan tarpeiden mukaan, ks. **Pääntuen säätö** sivulla 12. Kiinnitä lopuksi jalkatukien lenkit nostokaareen. Katso sivuilta 6–7 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettava.


**Nostokankaan vaihtoehtoinen käyttömenetelmä:** Nosta sänkyä avustettavan pään puolelta. Aseta nostokangas sängyn päälle tuotelappu alaspäin patjaa vasten. Ohjaa nostokangas alas avustettavan selän taakse siten, että alareuna on **samalla tasolla häntäluun kanssa**. **Vinkki!** Nostokankaan asettamista helpottaa, jos avustettava itse kumartuu tai häntä kallistetaan eteenpäin.

## Nostaminen sänkyyn

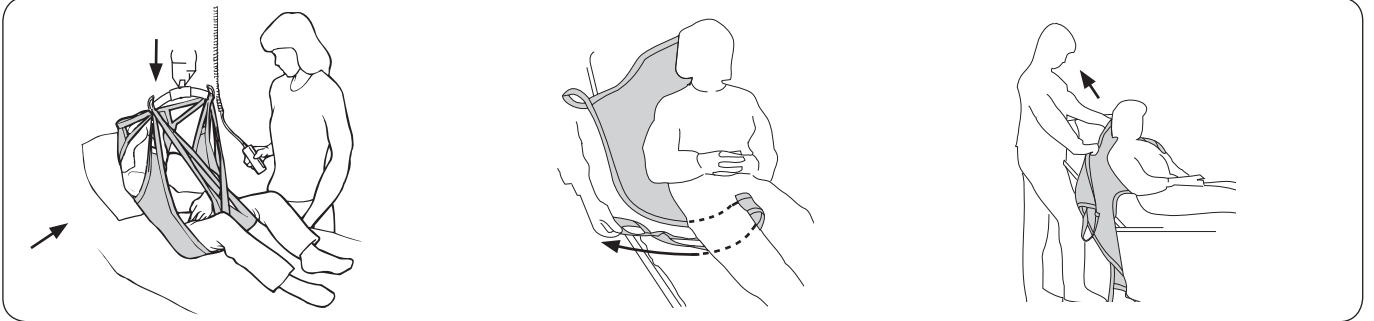Ota huomioon oma työasentosi ja avustettavan mukavuus. Käytä sängyn nosto- ja laskutoimintoja.

**⚠ Jos vuoteen pään puoleista osaa ei ole mahdollista nostaa tai laskea, ole varovainen laskun loppuvaiheissa, jotta avustettavan niska ei pääse taittumaan. Silloin avustajan on tuettava avustettavan päätä käsivarisesti.**

### Nostokankaan poistaminen istuma-asennossa sängyssä




Aseta avustettava sängyn yläpuolelle. Korota sänkyä pään puolelta. Laske avustettava sängylle.

Poista jalkatuet vetämällä jalkatukien lenkit jalkatuen kangasosan alta. **Vinkki:** tämä on helpompaa, jos avustettavan jalat ovat koukussa.


Poista nostokangas vetämällä varovasti ylöspäin.

### Nostokankaan poistaminen makuuasennossa sängyssä

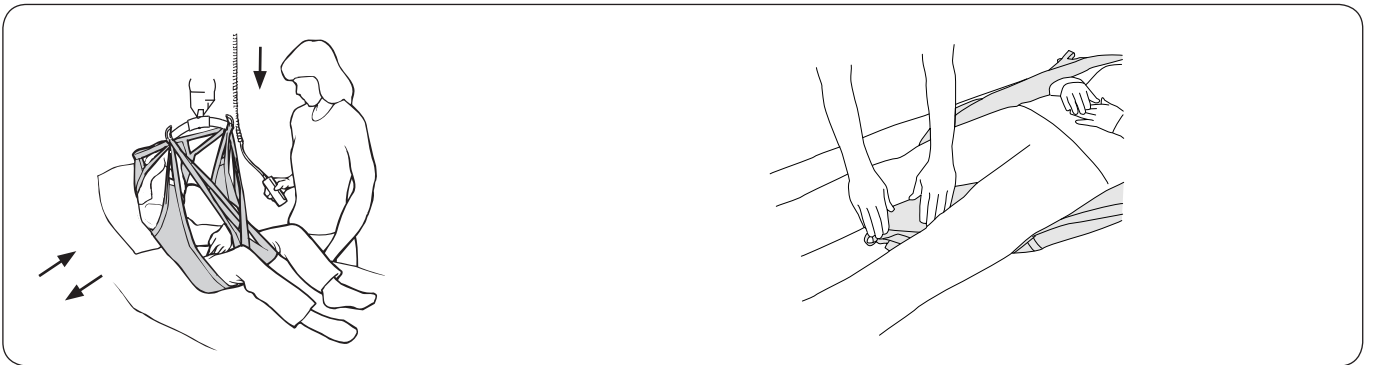

Aseta avustettava sängyn yläpuolelle. Korota sänkyä pään puolelta. Laske avustettava sängylle. Laske sänkyä pään puolelta.

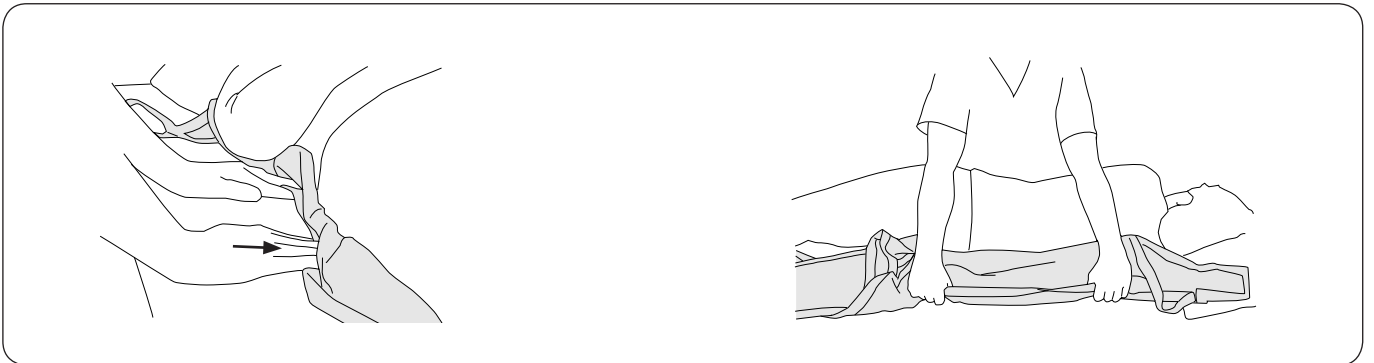Aseta jalkatukien lenkit jalkatukien alle avustettavan jalkojen väliin.



Ota kiinni nostokankaan reunasta. Työnnä nostokankaan reuna kankaan alle. Paina nostokangasta patjaa vasten ja avustettavan alle.


Käännä avustettava varovasti kyljelleen. Ota nostokankaasta kiinni alakautta ja vedä se varovasti pois.

## Kiinnitysohje
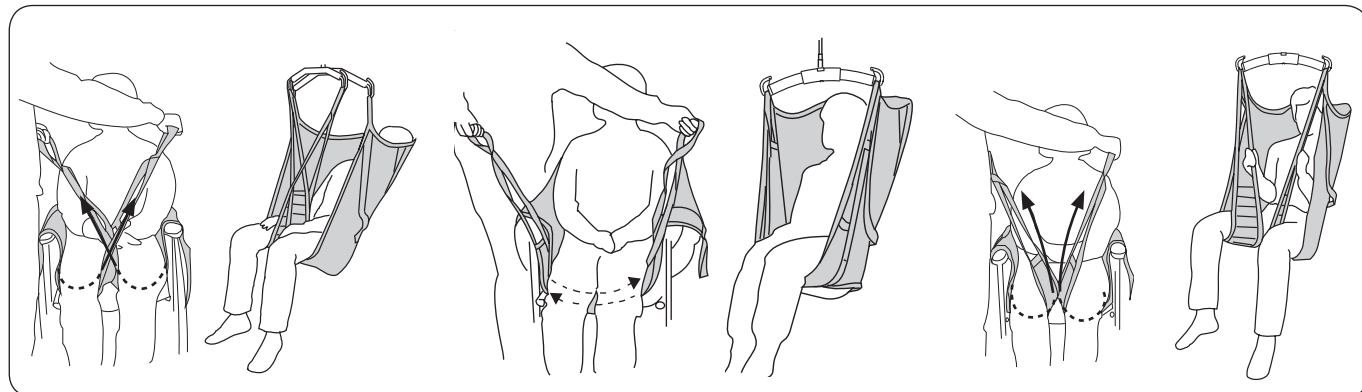
### Erilaisia tapoja jalkatukien kiinnittämiseen

Ennen kiinnitystavan valintaa on aina arvioitava mahdolliset riskit yksilökohtaisesti.

Seuraava ohje on yleisluonteinen, sillä samat periaatteet koskevat useita nostokangasmalleja.



#### Jalkatuet ristikkäin.

Yleisin tapa asetella nostokangas. Yksi jalkatuen lenkki pujotetaan toisen läpi ennen lenkkien kiinnittämistä nostokaareen.

#### Kietaisu kummankin reiden alta.

Tämä on mahdollista esimerkiksi nostettaessa avustettavaa, jonka jalat on amputoitu. **Vinkki:** liian takakenoinen istuma-asento vältetään kiinnittämällä jalkatukien lenkkeihin Extension Loop -jatkolenkit.

#### Kumpikin jalkatuki kiinnitettynä erikseen nostokaareen.

Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, jos avustettava on erityisen herkkä genitaalialueelta.

⚠ **Suurempi liukumisen riski.**


### Päätuen säätö

SilhouetteSling-nostokankaan päätuki voidaan säätää kahteen eri asentoon.

*Toimintatapa 1:* Ylemmän hihnalenkin ulompi lenkki kiinnitetään nostokaareen. Avustettavan pää on silloin hieman kallellaan.

*Toimintatapa 2:* Ylemmän hihnalenkin sisempi lenkki kiinnitetään nostokaareen. Avustettavan pää on silloin enemmän pystyasennossa.
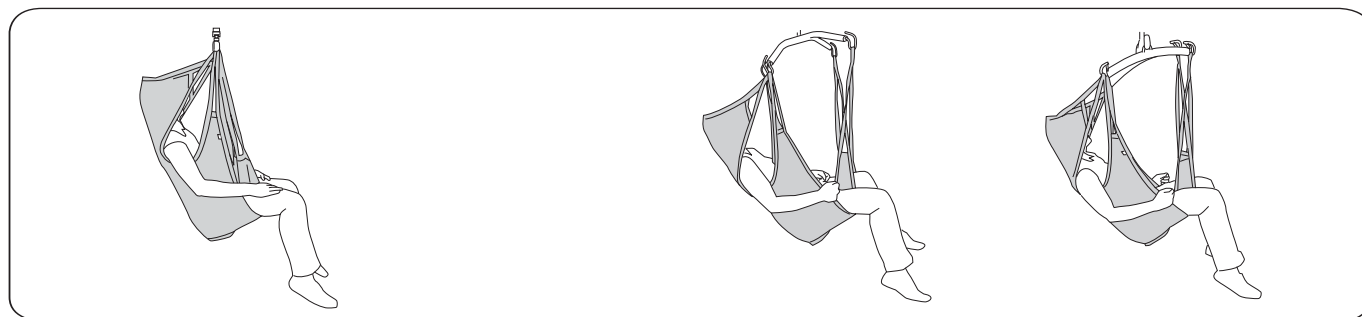
### Erilaisia istuma-asentoja nostokaaren valinnan mukaan




Kun SilhouetteSling-nostokangasta käytetään yhdessä **Liko Universal SlingBar 350/450-** tai **SlingGuard 450**-nostokaaren kanssa, istuma-asento on hieman makaavampi.

Kun SilhouetteSling-nostokangasta käytetään yhdessä **Liko Sling Cross-bar 450/670**-ristikkonostokaaren kanssa, istuma-asento on makaavampi.

Universal SlingBar 350/450 yhdessä **SideBars**-sivukaarien kanssa antaa saman verran kallistusta istuma-asentoon.

## Avustettava ei istu hyvin nostokankaassa – mistä se voisi johtua?

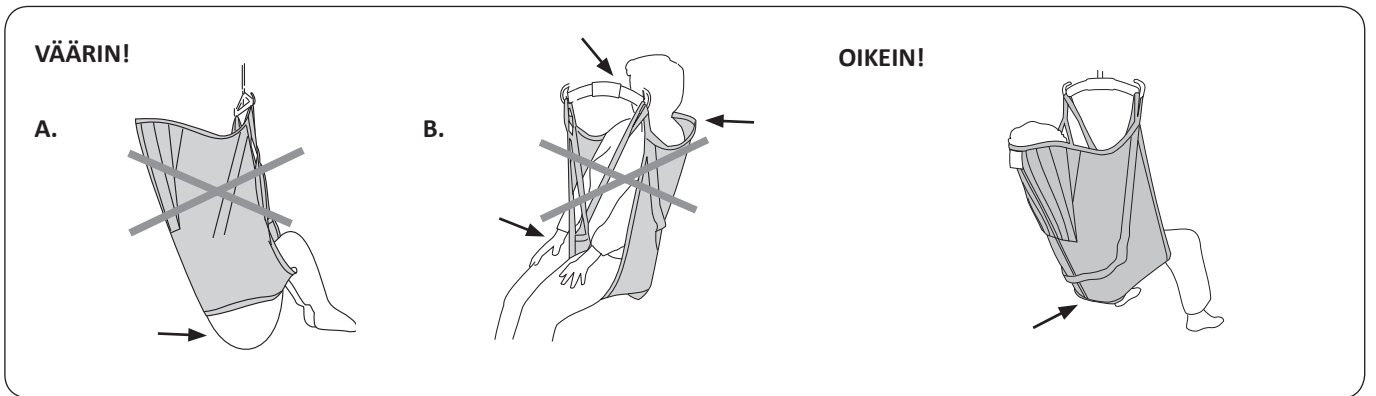Seuraava ohje on yleisluonteinen, sillä samat periaatteet koskevat useita nostokangasmalleja.



**A. Liukumisen riski.** Pakarat roikkuvat alhaalla. Nostokangas voi olla liian suuri. Syynä voi olla myös se, ettei nostokangasta ole vedetty riittävän alas avustettavan selkäpuolelta.

Tarkista ennen nostamista, että alareuna on suorassa ja kangas ulottuu kunnolla jalkojen ympäri.

**B. Liian pieni nostokangas** voi aiheuttaa sen, että jalkatuki hiertää haarojen välistä ja tuntuu epämukavalta, nostokaari jää kasvojen eteen ja/tai selän tuenta ei ole riittävä.

Nostokankaan alareuna on samalla tasolla häntäluun kanssa. Jalkatuet on asetettu oikein jalkojen alle.


### Lyhennysasento

Joissakin tapauksissa voi olla hyvä lyhentää jalkatukien lenkkejä, jotta avustettava saa tukevan asennon nostokankaassa. Lyhennysasentoa voidaan käyttää tilapäisesti oikean pituuden löytämiseksi, mutta pitkittynyt käyttö voi vahingoittaa saumakohtia. Jos haluat lyhentää jalkatukien lenkkejä, suosittelemme sen sijaan solmun tekemistä lenkkiin, mikä lyhentää sitä noin 10 cm. Tässä tapauksessa ulompi jalkatuen lenkki kiinnitetään nostokaareen.

## Lisävarusteet

Extension Loop, vihreä, 12 cm  
 Extension Loop, vihreä, 22 cm  
 Extension Loop, harmaa, 12 cm  
 Extension Loop, harmaa, 22 cm

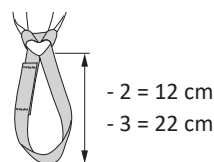Tuotenro 3691102  
 Tuotenro 3691103  
 Tuotenro 3691302  
 Tuotenro 3691303



## Yleiskuvaus Liko™ SilhouetteSling -nostokankaasta, malli 22

Tuote	Tuotenro	Koko		Avustettavan paino	Enimmäiskuormitus <sup>2</sup>
Liko SilhouetteSling	3522603	XS	Erittäin pieni	20–28 kg	200 kg
Liko SilhouetteSling	3522604	S	Pieni	25–50 kg	200 kg
Liko SilhouetteSling	3522605	M	Keskikokoinen	45–75 kg	200 kg
Liko SilhouetteSling	3522306	L	Suuri	65–100 kg	200 kg

<sup>1</sup>Ilmoitetut avustettavien painot ovat suuntaa antavia. Eroja voi esiintyä.

<sup>2</sup>Enimmäiskuormituksen edellytyksenä on, että nostin/lisävarusteet kestävät vähintään saman suuruisen kuormituksen.

**Materiaali:** SilhouetteSling-nostokankaasta on saatavilla verkkopolyesterista valmistettu malli.

### Suosittelut käyttöyhdistelmät

Suosittelut Liko SilhouetteSling -nostokankaan ja Likon nostokaarien yhdistelmät:	Mini 220	Nostokaari 350 <sup>4</sup>	Nostokaari 450 <sup>2</sup>	Nostokaari 600 <sup>5</sup>	Kaksoisnostokaari 670 <sup>3</sup>	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars- sivukaaret + Universal 450
SilhouetteSling, XS	1	1	2	4	3	1	3	1	1
SilhouetteSling, S	2	1	1	3	3	1	3	1	1
SilhouetteSling, M	2 <sup>1</sup>	1	1	3	2	1	2	1	1
SilhouetteSling, L	2 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	1	3	1	1	2	1 <sup>1</sup>	1

<sup>1</sup> Käsivarret ovat kankaan ulkopuolella

<sup>2</sup> Nostokaari 450 viittaa Universal SlingBar 450 -nostokaareen, tuotenumerot 3156075, 3156085 ja 3156095, SlingBar Standard 450 -nostokaareen. tuotenumerot 3156001, 3156003, 3156007 ja 3156016, ja SlingGuard 450 -suojukseen, tuotenumerot 3308020 ja 3308520.

<sup>3</sup> Twin bar 670 -kaksoisnostokaari viittaa Universal TwinBar 670 -nostokaareen (tuotenumerot 3156077 ja 3156087) ja SlingGuard 670 Twin -nostokaareen (tuotenumerot 3308040 ja 3308540).

<sup>4</sup> Nostokaari 350 viittaa Universal SlingBar 350 -nostokaareen (tuotenumerot 3156074, 3156084 ja 3156094).

<sup>5</sup> Nostokaari 600 viittaa Universal SlingBar 600 -nostokaareen (tuotenumerot 3156076 ja 3156086).

**Selitys:** 1 = Suositeltava, 2 = Mahdollinen, 3 = Ei suositeltava, 4 = Sopimaton

### Muut yhdistelmät

Muiden kuin Likon suosittelien lisävarusteiden tai tuotteiden yhdistelmäkäyttö voi vaarantaa avustettavan turvallisuuden.



www.hillrom.com

Liko AB  
 Nedre vägen 100  
 975 92 Luleå, Ruotsi  
 +46 (0)920 474 700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for  
 patients and their caregivers:

