

# Liko™ Sling Cross-bars




## Brugsanvisning


### Gælder for følgende modeller:

Sling Cross-bar 450  
Sling Cross-bar 450 med snapkobling  
Sling Cross-bar 670  
Sling Cross-bar 670 med snapkobling

Varenr. 3156021  
Varenr. 3156022  
Varenr. 3156018  
Varenr. 3156019

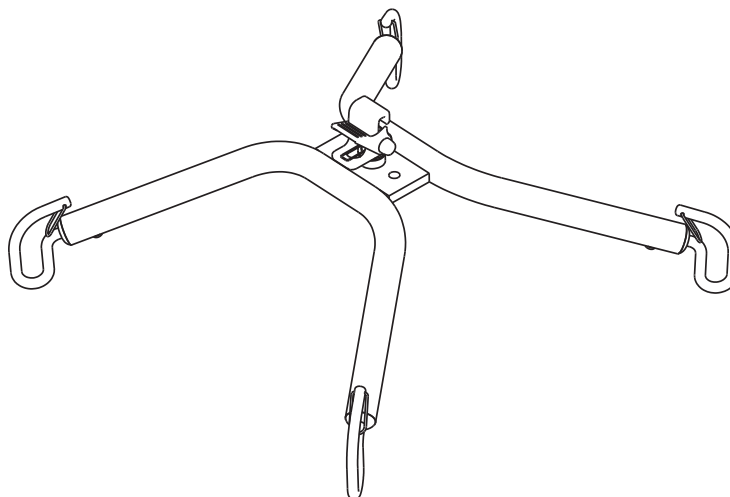

Sling Cross-bar 450

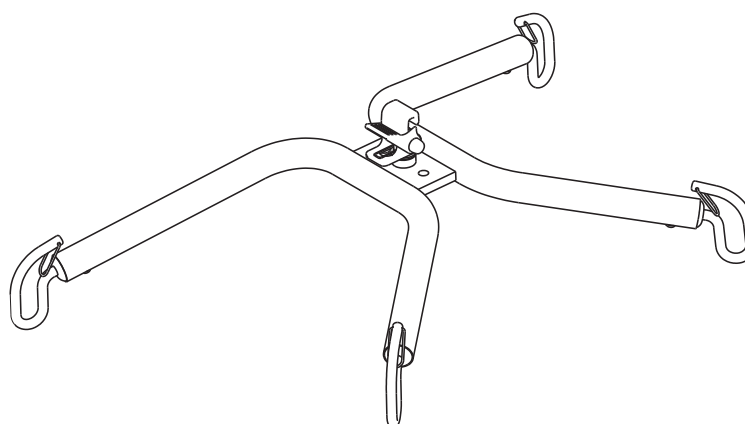

Sling Cross-bar 670

## Produktbeskrivelse












Liko Sling Cross-bars fås i to modeller med to versioner af hver, som alle har fire løftebøjlekroge, som sejlet kan fastgøres til, hvilket giver en afslappende, bagudrettet liftposition. Sling Cross-bar er enten permanent fastgjort til liften eller monteret vha. en snapkobling. Liko snapkoblingssystem kan leveres færdigmonteret på alle krydsbøjlemodeller.

### VIGTIGT!

Løft og forflytning af en bruger medfører altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til liften og løftetilbehøret før brug. Det er vigtigt at have læst og forstået indholdet i brugsanvisningen. Udstyret må kun bruges af uddannet personale. Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes. Udvis forsigtighed og omsorg ved brug. Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed. Du skal være velinformeret om brugerens evne til at klare løftesituationen. Kontakt fabrikanten eller leverandøren i tilfælde af tvivl eller spørgsmål.

# Symbolbeskrivelse

Disse symboler findes i dette dokument og/eller på produktet.

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Denne situation kræver ekstra omhu og opmærksomhed.
	CE-mærke
	Juridisk fabrikant.
	Læs brugsanvisningen før brug.
	Produktionsdato.
	<b>Forsigtig!</b> Se brugsanvisningen.
	Læs brugsanvisningen før brug.
	Produktidentifikation.
	Serienummer.
	Medicinsk udstyr.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) AAMMDD (21) 012345678910</small>	GS1 datamatrixstregkode, der kan indeholde følgende oplysninger. (01) Globalt handelsvarenummer (11) Produktionsdato (21) Serienummer

## Sikkerhedsanvisninger





Forskellige maksimale belastninger kan gælde for forskellige produkter på et samlet liftsystem: lift, løftebøjle, sejl og andet anvendt udstyr. For den samlede liftsystem er den maksimale belastning altid den laveste maksimale belastningsklassificering for de anvendte komponenter. For eksempel: Sling Cross-bars har en maks. belastning på 300 kg. I kombination med en Likorall™ loftlift, som har en maks. belastning på 200 kg, gælder den maksimale belastning på 200 kg for det samlede løftesystem.

Se mærkaterne på liften og løftetilbehøret eller kontakt din repræsentant for Hill-Rom, hvis du har spørgsmål.

Krydsbøjlen kan bruges i kombination med Liko sejl, der fastgøres til løftebøjlen ved hjælp af sejlets løkker. Krydsbøjlen kan bruges i kombination med Liko sejl beregnet til fire forbindelsespunkter på løftebøjlen.

Du finder yderligere vejledning til valg af sejl i brugsanvisningen til de respektive sejlmodeller. Der finder du også vejledning i at kombinere Liko™ løftebøjler med Liko sejl.

**Tips! Læs altid den brugsanvisning, der følger med Likos forskellige sejlmodeller, for korrekt og sikker brug af sejlet.**

-  **Inden brugeren løftes fra underlaget, men når sejlets bånd er strakt helt ud, skal det kontrolleres, at båndene er hægtet korrekt på løftebøjlen kroge.**
-  **Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle løftebøjlen kroge belastes ved løft!**
-  **Brug af andet løftetilbehør end det godkendte kan medføre en risiko.**
-  **Forkert fastgørelse af løftesejlet til løftebøjlen kan forårsage alvorlig skade på brugeren.**


**Maksimal belastning: 300 kg**

 Medicinsk udstyr klasse 1-produkt

# Montering

## Fast montering på lift

Passer til følgende løftebøjler: Sling Cross-bars 450 og 670 (varenr. 3156021 og 3156018)

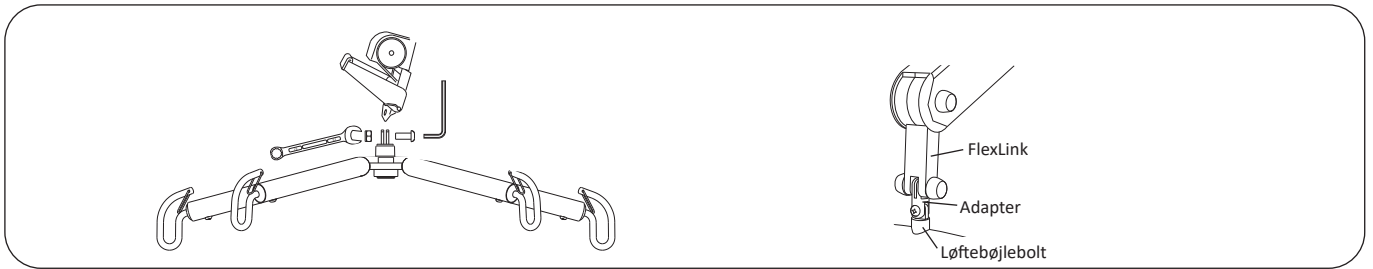

**Passer til:** Likorall™ 242 S/ES loftlift, Likorall™ 243 ES loftlift, Golvo™ mobillift, Uno™ 100/102 mobillift\* og Viking™ mobillift\*  
Ved fast montering skal du bruge den medfølgende M10 x 25 (special) bolt og M10 låsemøtrik til at fastgøre krydsbøjlen. Kontrollér, at bolten stikker 2 mm ud gennem møtrikken, og at løftebøjlebølten kan bevæge sig (tilpasningen fungerer som den skal).

\*Ved fast montering på mobillifte med FlexLink skal der altid monteres en adapter til den pågældende lift, se nedenfor.

### 8 mm-adapter, (varenr. 2016502)

Passer til: Uno til og med serienr. 31824. Se den gældende monteringsanvisning.

### 12 mm-adapter (varenr. 2016504)


Passer til: Uno til og med serienr. 31825.

og Viking™ mobillift-serien. Se den gældende monteringsanvisning.

### Fast sæt 4, (varenr. 3308860)


Passer til: Varenr. 3156018 og 3156021 i kombination med LikoGuard™ L, XL loftlift.

**BEMÆRK! Skal samles af personale, der er godkendt af Hill-Rom!**

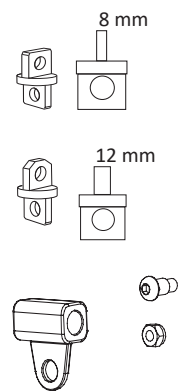


## Montering med snapkobling

Passer til følgende løftebøjler: Krydsbøjle 450 og 670 (varenr. 3156022 og 3156019)

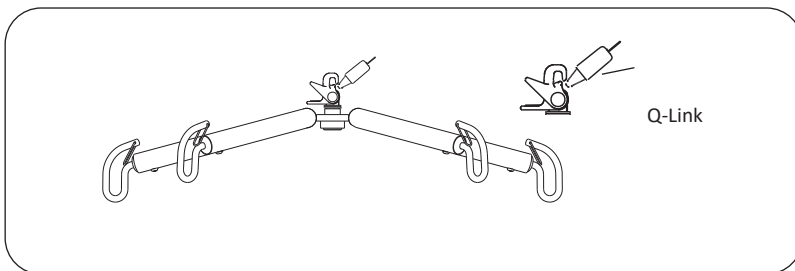


**Passer til:** Golvo™ mobillift\*, Likorall™ 242 S/ES R2R loftlift, Likorall™ 243 loftlift\*, Likorall™ 250 loftlift\* og Multirall™ loftlift. \*Hvis monteret med Q-link (varenr. 31590005). Se den gældende monteringsanvisning.

## Montering af afkrogningsbeskyttelse

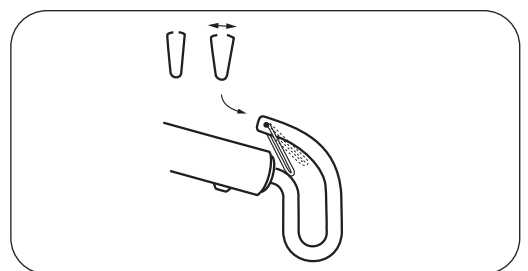

Kontrollér efter montering, at afkrogningsbeskyttelsen låser og bevæger sig frit i løftebøjlels krog.

## Sådan hænges et løftesejl op i krydsbøjler

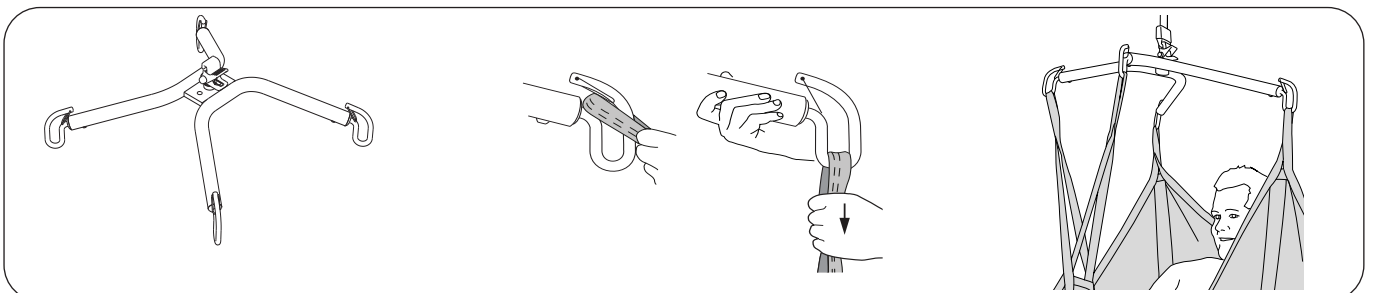

**BEMÆRK!** Den bredeste del af krydsbøjlen skal bruges til løftesejlets øverste båndløgker, og den smalleste del af krydsbøjlen skal bruges til benstøttens båndløgker.

## Eftersyn og vedligeholdelse

For problemfri brug bør visse detaljer kontrolleres før hver brug.

- Kontrollér krydsbøjleens bolt og låsemøtrik
- Kontrollér, at afkrogningsbeskyttelsen er monteret, intakt og fungerer korrekt. Manglende eller beskadiget afkrogningsbeskyttelse skal altid udskiftes med nye
- Ved brug af snapkoblingssystemet, skal du kontrollere, at snapkoblingen er korrekt fastgjort til liften og krydsbøjlen
- Kontrollér inden løft, at løftetilbehøret hænger lodret og kan bevæge sig frit.

Rengør om nødvendigt produktet med en fugtig klud. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om rengøring og desinfektion af dit Liko produkt i kapitlet *Rengøring og desinfektion* for den anvendte lift. **BEMÆRK! Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder fenol eller klor, da disse kan beskadige aluminium og plast.**

**⚠ Produktet må ikke udsættes for rindende vand.**

### Service

Der bør udføres et periodisk eftersyn af Sling Cross-Bars mindst en gang om året.

**⚠ Periodisk eftersyn, reparation og vedligeholdelse må kun udføres i henhold til Likos servicevejledning og af personale, der er autoriseret af Hill-Rom, og der må kun anvendes originale Liko reservedele.**

### Forventet levetid

Produktet har en forventet levetid på 10 år, når det håndteres korrekt og vedligeholdes og efterses periodisk i overensstemmelse med Likos anvisninger.

### Anvisninger for genanvendelse

Produktet skal genanvendes som metalkrot.

Hill-Rom evaluerer og giver vejledning til sine brugere om sikker håndtering og bortskaffelse af sit udstyr for at hjælpe med at forebygge skader, herunder bl.a. snitsår, punkteringer af hud og hudafskrabninger, og om eventuel nødvendig rengøring og desinfektion af det medicinske udstyr efter brug og før bortskaffelse. Kunderne skal overholde alle nationale, regionale og/eller lokale love og bestemmelser, som vedrører sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr og tilbehør.

I tvivlsspørgsmål skal brugeren af enheden først kontakte Hill-Roms tekniske support for at få vejledning angående protokoller for sikker bortskaffelse.

### Produktændringer

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til at foretage produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt din repræsentant fra Hill-Rom for rådgivning og information om produktopgraderinger.

### Design and Quality by Liko in Sweden

Administrationssystemet for både produktion og udvikling af produktet er certificeret i henhold til ISO9001 og dens pendant for medicinske anordninger, ISO13485. Administrationssystemet er endvidere certificeret i henhold til miljøstandard ISO14001.

### Meddelelse til brugere og/eller patienter i EU

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente myndighed i brugerens og/eller patientens medlemsstat.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sverige  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**