

Liko™ Sling Cross-bars




Gebruiksaanwijzing


Voor de volgende modellen:

Sling Cross-bar 450
Sling Cross-bar 450 met Quick-release Hook
Sling Cross-bar 670
Sling Cross-bar 670 met Quick-release Hook

productnr. 3156021
productnr. 3156022
productnr. 3156018
productnr. 3156019

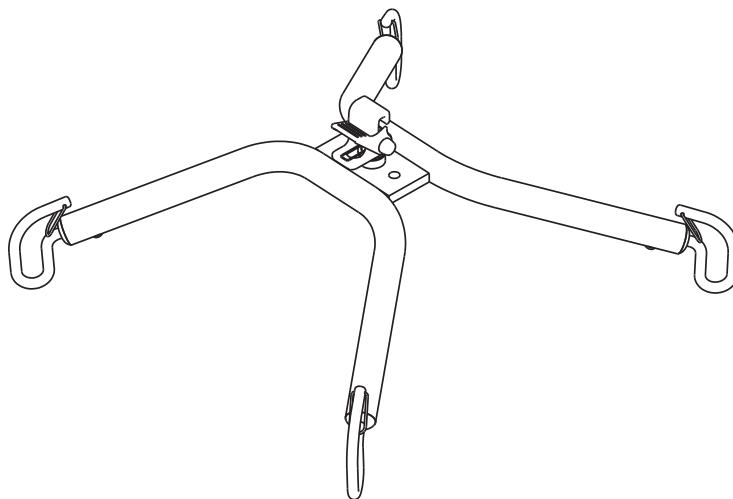

Sling Cross-bar 450

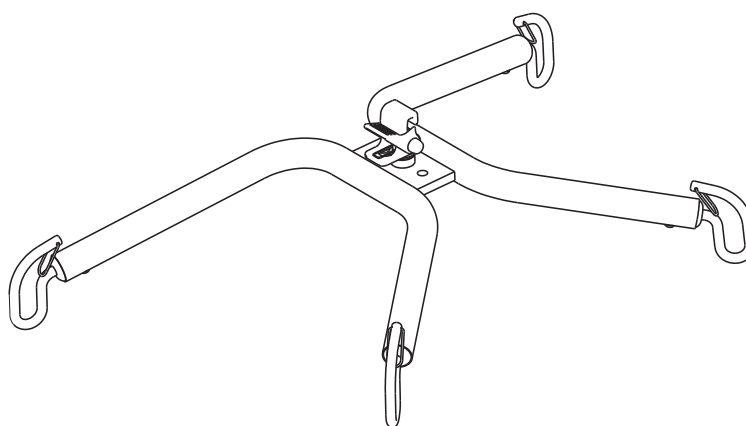

Sling Cross-bar 670

Productbeschrijving

De Sling Cross-bars van Liko zijn verkrijgbaar in twee modellen met elk twee versies, die allemaal zijn voorzien van vier tiljuhaken om de tilband aan te bevestigen voor een ontspannen achteroverleunende tilpositie. De Sling Cross-bar is permanent aan de lift bevestigd of is aangebracht met behulp van een Quick-release Hook. Het Quick-release Hook-systeem van Liko kan vooraf worden bevestigd op alle modellen van de Sling Cross-bar.














BELANGRIJK!

Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen voor zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn voor de lift die u wilt gebruiken. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. U moet weten of de patiënt het tillen aankan. Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Symboolbeschrijving

Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing: deze situatie vereist extra zorg en aandacht.
	CE-markering
	Juridisch fabrikant.
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing.
	Productiedatum.
	Let op! Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing.
	Productidentificatie.
	Serienummer.
	Medisch hulpmiddel.
	GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten. (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer

Veiligheidsinstructies





De maximale belasting kan verschillen afhankelijk van de producten die op het liftstelsel zijn gemonteerd, zoals de lift, het tiljuk, tilband en andere accessoires. Voor het gemonteerde liftstelsel is de maximale belasting altijd gelijk aan de laagste maximale belasting van iedere afzonderlijke component. Bijvoorbeeld: Sling Cross-bars hebben een maximale belasting van 300 kg. In combinatie met een Likorall™-plafondlift met een maximale belasting van 200 kg. De maximale belasting van 200 kg geldt ook voor het gemonteerde tilstelsel.

Zie hiervoor de markeringen op de lift en de tilaccessoires of neem bij vragen contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom.


De CrossBar kan worden gebruikt in combinatie met Liko-tilbanden die met behulp van tiljukklussen aan het tiljuk worden bevestigd. De CrossBar kan worden gebruikt in combinatie met Liko-tilbanden die bedoeld zijn voor vier aansluitpunten op het tiljuk.

Voor extra aanwijzingen voor het kiezen van een tilband leest u de gebruiksaanwijzing voor het betreffende tilbandmodel. Daar vindt u ook aanwijzingen voor het combineren van Liko™-tiljukken met Liko-tilbanden.

Opmerking! Lees voor het correcte en veilige gebruik van de verschillende tilbanden van Liko altijd de erbij geleverde gebruikershandleiding.

-  Controleer voordat de patiënt daadwerkelijk getild wordt maar terwijl de tilbanden volledig gestrekt zijn, of de banden correct aan de haken van het tiljuk zijn bevestigd.
-  Om veiligheidsredenen moeten alle tiljukhaken bij het tillen samen het gewicht dragen!
-  Het gebruik van andere dan goedgekeurde tilaccessoires kan gevaarlijk zijn.
-  Een onjuiste bevestiging van de tilband aan het tiljuk kan ernstig letsel bij de patiënt veroorzaken.


Maximale belasting: 300 kg

 Medisch hulpmiddel productklasse I

Montage

Vaste montage aan de lift

Is van toepassing op de volgende tiljucken: Sling Cross-bars 450 en 670 (productnr. 3156021 en 3156018)

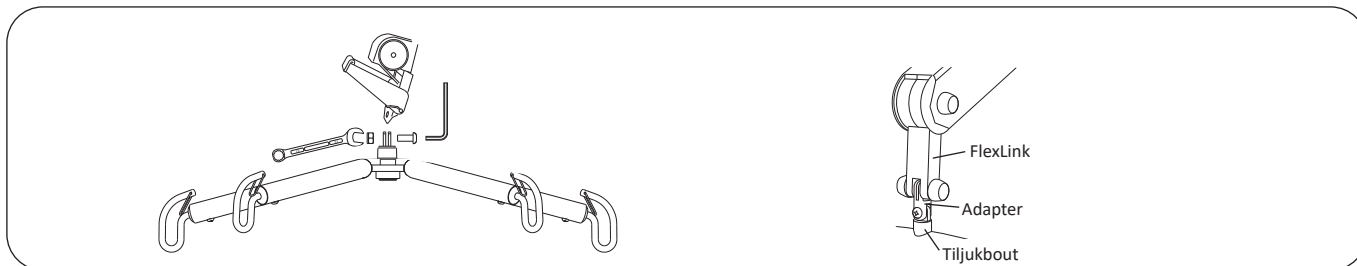

Is van toepassing op: Likorall™ 242 S/ES plafondlift, Likorall™ 243 ES plafondlift, Golvo™ mobiele lift, Uno™ 100/102 mobiele lift* en Viking™ mobiele lift*

Gebruik voor een vaste montage de meegeleverde M10 x 25 (speciale) bout en M10 borgmoer om de Sling Cross-bar te bevestigen. Controleer of de bout 2 mm door de moer steekt en of de bout van het tiljuk kan bewegen (aanpassing werkt naar behoren).

*Voor de vaste montage aan mobiele liften met FlexLink moet er altijd een adapter voor de betreffende lift worden gemonteerd, zie hieronder.


Adapter 8 mm, (productnr. 2016502)

Is van toepassing op: Uno tot en met serienummer 31824. Zie betreffende montage-instructies.



Adapter 12 mm, (productnr. 2016504)


Is van toepassing op: Uno tot en met serienummer 31825. en de Viking™ mobiele lift-serie. Zie betreffende montage-instructies.

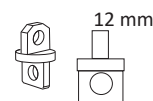

Vaste kit 4, (productnr. 3308860)


geschikt voor: productnr. 3156018 en 3156021 in combinatie met LikoGuard™ L, XL plafondlift.

OPMERKING! Moet worden samengesteld door door Hill-Rom geautoriseerd personeel!

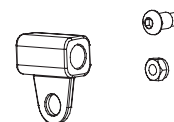


Montage met snelkoppeling

Is van toepassing op de volgende tiljucken: Sling Cross-bar 450 en 670 (productnr. 3156022 en 3156019)

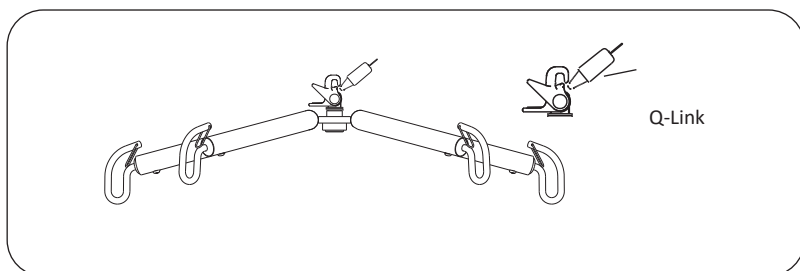


Is van toepassing op: Golvo™ mobiele lift*, Likorall™ 242 S/ES R2R plafondlift, Likorall™ 243 ES plafondlift*, Likorall™ 250 ES plafondlift* en Multirall™ plafondlift. *Indien voorzien van Q-Link (productnr. 31590005). Zie betreffende montage-instructies.

Aanbrengen van clips

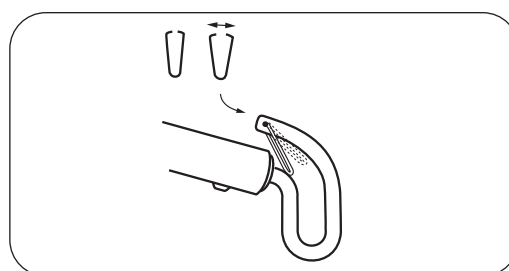

Controleer na het aanbrengen of de clips vergrendeld zijn en vrij in de tiljukhaak kunnen bewegen.

Instructies voor het bevestigen van een tilband de Sling Cross-bars

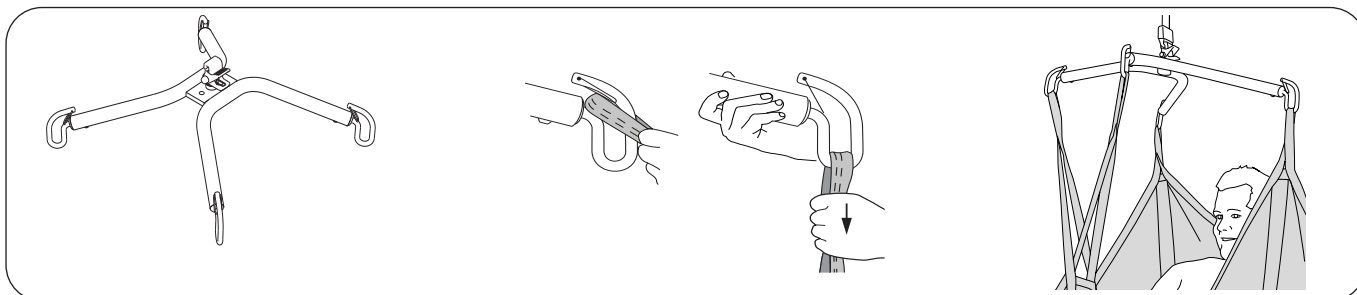

OPMERKING! Het bredere gedeelte van de Cross-bar is bedoeld voor gebruik met de bovenste bandlussen van de tilband en het smallere gedeelte van het tiljuk is bedoeld voor de bandlussen van de beensteun.

Verzorging en onderhoud

Voor probleemloos gebruik moeten voor elk gebruik bepaalde details worden gecontroleerd.

- Controleer de bout en borgmoer van de Sling Cross-bar.
- Controleer of de clips op hun plaats zitten, intact zijn en goed werken; ontbrekende of beschadigde clips moeten altijd door nieuwe worden vervangen.
- Controleer bij het gebruik van het snelkoppelingsysteem of de Quick-release Hook correct aan de lift en de Sling Cross-bar is bevestigd.
- Controleer vóór het tillen of het tilaccessoire verticaal hangt en vrij kan bewegen.

Reinig het product zo nodig met een vochtige doek. Uitgebreide informatie over het reinigen en desinfecteren van uw Liko-product vindt u in het hoofdstuk *Reiniging en desinfectie* van de betreffende lift. **OPMERKING! Gebruik geen reinigingsmiddelen die fenol of chloor bevatten omdat deze aluminium en kunststoffen kunnen beschadigen.**

⚠ Het product mag niet worden blootgesteld aan stromend water.

Service

Ten minste één maal per jaar moet een periodieke inspectie van de Sling Cross-Bars worden uitgevoerd.

⚠ De periodieke inspectie, reparaties en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd conform de Liko onderhoudshandleiding, door Hill-Rom geautoriseerd personeel en met gebruikmaking van originele Liko reserveonderdelen.

Verwachte levensduur

Bij correcte behandeling, onderhoud en periodieke inspecties conform de instructies van Liko heeft het product een verwachte levensduur van 10 jaar.

Recyclinginstructies

Het product moet worden gerecycled als metaal.

Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan het afvoeren. Klanten moeten zich houden aan alle federale, landelijke, regionale en/of lokale wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.

In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hill-Rom voor advies over protocollen voor het veilig afvoeren.

Productwijzigingen

De producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en informatie over productverbeteringen.

Design and Quality by Liko in Sweden


Het Hill-Rom Management-systeem voor zowel de productie en ontwikkeling van het product is gecertificeerd volgens ISO 9001 en het equivalent voor producenten van medische hulpmiddelen, ISO 13485. Het managementsysteem is ook gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.



www.hillrom.com

 Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Zweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom