


Bruksanvisning


Gjelder følgende modeller:

Kryssbøyle 450
Kryssbøyle 450 med hurtigkobling
Kryssbøyle 670
Kryssbøyle 670 med hurtigkobling

artikkelnr. 3156021
artikkelnr. 3156022
artikkelnr. 3156018
artikkelnr. 3156019

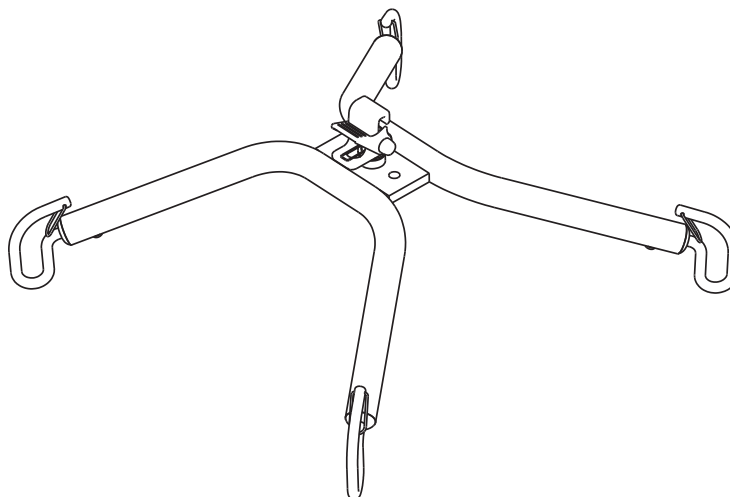

Kryssbøyle 450

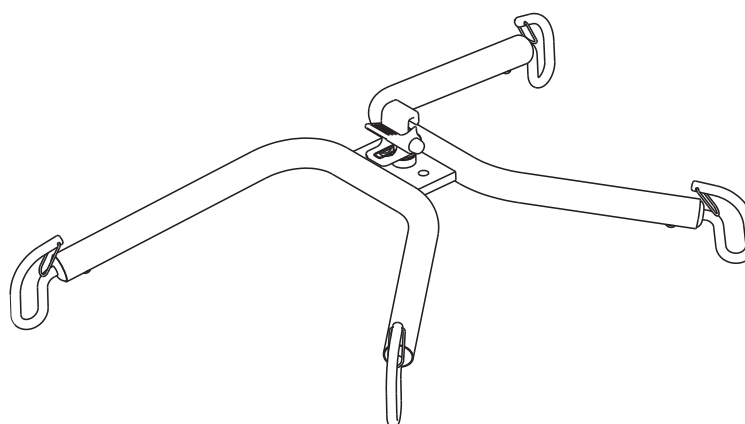

Kryssbøyle 670

Produktbeskrivelse












Kryssbøyler fra Liko er tilgjengelige i to modeller med to versjoner av hver, og alle har fire kroker til løftebøylen som festes på løfteseilet, noe som gir en avslappende stilling for bakoverlente løfteposisjoner. Kryssbøylen er enten festet permanent på løfteren eller montert ved hjelp av en hurtigkobling. Hurtigkoblingsystemet fra Liko kan leveres forhåndsmontert på alle modeller av kryssbøylen.

VIKTIG!

Løfting og overføring av en bruker innebærer alltid et visst risikonivå. Les bruksanvisningen for både brukerløfteren og løftertilbehøret før bruk. Det er viktig å forstå innholdet i bruksanvisningen fullt ut. Utstyret skal bare brukes av kvalifisert personell. Kontroller at løftertilbehøret er egnet for løfteren som brukes. Vær varsom og forsiktig under bruk. Som en medhjelper er du alltid ansvarlig for brukerens sikkerhet. Du må være oppmerksom på pasientens evne til å klare seg gjennom løftesituasjonen. Hvis noe er uklart, tar du kontakt med produsenten eller leverandøren.

Symbolbeskrivelse

Disse symbolene finnes i dette dokumentet eller på produktet.

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Denne situasjonen krever ekstra omsorg og oppmerksomhet.
	CE-merke
	Rettslig produsent.
	Les bruksanvisningen før bruk.
	Produksjonsdato.
	Forsiktig! se bruksanvisningen.
	Les bruksanvisningen før bruk.
	Produkt-ID.
	Serienummer.
	Medisinsk utstyr.
	GS1 Data Matrix-strekkode som kan inneholde følgende informasjon. (01) Global Trade Item Number (11) Produksjonsdato (21) Serienummer

Sikkerhetsforskrifter





Ulike makslaster kan gjelde for ulike produkter på det monterte løftesystemet: løfter, løftebøyle, løfteseil og eventuelt annet tilbehør som brukes. For det samlede løftesystemet er makslasten alltid den laveste makslasten for de enkelte komponentene. For eksempel: Kryssbøylere har en last på maks. 300 kg (660 pund). I kombinasjon med en Likorall™ takmontert løfter, som har en maksimal belastning på 200 kg (440 pund), gjelder den maksimale belastningen på 200 kg (440 pund) for det monterte løftesystemet.

Sjekk markeringene på løfteren og løftetilbehøret, eller ta kontakt med Hill-Rom representanten hvis du har spørsmål.

CrossBar kan brukes sammen med løfteseil fra Liko, som festes til løftebøylene ved bruk av løfteseilløkker. CrossBar kan brukes sammen med løfteseil fra Liko, som er beregnet på fire tilkoblingspunkter på løftebøylene.

Se bruksanvisningen for de respektive løftestroppmodeller for ytterligere veiledning i valg av stropp. Der vil du også finne veiledning for å kombinere Liko™-løftebøylere med Liko-løfteseil.

OBS! Les alltid bruksanvisningen som følger med de forskjellige løftebøylemodellene fra Liko, for riktig og sikker bruk av løfteseilet.

-  Før brukeren løftes fra underlaget, men når stroppene på løfteseilet er strukket helt ut, må du kontrollere at stroppene er hektet på løftebøylekrokene på riktig måte.
-  Av sikkerhetsgrunner må alle kroker på løftebøylene bære lasten sammen ved løfting!
-  Bruk av annet løftetilbehør enn det som er godkjent, kan innebære en risiko.
-  Feil feste av løfteseilet til løftebøylene kan føre til alvorlig skade på brukeren.


Makslast: 300 kg (660 pund)

 Produkt i medisinsk utstyrklasse I

Montering

Fast montering for løfting

Gjelder for følgende løftebøyer: Kryssbøyle 450 og 670 (artikkelnr. 3156021 og 3156018)

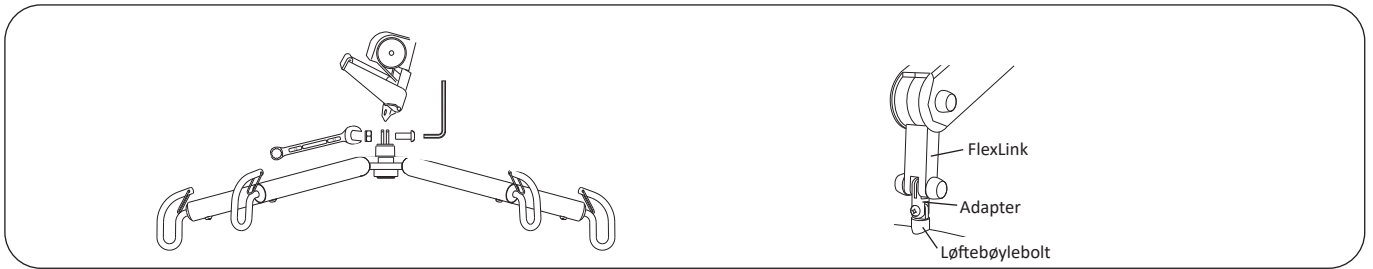


Gjelder for: Likorall™ 242 S/ES takmontert løfter, Likorall™ 243 ES takmontert løfter, Golvo™ mobil løfter, Uno™ 100/102 mobil løfter* og Viking™ mobil løfter*

For fast montering, bruk den medfølgende M10 x 25-bolten (spesial) og M10-låsemutteren til å feste kryssbøylene. Kontroller at bolten stikker 2 mm gjennom mutteren, og at bolten på løftebøylene kan bevege seg (at tilpasningen fungerer som den skal).

*For fast montering til mobile løftere med FlexLink må det alltid monteres en adapter for den aktuelle løfteren, se nedenfor.

Adapter 8 mm, (artikkelnr. 2016502)


Gjelder for: Uno opptil og inkl. serienummer 31824. Se gjeldende instruksjoner for montering.

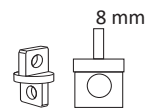

Adapter 12 mm, (artikkelnr. 2016504)

Gjelder for: Uno opptil og inkl. serienummer 31825.


og Viking™-serien med mobile løftere. Se gjeldende instruksjoner for montering.

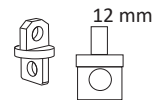

Fast sett 4, (artikkelnr. 3308860)


Passer til: artikkelnr. 3156018 og 3156021 i kombinasjon med LikoGuard™ L, XL takmontert løfter.

MERK! Skal monteres av personell som er godkjent av Hill-Rom!

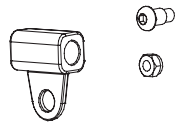


Montering med hurtigkobling

Gjelder for følgende løftebøyer: Kryssbøyle 450 og 670 (artikkelnr. 3156022 og 3156019)

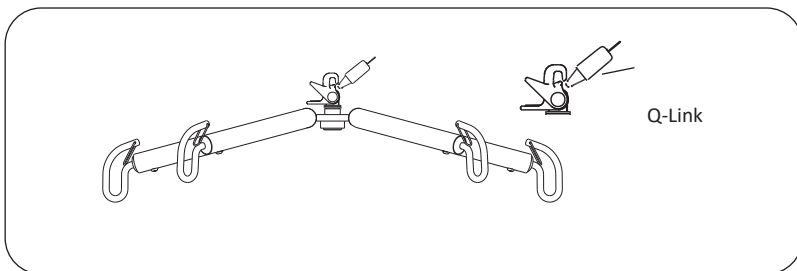


Gjelder for: Golvo™ mobil løfter*, Likorall™ 242 S/ES R2R takmontert løfter, Likorall™ 243 takmontert løfter*, Likorall™ 250 takmontert løfter* og Multirall™ takmontert løfter. *Hvis utstyrt med Q-link (artikkelnr. 31590005). Se gjeldende instruksjoner for montering.

Montering av avkrokningsbeskyttelse

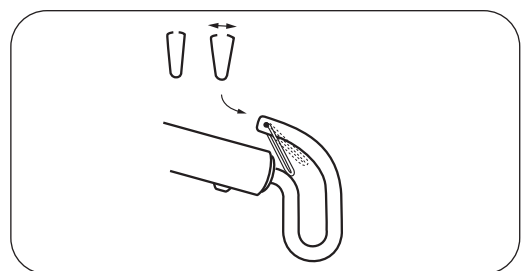

Etter installasjon må du kontrollere at låsene låser seg og beveger seg fritt løftebøylekroken.

Slik festes et løfteseil på kryssbøyer

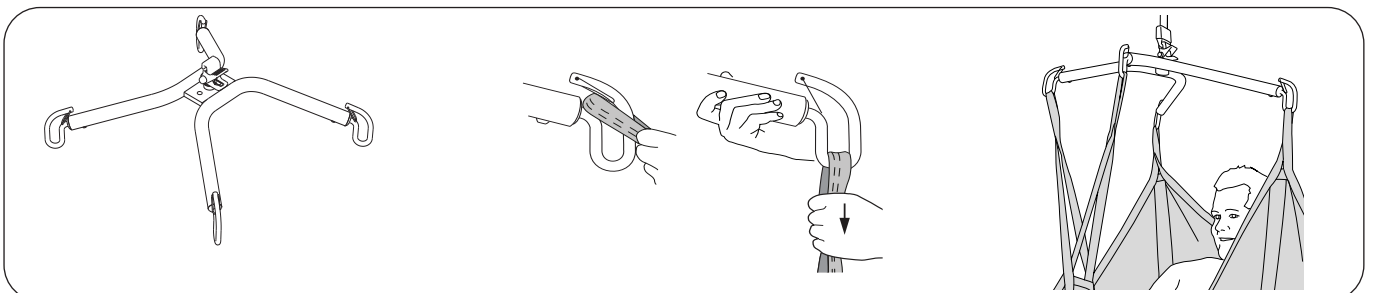

MERK! Den bredere delen på Cross-Bar er beregnet til bruk sammen med løfteseilets øvre båndløkker, og den smalere delen på Cross-Bar kan brukes til benstøtteløkkene.

Tilsyn og vedlikehold

For problemfri bruk skal visse detaljer kontrolleres før hver bruk.

- Kontroller bolten og låsemutteren på kryssbøylen
- Kontroller at avkrokningsbeskyttelsen er på plass, at den er intakt og fungerer som den skal. Manglende eller skadd avkrokningsbeskyttelse må alltid skiftes ut
- Når du bruker hurtigkoblingssystemet, må du kontrollere at hurtigkoblingen er festet riktig til løfteren og kryssbøylen
- Før løfting må du sjekke at løftetilbehøret henger vertikalt og kan bevege seg fritt

Rengjør produktet med en fuktig klut ved behov. Finn mer detaljert informasjon om rengjøring og desinfisering av Liko-produktet ditt i kapitlet; «Rengjøring og desinfisering» til løfteren som brukes. **MERK! Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder fenol eller klor, da disse kan skade aluminium- og plastmaterialene.**

⚠ Produktet bør ikke utsettes for rennende vann.

Service

En periodisk inspeksjon av kryssbøyler bør utføres minst én gang i året.

⚠ Periodisk inspeksjon, reparasjon og vedlikehold skal utføres i samsvar med Liko-servicehåndboken og av personell som er autorisert av Hill-Rom, og originale Liko-reservedeler skal brukes.

Forventet holdbarhet

Produktet har en forventet levetid på 10 år ved riktig bruk, vedlikehold og jevnlig kontroll i henhold til Likos instruksjoner.

Bruksanvisning for resirkulering

Produktet skal resirkuleres som metallavfall.

Hill-Rom vurderer og gir veiledning til sine brukere om sikker håndtering og avhending av utstyret sitt for å bidra til å forebygge skader, herunder kutt, skrubbsår og perforering av huden, samt eventuell nødvendig rengjøring og desinfisering av det medisinske utstyret etter bruk og før avhending. Kunder skal følge alle føderale, delstatlige, regionale eller lokale lover og forskrifter som gjelder for sikker avhending av medisinsk utstyr og tilbehør.

Hvis du er i tvil, må brukeren av utstyret først ta kontakt med Hill-Rom teknisk støtte for veiledning angående protokoller for sikker avhending.

Produktendringer

Siden Likos produkter er under kontinuerlig utvikling, forbeholder vi oss retten til å gjøre produktendringer uten forutgående varsel. Kontakt Hill-Rom-representanten din hvis du vil ha råd og informasjon om produktoppgraderinger.

Design and Quality by Liko in Sweden


Styringssystemet for både produksjon og utvikling av produktet er sertifisert i henhold til ISO9001 og den tilsvarende standarden for industrien for medisinsk utstyr, ISO13485. Styringssystemet er også sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO14001.

Merknad til brukere og/eller pasienter i EU

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med utstyret, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren er basert.



www.hillrom.com

 Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sverige
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom