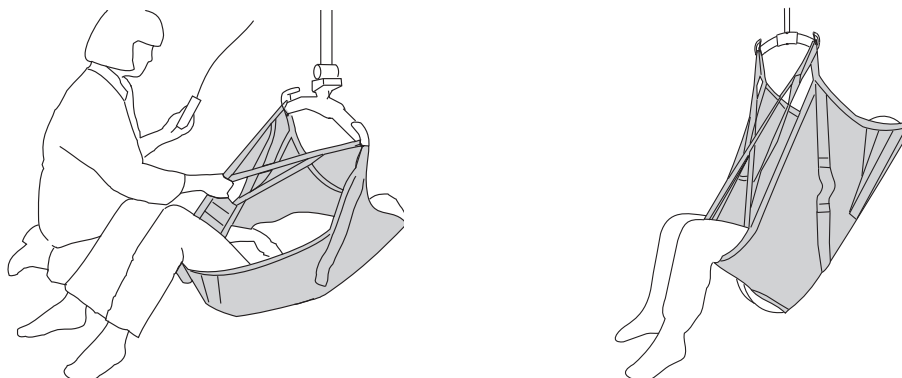


## Brugsanvisning



## Produktbeskrivelse

**Liko Soft Original HighBack Sling er en standardmodel, som er konstrueret til at tilpasse sig til brugeren uden individuelle indstillinger, og som er ét af vores mest anvendte løftesejl.**

Det giver en let, halvt tilbagelænet siddestilling og fremragende støtte til hele kroppen, hvilket er godt for brugere med reduceret stabilitet af hoved og overkrop. Et korrekt tilpasset og nøje påsat løftesejl giver brugeren en utrolig god følelse af sikkerhed og høj komfort.

Soft Original HighBack Sling kan bruges i alle almindelige løftesituationer. Den bløde, forstærkede hovedstøtte giver ekstra behagelig støtte til hovedet i både siddende stilling og rygleje.

### Stoffer

Soft Original HighBack Sling fås i polyester. Polyester er meget slidstærkt og har lav friktion, hvilket betyder, at løftesejlet er nemt at påsætte og fjerne.

For dem, der ønsker et tilsvarende løftesejl, men i et andet materiale, anbefales det at bruge Original HighBack Sling, model 200/210. Original HighBack Sling fås i netpolyester, hvilket anbefales, hvis løftesejlet efterlades i stolen efter flytningen. Til bad og brusebad findes en model i plastbehandlet netdesign, hvor vandet kan trænge igennem, og som nemt kan tørres af. Dette materiale tørrer

hurtigt og føles ikke koldt på samme måde, som fugtigt vandsugende stof gør.

Løftesejlets løftebånd er altid fremstillet af slidstærkt polyester og giver en optimal sikkerhed.

### Størrelser

Soft Original HighBack Sling fås i forskellige størrelser. Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse for at opnå en optimal komfort og sikkerhed. Et for stort løftesejl øger risikoen for udlidning, hvorimod et for lille løftesejl kan blive for stramt i skridtet og give ubehag.

Til større størrelser kan en kombination med en dobbeltbøjle 670 være et godt valg.

### Benstøtter

Soft Original HighBack Sling har benstøtter med forstærkede indlæg, som giver en høj grad af komfort, fordeler trykket og forhindrer løftesejlet i at krølle under lårene.

### Egnede lifte

Soft Original HighBack Sling kan bruges sammen med alle faste lifte og mobilifte fra Liko. Vælg mellem loftliftene LikoGuard™, Likorall™ og Multirall™ eller mobiliftene Golvo™, Viking™, Uno™ og Liko™ M220/M230.

*I dette dokument henvises der til den person, der skal løftes, som brugeren, og den person, som hjælper til, kaldes for medhjælperen.*

### VIGTIGT!




















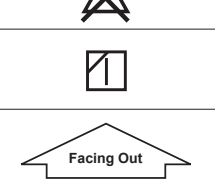
Løft og forflytning af en person medfører altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til liften og løftetilbehøret før brug. Det er vigtigt at have læst og forstået indholdet i brugsanvisningen. Udstyret bør kun anvendes af trænet personale. Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes. Udvis forsigtighed og omsorg ved brug. Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed. Du skal være velinformeret om brugerens evne til at klare løftesituationen. Hvis noget er uklart, skal du kontakte producenten eller leverandøren.

# Indholdsfortegnelse

Symbolbeskrivelse .....	3
Sikkerhedsanvisninger .....	4
Eftersyn og vedligeholdelse .....	5
Definitioner .....	5
Sådan hæftes løftesejlet på forskellige løftebøjler .....	6
Sådan fastgøres en Soft Original HighBack Sling til en løftebøjle med 4 kroge (TwinBars og Cross-Bars) .....	7
Løft fra siddende .....	7
Løft til siddende.....	9
Sådan fjernes løftesejlet i stol/kørestol .....	9
Løft fra seng.....	10
Løft til seng .....	10
Sådan fjernes løftesejlet, når brugeren sidder i sengen.....	10
Sådan fjernes løftesejlet, når brugeren ligger i sengen .....	11
Løft fra gulv .....	11
Løft til gulv.....	12
Afprøvningsråd .....	12
Forskellige siddestillinger .....	12
Forskellige måder at påhægte benstøtterne .....	13
Brugeren sidder ikke godt i løftesejlet - hvad kan det skyldes?.....	13
Afkortningsstykke .....	13
Tilbehør .....	14
Oversigt over Liko Soft Original HighBack Sling, model 26 .....	14
Anbefalede kombinationer.....	14

## Symbolbeskrivelse

Disse symboler findes i dette dokument og/eller på produktet.

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Denne situation kræver ekstra forsigtighed og opmærksomhed.
	Læs brugsanvisningen før brug
	CE-mærke
	Juridisk producent
	Produktionsdato
	Produkt-id
	Serienummer
	Medicinsk udstyr
	Må ikke renses kemisk
	Må ikke stryges
	Tørretumbling
	Må ikke tørres i tørretumbler
	Vask Symbolet optræder altid i kombination med den anbefalede temperatur i °C og °F.
	Latexfri
	Periodisk eftersyn
	Må ikke bleges
	Tørring på snor i skyggen
	Skal vende opad med symbol på ydersiden af udstyret.
	Symbol på ydersiden af udstyret.
	GS1 Datamatrixstregkode, der kan indeholde følgende oplysninger. (01) Globalt handelsvarenummer (11) Produktionsdato (21) Serienummer

## Sikkerhedsanvisninger

### Vær opmærksom på følgende, før du løfter:

- Hvorvidt det er nødvendigt med én eller flere medhjælpere, skal vurderes ud fra den enkelte situation af den ansvarlige medarbejder i din virksomhed.
- Kontrollér, at løftesejlet opfylder brugerens behov mht. model, størrelse, stof og funktion.
- Løftesystemets totale maks. belastning bestemmes altid af det produkt i systemet, der har den laveste anførte maksimale belastning.
- Af sikkerheds- og hygiejnemæssige årsager skal der anvendes individuelle løftesejl.
- Planlæg løftet, så det sker så sikkert og problemfrit som muligt.
- Kontrollér, at løftetilbehøret hænger vertikalt og uhindret kan bevæge sig.
- På trods af, at Likos løftebøjler er forsynede med afkrogningsbeskyttelse, skal der udvises særlig forsigtighed. Inden brugeren løftes fra underlaget, men når båndene er strakt helt ud, skal det kontrolleres, at båndene er hængt korrekt på løftebøjleens kroge.
- Kontrollér, at brugeren sidder sikkert i løftesejlet, inden løftet foretages.
- Løft aldrig en bruger højere fra underlaget end nødvendigt for at gennemføre løftet og forflytningen.
- Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
- Kontrollér, at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er låste i løftesituationen.
- Arbejd altid ergonomisk. Udnyt brugerens evne til at deltage aktivt i løftet.
- Når løftesejlet ikke anvendes, må det ikke placeres i direkte sollys.

 Forkert fastgørelse af løftesejlet til løftebøjlen kan forårsage alvorlig skade på brugeren.

 Manuel vending af brugeren i sengen kan medføre skader på medhjælperen.

 Medicinteknisk klasse I produkt

**PATENT [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Kan omfattes af et eller flere patenter. Se ovenstående internetadresse.**

Hill-Rom-virksomhederne ejer europæiske, amerikanske og andre patenter samt patentansøgninger.

### Produktændringer

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til at foretage produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt din repræsentant fra Hill-Rom for rådgivning og information om produktopgraderinger.

### Design og kvalitet af Liko i Sverige

Liko er kvalitetsgodkendt iht. ISO 9001 og den tilsvarende standard for medicinske udstyr, ISO 13485.

Liko er også miljøgodkendt iht. ISO 14001.

### Meddelelse til brugere og/eller patienter i EU

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

## Eftersyn og vedligeholdelse

Kontrollér altid løftesejlet, inden brug. Kontrollér følgende punkter for slid og beskadigelse:

- Stof
- Strap
- Sømme
- Ophængningsløkker

**⚠ Anvend ikke beskadiget løftetilbehør.**

Hvis noget er uklart, bedes du kontakte fabrikanten eller leverandøren.

**Vaskeanvisning:** Se løftesejlets produktmærke samt det vedhæftede bilag "Vedligeholdelsesanvisninger til Likos løftesejl".

### Periodisk eftersyn

Produktet skal efterses mindst hver 6. Måned. Hyppigere eftersyn kan være påkrævet, hvis produktet bruges eller vaskes hyppigere end normalt. Se Likos protokol "Periodisk eftersyn af Likos tekstilprodukter". For protokoller bedes du kontakte din Hill-Rom-repræsentant.

### Forventet levetid

Produktet har en forventet levetid på 1-5 år ved normal brug. Den forventede levetid varierer afhængigt af stof, anvendeshyppighed, vaskemåde og belastning.

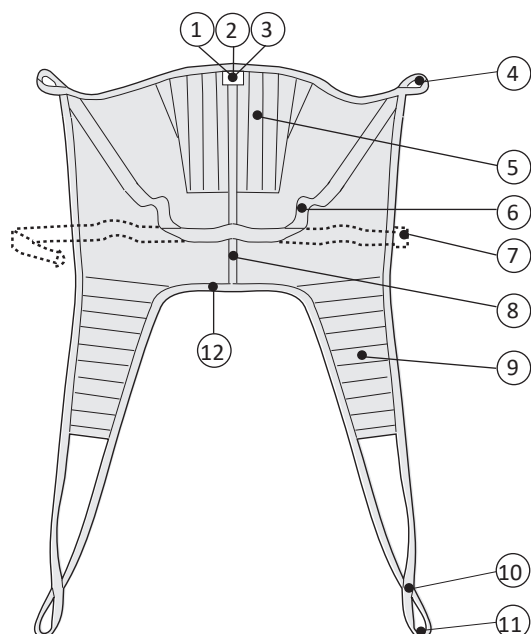
### Anvisninger for genanvendelse

Hele produktet, herunder afstivninger, polstringsmateriale osv. skal sorteres som brændbart affald.

Hill-Rom evaluerer og giver vejledning til sine brugere om sikker håndtering og bortskaffelse af sit udstyr for at hjælpe med at forebygge skader, herunder bl.a. snitsår, punktering af hud og hudafskrabninger, og om eventuel nødvendig rengøring og desinfektion af det medicinske udstyr efter brug og før bortskaffelse. Kunderne skal overholde alle føderale, statslige, regionale og/eller lokale love og bestemmelser, som vedrører sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr og tilbehør.

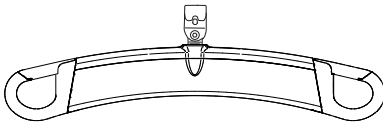
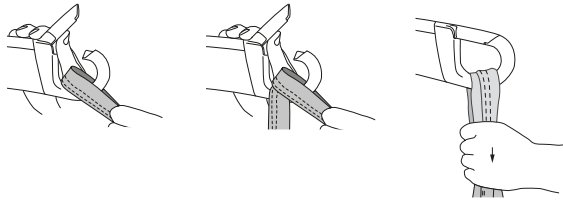
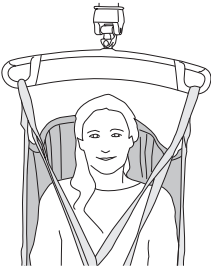
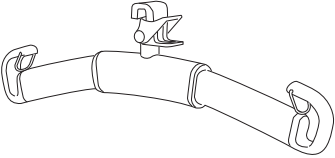
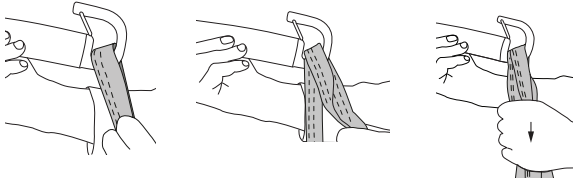

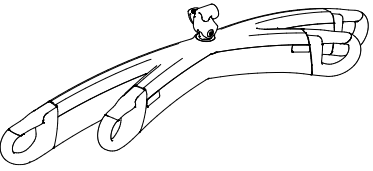
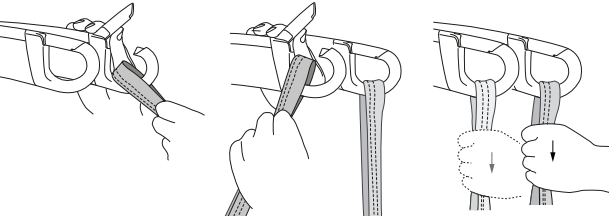
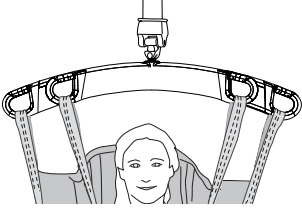
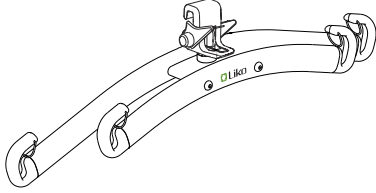
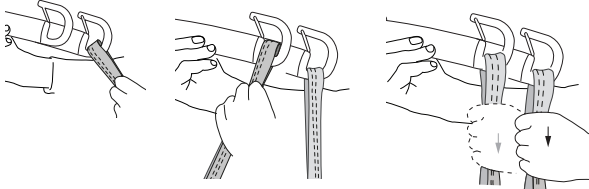
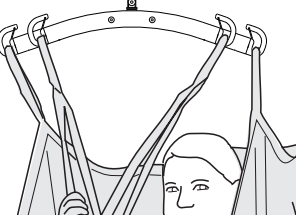
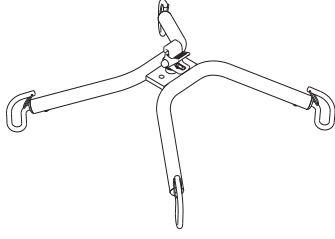
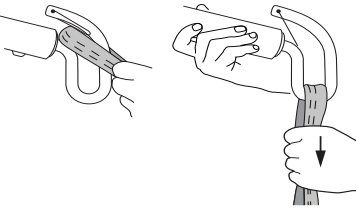
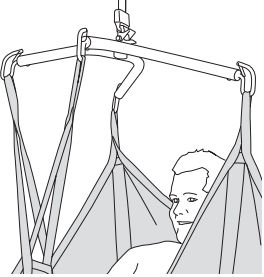
I tvivlsspørgsmål skal brugeren af enheden først kontakte Hill-Roms tekniske support for at få vejledning angående protokoller for sikker bortskaffelse.

## Definitioner

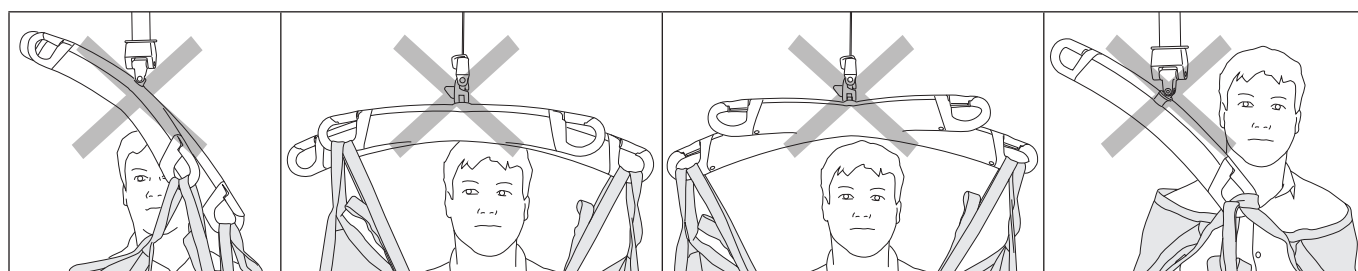


1. Serienummer
2. Produktmærke
3. Mærke: Periodisk eftersyn
4. Øverste båndløkke
5. Blød hovedstøttemed afstivning
6. Styrehåndtag
7. Rem (hvis relevant)
8. Midterstrop / størrelsesangivelse
9. Benstøtte
10. Afkortningsstykke
11. Benstøttens båndløkke
12. Nederste kant


## Sådan hænges et løftesejl op i andre løftebøjler

Løftebøjle	Løkker til løftebøjlers kroge	Korrekt
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-Bar</p>		

### Forkert!




## Sådan fastgøres en Solo HighBack Sling til en løftebøjle med 4 kroge (TwinBars og Cross-Bars)

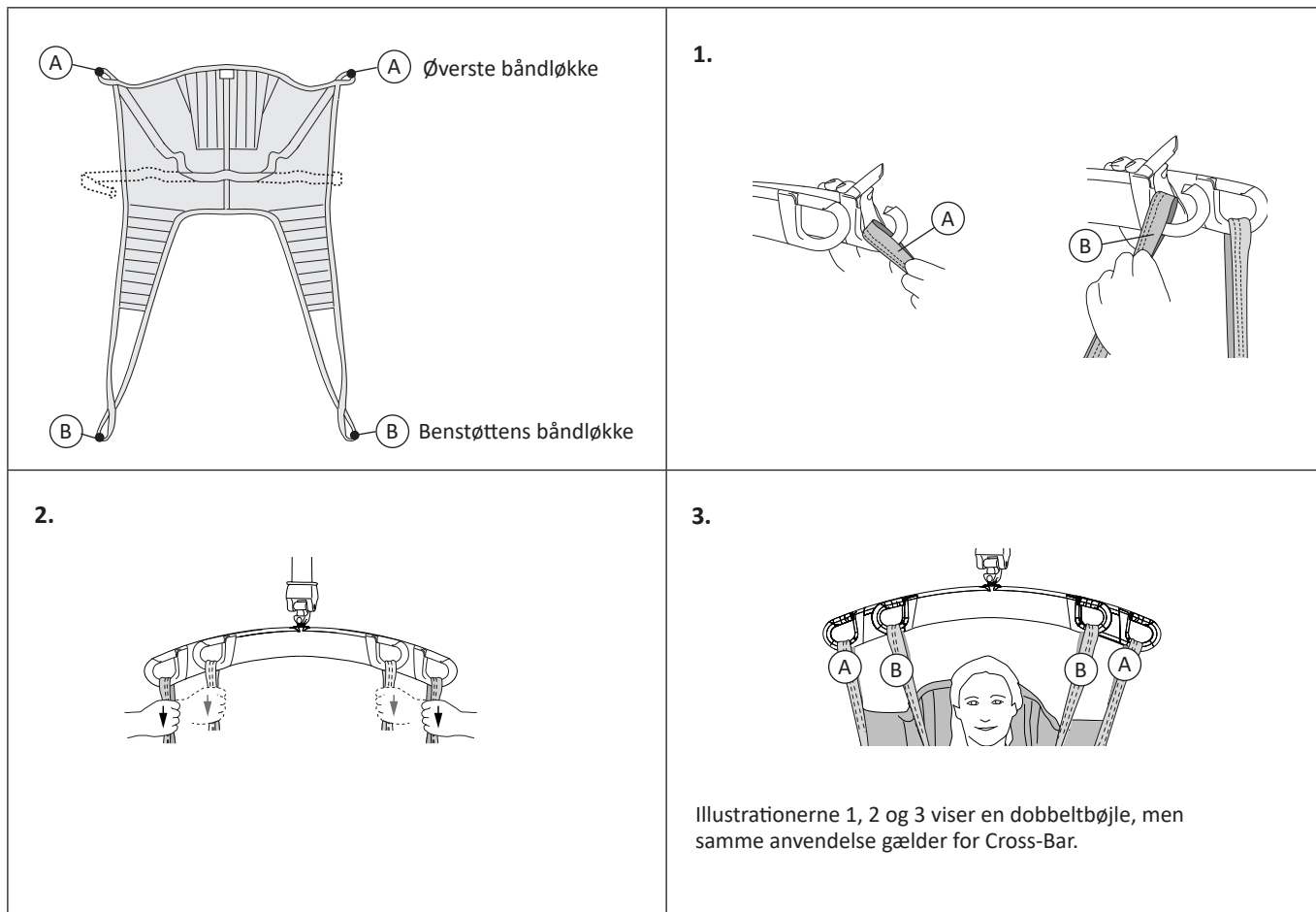

## Løft fra siddende

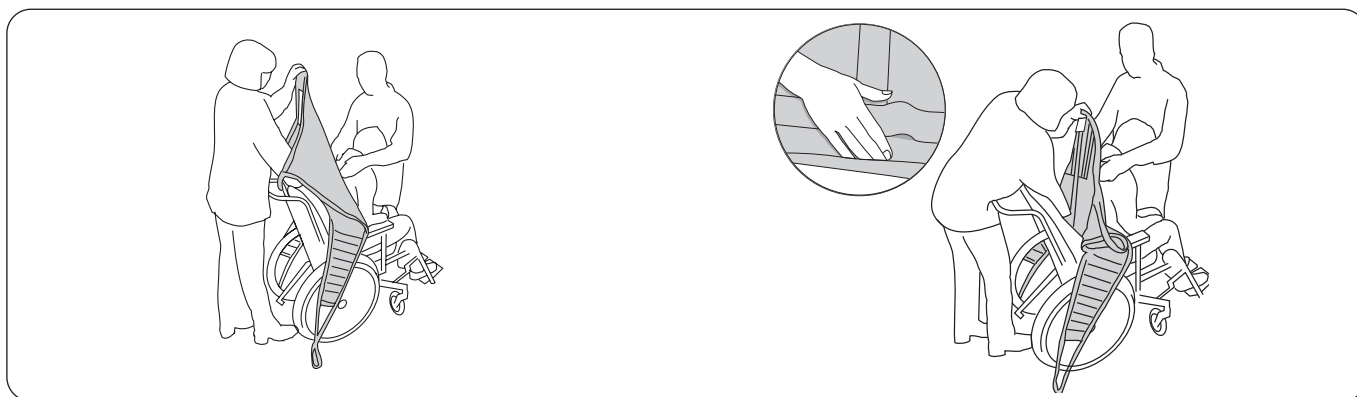
Der skal bruges to medhjælpere til at placere løftesejlet i overensstemmelse med ergonomiske principper. Brugeren er sædvanligvis vippet fremad under påsætningen, og herefter er det vigtigt, at plejepersonalet står foran brugeren for at forebygge, at denne falder fremad.



Placér løftesejlet bag brugerens ryg med produktmærket udvendigt. Fold den nederste kant på løftesejlet omkring dine fingerspidser for nemmere at føre løftesejlet på plads.

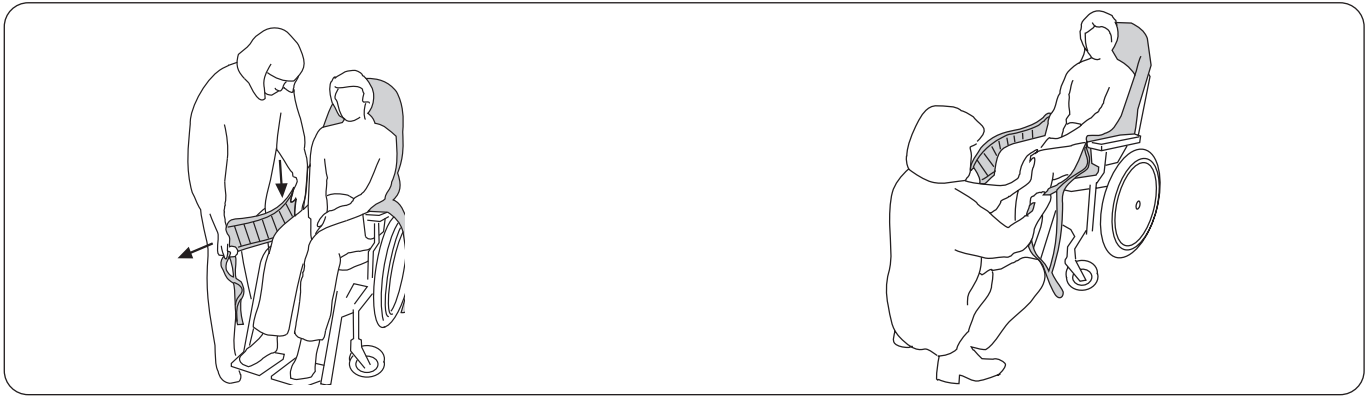
Tryk ved hjælp af håndfladen løftesejlets nederste kant ned på niveau med brugerens haleben - **dette er meget vigtigt**. **Tip:** En korrekt placering opnås nemmere, hvis brugeren lænes/læner sig lidt fremad.






Træk løftesejlets benstøtte ud langs ydersiden af brugerens lår. Placér din håndflade mellem brugerens krop og løftesejlet, og før benstøttens nederste kant ned mod sædet. Træk samtidig benstøtten fremad med den anden hånd for at strække den ud.

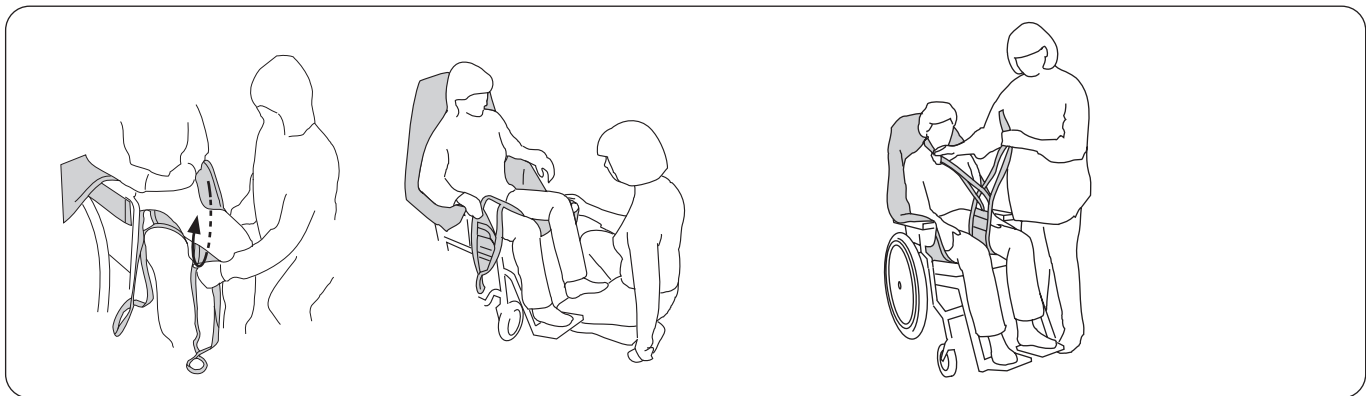Træk ud i benstøtten, så eventuelle folder bagpå rettes ud. Kontrollér, at begge benstøtter når lige langt frem. **Tip:** Med en let modstand under knæskallen bliver det nemmere at trække benstøtten frem.



Indfør benstøtterne under hvert lår. Kontrollér, at stoffet ligger glat, og at det når godt rundt om benet. **Tip:** Påsætning af benstøtter er nemmere, hvis brugerens ben hæves lidt fra sædet. Det kan ske ved at placere brugerens fødder på fodstøtten eller på dit eget ben, som vist i illustrationen.

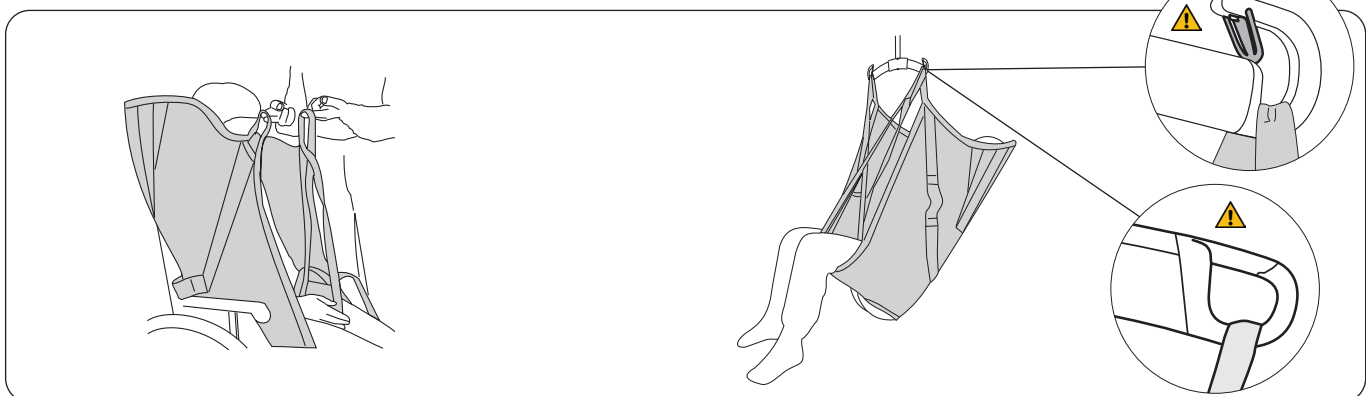Forbered påsætningen af benstøtterne. Den mest anvendte metode til påsætning af løftesejlet er med krydsede benstøtter. Se side 13 for alternative metoder.




**Tip:** Kontrollér, at alle ophængningsløkkerne er lige lange, dvs. at de når lige højt, når de strækkes før løftet. Justér løftesejlets placering, såfremt de ikke når lige højt.

Hægt først de øverste stropløkker på løftebøjlen og derefter benstøttens båndløkker. Se side 6-7 for oplysninger om, hvordan løftesejlets løkker hægtes på forskellige løftebøjler. Løft brugeren op.



## Løft til siddende

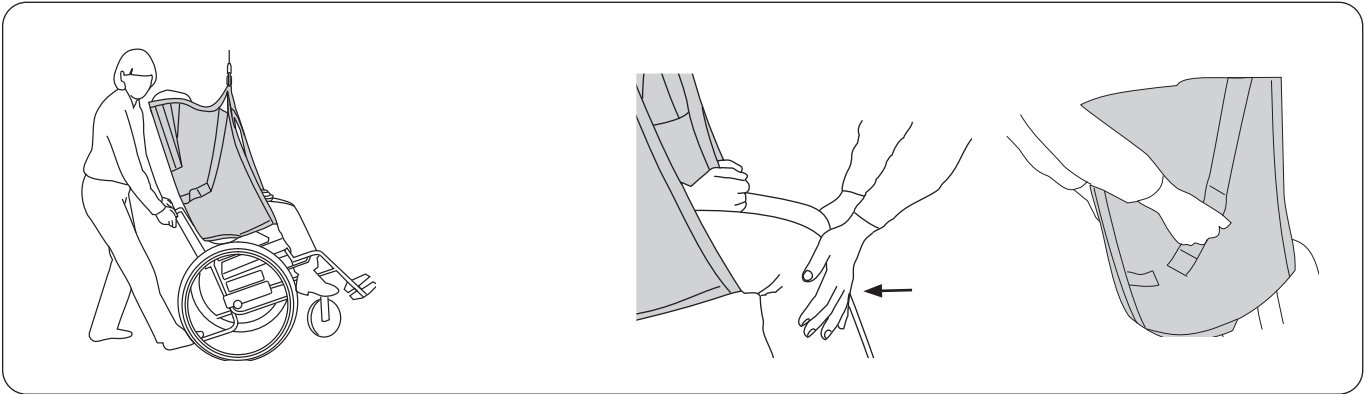Ved placering i stol er det vigtigt, at brugeren kommer tilstrækkeligt langt tilbage i stolen for at sidde behageligt. Det kan gøres på flere måder.




*Ved placering i kørestol:* Vip stolen bagud under nedsænkningen. Lad bagdelen glide ned langs rygstøtten det sidste stykke. Kontrollér kørestolens vinkel med foden på tipstøtten.

*Alternativ:* Tryk let under brugerens knæ ved nedsænkningen, så bagdelen føres ind mod stolens rygstøtte. Hvis der er styrehåndtag på løftesejlet, kan disse bruges til at føre med.

**⚠ Løft ikke i styrehåndtagene! For stor belastning på styrehåndtagene kan resultere i, at løftesejlet brister.**
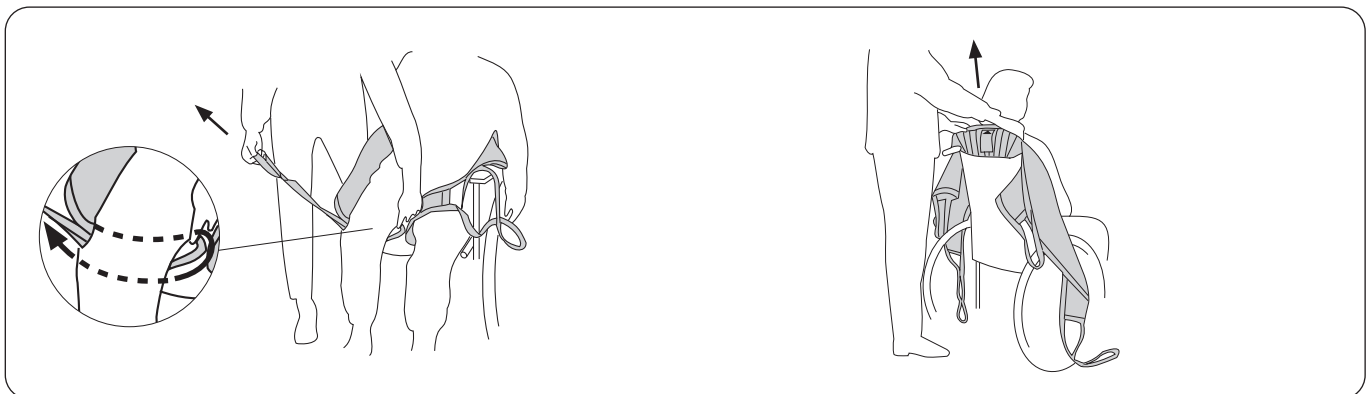
### Sådan fjernes løftesejlet i stol/kørestol

Vi anbefaler, at løftesejlet fjernes efter afsluttet forflytning. Såfremt det ønskes at efterlade løftesejlet i stolen efter flytningen, anbefaler vi at bruge Original HighBack Sling, model 200/210 fremstillet af netpolyester.




Fjern forsigtigt benstøtten. Dette foretages mest skånsomt ved at trække benstøttens løkker ud under stofdelen af benstøtten.

Fjern løftesejlet ved forsigtigt at trække det opad.

## Løft fra seng

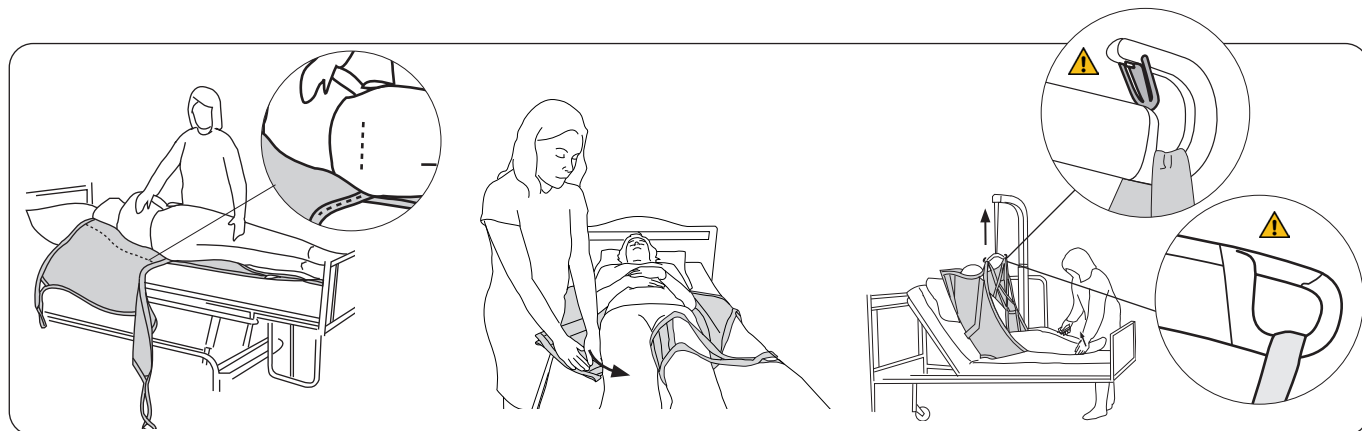Det anbefales at anvende løftesejlet, når brugeren ligger vandret ned, da dette er den nemmeste procedure. I nogle tilfælde, f.eks. hvis brugeren ikke kan ligge vandret, kan løftesejlet påsættes med brugeren siddende op i sengen (se **Alternativ metode til påsætning af løftesejlet** nedenfor).

Tænk på din egen arbejdsstilling samt komforten for brugeren. Brug sengens hæve- og sænkefunktioner.



Vend brugeren mod dig for at undgå risikoen for, at vedkommende falder ud af sengen. Før løftesejlets kant ind under brugeren med den nederste kant **i højde med halebenet**. Læg løftesejlet i en fold, så midterstroppen er ud for brugerens ryggrad, når brugeren forsigtigt vendes tilbage igen. Træk forsigtigt løftesejlet ud fra den anden side.

Indfør benstøtterne under benene. Dette gøres nemmest ved at trykke benstøtten ned mod madrassen, samtidig med at den føres ind under låret. Kontrollér, at stoffet ligger glat, og at det når godt rundt om benet. Benstøtterne kan påhæftes på forskellige måder, se side 13.

Hæv sengens hovedgærde. Hægt først de øverste stropløkker på løftebøjlen og herefter benstøttens båndløkker. Se side 6-7 for oplysninger om, hvordan løftesejlets løkker hægtes på forskellige løftebøjler. Løft brugeren op.


**Alternativ metode til påsætning af løftesejlet:** Hæv sengens hovedgærde bag brugeren. Læg løftesejlet på sengen med produktmærket ned mod madrassen. Før løftesejlet ned bag brugerens ryg, til den nederste kant **når ned til halebenet**. **Tip!** Påsætningen sker nemmest, hvis brugeren lænes/læner sig fremad.

## Løft til seng

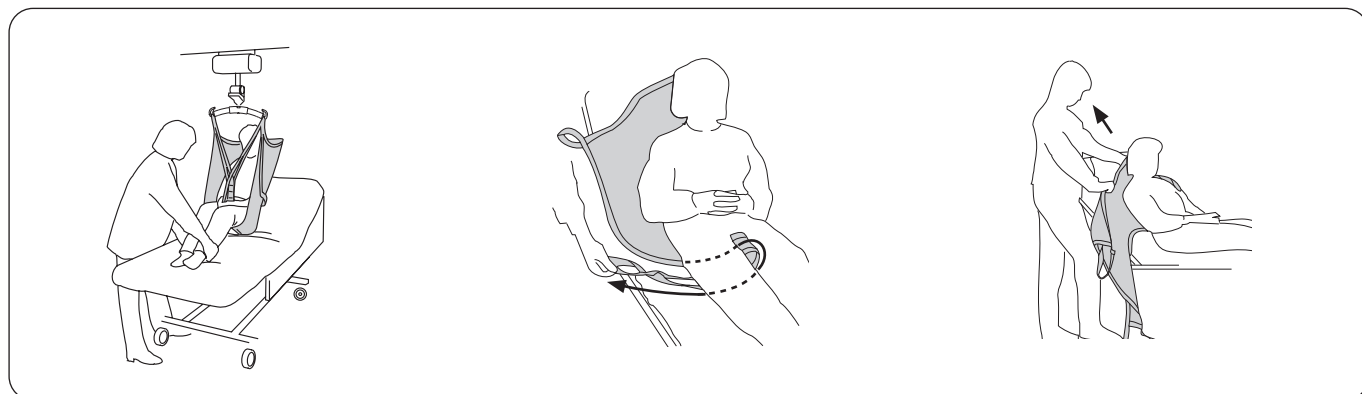Vi anbefaler, at løftesejlet fjernes efter afsluttet forflytning. Hvis løftesejlet skal efterlades i sengen efter flytningen, anbefaler vi at bruge Original HighBack Sling, model 200/210 fremstillet af netpolyester.

Tænk på din egen arbejdsstilling samt komforten for brugeren. Brug sengens hæve- og sænkefunktioner.

### Sådan fjernes et løftesejl, når brugeren sidder i sengen




Før brugeren ind over sengen. Hæv sengens hovedgærde for at opnå en større brugerkomfort. Sænk brugeren ned til sengen.

Fjern benstøtterne ved at trække deres løkker ud under stofdelen af benstøtten.

**Tip:** Dette er nemmest, hvis brugerens ben er bøje.


Fjern løftesejlet ved forsigtigt at trække det opad.

## Sådan fjernes et løftesejl, når brugeren ligger i sengen

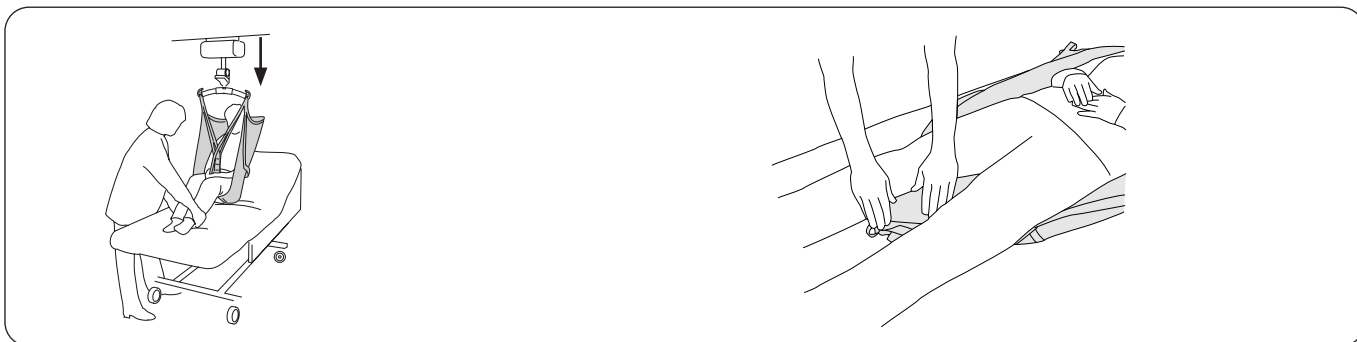

Før brugeren ind over sengen. Hæv sengens hovedgærde for at opnå en større brugerkomfort. Sænk brugeren ned til sengen. Sænk herefter hovedgærdet.

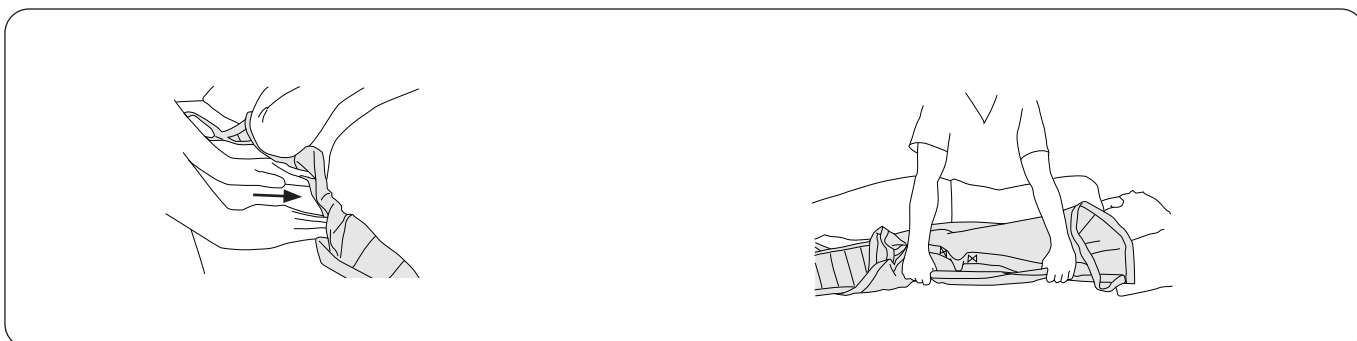Placér benstøttens båndløg under benstøtterne mellem brugerens ben.




Tag fat i kanten på løftesejlet. Pres løftesejlet sammen. Tryk løftesejlet ned mod madrassen og ind under brugeren.

Vend brugeren forsigtigt på siden. Tag fat nederst på løftesejlet, og træk det forsigtigt ud.

## Løft fra gulv

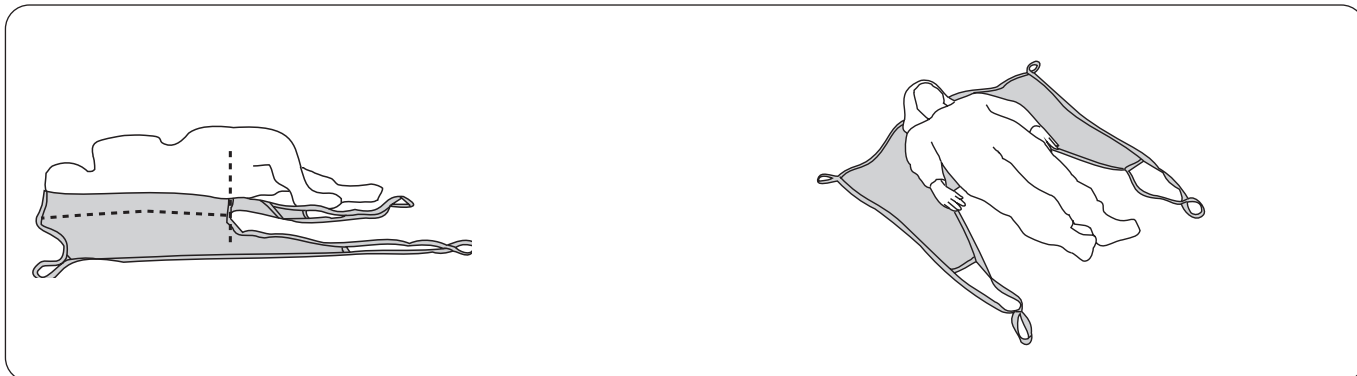
Løft fra gulv Likos Golvo™-mobillift er beskrevet nedenfor. Den samme teknik er desuden velegnet til løft med Likos andre mobillifte og stationære lifte. Læs brugsanvisningen til den lift, der anvendes.



Vend brugeren forsigtigt om på siden, og før løftesejlets kant ind under brugeren med den nederste kant på **højde med halebenet**. Læg løftesejlet i en fold, så midterstroppen er ud for brugerens ryggrad, når brugeren forsigtigt vendes tilbage igen. Træk forsigtigt løftesejlet ud fra den modsatte side.

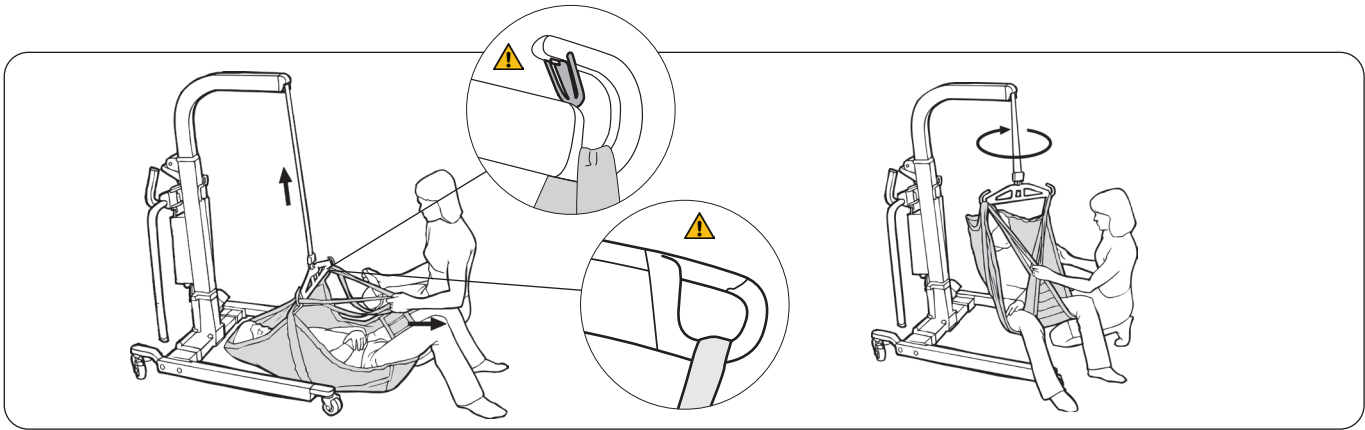Kontroller, at løftesejlet ligger symmetrisk under brugeren. Juster om nødvendigt placeringen. Indfør benstøtterne under benene.






Udglat benstøtterne under brugerens ben. Hægt først de øverste strolpløkker på løftebøjlen og derefter benstøttens båndløkker. Se side 6-7 for oplysninger om, hvordan løftesejlets løkker hægtes på forskellige løftebøjler. Hold benstøtterne væk fra skridtet for at undgå gener for brugeren. Dette er lettere, hvis brugeren bøjer benene.

Løft brugeren fra gulvet. Brugeren kan drejes en smule for at undgå, at hovedet kommer for tæt på standen.

**⚠ Mobiliften skal låses, når der løftes med patientens hoved mod liften.**

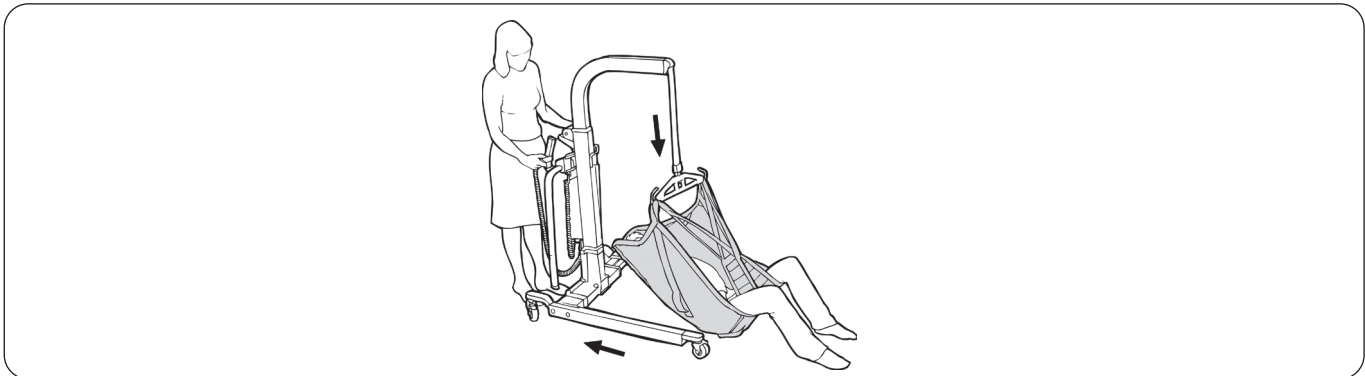
## Løft fra gulv



Ved løft fra gulv må hjulene på liften ikke være låst. Når brugeren rører gulvet, skal liften trækkes bagud for at give plads til hovedet. **Tip:** Hvis der er brug for at løfte til en relativt tynd gymnastikmåtte, kan liften skubbes ind under denne måtte, så måtten fungerer som en blød beskyttelse mellem liften og brugeren. Hvis løftesejlet skal afmonteres, se "Sådan fjernes et løftesejl, når brugeren ligger i sengen" på side 11.

## Afprøvningsråd
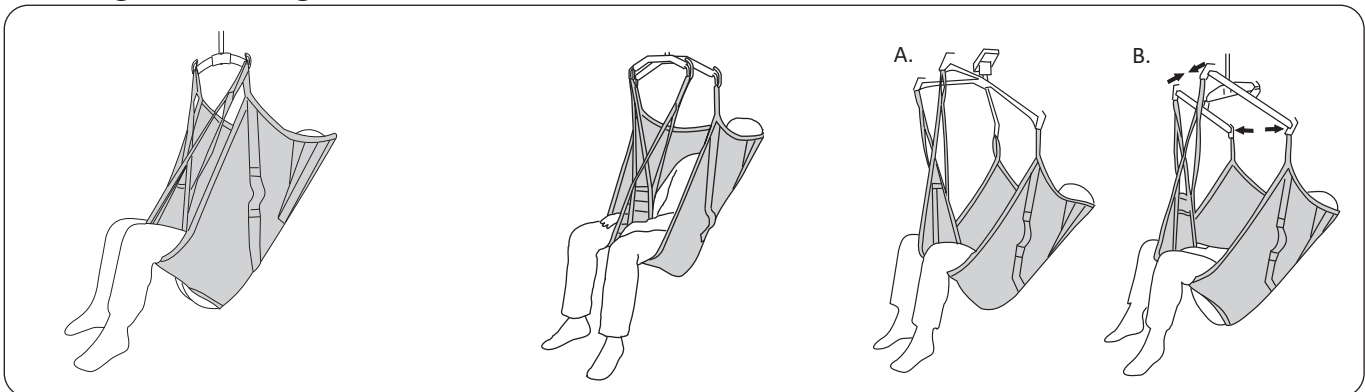
### Forskellige siddestillinger



Med Soft Original HighBack Sling i **2-punktsophængning** opnår brugeren en let tilbagelænet siddestilling med fremragende hovedstøtte og ca. 90 graders vinkel i hoftelæddet.


Soft Original HighBack Sling kombineret med en **dobbeltbøjle 670** giver større bredde ved skuldrene end ved benstøtterne, hvilket er velegnet, hvis brugeren er stor eller følsom over for tryk på skuldrene.

A. Kombineret med Liko **Cross-Bar** kan du opnå en lidt mere tilbagelænet stilling og en større vinkel ved hoftelæddet.

B. Kombineret med **sidebøjler** opnås en lidt mere tilbagelænet stilling og en større bredde ved skuldrene end ved benstøtterne, hvilket er velegnet, hvis patienten er følsom over for tryk på skuldrene.

## Forskellige måder at påhægte benstøtterne

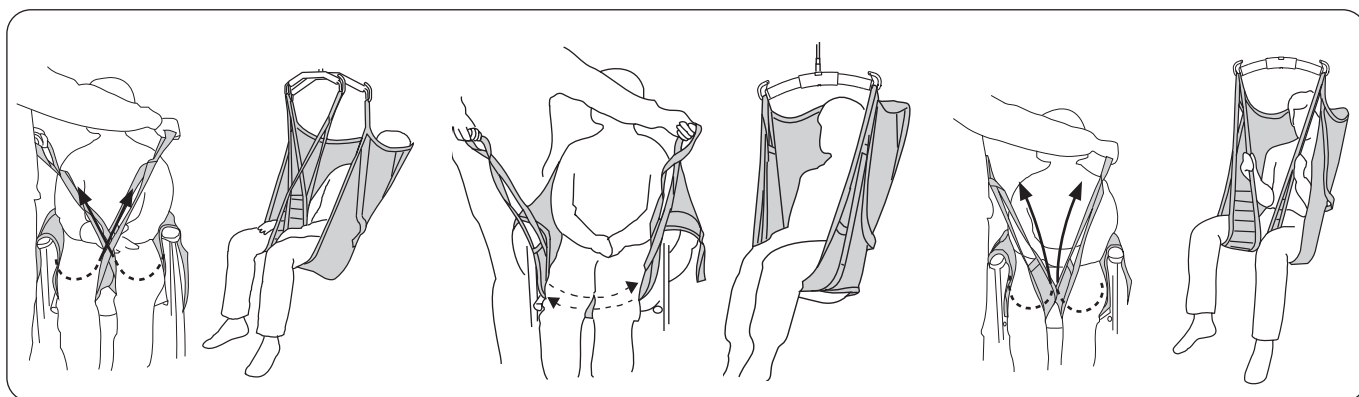Inden valg af montering skal der altid foretages en individuel vurdering for at komme eventuelle risici i forkøbet.



### Med krydsede benstøtter.

Den mest anvendte måde at påhægte løftesejlet. Det ene af benstøttens båndløgker trækkes igennem den anden, inden løkkerne hægtes på løftebøjlen.

### Omkring begge lårben.

Dette kan være en god fremgangsmåde f.eks. ved løft af brugere med amputerede ben.

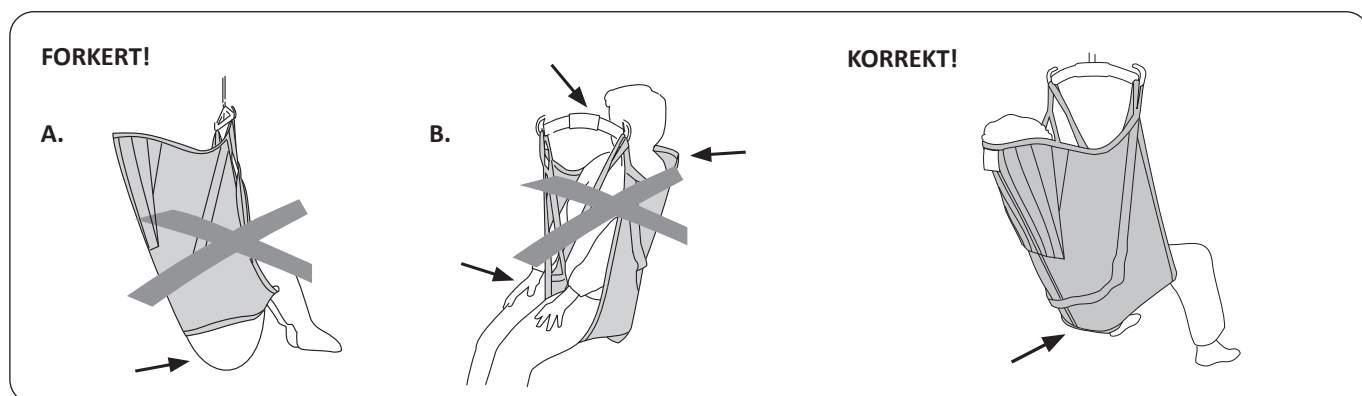
**Tip:** For at undgå, at brugerens siddestilling bliver for tilbagelænet, kan man montere Extension Loops på benstøttens båndløgker.

### Hver benstøtte hægtes hver for sig på løftebøjlen.

Dette kan være en god fremgangsmåde ved løft af brugere med særlig følsomt underliv.

**⚠️ Øget risiko for udglidning.**

## Brugeren sidder ikke godt i løftesejlet - hvad kan det skyldes?



**A. Risiko for udglidning.** Bagdelen hænger ned. Løftesejlet kan være for stort. Det kan også skyldes, at løftesejlet ikke er trukket tilstrækkelig langt nok ned i ryggen.

Kontrollér, inden løftet påbegyndes, at den nederste kant er udstrakt, og at stoffet når helt rundt om benene.

**B. Et for lille løftesejl** kan medføre, at benstøtterne skærer ind i skridtet og giver ubehag, og at løftebøjlen kommer for tæt på ansigtet og/eller ryggen til at give tilstrækkelig støtte.

Løftesejlets nederste kant er i højde med halebenet. Benstøtterne ligger godt under benene.


## Afkortningsstykke

I visse tilfælde kan det være en fordel at forkorte benstøttens båndløgke, så brugeren sidder godt i Soft Original HighBack Sling. Den forkortede stilling kan anvendes midlertidigt for at prøve, om man har opnået den rigtige længde, men hvis det gøres for længe, kan man beskadige syningerne. Hvis du vil forkorte benstøttens båndløgke i længere tid, anbefales det at binde en knude på løkken og dermed forkorte den med ca. 10 cm. I dette tilfælde er det den ydre benstøttebåndløgke, der skal hægtes på løftebøjlen.

## Tilbehør

Extension Loop, grøn, 12 cm  
 Extension Loop, grøn, 22 cm  
 Extension Loop, grå, 12 cm  
 Extension Loop, grå, 22 cm

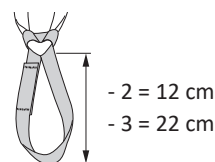Varenr. 3691102  
 Varenr. 3691103  
 Varenr. 3691302  
 Varenr. 3691303



## Oversigt over Liko™ Soft Original HighBack Sling, model 26

Produkt	Varenr.	Størrelse		Brugerens vægt <sup>1</sup>	Maks. belastning
Soft Original HighBack Sling	3526111	MS	Medium Slim (slank voksen)	30-50 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526115	M	Medium	40-80 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526116	L	Large	70-120 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526117	XL	Extra Large	110-250 kg	500 kg
Soft Original HighBack Sling	3526118	XXL	Extra Extra Large	200- kg	500 kg

<sup>1</sup> Den angivne brugervægt er kun vejledende – Afvigelser forekommer.

<sup>2</sup> For at bibeholde maks. belastningen kræves en lift/tilbehør, der er beregnet til samme belastning eller større.

### Materiale

Soft Original HighBack Sling er fremstillet i polyester

### Anbefalede kombinationer

Anbefalede kombinationer af Liko Soft Original HighBack Sling og Likos løftebøjler:	Mini 220	SlingBar 350 <sup>3</sup>	Standard 450	SlingBar 450 <sup>1</sup>	Løftebøjle 600 <sup>4</sup>	TwinBar 670 <sup>2</sup>	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. sidebøjler + Universal 350	Univ. sidebøjler + Universal 450
Soft Original HighBack Sling, MS	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1
Soft Original HighBack Sling, M	3	2	1	1	3	1	1	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, L	3	3	1	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XL	4	3	2	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XXL	4	4	4	3	3	2	4	1	4	2

<sup>1</sup> SlingBar 450 henviser til Universal SlingBar 450, varenr. 3156075, 3156085 og 3156095, samt SlingGuard 450, varenr. 3308020 og 3308520.

<sup>2</sup> TwinBar 670 henviser til Universal TwinBar 670, varenr. 3156077 og 3156087, samt SlingGuard 670 Twin, varenr. 3308040 og 3308540.

<sup>3</sup> SlingBar 350 henviser til Universal SlingBar 350, varenr. 3156074, 3156084 og 3156094.

<sup>4</sup> Løftebøjle 600 passer til Universal SlingBar 600 Varenr. 3156076 og 3156086.

**Forklaring:** 1 = Anbefales, 2 = Acceptabel, 3 = Frarådes, 4 = Uegnet

### Øvrige kombinationer

Kombinationer af andet tilbehør/andre produkter end dem, der anbefales af Liko, kan medføre risici for brugerens sikkerhed.



www.hillrom.com

Liko AB  
 Nedre vägen 100  
 975 92 Luleå, Sverige  
 +46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for  
 patients and their caregivers:

