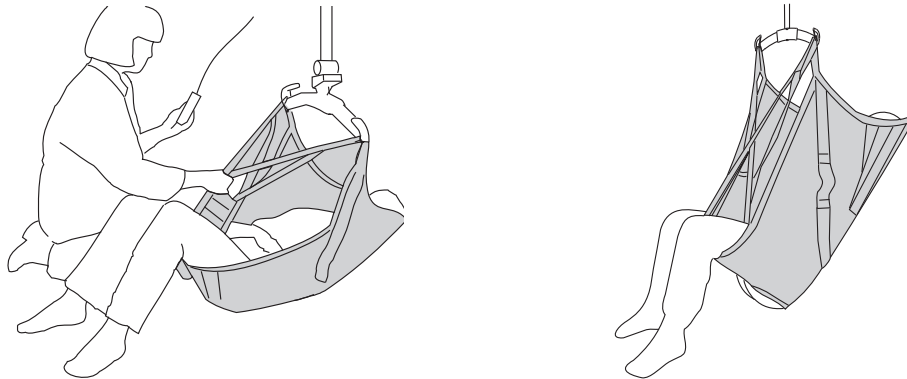


Käyttöohje



Tuotekuvaus

Liko Soft Original HighBack Sling -nostokangas on perusmalli, joka on suunniteltu mukautumaan avustettavalle ilman erillisiä säätöjä. Se on yksi eniten käytetyistä nostokankaistamme.

Se mahdollistaa hieman takakenoisen istuma-asennon ja tukee erinomaisesti koko vartaloa, minkä ansiosta se soveltuu erityisesti avustettaville, joiden pään ja ylävartalon stabiliteetti on heikentynyt. Oikein sovitettuna ja käytettynä nostokangas antaa avustettavalle suuren turvallisuuden ja mukavuuden tunteen.

Soft Original HighBack Sling -nostokangasta voidaan käyttää kaikissa tavanomaisissa nostotilanteissa. Vahvistettu pehmeä päätuki tukee miellyttävästi päätä sekä istuma- että makuuasennossa.

Kankaat

Soft Original HighBack Sling -nostokangas on valmistettu polyesteristä. Polyesteri on kestävä ja kitkaton materiaali, joka tekee nostokankaasta helposti aseteltavan ja helposti poistettavan.

Jos halutaan vastaava nostokangas eri materiaalista, suosittelemme käyttämään Original HighBack Sling -nostokangasmallia 200/210. Original HighBack Sling -nostokankaasta on saatavana verkkopolyesteristä valmistettu malli, jota on suositeltavaa käyttää, jos nostokangas jätetään tuoliin siirron jälkeen. Kylvyssä ja suihkussa käyntiä varten on saatavana muovipinnoitetusta polyesteriverkosta valmistettu malli, joka läpäisee vettä ja on helppo pyyhkiä puhtaaksi.

Materiaali kuivuu nopeasti eikä kylmetä avustettavaa samalla tavalla kuin kostea ja vettä imevä kangas. Nostokankaan nostohihnat ovat kestävästä polyesteriä ja erittäin lujat.

Koot

Soft Original HighBack Sling -nostokankaasta on saatavana eri kokoja. On tärkeää valita oikean kokoinen nostokangas, jotta se on avustettavalle mahdollisimman miellyttävä ja turvallinen. Liian suuresta nostokankaasta avustettava saattaa liukua ulos, kun taas liian pieni nostokangas voi olla epämukavan tiukka nivusista.

Isommissa kokoluokissa nostokangasta voi olla hyvä käyttää yhdessä kaksoisnostokaaren 670 kanssa.

Jalkatuet

Soft Original HighBack Sling -nostokankaaseen voi valita vahvistettuja jalkatukia, jotka antavat lisämukavuutta, jakavat paineen tasaisesti ja estävät nostokankaan rypistymisen reisien alle.

Sopivat nostimet

Soft Original HighBack Sling -nostokangasta voidaan käyttää kaikkien Likon katonnostimien ja liikuteltavien nostimien kanssa. Valittavana ovat LikoGuard™-, Likorall™- ja Multirall™-katonnostimet sekä liikuteltavat nostimet Golvo™, Viking™, Uno™ ja Liko™ M220/M230.

Tässä käyttöohjeessa nostettavaa potilasta kutsutaan avustettavaksi ja auttavaa henkilöä avustajaksi.

TÄRKEÄÄ!





















Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue nostimen ja nostovarusteiden käyttöohje ennen käyttöä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Tätä varustetta saa käyttää vain koulutettu henkilökunta. Varmista, että nostovarusteet soveltuvat käytettävään nostimeen. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan turvallisuudesta. Sinun on oltava tietoinen avustettavan edellytyksistä suoriutua nostotilanteesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Sisällysluettelo

Symbolien kuvaus	3
Turvaohjeet	4
Hoito ja kunnossapito	5
Määritelmät	5
Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin	6
Soft Original HighBack Sling -nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkui- seen nostokaareen (kaksoisnostokaaret ja ristikkonostokaaret)	7
Nostaminen istuma-asennosta.....	7
Nostaminen istuma-asentoon	9
Nostokankaan poistaminen tuolista/pyörätuolista	9
Nostaminen sängystä	10
Nostaminen sänkyyn	10
Nostokankaan poistaminen istuma-asennossa sängyssä	10
Nostokankaan poistaminen makuuasennossa sängyssä	11
Nostaminen lattialta	11
Nostaminen lattialle	12
Kiinnitysohje	12
Erilaisia istuma-asentoja.....	12
Erilaisia tapoja jalkatukien kiinnittämiseen	13
Avustettava ei istu hyvin nostokankaassa – mistä se voisi johtua?	13
Lyhennysasento	13
Lisävarusteet	14
Tuotokuvaus – Liko Soft Original HighBack Sling, malli 26.....	14
Suosittelut käyttöyhdistelmät	14

Symbolien kuvaus

Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja.

Symboli	Kuvaus
	Varoitus: tämä tilanne edellyttää erityistä varovaisuutta ja huomiota.
	Lue käyttöohje ennen käyttöä
	CE-merkintä
	Laillinen valmistaja
	Valmistuspäivämäärä
	Tuotetunniste
	Sarjanumero
	Lääkinnällinen laite
	Kemiallinen pesu kielletty
	Silitys kielletty
	Rumpukuivaus
	Rumpukuivaus kielletty
	Pesu Symbolin yhteydessä näkyy aina suositeltu pesulämpötila (°C ja °F).
	Lateksiton
	Määräaikaistarkastus
	Valkaisu kielletty
	Ripusta kuivumaan varjoon
	Suunta ylöspäin; välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli
	Välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli
 (01) 0100887761997127 (11) VUUKOPP (21) 012345678910	GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja: (01) kansainvälinen tuotenumero (11) tuotantopäivä (21) sarjanumero

Turvaohjeet

Huomioi seuraavat asiat ennen nostamista:

- Hoitoyksikön vastuuhenkilön tulee arvioida avustajien tarvittava lukumäärä tapauskohtaisesti.
- Varmista, että nostokangas sopii malliltaan, kooltaan, materiaaliltaan ja tyypiltään avustettavan tarpeisiin.
- Nostojärjestelmän enimmäiskuormituksen määrittää aina se järjestelmän tuote, jonka määritetty enimmäiskuormitus on pienin.
- Turvallisuus- ja hygieniasyistä nostokankaat on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.
- Suunnittele nostotilanne ennen nostamista, jotta kaikki tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja joustavasti.
- Tarkista, että nostovarusteet riippuvat pystysuorassa ja pääsevät liikkumaan esteettömästi.
- Vaikka Likon nostokaarissa on salvat, on erityistä varovaisuutta kuitenkin noudatettava. Ennen avustettavan nostamista alustalta ja hihnojen kiristämistä on tärkeää varmistaa, että hihnat on kiinnitetty nostokaaren koukkuihin oikein.
- Varmista, että avustettava istuu tukevasti nostokankaassa, ennen kuin siirto toiseen paikkaan aloitetaan.
- Älä koskaan nosta avustettavaa korkeammalle kuin siirron toteuttamiseksi on välttämätöntä.
- Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa nostotilanteessa.
- Varmista, että pyörätuolin, sängyn, paarien jne. pyörät ovat lukittuina nosto-/siirtohetkellä.
- Käytä aina ergonomisia työmenetelmiä. Hyödynnä avustettavan kykyä osallistua aktiivisesti toimenpiteisiin.
- Kun nostokangasta ei käytetä, älä jätä sitä suoraan auringonvaloon.

 **Nostokankaan puutteellinen kiinnitys nostokaareen voi aiheuttaa avustettavalle vakavia vammoja.**

 **Avustettavan käsivarainen kääntäminen sängyssä voi aiheuttaa avustajalle vammoja.**

 Lääketieteellinen luokan 1 laite

PATENTTI www.hillrom.com/patents

Saattaa kuulua yhden tai useamman patentin piiriin. Katso edellä mainittu verkko-osoite.

Hill-Rom-yritykset ovat eurooppalaisten, yhdysvaltalaisen ja muiden patenttien ja odottavien patenttihakemusten omistajia.

Tuotemuutokset

Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakkoilmoitusta. Ohjeita ja lisätietoja mahdollisista päivityksistä saa Hill-Romin edustajalta.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko on laatusertifioitu standardin ISO 9001 ja vastaavan lääkintätekniikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO 13485 mukaisesti. Liko on ympäristösertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.

Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan asianmukaiselle viranomaiselle.

Hoito ja kunnossapito

Tarkista nostokangas ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat osat kulumisen ja vaurioiden varalta:

- Kangas
- Hihnat
- Saumat
- Ripustuslenkit

⚠ Älä käytä vahingoittuneita nostovaruksia.

Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Pesuohteet: Katso nostokankaan tuotelappu ja mukana oleva liite ”Liko-nostokankaiden hoito ja kunnossapito”.

Määräaikaistarkastus

Tuote on tarkastettava vähintään kuuden kuukauden välein. Jos tuotetta käytetään tai pestään normaalia enemmän, tarkastus on tehtävä tätäkin useammin. Katso Likon käytäntö ohjeesta ”Liko-tekstiilituotteiden määräaikaistarkastus”. Lisäohjeita saat Hill-Romin edustajalta.

Odotettu käyttöikä

Tuotteen odotettu käyttöikä on normaalikäytössä 1–5 vuotta. Käyttöikään vaikuttavat kangas, käyttötiheys, pesumenetelmä ja kuormien paino.

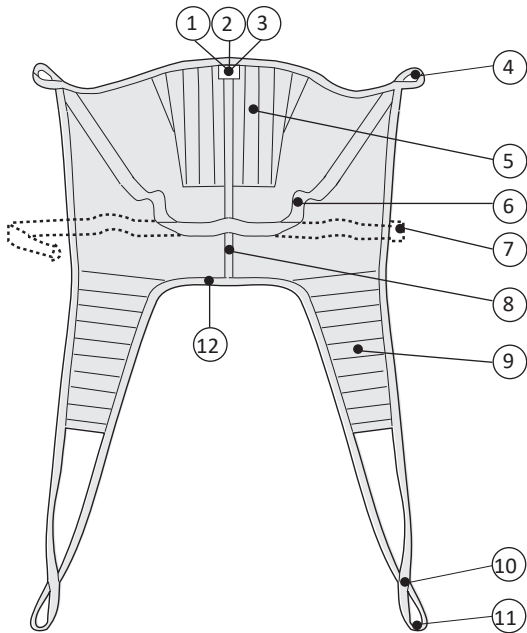
Kierrätysohjeet

Koko tuote, mukaan lukien säleet, pehmusteet jne., on lajiteltava poltettaviin jätteisiin.

Hill-Rom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä auttaakseen ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinällisten laitteiden puhdistamisessa ja desinfiomisessa käytön jälkeen ja ennen hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, alueellisia ja paikallisia säännöksiä.

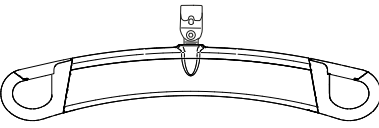
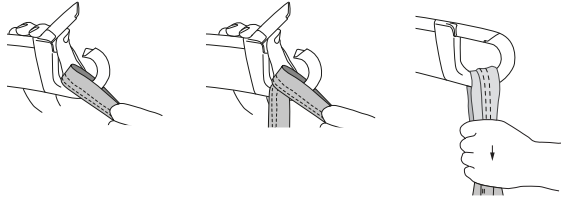
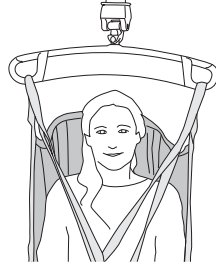
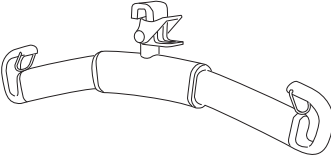
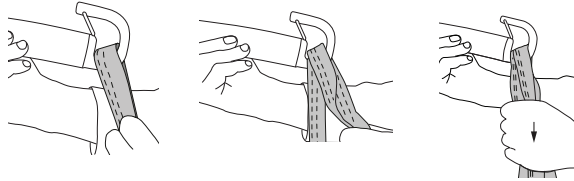

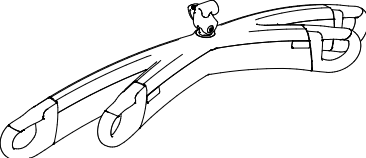
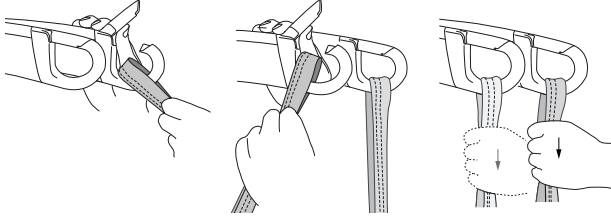
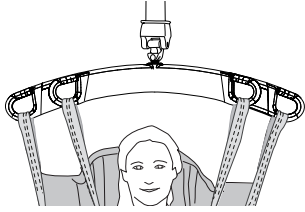
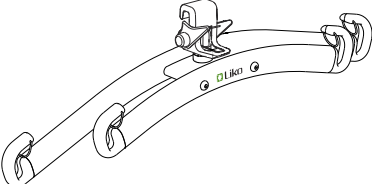
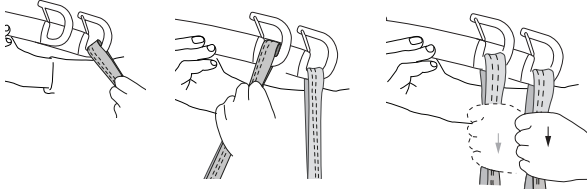
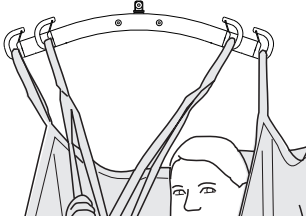
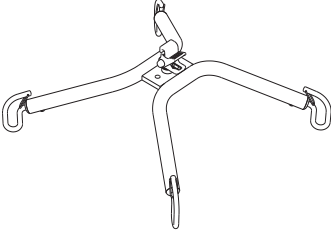
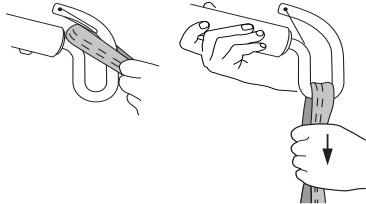
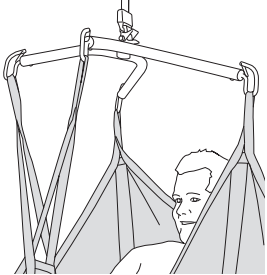
Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteyttä Hill-Romin tekniseen tukeen ja pyydyttävä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Määritelmät




1. Sarjanumero
2. Tuotelappu
3. Lappu: Määräaikaistarkastus
4. Ylempi hihnalenkki
5. Pehmeä päätuki ja säleet
6. Kädensija
7. Vyö (jos varusteena)
8. Keskisaumanauha/kokomerkinä
9. Jalkatuki
10. Lyhennysasento
11. Jalkatuen lenkki
12. Alareuna


Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin

Nostokaari	Nostokankaan lenkit nostokaaren koukkuihin	Oikein
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-Bar</p>		

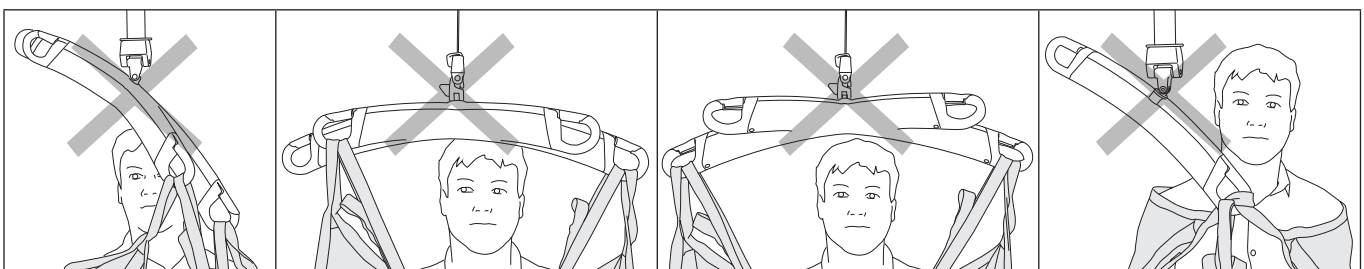Väärin!




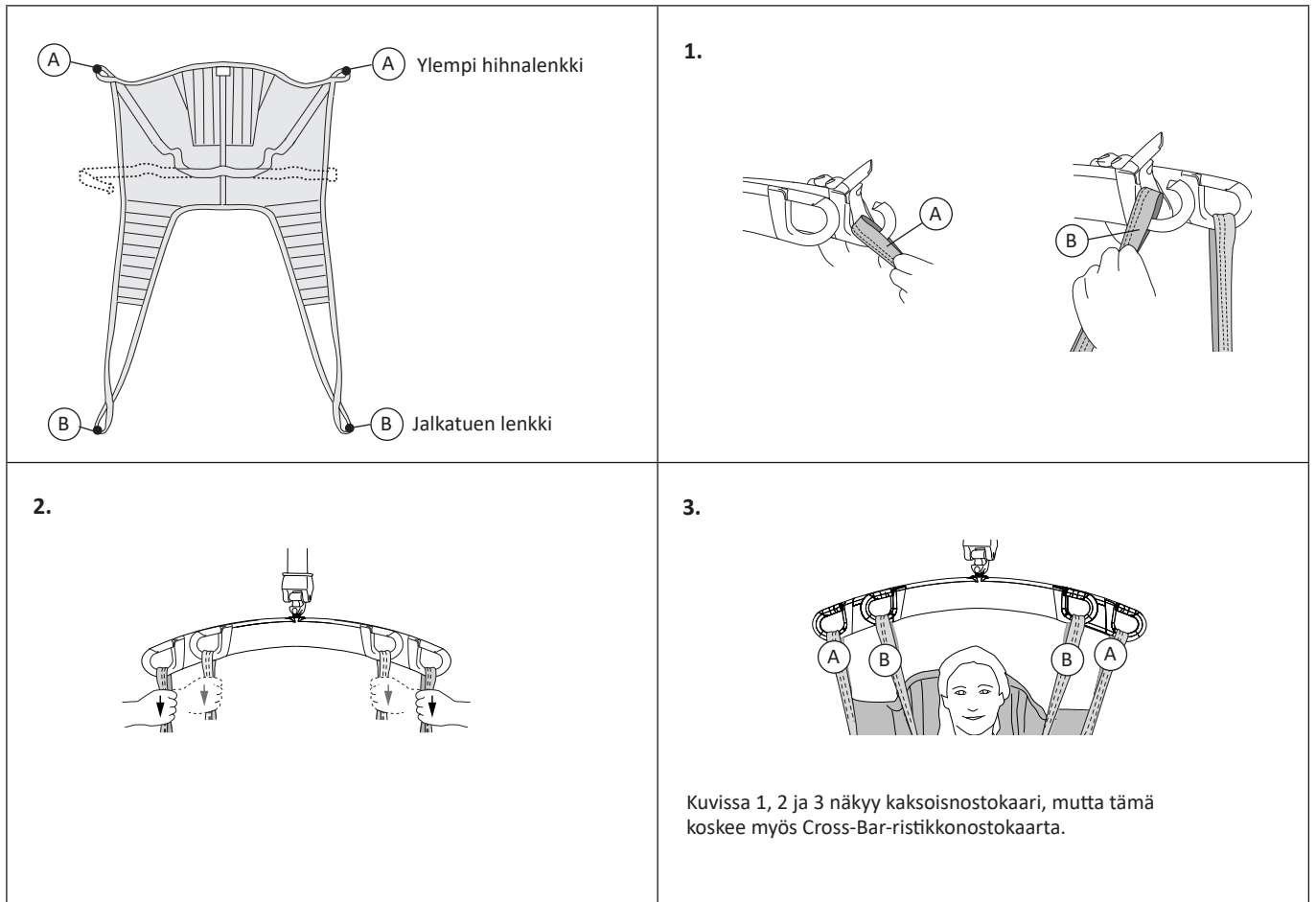Soft Original HighBack Sling -nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuiseen nostokaareen (kaksoisnostokaaret ja ristikkonostokaaret)




Nostaminen istuma-asennosta

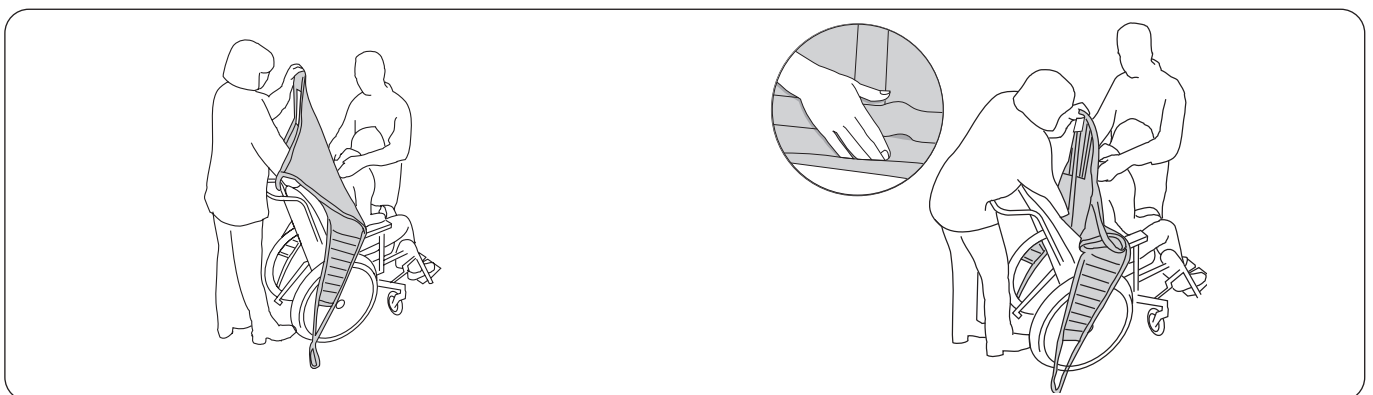Nostokankaan asettamiseen ergonomiaohjeiden mukaisesti tarvitaan kaksi avustajaa. Yleensä avustettava kallistetaan hieman eteenpäin, jolloin on tärkeää, että avustaja seisoo avustettavan edessä, jotta tämä ei kaadu eteenpäin.




Aseta nostokangas avustettavan selän taakse siten, että tuotelappu osoittaa ulospäin. Taita nostokankaan alareuna sormenpäiden ympäri ja ohjaa nostokangas paikalleen.


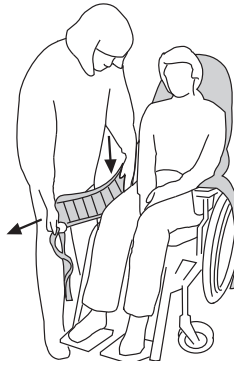
Paina kämmenellä nostokankaan alareuna avustettavan hantaluun tasolle. **Tämä on erittäin tärkeää.** Vinkki: nostokankaan asettamista helpottaa, jos avustettava itse kumartuu tai häntä kallistetaan hieman eteenpäin.



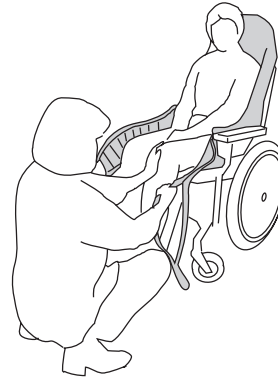Vedä nostokankaan jalkatuot sivuilta eteen avustettavan reisien viereen. Aseta kämmen avustettavan vartalon ja nostokankaan väliin ja paina jalkatuon alareunaa alas istuinta kohti. Venytä samalla jalkatukea vetämällä sitä toisella kädellä eteenpäin.





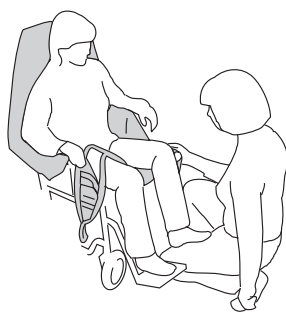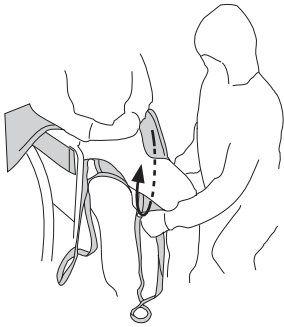Suorista mahdolliset rypyt takaa vetämällä jalkatukia eteen. Tarkista, että molemmat jalkatuot ulottuvat yhtä pitkälle eteen. **Vinkki:** jalkatuki on helpompi vetää eteen, kun pidät kevyesti kiinni avustettavan polvilumpion alta.



Aseta jalkatuot reisien alle. Varmista, että kangas on suorassa ja tukee jalkaa kunnolla. **Vinkki:** Jalkatukien asettamista helpottaa, jos avustettavan jalkoja nostetaan hieman irti istuimesta. Se onnistuu asettamalla avustettavan jalat tuolin jalkalevyille tai oman jalkasi päälle kuvan mukaisesti.

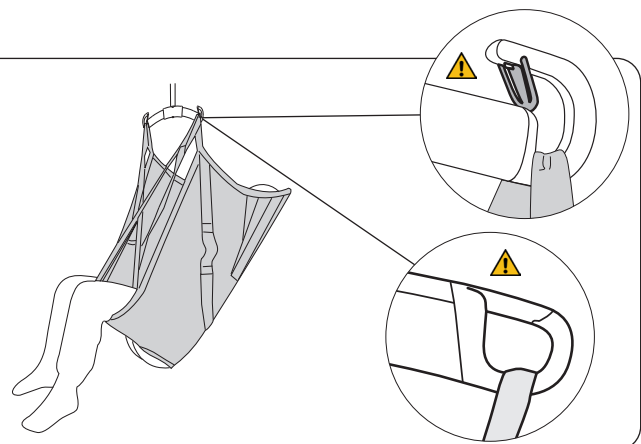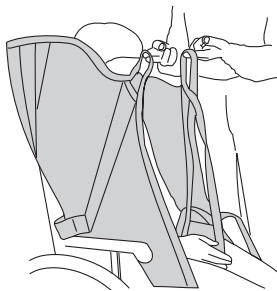Valmistele jalkatukien kiinnitys. Yleisin tapa kiinnittää jalkatuot on asettaa ne ristikkäin. Katso vaihtoehtoiset kiinnitystavat sivulta 13.




Vinkki: Tarkista, että kaikki ripustuslenkit ovat saman mittaisia eli samalla korkeudella, kun niitä venytetään ennen nostamista. Säädä nostokankaan asentoa, jos ripustuslenkit eivät ole samalla korkeudella.

Kiinnitä ensin ylemmät hihnalenkit nostokaareen ja kiinnitä sitten jalkatukien lenkit. Katso sivuilta 6–7 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettava.

Nostaminen istuma-asentoon

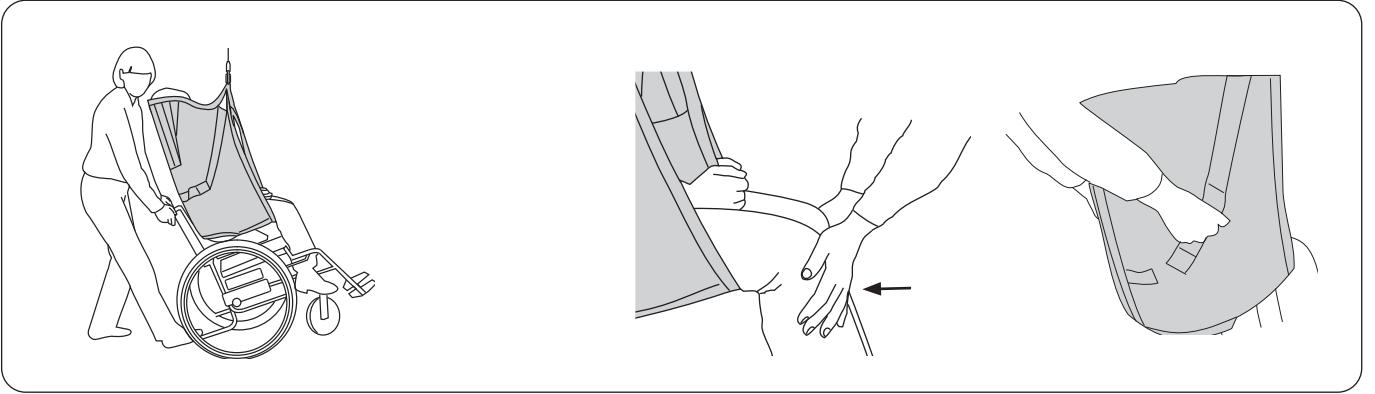Kun avustettava asetetaan pyörätuoliin, on tärkeää, että hänet saadaan istumaan mahdollisimman taakse tuolissa. Tämä voidaan toteuttaa monella eri tavalla.




Kun avustettava asetetaan pyörätuoliin: Kallista tuolia taaksepäin avustettavan alas laskemisen aikana. Anna avustettavan pakaroiden liukua loppuun selkänjojaan saakka. Säädä pyörätuolin kallistuskulmaa pitämällä jalkaasi kaatumistuen päällä.

Vaihtoehto: Alas laskemisen aikana työnnä avustettavaa kevyesti polvien alta niin, että pakarat asettuvat selkänjojaa vasten. Jos nostokankaassa on kädensijat, niitä voi käyttää ohjaimina.

⚠ Älä käytä kädensijoja nostamiseen! Liian suuri kädensijoihin kohdistuva voima voi aiheuttaa nostokankaan repeytymisen.

Nostokankaan poistaminen tuolista/pyörätuolista

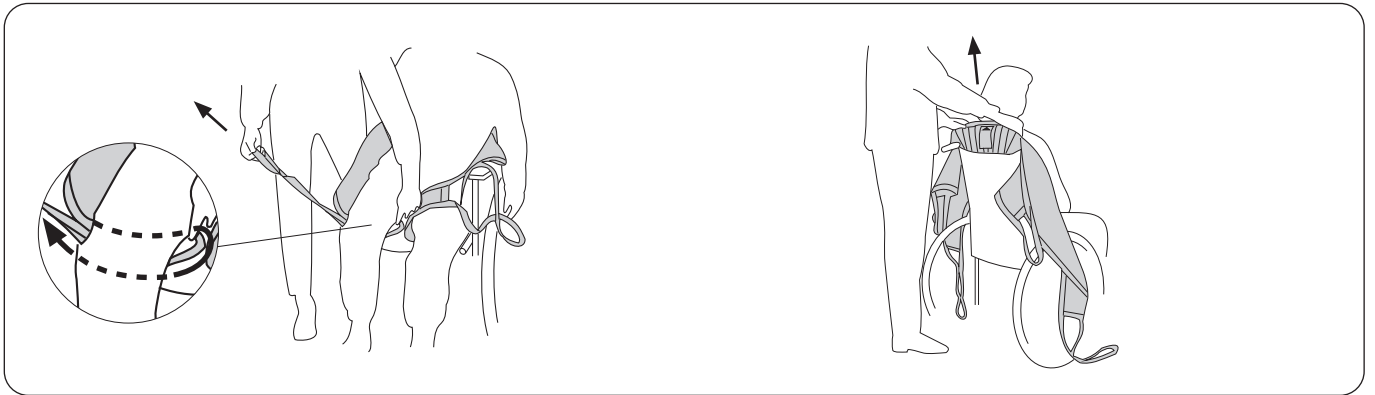Nostokankaan poistaminen siirron jälkeen on suositeltavaa. Jos jostakin syystä on tarkoituksenmukaisempaa jättää nostokangas tuoliin siirron jälkeen, on suositeltavaa käyttää Original HighBack Sling -nostokangasmallia 200/210, joka on valmistettu verkkopolyesteristä.




Poista jalkatuki varovasti. Hellävaraisinta on vetää jalkatuen lenkit pois jalkatuen kangasosan alta.

Poista nostokangas vetämällä varovasti ylöspäin.

Nostaminen sängystä

Nostokangas suositellaan asetettavaksi paikalleen, kun avustettava makaa vaakasuorassa, koska tällöin se on helpointa. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi jos avustettavan ei ole mahdollista maata vaakasuorassa, nostokangas voidaan asettaa avustettavan istuessa sängyllä (katso alla oleva kohta **Nostokankaan vaihtoehtoinen käyttömenetelmä**).

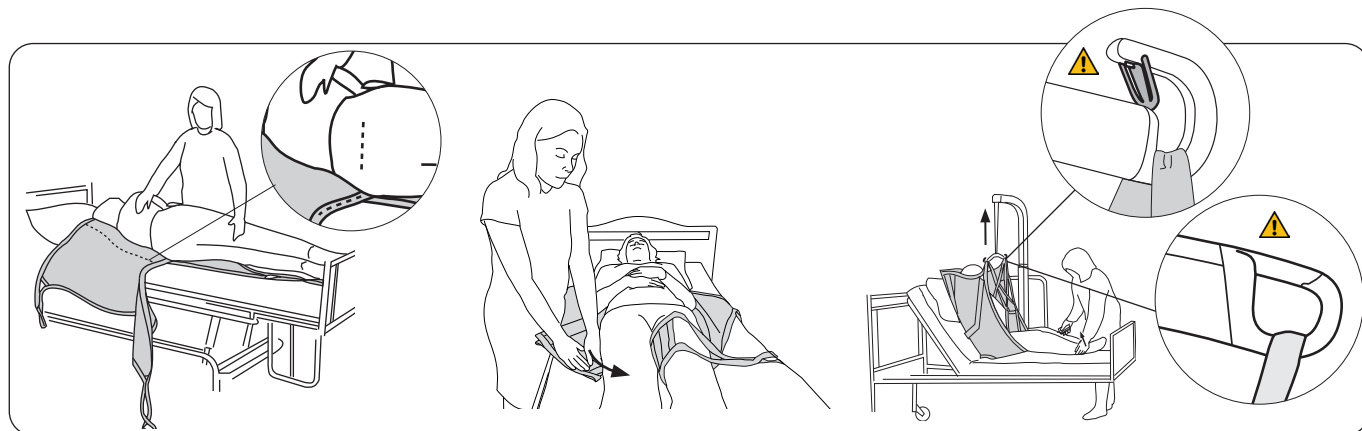Huomioi oma työasentosi ja avustettavan mukavuus. Käytä sängyn nosto- ja laskutoimintoja.



Käännä avustettava itseäsi kohti, jotta hän ei pääse putoamaan sängystä. Aseta nostokankaan reuna avustettavan alle siten, että alareuna on **samalla tasolla häntäluun kanssa**. Taita nostokangas siten, että keskiselkähihnna on avustettavan selkärangan kohdalla, kun hänet käännetään varovasti takaisin selinmakuulle. Vedä nostokangas varovasti esiin toiselta puolelta.

Aseta jalkatuet jalkojen alle. Se tapahtuu helpoimmin painamalla jalkatukea patjaa vasten ja työntämällä se samanaikaisesti avustettavan reiden alle. Varmista, että kangas on suorassa ja tukee jalkaa kunnolla. Jalkatuet voidaan kiinnittää eri tavoilla, katso sivu 13.

Korota sänkyä pään puolelta. Kiinnitä ensin ylemmät hihnalenkit nostokaareen ja kiinnitä sitten jalkatukien lenkit. Katso sivuilta 6–7 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettava.

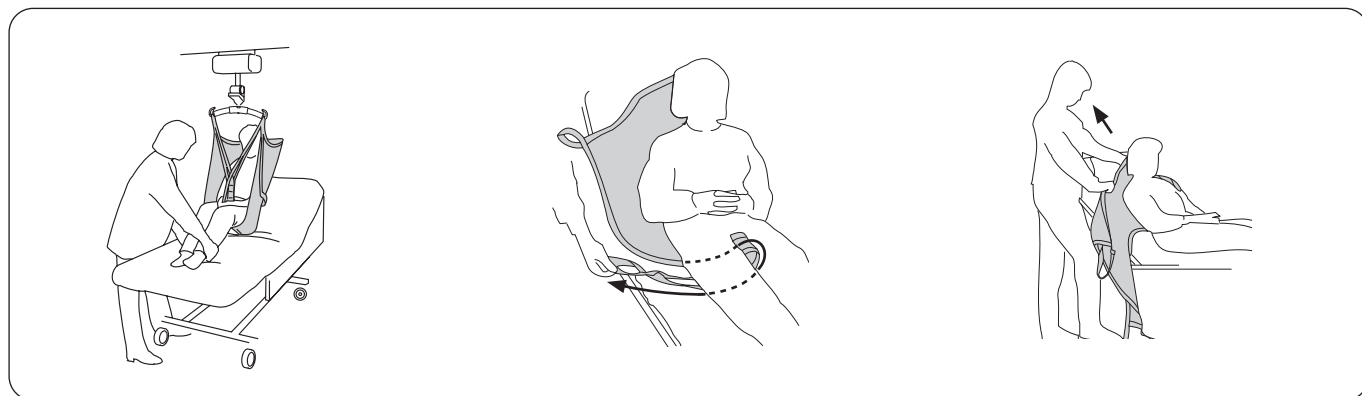
Nostokankaan vaihtoehtoinen käyttömenetelmä: Nosta sänkyä avustettavan pään puolelta. Aseta nostokangas sängyn päälle tuotelappu alaspäin patjaa vasten. Ohjaa nostokangas alas avustettavan selän taakse siten, että alareuna on **samalla tasolla häntäluun kanssa**. **Vinkki!** Nostokankaan asettamista helpottaa, jos avustettava itse kumartuu tai häntä kallistetaan eteenpäin.

Nostaminen sänkyyn

Nostokankaan poistaminen siirron jälkeen on suositeltavaa. Jos jostakin syystä on tarkoituksenmukaisempaa jättää nostokangas sänkyyn siirron jälkeen, on suositeltavaa käyttää Original HighBack Sling -nostokangasmallia 200/210, joka on valmistettu verkkopolyesteristä.

Huomioi oma työasentosi ja avustettavan mukavuus. Käytä sängyn nosto- ja laskutoimintoja.

Nostokankaan poistaminen istuma-asennossa sängyssä




Aseta avustettava sängyn yläpuolelle. Nosta sängyn pääpuolta ylöspäin, jotta avustettavan on mukavampi olla. Laske avustettava sängylle.

Poista jalkatuet vetämällä jalkatukien lenkit jalkatuen kangasosan alta. **Vinkki:** tämä on helpompaa, jos avustettavan jalat ovat koukussa.


Poista nostokangas vetämällä varovasti ylöspäin.

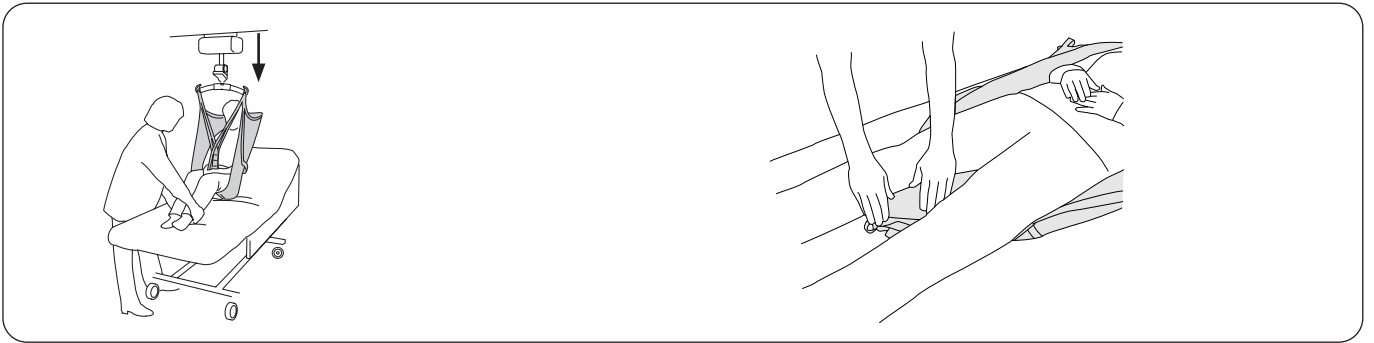Nostokankaan poistaminen makuuasennossa sängyssä



Aseta avustettava sängyn yläpuolelle. Nosta sängyn pääpuolta ylöspäin, jotta avustettavan on mukavampi olla. Laske avustettava sängylle. Laske sängyn pääpuoli alas.

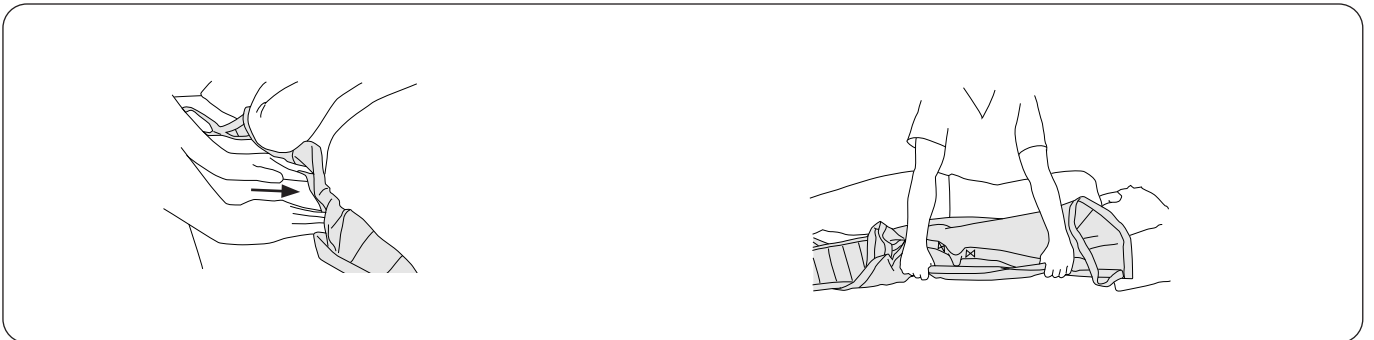Aseta jalkatukien lenkit jalkatukien alle avustettavan jalkojen väliin.




Ota kiinni nostokankaan reunasta. Työnnä nostokankaan reuna kankaan alle. Paina nostokangasta patjaa vasten ja avustettavan alle.

Käännä avustettava varovasti kyljelleen. Ota nostokankaasta kiinni alakautta ja vedä se varovasti pois.

Nostaminen lattialta

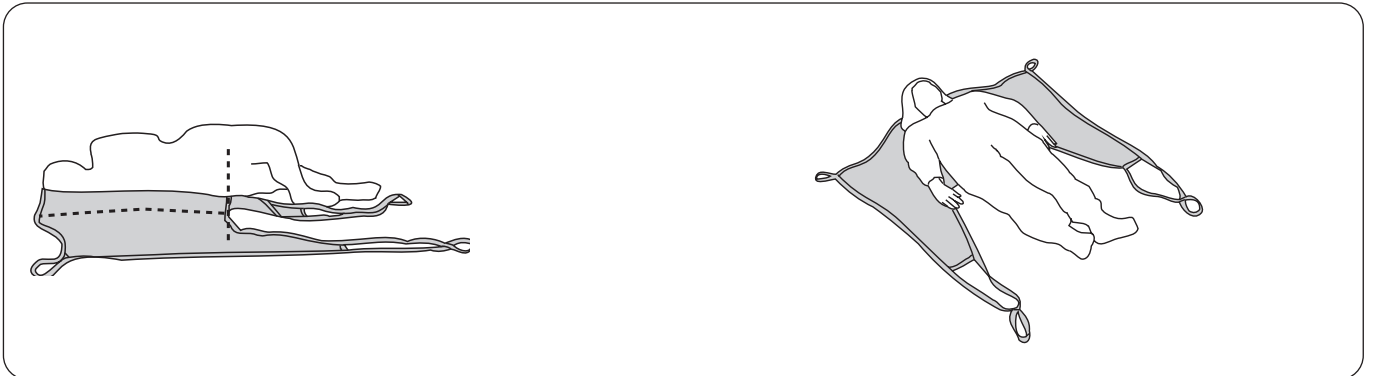
Seuraavassa kuvataan nostamista lattialta Likon liikuteltavalla Golvo™-nostimella. Sama menetelmä soveltuu nostamiseen myös muilla Likon liikuteltavilla ja kiinteillä nostimilla. Lue käytettävän nostimen käyttöohje.



Käännä avustettava varovasti kyljelleen ja aseta nostokankaan reuna avustettavan alle siten, että kankaan alareuna on **samalla tasolla häntäluun kanssa**. Taita nostokangas siten, että keskiselkähihna on avustettavan selkärangan kohdalla, kun hänet käännetään varovasti takaisin selinmakuulle. Vedä nostokangas varovasti esiin toiselta puolelta.

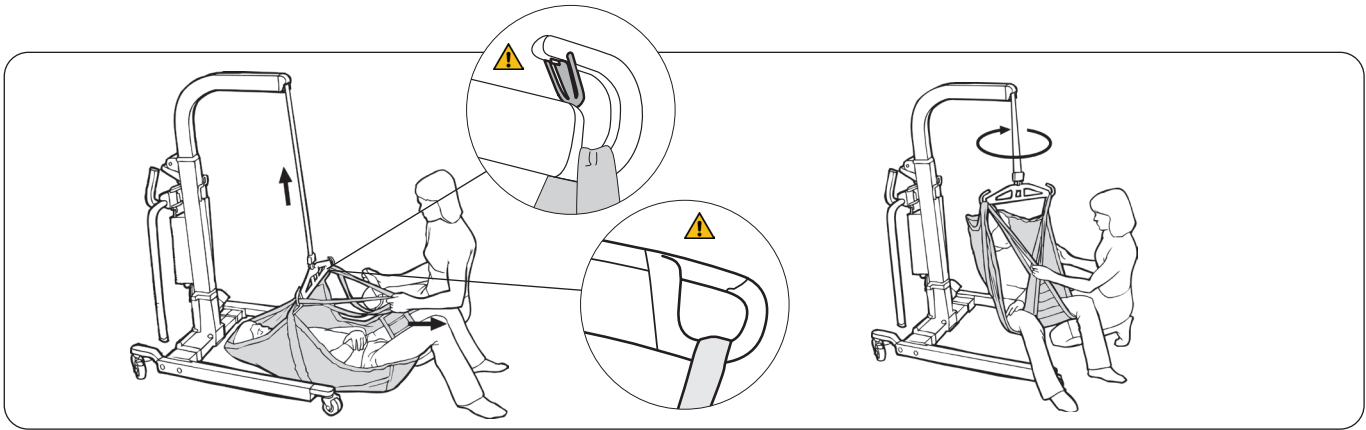Tarkista, että nostokangas on symmetrisesti avustettavan alla, ja korjaa asentoa tarvittaessa. Aseta jalkatuet jalkojen alle.






Suorista jalkatuet avustettavan jalkojen alla. Kiinnitä ensin ylemmät hihnalenkit nostokaareen ja kiinnitä sitten jalkatukien lenkit. Katso sivuilta 6–7 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Varmista, etteivät jalkatuet osu nivusiin, jotta avustettavan on mukava olla. Tämä on helpompaa, jos avustettava koukistaa jalkojaan.

Nosta avustettava lattialta. Avustettavaa voi kääntää hieman, jotta hänen päänsä ei ole liian lähellä nostopylvästä.

⚠ Liikuteltava nostin on lukittava, kun avustettavaa nostetaan niin, että hänen päänsä on nostinta vasten.

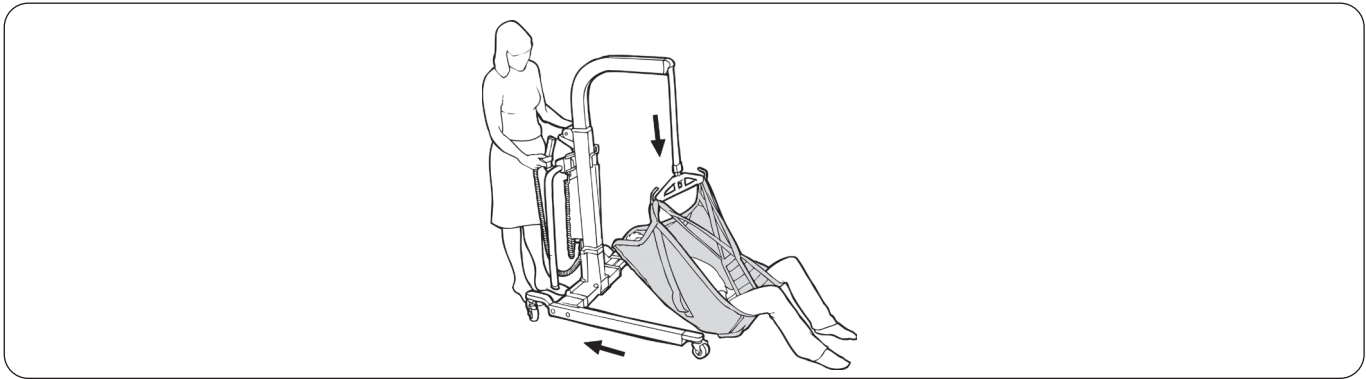
Nostaminen lattialle



Nostettaessa lattialle nostimen pyörät eivät saa olla lukittuina. Kun avustettava koskettaa lattiaa, nostinta vedetään taaksepäin, jotta avustettavan pää ei osu mihinkään. **Vinkki:** Jos avustettava nostetaan ohuelle jumppamatolle, nostimen voi työntää maton alle, jolloin matto toimii pehmusteena nostimen ja avustettavan välissä. Jos nostokangas on tarkoitus poistaa, katso kohta ”Nostokankaan poistaminen makuuasennossa sängyssä” sivulla 11.

Kiinnitysohje

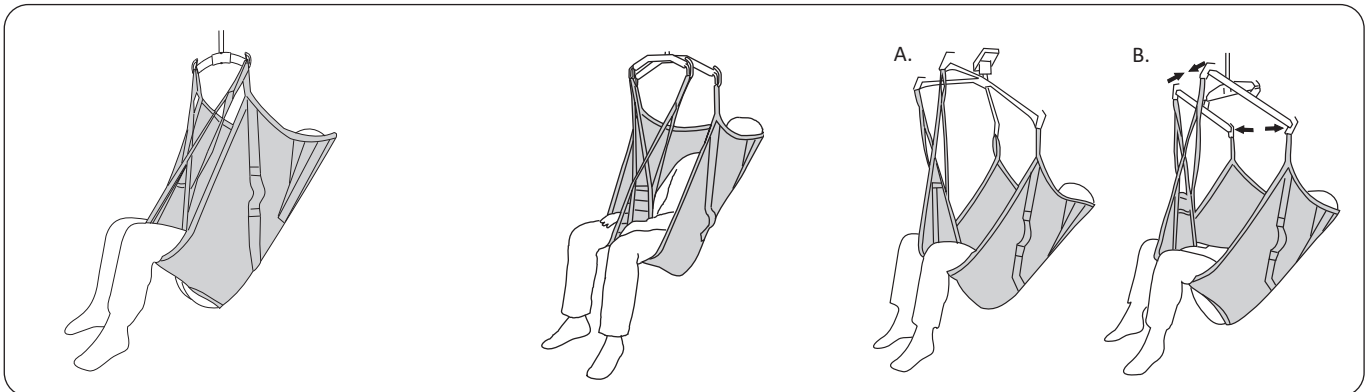Erilaisia istuma-asentoja



Kaksipisteisellä ripustuksella

kiinnitettävässä Soft Original HighBack Sling -nostokankaassa avustettava istuu hieman takakenossa ja kangas tukee päätä erinomaisesti. Lonkkanivel on noin 90 asteen kulmassa.

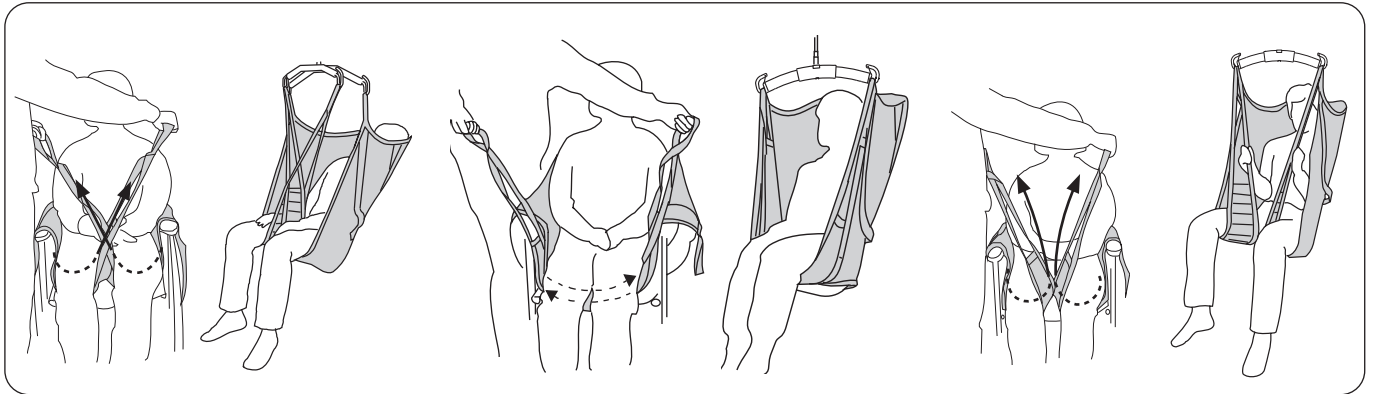
Soft Original HighBack Sling -nostokankaan ja **kaksoisnostokaaren 670** yhdistelmässä nostokangas on väljempi hartioiden kohdalta kuin jalkatukien kohdalta, minkä vuoksi se soveltuu kookkaille avustettaville tai avustettaville, jotka ovat herkkiä hartioihin kohdistuvalle paineelle.

A. Kun nostokangasta käytetään yhdessä **Liko Cross-Bar** -ristikkonostokaaren kanssa, avustettava on hieman enemmän takakenossa ja lonkkanivelen kulma on suurempi.

B. Kun nostokangasta käytetään yhdessä **SideBars-sivukaarien** kanssa, avustettava on hieman enemmän takakenossa ja nostokangas on väljempi hartioiden kohdalta kuin jalkatukien kohdalta. Tämä yhdistelmä soveltuu avustettaville, jotka ovat herkkiä hartioihin kohdistuvalle paineelle.

Erilaisia tapoja jalkatukien kiinnittämiseen

Ennen kiinnitystavan valintaa on aina arvioitava mahdolliset yksilölliset riskit.



Jalkatuet ristikkäin.

Yleisin tapa asetella nostokangas. Yksi jalkatuen lenkki pujotetaan toisen läpi ennen lenkkien kiinnittämistä nostokaareen.

Kietaisu kummankin reiden alta.

Tämä on mahdollista esimerkiksi nostettaessa avustettavaa, jonka jalat on amputoitu.

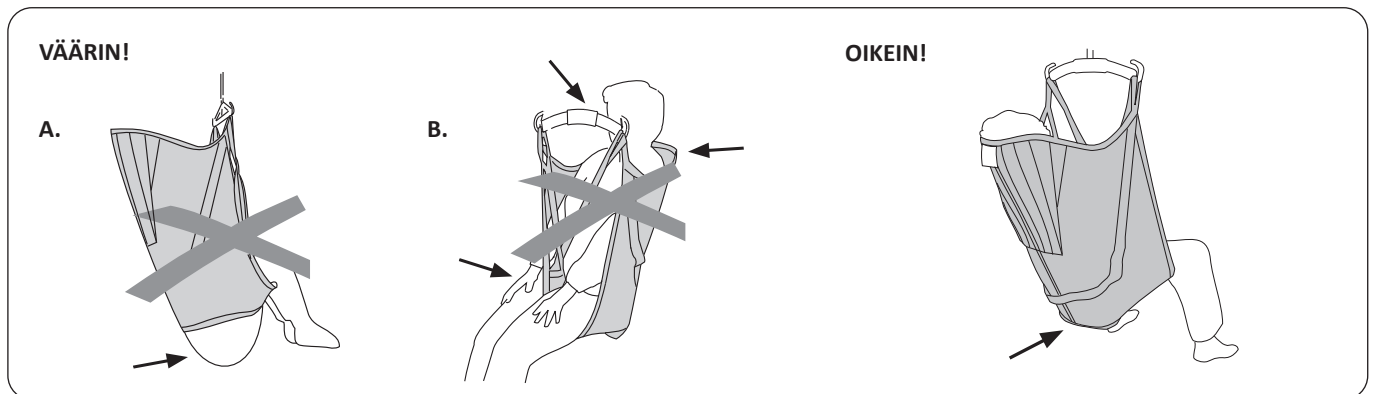
Vinkki: liian takakenoinen istuma-asento vältetään kiinnittämällä jalkatukien lenkkeihin Extension Loop -jatkolenkit.

Kumpikin jalkatuki kiinnitettyinä erikseen nostokaareen.

Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, jos avustettava on erityisen herkkä genitaalialueelta.


⚠️ Suurempi liukumisen riski.

Avustettava ei istu hyvin nostokankaassa – mistä se voisi johtua?



VÄÄRIN!

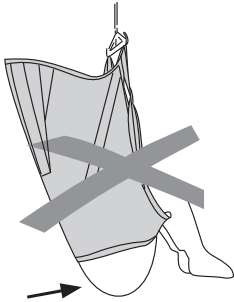
A.



A. Liukumisen riski. Pakarat roikkuvat alhaalla. Nostokangas voi olla liian suuri. Syynä voi olla myös se, ettei nostokangasta ole vedetty riittävän alas avustettavan selkäpuolelta.


Tarkista ennen nostamista, että alareuna on suorassa ja kangas ulottuu kunnolla jalkojen ympäri.

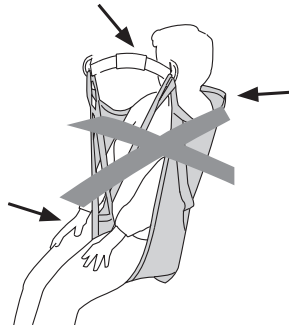B.



B. Liian pieni nostokangas voi aiheuttaa sen, että jalkatuet hiertävät epämukavasti nivusista, nostokaari jää liian lähelle kasvoja ja/tai selkä ei saa riittävästi tukea.

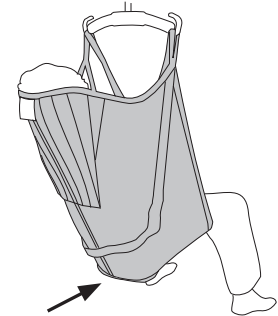OIKEIN!



Nostokankaan alareuna on samalla tasolla häntäluun kanssa. Jalkatuet on asetettu oikein jalkojen alle.


Lyhennysasento

Joissakin tapauksissa voi olla hyvä lyhentää jalkatukien lenkkejä, jotta avustettava saa tukevan asennon Soft Original HighBack Sling -nostokankaassa. Lyhennysasentoa voidaan käyttää tilapäisesti oikean pituuden löytämiseksi, mutta pitkittynyt käyttö voi vahingoittaa saumakohtia. Jos haluat lyhentää jalkatukien lenkkejä pitkäaikaista käyttöä varten, on suositeltavaa, että solmit lenkkiin solmun, jolloin se lyhenee noin 10 cm. Tässä tapauksessa ulompi jalkatuen lenkki kiinnitetään nostokaareen.

Lisävarusteet

Extension Loop, vihreä, 12 cm
 Extension Loop, vihreä, 22 cm
 Extension Loop, harmaa, 12 cm
 Extension Loop, harmaa, 22 cm

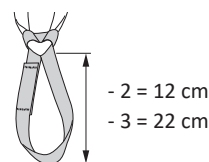Tuotenumero 3691102
 Tuotenumero 3691103
 Tuotenumero 3691302
 Tuotenumero 3691303



Tuotekuvaus – Liko™ Soft Original HighBack Sling, malli 26

Tuote	Tuotenumero	Koko		Avustettavan paino ¹	Enimmäiskuormitus
Soft Original HighBack Sling	3526111	MS	Keskikoinen kapea (hoikka aikuinen)	30–50 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526115	M	Keskikokoinen	40–80 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526116	L	Suuri	70–120 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526117	XL	Erittäin suuri	110–250 kg	500 kg
Soft Original HighBack Sling	3526118	XXL	Suurin	200– kg	500 kg

¹ Ilmoitetut avustettavien painot ovat suuntaa antavia. Eroja voi esiintyä.

² Enimmäiskuormituksen edellytyksenä on, että nostin/lisävarusteet kestävät vähintään saman suuruisen kuormituksen.

Materiaali

Soft Original HighBack Sling -nostokangas on valmistettu polyesteristä.

Suosittelut käyttöyhdistelmät

Suosittelut Liko Soft Original HighBack Sling -nostokankaan ja Likon nostokaarien yhdistelmät:	Mini 220	Nostokaari 350 ³	Standard 450	Nostokaari 450 ¹	Nostokaari 600 ⁴	Kaksoisnostokaari 670 ²	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars -sivukaaret + Universal 350	Univ. SideBars -sivukaaret + Universal 450
Soft Original HighBack Sling, MS	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1
Soft Original HighBack Sling, M	3	2	1	1	3	1	1	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, L	3	3	1	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XL	4	3	2	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XXL	4	4	4	3	3	2	4	1	4	2

¹ Nostokaari 450 viittaa Universal SlingBar -nostokaareen 450 (tuotenumerot 3156075, 3156085 ja 3156095) ja SlingGuard 450 -nostokaareen (tuotenumerot 3308020 ja 3308520).

² Kaksoisnostokaari 670 viittaa Universal TwinBar 670 -nostokaareen (tuotenumerot 3156077 ja 3156087) ja SlingGuard 670 Twin -nostokaareen (tuotenumerot 3308040 ja 3308540).

³ Nostokaari 350 viittaa Universal SlingBar 350 -nostokaareen (tuotenumerot 3156074, 3156084 ja 3156094).

⁴ Nostokaari 600 viittaa Universal SlingBar 600 -nostokaareen (tuotenumerot 3156076 ja 3156086).

Selitys: 1 = Suositeltava, 2 = Mahdollinen, 3 = Ei suositeltava, 4 = Sopimaton

Muut yhdistelmät

Muiden kuin Likon suosittelemien lisävarusteiden tai tuotteiden yhdistelmäkäyttö voi vaarantaa avustettavan turvallisuuden.



www.hillrom.com

Liko AB
 Nedre vägen 100
 975 92 Luleå, Ruotsi
 +46 (0)920 474 700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
 patients and their caregivers:

Hill-Rom