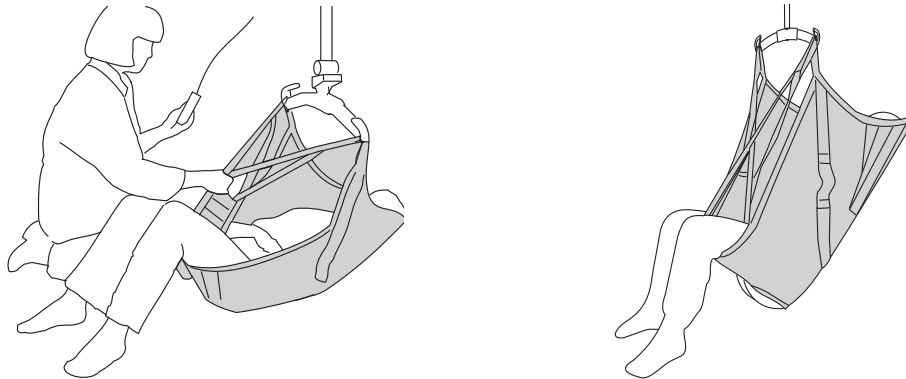


Gebruiksaanwijzing



Productbeschrijving

De Liko Soft Original HighBack Sling is een standaardmodel, ontworpen voor aanpassing aan de patiënt zonder individuele aanpassingen. Het is een van onze meest gebruikte tilbanden.

Het zorgt voor een semi-achteroverzittende houding en biedt een uitstekende ondersteuning voor het gehele lichaam; dit is goed voor patiënten met een verminderde stabiliteit van hoofd en romp. Een goed passende en zorgvuldig aangebrachte tilband geeft de patiënt een uitstekend gevoel van veiligheid en een hoog niveau van comfort.

De Soft Original HighBack Sling kan worden gebruikt voor alle veelvoorkomende tilsituaties. De zachte, verstevigde Soft-hoofdsteun biedt extra comfortabele ondersteuning voor het hoofd als de patiënt zit of ligt.

Materialen

De Soft Original HighBack Sling is gemaakt van polyester. Polyester is duurzaam en heeft weinig wrijving, waardoor de tilband gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen is.

Mocht u een bijpassende tilband van ander materiaal willen, raden we aan te kiezen voor de Original HighBack Sling, mod. 200/210. De Original HighBack Sling is verkrijgbaar in netpolyester, wat wordt aanbevolen als de tilband na het verplaatsen in de stoel wordt achtergelaten. Voor baden en douchen is er een netuitvoering met een kunststofcoating beschikbaar, die water doorlaat en gemakkelijk kan worden afgeveegd. Dit materiaal droogt snel, waardoor de patiënt

het niet koud krijgt, zoals kan gebeuren bij vochtabsorberende stof.

De liftbanden van de tilband zijn altijd gemaakt van duurzaam polyester en zijn bijzonder veilig.

Maten

De Soft Original HighBack Sling is verkrijgbaar in verschillende formaten. Voor de hoogst mogelijke mate van comfort en veiligheid is het belangrijk dat de juiste maat wordt gekozen. Bij een te grote tilband bestaat meer kans dat de patiënt eruit glijdt, en een te kleine tilband kan in de liesstreek snijden en ongemak veroorzaken.

Voor grotere maten kan een combinatie met een TwinBar 670 een goede keuze zijn.

Beensteunen

De Soft Original HighBack Sling heeft beensteunen met versterkte inzetstukken die veel comfort bieden, de druk verdelen en voorkomen dat de tilband onder de dijen gaat plooiën.

Geschikte liften

De Soft Original HighBack Sling kan samen met alle plafondliften en mobiele liften van Liko worden gebruikt. U kunt kiezen tussen de plafondliften LikoGuard™, Likorall™ en Multirall™ of de mobiele liften Golvo™, Viking™, Uno™ en Liko™ M220/M230.

In dit document wordt de persoon die wordt opgetild de patiënt genoemd en de persoon die hierbij helpt de zorgverlener.

BELANGRIJK!




















Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen voor zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn voor de lift die u wilt gebruiken. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. U moet weten of de patiënt het tillen aankan. Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Inhoudsopgave

Symboolbeschrijving	3
Veiligheidsinstructies	4
Verzorging en onderhoud	5
Definities	5
Instructies voor het bevestigen van een tilband aan verschillende tiljukken	6
Instructies voor het bevestigen van een Soft Original HighBack Sling aan een tiljuk met 4 haken (Twin-Bars en Cross-Bars)	7
Tillen vanuit een zittende positie	7
Tillen naar een zittende positie	9
Verwijderen van de tilband in een stoel/rolstoel	9
Tillen vanuit het bed.....	10
Tillen naar het bed	10
Verwijderen van de tilband terwijl de patiënt in bed zit	10
Verwijderen van de tilband terwijl de patiënt in bed ligt	11
Tillen vanaf de vloer	11
Tillen naar de vloer.....	12
Passingsadvies	12
Verschillende zitposities	12
Verschillende manieren van aanbrengen van beensteunen	13
De patiënt zit niet goed in de tilband - hoe komt dit?	13
Ingekorte maat	13
Accessoires	14
Overzicht Liko Soft Original HighBack Sling, mod. 26	14
Aanbevolen combinaties	14

Symboolbeschrijving

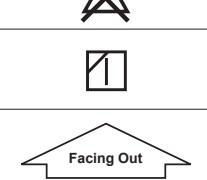Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing: deze situatie vereist extra zorg en aandacht.
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing
	CE-markering
	Juridisch fabrikant
	Productiedatum
	Productidentificatie
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Niet stomen
	Niet strijken
	Drogen in de droogtrommel
	Niet in de droger
	Wassen Het symbool komt altijd voor in combinatie met de aanbevolen temperatuur in °C.
	Latexvrij
	Periodieke inspectie
	Niet bleken
	Drogen aan de waslijn in de schaduw
	Omhoog gericht en symbool aan de buitenkant van de apparatuur.
	Symbool aan de buitenkant van de apparatuur.
	GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten. (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer

Veiligheidsinstructies

Bedenk vóór het tillen het volgende:

- een verantwoordelijke persoon binnen uw organisatie moet per geval besluiten of er een of meerdere zorgverleners nodig zijn.
- zorg ervoor dat de gekozen tilband qua model, maat, materiaal en uitvoering voldoet aan de behoeftes van de patiënt.
- de totale maximale belasting voor een liftstelsel wordt altijd bepaald door het product binnen het stelsel met de laagste gespecificeerde maximale belasting.
- gebruik om veiligheidsredenen en voor de hygiëne individuele tilbanden.
- plan het tillen voordat het wordt uitgevoerd, zodat het zo veilig en soepel mogelijk verloopt.
- controleer of het tilaccessoire verticaal hangt en vrij kan bewegen.
- hoewel de tiljucken van Liko zijn uitgerust met clips, moet er extra voorzichtig te werk worden gegaan. Controleer voordat de patiënt daadwerkelijk getild wordt maar terwijl de banden volledig gestrekt zijn, of de banden correct aan de haken van het tiljuk zijn bevestigd.
- zorg ervoor dat de patiënt goed in de tilband zit voordat deze naar een andere plaats wordt gebracht.
- til een patiënt nooit hoger dan nodig is voor het volledig tillen en verplaatsen.
- laat een opgetilde patiënt nooit zonder toezicht.
- controleer of de wielen van de rolstoel, het bed, de brancard enz., tijdens het tillen/verplaatsen op de rem staan.
- werk altijd ergonomisch. Gebruik de mogelijkheden van de patiënt om actief aan de verplaatsing mee te werken.
- stel de tilband niet bloot aan direct zonlicht als deze niet wordt gebruikt.

 **Een onjuiste bevestiging van de tilband aan het tiljuk kan ernstig letsel bij de patiënt veroorzaken.**

 **Handmatig draaien van de patiënt in bed kan letsel bij de zorgverlener veroorzaken.**

 Medisch hulpmiddel, productklasse I

OCTROOI www.hillrom.com/patents

Kan beschermd zijn door één of meer octrooien. Raadpleeg de bovenstaande website.

De Hill-Rom-ondernemingen zijn eigenaar van Europese, Amerikaanse of andere octrooien en aangevraagde octrooien.

Productwijzigingen

De producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en informatie over productverbeteringen.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko is gecertificeerd conform de ISO 9001-kwaliteitscertificatie en de daaraan gelijkwaardige ISO 13485-kwaliteitscertificatie voor de medische-hulpmiddelenindustrie.

Liko is ook gecertificeerd conform de milieustandaard ISO 14001.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Verzorging en onderhoud

Controleer de tilband vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigingen:

- materiaal
- banden
- zomen
- draaglussen

⚠ Gebruik geen beschadigde tilaccessoires.

Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Wasinstructies: zie hiervoor het productlabel van de tilband en de bijgevoegde bijlage 'Verzorging en onderhoud Liko-tilbanden'.

Periodieke inspectie

Het product moet minstens om de 6 maanden worden geïnspecteerd. Frequentere inspectie is mogelijk nodig als het product vaker dan normaal wordt gebruikt of gewassen. Zie het Liko-protocol 'Periodieke inspectie Liko-textielproducten'. Voor protocollen kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.

Verwachte levensduur

Het product heeft een verwachte levensduur van 1-5 jaar bij normaal gebruik. De verwachte levensduur is afhankelijk van het materiaal, de gebruiksfrequentie, de wasprocedure en het vervoerde gewicht.

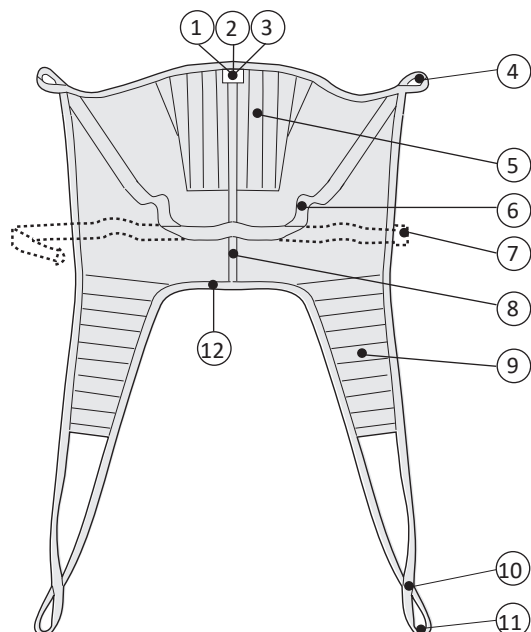
Recyclinginstructies

Het hele product, inclusief baleinen, vulmateriaal enz., moet gescheiden worden afgevoerd als brandbaar afval.

Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan verwijdering. Klanten moeten zich houden aan alle federale, staats-, regionale en/of lokale wetten en voorschriften die gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.

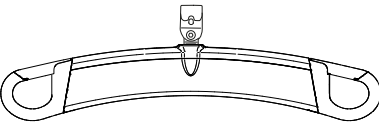
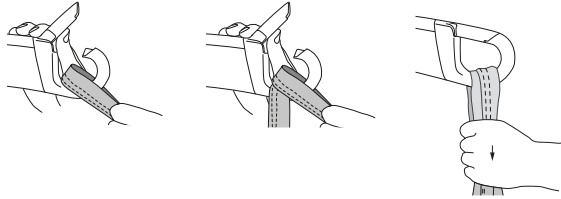
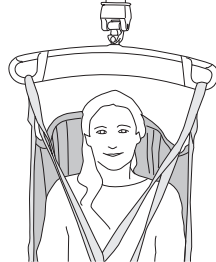
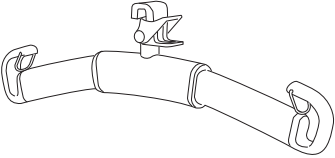
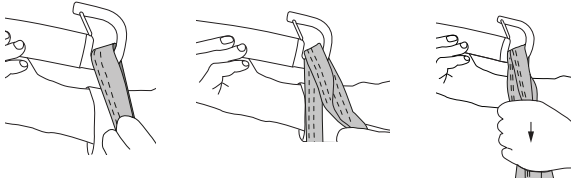

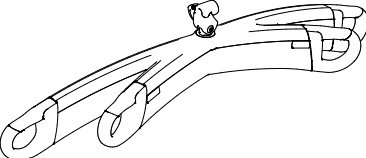
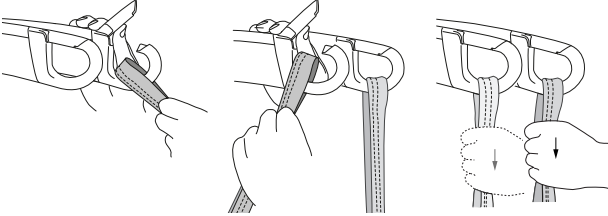
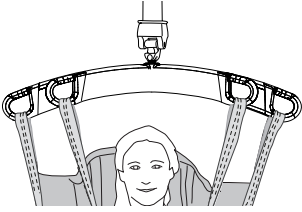
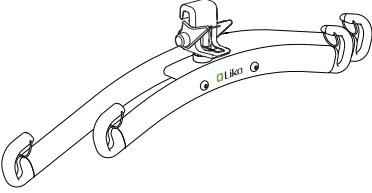
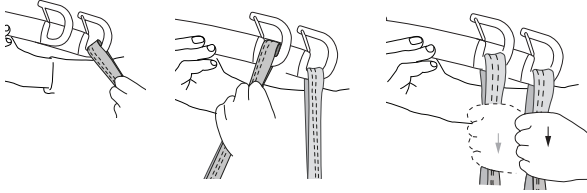
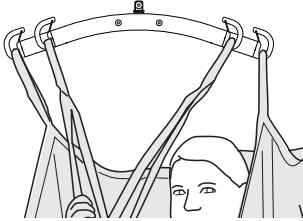
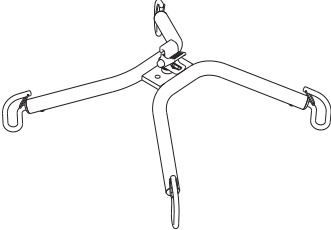
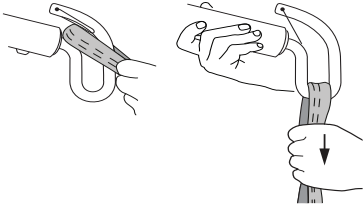
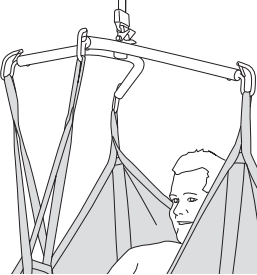
In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hill-Rom voor advies over protocollen voor veilig afvoeren.

Definities




1. Serienummer
2. Productlabel
3. Label: periodieke inspectie
4. Bovenste bandlus
5. Zachte hoofdsteun met baleinen
6. Handgreep
7. Band (waar van toepassing)
8. Middelste rugband/maataanduiding
9. Beensteunen
10. Ingekorte maat
11. Beensteunlussen
12. Onderrand





Instructies voor het bevestigen van een tilband aan verschillende tiljukken

Tiljuk	Tilbandlussen aan tiljukhaken	Goed
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-Bar</p>		

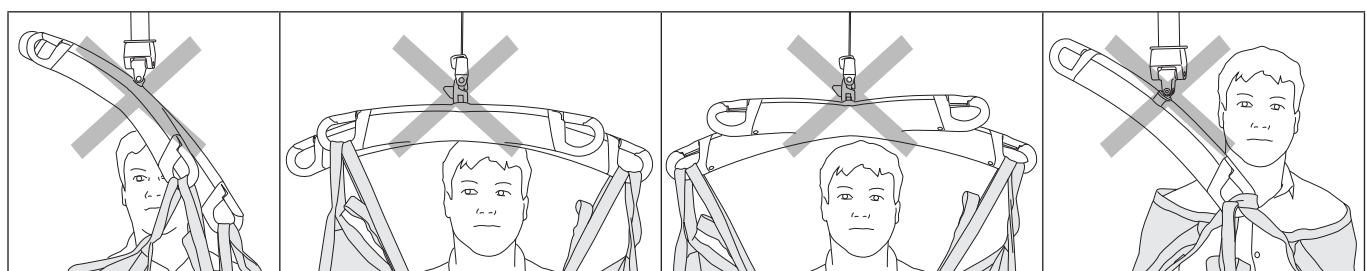Fout!




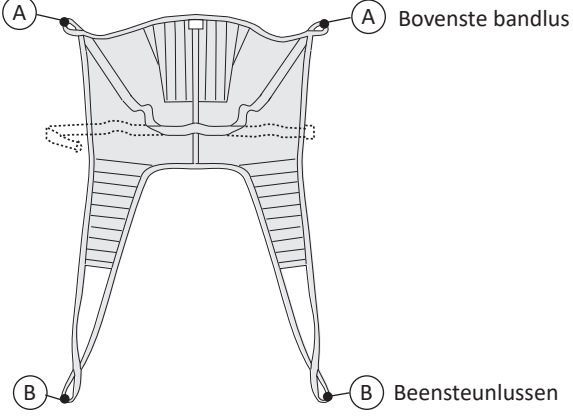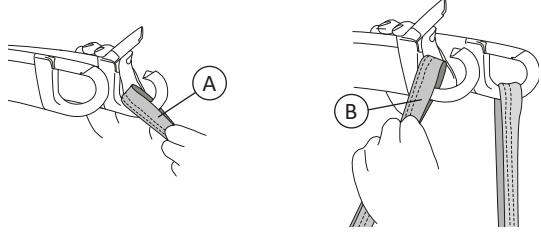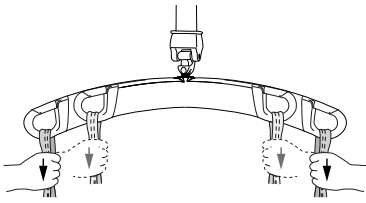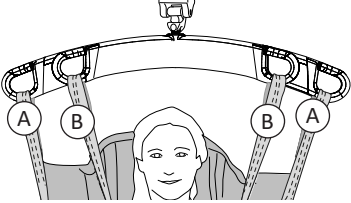Instructies voor het bevestigen van een Soft Original HighBack Sling aan een tiljuk met 4 haken (Twin-Bars en Cross-Bars)

 <p>A Bovenste bandlus</p> <p>B Beensteunlussen</p>	<p>1.</p> 
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>De afbeeldingen 1, 2, en 3 tonen een twinbar maar dit is ook van toepassing op een Cross-Bar.</p>


Tillen vanuit een zittende positie

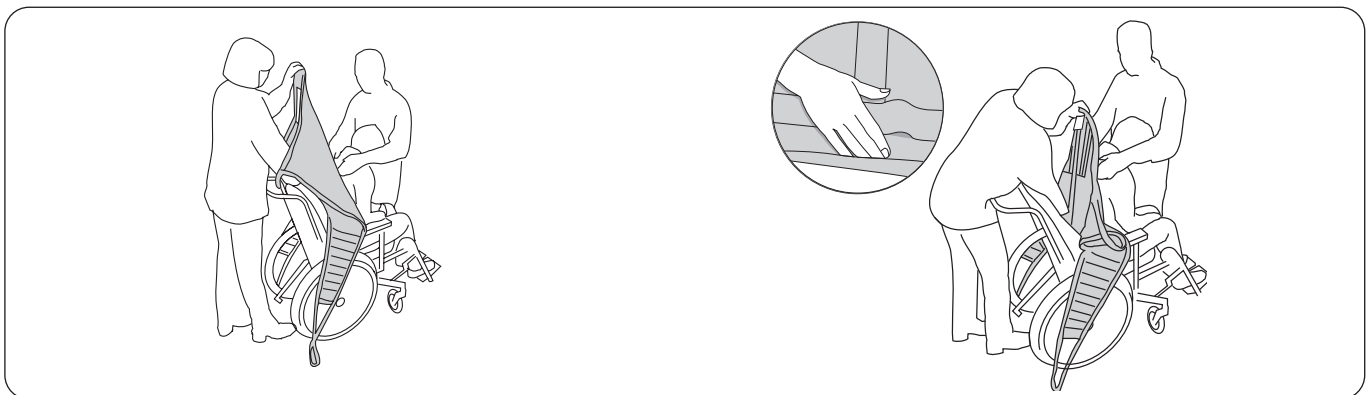Er zijn twee zorgverleners vereist om de tilband volgens de ergonomische principes aan te brengen. De patiënt wordt tijdens het aanbrengen gewoonlijk voorover gehouden, en is het belangrijk dat een zorgverlener dan voor de patiënt staat om te voorkomen dat hij voorover valt.




Plaats de tilband achter de rug van de patiënt, met het productlabel naar buiten. Vouw de onderrand van de tilband om uw vingertoppen om de tilband goed op zijn plaats te leiden.

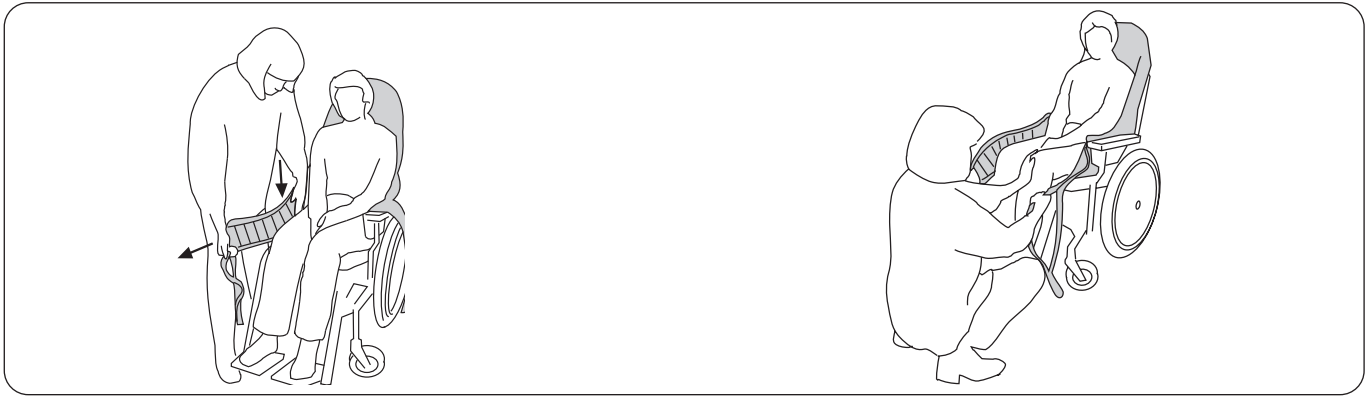Druk de onderrand van de tilband met uw handpalm naar beneden tot de hoogte van het stuitbeen van de patiënt - **dit is zeer belangrijk**. **Tip:** goede positionering gaat makkelijker als de patiënt iets naar voren leunt of naar voren wordt gebracht.




Trek de beensteunen van de tilband naar voren langs de buitenkant van de dijen van de patiënt. Plaats uw handpalm tussen het lichaam van de patiënt en de tilband en duw de onderrand van de beensteun naar beneden in de richting van het zitgedeelte. Trek tegelijkertijd de beensteun naar voren met uw andere hand om deze uit te rekken.

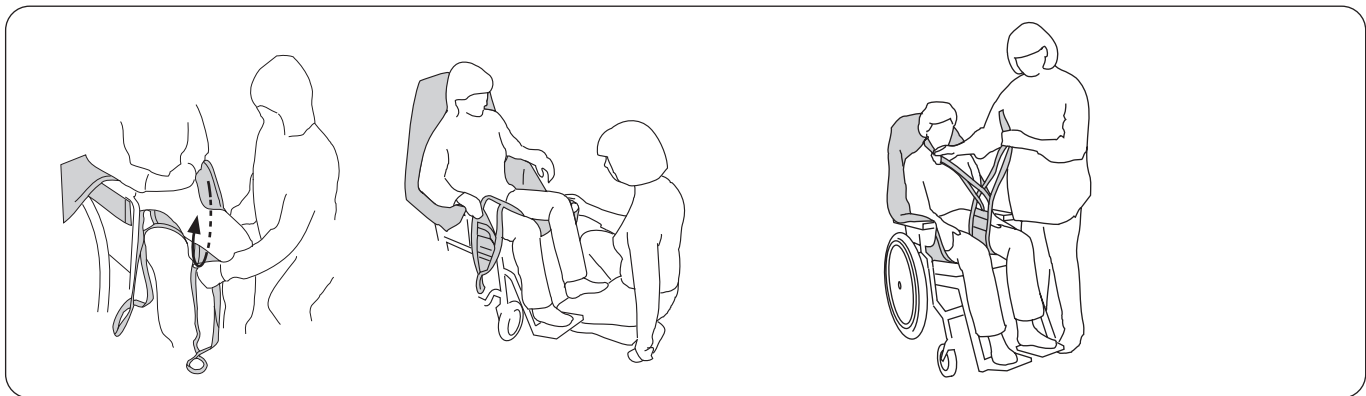Trek de beensteunen naar voren om eventuele vouwen aan de achterkant glad te krijgen. Controleer of beide beensteunen even ver uitsteken. **Tip:** met een beetje steun onder de knieholte kunnen de beensteunen eenvoudiger voorwaarts worden getrokken.



Plaats de beensteunen onder beide dijen. Zorg ervoor dat het materiaal plat ligt en goed rond het been zit. **Tip:** het aanbrengen van de beensteunen is makkelijker als de benen van de patiënt iets hoger zijn dan de stoel. Dit kan worden bereikt door de voeten van de patiënt op de voetensteunen of op uw eigen been te plaatsen, zoals op de afbeelding te zien is.

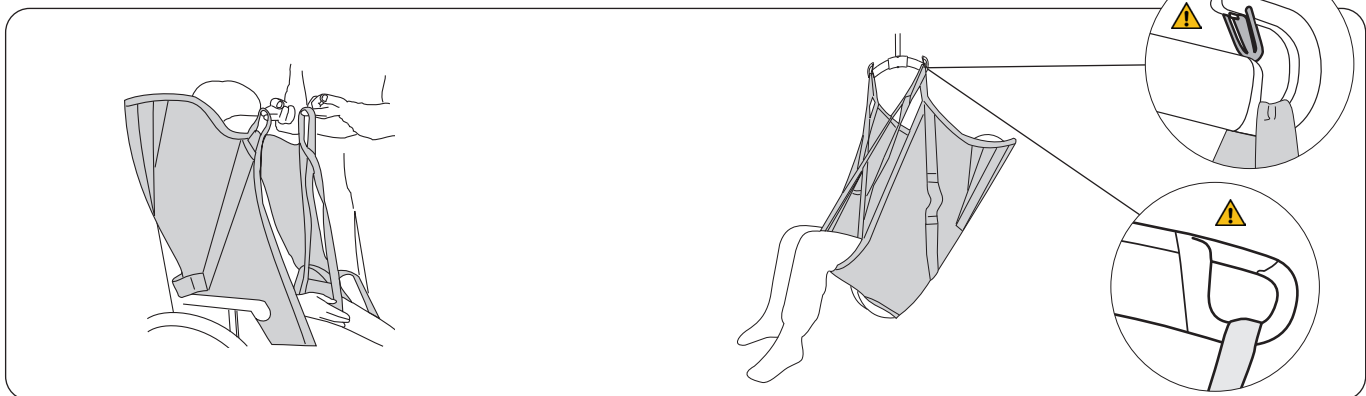Bereid de bevestiging van de beensteunen voor. De meest gebruikelijke manier om de tilband aan te brengen, is met gekruiste beensteunen. Zie pagina 13 voor alternatieve methoden.




Tip: controleer of alle draaglussen dezelfde lengte hebben, d.w.z. op gelijke hoogte zijn wanneer ze worden uitgerekt vóór het tillen. Pas de positie van de tilband aan als ze niet op gelijke hoogte zijn.

Bevestig eerst de bovenste bandlussen aan het tiljuk en vervolgens de beensteunlussen. Zie pagina 6-7 voor instructies voor het bevestigen van de tilbandlussen aan verschillende tiljukken. Til de patiënt.

Tillen naar een zittende positie

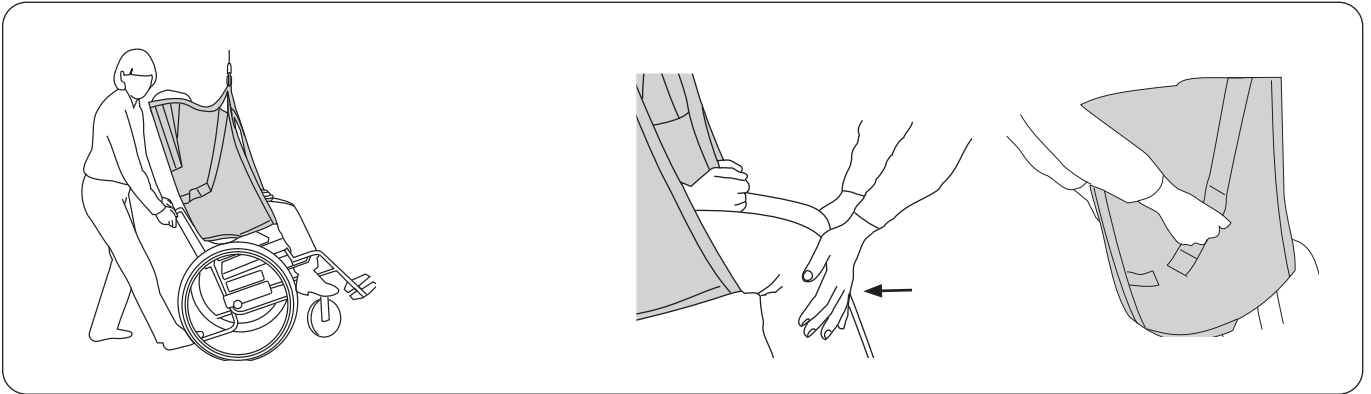Als de patiënt in een rolstoel moet worden geplaatst, is het belangrijk dat hij/zij ver achterin de stoel komt om goed te kunnen zitten. Dit kunt u op verschillende manieren bereiken.




Wanneer u een patiënt in een rolstoel plaatst: laat de rolstoel naar achteren leunen tijdens het laten zakken van de patiënt. Laat de billen tijdens het laatste gedeelte tegen de rugleuning naar beneden schuiven. Bepaal de hoek van de rolstoel met uw voet op de kantelsteun.

Alternatief: druk bij het neerlaten van de patiënt licht onder de knieën van de patiënt zodat het zitvlak richting rugsteun wordt geduwd. Als de tilband handgrepen heeft, kunnen deze worden gebruikt ter geleiding.

⚠ Gebruik de duwhandgrepen niet om te tillen! Te veel druk op de duwhandgrepen kan ertoe leiden dat de tilband scheurt.

Verwijderen van de tilband in een stoel/rolstoel

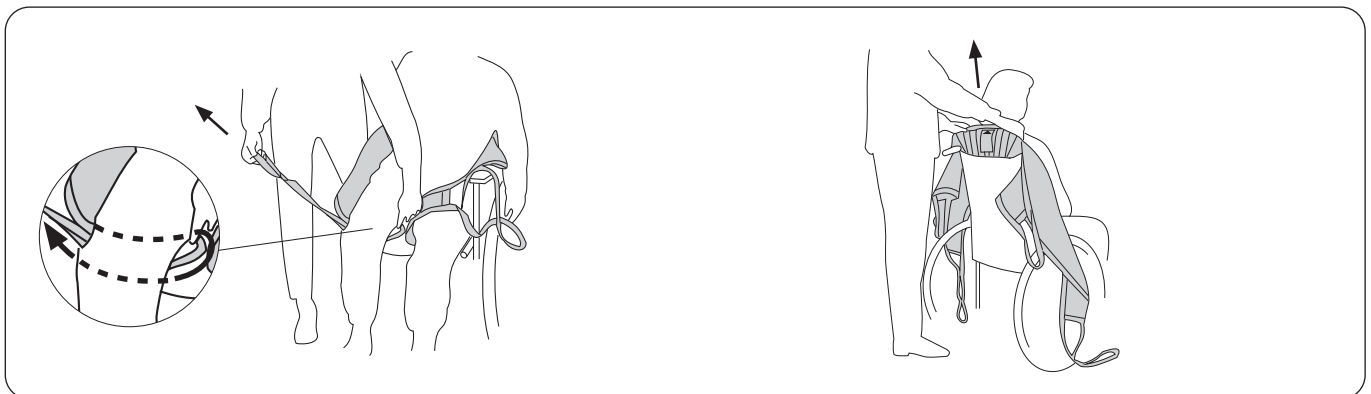Het is raadzaam om de tilband na het verplaatsen te verwijderen. Als het beter is om de tilband na het verplaatsen in de stoel te laten, wordt gebruik van de Original HighBack Sling aanbevolen, mod. 200/210 van netpolyester.




Verwijder de beensteun zorgvuldig. Dit gaat het prettigst door de beensteunlussen onder het stoffen gedeelte van de beensteun door te trekken.

Verwijder de tilband door deze voorzichtig omhoog te trekken.

Tillen vanuit het bed

Het wordt aanbevolen de tilband aan te brengen wanneer de patiënt horizontaal ligt. Dit is de gemakkelijkste procedure. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als de patiënt niet horizontaal kan liggen, kan de tilband worden aangebracht terwijl de patiënt in bed zit (zie **Alternatieve methode voor het aanbrengen van de tilband** hieronder).

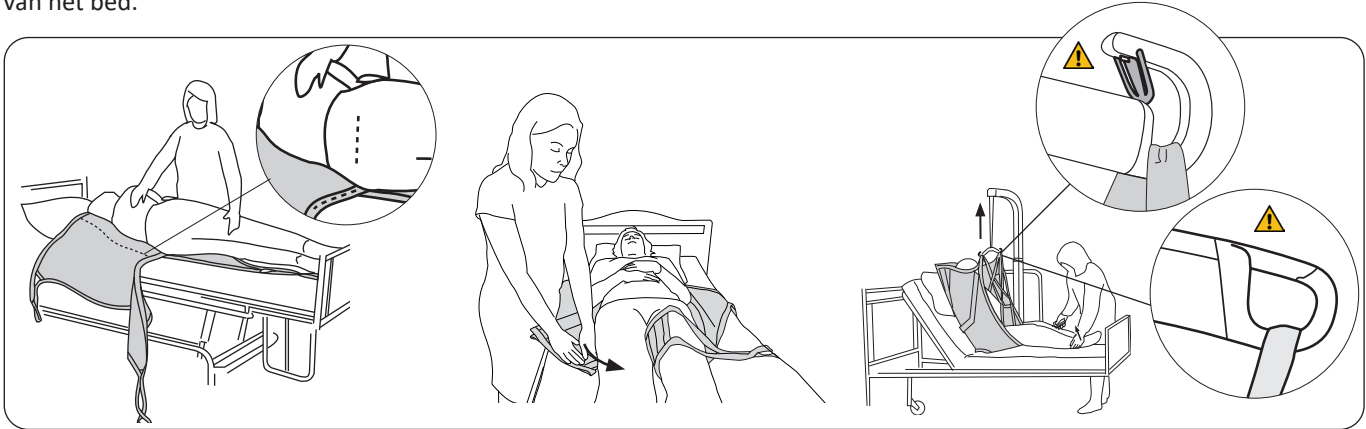Denk aan uw eigen lichaamshouding en het comfort van de patiënt. Gebruik de functies voor het omhoog- en omlaagbrengen van het bed.



Draai de patiënt naar u toe om te voorkomen dat hij/zij uit het bed valt. Plaats de rand van de tilband onder de patiënt met de onderrand **op gelijke hoogte met het stuitbeen**. Vouw de tilband zo dat de middelste rugband achter de ruggengraat van de patiënt ligt wanneer de patiënt weer voorzichtig wordt teruggedraaid. Trek de tilband voorzichtig aan vanaf de andere kant.

Plaats de beensteunen onder de benen. U kunt dit het beste doen door de beensteun omlaag tegen de matras te drukken terwijl u deze onder het dijbeen plaatst. Zorg ervoor dat het materiaal plat ligt en goed rond het been zit. De beensteunen kunnen op verschillende manieren worden bevestigd; zie pagina 13.

Verhoog het hoofdeinde van het bed. Bevestig eerst de bovenste bandlussen aan het tiljuchaken en vervolgens de beensteunlussen. Zie pagina 6-7 voor instructies voor het bevestigen van de tilbandlussen aan verschillende tiljukken. Til de patiënt.

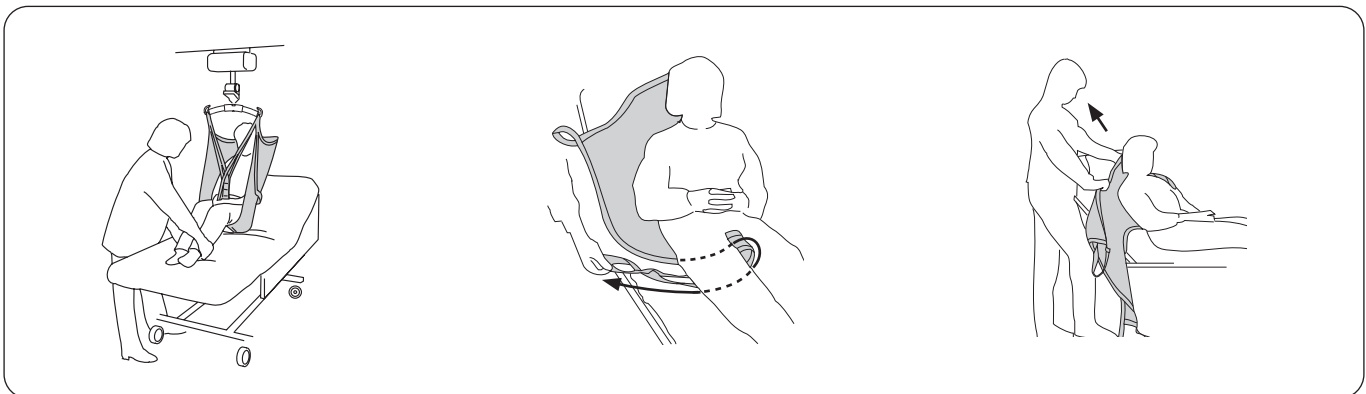
Alternatieve methode voor het aanbrengen van de tilband: verhoog het hoofdeinde van het bed achter de patiënt. Leg de tilband op het bed met het productlabel naar beneden richting de matras. Schuif de tilband naar beneden achter de rug van de patiënt, zodat de onderrand **op gelijke hoogte is met het stuitbeen**. **Tip!** Het aanbrengen gaat makkelijker als de patiënt naar voren leunt of naar voren wordt gebracht.

Tillen naar het bed

Het is raadzaam om de tilband na het verplaatsen te verwijderen. Als het beter is om de tilband na het verplaatsen in het bed te laten, wordt gebruik van de Original HighBack Sling aanbevolen, mod. 200/210 van netpolyester.

Denk aan uw eigen lichaamshouding en het comfort van de patiënt. Gebruik de functies voor het omhoog- en omlaagbrengen van het bed.

Verwijderen van de tilband terwijl de patiënt in bed zit




Positioneer de patiënt boven het bed. Verhoog het hoofdeinde van het bed voor het comfort van de patiënt. Laat de patiënt op het bed zakken.

Verwijder de beensteunen door de beensteunlussen onder het stoffen gedeelte van de beensteun door te trekken. **Tip:** dit gaat gemakkelijker als de benen van de patiënt gebogen zijn.


Verwijder de tilband door deze voorzichtig omhoog te trekken.

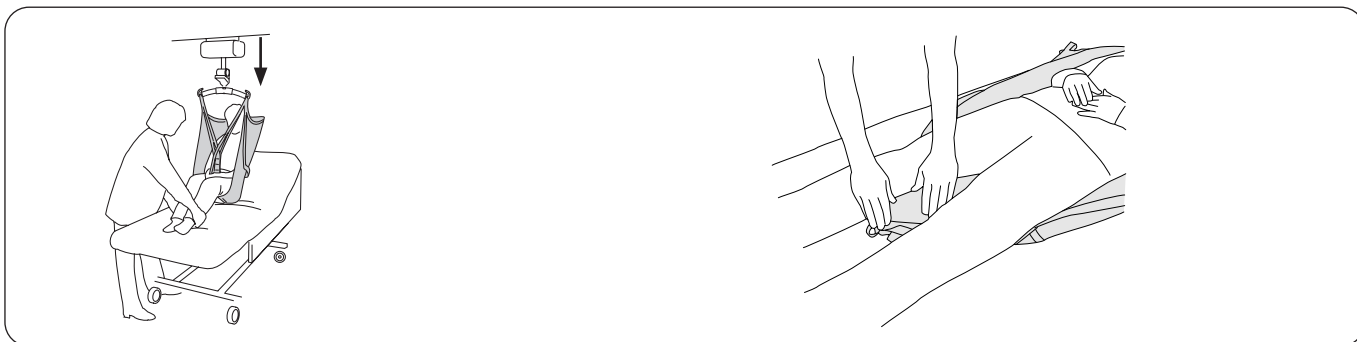Verwijderen van de tilband terwijl de patiënt in bed ligt



Positioneer de patiënt boven het bed. Verhoog het hoofdeinde van het bed voor het comfort van de patiënt. Laat de patiënt op het bed zakken. Laat het hoofdeinde zakken.

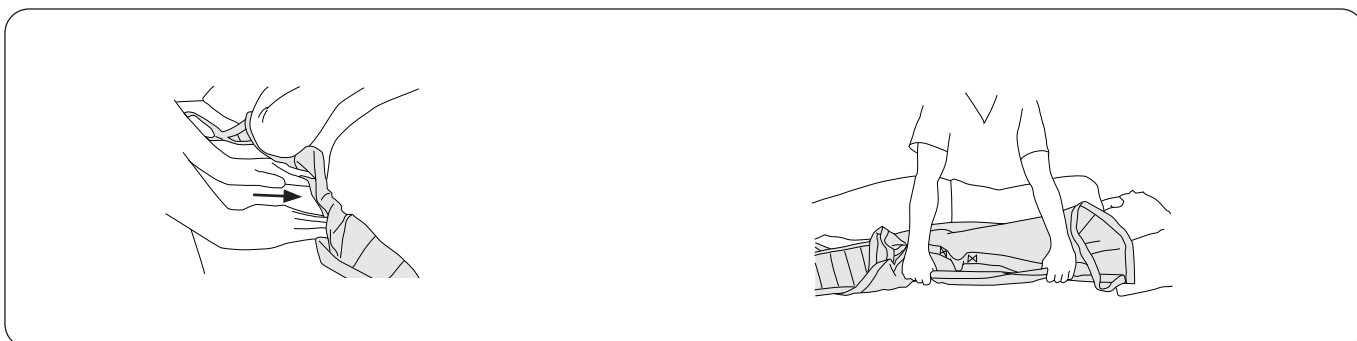Plaats de beensteunlussen onder de beensteunen tussen de benen van de patiënt.




Pak de rand van de tilband vast. Duw de tilband onder zichzelf naar binnen. Druk de tilband tegen de matras en onder de patiënt naar binnen.

Draai de patiënt voorzichtig op de zij. Pak de tilband van onderaf vast en verwijder deze voorzichtig.

Tillen vanaf de vloer

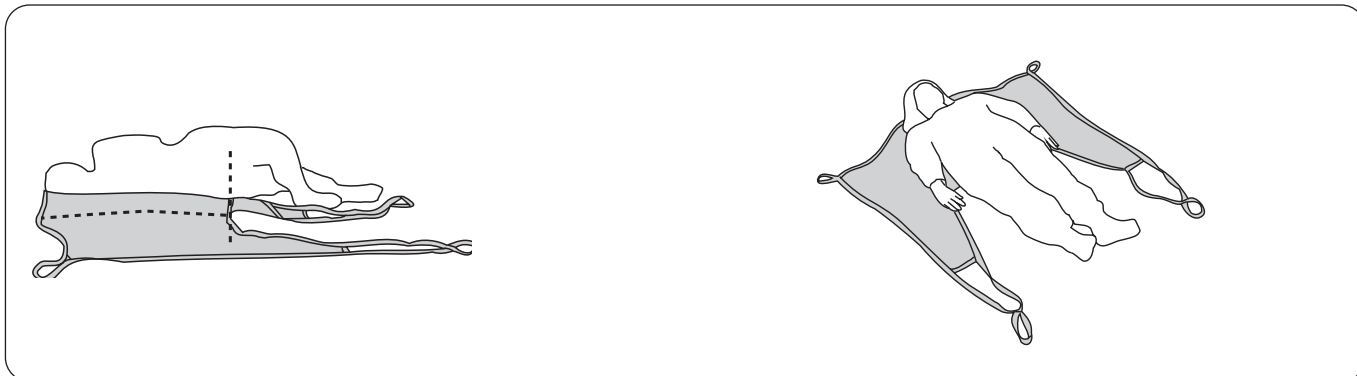
Het tillen vanaf de vloer met de mobiele Liko-lift Golvo™ wordt hieronder beschreven. Dezelfde techniek is ook geschikt voor tillen met de andere mobiele en stationaire liften van Liko. Lees de gebruiksaanwijzing van de gebruikte lift.



Draai de patiënt voorzichtig op de zij en plaats de rand van de tilband onder de patiënt, zodat de onderrand **op gelijke hoogte is met het stuitbeen**. Vouw de tilband zo dat de middelste rugband achter de ruggengraat van de patiënt ligt wanneer de patiënt weer voorzichtig wordt teruggedraaid. Trek de tilband voorzichtig aan vanaf de andere kant.

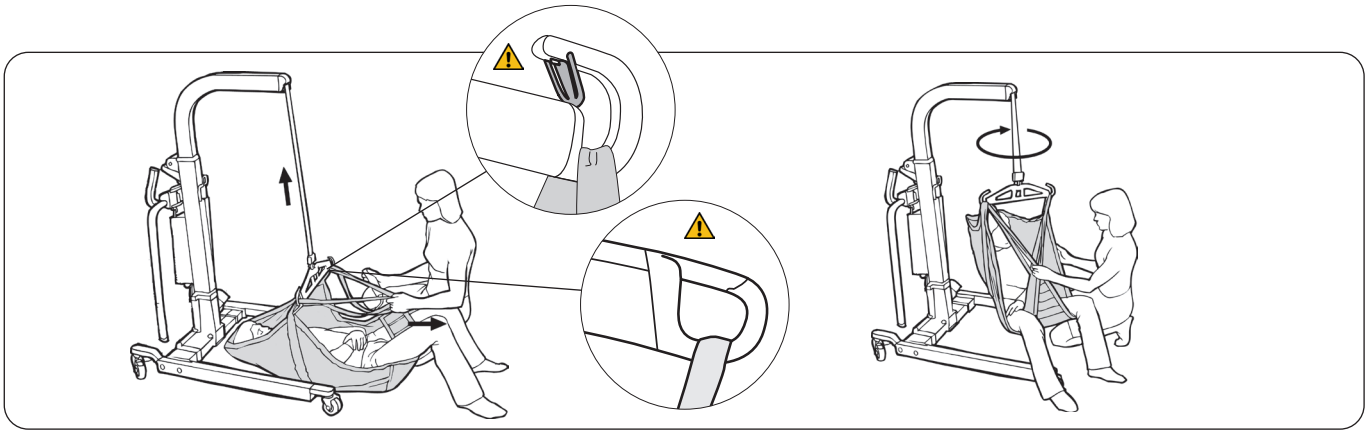Controleer of de tilband symmetrisch onder de patiënt ligt; verander zo nodig de positie. Plaats de beensteunen onder de benen.






Strijk de beensteunen onder de benen van de patiënt glad. Bevestig eerst de bovenste bandlussen aan het tiljuk en vervolgens de beensteunlussen. Zie pagina 6-7 voor instructies voor het bevestigen van de tilbandlussen aan verschillende tiljukken. Houd de beensteunen buiten de liesstreek om ongemak bij de patiënt te voorkomen. Dit gaat gemakkelijker als de benen van de patiënt gebogen zijn.

⚠ Bij het tillen met het hoofd van de patiënt richting de lift moet de mobiele lift vergrendeld zijn.

Til de patiënt vanaf de vloer. De patiënt kan een beetje worden gedraaid om te vermijden dat het hoofd te dicht bij de mast komt.

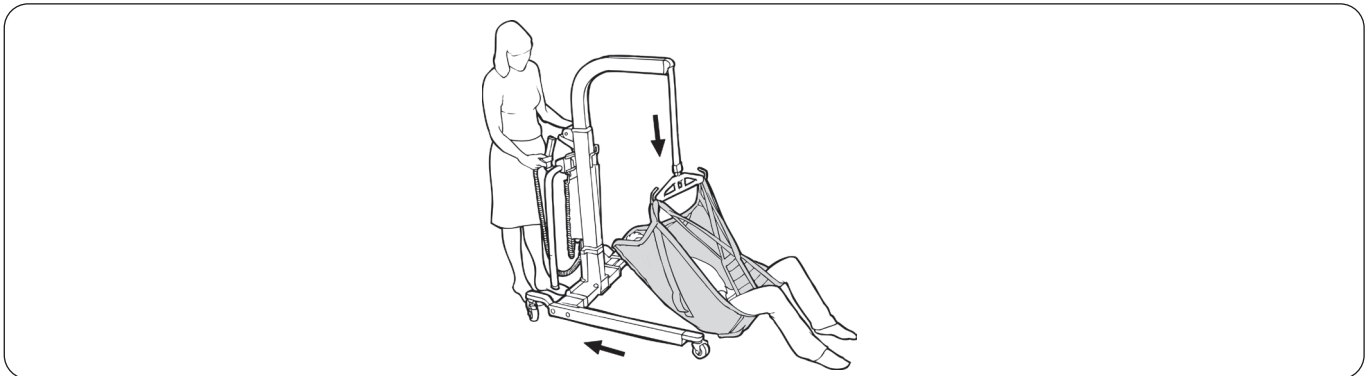
Tillen naar de vloer



Bij het tillen naar de vloer mogen de wielen van de lift niet worden vergrendeld. Wanneer de patiënt de vloer raakt, moet de lift naar achteren worden getrokken om ruimte te maken voor het hoofd. **Tip:** als de patiënt op een dunne sportmat wordt gelegd, kan de lift onder deze mat worden geduwd, zodat de mat als beschermlaag tussen de lift en de patiënt fungeert. Raadpleeg Verwijderen van de tilband terwijl de patiënt in bed ligt, op pagina 11 als de tilband moet worden verwijderd.

Passingsadvies

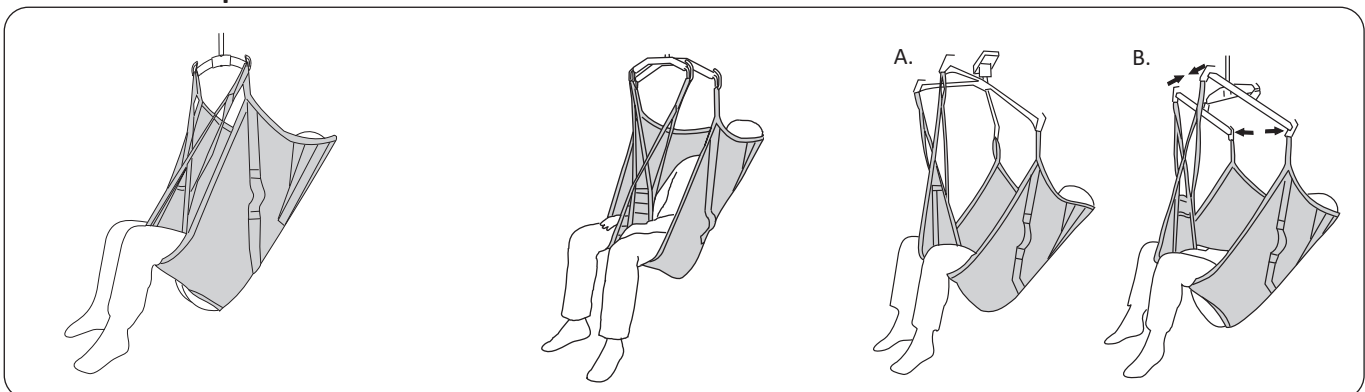Verschillende zitposities



De Soft Original HighBack Sling met **tweepunts-ophanging** zorgt voor een licht achteroverzittende houding, met een uitstekende ondersteuning voor het hoofd en ongeveer 90 graden buiging in het heupgewricht.

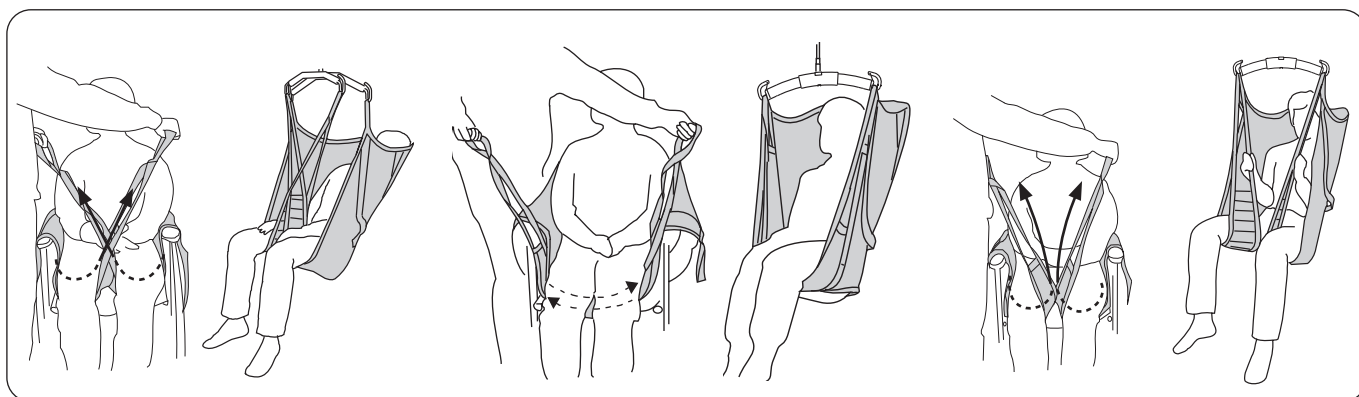
De Soft Original HighBack Sling in combinatie met een **twin bar 670** zorgt voor meer breedte bij de schouders dan bij de beensteunen; dit is beter wanneer de patiënt groot is of gevoelig is voor druk op de schouders.

A. Een combinatie met de Liko **Cross-bar** zorgt voor een wat meer achteroverliggende houding en een grotere buighoek in het heupgewricht.

B. Een combinatie met **SideBars** zorgt voor een wat meer achteroverliggende houding en meer breedte bij de schouders dan bij de beensteunen; dit is beter als de patiënt gevoelig is voor druk op de schouders.

Verschillende manieren van aanbrengen van beensteunen

Voordat een alternatieve bevestiging wordt gekozen, moet deze individueel worden beoordeeld op mogelijke risico's.



Gekruiste beensteunen.

Dit is de meest gebruikelijke manier van aanbrengen van de tilband. Eén beensteunlus wordt door de andere gevoerd voordat de lussen aan het tiljuk worden bevestigd.

Overlappend onder beide dijen.

Dit kan de juiste manier zijn bij bijvoorbeeld het tillen van een patiënt met geamputeerde benen.

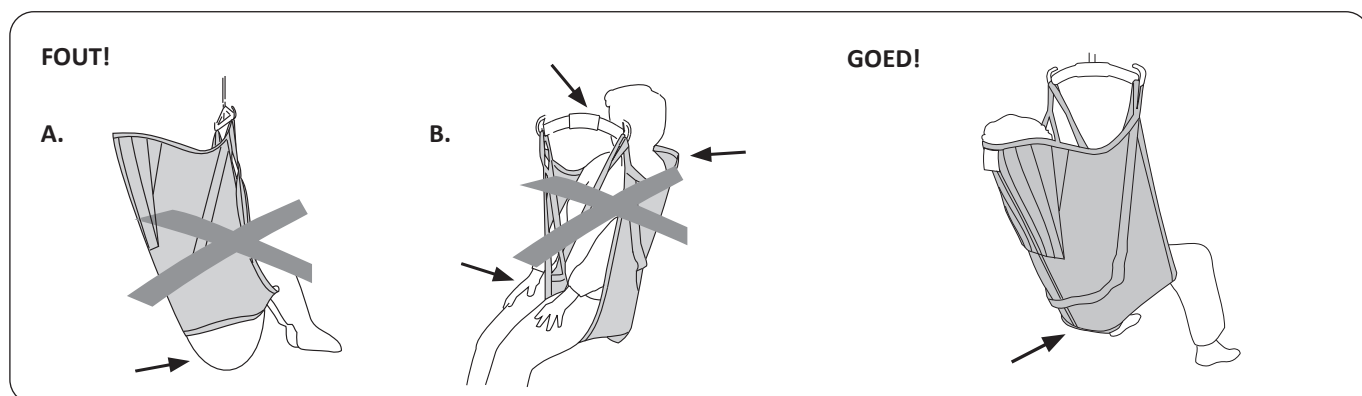
Tip: om te voorkomen dat de patiënt te veel achterover komt te zitten, kunnen er Extension Loops aan de beensteunlussen worden bevestigd.

Elke beensteun wordt afzonderlijk aan het tiljuk bevestigd.

Dit kan de juiste manier zijn bij het tillen van patiënten met bijzonder gevoelige geslachtsorganen.

⚠ Verhoogd risico op uit de tilband glijden.

De patiënt zit niet goed in de tilband - hoe komt dit?



A. Risico op uit de tilband glijden. De billen hangen naar beneden. De tilband is mogelijk te groot. Het kan ook komen doordat de tilband niet voldoende over de rug van de patiënt naar beneden is getrokken.

Controleer vóór het tillen of de onderrand gestrekt is en of het materiaal goed rond de benen ligt.

B. Door een te kleine tilband kunnen de beensteunen de liezen beknellen; dit kan ongemak veroorzaken, het tiljuk kan te dicht bij het gezicht komen en/of de rug krijgt onvoldoende ondersteuning.

De onderrand van de tilband bevindt zich op dezelfde hoogte als het stuitbeen. De beensteunen zijn correct onder de benen gepositioneerd.


Ingekorte maat

In bepaalde gevallen is het voor een goede zitpositie van de patiënt in de Soft Original HighBack Sling beter om de beensteunlussen in te korten. De ingekorte maat kan tijdelijk worden gebruikt om de juiste lengte te testen, maar bij langdurig gebruik kunnen de bartacks beschadigd raken. Als u de beensteunlus echter wilt verkorten voor langdurig gebruik, is het raadzaam een knoop in de lus te leggen om deze ongeveer 10 cm in te korten. In dit geval moet de buitenste beensteunlus op de tilband moet worden aangesloten.

Accessoires

Extension Loop, groen, 12 cm
 Extension Loop, groen, 22 cm
 Extension Loop, grijs, 12 cm
 Extension Loop, grijs, 22 cm

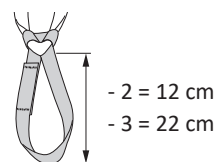productnr. 3691102
 productnr. 3691103
 productnr. 3691302
 productnr. 3691303



Overzicht Liko™ Soft Original HighBack Sling, mod. 26

Product	Productnr.	Maat		Gewicht patiënt ¹	Max. belasting
Soft Original HighBack Sling	3526111	MS	M/smal (slanke volwassene)	30-50 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526115	M	Medium	40-80 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526116	L	Large	70-120 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526117	XL	Extra Large	110-250 kg	500 kg
Soft Original HighBack Sling	3526118	XXL	Extra Extra Large	200- kg	500 kg

¹ Het aangegeven patiëntgewicht is slechts een richtlijn – afwijkingen zijn mogelijk.

² Om de maximale belasting te behouden zijn liften/accessoires vereist met dezelfde of hogere belasting.

Materiaal

De Soft Original HighBack Sling is gemaakt van polyester

Aanbevolen combinaties

Aanbevolen combinaties van de Liko Soft Original HighBack Sling met tiljucken van Liko:	Mini 220	Tiljuk 350 ³	Standard 450	Tiljuk 450 ¹	Tiljuk 600 ⁴	Twin-Bar 670 ²	Sling Cross-Bar 450	Sling Cross-Bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
Soft Original HighBack Sling, MS	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1
Soft Original HighBack Sling, M	3	2	1	1	3	1	1	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, L	3	3	1	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XL	4	3	2	1	3	1	2	1	2	1
Soft Original HighBack Sling, XXL	4	4	4	3	3	2	4	1	4	2

¹ Tiljuk 450 betreft de Universal SlingBar 450, productnr. 3156075, 3156085 en 3156095, en ook SlingGuard 450, productnr. 3308020 en 3308520.

² Twin-Bar 670 betreft de Universal TwinBar 670 productnr. 3156077 en 3156087, en ook SlingGuard 670 Twin productnr. 3308040 en 3308540.

³ Tiljuk 350 betreft Universal SlingBar 350, productnr. 3156074, 3156084 en 3156094.

⁴ Tiljuk 600 betreft Universal SlingBar 600 productnr. 3156076 en 3156086.

Toelichting: 1 = Aanbevolen, 2 = Mogelijk, 3 = Afgeraden, 4 = Ongeschikt

Andere combinaties

Combinaties van accessoires/producten die anders zijn dan de combinaties die worden aanbevolen door Liko kunnen leiden tot risico's voor de veiligheid van de patiënt.



www.hillrom.com

Liko AB
 Nedre vägen 100
 975 92 Luleå, Zweden
 +46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

