

Gebruiksaanwijzing
















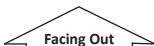


Straps Mod 600 IC worden gebruikt voor het tillen en verplaatsen van patiënten in een horizontale positie. Ze zijn alleen bedoeld voor gebruik met het LikoStretch™ mod 600 IC-accessoire, productnr. 3156065B. Deze banden kunnen gemakkelijk onder de patiënt worden geplaatst zonder dat de patiënt hoeft te worden gedraaid of gerold. Max. belasting is 250 kg onafhankelijk van het aantal gebruikte banden (6-8 stuks).

BELANGRIJK!

Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing van zowel de patiëntlift als het LikoStretch mod 600 IC-accessoire. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Symboolbeschrijving

Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symbol	Beschrijving
	Waarschuwing: deze situatie vereist extra zorg en aandacht.
	CE-markering
	Juridisch fabrikant
	Productiedatum
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing
	Productidentificatie
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Niet stomen
	Niet strijken
	Niet drogen in de droogtrommel
	Wassen Het symbool komt altijd voor in combinatie met de aanbevolen temperatuur in °C en °F.
	Latexvrij
	Niet bleken
	Periodieke inspectie
	Omhoog gericht en symbool aan de buitenkant van het product.
	Symbool aan de buitenkant van het product.
	GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten. (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer

 Medical Device Class I Product

Veiligheidsinstructies

Productwijzigingen

De producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en informatie over productverbeteringen.

Design and Quality by Liko in Sweden

Het Hill-Rom Management-systeem voor zowel de productie en ontwikkeling van het product is gecertificeerd volgens ISO 9001 en het equivalent voor producenten van medische hulpmiddelen, ISO 13485. Het managementsysteem is ook gecertificeerd volgens de milieunorm ISO14001.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Verzorging en onderhoud

Controleer het product vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigingen:

- materiaal
- zomen

⚠ Gebruik geen beschadigde tilaccessoires.

Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Wasinstructies

Zie hiervoor het productlabel van het tilaccessoire en de bijgevoegde bijlage "Verzorging en onderhoud Liko-tilbanden".

Periodieke inspectie

Het product moet minstens om de 6 maanden worden geïnspecteerd. Er kunnen vaker inspecties nodig zijn als het product vaker wordt gebruikt of gewassen dan normaal. Voor protocollen kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.

Verwachte levensduur

Het product heeft een verwachte levensduur van 3 jaar. De verwachte levensduur is gebaseerd op 10 keer per dag gebruiken en één keer per week wassen volgens de wasinstructies. Hill-Rom adviseert het product alleen tijdens de verwachte levensduur te gebruiken.

Recyclinginstructies


De banden moeten worden gesorteerd als brandbaar afval.

Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan het afvoeren. Klanten moeten zich houden aan alle federale, landelijke, regionale en/of lokale wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.

In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hill-Rom voor advies over protocollen over veilig afvoeren.

Overzicht Liko™ Straps Mod 600 IC, 8 stuks

Naam	Productnr.	Materiaal	Lengte	Max. belasting
Straps Mod 600 IC, 8 stuks	3684001	Polyester	140 cm	250 kg

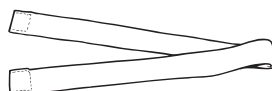

www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Zweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom