

## Bruksanvisning
















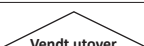
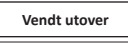

Octo Liftsheet er beregnet for løfting og overføring av brukere i en horisontal stilling. Det er bare ment for bruk med tilbehøret OctoStretch IC, prod.nr. 3156056. Disse stroppene er komfortabelt plassert under pasienten uten å måtte snu eller rulle pasienten. Maks. Belastning 250 kg/sett uavhengig av hvor mange av stroppene (6-8 stk.) som brukes.

### VIKTIG!

Løfting og overføring av en bruker innebærer alltid et visst risikonivå. Les bruksanvisningen for både brukerløfteren og Liko Planløfter Blekkspruten før bruk. Det er viktig å forstå innholdet i bruksanvisningen fullt ut. Utstyret skal bare brukes av kvalifisert personell. Vær varsom og forsiktig under bruk. Som medhjelper er du alltid ansvarlig for brukerens sikkerhet. Hvis noe er uklart, må du ta kontakt med produsenten eller leverandøren.

## Symbolbeskrivelse

Disse symbolene finnes i dette dokumentet eller på produktet.

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Denne situasjonen krever ekstra omsorg og oppmerksomhet.
	CE-merke
	Juridisk produsent
	Produksjonsdato
	Les bruksanvisningen før bruk
	Produkt-ID
	Serienummer
	Medisinsk utstyr
	Ikke rens
	Ikke stryk
	Ikke tørk i tørketrommel
	Vasking Symbolet står alltid sammen med anbefalt temperatur i °C og °F.
	Uten lateks
	Ikke blek
	Periodisk inspeksjon
	Retning oppover og symbol på utsiden av produktet.
	Symbol på utsiden av produktet.
	GS1 Data Matrix-strekkode som kan inneholde følgende informasjon. (01) GTIN (Global Trade Item Number) (11) Produksjonsdato (21) Serienummer

 Medisinsk utstyr, klasse I-produkt

# Sikkerhetsanvisninger

## Produktendringer

Siden Likos produkter er under kontinuerlig utvikling, forbeholder vi oss retten til å gjøre produktendringer uten forutgående varsel. Kontakt Hill-Rom-representanten din hvis du vil ha råd og informasjon om produktoppgraderinger.

## Design and Quality by Liko in Sweden

Styringssystemet for både produksjon og utvikling av produktet er sertifisert i henhold til ISO9001 og den tilsvarende standarden for industrien for medisinsk utstyr, ISO13485. Styringssystemet er også sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO14001.

## Merknad til brukere eller pasienter i EU

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med utstyret, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren eller pasienten er bosatt.

## Tilsyn og vedlikehold

Kontroller produktet før hver bruk. Kontroller følgende punkter med hensyn til slitasje og skader:

- stoff
- sømmer

### Bruk ikke skadet løftetilbehør.

Hvis noe er uklart, må du ta kontakt med produsenten eller leverandøren.

## Vaskeanvisninger

Se produktetiketten på løftetilbehøret og det vedlagte tillegget «Vedlikeholdsråd for Likos løfteseil».

## Periodisk inspeksjon

Produktet må inspiseres minst én gang hver 6. måned. Hyppigere kontroller kan være nødvendig hvis produktet brukes eller rengjøres oftere enn normalt. Ta kontakt med Hill-Rom-representanten din angående protokoller.

## Forventet holdbarhet

Produktet har en forventet holdbarhet på 5 år. Forventet holdbarhet er basert på 10 bruk per dag og vasking én gang per uke, i henhold til vaskeanvisningene. Hill-Rom anbefaler at produktet kun brukes i løpet av den forventede holdbarheten.

## Instruksjoner for resirkulering


Hele LiftSheet skal sorteres som brennbart avfall.

Hill-Rom vurderer og gir veiledning til sine brukere om sikker håndtering og avhending av utstyret sitt for å bidra til å forebygge skader, herunder kutt, skrubbsår og perforering av huden, samt eventuell nødvendig rengjøring og desinfisering av det medisinske utstyret etter bruk og før avhending. Kunder skal følge alle føderale, delstatlige, regionale eller lokale lover og forskrifter som gjelder for sikker avhending av medisinsk utstyr og tilbehør.


Ved tvil må brukeren av utstyret først ta kontakt med Hill-Roms tekniske støtte for å få veiledning om protokoller for sikker avhending.

## Oversikt Liko™ bånd Mod 600 IC, 8 stk.

Navn	Art.nr.	Materiale	Lengde:	Maks. last
Remmer Mod 600 IC, 8 stk.	3684001	Polyester	140 cm	250 kg

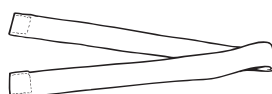

[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

 Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sverige  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

