

Descrizione del prodotto

Il sollevamento di pazienti estremamente pesanti richiede dispositivi e metodi di assistenza sviluppati in modo specifico. Liko ha sviluppato la serie di prodotti Ultra per consentire agli operatori di sollevare i pazienti più pesanti in modo sicuro e confortevole.

UltraSling sostiene l'intera schiena fino alle spalle. Il suo design consente di collegare ciascun supporto per le gambe al bilancino, lasciando più spazio per lo stomaco e fornendo un supporto ottimale per le gambe.

Si raccomanda l'assistenza di almeno due operatori durante il trasferimento.

UltraSling deve essere utilizzato in combinazione con il sistema di sollevamento UltraTwin™ di Liko. A seconda dei singoli accessori utilizzati, il sistema è in grado di sollevare il carico massimo di 500 kg. Sono disponibili versioni del sistema UltraTwin sia per l'installazione permanente che per l'installazione indipendente, ad esempio sul sistema Liko FreeSpan™.





















Nel presente documento verranno definiti "pazienti" le persone sollevate e "operatore" le persone che le aiutano in qualità di operatori sanitari.

IMPORTANTE!

Il sollevamento e il trasferimento di un paziente comportano sempre un certo livello di rischio. Leggere le istruzioni per l'uso del sollevatore e degli accessori di sollevamento del paziente prima dell'uso. È importante comprendere appieno il contenuto delle Istruzioni per l'uso. L'apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente da personale addestrato. Accertarsi che gli accessori di sollevamento siano adatti al sollevatore in uso. Durante l'uso, procedere con la massima cura e prudenza. L'operatore è sempre responsabile della sicurezza del paziente. L'operatore deve essere in grado di valutare la capacità del paziente di affrontare il sollevamento. In caso di dubbi, contattare il produttore o il fornitore.

Descrizione dei simboli

È possibile trovare i seguenti simboli in questo documento e/o sul prodotto.

Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: questa situazione necessita di un livello maggiore di cura e attenzione.
	Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso
	Marchio CE
	Produttore legale
	Data di produzione
	Identificatore del prodotto
	Numero di serie
	Dispositivo medico
	Non lavare a secco
	Non stirare
	Asciugatura a macchina
	Non asciugare a macchina
	Lavaggio Questo simbolo è sempre accompagnato dalla temperatura consigliata espressa in °C e °F.
	Senza lattice
	Ispezione periodica
	Non candeggiare
	Asciugatura su filo all'ombra
	Direzione verso l'alto e simbolo all'esterno dell'attrezzatura.
	Simbolo all'esterno dell'attrezzatura.
 (01) 0100887761997127 (11) AAMMGG (21) 012345678910	Codice a barre Data Matrix GS1 che può contenere le seguenti informazioni. (01) Global Trade Item Number (11) Data di produzione (21) Numero di serie


Avvertenze di sicurezza

Prima del sollevamento, tenere presente i seguenti punti:

- Il responsabile all'interno dell'organizzazione deve decidere caso per caso se è sufficiente un solo operatore o se sono necessari più operatori.
- Verificare che l'imbragatura scelta sia effettivamente adatta al paziente in termini di modello, taglia, tessuto e realizzazione.
- Per motivi di sicurezza e igiene, usare imbragature individuali.
- Pianificare l'operazione di sollevamento al fine di eseguirla nel modo più corretto e sicuro possibile.
- Verificare che l'accessorio di sollevamento sia in posizione verticale e si muova liberamente.
- Anche se i bilancini Liko sono dotati di chiusure, prestare particolare attenzione. Prima di sollevare il paziente dalla superficie sottostante, ma dopo aver disteso completamente i passanti, accertarsi che questi siano correttamente agganciati al bilancino.
- Accertarsi che il paziente sia seduto in sicurezza nell'imbragatura prima di trasferirlo.
- Non sollevare mai un paziente dalla superficie sottostante a un'altezza superiore a quella necessaria per terminare la procedura di sollevamento e di trasferimento.
- Non lasciare mai un paziente da solo durante un sollevamento.
- Accertarsi che le ruote della sedia a rotelle, del letto, della barella, ecc., siano bloccate durante il sollevamento o il trasferimento.
- Lavorare tenendo sempre conto dell'ergonomia. Sfruttare le capacità del paziente per coinvolgerlo attivamente nelle operazioni.
- Quando non è utilizzata, non esporre l'imbragatura alla luce diretta del sole.
- Si consiglia di rimuovere l'imbragatura dopo il trasferimento.

 **Un fissaggio errato dell'imbragatura sul bilancino può causare lesioni gravi al paziente.**

 **La rotazione manuale del paziente a letto può causare lesioni all'operatore.**

 Dispositivo medico di classe I

Modifiche sui prodotti

I prodotti Liko sono in continuo sviluppo e questo è il motivo per cui ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso. Contattare il rappresentante Hill-Rom per consigli e informazioni sugli aggiornamenti dei prodotti.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko ha ottenuto la certificazione qualitativa ISO 9001 e la certificazione qualitativa specifica del settore dei dispositivi medici ISO 13485. Liko è anche certificato secondo lo standard ambientale ISO 14001.

Avviso per gli utenti e/o i pazienti nell'UE

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

Cura e manutenzione

Controllare l'imbragatura prima di ogni uso. Ispezionare i seguenti punti al fine di riscontrare eventuali segni di usura o danneggiamento:

- Tessuto
- Passanti
- Cuciture
- Occhielli

⚠ Non utilizzare accessori di sollevamento danneggiati.

In caso di dubbi, contattare il produttore o il fornitore.

Istruzioni di lavaggio: consultare l'etichetta del prodotto e l'appendice "Cura e manutenzione delle imbragature Liko".

Ispezione periodica

Il prodotto deve essere ispezionato almeno una volta ogni 6 mesi. Potrebbero essere necessarie ispezioni più frequenti nel caso in cui il prodotto sia usato o lavato con una frequenza maggiore del previsto. Per i protocolli, contattare il rappresentante Hill-Rom.

Durata stimata

Il prodotto ha una durata stimata di 1-3 anni con un utilizzo normale. La durata stimata varia a seconda del tessuto, della frequenza d'uso, della procedura di lavaggio e del peso sostenuto.

Istruzioni di riciclaggio

L'intera imbragatura, inclusi stecche di rinforzo, materiale di imbottitura, ecc., deve essere classificata come rifiuto combustibile.

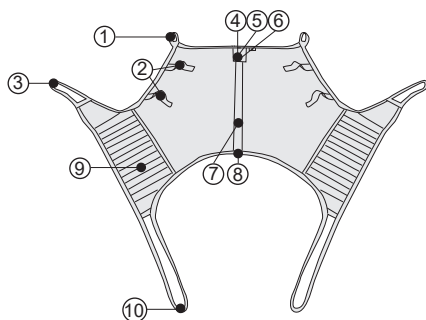
Hill-Rom valuta e fornisce indicazioni agli utenti in merito alla manipolazione e allo smaltimento sicuri dei propri dispositivi per contribuire alla prevenzione delle lesioni inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tagli, forature della pelle, abrasioni, nonché in merito alla pulizia e alla disinfezione necessarie del dispositivo medico dopo l'uso e prima dello smaltimento. I clienti devono attenersi a tutte le leggi e normative federali, statali, regionali e/o locali in materia di smaltimento sicuro di dispositivi e accessori medicali.

In caso di dubbi, l'utente del dispositivo dovrà prima contattare l'assistenza tecnica Hill-Rom per indicazioni sui protocolli di smaltimento sicuri.

Carico massimo

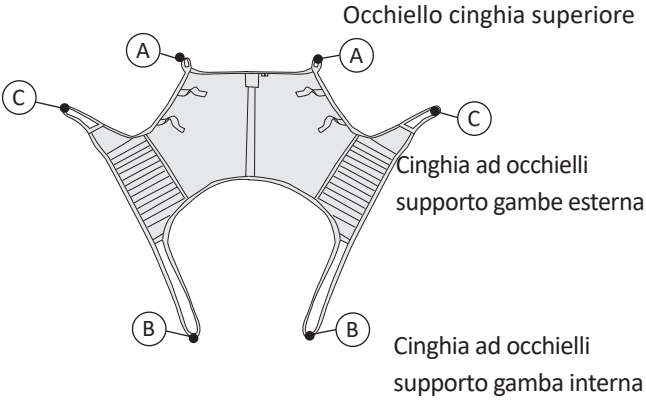
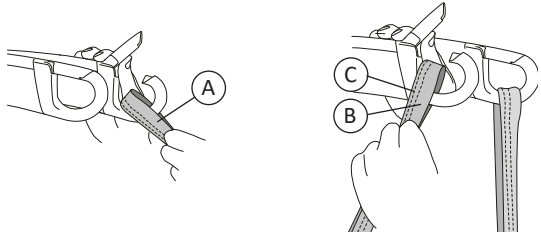
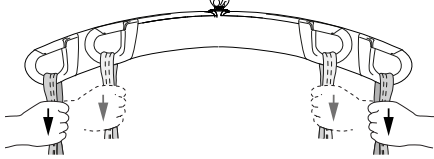
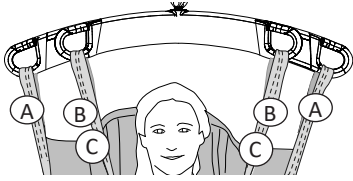
Il carico massimo consentito varia a seconda dei diversi prodotti montati sul sistema di sollevamento: sistema di binari, sollevatore, bilancino, imbragatura e altri accessori utilizzati. Per il sistema di sollevamento totale, si applica sempre il carico massimo più basso consentito indicato per i rispettivi prodotti che compongono il sistema. Perché Liko UltraSling possa sopportare un peso di 500 kg, il sollevatore, il bilancino e gli altri accessori utilizzati devono essere tutti approvati per questo carico massimo. In caso di domande, contattare il rappresentante Hill-Rom.

Definizioni



1. Occhio cinghia superiore
2. Maniglie
3. Cinghia ad occhielli supporto gambe esterna
4. Etichetta del prodotto
5. Etichetta: ispezione periodica
6. Etichetta: demarcazione individuale (Belongs to)
7. Cinghia centrale posteriore
8. Bordo inferiore
9. Supporto gambe
10. Cinghia ad occhielli supporto gamba interna

Come collegare UltraSling a un bilancino

 <p>Occhiello cinghia superiore</p> <p>Cinghia ad occhielli supporto gambe esterna</p> <p>Cinghia ad occhielli supporto gamba interna</p>	<p>1.</p> 
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>Le illustrazioni 1, 2 e 3 mostrano l'uso di bilancini di due larghezze diverse; lo stesso principio si applica se si utilizzano due Universal SlingBar 600.</p>

Applicazione di UltraSling in posizione seduta:

1. Posizionare l'imbragatura dietro la schiena del paziente con l'etichetta rivolta verso l'esterno e verso l'alto. Con il palmo della mano, far passare il bordo inferiore dell'imbragatura in basso verso il cocchio del paziente.
2. Posizionare il supporto gambe lungo la parte esterna delle due cosce, in modo che il tessuto del bordo inferiore dell'imbragatura sia completamente disteso.
3. Spingere i supporti gambe sotto le gambe del paziente, con la cinghia ad occhielli supporto gambe posizionata sotto il tessuto. Quando il tessuto del supporto gambe raggiunge l'interno delle cosce, estrarre la cinghia ad occhielli supporto gambe. Tirare entrambe le cinghie ad occhielli supporto gambe interna ed esterna fino a ottenere la stessa lunghezza.
4. Collegare le cinghie ad occhielli al bilancino. Gli occhielli superiori della cinghia sono agganciati al bilancino largo e le cinghie ad occhielli supporto gambe sono agganciati al bilancino più stretto.
5. Sollevare il paziente.

Per l'applicazione di UltraSling in posizione orizzontale, si consiglia l'impiego di Liko RepoSheet™ Original per evitare di dover girare il paziente. Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante Hill-Rom.

Panoramica su Liko™ UltraSling Mod. 06

Prodotto	Art. n.	Taglia	Materiale	Portata massima
Liko UltraSling	3506115	Standard	Poliestere	500 kg

Combinazioni raccomandate

Sistema di sollevamento Ultra: È consigliabile utilizzare due Universal SlingBar 600 (Art. n. 3156086) o Universal SlingBar 450 (Art. n. 3156085) insieme all'Universal SlingBar 600 (Art. n. 3156086). Se si utilizzano due bilancini di diverse larghezze, il più ampio dei due bilancini è destinato all'uso con gli occhielli della cinghia ad occhielli superiore dell'imbracatura, mentre quello più stretto deve essere utilizzato con la cinghia ad occhielli per il supporto delle gambe.

