

### Productbeschrijving

Het tillen van extreem zware patiënten vraagt om speciaal ontwikkelde hulpmiddelen en methoden. Liko heeft de Ultra-productserie ontwikkeld om zorgverleners in staat te stellen zware patiënten veilig en comfortabel op te tillen.

UltraSling biedt ondersteuning van de volledige rug tot aan de schouders. Dankzij het ontwerp kan elke beensteun afzonderlijk op de tiljukken worden aangesloten, waardoor de benen optimaal worden ondersteund en er meer ruimte is voor de maag.

Wij adviseren dat ten minste twee zorgverleners assisteren bij het verplaatsen.

De UltraSling wordt gebruikt in combinatie met het Liko UltraTwin™-liftsysteem. Het systeem heeft tot de maximale belasting van 500 kg, afhankelijk van welke afzonderlijke accessoires worden gebruikt. Er zijn versies van het UltraTwin-systeem beschikbaar voor zowel permanente installatie als voor vrijstaande installatie, bijv. op het Liko FreeSpan™-systeem.





















*In dit document wordt de persoon die wordt opgetild de patiënt genoemd en de persoon die hierbij helpt de zorgverlener.*

#### **BELANGRIJK!**

Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen voor zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn voor de lift die u wilt gebruiken. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. U moet weten of de patiënt het tillen aankan. Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

## Symboolbeschrijving

Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing: deze situatie vereist extra zorg en aandacht.
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing
	CE-markering
	Juridisch fabrikant
	Productiedatum
	Productidentificatie
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Niet stomen
	Niet strijken
	Drogen in de droogtrommel
	Niet drogen in de droogtrommel
	Wassen Het symbool komt altijd voor in combinatie met de aanbevolen temperatuur in °C en °F.
	Latexvrij
	Periodieke inspectie
	Niet bleken
	Drogen aan de waslijn in de schaduw
	Omhoog gericht en symbool aan de buitenkant van de apparatuur.
	Symbool aan de buitenkant van de apparatuur.
	GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten. (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer

# Veiligheidsinstructies

## **Bedenk vóór het tillen het volgende:**

- een verantwoordelijk persoon binnen uw organisatie moet per geval besluiten of er een of meerdere zorgverleners nodig zijn.
- zorg ervoor dat de gekozen tilband qua model, maat, materiaal en ontwerp voldoet aan de behoeftes van de patiënt.
- gebruik om veiligheidsredenen en voor de hygiëne individuele tilbanden.
- plan het tillen voordat het wordt uitgevoerd, zodat het zo veilig en soepel mogelijk verloopt.
- controleer of het tilaccessoire verticaal hangt en vrij kan bewegen.
- hoewel de tiljucken van Liko zijn uitgerust met clips, moet er extra voorzichtig te werk worden gegaan. Controleer voordat de patiënt daadwerkelijk getild wordt maar terwijl de banden volledig gestrekt zijn, of de banden correct aan de haken van het tiljuk zijn bevestigd.
- zorg ervoor dat de patiënt goed in de tilband zit voordat deze naar een andere plaats wordt gebracht.
- til een patiënt nooit hoger dan nodig is voor het volledig tillen en verplaatsen.
- laat een opgetilde patiënt nooit zonder toezicht.
- controleer of de wielen van de rolstoel, het bed, de brancard, enz., tijdens het tillen/verplaatsen op de rem staan.
- werk altijd ergonomisch. Gebruik de mogelijkheden van de patiënt om actief aan de verplaatsing mee te werken.
- stel de tilband, als deze niet wordt gebruikt, niet bloot aan direct zonlicht.
- het is raadzaam om de tilband na het verplaatsen te verwijderen.

 **Een onjuiste bevestiging van de tilband aan het tiljuk kan ernstig letsel bij de patiënt veroorzaken.**

 **Handmatig draaien van de patiënt in bed kan letsel bij de zorgverlener veroorzaken.**

 Medisch hulpmiddel, productklasse I

## **Productwijzigingen**

De producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en informatie over productverbeteringen.

## **Design and Quality by Liko in Sweden**

Liko is gecertificeerd volgens ISO 9001 en de variant voor producenten van medische hulpmiddelen ISO 13485. Liko is ook gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001.

## **Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU**

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

## Verzorging en onderhoud

Controleer de tilband vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigingen:

- materiaal
- banden
- zomen
- lussen

**⚠ Gebruik geen beschadigde tilaccessoires.**

Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

**Wasinstructies:** zie hiervoor het productlabel van de tilbanden de bijgevoegde bijlage 'Verzorging en onderhoud Liko-tilbanden'.

### Periodieke inspectie

Het product moet minstens om de 6 maanden worden geïnspecteerd. Frequentere inspectie is mogelijk nodig als het product vaker dan normaal wordt gebruikt of gewassen. Voor protocollen kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.

### Verwachte levensduur

Het product heeft een verwachte levensduur van 1-3 jaar bij normaal gebruik. De verwachte levensduur is afhankelijk van het materiaal, de gebruiksfrequentie, de wasprocedure en het vervoerde gewicht.

### Recyclinginstructies

De hele tilband, inclusief baleinen, vulmateriaal, enz., moet gescheiden worden afgevoerd als brandbaar afval.


Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan het afvoeren. Klanten moeten zich houden aan alle federale, landelijke, regionale en/of lokale wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.

In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hill-Rom voor advies over protocollen voor het veilig afvoeren.

### Maximale belasting


De maximaal toegestane belasting kan verschillen afhankelijk van de producten die op het liftstelsel zijn gemonteerd: het railsysteem, de lift, het tiljuk, de tilband en andere gebruikte accessoires. Voor het totale liftstelsel geldt de laagste maximaal toegestane belasting die voor de betreffende producten op het systeem wordt aangegeven. Om Liko UltraSling in staat te stellen een gewicht van 500 kg te dragen, moeten zowel de lift en het tiljuk als de andere gebruikte accessoires worden goedgekeurd voor deze maximale belasting. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.

## Definities

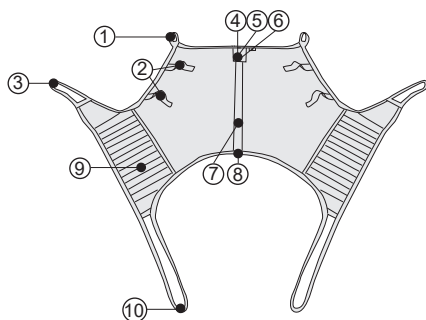

1. Bovenste bandlus
2. Handgrepen
3. Buitenste beensteunlussen
4. Productlabel
5. Label: periodieke inspectie
6. Label: individuele markering (Belongs to)
7. Middelste rugband
8. Onderrand
9. Beensteunen
10. Binnenste beensteunlussen

# Instructies voor het bevestigen van een Ultra Sling aan een tiljuk

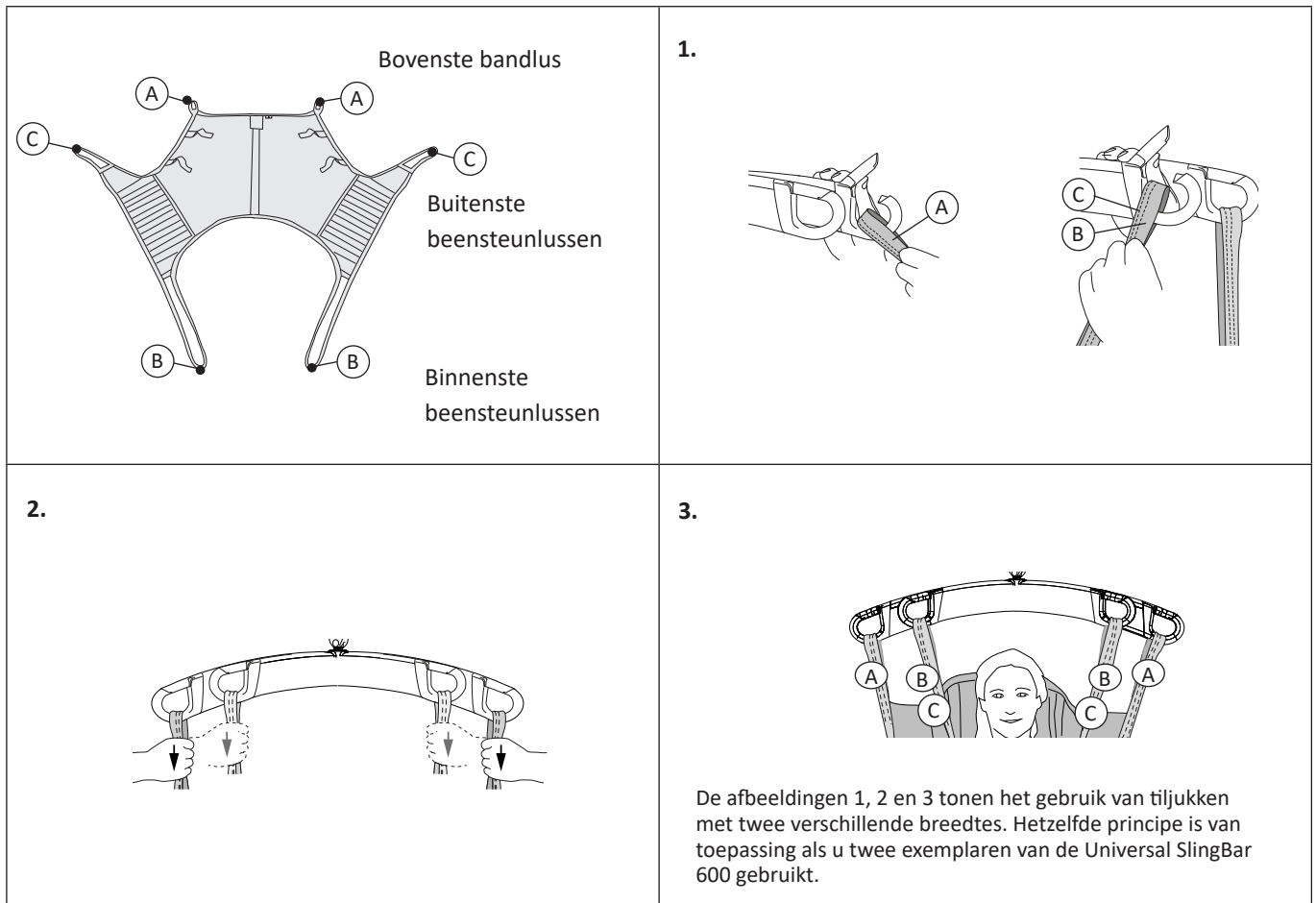

## Aanbrengen van de UltraSling in zittende houding:

1. Plaats de tilband achter de rug van de patiënt, met het label naar buiten en naar boven. Leid de onderrand van de tilband met de palm van uw hand omlaag tot aan het staartbeen van de patiënt.
2. Leg de beensteunen naast de buitenzijde van elke dij, zodanig dat het materiaal van de onderrand van de tilband volledig is gestrekt.
3. Duw de beensteunen onder de benen van de patiënt, waarbij de beensteunlussen onder het materiaal worden geplaatst. Wanneer het materiaal van de beensteun de binnenkant van de dijen bereikt, trekt u de beensteunlussen naar buiten. Trek aan zowel de binnenste als de buitenste beensteunlussen totdat ze dezelfde lengte hebben.
4. Haak de bandlussen aan het tiljuk. De bovenste bandlussen worden aan het brede tiljuk gehaakt en de beensteunlussen aan het smalle tiljuk.
5. Til de patiënt.

Voor het aanbrengen van de UltraSling in horizontale houding adviseren we de Liko Reposheet™ Original; hiermee hoeft de patiënt niet te worden gedraaid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.

# Overzicht Liko™ UltraSling, Model 06

Product	Productnr.	Maat	Materiaal	Max. belasting
Liko UltraSling	3506115	Regulier	Polyester	500 kg

## Aanbevolen combinaties

**Ultra Lift-systeem:** wij raden twee exemplaren van de Universal SlingBar 600 (productnr. 3156086) of de Universal SlingBar 450 (productnr. 3156085) aan in combinatie met Universal SlingBar 600 (productnr. 3156086). Als u tiljukken met twee verschillende breedtes gebruikt, is de breedste van de twee tiljukken bedoeld voor gebruik met de bovenste bandlussen en moet de smallere tilband worden gebruikt met de bandlussen van de beensteun.

