

Univerzální závěsné hrazdy Liko™ Universal Sling Bars

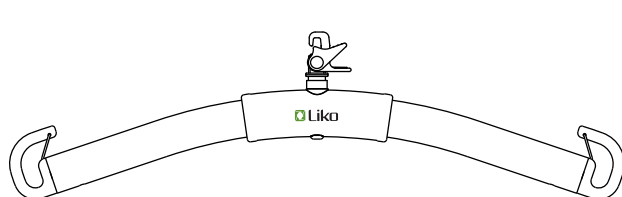


Návod k použití


Platí pro následující modely:

Universal SlingBar 350
Universal SlingBar 450
Universal SlingBar 600
Universal TwinBar 670 Twin
Universal SideBar 450
Universal SlingBar 350 QRH
Universal SlingBar 450 QRH
Universal SlingBar 600 QRH
Universal TwinBar 670 Twin QRH
Universal SlingBar 350 R2R
Universal SlingBar 450 R2R


Č. výrobku 3156074
Č. výrobku 3156075
Č. výrobku 3156076
Č. výrobku 3156077
Č. výrobku 3156079
Č. výrobku 3156084
Č. výrobku 3156085
Č. výrobku 3156086
Č. výrobku 3156087
Č. výrobku 3156094
Č. výrobku 3156095



Universal SlingBar

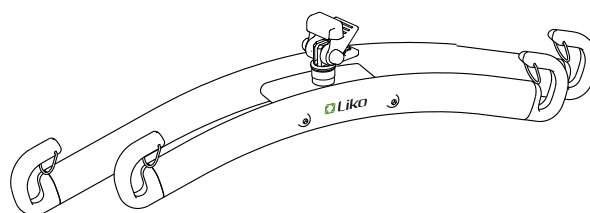

Universal TwinBar

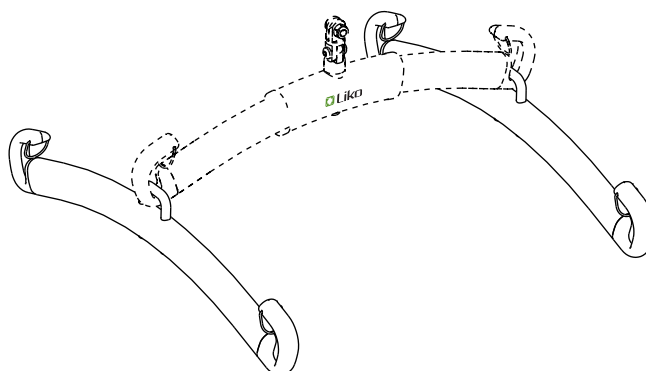

Universal SideBar

Popis výrobku

Univerzální závěsné hrazdy Liko jsou k dispozici v různých modelech a se dvěma možnostmi montáže, pevné sestavení nebo sestavení s rychloupínacím hákem Quick-release Hook. Většina univerzálních závěsných hrazd je standardně k dispozici se systémem Liko Quick-release Hook.














DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Zvedání a přenášení pacientů vždy znamená určitou míru rizika. Před použitím si přečtěte návod k použití zvedáku i zvedacího příslušenství. Je důležité úplně porozumět obsahu návodu k použití. Toto zařízení smí obsluhovat pouze vyškolený personál. Ověřte si, že zvedací příslušenství je vhodné pro použitý zvedák. Při používání dbejte opatrnosti. Jako ošetřující personál vždy zodpovídáte za bezpečnost pacienta. Musíte být vždy dobře informováni o stavu pacienta a jeho schopnosti zvládnout situace zahrnující zvedání. Pokud je vám něco nejasné, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Popis symbolů

V tomto dokumentu nebo na výrobku se můžete setkat s těmito symboly.

Symbol	Popis
	Výstraha: Tato situace vyžaduje zvláštní péči a pozornost.
	Značka CE
	Zákonný výrobce.
	Před použitím si prostudujte návod k použití.
	Datum výroby.
	Upozornění! Prostudujte si návod k použití.
	Před použitím si prostudujte návod k použití.
	Identifikátor produktu.
	Sériové číslo.
	Zdravotnický prostředek.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) RR0MMDJ (21) 012345678910</small>	Čárový kód datové matice GS1, který může obsahovat následující informace. (01) Číslo globální obchodní položky (11) Datum výroby (21) Sériové číslo

Bezpečnostní pokyny

Různé maximální nosnosti se mohou na sestaveném zvedacím systému vztahovat na různé výrobky: zvedák, závěsnou hrazdu, závěs a jiné použité příslušenství. Pro sestavený zvedací systém je maximální nosnost vždy nejnižší maximální nosnost kterékoli z použitých součástí. Prostudujte si označení na zvedáku a zvedacím příslušenství a v případě jakýchkoli dotazů kontaktujte autorizovaného zástupce společnosti Hill-Rom.

Univerzální závěsnou hrazdu lze použít v kombinaci s patientskými vaky Liko, které se připevňují k závěsné hrazdě pomocí smyček. Univerzální závěsnou hrazdu 50/450/600 lze použít v kombinaci s patientskými vaky Liko určenými pro dva připojovací body na závěsné hrazdě, univerzální dvojitou závěsnou hrazdu 670 Twin s patientskými vaky Liko určenými pro čtyři připojovací body na závěsné hrazdě.

Pro další pokyny ohledně výběru smyčky si prostudujte návody k použití pro příslušné modely patientských vaků. Tam můžete také najít doporučení ke kombinaci závěsných hrazd Liko™ s patientskými vaky Liko.

Pozor! Vždy si přečtěte návod k použití dodávaný s různými modely patientských vaků Liko pro správné a bezpečné používání vaků.

⚠ Předtím než pacienta zvednete z podkladové plochy, ale až ve chvíli, kdy jsou plně napnuty popruhy patientského vaku, zkontrolujte, zda jsou smyčky popruhů vaku správně připevněny k hákům závěsné hrazdy.

⚠ Z bezpečnostních důvodů musí být břemeno při zvedání nesené společně všemi háky závěsné hrazdy!

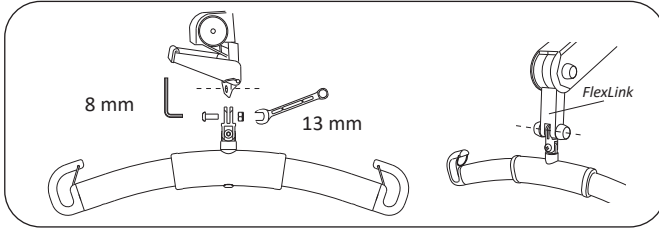
⚠ Nesprávné připevnění patientského závěsného vaku k závěsné hrazdě by mohlo pacientovi způsobit zranění.

Maximální nosnost: 300 kg

 Zdravotnický prostředek třídy I


Sestavení

Pevné sestavení pro zvedání



Stropní zvedák Likorall™ 242 S/ES, stropní zvedák Likorall™ 243 ES, mobilní zvedák Golvo™, mobilní zvedák Uno™ 102 rev.01, Uno™ 200a mobilní zvedák Viking™.

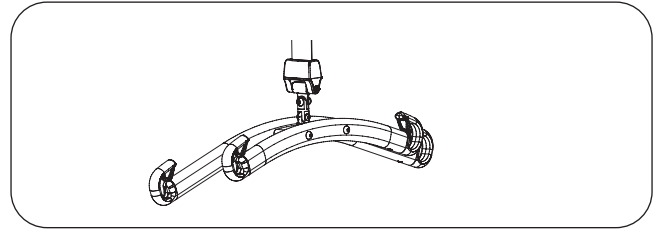Určeno pro následující závěsné hrazdy: Universal SlingBar 350, 450, 600 a 670 Twin (č. výrobku 3156074–3156077)



Stropní zvedák LikoGuard™

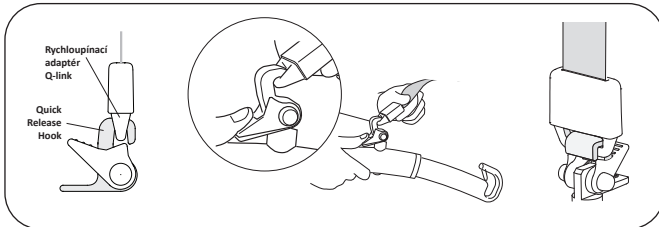
Určen pro: Universal SlingBar 670 Twin, č. výrobku 3156077

POZNÁMKA! Vyžaduje se – pevná souprava Fixed kit 4 č. výrobku 3308860

Montáž smí provádět pouze osoby s oprávněním od společnosti Hill-Rom.


Sestavení pomocí rychloupínacího háku pro zdvihání

Určeno pro následující závěsné hrazdy: Universal SlingBar 350 QRH, 450 QRH, 600 QRH a Twinbar 670 QRH (č. výrobku 3156084–3156087). Universal SlingBar 350 R2R a 450 R2R (č. výrobku 3156094–3156095)




Hodí se pro: Mobilní zvedák Golvo™*, stropní zvedák Likorall™ 242 S/ES R2R, stropní zvedák Likorall™ 243 ES*, stropní zvedák Likorall™ 250 ES* a stropní zvedák Multirall™.

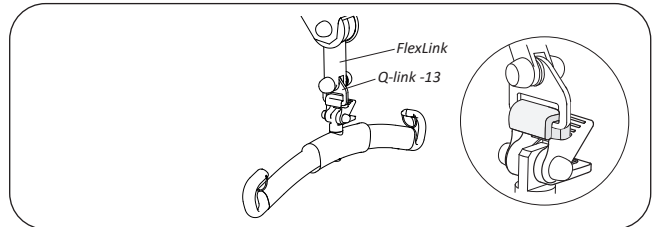*Pokud je vybaven adaptérem Q-link (č. výrobku 31590005). Viz příslušné pokyny k sestavení.



Hodí se pro: Mobilní zvedák Uno™ 102 rev.01* a mobilní zvedák Viking™*

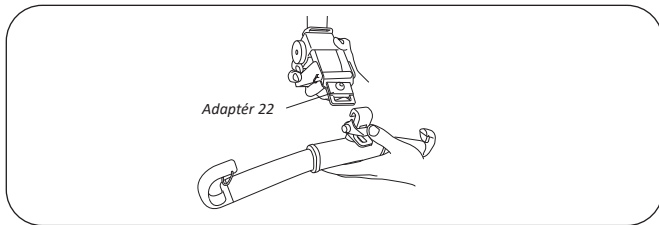
*Pokud je vybaven adaptérem Q-link 13 (č. výrobku 3156509). Viz příslušné pokyny k sestavení.



Hodí se pro: Stropní zvedák Likorall™ 242 S/ES*


*Pokud je vybaven adaptérem 22 (č. výrobku 3156505). Viz příslušné pokyny k sestavení.

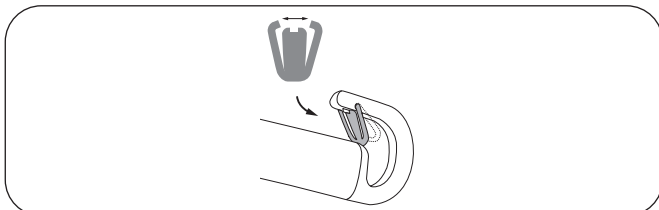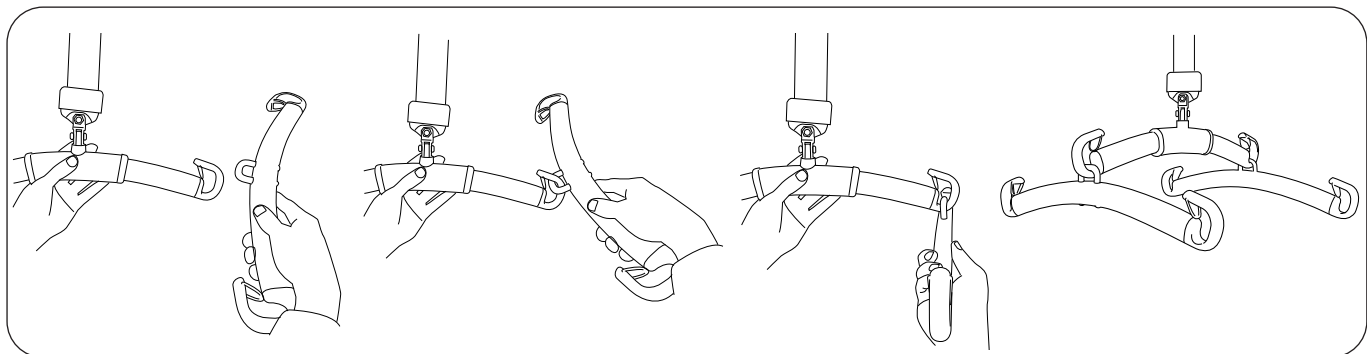Instalace západek

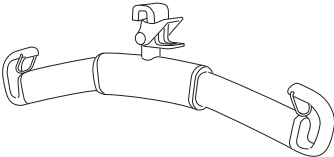
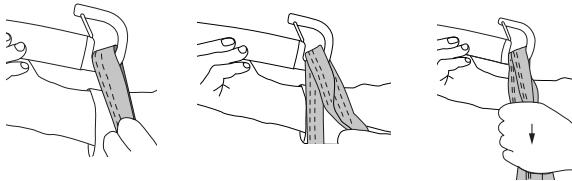

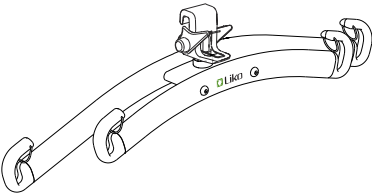
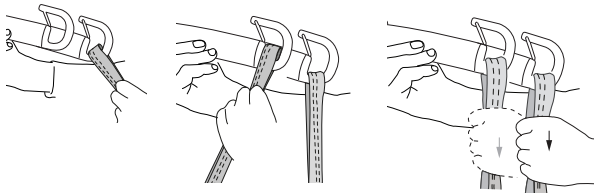
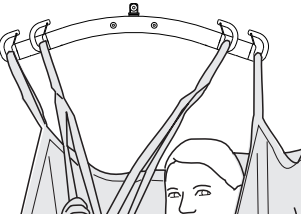
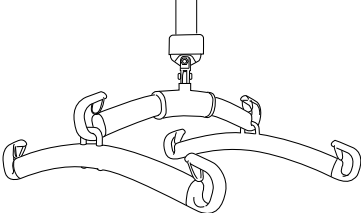
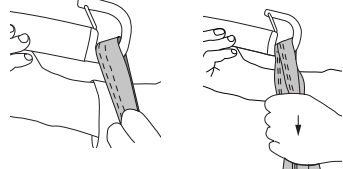
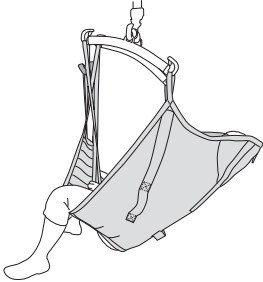


Po instalaci zkontrolujte, zda západka zapadla do poutka závěsné hrazdy a zda se v něm volně pohybuje.





Způsob upevnění patientského vaku k univerzální závěsné hrazdě

Závěsná hrazda	Smyčky patientského vaku k hákům závěsné hrazdy	Správně
 <p data-bbox="161 1025 400 1059">Universal SlingBar</p>		
 <p data-bbox="177 1473 368 1507">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="169 1906 392 1939">Universal SideBar</p>	 <p data-bbox="512 1906 1046 1962">Pozor! Jedna horní smyčka popruhu patientského vaku a jedna smyčka podpěry nohou na každé hrazdě.</p>	

Péče a údržba

Pro bezporuchové použití je třeba před každým použitím zkontrolovat některé detaily:

- Zkontrolujte šroub a pojistnou matici sloužící k upevnění závěsné hrazdy.
- Zkontrolujte, zda západky správně fungují a zda jsou neporušené; chybějící nebo poškozené západky musí být vždy nahrazeny novými.
- Při používání systému rychloupínacího háku Quick-release zkontrolujte, zda je rychloupínací hák správně připojen ke zvedáku a závěsné hrazdě.
- Před zvednutím pacienta zkontrolujte, zda zvedací příslušenství visí svisle a zda se může volně pohybovat.

V případě potřeby očistěte výrobek vlhkým hadříkem. Podrobnější informace týkající se čištění a dezinfekce vašeho výrobku Liko najdete v kapitole „Čištění a dezinfekce“ použitého zvedáku.

⚠ Výrobek nesmí být vystaven tekoucí vodě.

Servis

Pravidelné kontroly univerzálních závěsných hrazd se musí provádět nejméně jednou ročně.

⚠ Pravidelné kontroly, opravy a údržbu smí provádět pouze autorizovaní servisní pracovníci společnosti Liko za použití originálních náhradních dílů Liko a podle servisních příruček společnosti Hill-Rom.

Předpokládaná životnost

Při správném zacházení, servisu a pravidelných prohlídkách podle pokynů společnosti Liko je předpokládaná životnost zařízení 10 let.

Pokyny pro recyklaci

Výrobek by měl být recyklován jako kovový odpad.

Společnost Hill-Rom poskytuje svým uživatelům vyhodnocení a pokyny k bezpečné manipulaci a likvidaci jejich zařízení a pomáhá tak s prevencí poranění, mimo jiné pořezání, propíchnutí kůže, odřenin. Poskytuje také pokyny k požadovanému čištění a dezinfekci zdravotnického prostředku po použití a před jeho likvidací. Zákazníci by se měli řídit všemi místními a národními zákony a směrnicemi, které se týkají bezpečné likvidace zdravotnických prostředků a příslušenství.

V případě pochybnosti má uživatel nejprve kontaktovat technickou podporu společnosti Hill-Rom a vyžádat si protokoly bezpečné likvidace

Změny výrobku

Výrobky Liko prochází neustálým vývojem, a proto si vyhrazujeme právo na změnu výrobku bez předchozího upozornění. Informace o aktualizaci produktů Liko™ poskytnete autorizovaný zástupce společnosti Hill-Rom.

Design and Quality by Liko in Sweden

Systém správy výroby i vývoje výrobku je certifikován v souladu s normou ISO9001 a jeho ekvivalentem pro odvětví zdravotnických prostředků, ISO13485. Systém správy také splňuje požadavky normy pro ochranu životního prostředí ISO14001.

Upozornění pro uživatele a/nebo pacienty v EU

Všechny závažné příhody, ke kterým dojde v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, musí být hlášeny výrobcí a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.



www.hillrom.com



Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švédsko
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom