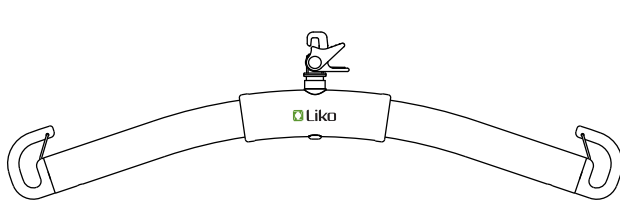


Käyttöohje


Koskee seuraavia malleja:

Universal SlingBar 350
Universal SlingBar 450
Universal SlingBar 600
Universal TwinBar 670 Twin
Universal SideBar 450
Universal SlingBar 350 QRH
Universal SlingBar 450 QRH
Universal SlingBar 600 QRH
Universal TwinBar 670 Twin QRH
Universal SlingBar 350 R2R
Universal SlingBar 450 R2R


Tuotenumro 3156074
Tuotenumro 3156075
Tuotenumro 3156076
Tuotenumro 3156077
Tuotenumro 3156079
Tuotenumro 3156084
Tuotenumro 3156085
Tuotenumro 3156086
Tuotenumro 3156087
Tuotenumro 3156094
Tuotenumro 3156095



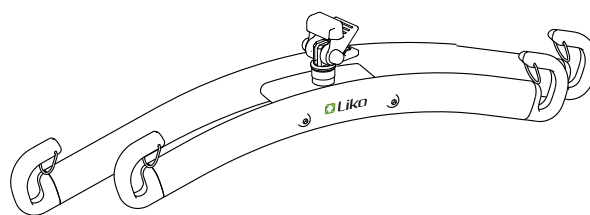Universal SlingBar



Universal TwinBar

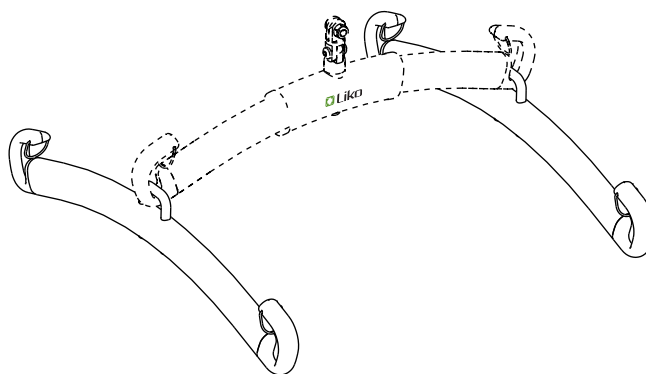

Universal SideBar

Tuotekuvaus

Likon Universal SlingBar -nostokaarista on saatavana useita eri malleja ja kaksi asennusvaihtoehtoa, jotka ovat kiinteä asennus ja asennus Quick-Release Hook -pikaliittimellä. Useimmissa Universal SlingBar -nostokaarissa Likon Quick-Release Hook -pikaliitinjärjestelmä on vakiovarusteena.














TÄRKEÄÄ!

Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue nostimen ja nostovarusteiden käyttöohje ennen käyttöä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Laitetta saa käyttää vain koulutettu henkilökunta. Varmista, että nostovarusteet soveltuvat käytettävään nostimeen. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan turvallisuudesta. Sinun on oltava tietoinen avustettavan edellytyksistä suoritua nostotilanteesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Symbolien kuvaus

Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja.

Symboli	Kuvaus
	Varoitus: tämä tilanne edellyttää erityistä varovaisuutta ja huomiota.
	CE-merkintä
	Laillinen valmistaja.
	Lue käyttöohje ennen käyttöä.
	Valmistuspäivämäärä.
	Huomio! Lue käyttöohje.
	Lue käyttöohje ennen käyttöä.
	Tuotetunniste.
	Sarjanumero.
	Lääkinnällinen laite.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) VU6KPP (21) 012345678910</small>	GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja: (01) kansainvälinen tuotenumero (11) tuotantopäivä (21) sarjanumero




Turvaohjeet

Nostojärjestelmään asennettavilla tuotteilla (nostin, nostokaari, nostokangas ja muut mahdollisesti käytettävät lisävarusteet) saattaa olla erisuuruisia enimmäiskuormituksia. Tällöin koko nostojärjestelmän enimmäiskuormitus vastaa aina pienintä tuotekohtaista enimmäiskuormitusta. Tarkista nostimen ja nostovarusteiden merkinnät tai ota yhteyttä Hill-Romin edustajaan, jos kysyttävää ilmenee.

Universal SlingBar -nostokaarta voi käyttää yhdessä sellaisten Likon nostokankaiden kanssa, jotka kiinnitetään nostokaareen nostokankaan lenkeillä. Universal SlingBar 350/450/600 -nostokaarta voi käyttää yhdessä sellaisten Likon nostokankaiden kanssa, jotka kiinnitetään nostokaaren kahteen liitäntäkohtaan. Universal 670 Twin -nostokaarta voi käyttää yhdessä sellaisten Likon nostokankaiden kanssa, jotka kiinnitetään nostokaaren neljään liitäntäkohtaan.

Lisätietoja sopivan nostokankaan valinnasta on kunkin nostokangasmallin käyttöohjeessa. Siinä on myös ohjeita Liko™-nostokaarien ja Liko-nostokankaiden yhdistämiseen.

Huomautus! Lue aina Likon eri nostokangasmallien mukana toimitettu käyttöohje. Näin varmistat nostokankaan oikean ja turvallisen käytön.

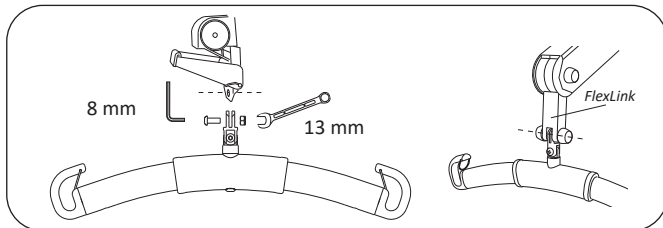
-  **Varmista aina ennen nostamista, että nostokankaan hihnalenkit ovat oikein kiinni nostokaaren koukuissa, kun nostokankaan hihna on ojennettuna, mutta ennen avustettavan nostamista alustalta.**
-  **Turvallisuussyistä kuorman on jakauduttava kaikille nostokaaren koukuille noston aikana!**
-  **Nostokankaan puutteellinen kiinnitys nostokaareen voi aiheuttaa avustettavalle vakavia vammoja.**

Enimmäiskuormitus: 300 kg

 Lääkinnällinen luokan I laite


Asennus

Kiinteä asennus nostimeen



Likorall™ 242 S/ES -katt nostin, Likorall™ 243 ES -katt nostin, liikuteltava Golvo™-nostin, liikuteltava Uno™ 102 rev.01 -nostin, liikuteltava Uno™ 200 -nostin ja liikuteltava Viking™-nostin.

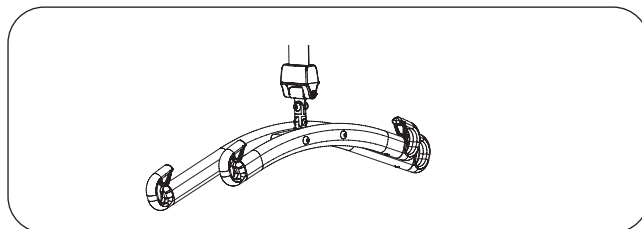Tarkoitettu seuraaviin nostokaariin: Universal SlingBar 350, 450, 600 ja 670 Twin (tuotenro 3156074–3156077)




LikoGuard™-katt nostin

Tarkoitettu seuraaviin: Universal SlingBar 670 Twin -nostokaari, tuotenro 3156077

HUOMAUTUS! Asennussarja 4 tarvitaan, tuotenro 3308860
Tuotteen saa asentaa vain Hill-Romin valtuuttama henkilökunta.

Asennus nostimeen Quick-Release Hook -pikaliittimen avulla

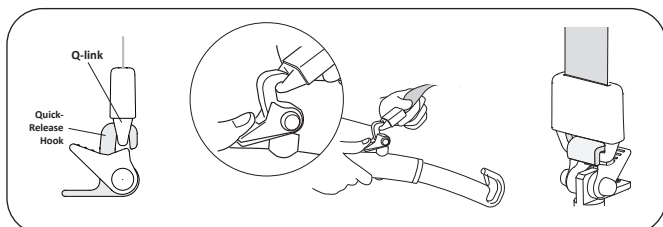
Tarkoitettu seuraaviin nostokaariin: Universal SlingBar 350 QRH, 450 QRH, 600 QRH ja TwinBar 670 QRH (tuotenro 3156084–3156087). Universal SlingBar 350 R2R ja 450 R2R (tuotenro 3156094–3156095).



Sopii seuraaviin: Liikuteltava Golvo™-nostin*, Likorall™ 242 S/ES R2R -katt nostin, Likorall™ 243 ES -katt nostin*, Likorall™ 250 ES -katt nostin* ja Multirall™-katt nostin.

*Jos tuotteessa on Q-link-liitin (tuotenro 31590005).

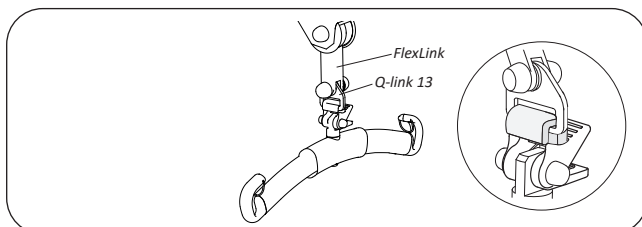
Lue soveltuvat asennusohjeet.



Sopii seuraaviin: Liikuteltava Uno™ 102 rev.01 -nostin* ja liikuteltava Viking™-nostin*

*Jos tuotteessa on Q-link 13 -liitin (tuotenro 3156509).

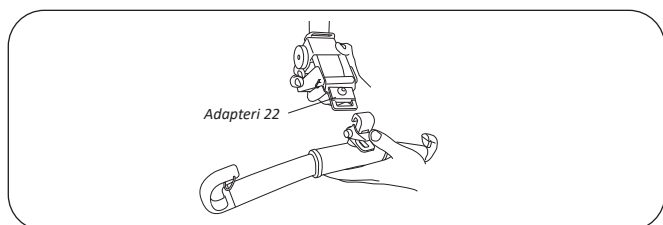Lue soveltuvat asennusohjeet.




Sopii seuraaviin: Likorall™ 242 S/ES -katt nostin*

*Jos tuotteessa on adapteri 22 (tuotenro 3156505).


Lue soveltuvat asennusohjeet.

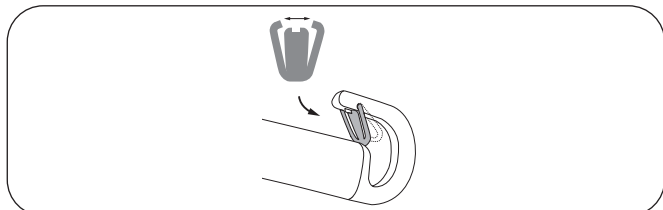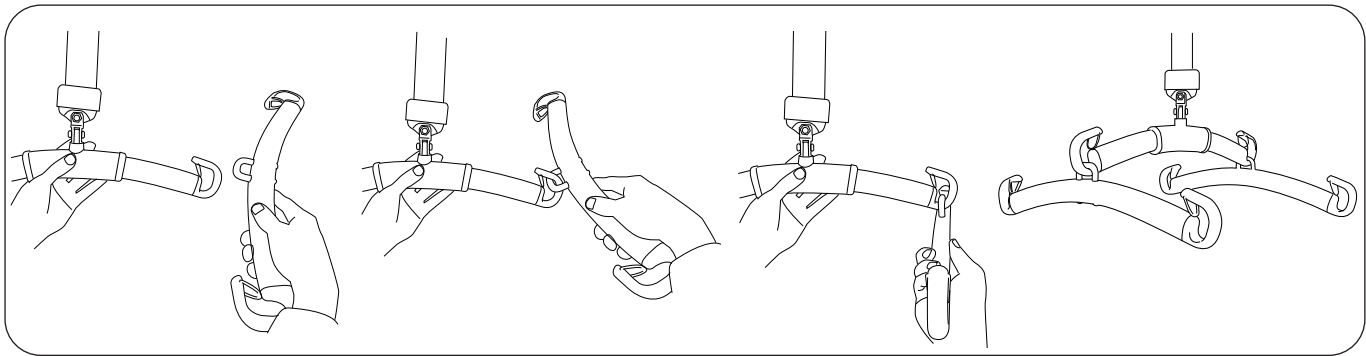Salpojen asennus

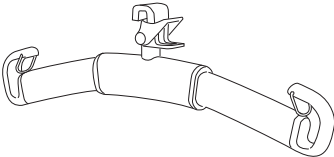
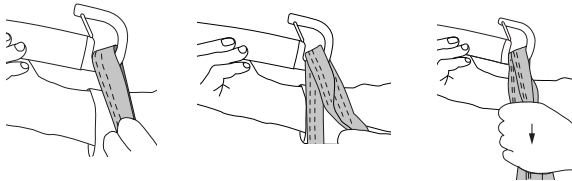

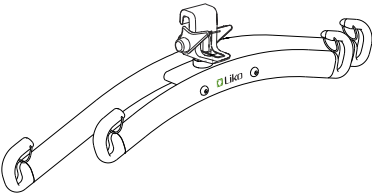
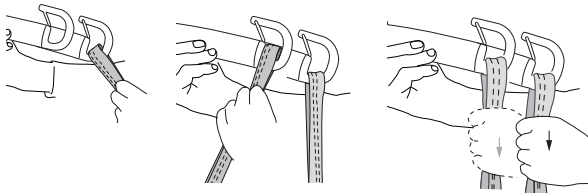
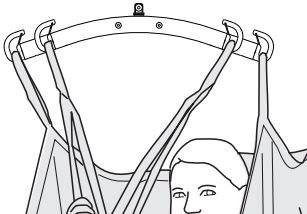
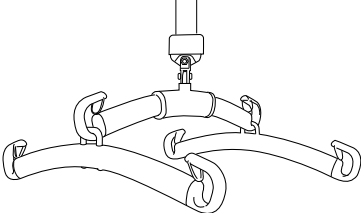
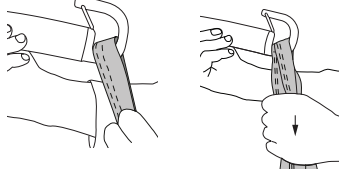
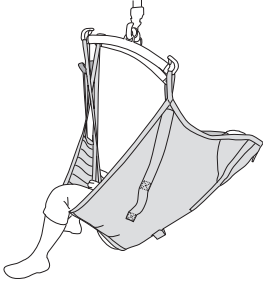


Tarkista asentamisen jälkeen, että salpa lukittuu ja pääsee liikkumaan vapaastinostokaaren koukussa.





Nostokankaan kiinnittäminen Universal SlingBar -nostokaareen

Nostokaari	Nostokankaan lenkit nostokaaren koukkuihin	Oikein
 <p data-bbox="161 1025 400 1059">Universal SlingBar</p>		
 <p data-bbox="177 1473 368 1507">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="165 1906 395 1939">Universal SideBar</p>	 <p data-bbox="512 1906 1078 1962">Huomautus! Yksi nostokankaan ylempi hihnalenkki ja yksi jalkatuen lenkki kumpaankin sivukaareen.</p>	

Hoito ja kunnossapito

Ongelmatonta käyttöä varten tietyt kohdat on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa.

- Tarkista nostokaaren kiinnityksen pultti ja lukkomutteri.
- Tarkista, että salvat toimivat ja ovat ehjät; puuttuvat tai vahingoittuneet salvat on aina vaihdettava uusiin.
- Käytettäessä Quick-Release Hook -pikaliitinjärjestelmää tarkista, että Quick-Release Hook -pikaliitin on kiinnitetty oikein nostimeen ja nostokaareen.
- Tarkista ennen nostoa, että nostovarusteet riippuvat pystysuorassa ja pääsevät liikkumaan esteettömästi.

Puhdista tuote tarvittaessa kostealla liinalla. Katso tarkempia tietoja Liko-tuotteesi puhdistuksesta ja desinfiointista käytettävän nostimen käyttöohjeen luvusta *Puhdistus ja desinfiointi*.

⚠ Tuotetta ei saa kastella juoksevilla vedellä.

Huolto

Universal SlingBar -nostokaaret on tarkistettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa.

⚠ Määräaikaistarkastuksia, korjauksia ja huoltoja saavat suorittaa vain Hill-Romin valtuuttamat henkilöt, jotka työskentelevät Likon huolto-ohjeiden mukaisesti. Vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

Odotettu käyttöikä

Tuotteen odotettu käyttöikä on 10 vuotta, kun tuotetta käsitellään ja huolletaan oikein ja se tarkastetaan säännöllisesti Likon ohjeiden mukaisesti.

Kierrätysohjeet

Tuote on lajiteltava metallijätteisiin.

Hill-Rom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä ja auttaa näin ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinnällisten laitteiden puhdistamisessa ja desinfiomisessa käytön jälkeen ja ennen hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinnällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, alueellisia ja paikallisia säännöksiä.

Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteys Hill-Romin tekniseen tukeen ja pyydettävä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Tuotemuutokset

Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakoilmoitusta. Ohjeita ja lisätietoja tuotepäivityksistä saa Hill-Romin edustajalta.

Design and Quality by Liko in Sweden

Laitteen valmistuksen ja kehityksen hallintajärjestelmä on sertifioitu standardin ISO9001 ja vastaavan lääkintäteknikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO13485 mukaisesti. Hallintajärjestelmä on sertifioitu myös ympäristöstandardin ISO14001 mukaisesti.

Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan asianmukaiselle viranomaiselle.