


Käyttöohje

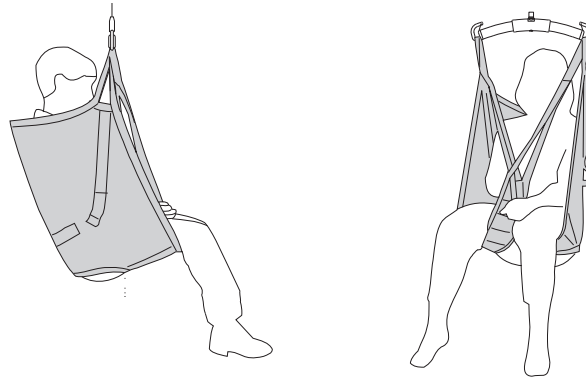

Tuotekuvaus

Liko UniversalSling -nostokangas on perusmalli, joka on suunniteltu mukautumaan avustettavalle ilman erillisiä säätöjä. Se on yksi eniten käytetyistä nostokankaista.

UniversalSling mahdollistaa pystysuoran istuma-asennon ja tukee koko selkää niskaan saakka. Jos myös avustettavan päätä on tarve tukea, on suositeltavaa käyttää korkeaselkäistä nostokangasta, esimerkiksi Original HighBack Sling -nostokankaan mallia 200/210 tai Soft Original HighBack Sling -nostokankaan mallia 26. Avustettavan kädet ovat nostokankaan sisäpuolella. Oikein sovitettuna ja käytettynä UniversalSling antaa avustettavalle suuren turvallisuuden ja mukavuuden tunteen.

Koot

UniversalSling-nostokankaasta on saatavana eri kokovaihtoehtoja. On tärkeää valita oikean kokoinen nostokangas, jotta se on avustettavalle mahdollisimman miellyttävä ja turvallinen. Liian suuresta nostokankaasta avustettava saattaa liukua ulos, kun taas liian pieni nostokangas voi olla epämukavan tiukka nivusista. Isommissa kokoluokissa nostokangasta voi olla hyvä käyttää yhdessä kaksoisnostokaaren 670 kanssa.

Kankaat

UniversalSling-nostokankaasta on saatavana eri materiaalivaihtoehtoja. Koska UniversalSling-nostokangasta ei yleensä jätetä avustettavan alle siirron jälkeen, on suositeltavaa käyttää polyesterimallia. Materiaali on kestävä ja kitkaton ja tekee nostokankaasta helposti aseteltavan ja helposti poistettavan.

UniversalSling-nostokankaasta on saatavana myös verkkopolyesterista valmistettu malli. Tätä materiaalia suositellaan, kun nostokangas jätetään paikalleen siirron jälkeen tai kun tarvitaan ilmavampaa vaihtoehtoa.

Kylvyssä ja suihkussa käyntiä varten on saatavana muovipinnoitettu polyesteriverkko, joka läpäisee vettä ja on helppo pyyhkiä puhtaaksi. Materiaali kuivuu nopeasti eikä kylmetä avustettavaa samalla tavalla kuin kostea ja vettä imevä kangas.

Nostokankaan nostohihnat ovat kestävästä polyesteristä ja erittäin lujat.

Jalkatuet

UniversalSling-nostokankaaseen on saatavana useita erimallisia jalkatukia. Yleisimpiä ovat vahvistetut jalkatuet. Vahvistus antaa lisämukavuutta, jakaa paineen tasaisesti ja estää nostokankaan rypistymisen reisien alle.

Synteettisestä lampaannahasta valmistettu pehmustettu jalkatuki on saatavana lisävarusteena. Pehmustetulla jalkatuella varustettu UniversalSling-nostokangas sopii avustettaville, jotka ovat erityisen herkkiä paineelle.

Sopivat nostimet

UniversalSling-nostokangasta voidaan käyttää Likon katonostimien ja liikutettavien nostimien kanssa. Valittavana ovat LikoGuard™-, Likorall™- ja Multirall™-katonostimet sekä liikutettavat nostimet Golvo™, Viking™, Uno™ ja Liko™ M220/M230.

Tässä käyttöohjeessa nostettavaa potilasta kutsutaan avustettavaksi ja auttavaa henkilöä avustajaksi.



TÄRKEÄÄ!


Potilaan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue nostimen ja nostovarusteiden käyttöohje ennen käyttöä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Tätä varustetta saa käyttää vain koulutettu henkilökunta. Varmista, että nostovarusteet soveltuvat käytettävään nostimeen. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta toimenpiteen aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan turvallisuudesta. Sinun on oltava tietoinen avustettavan edellytyksistä suoriutua nostotilanteesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Sisällysluettelo

Symbolien kuvaus	3
Turvaohjeet	4
Hoito ja kunnossapito	5
Määritelmät	5
Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin	6
UniversalSling-nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuiseen nostokaareen (TwinBar-kaksoisnostokaaret ja Cross-Bar-ristikkonostokaaret).....	7
Nosto istuma-asennosta.....	7
Nosto istuma-asentoon	9
Nostokankaan poistaminen tuolista/pyörätuolista	9
Nostaminen sängystä	10
Nostaminen sänkyyn	11
Nostokankaan poistaminen avustettavan istuessa sängyllä	11
Nostokankaan poistaminen avustettavan ollessa makuullaan sängyssä	11
Kiinnitysohje.....	12
Erilaisia tapoja jalkatukien kiinnittämiseen	12
Avustettava ei istu hyvin nostokankaassa – mistä se voisi johtua?	12
Lyhennysasento.....	13
Lisävarusteet	13
Yleiskuvaus: Liko UniversalSling -nostokangas, malli 000,.....	14
Suosittelut käyttöyhdistelmät.....	14

Symbolien kuvaus

Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja.

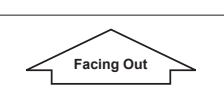Symboli	Kuvaus
	Varoitus. Varoittaa tilanteista, joissa on noudatettava erityistä varovaisuutta.
	Lue käyttöohje ennen käyttöä
	Lue käyttöohje ennen käyttöä
	CE-merkintä
	Laillinen valmistaja
	Valmistuspäivämäärä
	Viitenumero
	Sarjanumero
	Lääkinnällinen laite
	Kemiallinen pesu kielletty
	Silitys kielletty
	Rumpukuivaus
	Rumpukuivaus kielletty
	Pesu Symbolin yhteydessä näkyy aina suositeltu pesulämpötila (°C ja °F).
	Lateksiton
	Määräaikaistarkastus
	Valkaisu kielletty
	Ripusta kuivumaan varjoon
	Suunta ylöspäin; välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli
	Välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli
	GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja: (01) kansainvälinen tuotenumero (11) tuotantopäivä (21) sarjanumero

Turvaohjeet

⚠️ Huomioi seuraavat asiat ennen nostamista:

- Hoitoyksikön vastuuhenkilön tulee arvioida avustajien tarvittava lukumäärä tapauskohtaisesti.
- Varmista, että nostokangas sopii malliltaan, kooltaan, materiaaliltaan ja tyypiltään avustettavan tarpeisiin.
- Nostojärjestelmän enimmäiskuormituksen määrittää aina järjestelmän tuote, jonka määritetty enimmäiskuormitus on pienin.
- Käytä henkilökohtaisia nostokankaita turvallisuus- ja hygieniasyistä.
- Suunnittele nostotilanne ennen nostamista, jotta kaikki tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja joustavasti.
- Tarkista, että nostovarusteet riippuvat pystysuorassa ja pääsevät liikkumaan esteettömästi.
- Vaikka Likon nostokaarissa on salvat, on erityistä varovaisuutta kuitenkin noudatettava. Ennen avustettavan nostamista alustalta ja hihnojen kiristämistä on tärkeää varmistaa, että hihnät on kiinnitetty nostokaaren koukkuihin oikein.
- Varmista, että avustettava istuu turvallisesti nostokankaassa ennen kuin siirto toiseen paikkaan aloitetaan.
- Älä koskaan nosta avustettavaa korkeammalle kuin siirron toteuttamiseksi on välttämätöntä.
- Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa nostotilanteessa.
- Varmista, että pyörätuolin, sängyn, hoitotason jne. pyörät ovat lukossa nosto- ja siirtohetkellä.
- Käytä aina ergonomisia työmenetelmiä. Hyödynnä avustettavan kykyä osallistua aktiivisesti toimenpiteisiin.
- Kun nostokangasta ei käytetä, älä jätä sitä suoraan auringonvaloon.

⚠️ Nostokankaan puutteellinen kiinnitys nostokaareen voi aiheuttaa avustettavalle vakavia vammoja.

⚠️ Avustettavan käsivarainen kääntäminen sängyssä voi aiheuttaa avustajalle vammoja.

CE Lääketieteellinen luokan 1 laite

PATENTTI www.hillrom.com/patents

Saattaa kuulua yhden tai useamman patentin piiriin. Katso edellä mainittu verkko-osoite.

Hill-Rom-yritykset ovat eurooppalaisten, yhdysvaltalaisen ja muiden patenttien ja odottavien patenttihakemusten omistajia.

Tuotemuutokset


Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakoilmoitusta. Ohjeita ja lisätietoja mahdollisista päivityksistä saa Hill-Romin edustajalta.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko on laatusertifioitu standardin ISO 9001 ja vastaavan lääkintäteknikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO 13485 mukaisesti. Liko on ympäristösertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.

Huomautus käyttäjille ja/tai potilaille EU:ssa


Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai potilaan asuinmaan asianmukaiselle viranomaiselle.

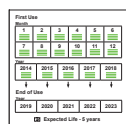

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Ennen kuin nostokangasta käytetään ensimmäistä kertaa, päivämäärä (vuosi ja kuukausi) on merkittävä lappuun "First Use" (Ensimmäinen käyttökerta), joka sijaitsee lapun "Perform Inspection" (Tarkista) alla. Katso alla oleva esimerkki. Merkintä tehdään leikkaamalla vastaavien ruutujen vihreät langat. Langat leikataan kerralla ruudun keskeltä. Älä leikkaa lankoja irti kokonaan, vaan jätä lankojen päät paikoilleen.

Esimerkki: helmikuu 2014

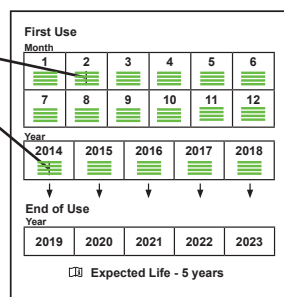

Leikkaa langat ruudun keskeltä.



Hoito ja kunnossapito

Tarkista nostokangas ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat osat kulumisen ja vaurioiden varalta:

- Kangas
- Hihnat
- Saumat
- Ripustuslenkit

⚠ Älä käytä vahingoittuneita nostovarusteita.

Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Jos nostokangasta käytetään kylvyssä tai suihkussa: Kylvyssä ja suihkussa käyttämisen jälkeen nostokangas on sijoitettava niin, että se kuivuu mahdollisimman nopeasti.

Pesuohteet: Katso nostokankaan tuotelappu ja mukana oleva liite ”Liko-nostokankaiden hoito ja kunnossapito”.

Määräaikaistarkastus

Tuote on tarkastettava vähintään kuuden kuukauden välein. Jos tuotetta käytetään tai pestään normaalia enemmän, tarkastus on tehtävä tätä useammin. Katso Likon käytäntö ohjeesta ”Liko-tekstiilituotteiden määräaikaistarkastus”. Lisäohjeita saat Hill-Romin edustajalta.

Odotettu käyttöikä

Jos tuote on valmistettu vihreästä kudotusta polyesterikankaasta, sen odotettu käyttöikä on 5 vuotta. Jos tuote on valmistettu muovipinnoitetusta verkosta tai harmaasta verkkopolyesteristä, sen odotettu käyttöikä on 3 vuotta. Käyttöiän arviointiperusteena on 10 käyttökertaa päivässä ja yksi pesukerta viikossa pesuohteiden mukaisesti. Hill-Rom suosittelee tuotteen käyttämistä vain sen odotetun käyttöiän ajan.


Kierrätysohjeet

Koko tuote, mukaan lukien säleet, pehmusteet jne., hävitetään polttokelpoisena jätteenä.

Hill-Rom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä auttaakseen ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinällisten laitteiden puhdistamisessa ja desinfiomisessa käytön jälkeen ja ennen hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä alueellisia ja paikallisia säännöksiä.















Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteyttä Hill-Romin tekniseen tukeen ja pyydettyä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Määritelmät

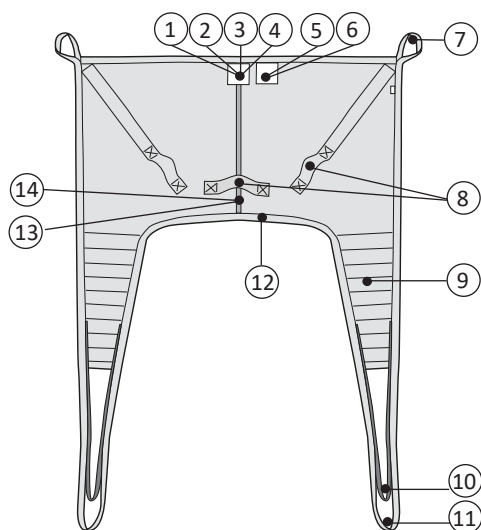


1. Tuotelappu
2. Lappu: Valmistusvuosi ja -kuukausi ()
3. Lappu: Sarjanumero
4. Lappu: Yksilöllinen merkintä (Belongs to)
5. Lappu: Tarkista (Perform Inspection)
6. Lappu: Ensimmäinen käyttökerta (First Use)
7. Ylempi hihnalenki
8. Kädensija
9. Jalkatuki
10. Lyhennysasento
11. Ulompi jalkatuen lenkki
12. Alareuna
13. Keskisellähina
14. Kokomerkintä


Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin

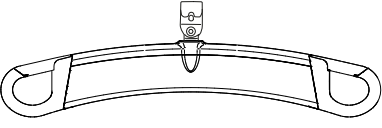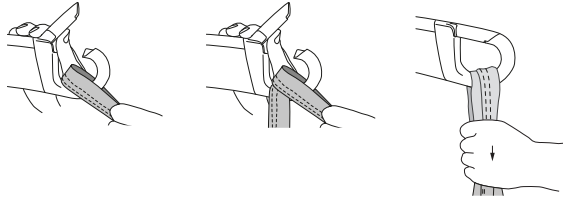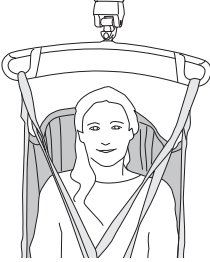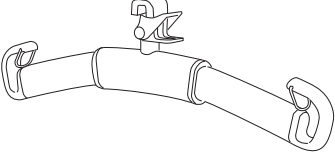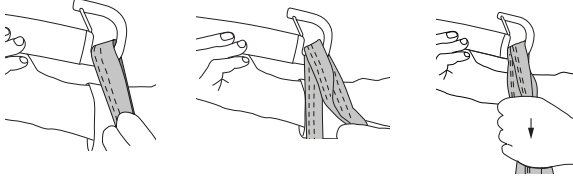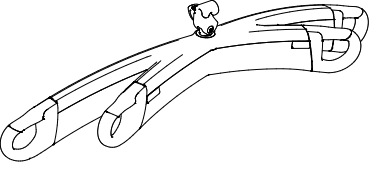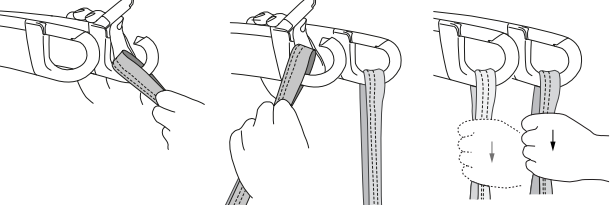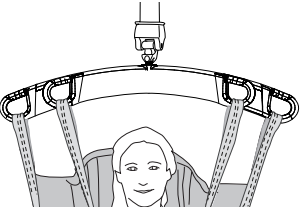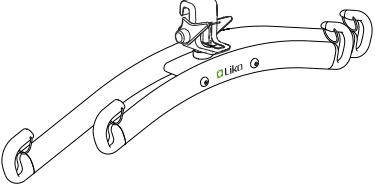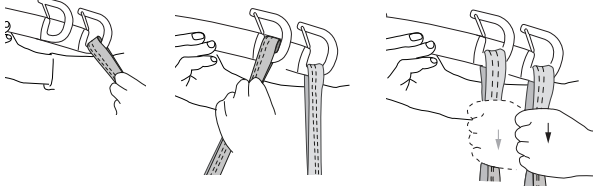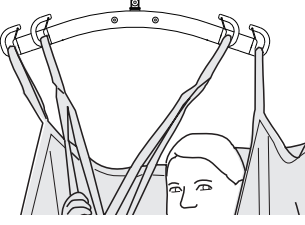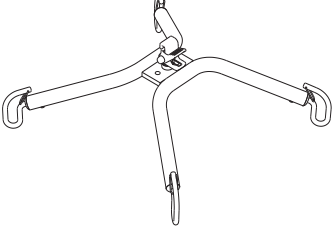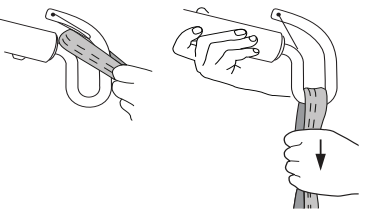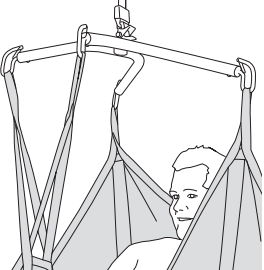Nostokaari	Nostokankaan lenkit nostokaaren koukkuihin	Oikein
 SlingGuard™		
 Universal		
 SlingGuard™ Twin		
 Universal Twin		
 Cross-bar		


Esimerkki: vääränlainen käyttö

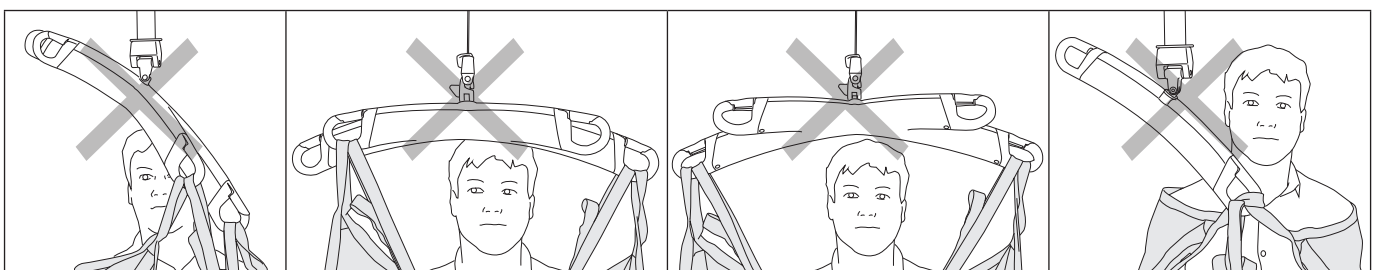

UniversalSling-nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuiseen nostokaareen (TwinBar-kaksoisnostokaaret ja Cross-Bar-ristikkonostokaaret)

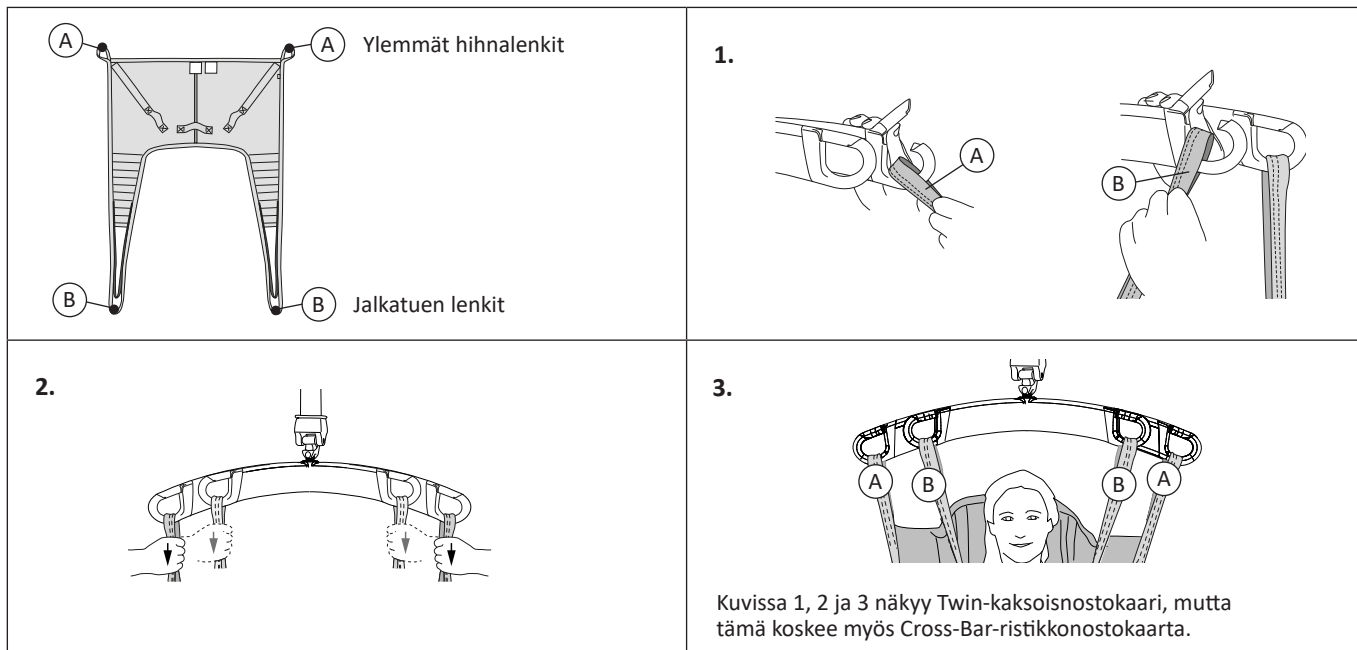


Nosto istuma-asennosta

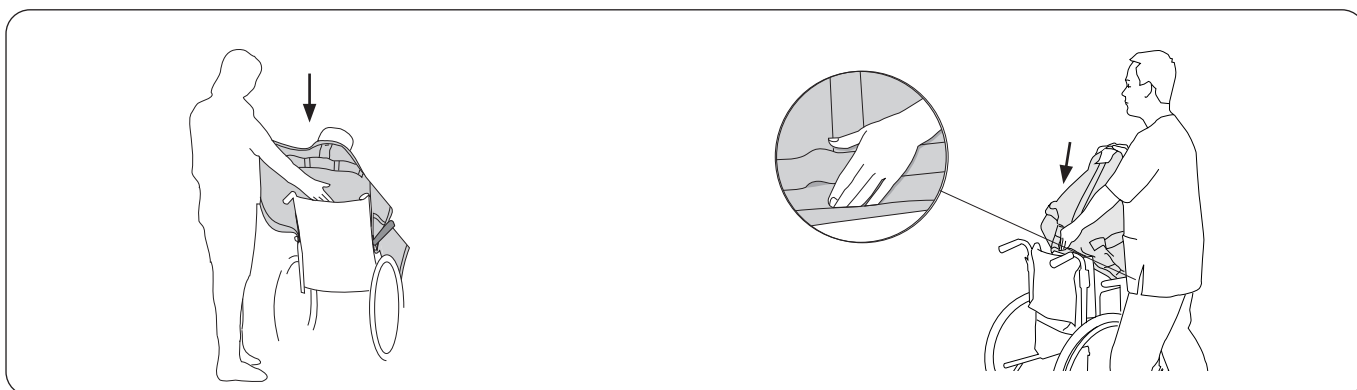


Aseta nostokangas avustettavan selän taakse siten, että tuotelappu osoittaa ulospäin. Taita nostokankaan alareuna sormenpäiden ympäri ja ohjaa nostokangas paikalleen.

Paina kämmenellä nostokankaan alareuna avustettavan häntäluun tasolle. Tämä on erittäin tärkeää. Huomautus: nostokankaan asettamista helpottaa, jos avustettava itse kumartuu tai häntä kallistetaan hieman eteenpäin.

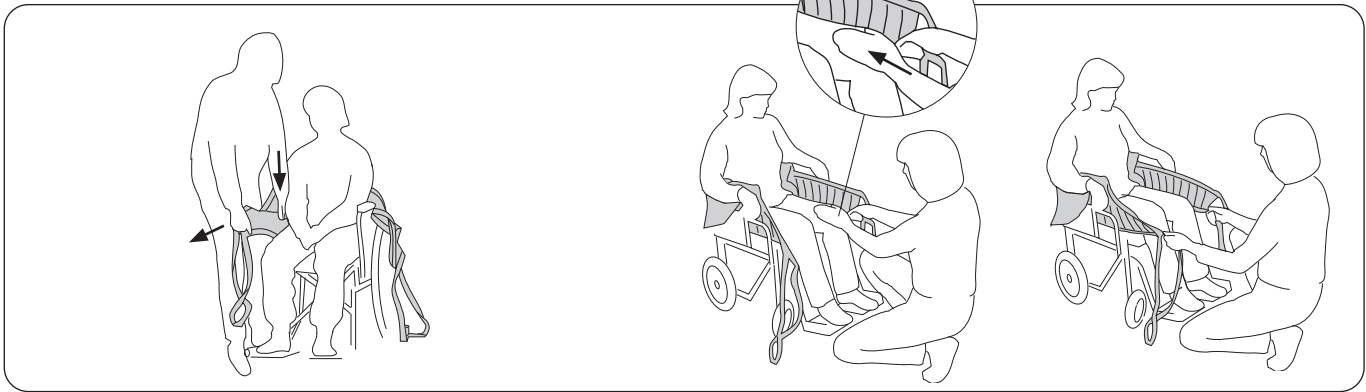


Vedä nostokankaan jalkatuet sivuilta eteen avustettavan reisien viereen. Aseta kämmen avustettavan vartalon ja nostokankaan väliin ja paina jalkatuen alareunaa alas istuinta kohti. Venytä samalla jalkatukea vetämällä sitä toisella kädellä eteenpäin.

Suorista mahdolliset rypyt takaa vetämällä jalkatukia eteen. Tarkista, että molemmat jalkatuet ulottuvat yhtä pitkälle eteen. Huomautus: Jalkatuki on helpompi vetää eteen, kun pidät kevyesti kiinni avustettavan polvilumpion alta.

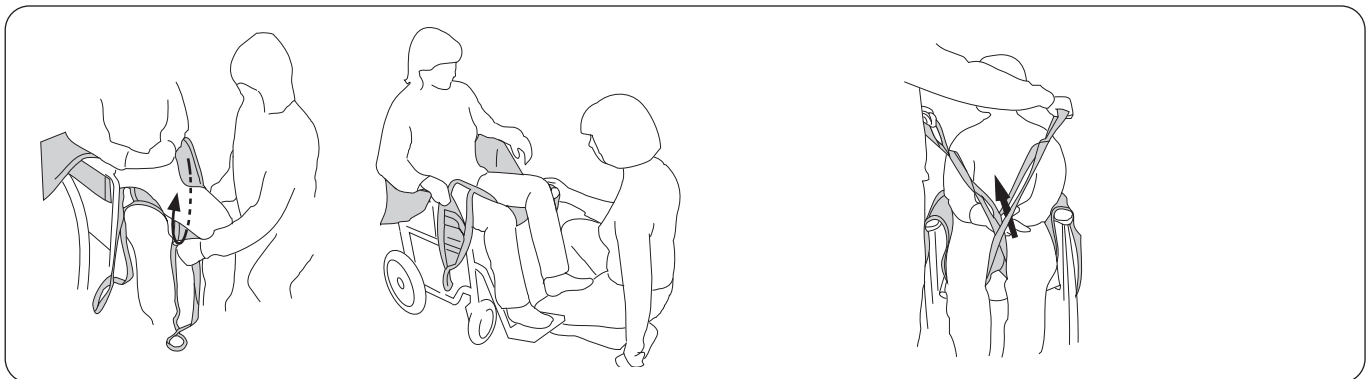

Aseta jalkatuet reisien alle. Varmista, että kangas on suorassa ja tukee jalkaa kunnolla. **Huomautus:** Jalkatukien asettamista helpottaa, jos avustettavan jalkoja nostetaan hieman irti istuimesta. Se onnistuu asettamalla avustettavan jalat tuolin jalkalevyille tai oman jalkasi päälle kuvan mukaisesti.

Valmistele jalkatukien kiinnitys. Yleisin tapa kiinnittää jalkatuet on asettaa ne ristikkäin. Katso vaihtoehtoiset kiinnitystavat sivulta 12.

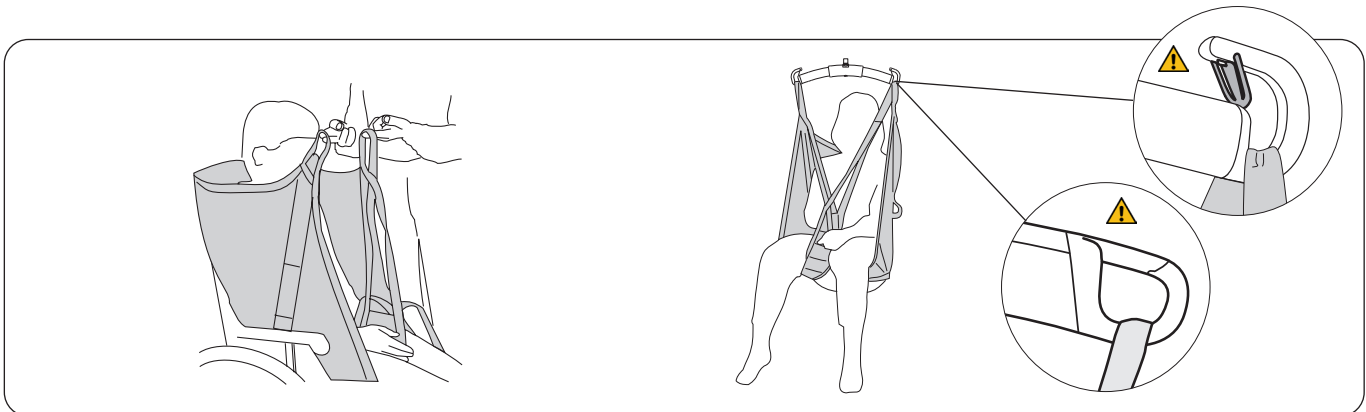


Huomautus: Tarkista, että kaikki ripustuslenkit ovat saman mittaisia eli samalla korkeudella, kun niitä venytetään ennen nostamista. Säädä nostokankaan asentoa, jos ripustuslenkit eivät ole samalla korkeudella.

Kiinnitä ensin ylemmät hihnalenkit nostokaaren koukkuihin ja kiinnitä sitten jalkatukien lenkit. Katso sivuilta 6–7 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettavaa.

Nosto istuma-asentoon

Kun avustettava asetetaan pyörätuoliin, on tärkeää, että hänet saadaan istumaan mahdollisimman taakse tuolissa. Tämä voidaan toteuttaa monella eri tavalla.

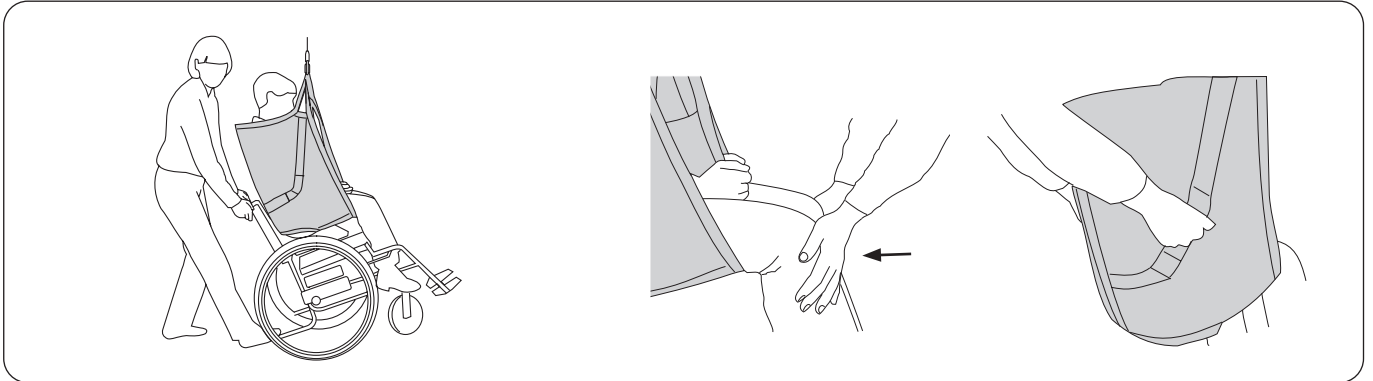

Kun avustettava asetetaan pyörätuoliin: Kallista tuolia taaksepäin avustettavan alas laskemisen aikana. Anna avustettavan pakaroiden liukua lopuksi alas selkänojaan saakka. Säädä pyörätuolin kallistuskulmaa pitämällä jalkaasi kaatumistuen päällä.

Vaihtoehtoinen toimintatapa: Alas laskemisen aikana työnnä avustettavaa kevyesti polvien alta niin, että pakarat asettuvat selkänojaa vasten. Jos nostokankaassa on kädensijat, niitä voi käyttää ohjaimina.

⚠ Älä käytä kädensijoja nostamiseen! Liian suuri kädensijoihin kohdistuva voima voi aiheuttaa nostokankaan repeytymisen.

Nostokankaan poistaminen tuolista/pyörätuolista

Nostokankaan poistaminen siirron jälkeen on suositeltavaa. Jos jostakin syystä on tarkoituksenmukaisempaa jättää nostokangas tuoliin siirron jälkeen, on suositeltavaa käyttää verkkopolyesteristä valmistettua nostokangasta.



Poista jalkatuet varovasti. Hellävaraisinta on vetää jalkatuen lenkit pois kangasosan alta.

Poista sen jälkeen nostokangas vetämällä jalkatukea varovasti ylöspäin.


Nostaminen sängystä

Nostokangas voidaan asettaa paikalleen eri tavoin avustettavan tilanteen mukaan. Avustettava voi olla joko makuullaan sängyssä tai istumassa sängyllä. Jos käytetään erityistä painetta keventävää patjaa, se on hyvä täyttää kokonaan nostokankaan käytön helpottamiseksi.

Huomioi oma työasentosi ja avustettavan mukavuus. Käytä apuna sängyn nosto- ja laskutoimintoja. Hyvä työasento saavutetaan patjan ollessa avustajan rystysten korkeudella, kun käsien annetaan roikkua vapaasti. Avustajaan kohdistuvan kuormituksen mukaan on tapauskohtaisesti arvioitava, kuinka monta avustajaa toimenpiteeseen tarvitaan.


Nostokankaan asettelu avustettavan ollessa makuullaan sängyssä

Kun avustettava nostetaan makuuasennosta eikä sängyn pääpuolta voi nostaa eikä avustettavan päätä voi muulla tavoin tukea, on suositeltavaa käyttää Liko Soft Original HighBack Sling -mallia 26 tai Liko Original HighBack Sling -malleja 200 tai 210, jotka kaikki tukevat avustettavan päätä.

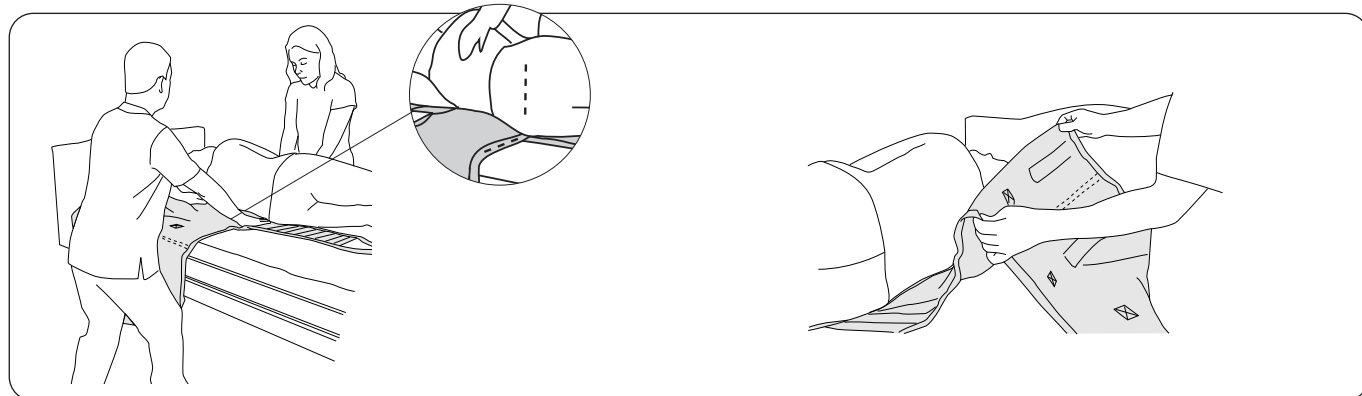

Käännä avustettava kyljelleen. Toimenpidettä helpottaa, jos avustettava pystyy tarttumaan sängyn sen puolen kaiteeseen, johon hänet on tarkoitus kääntää. Aseta nostokankaan reuna avustettavan selkää vasten siten, että alareuna on **samalla tasolla häntäluun kanssa**.

Taita nostokangas siten, että ”keskiselkähihna” on avustettavan selkärangan kohdalla. Tarkista, että taite peittää avustettavan selkää vasten olevan nostokankaan reunan, jotta kitka vähenee. Käännä avustettava varovasti takaisin selälleen ja vedä nostokangas ulos toiselta puolelta. Tällä tekniikalla avustettavan tarvitsee kääntää vain kerran.

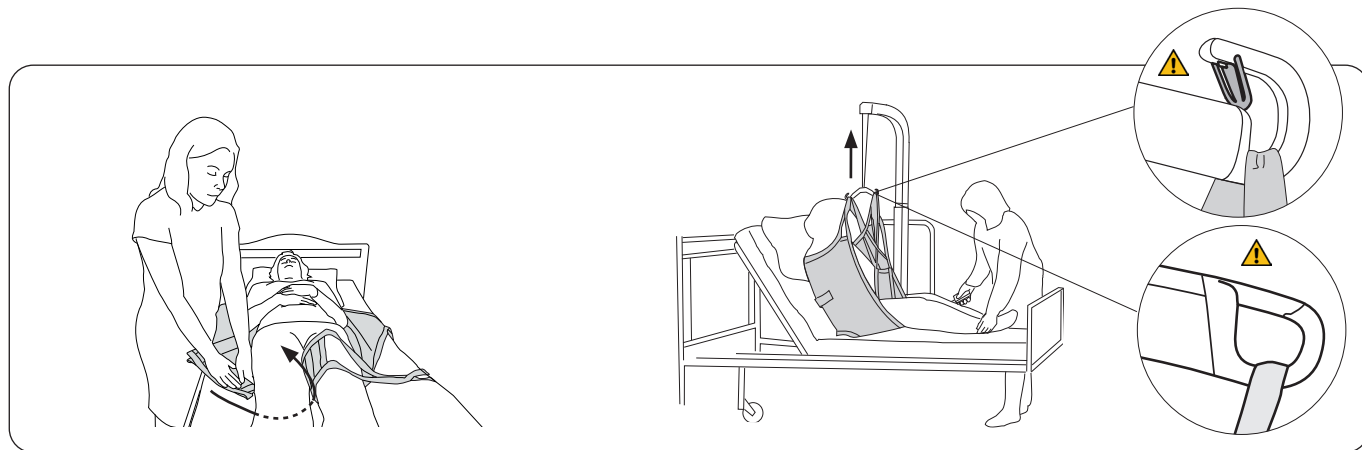

Aseta jalkatuet jalkojen alle. Se tapahtuu helpoimmin painamalla jalkatukea patjaa vasten ja työntämällä se samanaikaisesti avustettavan polven alle. Varmista, että kangas on suorassa ja tukee jalkaa kunnolla. Jalkatuet voidaan kiinnittää eri tavoilla, katso sivu 12.

Korota sänkyä pään puolelta. Kiinnitä ensin ylemmät hihnalenkit nostokaaren koukkuihin ja kiinnitä sitten jalkatukien lenkit. Katso sivuilta 6–7 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettavaa.

Nostokankaan asettelu avustettavan istuessa sängyllä


Nosta sänkyä avustettavan pään puolelta. Aseta nostokangas sängyn päälle tuotelappu alaspäin patjaa vasten. Ohjaa nostokangas alas avustettavan selän taakse siten, että alareuna on **samalla tasolla häntäluun kanssa**. **Huomautus!** Nostokankaan asettamista helpottaa, jos avustettava itse kumartuu tai häntä kallistetaan eteenpäin.

Nostaminen sänkyyn

Nostokankaan poistaminen siirron jälkeen on suositeltavaa. Jos jostakin syystä on tarkoituksenmukaisempaa jättää nostokangas sänkyyn, on suositeltavaa käyttää verkkopolyesteristä valmistettua nostokangasta.

Huomioi oma työasentosi ja avustettavan mukavuus. Käytä apuna sängyn nosto- ja laskutoimintoja. Hyvä työasento saavutetaan patjan ollessa avustajan rystysten korkeudella, kun käsien annetaan roikkua vapaasti. Avustajaan kohdistuvan kuormituksen mukaan on tapauskohtaisesti arvioitava, kuinka monta avustajaa toimenpiteeseen tarvitaan.

Nostokankaan poistaminen avustettavan istuessa sängyllä

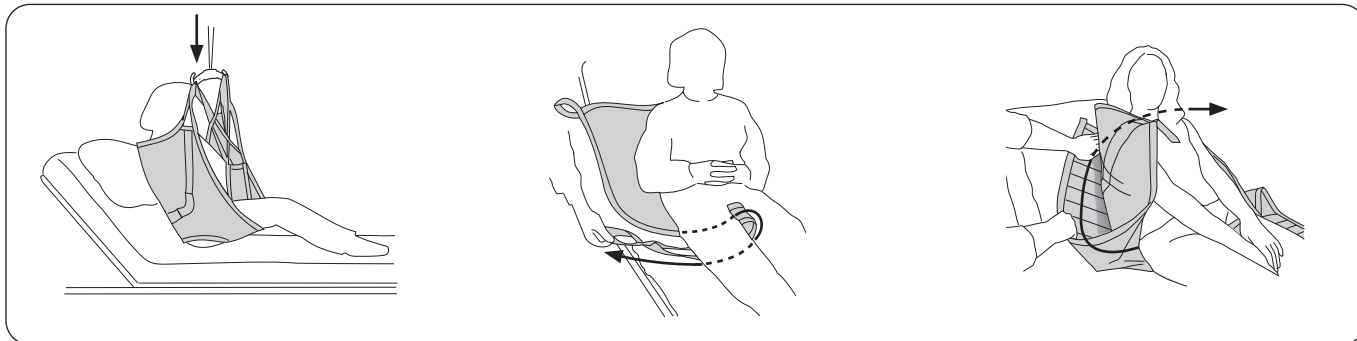


Aseta avustettava sängyn yläpuolelle. Nosta sängyn pääpuolta ylöspäin, jotta avustettavan on mukavampi olla. Laske avustettava sängylle.

Ota jalkatuet pois vetämällä jalkatuen lenkit ulos kangasosan alta. **Huomautus:** tämä on helpompaa, jos avustettavan jalat ovat koukussa.


Poista nostokangas vetämällä yksi jalkatuki nostokankaan taakse ja yli vastakkaiselle puolelle.

Nostokankaan poistaminen avustettavan ollessa makuullaan sängyssä

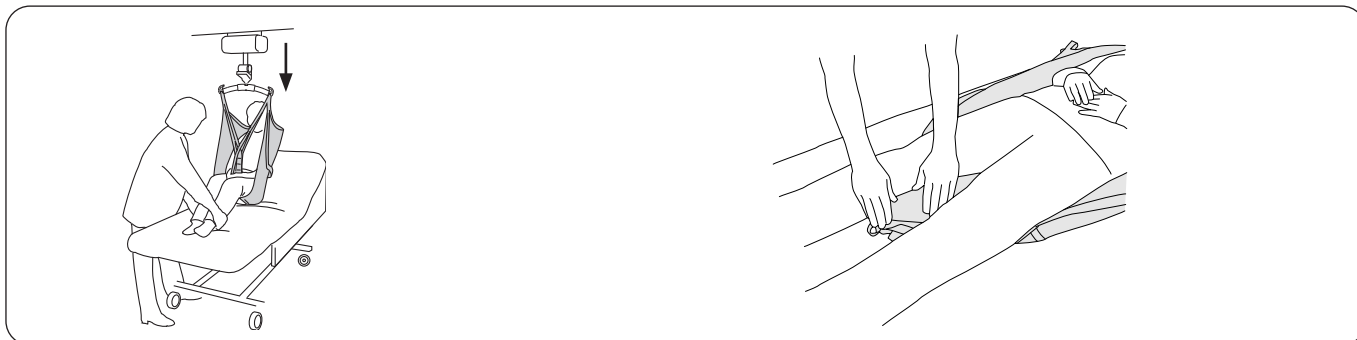

Aseta avustettava sängyn yläpuolelle. Nosta sängyn pääpuolta ylöspäin, jotta avustettavan on mukavampi olla. Laske avustettava sängylle. Laske sängyn pääpuoli alas.

Sijoita jalkatuen lenkit jalkatukien alle avustettavan jalkojen väliin.

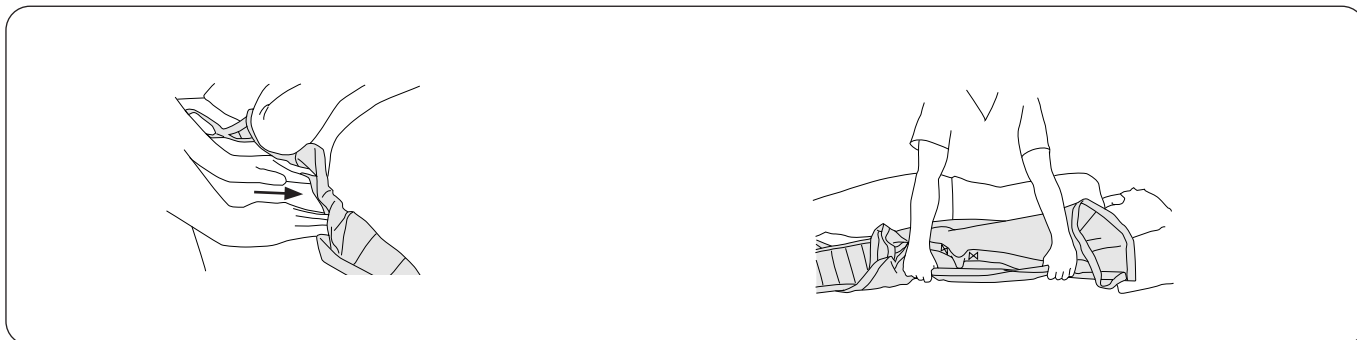


Ota kiinni nostokankaan reunasta. Työnnä nostokankaan reuna kankaan alle. Paina nostokangasta patjaa vasten ja avustettavan alle.

Käännä avustettava varovasti kyljelleen. Ota nostokankaasta kiinni alakautta ja vedä se varovasti pois.

Kiinnitysohje

Erilaisia tapoja jalkatukien kiinnittämiseen

Ennen kiinnitystavan valintaa on aina arvioitava mahdolliset yksilölliset riskit.

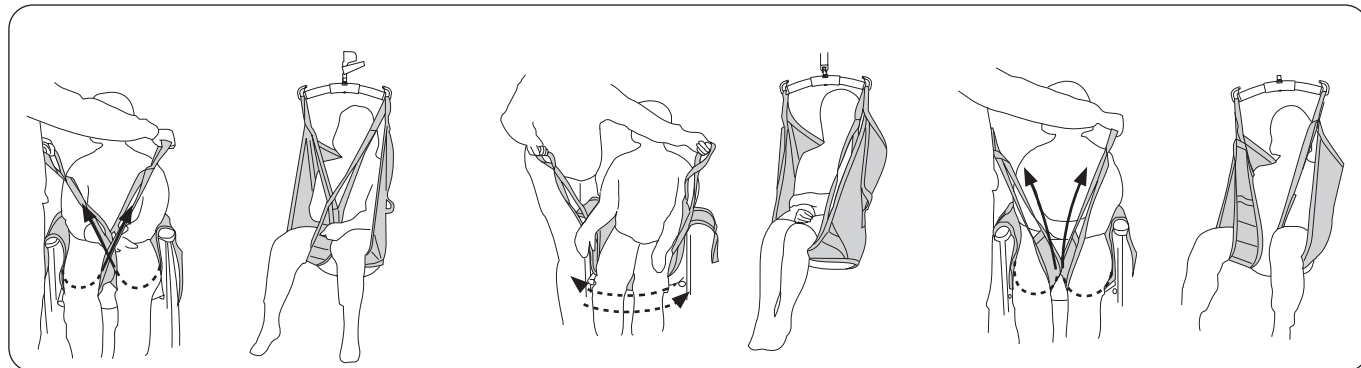

Jalkatuet ristissä.

Yleisin tapa asetella nostokangas. Yksi jalkatuen lenkki pujotetaan toisen läpi ennen lenkkien kiinnittämistä nostokaareen.

Kietaisu kummankin reiden alta.

Tämä sopii esimerkiksi nostettaessa avustettavaa, jonka jalat on amputoitu.


Huomautus: liian takakenoinen istuma-asento vältetään kiinnittämällä jalkatukien lenkkeihin jatkolenkit.

Kumpikin jalkatuki kiinnitettynä erikseen nostokaareen.

Tämä voi sopia silloin, jos avustettava on erittäin herkkä alapään ja alavatsan alueelta.

⚠ Suurempi liukumisen riski.

Avustettava ei istu hyvin nostokankaassa – mistä se voisi johtua?

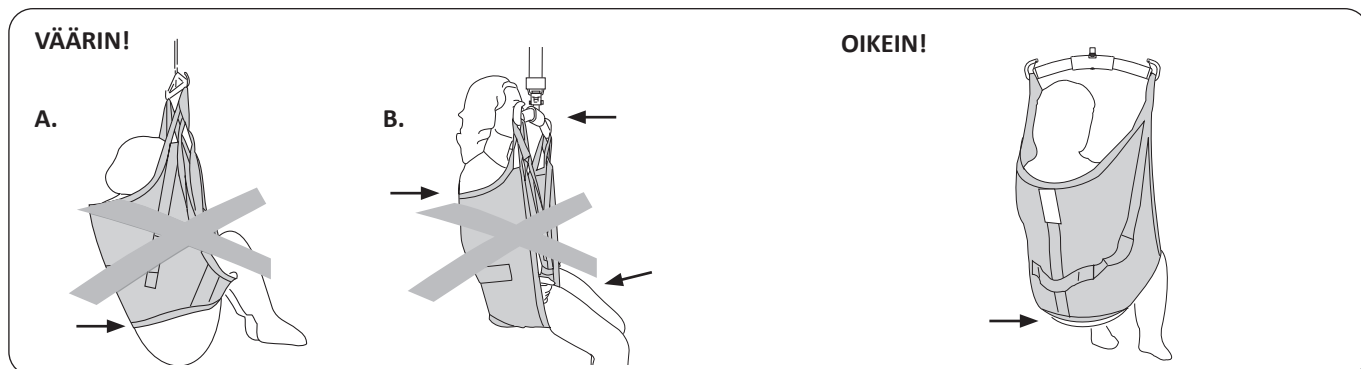


A. Liukumisen riski. Pakarat roikkuvat alhaalla. Nostokangas voi olla liian suuri. Syynä voi olla myös se, ettei nostokangasta ole vedetty riittävän alas avustettavan selkäpuolelta.

Tarkasta ennen nostamista, että alareuna on suorassa ja kangas ulottuu riittävästi jalkojen ympäri.

B. Liian pieni nostokangas voi aiheuttaa sen, että jalkatuki hiertää haarojen välistä ja tuntuu epämukavalta, nostokaari jää kasvojen eteen ja/tai selän tuenta ei ole riittävä.

Nostokankaan alareuna on samalla tasolla häntäluun kanssa. Jalkatuet on asetettu oikein jalkojen alle.

Lyhennysasento

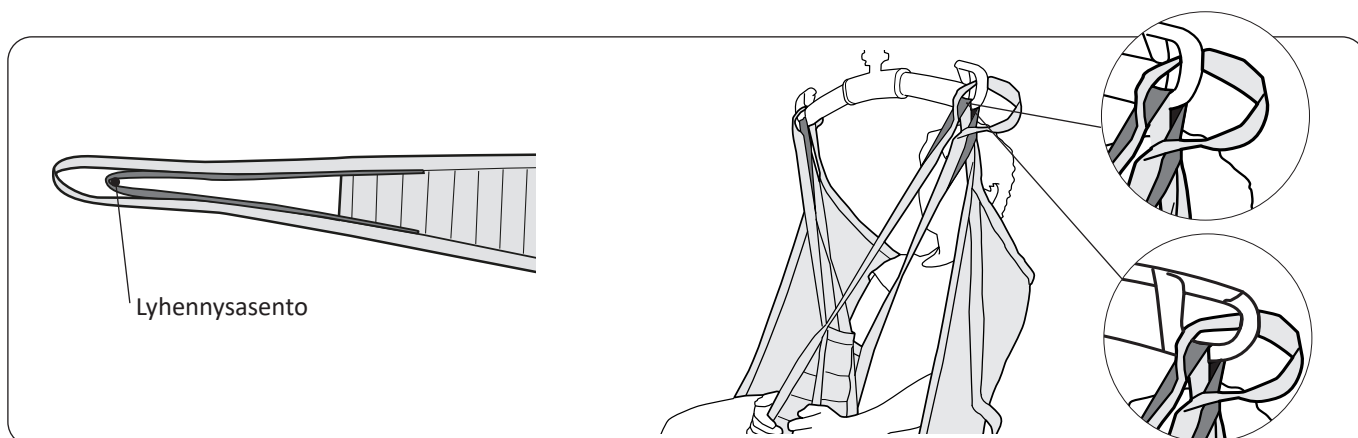


Nostokankaamme on suunniteltu huolellisesti siten, että paine jakautuu tasaisesti jalkojen ja selän alueelle ja että avustettava istuu hyvin tuettuna siirtojen aikana. Joissakin tapauksissa voi kuitenkin olla suositeltavaa käyttää sisempää asetusta eli jalkatuen lenkkien lyhennysasentoa avustettavan istuma-asennon muuttamiseen.

Huomautus: Tämä **ei** koske UniversalSling-nostokankaan vanhempaa mallia 00/02, jossa on lyhennysasennon aikaisempi muoto. Jos tarvitset lyhennysohjeet mallille 00/02, ota yhteys Hill-Romin edustajaan, jolta saat kyseisen mallin käyttöohjeen. Lyhennysasennon käytössä on suositeltavaa kiinnittää myös ulomman jalkatuen lenkki nostokaaren koukkuun, koska silloin lenkit pysyvät paremmin näkyvillä ja hallinnassa.

Lisävarusteet

Extension Loop, vihreä, 12 cm
Extension Loop, vihreä 22 cm
Extension Loop, harmaa, 12 cm
Extension Loop, harmaa, 22 cm

Tuotenro 3691102
Tuotenro 3691103
Tuotenro 3691302
Tuotenro 3691303

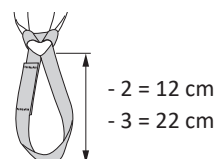


Yleiskuvaus: Liko UniversalSling -nostokangas, malli 000

Tuote	Tuotenro	Koko	Avustettavan paino ¹	Enimmäiskuormitus ²
Liko UniversalSling	35000--4	S	35–55 kg	200 kg
Liko UniversalSling	35000--1	M-Slim (hoikka aikuinen)	45–70 kg	200 kg
Liko UniversalSling	35000--5	M	60–90 kg	200 kg
Liko UniversalSling	35000--6	L	80–120 kg	200 kg
Liko UniversalSling	35000--7	XL	> 110 kg	300 kg

¹ Ilmoitetut henkilöiden painot ovat suuntaa antavia. Eroja esiintyy.

² Enimmäiskuormituksen edellytyksenä on, että nostin/lisävarusteet kestävät vähintään saman suuruisen kuormituksen.

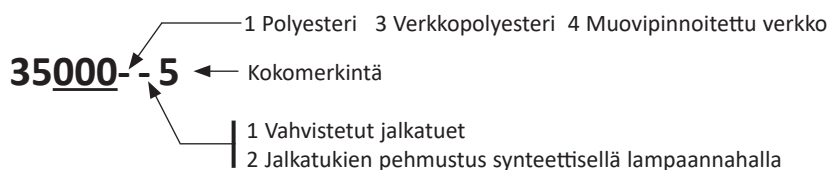

Suosittelut käyttöyhdistelmät:

Suosittelut Liko™ UniversalSling -nostokankaan ja Liko-nostokaarien yhdistelmät:

	Mini 220	Nostokaari 350 ³	Nostokaari 450 ¹	Nostokaari 600 ⁴	Twin 670 -kaksoisnostokaaret ²	Ristikkonostokaari 450	Ristikkonostokaari 670	Univ-sivukaaret + Universal 350	Univ-sivukaaret + Universal 450
UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2	2
UniversalSling, M-Slim	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

¹ Nostokaari 450 viittaa Universal SlingBar 450 -nostokaareen, tuotenumerot 3156075, 3156085 ja 3156095, SlingBar Standard 450 -nostokaareen, tuotenumerot 3156001, 3156003, 3156007 ja 3156016, sekä SlingGuard 450 -nostokaareen, tuotenumerot 3308020 ja 3308520.

² Twin 670 -kaksoisnostokaari viittaa Universal TwinBar 670 -nostokaareen, tuotenumerot 3156077 ja 3156087, sekä SlingGuard 670 Twin -nostokaareen, tuotenumerot 3308040 ja 3308540.

³ Nostokaari 350 viittaa Universal SlingBar 350 -nostokaareen, tuotenumerot 3156074, 3156084 ja 3156094.

⁴ Nostokaari 600 viittaa Universal SlingBar 600 -nostokaareen, tuotenumerot 3156076 ja 3156086.

Kuvaus: 1 = Suositeltava, 2 = Mahdollinen, 3 = Ei suositeltava, 4 = Sopimaton

Muut yhdistelmät

Muiden kuin Likon suosittelemien lisävarusteiden tai tuotteiden yhdistelmäkäyttö voi vaarantaa avustettavan turvallisuuden.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Ruotsi
+46 (0)920 474 700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

