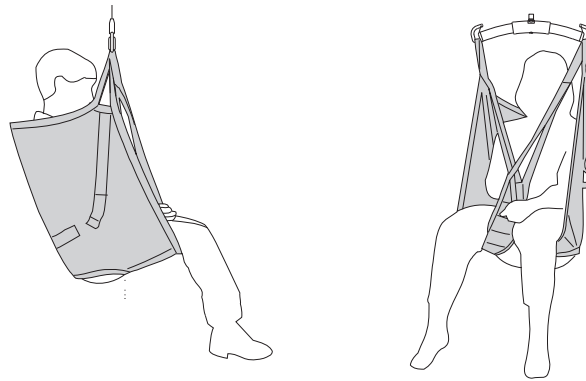


Gebruiksaanwijzing



Productbeschrijving

De Liko UniversalSling is een standaardmodel, ontworpen voor aanpassing aan de patiënt zonder individuele instellingen; het is een van onze meest gebruikte tilbanden.

De UniversalSling biedt een rechte zithouding en ondersteunt de hele rug tot aan de nek. Als de patiënt ondersteuning voor het hoofd nodig heeft, wordt aanbevolen een tilband met een hoge rug te gebruiken, bijvoorbeeld de Original HighBack Sling Mod 200/210 of de Soft Original HighBack Sling Mod 26. De armen van de patiënt blijven binnen de tilband. Een goed passende en zorgvuldig aangebrachte UniversalSling geeft de patiënt een uitstekend gevoel van veiligheid en een hoog niveau van comfort.

Maten

De UniversalSling is beschikbaar in verschillende maten. Voor de hoogst mogelijke mate van comfort en veiligheid is het belangrijk dat de juiste maat wordt gekozen. Bij een te grote tilband bestaat meer kans dat de patiënt eruit glijdt, en een te kleine tilband kan in de liesstreek snijden en ongemak veroorzaken.

Voor grotere maten kan een combinatie met een TwinBar 670 een goede keuze zijn.

Materialen

De UniversalSling is beschikbaar in verschillende materialen. Aangezien de UniversalSling gewoonlijk niet onder de patiënt blijft liggen na de verplaatsing, wordt aanbevolen om de polyesteruitvoering te gebruiken. Dit materiaal is duurzaam en heeft weinig wrijving, waardoor de tilband gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen is.

De UniversalSling is ook verkrijgbaar in netpolyester. Dit materiaal wordt aanbevolen als de tilband na het verplaatsen op zijn plaats blijft, of als een luchtiger alternatief gewenst is.

Voor baden en douchen is er een netuitvoering met een kunststofcoating beschikbaar, die water doorlaat en gemakkelijk kan worden afgeveegd. Dit materiaal droogt snel, waardoor de patiënt het niet koud krijgt, zoals kan gebeuren bij vochtabsorberende stof.

De liftbanden van de tilband zijn altijd gemaakt van duurzaam polyester en zijn bijzonder veilig.

Beensteunen

De UniversalSling is verkrijgbaar met diverse soorten beensteunen. De meest voorkomende zijn beensteunen met versteviging. De versteviging biedt een hoog comfort, zorgt voor een gelijkmatige druk en voorkomt dat de tilband onder de dijen kreukt.

Er zijn gestoffeerde beensteunen (synthetische schapenvacht) beschikbaar als accessoire.

De UniversalSling met gestoffeerde beensteunen is geschikt voor patiënten die bijzonder gevoelig zijn voor druk.

Geschikte liften

De UniversalSling kan samen met alle plafondliften en mobiele liften van Liko worden gebruikt. U kunt kiezen tussen de plafondliften LikoGuard™, Likorall™ en Multirall™ of de mobiele liften Golvo™, Viking™, Uno™ en Liko™ M220/M230.

In dit document wordt de persoon die wordt opgetild de patiënt genoemd, en de persoon die hierbij helpt de zorgverlener.



BELANGRIJK!






















Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen voor zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn voor de lift die u wilt gebruiken. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. U moet weten of de patiënt het tillen aankan. Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Inhoudsopgave

Symboolbeschrijving	3
Veiligheidsinstructies	4
Verzorging en onderhoud	5
Definities	5
Instructies voor het bevestigen van een tilband aan verschillende tiljukken	6
Instructies voor het bevestigen van een UniversalSling aan een tiljuk met 4 haken (twinbars en kruisjukken).....	7
Tillen vanuit een zittende positie	8
Tillen naar een zittende positie	9
Verwijderen van de tilband in een stoel/rolstoel	10
Tillen vanuit het bed.....	10
Tillen naar het bed	11
Verwijderen van de tilband bij zitten in bed.....	11
Verwijderen van de tilband bij liggen in bed	11
Passingsadvies	12
Verschillende manieren van aanbrengen van beensteunen	12
De patiënt zit niet goed in de tilband - hoe komt dit?	12
Ingekorte maat	13
Accessoires	13
Overzicht Liko UniversalSling, Mod. 000,	14
Aanbevolen combinaties	14

Symboolbeschrijving

Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing. Wordt gebruikt waar extra zorg en aandacht nodig is.
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing
	CE-markering
	Juridisch fabrikant
	Productiedatum
	Referentienummer
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Niet stomen
	Niet strijken
	Drogen in de droogtrommel
	Niet drogen in de droogtrommel
	Wassen Het symbool komt altijd voor in combinatie met de aanbevolen temperatuur in °C en °F.
	Latexvrij
	Periodieke inspectie
	Geen bleek
	Drogen aan de waslijn in de schaduw
	Omhoog gericht en symbool aan de buitenkant van de apparatuur.
	Symbool aan de buitenkant van de apparatuur.
	GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten. (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer

Veiligheidsinstructies

⚠ Bedenk vóór het tillen het volgende:

- Een verantwoordelijke persoon binnen uw organisatie moet per geval besluiten of er een of meerdere zorgverleners nodig zijn.
- Zorg ervoor dat de gekozen tilband qua model, maat, materiaal en uitvoering voldoet aan de behoeftes van de patiënt.
- De totale maximale belasting voor een lift systeem wordt altijd bepaald door het product binnen het systeem met de laagste gespecificeerde maximale belasting.
- Gebruik om veiligheidsredenen en voor de hygiëne individuele tilbanden.
- Plan het tillen voordat het wordt uitgevoerd, zodat het zo veilig en soepel mogelijk verloopt.
- Controleer of het tilaccessoire verticaal hangt en vrij kan bewegen.
- Hoewel de tiljucken van Liko zijn uitgerust met clips, moet er extra voorzichtig te werk worden gegaan. Controleer voordat de patiënt daadwerkelijk getild wordt maar terwijl de banden volledig gestrekt zijn, of de banden correct aan de haken van het tiljuk zijn bevestigd.
- Zorg ervoor dat de patiënt goed in de tilband zit voordat deze naar een andere plaats wordt gebracht.
- Til een patiënt nooit hoger dan nodig is voor het volledig tillen en verplaatsen.
- Laat een opgetilde patiënt nooit zonder toezicht.
- Controleer of de wielen van de rolstoel, het bed, de brancard, enz., tijdens het tillen/verplaatsen op de rem staan.
- Werk altijd ergonomisch. Gebruik de mogelijkheden van de patiënt om actief aan de verplaatsing mee te werken.
- Stel de tilband niet bloot aan direct zonlicht als deze niet wordt gebruikt.

⚠ Een onjuiste bevestiging van de tilband aan het tiljuk kan ernstig letsel bij de patiënt veroorzaken.

⚠ Handmatig draaien van de patiënt in bed kan letsel bij de zorgverlener veroorzaken.

CE Medisch hulpmiddel, productklasse I

OCTROOI www.hillrom.com/patents

Kan beschermd zijn door één of meer octrooien. Raadpleeg de bovenstaande website.

De Hill-Rom-ondernemingen zijn eigenaar van Europese, Amerikaanse of andere octrooien en aangevraagde octrooien.

Productwijzigingen

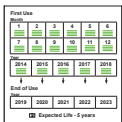
De producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en informatie over productverbeteringen.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko is gecertificeerd conform de ISO 9001-kwaliteitscertificatie en de daaraan gelijkwaardige ISO 13485-kwaliteitscertificatie voor de medische-hulpmiddelenindustrie. Liko is ook gecertificeerd conform de milieustandaard ISO 14001.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel, dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.



Vóór het eerste gebruik

Voordat de tilband voor het eerst wordt gebruikt, moet de datum (jaar en maand) worden gemarkeerd op het label met 'First Use' (onder het label met 'Perform Inspection'); zie het onderstaande voorbeeld. De markering wordt aangebracht door de groene draden in de betreffende vakjes door te knippen. De draden worden doorgeknipt met één knip in het midden van het vakje. Verwijder de draden niet volledig - laat de losse eindjes van de draden zitten.

Voorbeeld: februari 2014

First Use	
Month	Year
1	2014
2	2015
3	2016
4	2017
5	2018
6	2019
7	2020
8	2021
9	2022
10	2023
11	
12	

End of Use

Year
2019
2020
2021
2022
2023

Expected Life - 5 years

Knip de draden in het midden van het vakje door.



Verzorging en onderhoud

Controleer de tilband vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigingen:

- Materiaal
- Banden
- Zomen
- Draaglussen

⚠ Gebruik geen beschadigde tilaccessoires.

Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Als de tilband wordt gebruikt voor bad of douchen: na gebruik in bad en douche moet de tilband zo worden geplaatst dat hij zo snel mogelijk droogt.

Wasinstructies: zie hiervoor het productlabel van de tilband en de bijgevoegde bijlage 'Verzorging en onderhoud Liko-tilbanden'.

Periodieke inspectie

Het product moet minstens om de 6 maanden worden geïnspecteerd. Frequentere inspectie is mogelijk nodig als de producten vaker dan normaal worden gebruikt of gewassen. Zie het Liko-protocol 'Periodieke inspectie Liko-textielproducten'. Voor protocollen kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.

Verwachte levensduur

Als het product is gemaakt van groen geweven polyester, heeft het product een verwachte levensduur van 5 jaar.

Als het product is gemaakt van netpolyester met een kunststofcoating of grijs netpolyester, heeft het product een verwachte levensduur van 3 jaar. De verwachte levensduur is gebaseerd op 10 keer per dag gebruiken en één keer per week wassen volgens de wasinstructies. Hill-Rom adviseert het product alleen tijdens de verwachte levensduur te gebruiken.

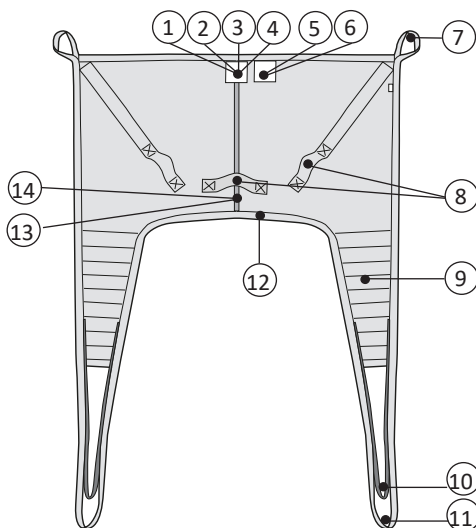
Recyclinginstructies


Het hele product, inclusief baleinen, vulmateriaal, enz., moet gescheiden worden afgevoerd als brandbaar afval.

Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, gaten in de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan verwijdering. Klanten moeten zich houden aan alle federale, staats-, regionale en/of lokale wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.

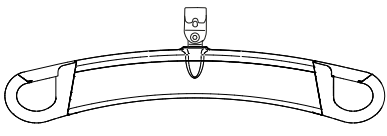
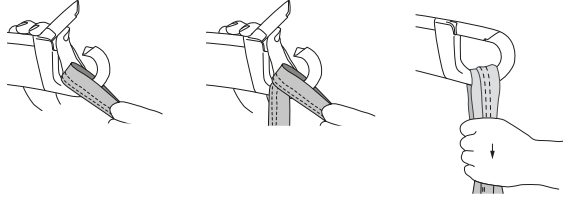
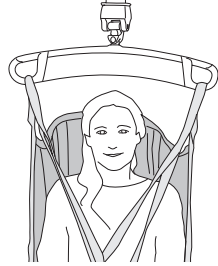
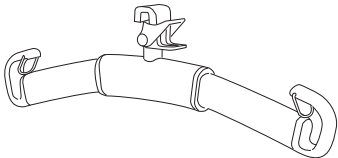
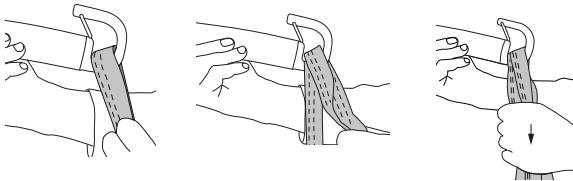

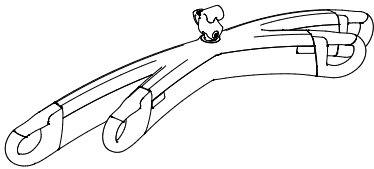
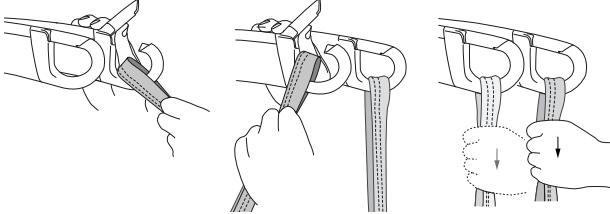
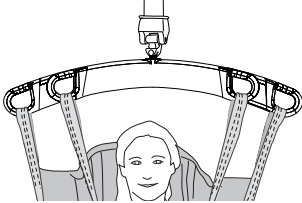
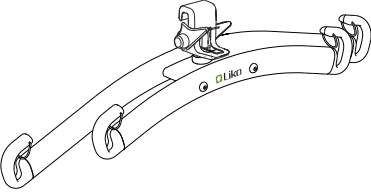
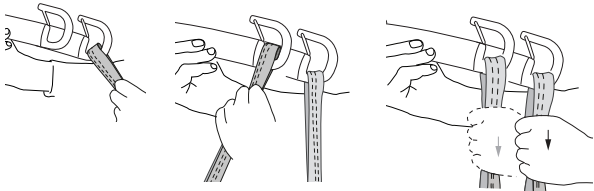
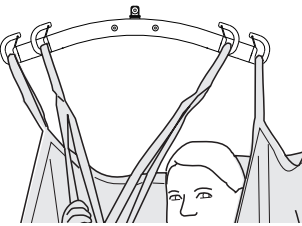
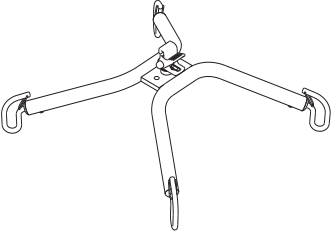
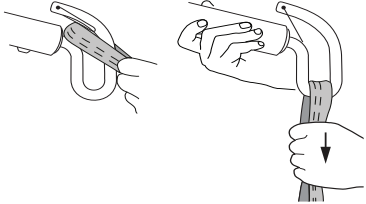
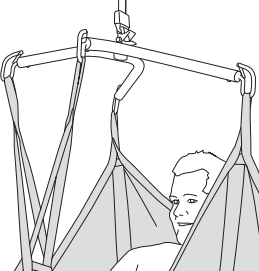
In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact opnemen met de technische ondersteuning van Hill-Rom voor advies over protocollen over veilig afvoeren.

Definities




1. Productlabel
2. Label: productiejaar en maand ()
3. Label: serienummer
4. Label: individuele markering (Belongs to)
5. Label: controle en inspectie (Perform Inspection)
6. Label: de datum van het eerste gebruik van het product (First Use)
7. Bovenste bandlus
8. Handgreep
9. Beensteunen
10. Ingekorte maat
11. Buitenste beensteunlussen
12. Onderrand
13. Middelste rugband
14. Maataanduiding


Instructies voor het bevestigen van een tilband aan verschillende tiljukken

Tiljuk	Tilbandlussen aan tiljukhaken	Correct
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-Bar</p>		

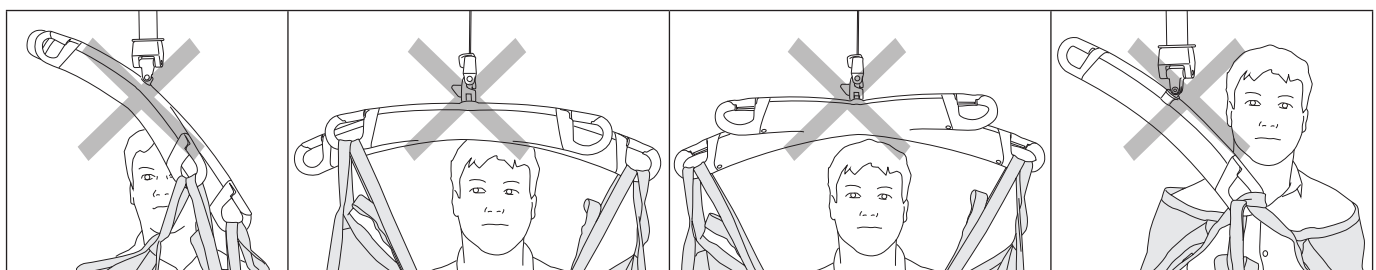
Voorbeeld: Verkeerd gebruik



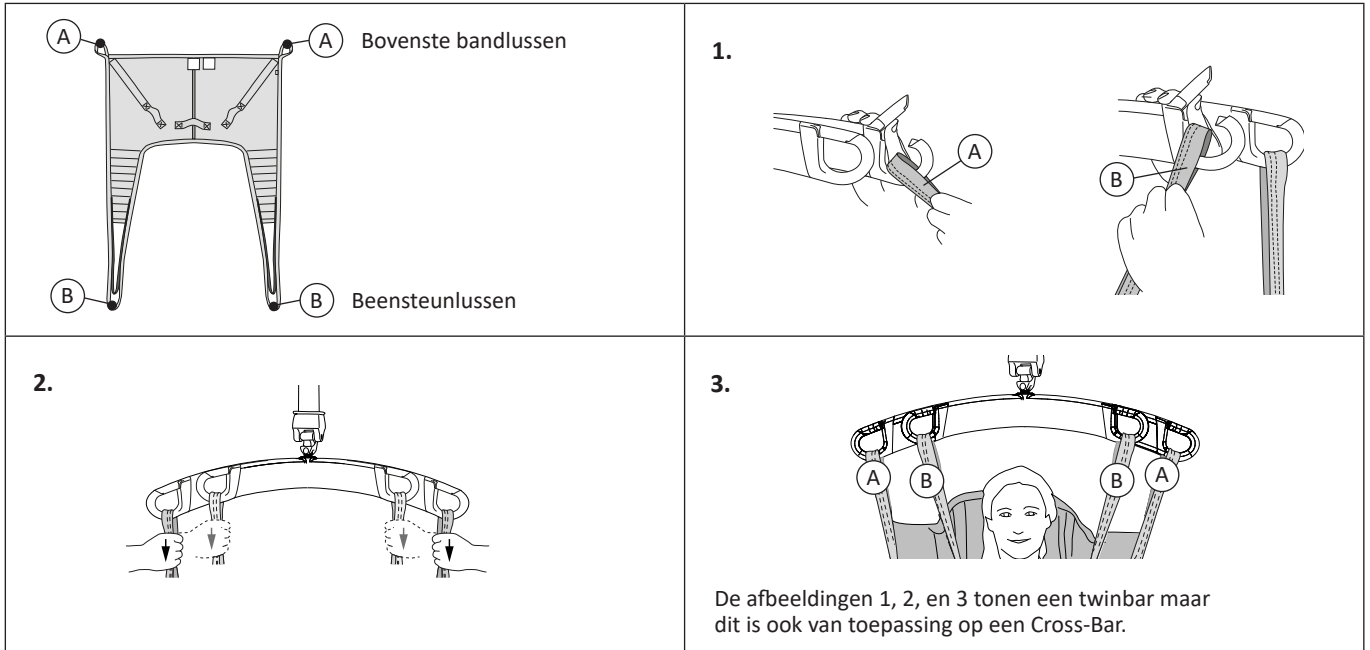Instructies voor het bevestigen van een UniversalSling aan een tiljuk met 4 haken (twinbars en kruisjukken)




Tillen vanuit een zittende positie

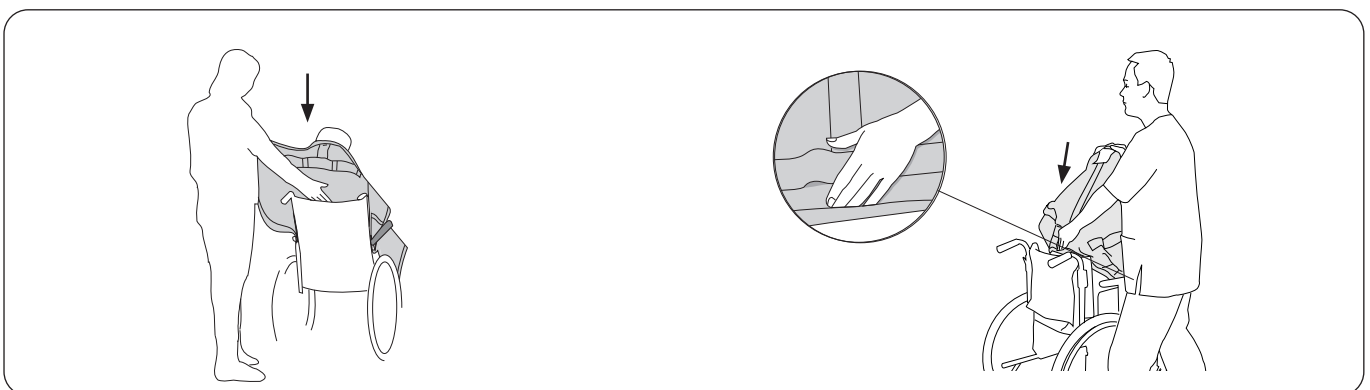


Plaats de tilband achter de rug van de patiënt, met het productlabel naar buiten. Vouw de onderrand van de tilband om uw vingertoppen om de tilband goed op zijn plaats te leiden.

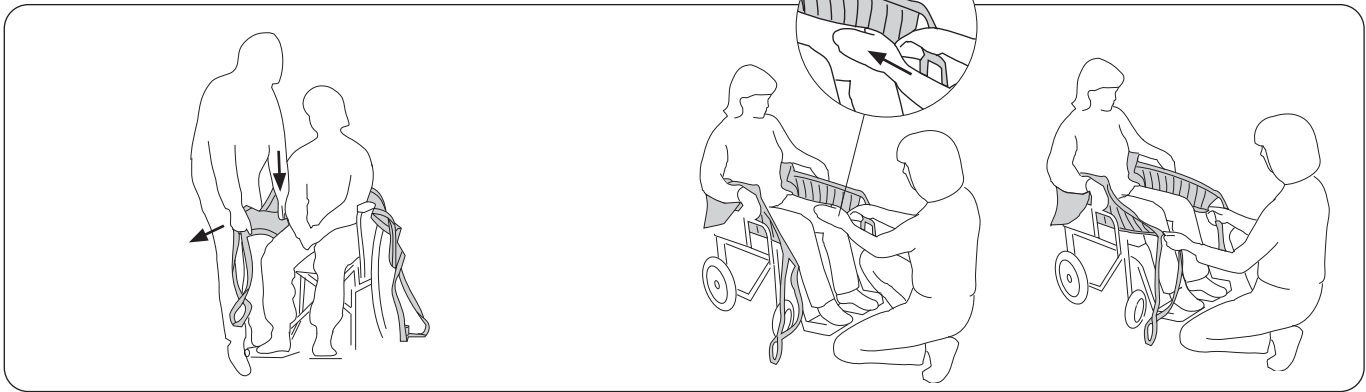Druk de onderrand van de tilband met uw handpalm naar beneden tot de hoogte van het stuitbeen van de patiënt - dit is zeer belangrijk. Opmerking: goede positionering gaat makkelijker als de patiënt iets naar voren leunt of naar voren wordt gebracht.




Trek de beensteunen van de tilband naar voren langs de buitenkant van de dijen van de patiënt. Plaats uw handpalm tussen het lichaam van de patiënt en de tilband en duw de onderrand van de beensteun naar beneden in de richting van het zitgedeelte. Trek tegelijkertijd de beensteun naar voren met uw andere hand om deze uit te rekken.

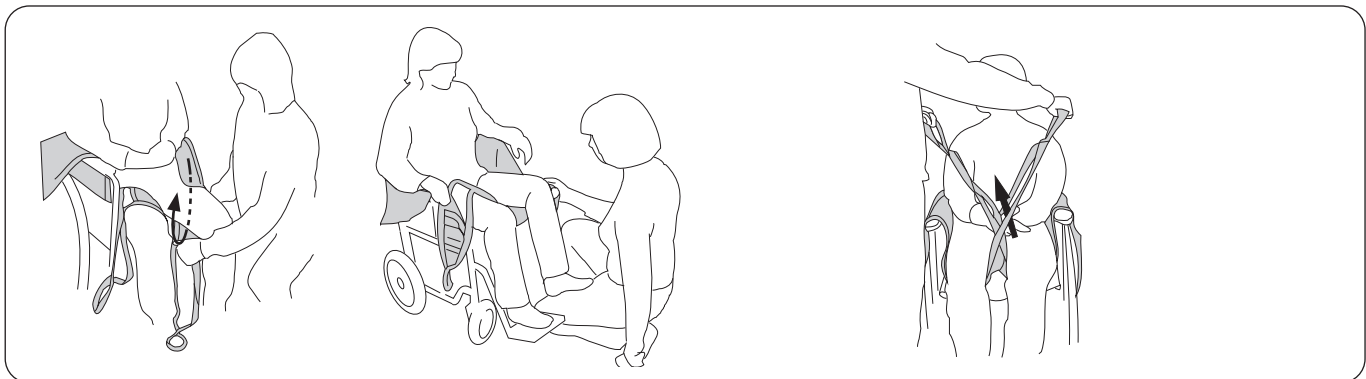Trek de beensteunen naar voren om eventuele vouwen aan de achterkant glad te krijgen. Controleer of beide beensteunen even ver uitsteken. Opmerking: met een beetje steun onder de knieholte kunnen de beensteunen eenvoudiger voorwaarts worden getrokken.



Plaats de beensteunen onder beide dijen. Zorg ervoor dat het materiaal plat ligt en goed rond het been zit. **Opmerking:** het aanbrengen van de beensteunen is makkelijker als de benen van de patiënt iets hoger zijn dan de stoel. Dit kan worden bereikt door de voeten van de patiënt op de voetensteunen of op uw eigen been te plaatsen, zoals op de afbeelding te zien is.

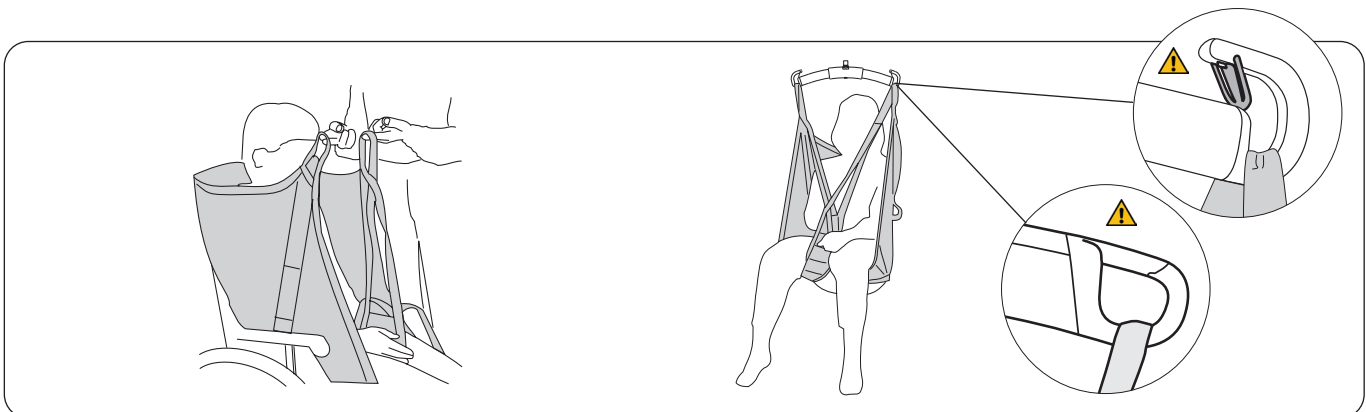Bereid de bevestiging van de beensteunen voor. De meest gebruikelijke manier om de tilband aan te brengen, is met gekruiste beensteunen. Zie pagina 12 voor alternatieve methoden.




Opmerking: controleer of alle draaglussen dezelfde lengte hebben, d.w.z. op gelijke hoogte zijn wanneer ze worden uitgerekt vóór het tillen. Pas de positie van de tilband aan als ze niet op gelijke hoogte zijn.

Bevestig eerst de bovenste bandlussen aan het tiljuchaken en vervolgens de beensteunlussen. Zie pagina 6-7 voor instructies voor het bevestigen van de tilbandlussen aan verschillende tiljucken. Til de patiënt.

Tillen naar een zittende positie

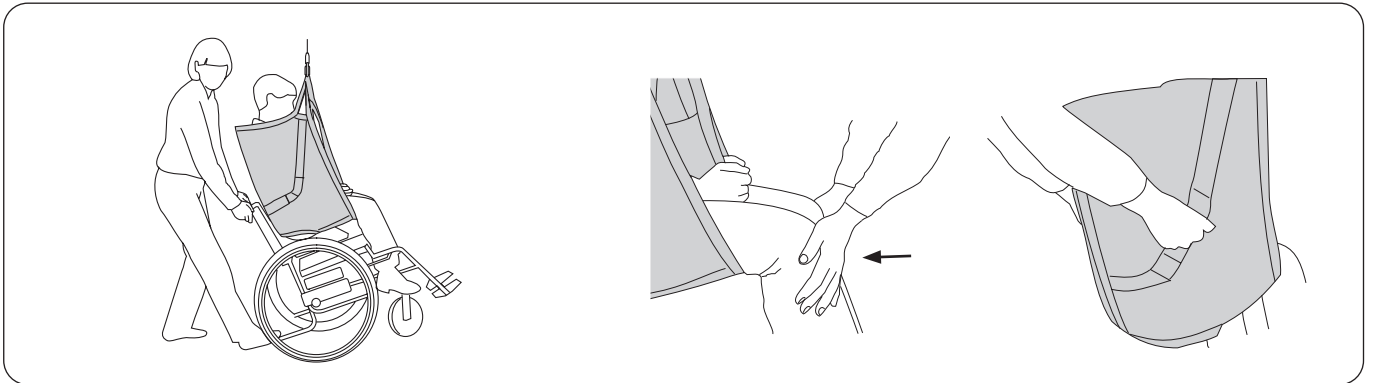Als de patiënt in een rolstoel moet worden geplaatst, is het belangrijk dat hij/zij ver achterin de stoel komt om goed te kunnen zitten. Dit kunt u op verschillende manieren bereiken.



Wanneer u een patiënt in een rolstoel plaatst: laat de rolstoel naar achteren leunen tijdens het laten zakken van de patiënt. Laat de billen tijdens het laatste gedeelte tegen de rugleuning naar beneden schuiven. Bepaal de hoek van de rolstoel met uw voet op de kantelsteun.

Alternatief: druk bij het neerlaten van de patiënt licht onder de knieën van de patiënt zodat het zitvlak richting rugsteun wordt geduwd. Als de tilband handgrepen heeft, kunnen deze worden gebruikt ter geleiding.

⚠ Gebruik de handgrepen niet om te tillen! Te veel druk op de handgrepen kan ertoe leiden dat de tilband scheurt.

Verwijderen van de tilband in een stoel/rolstoel

Het is raadzaam om de tilband na het verplaatsen te verwijderen. Als het beter is om de tilband na het verplaatsen in de stoel te laten, wordt aanbevolen om een tilband van netpolyester te gebruiken.



Verwijder de beensteunen zorgvuldig. Dit gaat het prettigst door de beensteunlussen onder het materiaal door te trekken.

Verwijder de tilband door hem voorzichtig omhoog te trekken.

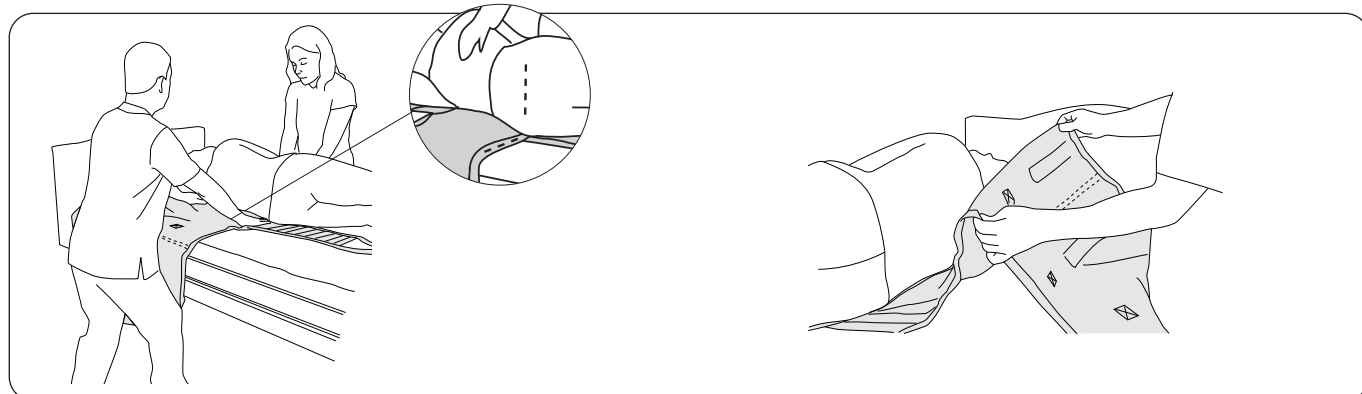
Tillen vanuit het bed

De tilband kan op verschillende manieren worden aangebracht, afhankelijk van de status van de patiënt. De tilband wordt aangebracht terwijl de patiënt in bed ligt of in bed zit. Als er een geavanceerde drukverlagende matras wordt gebruikt, kan deze maximaal worden opgeblazen om het aanbrengen van de tilband te vergemakkelijken.

Denk aan uw eigen werkhouding en het comfort van de patiënt. Gebruik de functies van het bed voor tillen en laten zakken. Een goede werkhouding wordt verkregen wanneer de matras op gelijke hoogte ligt met de knokkels van de handen van de zorgverlener wanneer deze zijn armen helemaal omlaag houdt. Afhankelijk van de belasting voor de zorgverlener moet per geval worden beoordeeld hoeveel zorgverleners er nodig zijn voor de bediening.


Aanbrengen van de tilband terwijl de patiënt in bed ligt

Als er moet worden getild vanuit rugligging zonder de mogelijkheid om het hoofdeinde van het bed omhoog te brengen of om het hoofd op een andere manier te ondersteunen, is het raadzaam gebruik te maken van de Liko Soft Original HighBack Soft Original HighBack Sling Mod. 26, of anders van de Liko Original HighBack Sling Mod. 200 of 210, die allemaal ondersteuning bieden voor het hoofd.



Draai de patiënt op zijn zij. Dit gaat makkelijker als de patiënt zelf kan bijdragen door de bedrail vast te pakken aan de kant waarnaar hij moet worden gedraaid. Plaats de rand van de tilband richting de achterkant van de patiënt en zorg ervoor dat de onderrand **op gelijke hoogte is met het stuitbeen**.

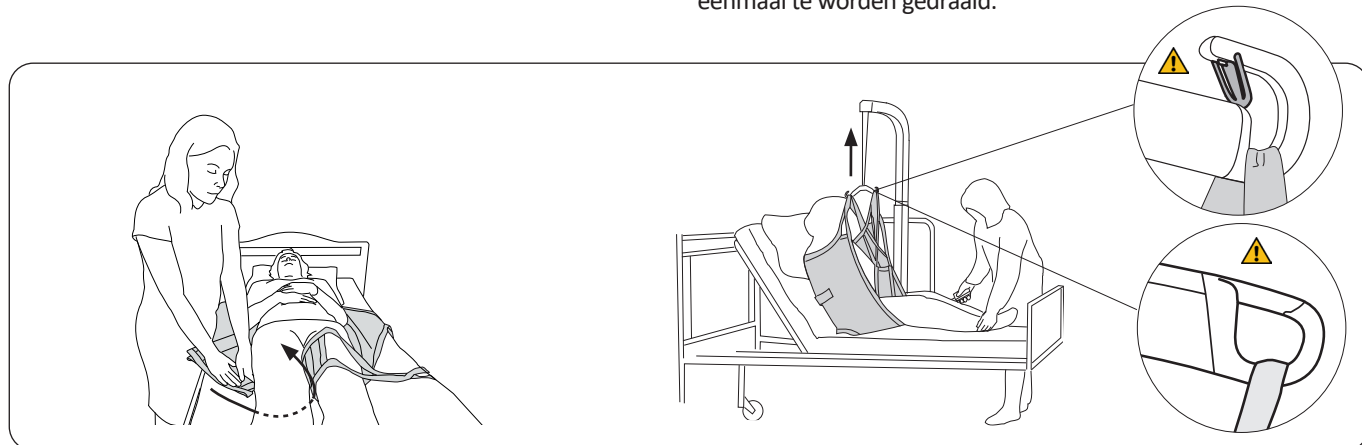Vouw de tilband zodanig dat de 'middelste rugband' in lijn is met de ruggengraat van de patiënt. Controleer of de vouw de rand van de tilband bedekt die naar binnen richting de achterkant van de patiënt is gericht om de wrijving te verminderen. Draai de patiënt voorzichtig terug en trek de tilband aan de andere kant naar buiten. Bij deze aanbrengmethode hoeft de patiënt slechts eenmaal te worden gedraaid.



Plaats de beensteunen onder beide benen. U kunt dit het beste doen door de beensteun omlaag tegen de matras te drukken terwijl u deze onder de knie plaatst. Zorg ervoor dat het materiaal plat ligt en goed rond het been zit. De beensteunen kunnen op verschillende manieren worden bevestigd; zie pagina 12.

Verhoog het hoofdeinde van het bed. Bevestig eerst de bovenste bandlussen aan de haken van het tiljuk en vervolgens de beensteunlussen. Zie pagina 6-7 voor instructies voor het bevestigen van de tilbandlussen aan verschillende tiljukken. Til de patiënt.

Aanbrengen van de tilband als de patiënt in bed zit

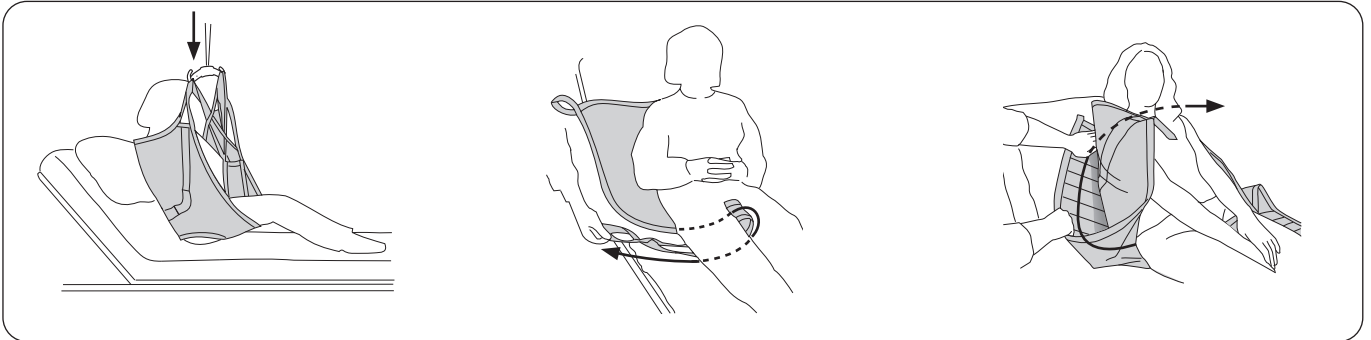
Verhoog het hoofdeinde van het bed achter de patiënt. Leg de tilband op het bed met het productlabel naar beneden richting de matras. Schuif de tilband naar beneden achter de rug van de patiënt, zodat de onderrand **op gelijke hoogte is met het stuitbeen**. **Let op!** Het aanbrengen gaat makkelijker als de patiënt naar voren leunt of naar voren wordt gebracht.

Tillen naar het bed

Het is raadzaam om de tilband na het verplaatsen te verwijderen. Als het beter is om de tilband na het verplaatsen in het bed te laten, wordt aanbevolen om een tilband van netpolyester te gebruiken.

Denk aan uw eigen werkhouding en het comfort van de patiënt. Gebruik de functies van het bed voor tillen en laten zakken. Een goede werkhouding wordt verkregen wanneer de matras op gelijke hoogte ligt met de knokkels van de handen van de zorgverlener wanneer deze zijn armen helemaal omlaag houdt. Afhankelijk van de belasting voor de zorgverlener moet per geval worden beoordeeld hoeveel zorgverleners er nodig zijn voor de bediening.

Verwijderen van de tilband bij zitten in bed




Positioneer de patiënt boven het bed. Verhoog het hoofdeinde van het bed voor het comfort van de patiënt. Laat de patiënt op het bed zakken.

Verwijder de beensteunen door de beensteunlussen onder het materiaal door te trekken. **Opmerking:** dit gaat gemakkelijker als de benen van de patiënt gebogen zijn.


Verwijder de tilband door een van de beensteunen achter de tilband en over de tegenoverliggende zijde te trekken.

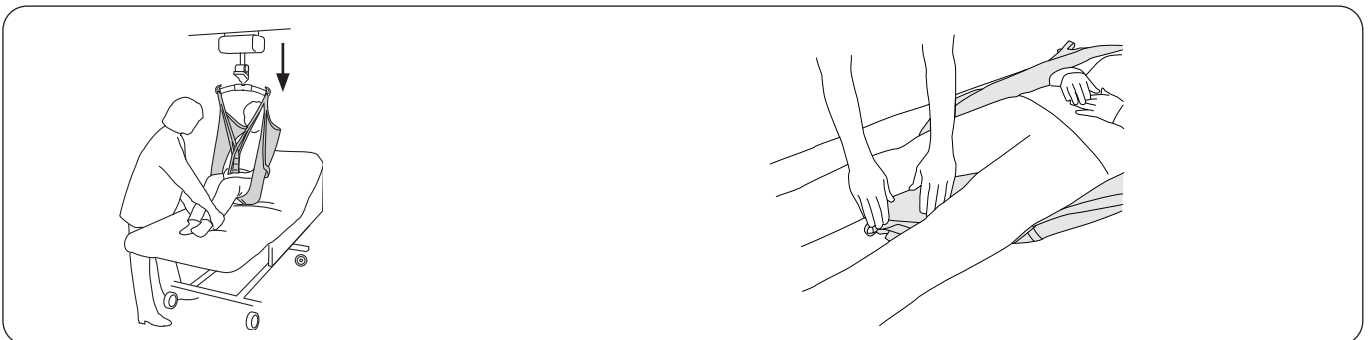Verwijderen van de tilband bij liggen in bed



Positioneer de patiënt boven het bed. Verhoog het hoofdeinde van het bed voor het comfort van de patiënt. Laat de patiënt op het bed zakken. Laat het hoofdeinde zakken.

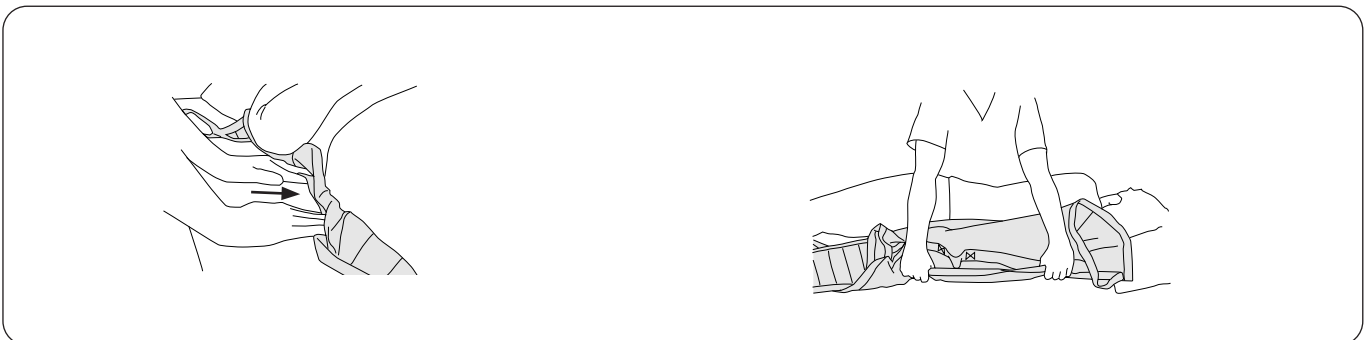Plaats de beensteunlussen onder de beensteunen tussen de benen van de patiënt.




Pak de rand van de tilband vast. Duw de tilband onder zichzelf naar binnen. Druk de tilband tegen de matras en onder de patiënt naar binnen.

Draai de patiënt voorzichtig op de zij. Pak de tilband van onderaf vast en verwijder deze voorzichtig.

Passingsadvies

Verschillende manieren van aanbrengen van beensteunen

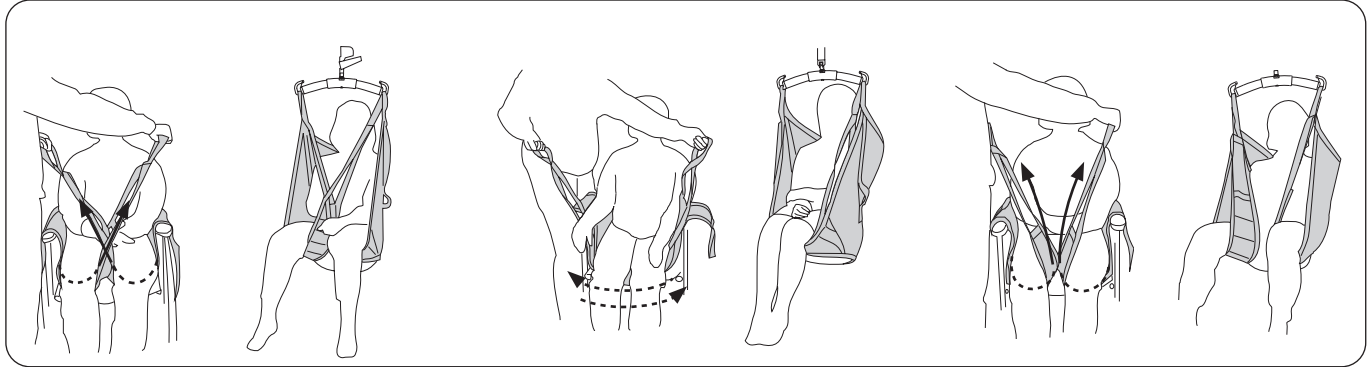Voordat een alternatieve bevestiging wordt gekozen, moet deze individueel worden beoordeeld op mogelijke risico's.



Gekruiste beensteunen.

Dit is de meest gebruikelijke manier van aanbrengen van de tilband. Eén beensteunlus wordt door de andere gevoerd voordat de lussen aan het tiljuk worden bevestigd.

Overlappend onder beide dijën.

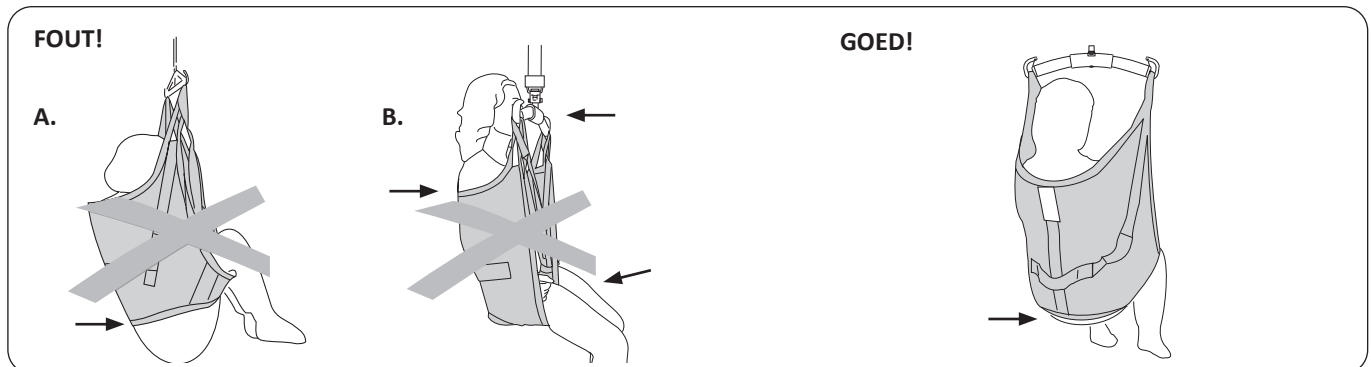
Dit kan de juiste manier zijn bij bijvoorbeeld het tillen van een patiënt met geamputeerde benen.
Opmerking: om te voorkomen dat de patiënt te veel achterover komt te zitten, kunnen er Extension Loops aan de beensteunlussen worden bevestigd.

Elke beensteun wordt afzonderlijk aan het tiljuk bevestigd.

Dit kan de juiste manier zijn bij het tillen van patiënten met bijzonder gevoelige geslachtsorganen.

⚠ Verhoogde kans op uit de tilband glijden.

De patiënt zit niet goed in de tilband - hoe komt dit?




A. Risico op uit de tilband glijden. De billen hangen naar beneden. De tilband is mogelijk te groot. Het kan ook komen doordat de tilband niet voldoende over de rug van de patiënt naar beneden is getrokken.

Controleer vóór het tillen of de onderrand gestrekt is en of het materiaal goed rond de benen ligt.

B. Door een te kleine tilband kunnen de beensteunen de liezen beknellen; dit kan ongemak veroorzaken, het tiljuk kan te dicht bij het gezicht komen en/of de rug krijgt onvoldoende ondersteuning.

De onderrand van de tilband bevindt zich op dezelfde hoogte als het stuitbeen. De beensteunen zijn correct onder de benen gepositioneerd.

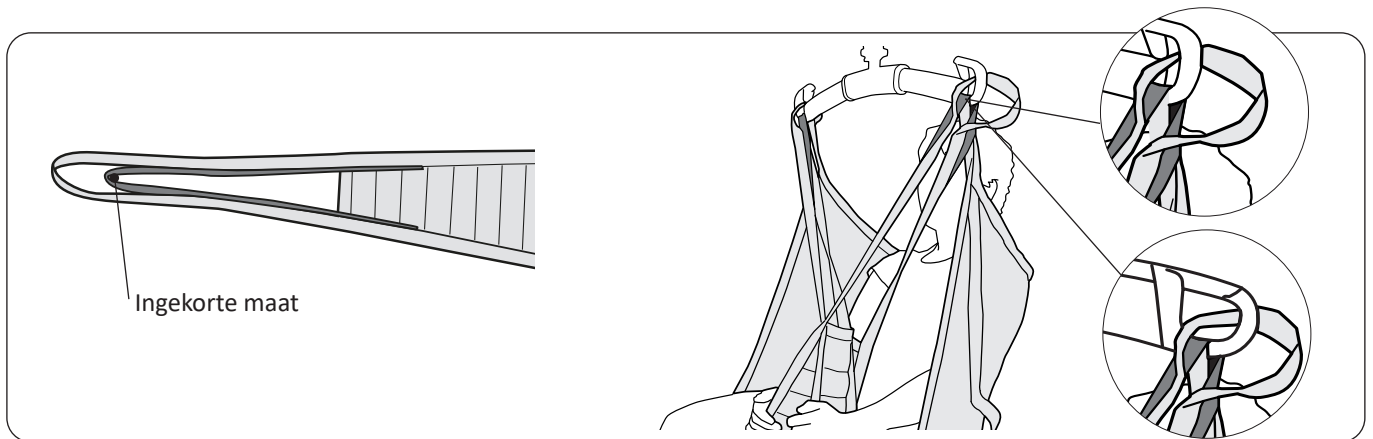Ingekorte maat



Onze tilband is zorgvuldig ontworpen om de patiënt altijd zo te laten zitten dat de druk goed is verdeeld over de benen en het ruggedeelte en dat de patiënt goed wordt ondersteund tijdens verplaatsingen. In bepaalde gevallen kan het echter beter zijn om de binnenste instelling, de 'ingekorte maat', op de beensteunlus te gebruiken om de zithouding van de patiënt te wijzigen.


Opmerking: dit is **niet** van toepassing als u een ouder model hebt van de UniversalSling, Mod. 00/02, met een eerdere uitvoering van de ingekorte maat. Voor een beschrijving van de inkortingsprocedure voor Mod. 00/02 kunt u contact opnemen met Hill-Rom voor instructies voor het gebruik van dat model.

Wanneer de ingekorte maat wordt gebruikt wordt aanbevolen om ook de buitenste beensteunlus aan de tiljukaak te bevestigen zodat de lussen beter te zien zijn.

Accessoires

Extension Loop, groen, 12 cm (5 inch)
Extension Loop, groen, 22 cm (9 inch)
Extension Loop, grijs, 12 cm (5 inch)
Extension Loop, grijs, 22 cm (9 inch)

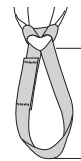productnr. 3691102
productnr. 3691103
productnr. 3691302
productnr. 3691303




- 2 = 12 cm (5 inch)
- 3 = 22 cm (9 inch)

Overzicht Liko UniversalSling, Mod. 000

Product	Productnr.	Maat	Gewicht patiënt ¹	Max. belasting ²
Liko UniversalSling	35000-- 4	S	35-55 kg (77-121 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000-- 1	M-smal (slanke volwassene)	45-70 kg (99-154 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000-- 5	M	60-90 kg (132-198 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000-- 6	L	80-120 kg (176-264 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000-- 7	XL	> 110 kg (> 242 lbs)	300 kg (660 lbs)

¹ Het aangegeven patiëntgewicht is slechts een richtlijn – afwijkingen zijn mogelijk.

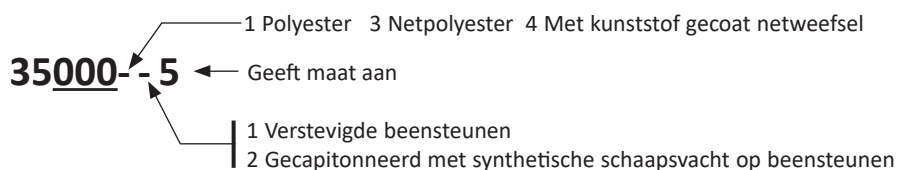² Om de maximale belasting te behouden zijn accessoires/liften vereist met dezelfde of hogere belasting.



Aanbevolen combinaties:

Aanbevolen combinaties van de Liko™ UniversalSling met Liko-tiljukkan:	Mini 220	SlingBar 350 ³	SlingBar 450 ¹	SlingBar 600 ⁴	TwinBars 670 ²	Sling Cross-Bar 450	Sling Cross-Bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2	2
UniversalSling, M-smal	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

¹ SlingBar 450 betreft Universal SlingBar 450 productnr. 3156075, 3156085 en 3156095, SlingBar Standard 450 productnr. 3156001, 3156003, 3156007 en 3156016, en ook SlingGuard 450 productnr. 3308020 en 3308520.

² TwinBars 670 staan voor de universele TwinBar 670 productnr. 3156077 en 3156087, en ook SlingGuard 670 Twin productnr. 3308040 en 3308540.

³ SlingBar 350 betreft Universal SlingBar 350 productnr. 3156074, 3156084 en 3156094.

⁴ SlingBar 600 betreft Universal SlingBar 600 productnr. 3156076 en 3156086.

Toelichting: 1 = Aanbevolen, 2 = Mogelijk, 3 = Afgeraden, 4 = Ongeschikt

Andere combinaties

Combinaties van accessoires/producten die anders zijn dan aanbevolen door Liko kunnen leiden tot risico's voor de veiligheid van de patiënt.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Zweden
+46 (0)920 474700

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:



Liko AB is een dochteronderneming van Hill-Rom Holdings, Inc.