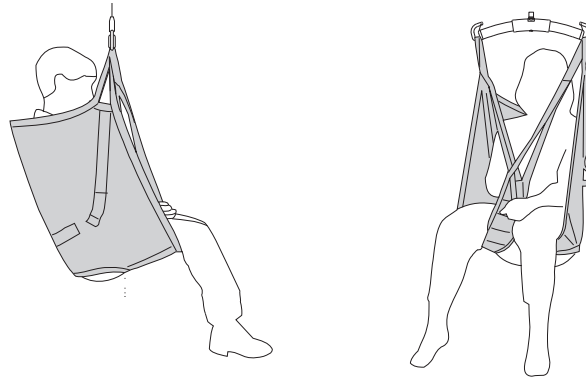


## Bruksanvisning



## Produktbeskrivelse

**Liko UniversalSling er en grunnleggende modell som er utformet for å tilpasses til brukeren uten individuelle justeringer og er én av våre mest brukte løfteseil.**

UniversalSling gir en oppreist sittende holdning og støtter hele ryggen opp til halsen. Hvis brukeren trenger støtte for hodet, anbefales det å bruke løfteseil med høy rygg, f.eks. Original HighBack Sling modell 200/210 eller Soft Original HighBack Sling modell 26. Brukerens armer holdes på innsiden av løfteseilet. Et riktig tilpasset og forsiktig brukt UniversalSling gir brukeren en utmerket følelse av sikkerhet samt en høy grad av komfort.

### Størrelser

UniversalSling er tilgjengelig i forskjellige størrelser. Det er viktig å velge riktig størrelse for å oppnå høyest nivå av komfort og sikkerhet. Et løfteseil som er for stort, øker risikoen for at brukeren sklir ut av det, mens ett som er for lite, kan skjære i lysken og forårsake ubehag.

En kombinasjon med en twin bar 670 kan være et godt valg hvis du trenger større størrelser.

### Tøy

UniversalSling er tilgjengelig i forskjellige typer tøy. Siden UniversalSling vanligvis ikke blir værende under brukeren etter overføringen, anbefales det å bruke polyesterdesignet. Dette tøyet er slitesterkt og har lav friksjon som gjør at løfteseilet er enkelt å bruke og enkelt å fjerne.

UniversalSling er også tilgjengelig i nettpolyester. Dette tøyet er anbefalt når løfteseilet blir værende på plass etter overføringen eller når et luftigere alternativ er ønsket.

Et plastbelagt nettdesign er tilgjengelig for bading og dusjing. Dette er gjennomtrengelig for vann, og kan lett tørkes. Dette materialet tørker raskt og kjøler ikke ned brukeren på samme måte som et fuktig, absorberende tøy gjør.

Løftebåndene på løfteseilet er alltid laget av slitesterk polyester og er veldig sikker.

### Benstøtter

UniversalSling er tilgjengelig med benstøtter i flere forskjellige design. Benstøtter med avstivninger er mest vanlig. Avstivningen gir høy komfort, utligner trykk og forhindrer at løfteseilet krølles under lårene.

Mykt polstret benstøtte (syntetisk saueskinn) er tilgjengelig som tilbehør. Universalt løfteseil med polstret benstøtte er egnet for brukere som er spesielt følsomme for trykk.

### Egnede heiser

UniversalSling kan brukes sammen med alle indirekte og mobile heiser fra Liko. Du kan velge mellom de indirekte heisene LikoGuard™, Likorall™ og Multirall™ eller de mobile heisene Golvo™, Viking™, Uno™ og Liko™ M220/M230.

*I dette dokumentet blir personen som løftes, referert til som brukeren, og personen som hjelper, er referert til som medhjelperen.*

### VIKTIG!




















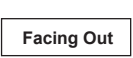

Løfting og overføring av en bruker innebærer alltid et visst risikonivå. Les bruksanvisningen for både pasientløfteren og løftertilbehøret før bruk. Det er viktig å forstå fullt ut og etterfølge innholdet i bruksanvisningen. Utstyret skal bare brukes av kvalifisert personell. Påse at løftertilbehøret er egnet for løftet som brukes. Vær varsom og forsiktig under bruk. Som en medhjelper, er du alltid ansvarlig for brukerens sikkerhet. Du må være oppmerksom på brukerens evne til å klare seg gjennom løftesituasjonen. Hvis noe er uklart, kan du ta kontakt med produsenten eller leverandøren.

## Innholdsfortegnelse

Symbolbeskrivelse .....	3
Sikkerhetsforskrifter .....	4
Tilsyn og vedlikehold .....	5
Definisjoner .....	5
Slik festes et løfteseil på forskjellige løftebøyer .....	6
Slik festes en UniversalSling til en løftebøyle som har 4 kroker (twin bars og cross bar) .....	7
Løft fra sittende stilling.....	8
Løft til sittende stilling .....	9
Ta bort løfteseilet i en stol/rullestol .....	10
Løft fra seng.....	10
Løft til seng.....	11
Ta bort løfteseilet når brukeren sitter i sengen .....	11
Ta bort løfteseilet når brukeren ligger i sengen.....	11
Råd ved utprøving .....	12
Forskjellige måter å koble på benstøtte .....	12
Brukeren sitter ikke godt i løfteseilet – hva kan være årsaken til det? .....	12
Forkortingsinnstilling.....	13
Tilbehør .....	13
Oversikt over Liko UniversalSling, modell 000.....	14
Anbefalte kombinasjoner .....	14

## Symbolbeskrivelse

Disse symbolene kan du finne i dette dokumentet og/eller på produktet.

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel. Brukes når det er nødvendig med ekstra omsorg og oppmerksomhet.
	Les bruksanvisningen før bruk
	Les bruksanvisningen før bruk
	CE-merke
	Juridisk produsent
	Produksjonsdato
	Referansenummer
	Serienummer
	Medisinsk utstyr
	Ikke kjemisk rensing
	Ikke stryking
	Tørking i tørketrommel
	Ikke i tørketrommel
	Vasking Symbolet vises alltid i kombinasjon med anbefalt temperatur i °C og °F.
	Uten lateks
	Periodisk inspeksjon
	Ingen blekemidler
	Tørking på snor i skyggen
	Retning oppover og symbol på utsiden av utstyr.
	Symbol på utsiden av utstyr.
	GS1 Data Matrix-strekkode som kan inneholde følgende informasjon. (01) GTIN (Global Trade Item Number) (11) Produksjonsdato (21) Serienummer

# Sikkerhetsforskrifter

## ⚠ Før løfting må du være oppmerksom på følgende:

- En ansvarlig person i organisasjonen skal vurdere om det er nødvendig med én eller flere medarbeidere, i hvert enkelts tilfelle.
- Påse at løfteseilet som velges, oppfyller brukerens behov med referanse til modell, størrelse, tøy og design.
- Den totale makslasten for et løftesystem fastslås alltid av produktet i systemet med laveste angitte makslast.
- For sikkerhet og hygiene, bruk individuelle løfteseil.
- Planlegg løftebetjeningen slik at det kan gjøres på en sikker og behagelig som mulig.
- Kontroller at løftetilbehøret henger vertikalt og kan bevege seg fritt.
- Spesiell forsiktighet må utøves selv om Liko-løftebøyler er utstyrt med avkrokningsbeskyttelse. Før brukeren løftes fra underlaget, men når stroppene er strukket helt ut, må du kontrollere at stroppene er riktig koblet til krokene på løftebøylen.
- Påse at brukeren sitter sikkert i løfteseilet før overføring til et annet sted.
- Løft aldri en bruker høyere av underlaget enn det som er nødvendig for å fullføre løfte- og overføringsprosedyren.
- La aldri en bruker være uten tilsyn under en løftesituasjon.
- Påse at hjulene på rullestolen, sengen, trallen osv. er låst under løfting/overføring.
- Alltid arbeid ergonomisk. Bruk brukerens evne til å delta aktivt i betjeningen.
- Når løfteseilet ikke brukes, skal det ikke plasseres i direkte sol lys.

⚠ Feil festing av løfteseilet til løftebøylen kan føre til alvorlig skade på brukeren.

⚠ Hvis brukeren snus i sengen manuelt, kan det føre til skader på medhjelper.

CE Medisinsk utstyr, klasse I-produkt

**PATENT** [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)

Kan være dekket av én eller flere patenter. Se Internett-adressen ovenfor.

Hill-Rom-selskapene er eiere av europeiske, amerikanske og andre patenter og patentsøknader.

## Produktendringer

Liko-produkter er under kontinuerlig utvikling, og det er derfor vi forbeholder oss retten til å gjøre produktendringer uten forvarsel. Kontakt Hill-Rom-representanten for råd og informasjon om produktoppgraderinger.

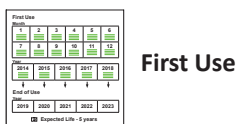
## Design and Quality by Liko in Sweden

Liko er kvalitetssertifiserte i henhold til ISO 9001 og tilsvarende for medisintekniske bedrifter, ISO 13485.

Liko er også miljøsertifiserte i henhold til ISO 14001.


## Merknad til brukere og/eller pasienter i EU

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er opprettet.



Før løfteseilet brukes første gang, skal datoen (år og måned) være merket på etiketten med «First Use» (plassert under etiketten «Utfør inspeksjon»). Se eksempelet nedenfor. Merkingen gjøres ved å klippe de grønne trådene i de aktuelle rutene. Gjengene klippes med ett klipp i midten av ruten. Ikke klipp trådene helt av – la de klippede endene være igjen.

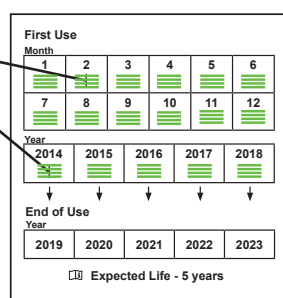Eksempel: Februar 2014



Klipp trådene i midten av ruten.



## Tilsyn og vedlikehold

Kontroller løfteseilet før hver bruk. Kontroller følgende punkter med hensyn til slitasje og skade:

- tøy
- stropper
- sømmer
- løfteløkker

### ⚠ Bruk ikke skadet løftetilbehør.

Hvis noe er uklart, kan du ta kontakt med produsenten eller leverandøren.

**Hvis løfteseilet brukes til bading eller dusjing:** Etter bruk i bad- og dusjsituasjoner skal løfteseilet plasseres slik at det tørker så snart som mulig.

**Vaskeanvisning:** Se produktetiketten på løfteseilet og det vedlagte tillegget «Vedlikeholdsråd for Likos løfteseil».

### Periodisk inspeksjon

Produktet må kontrolleres minst én gang hver 6. måned. Hyppigere kontroller kan være nødvendig hvis produktene brukes eller vaskes oftere enn normalt. Se Liko-protokoll «Periodisk inspeksjon av Liko-tekstilprodukter». Ta kontakt Hill-Rom-representanten for protokoller.

### Forventet holdbarhet

Hvis produktet er laget av grønt vevd polyesterstoff, har produktet en forventet holdbarhet på 5 år. Hvis produktet er laget av plastbelagt nett eller grå nettpolyester, har produktet en forventet holdbarhet på 3 år. Forventet holdbarhet er basert på 10 bruk per dag og vasking én gang per uke, i henhold til vaskeanvisningene. Hill-Rom anbefaler at produktet kun brukes i løpet av den forventede holdbarheten.

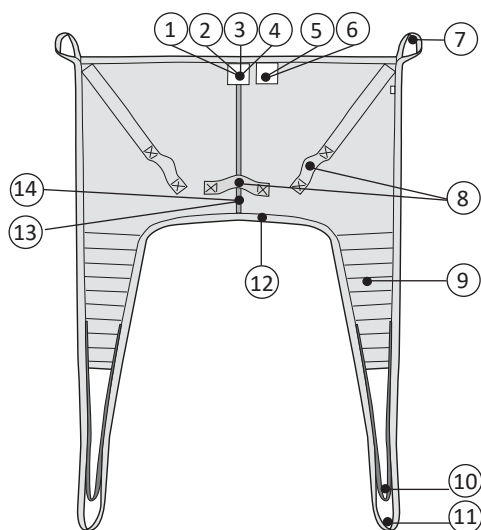
### Instruksjoner for resirkulering


Hele produktet, inkludert spiler, polstringsmateriale osv., skal sorteres som brennbart avfall.

Hill-Rom evaluerer og gir veiledning til brukerne om sikker håndtering og kassering av utstyret for å bidra med å forebygge skade, inkludert, men ikke begrenset til: kutt, punkteringer av hud, skrubbsår og eventuell nødvendig rengjøring og desinfisering av det medisinske utstyret etter bruk og før kassering. Kunder skal følge alle føderale, delstatlige, regionale og/eller lokale lover og forskrifter som gjelder for sikker avhending av medisinsk utstyr og tilbehør.

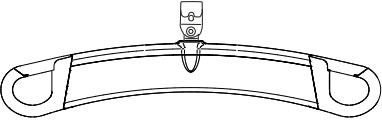
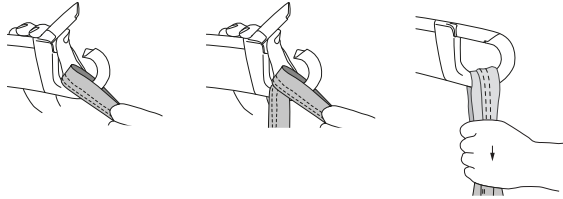
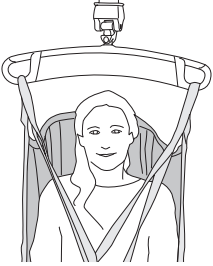
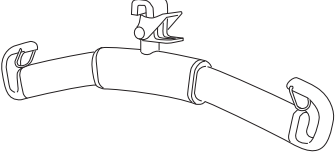
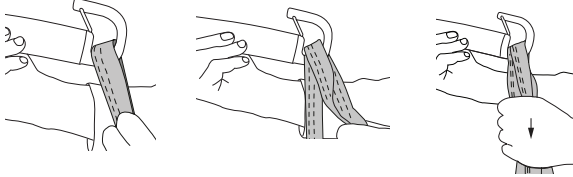

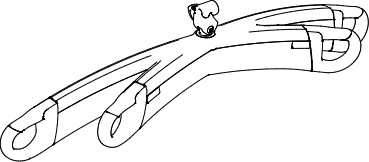
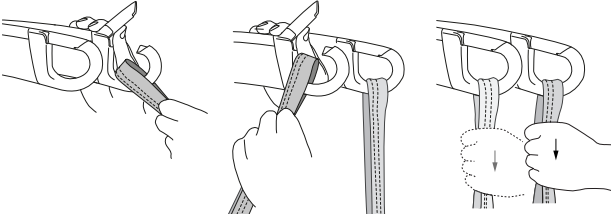
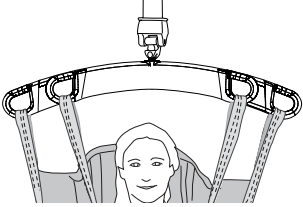
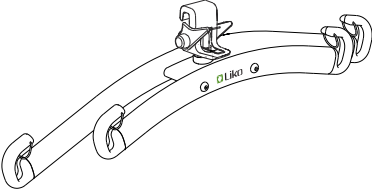
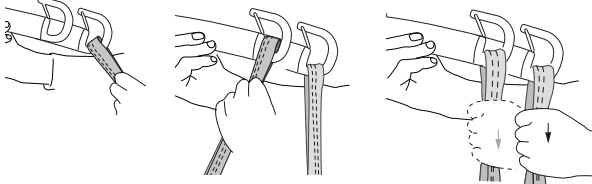
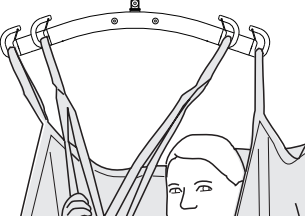
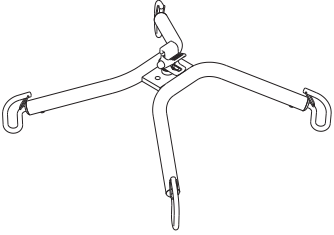
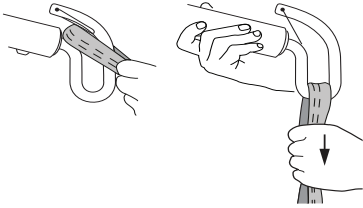
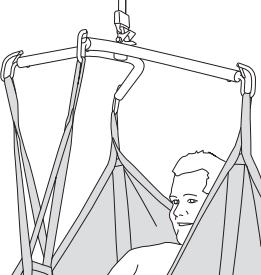
Hvis du er i tvil, må brukeren av utstyret først ta kontakt med Hill-Rom teknisk støtte for veiledning angående protokoller for sikker avhending.

## Definisjoner

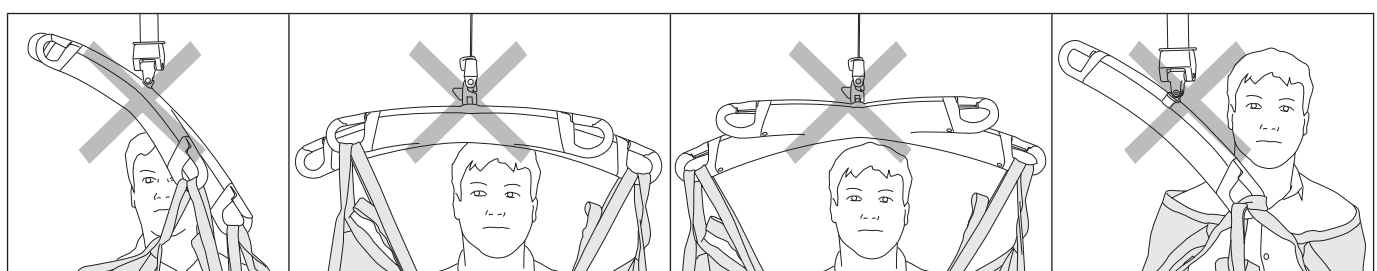


1. Produktetikett
2. Etikett: Produksjonsår og -måned (  )
3. Etikett: Serienummer
4. Etikett: Navnemerking (Belongs to)
5. Etikett: Kontroller og inspiser (Perform Inspection)
6. Etikett: Første gang produktet brukes (First Use)
7. Øvre stroppløkke
8. Håndtak
9. Benstøtte
10. Forkortningsinnstilling
11. Ytre benstøtteløkke
12. Nedre kant
13. Midtre ryggstropp
14. Størrelsesmerking


## Slik festes et løfteseil på forskjellige løftebøyer

Løftebøyle	Løftesløyfer til krokene på løftebøylene	Riktig
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Kryssbøyle</p>		


### Eksempel: Misbruk



## Slik festes en UniversalSling til en løftebøyle som har 4 kroker (twin bars og cross bar)

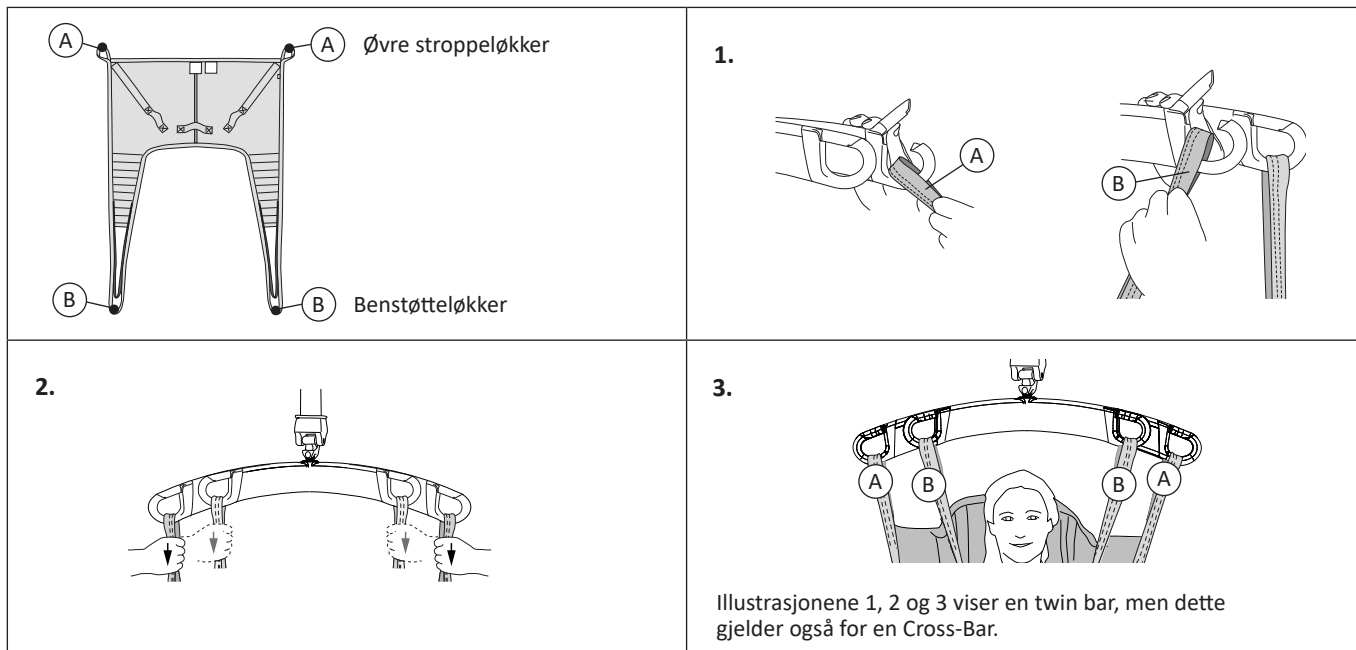


## Løft fra sittende stilling

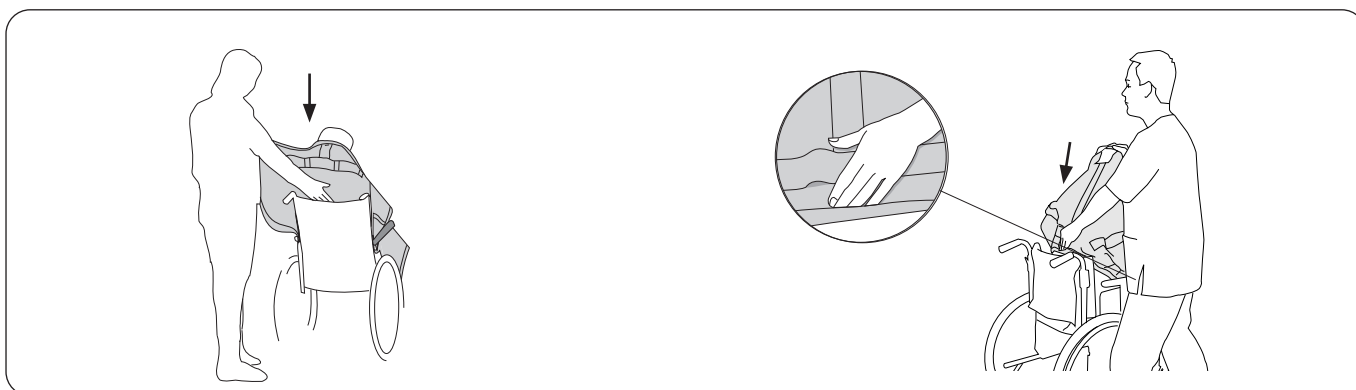

Plasser løfteseilet bak brukerens rygg med produktet etiketten utover. Fold opp den nedre kanten av løfteseilet rundt fingertuppen slik at løfteseilet blir enklere å føre inn på plass.

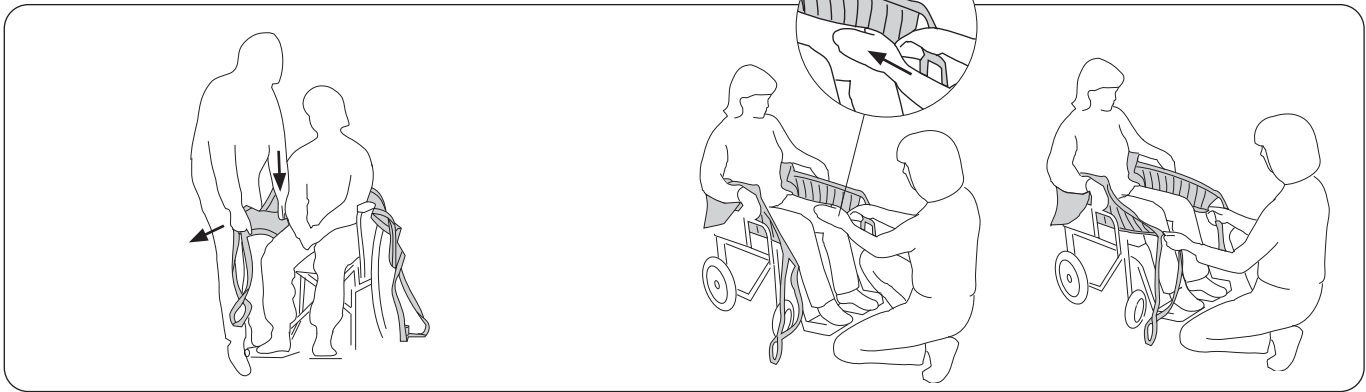
Bruk håndflaten og skyv den nedre kanten på løfteseilet ned til nivået på brukerens haleben – dette er svært viktig. Merknad: Riktig posisjonering forenkles hvis brukeren lener seg / er lent litt fremover.






Trekk løfteseilets benstøtter fremover langs utsiden av brukerens lår. Plasser håndflaten mellom brukerens kropp og løfteseilet, og skyv benstøttens nedre kant ned mot setet. Trekk samtidig benstøtten fremover med den andre hånden for å strekke den.

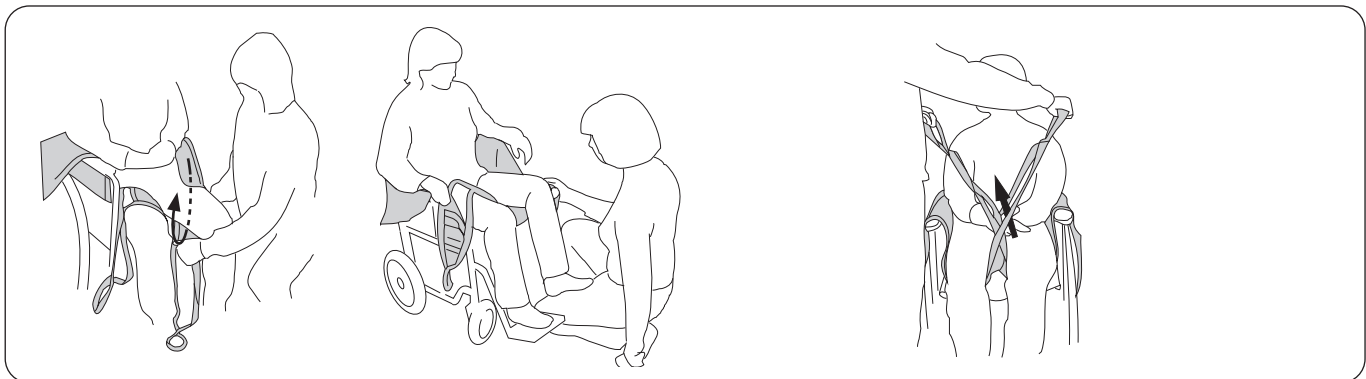Trekk benstøttene fremover for å glatte ut alle skrukker på baksiden. Kontroller at begge benstøttene stikker like langt ut. Merknad: Et forsiktig grep under kneskålen gjør det enklere å trekke benstøttene fremover.



Før benstøttene inn under hvert lår. Påse at tøyet ligger flatt og at det når ordentlig rundt benet. **Merknad:** Det blir enklere å plassere benstøttene hvis brukerens ben er litt hevet fra setet. Dette kan oppnås ved å plassere brukerens føtter på fotstøttene eller på ditt eget ben, som vist.

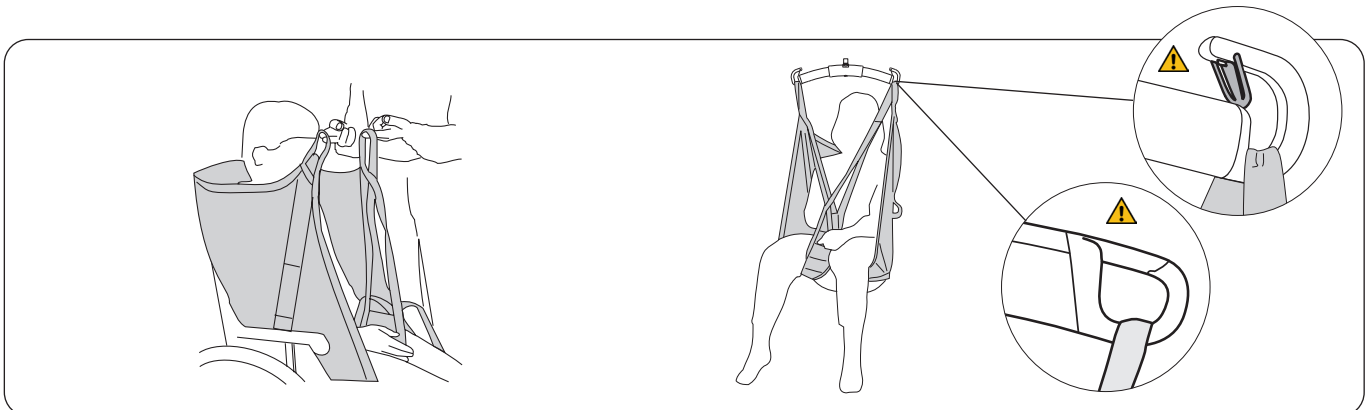Klargjør tilkoblingen av benstøttene. Den vanligste måten å feste løfteseilet på, er med kryssede benstøtter. Du finner alternative metoder på side 12.




**Merknad:** Kontroller at alle løfteløkkene har samme lengde, dvs. har lik høyde når de strekkes før løfting. Juster posisjonen til løfteseilet hvis det ikke er i lik høyde.

Koble først de øvre stroppløkkene til krokene på løftebøyle, og deretter benstøtteløkkene. På side 6–7 finner du instruksjoner om hvordan du fester løfteløkkene til forskjellige løftebøylar. Løft brukeren.



## Løft til sittende stilling

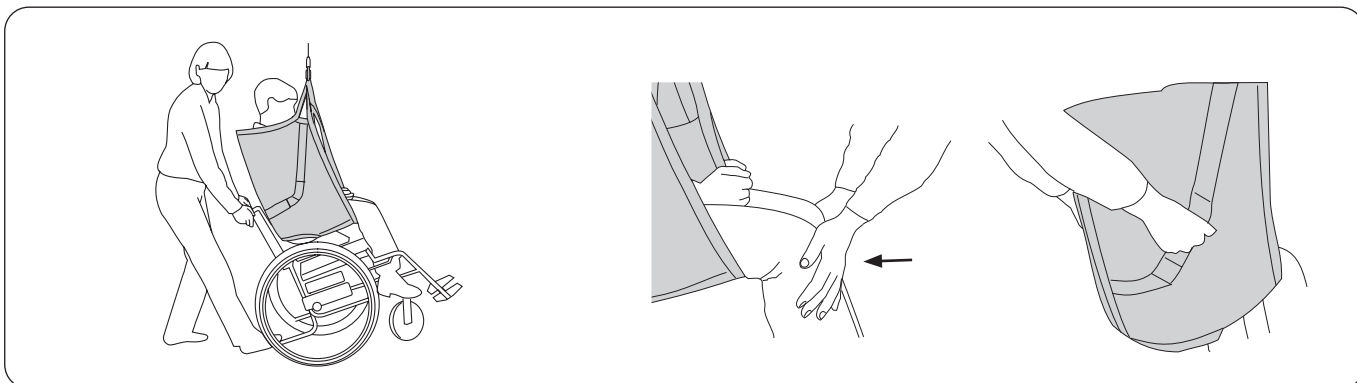Når en bruker plasseres i rullestol, er det viktig at brukeren kommer langt nok bak i stolen for å sitte godt. Dette kan gjøres på flere måter.



*Ved plassering av en bruker i rullestol:* Len stolen bakover under senking av brukeren. La baken gli ned seteryggen den siste delen. Kontroller vinkelen på rullestolen med foten på vippestøtte.

*Alternativ:* Påfør et lett trykk under brukerenes kne under senkesekvensen, slik at baken føres mot seteryggen på stolen. Hvis løfteseilet har styrehåndtak, kan disse brukes til styring.

**⚠ Ikke bruk styrehåndtakene til å løfte! Overdreven kraft på styrehåndtakene kan føre til at stroppen revner.**

## Fjern løfteseilet fra stol/rullestol

Det anbefales å fjerne løfteseilet etter overføringen. Hvis det av en eller annen grunn er fordelaktig å la løfteseilet være i stolen etter overføring, anbefales det å bruke et løfteseil i nettpolyester.



Ta forsiktig av benstøttene. Den mest skånsomme måten å gjøre dette på er å trekke ut benstøtteløkkene under tøydelen.

Fjern løfteseilet ved å trekke benstøtten forsiktig opp.

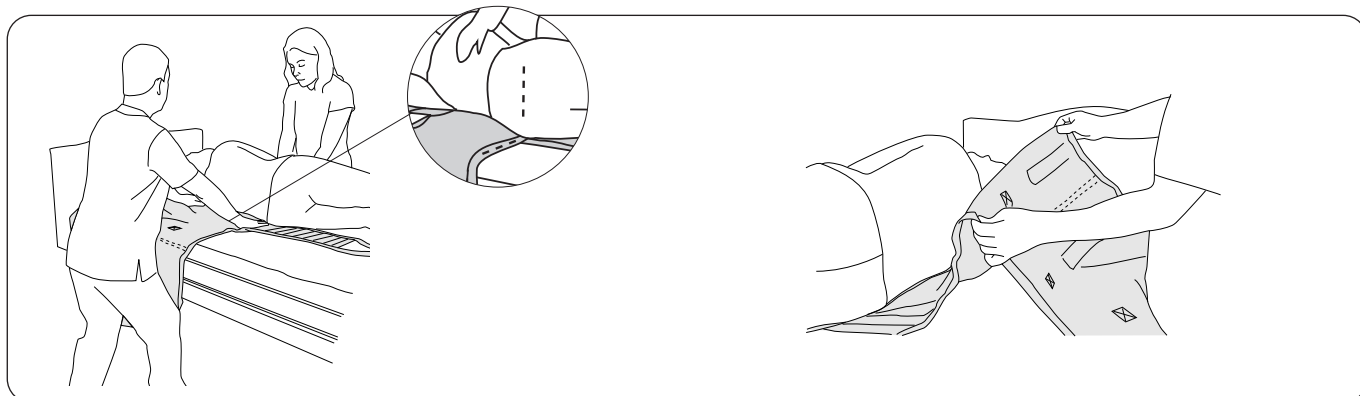
## Løft fra seng

Løfteseilet kan brukes på forskjellige måter, avhengig av brukerens status. Enten brukes den når brukeren ligger i sengen eller sitter i sengen. Hvis det brukes en avansert trykkavlastende madrass, kan den være maksimalt oppblåst for å forenkle bruken av løfteseilet.

Husk din egen arbeidsstilling og brukerens komfort. Bruk sengens funksjoner for heving og senking. God arbeidsstilling oppnås når madrassen er på nivå med medhjelperens knoker når armene holdes helt nede. Avhengig av belastningen på medhjelperen må det vurderes hvor mange medhjelpere som er nødvendig for betjeningen, i hvert enkelt tilfelle.


### Bruke løfteseilet når brukeren ligger i sengen

For løfting fra liggende stilling uten mulighet for å heve hodeenden av sengen eller på annen måte støtte hodet, anbefales det å bruke Liko Soft Original HighBack Sling, modell 26, eller eventuelt Liko Original HighBack Sling, modell 200, 210, som alle gir støtte til hodet.



Snu brukeren til siden. Denne betjeningen forenkles hvis brukeren selv kan bidra ved å gripe tak i sengeskinnen på den siden som brukeren skal snus. Plasser kanten på løfteseilet mot brukers bakside med den nedre kanten på nivå med halebenet.

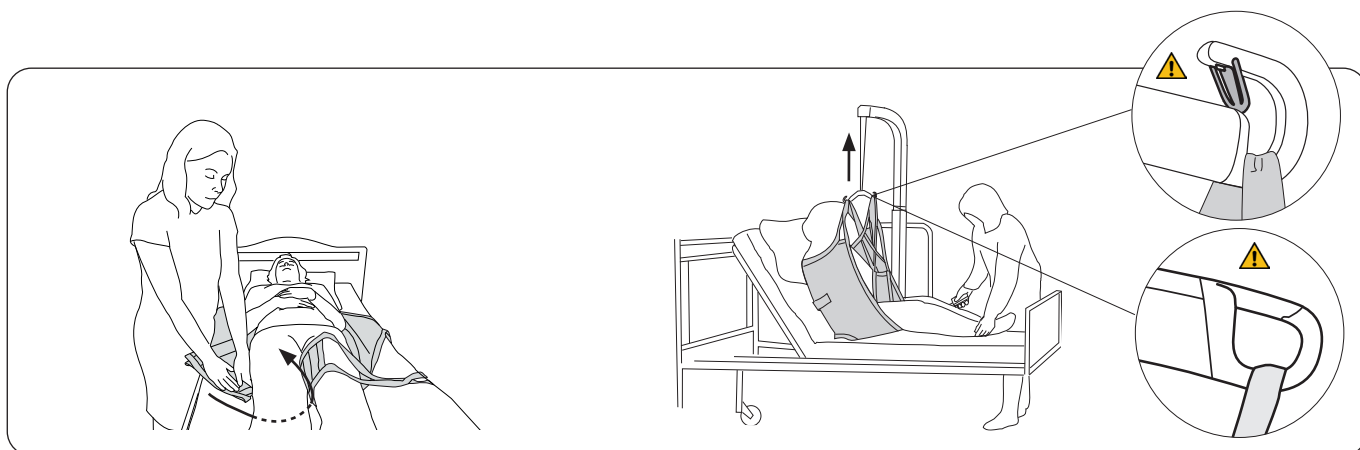Fold løfteseilet slik at den «midtre ryggstroppen» samsvarer med brukerens ryggrad. Kontroller at folden dekker kanten på løfteseilet, som er vendt mot brukerens bakside, for å redusere friksjonen. Snu brukeren forsiktig tilbake, og trekk ut løfteseilet på den andre siden. Med denne plasseringsteknikken må brukeren kun snus én gang.



Før benstøttene inn under hvert ben. Dette gjøres best ved å presse benstøtten ned mot madrassen mens den føres inn under kneet. Påse at tøyet ligger flatt og at det når ordentlig rundt benet. Benstøttene kan kobles til på forskjellige måter, se side 12.

Hev hodeenden av sengen. Koble først de øvre stroppløkkene til krokene på løftebøyle, og deretter benstøtteløkkene. På side 6–7 finner du instruksjoner om hvordan du fester løfteløkkene til forskjellige løftebøyer. Løft brukeren.

### Bruke løfteseilet når brukeren sitter i sengen

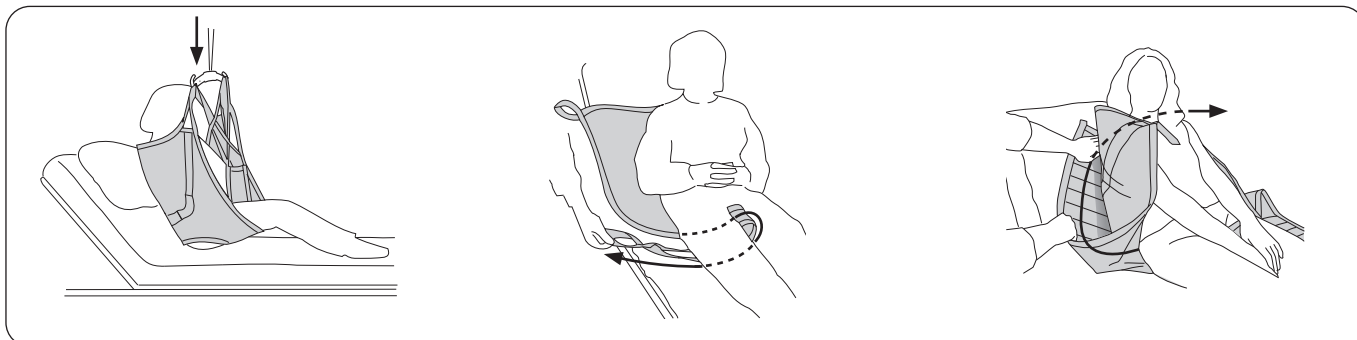
Hev sengens hodeende bak brukeren. Legg løfteseilet på sengen med produktetiketten vendt ned mot madrassen. Skyv løfteseilet ned bak brukerens rygg slik at den nedre kanten er på nivå med halebenet. **OBS!** Plasseringen forenkles hvis brukeren lener seg / er lent fremover.

## Løft til seng

Det anbefales å fjerne løfteseilet etter overføringen. Hvis det av en eller annen grunn er fordelaktig å la løfteseilet være i sengen, anbefales det å bruke et løfteseil i nettpolyester.

Husk din egen arbeidsstilling og brukerens komfort. Bruk sengens funksjoner for heving og senking. God arbeidsstilling oppnås når madrassen er på nivå med medhjelperens knoker når armene holdes helt nede. Avhengig av belastningen på medhjelperen må det vurderes hvor mange medhjelpere som er nødvendig for betjeningen, i hvert enkelt tilfelle.

### Ta bort løfteseilet når brukeren sitter i sengen




Posisjoner brukeren over sengen. Hev sengens hodeende for brukerens komfort. Senk brukeren ned i sengen.

Ta bort benstøttene ved å trekke ut benstøtteløkkene under tøydelen. **Merknad:** Dette forenkles hvis brukerens ben er bøyd.


Fjern løfteseilet ved å trekke én av benstøttene bak løfteseilet og over på motsatt side.

### Ta bort løfteseilet når brukeren ligger i sengen

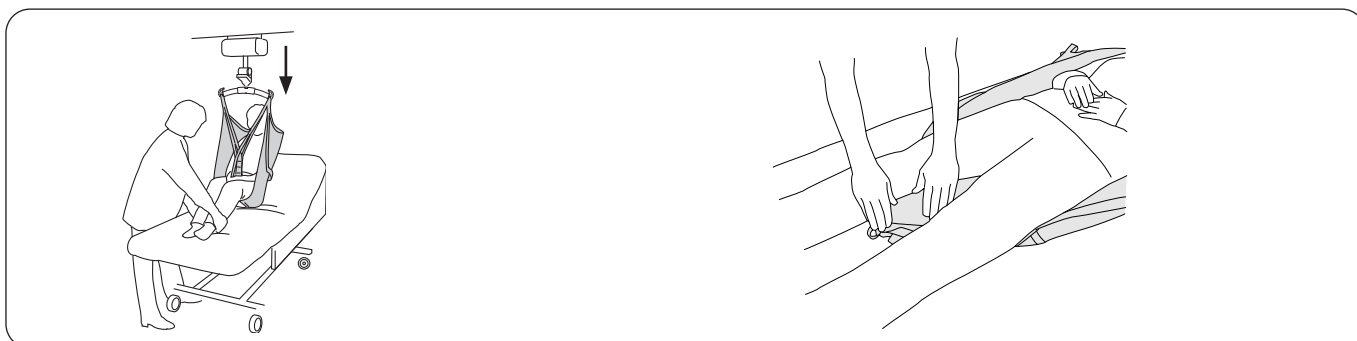

Posisjoner brukeren over sengen. Hev sengens hodeende for brukerens komfort. Senk brukeren ned i sengen. Senk hodeenden.

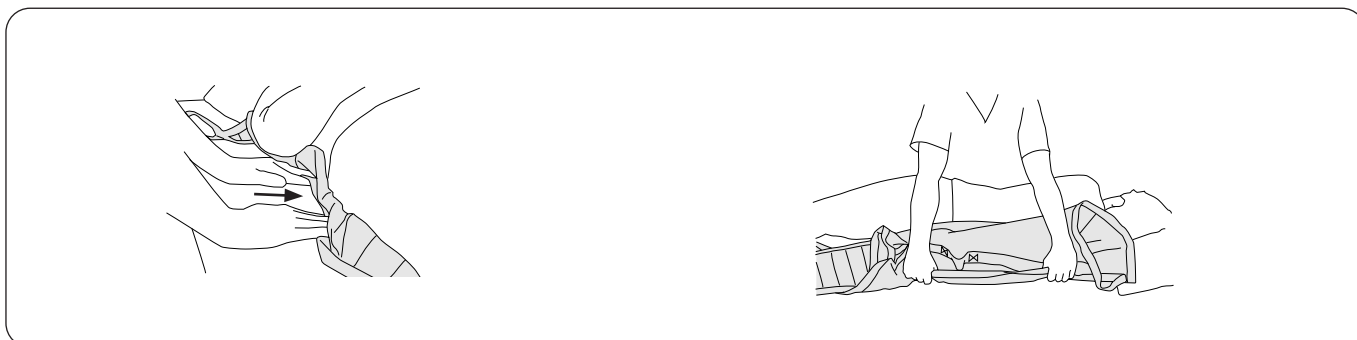Plasser benstøtteløkkene under benstøttene mellom brukerens ben.




Ta tak i kanten på løfteseilet. Skyv løfteseilet inn under seg selv. Trykk løfteseilet mot madrassen og inn under brukeren.

Snu brukeren forsiktig over på siden. Ta tak i løfteseilet nedenfra, og fjern det forsiktig.

## Råd ved utprøving
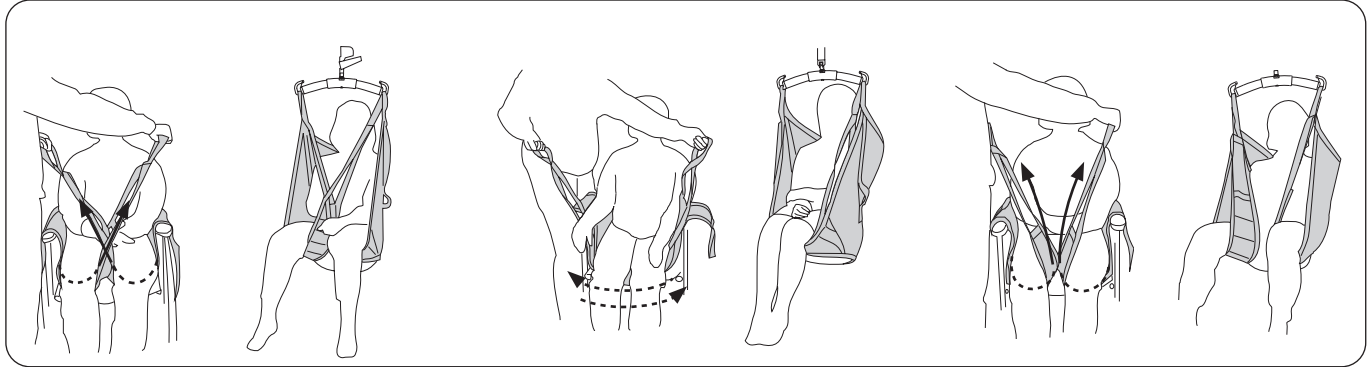
### Forskjellige måter å koble på benstøtter

Før et tilkoblingsalternativ velges, skal det foretas en individuell vurdering for å forutse mulige risikoer.



#### Overkryssede benstøtter.

Den vanligste måten å bruke løfteseilet på. Én benstøtteløkke føres gjennom den andre før løkkene kobles til løftebøylen.

#### Overlappet under begge lårene.

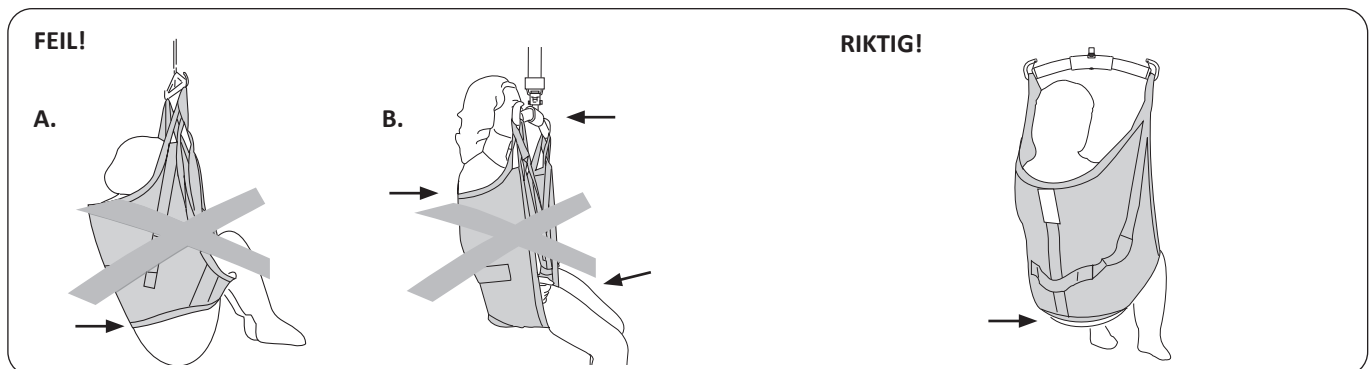
Dette kan være hensiktsmessig, for eksempel ved løfting av en bruker med amputerte ben. **Merknad:** For å unngå at brukers sittestilling er for tilbakelent, kan du feste Extension Loops til benstøtteløkkene.

#### Hver benstøtte er koblet til løftebøylen.

Dette kan være hensiktsmessig ved løfting av brukere med spesielt følsomme genitalier.

**⚠ Økt risiko for å skli ut.**

### Brukeren sitter ikke godt i løfteseilet – hva kan være årsaken til det?




**A. Risiko for å skli ut.** Baken henger ned. Løfteseilet kan være for stort. Det kan også skyldes at løfteseilet ikke er trukket tilstrekkelig nedover brukers rygg.

Før løfting må du kontrollere at den nedre kanten er strukket, og at tøyen kommer ordentlig til rundt bena.

**B. For lite løfteseil** kan føre til at benstøttene skjærer inn i underlivet, noe som fører til ubehag, at løftebøylen er for nær ansiktet og/eller ryggen til å få utilstrekkelig støtte.

Nedre kant av løfteseilet er på samme nivå som halebenet. Benstøttene er riktig plassert under bena.

## Forkortingsinnstilling

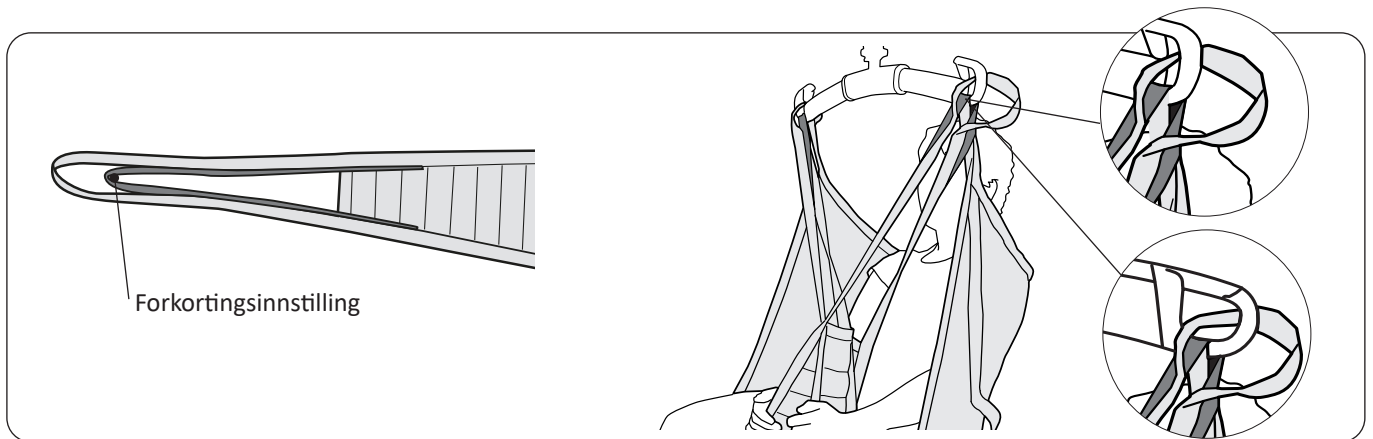

Løfteseilet vårt er nøye utformet for å sikre at brukeren alltid sitter med trykket godt fordelt mellom bena og ryggdelen, slik at det er god støtte under transport. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være ønskelig å bruke den indre innstillingen, «forkortingsinnstilling», på benstøtteløkken for å endre brukerens sittestilling.


**Merknad:** Dette gjelder **ikke** hvis du har en eldre modell av UniversalSling, modell 00/02, med en tidligere utforming av forkortingsinnstilling. Hvis du vil ha en beskrivelse av forkortingsprosedyren for modell 00/02, kan du ta kontakt med Hill-Rom for å få instruksjoner for bruk av den modellen.

Hvis forkortingsinnstillingen brukes, anbefales det at du også kobler den ytre benstøtteløkken til kroken på løftebøylen for å få bedre visuell kontroll over løkkene.

## Tilbehør

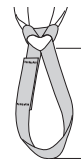Extension Loop, grønn, 12 cm (5 in)  
Extension Loop, grønn 22 cm (9 in)  
Extension Loop, grå, 12 cm (5 in)  
Extension Loop, grå, 22 cm (9 in)

Prod.nr. 3691102  
Prod.nr. 3691103  
Prod.nr. 3691302  
Prod.nr. 3691303




- 2 = 12 cm (5 in)  
- 3 = 22 cm (9 in)

# Oversikt over Liko UniversalSling, modell 000

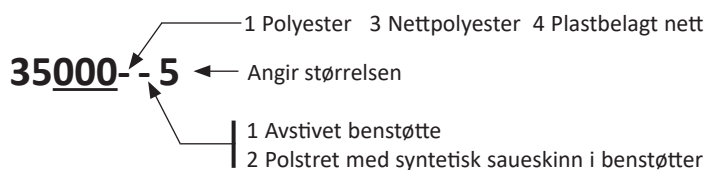Produkt	Varenr.	Størrelse	Brukerens vekt <sup>1</sup>	Maks. belastning <sup>2</sup>
Liko UniversalSling	35000 -- 4	S	35–55 kg (77–121 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000 -- 1	M-Slim (slank voksen)	45–70 kg (99–154 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000 -- 5	M	60–90 kg (132–198 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000 -- 6	L	80–120 kg (176–264 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000 -- 7	XL	>110 kg (>242 lbs)	300 kg (660 lbs)

<sup>1</sup> Den angitte brukerens vekt er kun veiledende – det kan være avvik.

<sup>2</sup> For å opprettholde maksimal belastning, kreves det løft/tilbehør som er beregnet for samme belastning eller mer.



## Anbefalte kombinasjoner:

Anbefalte kombinasjoner av Liko™ UniversalSling og Likos løftebøyler:	Mini 220	Sling bar 350 <sup>3</sup>	Sling bar 450 <sup>1</sup>	Sling bar 600 <sup>4</sup>	Twin bars 670 <sup>2</sup>	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. Side bars + Universal 350	Univ. Side bars + Universal 450
UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2	2
UniversalSling, M-Slim	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> Sling bar 450 gjelder Universal SlingBar 450 prod.nr. 3156075, 3156085 og 3156095, SlingBar Standard 450 prod.nr. 3156001, 3156003, 3156007 og 3156016, samt SlingGuard 450 prod.nr. 3308020 og 3308520.

<sup>2</sup> Twin bars 670 gjelder Universal TwinBar 670 prod.nr. 3156077 og 3156087, samt SlingGuard 670 Twin prod.nr. 3308040 og 3308540.

<sup>3</sup> Sling bar 350 gjelder Universal SlingBar 350 prod.nr. 3156074, 3156084 og 3156094.

<sup>4</sup> Sling bar 600 gjelder Universal SlingBar 600 prod.nr. 3156076 og 3156086.

**Forklaring:** 1 = anbefalt, 2 = kan fungere, 3 = anbefales ikke, 4 = upassende

## Øvrige kombinasjoner

Kombinasjoner av tilbehør/produkter som ikke anbefales av Liko, kan føre til risiko for brukerens sikkerhet.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sverige  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**