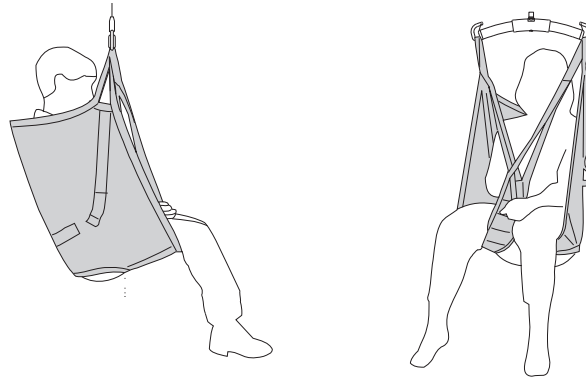


Návod na použitie



Popis produktu

Vak Liko UniversalSling je základný model, ktorý je vyhotovený tak, že sa bez individuálnych nastavení prispôsobí pacientovi a je jedným z najpoužívanejších vakov.

Vak UniversalSling umožňuje vzpriamené držanie tela v sede a podporuje celý chrbát až po krk. V prípade, že pacient potrebuje oporu hlavy, sa odporúča použiť vak s vysokou zadnou stranou, napr. Original HighBack Sling mod 200/210 alebo Soft Original HighBack Sling mod. 26. Ruky pacienta sú vo vnútri vaku. Správne nasadený a starostlivo aplikovaný vak UniversalSling poskytne pacientovi vynikajúci pocit bezpečia, rovnako ako vysokú úroveň pohodlia.

Veľkosti

Vak UniversalSling je k dispozícii v rôznych veľkostiach. Výber správnej veľkosti je dôležitý na dosiahnutie čo najvyššej úrovne pohodlia a bezpečnosti. Príliš veľký vak zvyšuje riziko, že pacient z neho vyklzne, a príliš malý vak sa môže zarezat' do slabín a spôsobiť nepohodlie.

Pri väčších veľkostiach môže byť dobrou voľbou kombinácia s dvojramenom 670.

Tkanina

K dispozícii je vak UniversalSling z rôznych tkanín. Keďže vak UniversalSling sa zvyčajne po premiestnení nenecháva pod pacientom, odporúčame použiť polyesterový vak. Táto tkanina je odolná a má malé trenie, vďaka čomu sa vak ľahko aplikuje a odstraňuje.

Vak UniversalSling je tiež k dispozícii ako sieťový polyester. Táto tkanina sa odporúča vtedy, keď sa vak po premiestnení ponecháva na svojom mieste alebo keď sa vyžaduje vzdušnejšia alternatíva.

Na kúpanie a sprchovanie je k dispozícii sieťové prevedenie potiahnuté plastom, ktoré prepúšťa vodu a je možné ju jednoducho utrieť. Tento materiál rýchlo schne a pacienta nechladí tak, ako by ho chladila vlhká absorpčná tkanina.

Zdvíhacie popruhy vaku sú vždy vyrobené z trvácneho polyesteru a sú veľmi bezpečné.

Opory nôh

Vak UniversalSling je k dispozícii s oporami nôh v rôznych prevedeniach. Najbežnejšie sú opory nôh s výstuhami. Výstuha zaisťuje vysoký komfort, vyrovná tlak a zabraňuje krčeniu vaku pod stehnami.

Opora nôh s mäkkými vypchávkami (syntetická ovčia koža) je dostupná ako príslušenstvo. Vak UniversalSling s oporou nôh s vypchávkami je vhodný pre pacientov, ktorí sú obzvlášť citliví na tlak.

Vhodné zdviháky

Vak UniversalSling je možné používať so všetkými stropnými a mobilnými zdvihákmi Liko. Môžete si vybrať medzi stropnými zdvihákmi LikoGuard™, Likorall™ a Multirall™ alebo mobilnými zdvihákmi Golvo™, Viking™, Uno™ a Liko™ M220/M230.

V tomto dokumente sa zdvíhaná osoba označuje ako pacient a asistujúca osoba sa označuje ako ošetrovateľ.



DÔLEŽITÉ!






















Zdvíhanie a prenášanie pacienta vždy so sebou prináša určitú úroveň rizika. Pred použitím si prečítajte návod na použitie patientskeho zdviháka aj zdvíhacieho príslušenstva. Je dôležité, aby ste úplne pochopili obsah návodu na použitie. Toto vybavenie by mal používať iba vyškolený personál. Zabezpečte, aby bolo zdvíhacie príslušenstvo vhodné pre používaný zdvihák. Počas používania postupujte dôkladne a opatrne. Ako ošetrovateľ ste vždy zodpovedný za bezpečnosť pacienta. Musíte si uvedomiť schopnosť pacienta zvládnuť zdvíhanie. Ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa.

Obsah

Popis symbolov	3
Bezpečnostné pokyny.....	4
Starostlivosť a údržba	5
Definície.....	5
Ako upevniť vak na rôznych ramenách na vak	6
Ako upevniť vak UniversalSling na rameno na vak so 4 hákmi (dvojramenné a krížové ramená)	7
Zdvíhanie zo sediacej polohy.....	8
Spúšťanie do sediacej polohy	9
Odstránenie vaku na stoličke/vo vozíku	10
Zdvíhanie z lôžka.....	10
Spúšťanie na lôžko.....	11
Odstránenie vaku počas sedu na lôžku.....	11
Odstránenie vaku počas ľahu na lôžku	11
Rady pre nastavenie	12
Rôzne spôsoby pripojenia opôr nôh.....	12
Pacient vo vaku nesedí dobre – prečo?	12
Skracujúca poloha	13
Príslušenstvo	13
Prehľad vakov Liko UniversalSling, mod. 000,	14
Odporúčané kombinácie	14

Popis symbolov

V tomto dokumente a/alebo na produkte je možné nájsť tieto symboly.

Symbol	Popis
	Varovanie. Je potrebná zvýšená opatrnosť a pozornosť.
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie
	Označenie CE
	Zákonný výrobca
	Dátum výroby
	Ref. číslo
	Sériové číslo
	Zdravotnícke zariadenie
	Nečistite chemicky
	Nežehlite
	Sušenie v sušičke
	Nesušiť v sušičke
	Pranie Symbol je uvedený vždy spolu s odporúčanou teplotou v °C a °F.
	Bez latexu
	Pravidelná kontrola
	Žiadne bielenie
	Sušenie na šnúre v tieni
	Smer nahor a symbol na vonkajšej strane zariadenia.
	Symbol na vonkajšej strane zariadenia.
	Čiarový kód dátovej matice GS1, ktorý môže obsahovať nasledovné informácie. (01) Globálne číslo obchodnej položky (11) Dátum výroby (21) Sériové číslo

Bezpečnostné pokyny

⚠ Skôr, ako začnete so zdvíhaním, si uvedomte nasledujúce body:

- Zodpovedná osoba vo vašej organizácii by mala podľa jednotlivých prípadov rozhodnúť o tom, či je potrebný jeden alebo viacerí ošetrovatelia.
- Zabezpečte, aby zvolený vak spĺňal potreby pacienta z hľadiska modelu, veľkosti, tkaniny a prevedenia.
- Celková maximálna nosnosť zdvíhacieho systému je vždy určená tým výrobkom v systéme, ktorý má najnižšiu špecifikovanú maximálnu nosnosť.
- Z bezpečnostných a hygienických dôvodov používajte individuálne vaky.
- Naplánujte zdvíhaciu procedúru tak, aby mohla byť vykonaná čo najbezpečnejšie a najplynulejšie.
- Skontrolujte, či zdvíhacie príslušenstvo visí vertikálne a môže sa voľne pohybovať.
- Hoci sú ramená na vaky Liko vybavené západkami, je potrebné postupovať veľmi opatrne. Predtým, ako pacienta zdvihnete z podkladu, keď sú popruhy už úplne natiahnuté, zabezpečte, aby boli správne pripojené k hákom ramena na vak.
- Zabezpečte, aby pacient vo vaku bezpečne sedel a až potom ho začnite premiestňovať.
- Pacienta nikdy nezdvíhajte z podkladu vyššie, než je potrebné na dokončenie procesu zdvíhania a premiestňovania.
- Keď je pacient zdvihnutý, nenechávajte ho nikdy bez dozoru.
- Zabezpečte, aby boli počas zdvíhania/premiestňovania kolesá na invalidnom vozíku, lôžku, ležadle atď. zabrzdené.
- Vždy pracujte ergonomicky. Využívajte pacientovu schopnosť aktívne sa zapájať do úkonov.
- Keď sa vak nepoužíva, odložte ho na miesto mimo pôsobenia priameho slnečného svetla.

⚠ Nesprávne uchytenie vaku na rameno môže spôsobiť vážne poranenie pacienta.

⚠ Manuálne otáčanie pacienta na lôžku môže spôsobiť poranenie ošetrovateľa.

CE Zdravotnícka pomôcka triedy I

PATENT www.hillrom.com/patents

Na produkt sa môže vzťahovať jeden alebo viac patentov. Pozrite si vyššie uvedenú internetovú adresu.

Spoločnosti Hill-Rom sú majiteľmi európskych, amerických (USA) a ďalších patentov a podaných patentových prihlášok.

Zmeny produktu

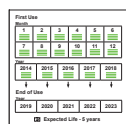
Produkty Liko sa neustále vyvíjajú. Z tohto dôvodu si vyhradujeme právo na uskutočnenie zmien produktov bez predchádzajúceho upozornenia. Rady a informácie týkajúce sa inovácií produktov vám poskytne zástupca spoločnosti Hill-Rom.

Dizajn a kvalita produktov Liko vo Švédsku

Spoločnosť Liko má certifikát kvality v súlade s normou ISO 9001 a jej ekvivalentmi v odvetví zdravotníckych pomôcok ISO 13485. Spoločnosť Liko je certifikovaná aj podľa normy o životnom prostredí ISO 14001.

Upozornenie pre používateľov a/alebo pacientov v EÚ


Akákoľvek vážna nehoda, ktorá nastala v súvislosti so zariadením, by mala byť oznámená výrobcom a príslušným orgánom členského štátu, kde má používateľ a/alebo pacient trvalé bydlisko.



Pred prvým použitím

Pred prvým použitím vaku by sa mal na štítok „First Use“ (umiestnený pod štítkom „Perform Inspection“) označiť dátum (rok a mesiac), pozrite si príklad nižšie. Označenie sa vykonáva prerezaním zelených nití v príslušných rámečkoch. Nite sa režu jedným rezom v strede rámečka. Nite neodrežte úplne – konce prerezaných nití ponechajte.

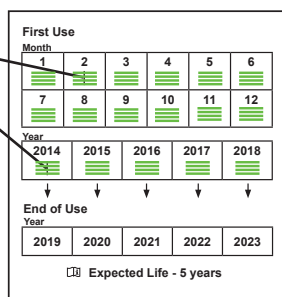Príklad: február 2014



Nite prerežte v strede rámečka.



Starostlivosť a údržba

Pred každým použitím skontrolujte zdvíhací vak. Skontrolujte nasledujúce miesta, či nedošlo k opotrebovaniu a poškodeniu:

- Tkanina
- Popruhy
- Švy
- Závesné slučky

⚠ Poškodené zdvíhacie príslušenstvo nepoužívajte.

Ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa.

Ak sa vak používa pri kúpaní alebo sprchovaní: Po použití vaku pri kúpaní alebo sprchovaní treba vak uložiť tak, aby čo najskôr vyschol.

Pokyny na pranie: Pozrite si štítok produktu vaku a priložený dodatok „Starostlivosť a údržba o vaky Liko“.

Pravidelná kontrola

Produkt sa musí kontrolovať minimálne raz za 6 mesiacov. Častejšie kontroly sa môžu vyžadovať, ak sa produkty používajú alebo perú častejšie, ako je bežné. Pozri dokument spoločnosti Liko „Pravidelná kontrola textilných produktov Liko“. Ak chcete získať dokumenty, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Hill-Rom.

Očakávaná životnosť

Ak je produkt vyrobený zo zelenej tkanej polyesterovej tkaniny, má očakávanú životnosť 5 rokov. Ak je produkt vyrobený zo sieťoviny potiahnutej plastom alebo sivého sieťového polyesteru, má očakávanú životnosť 3 roky. Očakávaná životnosť je založená na 10 použitiach denne a praní raz týždenne podľa pokynov na pranie. Spoločnosť Hill-Rom odporúča, aby sa produkt používal len počas jeho očakávanej životnosti.

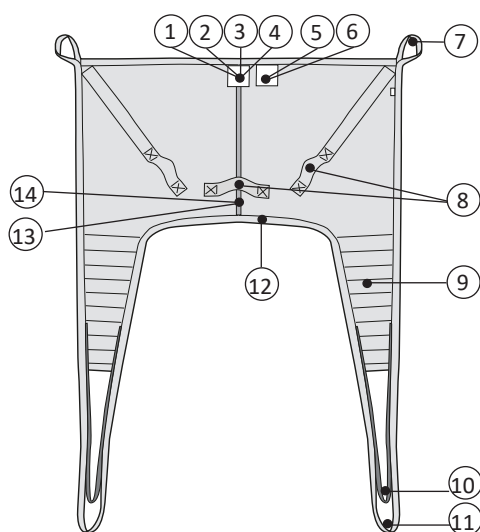
Pokyny na recykláciu


Celý produkt, vrátane líšt, výplňového materiálu atď. by sa mal vytriediť ako horľavý odpad.

Spoločnosť Hill-Rom vyhodnocuje a používateľom poskytuje návod na bezpečné zaobchádzanie a likvidáciu svojich zariadení na pomoc pri prevencii zranení, okrem iného vrátane: porezania a prepichnutia kože, odrenín, a akéhokoľvek požadovaného čistenia a dezinfekcie zdravotníckeho zariadenia po použití a pred jeho likvidáciou. Zákazníci by mali dodržiavať všetky federálne, štátne, regionálne a/alebo miestne zákony a predpisy týkajúce sa bezpečnej likvidácie zdravotníckych zariadení a príslušenstva.

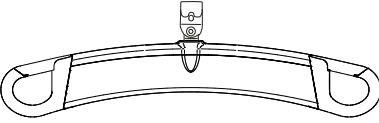
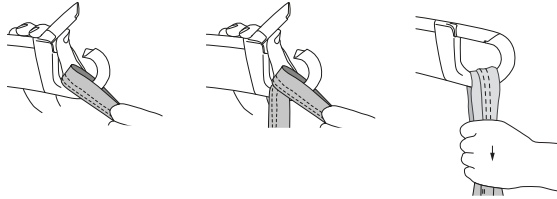
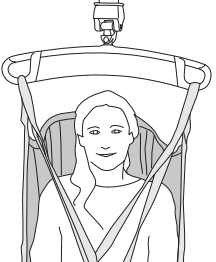
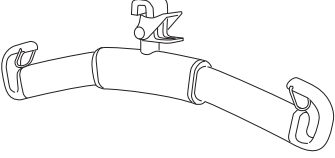
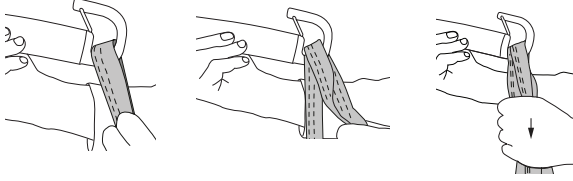

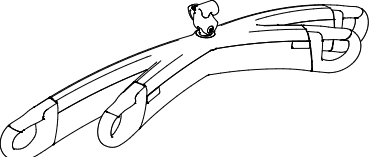
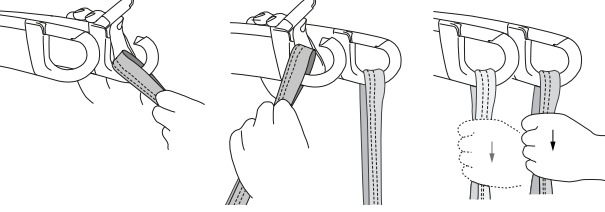
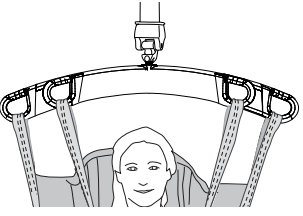
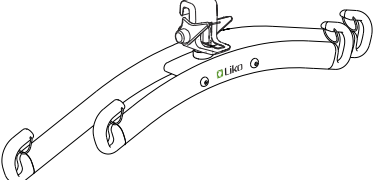
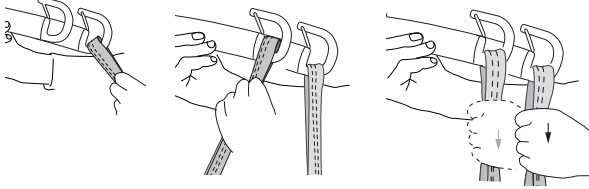
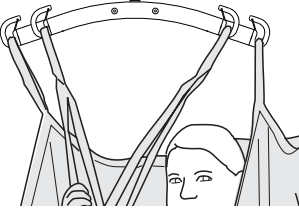
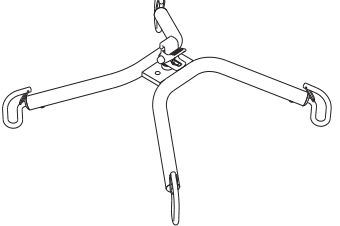
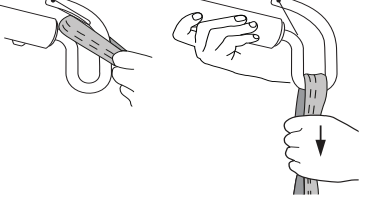
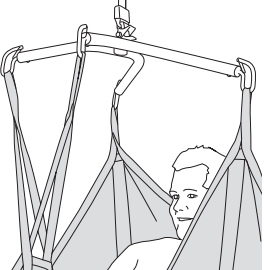
V prípade pochybností sa musí používateľ zariadenia najskôr obrátiť na technickú podporu spoločnosti Hill-Rom a získať pokyny k protokolom o bezpečnej likvidácii.

Definície




1. Štítok produktu
2. Štítok: Rok a mesiac výroby ()
3. Štítok: Sériové číslo
4. Štítok: Individuálne označenie (komu patrí)
5. Štítok: Skontrolovať (Perform Inspection)
6. Štítok: Prvé použitie produktu (First Use)
7. Slučka horného popruhu
8. Rukoväť
9. Opora nôh
10. Skracujúca poloha
11. Vonkajšia slučka opory nôh
12. Spodný okraj
13. Stredový chrbtový popruh
14. Označenie veľkosti


Ako upevniť vak na rôznych ramenách na vak

Rameno na vak	Slučky vaku na háky ramena na vak	Správne
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar</p>		

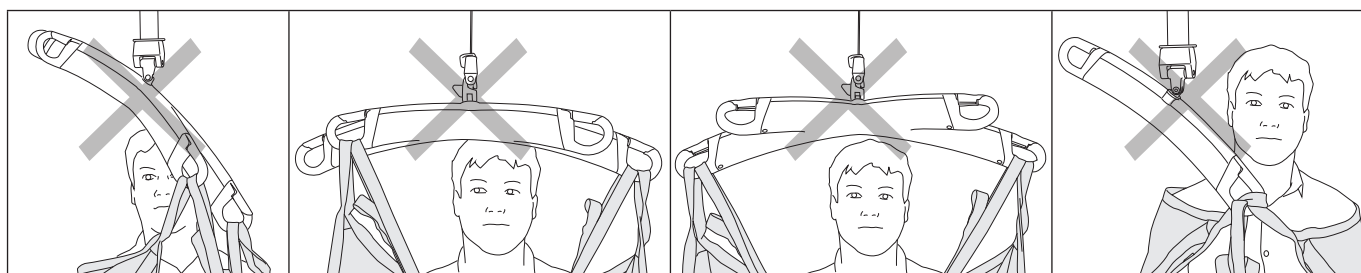
Príklad: nesprávne použitie



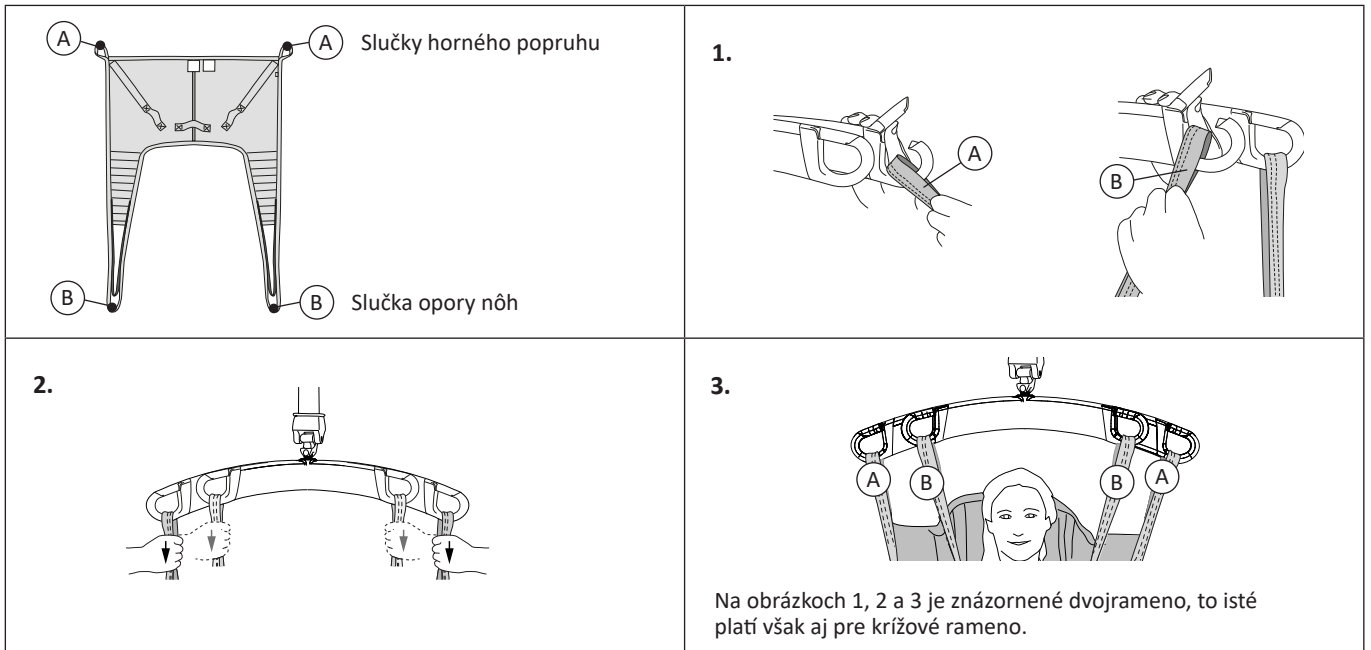Ako upevniť vak UniversalSling na rameno na vak so 4 hákmi (dvojramenné a krížové ramená)




Zdvíhanie zo sediacej polohy

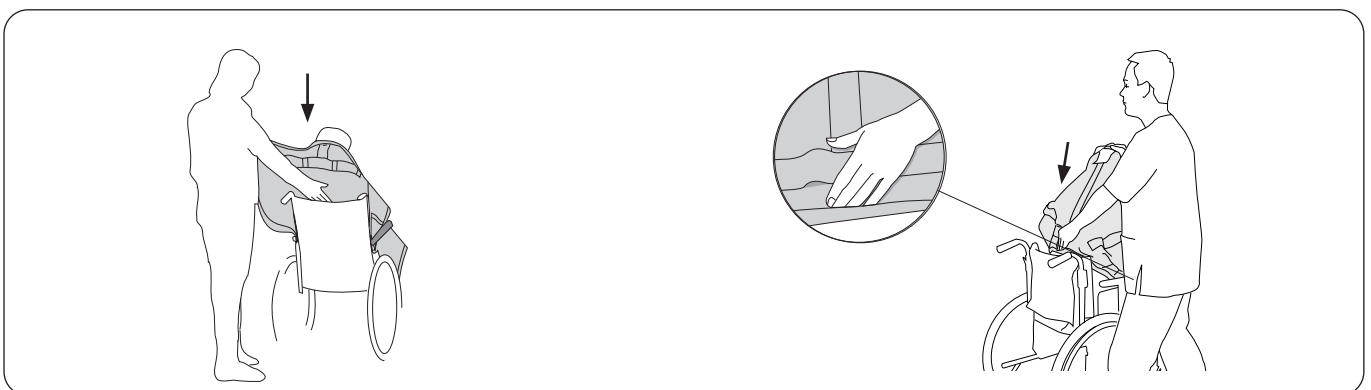


Vak umiestnite za pacientov chrbát tak, aby štítok produktu smeroval von. Spodný okraj vaku zložte okolo vašich končekov prstov na uľahčenie zavedenia vaku na miesto.

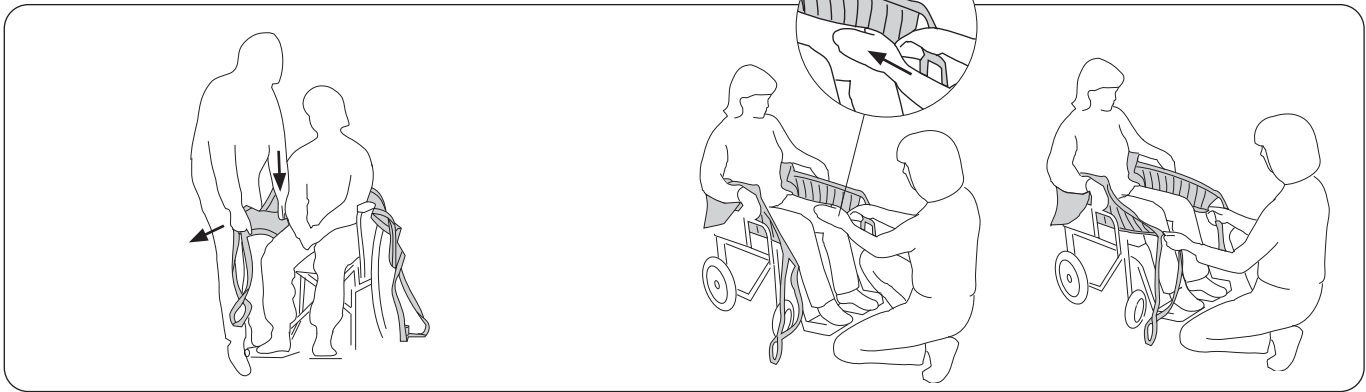Dlaňou tlačte spodný okraj vaku nadol až po úroveň pacientovej kostrče – toto je veľmi dôležité. Poznámka: Správne umiestnenie je jednoduchšie, keď sa pacient nakláňa/je naklonený mierne dopredu.




Potiahnite opory nôh vaku dopredu pozdĺž vonkajšej strany stehien pacienta. Umiestnite dľaň medzi telo pacienta a vak a potlačte spodnú hranu opory nôh nadol smerom k sedadlu. Súčasne druhou rukou potiahnite oporu nôh dopredu, aby sa natiahla.

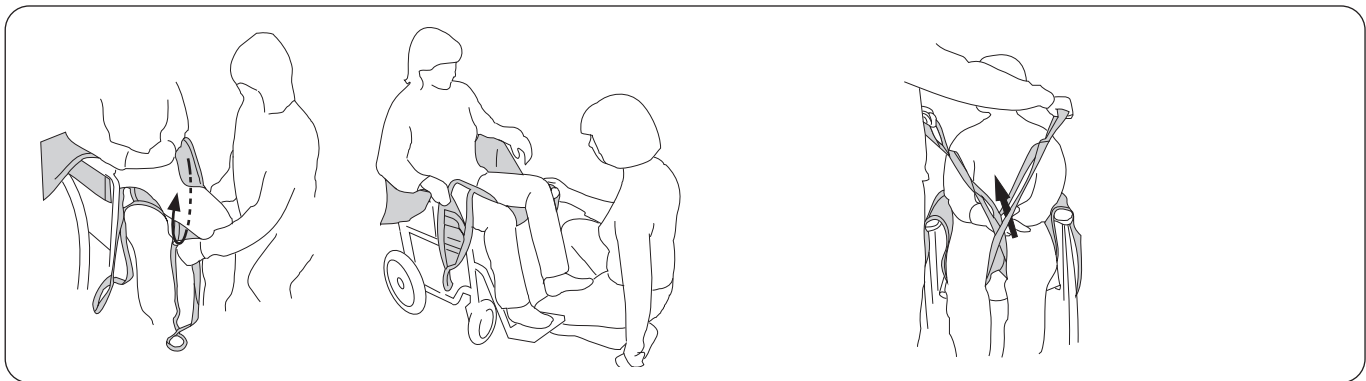Potiahnite opory nôh dopredu, aby sa vyhladili prípadné záhyby na chrbte. Skontrolujte, či sú obe opory nôh vysunuté na rovnakú vzdialenosť. Poznámka: Jemné držanie pod kolenným kĺbom uľahčuje vytiahnuť opory nôh dopredu.



Opory nôh vložte pod každé stehno. Skontrolujte, či tkanina leží naplocho a riadne dosahuje okolo nohy. **Poznámka:** Použitie opôr nôh je jednoduchšie, keď sú nohy pacienta mierne zdvihnuté zo sedadla. Dá sa dosiahnuť položením chodidla pacienta na opierky na nohy alebo na vlastnú nohu, ako je znázornené.

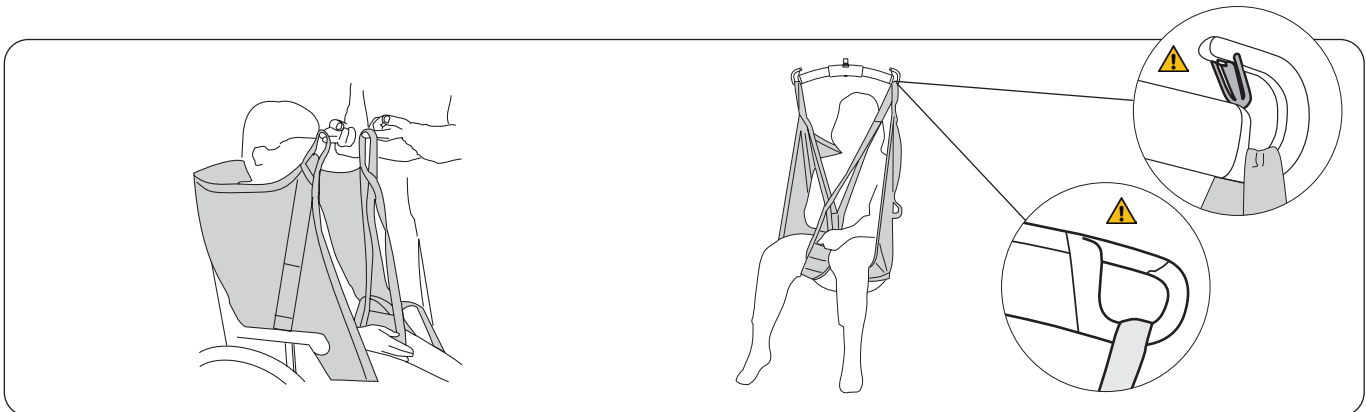Pripravte pripojenie opôr nôh. Najbežnejší spôsob aplikovania vaku je so skríženými oporami nôh. Alternatívne spôsoby nájdete na strane 12.




Poznámka: Pred zdvihnutím skontrolujte, či všetky závesné slučky majú rovnakú dĺžku, t. j. sú v rovnakej výške, keď sú rozťahnuté. Keď nie sú v rovnakej výške, upravte polohu vaku.

Najprv k ramenným hákom na vak pripojte slučky horných popruhov, potom pripojte slučky opôr nôh. Na stranách 6 – 7 nájdete pokyny na pripevnenie slučiek vaku na rôzne ramená na vaky. Zdvihnite pacienta.

Zdvíhanie do sediacej polohy

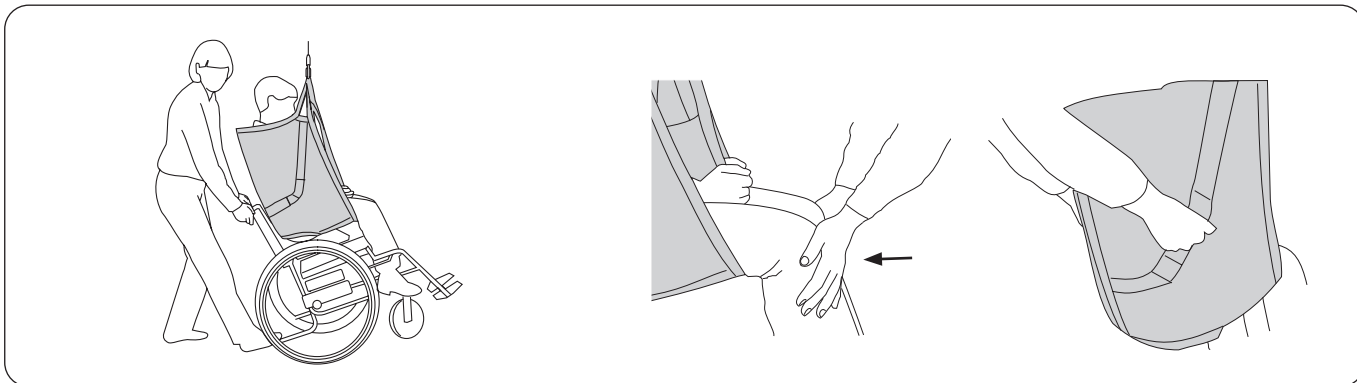Keď pacienta umiestňujete do invalidného vozíka, je dôležité, aby bol pacient posadený do vozíka dostatočne ďaleko dozadu, aby mohol dobre sedieť. Možno to dosiahnuť niekoľkými spôsobmi.




Pri umiestňovaní pacienta do invalidného vozíka: Pri spúšťaní pacienta nakloňte vozík dozadu. V poslednej časti nechajte zadok skĺznuť k operadlu. Sklonu vozíka ovládajte nohou na podpore vyklápania.

Alternatíva: Počas spúšťania mierne tlačte na oblasť pod pacientovými kolenami, aby bol zadok vedený k operadlu vozíka. Ak má vak rukoväte, môžete ich použiť na nasmerovanie pacienta.

⚠ Rukoväte nepoužívajte na zdvíhanie! Nadmerná sila vyvinutá na rukoväte môže spôsobiť roztrhnutie vaku.

Odstránenie vaku na stoličke/vo vozíku

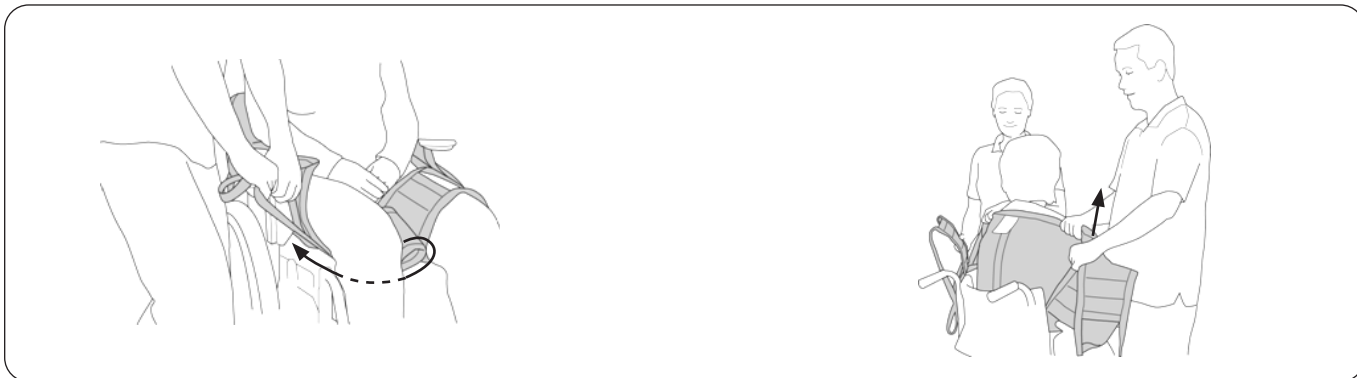Odporúča sa, aby sa vak po premiestnení odstránil. Ak je z nejakého dôvodu výhodnejšie ponechať po premiestnení vak na vozíku, odporúča sa použiť vak zo sieťového polyesteru.



Opatrne odstráňte opory nôh. Najjemnejší spôsob ako to urobiť je, keď potiahnete slučky opôr nôh pod tkaninovú časťou.

Vak opatrne vytiahnite potiahnutím opory nohy nahor.

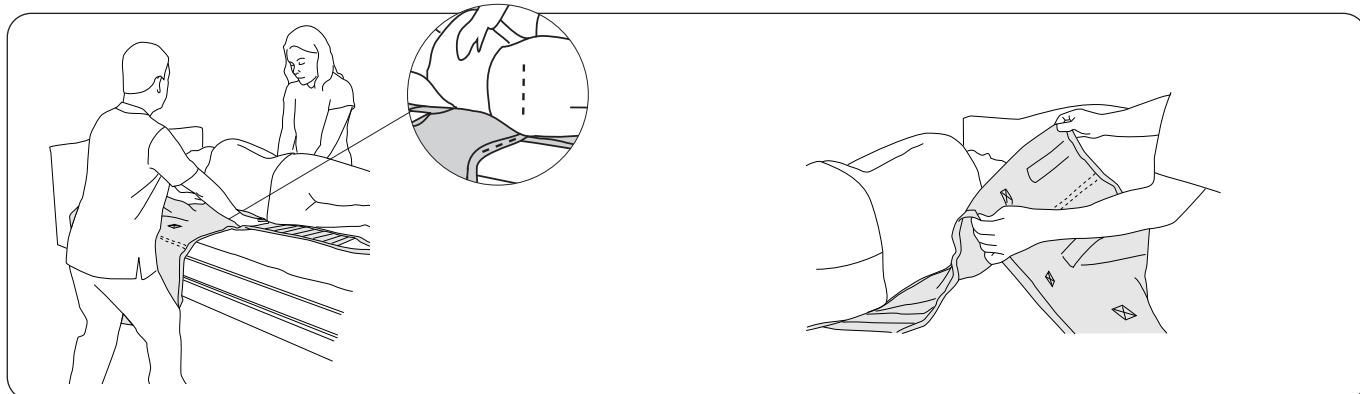
Zdvíhanie z lôžka

Vak je možné aplikovať rôznymi spôsobmi v závislosti od stavu pacienta. Aplikuje sa buď s pacientom ležiacim na lôžku alebo sediace na lôžku. Ak sa používa moderný matrac zmiernujúci tlak, môže byť výhodné ho maximálne nafúknuť na uľahčenie aplikácie vaku.

Pamätajte na vlastný pracovný postoj a pohodlie pacienta. Na zdvíhanie a spúšťanie používajte funkcie lôžka. Dobrý pracovný postoj sa dosiahne, keď je matrac na úrovni kĺbov prstov ošetrovateľa, keď sú ruky úplne dole. V závislosti od zaťaženia ošetrovateľa je potrebné vyhodnotiť, koľko ošetrovateľov je potrebných na operáciu na základe jednotlivých prípadov.


Aplikovanie vaku počas ľahu na lôžku

Na zdvíhanie z ležiacej polohy na chrbte bez možnosti zdvihnutia hlavovej časti lôžka alebo iného podopretia hlavy sa odporúča použitie vakov Liko Soft Original HighBack Sling mod. 26 alebo prípadne Liko Original HighBack Sling mod. 200, 210, ktoré všetky poskytujú podporu pre hlavu.



Otočte pacienta na bok. Táto operácia je ľahšia, keď pacient môže pomôcť uchopením ohrady lôžka na strane, na ktorú má byť otočený. Umiestnite okraj vaku smerom k chrbtu pacienta so spodným okrajom **zarovno s kostrčou**.

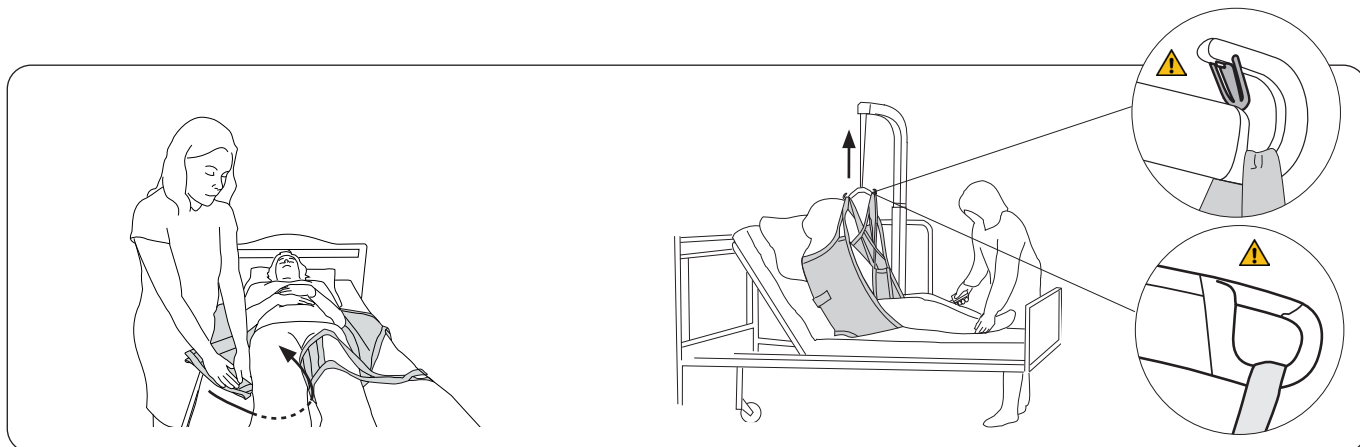Zložte vak, aby jeho „stredový chrbtový popruh“ zodpovedal chrbtici pacienta. Skontrolujte, či ohyb zakrýva okraj vaku, ktorý je smerom k chrbtu pacienta, aby sa znížilo trenie. Pacienta opatrne obráťte späť a vytiahnite vak na druhej strane. Pri tejto technike aplikácie je pacienta potrebné otočiť iba raz.



Pod každú nohu vložte oporu nohy. Najlepšie sa to robí zatlačením opory nohy nadol na matrac a jej vloženie pod koleno. Skontrolujte, či tkanina leží naplocho a riadne dosahuje okolo nohy. Opory nôh možno pripojiť rôznymi spôsobmi, pozrite stranu 12.

Zdvihnite hlavovú časť lôžka. Najprv k ramenu na vak pripojte slučky horných popruhových, potom pripojte slučky opôr nôh. Na stranách 6 – 7 nájdete pokyny na pripevnenie slučiek vaku na rôzne ramená na vaky. Zdvihnite pacienta.

Aplikovanie vaku počas sedu na lôžku

Zdvihnite hlavovú časť lôžka za pacientom. Položte vak na lôžko tak, aby bol štítok produktu otočený nadol k matracu.

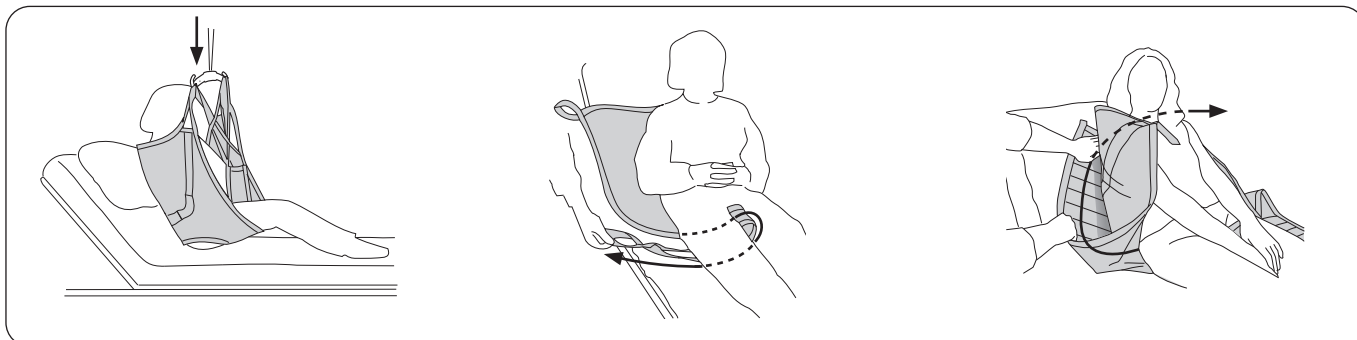
Posuňte vak nadol za chrbát pacienta tak, aby bol spodný okraj **zarovno s kostrčou**. **Poznámka:** Aplikácia je jednoduchšia, keď sa pacient nakláňa/je naklonený dopredu.

Spúšťanie na lôžko

Odporúča sa, aby sa vak po premiestnení odstránil. Ak je z nejakého dôvodu výhodnejšie ponechať vak na lôžku, odporúča sa použiť vak zo sieťového polyesteru.

Pamätajte na vlastný pracovný postoj a pohodlie pacienta. Na zdvíhanie a spúšťanie používajte funkcie lôžka. Dobrý pracovný postoj sa dosiahne, keď je matrac na úrovni kĺbov prstov ošetrovateľa, keď sú ruky úplne dole. V závislosti od zaťaženia ošetrovateľa je potrebné vyhodnotiť, koľko ošetrovateľov je potrebných na operáciu na základe jednotlivých prípadov.

Odstránenie vaku počas sedu na lôžku




Umiestnite pacienta nad lôžko. Zdvihnite hlavovú časť lôžka na zabezpečenie pohodlia pacienta. Pacienta spustite na lôžko.

Odstráňte opory nôh ťahaním slučiek opôr nôh pod tkaninovú časťou. **Poznámka:** Toto je ľahšie, keď sú nohy pacienta ohnuté.


Vak odstráňte ťahaním za jednu z opôr nôh za vakom a smerom na opačnú stranu.

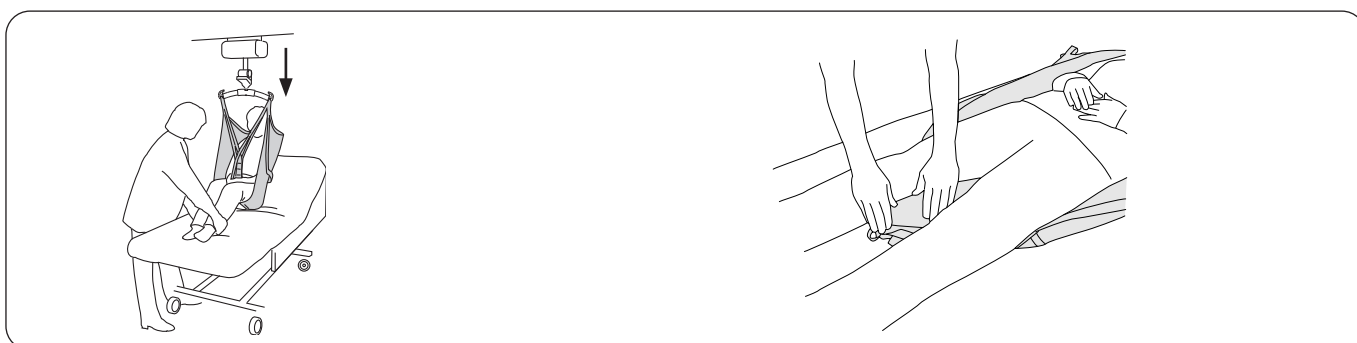Odstránenie vaku počas ľahu na lôžku



Umiestnite pacienta nad lôžko. Zdvihnute hlavovú časť lôžka na zabezpečenie pohodlia pacienta. Pacienta spustite na lôžko. Spustite hlavovú časť.

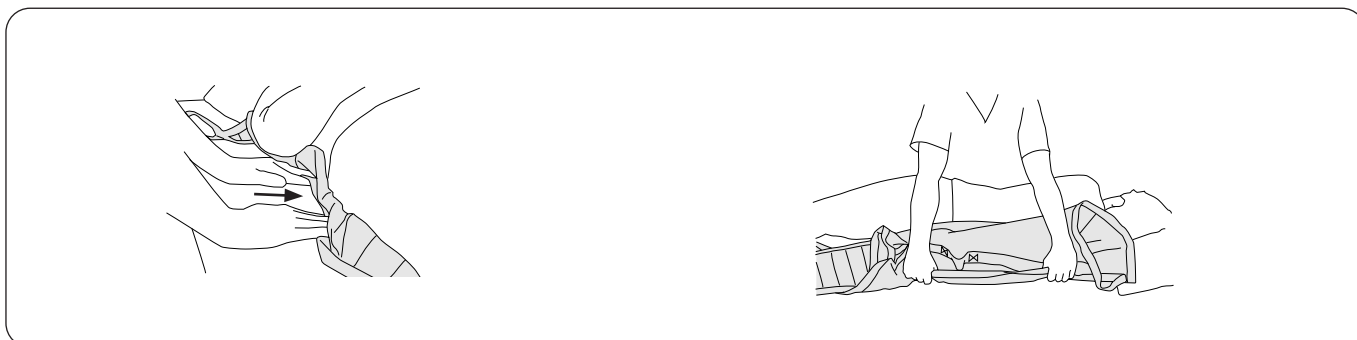Slučky opôr nôh umiestnite pod opory nôh medzi pacientovými nohami.




Uchopte okraj vaku. Potlačte vak pod vak. Pritlačte vak na matrac a pod pacienta.

Opatrne otočte pacienta na bok. Uchopte vak zospodu a opatrne ho vyberte.

Rady pre nastavenie

Rôzne spôsoby pripojenia opôr nôh

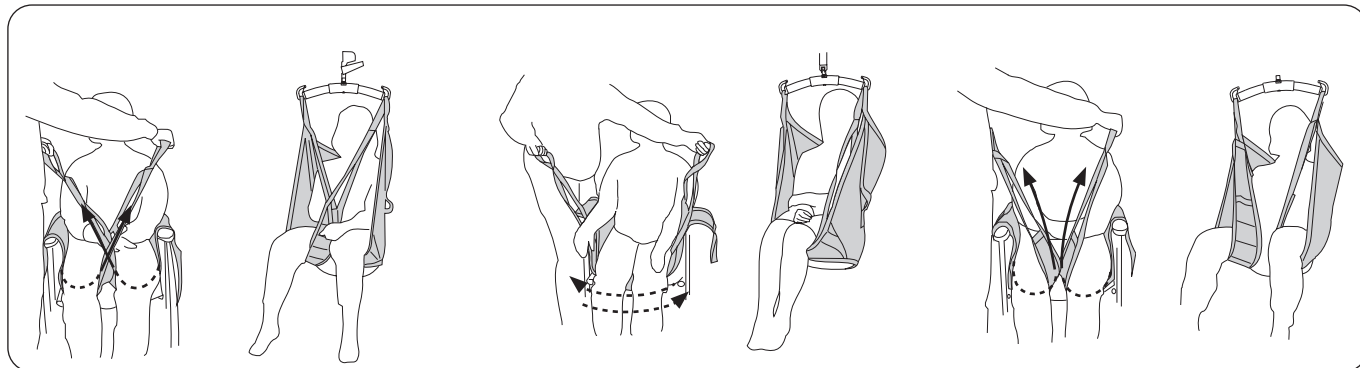Pred zvolením alternatívy pripojenia treba vykonať individuálne posúdenie na odhadnutie možných rizík.



Prekrížené opory nôh.

Najbežnejší spôsob aplikácie vaku. Pred zavesením slučiek na rameno na vak sa jedna slučka opory nohy prevleče cez druhú.

Prekrývanie pod oboma stehnami.

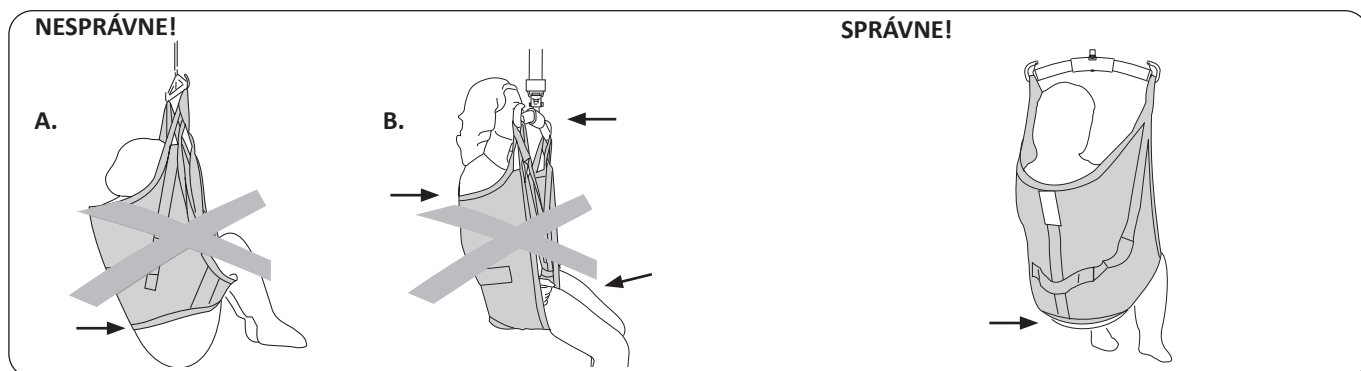
Je to vhodné napríklad vtedy, keď sa zdvíha pacient s amputovanými nohami. **Poznámka:** Aby pacient v sede nebol naklonený príliš dozadu, je možné ku slučkám na podporu nôh pripojiť slučky Extension Loop.

Každá opora nohy pripojená k ramenu na vak osobitne.

Môže to byť vhodné pri zdvíhaní pacientov s mimoriadne citlivou oblasťou genitálií.

⚠ Zvýšené riziko vykĺznutia.

Pacient vo vaku nesedí dobre – prečo?




A. Riziko vykĺznutia. Zadok visí. Vak môže byť príliš veľký. Môže to byť tiež spôsobené tým, že vak nebol dostatočne stiahnutý nadol za chrbtom pacienta.

Pred zdvíhaním skontrolujte, či je dolný okraj napnutý a či tkanina riadne dosahuje okolo nôh.

B. Príliš malý vak môže spôsobiť, že opory nôh sa zarežú do slabín a budú spôsobovať nepohodlie, rameno na vak bude príliš blízko k tvári a/alebo chrbát nebude mať dostatočnú oporu.

Dolný okraj vaku je na rovnakej úrovni ako kostrč. Opory nôh sú riadne umiestnené pod nohami.

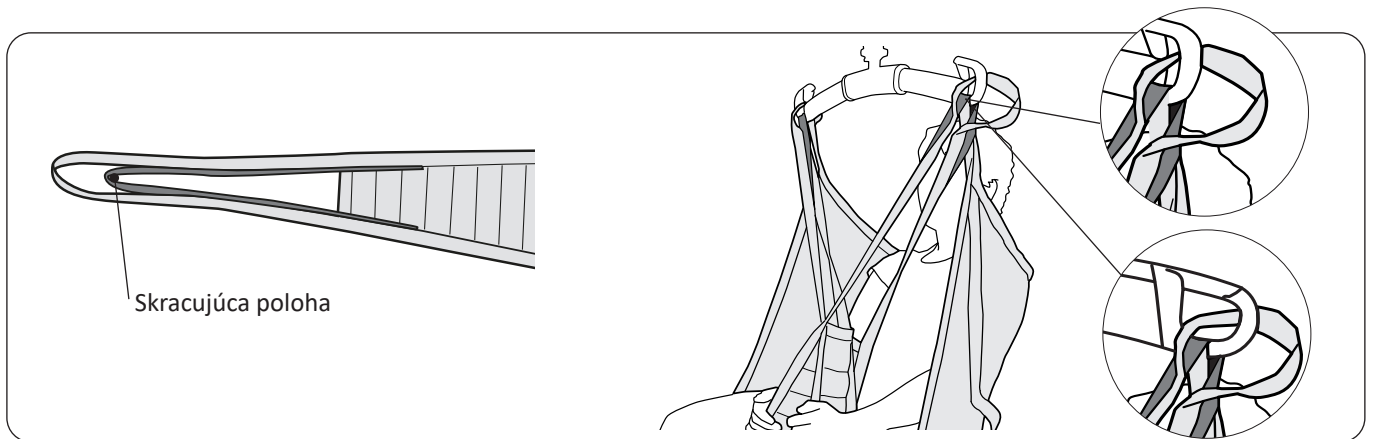Skracujúca poloha



Náš vak je starostlivo navrhnutý tak, aby zabezpečil, že pacient vždy sedí s tlakom dobre rozdeleným medzi nohami a zadnou časťou na zabezpečenie dobrej podpory pri premiestňovaní. V niektorých prípadoch však môže byť výhodné použiť vnútorné nastavenie, „skracujúcu polohu“ na slučke opory nohy na zmenu polohy sediaceho pacienta.

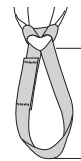
Poznámka: To **neplatí**, ak máte starší model vaku UniversalSling, mod. 00/02, so starším prevedením skracujúcej polohy. Ak potrebujete opis postupu skrátenia mod. 00/02, obráťte sa na spoločnosť Hill-Rom, ktorá vám poskytne návod na použitie pre daný model.

V prípadoch, v ktorých sa používa skracujúca poloha, sa odporúča, aby ste tiež zavesili vonkajšiu slučku opory nohy na hák ramena na vak, aby ste mali lepšiu vizuálnu kontrolu slučiek.

Príslušenstvo

Extension Loop, zelená, 12 cm (5 palcov)
Extension Loop, zelená, 22 cm (9 palcov)
Extension Loop, sivá, 12 cm (5 palcov)
Extension Loop, sivá, 22 cm (9 palcov)

č. prod. 3691102
č. prod. 3691103
č. prod. 3691302
č. prod. 3691303




- 2 = 12 cm (5 palcov)
- 3 = 22 cm (9 palcov)

Prehľad vakov Liko UniversalSling, mod. 000

Produkt	Č. prod.	Veľkosť	Hmotnosť pacienta ¹	Max. záťaž ²
Liko UniversalSling	35000--4	S	35 – 55 kg (77 – 121) libier	200 kg (440 libier)
Liko UniversalSling	35000--1	M-štitľly (štitľly dospelý)	45 – 70 kg (99 – 154) libier	200 kg (440 libier)
Liko UniversalSling	35000--5	M	60 – 90 kg (132 – 198) libier	200 kg (440 libier)
Liko UniversalSling	35000--6	L	80 – 120 kg (176 – 264) libier	200 kg (440 libier)
Liko UniversalSling	35000--7	XL	> 110 kg (> 242) libier	300 kg (660 libier)

¹ Uvedená hmotnosť pacienta je len orientačná – môžu existovať odchýlky.

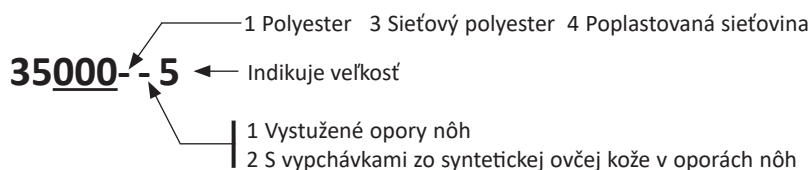² Na zachovanie maximálnej záťaže sa vyžadujú zdviháky/príslušenstvo určené pre rovnakú alebo vyššiu záťaž.



Odporúčané kombinácie:

Odporúčané kombinácie vakov Liko™ UniversalSling a ramenami na vaky Liko:	Mini 220	Rameno na vak 350 ³	Rameno na vak 450 ¹	Rameno na vak 600 ⁴	Dvojramená 670 ²	Křížové rameno na vak 450	Křížové rameno na vak 670	Univ. Bočné ramená + Universal 350	Univ. Bočné ramená + Universal 450
UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2	2
UniversalSling, M-štitľly	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

¹ Rameno na vak 450 sa vzťahuje na rameno Universal SlingBar 450 č. prod. 3156075, 3156085 a 3156095, SlingBar Standard 450 č. prod. 3156001, 3156003, 3156007 a 3156016 a tiež SlingGuard 450 č. prod. 3308020 a 3308520.

² Dvojramená 670 sa vzťahujú na Universal TwinBar 670 č. prod. 3156077 a 3156087 a tiež SlingGuard 670 Twin č. prod. 3308040 a 3308540.

³ Rameno na vak 350 sa vzťahuje na Universal SlingBar 350 č. prod. 3156074, 3156084 a 3156094.

⁴ Rameno na vak 600 sa vzťahuje na Universal SlingBar 600 č. prod. 3156076 a 3156086.

Vysvetlenie: 1 = odporúčané, 2 = môže fungovať, 3 = neodporúčané, 4 = nevhodné

Iné kombinácie

Kombinácie príslušenstva/produktov iných ako tých, ktoré odporúča spoločnosť Liko, môžu mať za následok riziká pre bezpečnosť pacienta.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švédsko
+46 (0)920 474700

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom

Liko AB je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Hill-Rom Holdings, Inc.