


# LikoScale™ 350

## Løftetilbehør

### Brugsvejledning\*



Varenr. 3156228

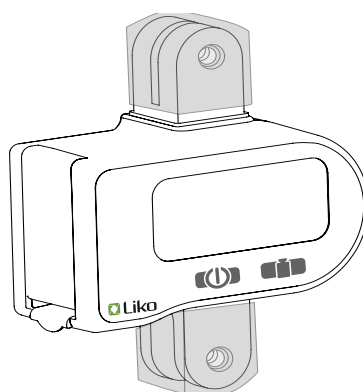

LikoScale 350 løftetilbehør er en nem måde at veje brugere på i Likos mobil- eller loftlift. Sammen med Likos lifte og løftetilbehør giver LikoScale 350 en enkel, bekvem og sikker vejning. Vægtens måleværdi aflæses på et display. Vægten vises i kg.

LikoScale 350 løftetilbehør er godkendt iht. det europæiske direktiv NAWI 2014/31/EU (ikke-automatiske vægte). Vægten må kun anvendes sammen med godkendte lifte og løftetilbehør i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning.

#### LikoScale 350 løftetilbehør kan anvendes med følgende personlifte fra Liko:

##### **Viking®** mobillift (S, M, L, XL)

- Ledadapter 12 mm, varenr. 2016504

##### **Uno™** mobillift (samtlige modeller)

- Uno med serienummer fr.o.m 31825. Ledadapter 12 mm, varenr. 2016504 kræves.

- Uno med serienummer t.o.m 31824. Ledadapter 8 mm, varenr. 2016502 kræves.

##### **Golvo®** mobillift (samtlige modeller)

##### **Likorall™** loftlift (samtlige modeller)

##### **Multirall™** loftlift (samtlige modeller)

##### **Liko® MasterLift** loftlift (samtlige modeller)

##### **LikoGuard™** loftlift (samtlige modeller)

- Kræver snapkoblingskit 1, varenr. 3308810 eller fastmonteringskit 1, varenr. 3308820.

*Eftersom løftehøjden begrænses ved anvendelse af LikoScale løftetilbehør i kombination med LikoLight™ mobillift eller Viking® XS mobillift, anbefaler vi ikke disse kombinationer.*

\* Denne brugsvejledning er et supplement til den komplette dokumentation, der er udgivet af vægtens fabrikant. Vores hensigt med denne anvisning er at gøre det nemmere for vores kunder at anvende LikoScale i kombination med Likos produkter. For detaljerede oplysninger om vægten henviser vi til fabrikantens brugsanvisning (vedhæftet).

## Inden montering kontrollér, at følgende dele findes:

- Værktøjsæt, 2 skruer, 2 låsemøtrikker
- Kalibreringscertifikat
- 2 hylstre
- Overensstemmelseserklæring
- Batteri
- Brugsanvisning fra fabrikanten
- Brugsvejledning fra Liko

## Montering/udskiftning af batteri


Til LikoScale 350 løftetilbehør medfølger et 9 V batteri, som rækker til ca. 3.000 aflæsninger.

### Montering af batteri:

1. Åben lågen på siden af vægten.
2. Montér batteriet.
3. Luk dækslet.

Når batteriet skal udskiftes vises et billede af et batteri i venstre side på displayet.

**OBS!** Opbrugte batterier afleveres til den nærmeste genbrugsstation til genvinding.

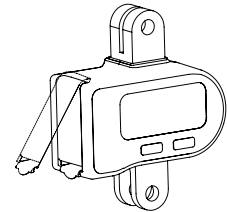

## Monteringsanvisning

LikoScale 350 løftetilbehør leveres med to hylstre. Hvilken fastgørelse, man vælger over og under vægten samt hvilken løftebøjle, der anvendes, afgør om begge hylstre skal anvendes. Følg monteringsanvisningen til den aktuelle lift, fastgørelse og løftebøjle.

### Viking® mobillift, Uno™ mobillift: Fast montering, med ledadapter

1. Afmontér løftetilbehøret fra liften.
2. Montér ledadapteren (se foregående side) på liften, iht. den separate monteringsanvisning.
3. Vægtens nederste fæstepunkt:

#### Alt. 1 med Universalbøjle



Placér et hylster på vægtens nederste fæstepunkt.

Montér løftetilbehøret under vægten vha. de medfølgende skruer og låsemøtrikker.

#### Alt. 2 med Standardbøjle

Montér løftetilbehøret under vægten vha. de medfølgende skruer og låsemøtrikker.

4. Placér et hylster på vægtens øverste fæstepunkt.  
Montér vægten i ledadapteren på liften vha. de medfølgende skruer og låsemøtrikker.

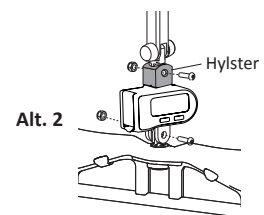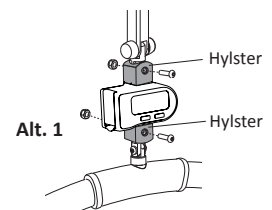


**△ Ved afmontering af vægten skal ledadapteren også afmonteres fra liften, inden derigen monteres løftetilbehør på liften.**

### Viking® mobillift, Uno™ mobillift: Montering med snapkobling

Til montering af LikoScale i snapkobling, kræves snapkoblingssæt LikoScale varenr. 3156232.

1. Afmontér løftetilbehøret fra liften.
2. Placér et hylster på vægtens øverste fæstepunkt.
3. Montér snapkoblingssæt på LikoScale iht. den separate monteringsanvisning.
4. Montér vægten på liften.
5. Montér løftetilbehøret under vægten.

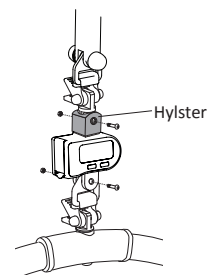

### Likorall™ loftlift, MasterLift loftlift, Golvo® mobillift: Fast montering

1. Afmonter løftetilbehøret fra liften.
2. Vægtens nederste fæstepunkt:

#### Alt. 1 med Universalbøjle



Placér et hylster på vægtens nederste fæstepunkt.

Monter løftetilbehøret under vægten vha. de medfølgende skruer og låsemøtrikker.

#### Alt. 2 med Standardbøjle

Monter løftetilbehøret under vægten vha. de medfølgende skruer og låsemøtrikker.


3. Monter vægten på liften vha. de medfølgende skruer og låsemøtrikker.

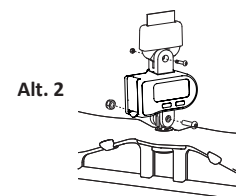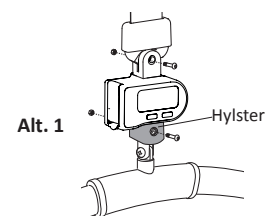

### Multirall™ loftlift, Likorall™ loftlift, MasterLift loftlift, Golvo® mobillift: Montering med snapkobling

Til montering af LikoScale i snapkobling, kræves snapkoblingssæt LikoScale varenr. 3156232.

1. Afmonter løftetilbehøret fra liften.
2. Placér et hylster på vægtens øverste fæstepunkt.
3. Monter snapkoblingssæt på LikoScale iht. den separate monteringsanvisning.
4. Monter vægten på liften.
5. Monter løftetilbehøret under vægten.

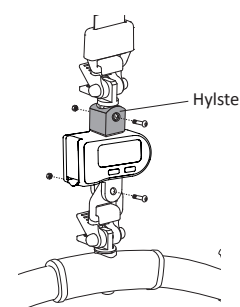

### LikoGuard™ loftlift: fastmontering og snapkobling

1. Monter vægten iht. nedenstående beskrivelser:

**Alt. 1** med fastmontering, anvend fastmonteringskit 1 varenr. 3308820.



Monter løftetilbehøret iht. monteringsanvisningen.

Placér et hylster på vægtens nederste fæstepunkt.

**Alt. 2** med snapkobling, anvend snapkoblingsskit 1 varenr. 3308810.

Monter løftetilbehøret iht. monteringsanvisningen.

Placér et hylster på vægtens nederste fæstepunkt.

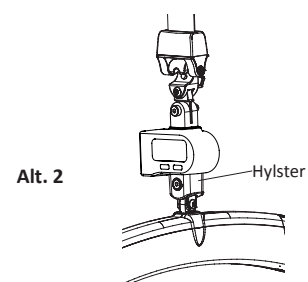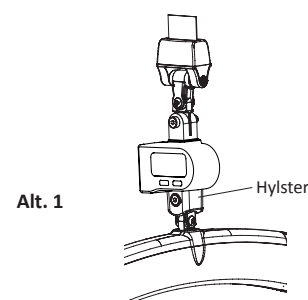

## Håndtering

Det almindelige anvendelsesområde for LikoScale 350 løftetilbehør er temperaturer mellem +5° C og +35° C samt en relativ luftfugtighed, som ikke overstiger 95 %.

Vægten bør ikke opbevares i temperaturer, der er lavere end -20° C eller højere end +50° C.

Ved opbevaring længere end 6 måneder bør batteriet fjernes. Følg instruktionerne til montering/udskiftning af batteri.





Kontrollér inden vejning, at vægten er monteret iht. monteringsanvisningen på side 2-3.

**⚠ Inden løft kontrollér da, at løftetilbehøret hænger vertikalt og uhindret kan bevæge sig.**

## Vejning med LikoScale™ 350 løftetilbehør

Vægten kan nulstilles enten med eller uden løftesejl. Såfremt vægten nulstilles, uden at løftesejlet hænger på løftebøjlen, vil løftesejlets vægt indgå som en del af resultatet ved vejning af brugeren. Løftesejlets vægt skal da modregnes for at få den korrekte brugervægt.


Nedenfor beskrives nulstilling med løftesejl.

1. Montér løftesejlet på løftebøjlen.
2. Vægten startes ved at trykke på knappen .
3. Vægten nulstilles ved at trykke på knappen .  
Alle indikeringer vises på displayet i et par sekunder, når vægten nulstilles.  
Når vægten er klar vises værdien "0.0" i displayet.  
**Obs! Vægten kan ikke nulstilles med en vægt på over 35 kg.**
4. Afmontér løftesejlet fra løftebøjlen og påsæt løftesejlet på brugeren iht. brugsanvisningen, der leveres med løftesejlet og personliften. Montér løftesejlet til løftebøjlen.
5. Hæv løftebøjlen, så brugeren letter fra underlaget. Husk aldrig at løfte brugeren højere end nødvendigt.
6. Når løftebevægelsen er stabiliseret, trykkes på knappen . Brugers vægt kan nu aflæses på displayet. Vægten slås automatisk fra efter ca. 60 sekunder. Tryk da på knappen , såfremt yderligere aflæsninger ønskes.
7. Sænk brugeren forsigtigt og afmontér løftesejlet.

## Kalibrering

Ved kalibrering se fabrikantens brugsanvisning eller kontakt Hill-Rom.

## Tekniske oplysninger

<b>Nøjagtighedsklasse:</b>	Klasse III iht. NAWI 2014/31 EU-direktivet
<b>Opløsning:</b>	0,2 kg
<b>Nøjagtighed:</b>	10-99,9 kg +/- 0,2 kg 100-400 kg +/- 0,4 kg
<b>Maks. belastning:</b>	400 kg
<b>Min. belastning:</b>	10 kg
<b>Nulstilling:</b>	Nulstillingsknap (  )
<b>Strømforsyning:</b>	Batteri 9 V
<b>Batteri:</b>	9 V Alkaline (PP3, MN1604, 6LR61, E-block). Rækker til ca. 3.000 aflæsninger
<b>Display:</b>	Digital, flydende krystaller (LCD)
<b>Mål:</b>	110 x 45 x 134 mm (L x B x H)
<b>Egenvægt:</b>	0,53 kg
<b>Temperaturområde:</b>	+5° C til +35° C
<b>Luftfugtighed:</b>	0 - 95 %
<b>Gravitationszone:</b>	Programmeres iht. instruktionerne i producentens brugsanvisning

