


LikoScale™ 350

Lisävaruste

Käyttöopas*



Tuotenro 3156228

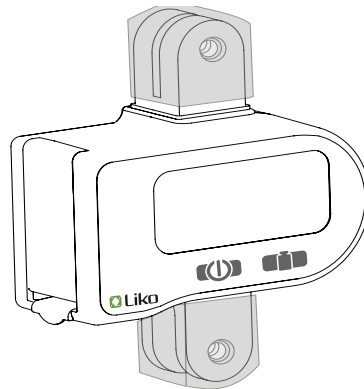

LikoScale 350 -lisävaruste on kätevä ja helppokäyttöinen vaaka, joka on tarkoitettu avustettavien punnitsemiseen liikuteltavissa tai kiinteissä nostimissa. Yhdessä Likon nostimien ja nostovarusteiden kanssa LikoScale 350 -lisävaruste mahdollistaa turvallisen ja helpon punnitsemisen.

Paino näkyy vaa'an digitaalinäytössä kilogrammoina.

LikoScale 350 -lisävaruste on hyväksytty eurooppalaisen NAWI 2014/31/EU (Non Automatic Weighing Instruments, ei-automaattiset punnitusvälineet) -direktiivin mukaan. Vaakaa saa käyttää vain hyväksytyjen nostimien ja lisävarusteiden kanssa tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.

LikoScale 350 -lisävarustetta voi käyttää seuraavien Liko-nostimien kanssa:

Liikuteltava **Viking™**-nostin (S, M, L, XL)

- käytettävä 12 mm:n sovitinta, tuotenro 2016504.

Liikuteltava **Uno™** -nostin (kaikki mallit)

- Uno-malleissa, joiden sarjanumero on vähintään 31825, käytetään 12 mm:n sovitinta, tuotenro 2016504.

- Uno-malleissa, joiden sarjanumero on enintään 31824, käytetään 8 mm:n sovitinta, tuotenro 2016502.

Liikuteltava **Golvo™** -nostin (kaikki mallit)

Likorall™ -kattostonin (kaikki mallit)

Multirall™ -kattostonin (kaikki mallit)

Liko™ MasterLift -kattostonin (kaikki mallit)

LikoGuard™ -kattostonin (kaikki mallit)

- Tarvitaan pikaliitinsarja 1, tuotenro 3308810 tai asennussarja 1, tuotenro 3308820.

Nostokorkeus on rajallinen, kun LikoScale-lisävarustetta käytetään yhdessä liikuteltavan LikoLight™-nostimen tai liikuteltavan Viking™ XS -nostimen kanssa, joten emme suosittele näitä vaihtoehtoja.

* Tämä käyttöopas täydentää täydellistä opasta, jonka vaa'an valmistaja on julkaissut.

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on tehdä LikoScalen käyttämisestä Liko-tuotteiden kanssa helpompaa asiakkaillemme. Lisätietoja vaa'asta saat valmistajan käyttöoppaasta (liitteenä).

Ennen asennusta on tarkistettava, että seuraavat ovat pakkauksessa:

- Työkalupakkaus, 2 ruuvia, 2 lukitusmutteria
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- 2 holkkia
- Valmistajan julkaisema käyttöopas
- Akku
- Kalibroitivakuutus
- Likon julkaisema käyttöopas

Akun asentaminen/vaihtaminen


LikoScale 350 -lisävarusteen mukana toimitetaan 9 V:n akku, jonka akunkesto on noin 3000 lukemaa.

Akun asennus:

1. Avaa vaa'an sivussa oleva luukku.
2. Asenna akku.
3. Sulje luukku.

Kun paristo on vaihdettava, näytön vasempaan kulmaan ilmestyy pieni paristokuvake.

HUOMAA! Vanhat akut on toimitettava lähimpään kierrätyspisteeseen.

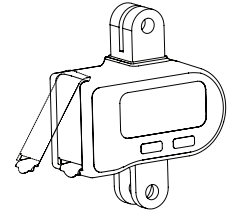

Asennusohjeet

LikoScale 350 -lisävarusteen mukana toimitetaan kaksi holkkia. Kiinnitystyytit ovat vaa'an alla ja päällä ja käyttämäsi nostokaari määrittää, onko molempia holkkeja käytettävä. Noudata asianmukaisen nostimen, liitoskohdan ja nostokaaren asennusohjeita.

Liikuteltava Viking™-nostin, liikuteltava Uno™-nostin: kiinteä asennus sovittimen kanssa

1. Poista nostimesta nostovarusteet.
2. Kiinnitä sopiva sovitin (katso edellinen sivu) nostimeen asennusohjeiden mukaisesti.
3. Liitoskohta vaa'an alla:

Vaihtoehto 1 Universal-nostokaaren kanssa


Aseta yksi holkki vaa'an alaliitoskohtaan.

Kiinnitä nostovaruste vaa'an alle käyttämällä mukana toimitettua pulttia ja lukitusmutteria.

Vaihtoehto 2 vakionostokaaren kanssa

Kiinnitä nostovaruste vaa'an alle käyttämällä mukana toimitettua pulttia ja lukitusmutteria.

4. Aseta yksi holkki vaa'an yläliitoskohtaan. Kiinnitä vaaka yläkiinnitykseen, sovittimeen käyttämällä mukana toimitettua pulttia ja lukitusmutteria.

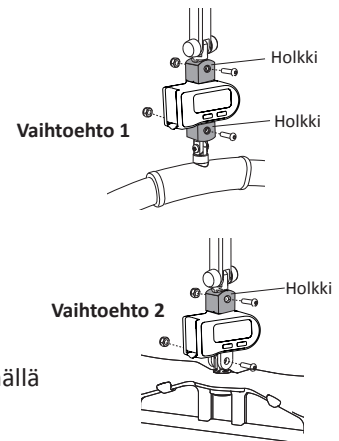


△ Kun purat vaakaa, sovitin pitää irrottaa nostimesta ennen kuin mikä tahansa nostovaruste asennetaan uudelleen nostimeen.

Liikuteltava Viking™-nostin, liikuteltava Uno™-nostin: pikaliittimen asennus

Liko-nostimissa, joissa on Q-link pikaliitin, on käytettävä LikoScale -sovitinpakkausta, tuotenro 3156232.

1. Poista nostimesta nostovarusteet.
2. Aseta yksi holkki vaa'an yläliitoskohtaan.
3. Kiinnitä LikoScale-sovitinpakkaus asennusohjeiden mukaan.
4. Kiinnitä vaaka nostimeen.
5. Kiinnitä nostovaruste vaa'an alle.

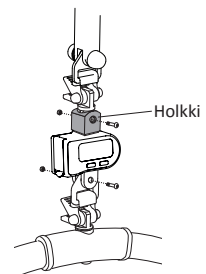

Likorall™-kattostonin, MasterLift-kattostonin, liikuteltava Golvo™-nostin: kiinteä asennus

1. Poista nostimesta nostovarusteet.
2. Liitoskohta vaa'an alla:

Vaihtoehto 1 Universal-nostokaaren kanssa



Aseta yksi holkki vaa'an alaliitoskohtaan.

Kiinnitä nostovaruste vaa'an alle käyttämällä mukana toimitettua pulttia ja lukitusmutteria.

Vaihtoehto 2 vakionostokaaren kanssa

Kiinnitä nostovaruste vaa'an alle käyttämällä mukana toimitettua pulttia ja lukitusmutteria.


3. Kiinnitä vaaka nostimeen käyttämällä mukana toimitettua pulttia ja lukitusmutteria.

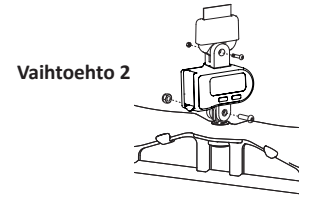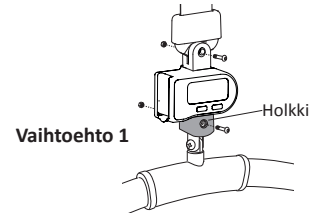

Multirall™-kattostonin, Likorall™-kattostonin, MasterLift-kattostonin, liikuteltava Golvo™-nostin: pikaliittimen asennus

Liko-nostimissa, joissa on Q-link pikaliitin, on käytettävä LikoScale -sovitinpakkausta, tuotenro 3156232.

1. Poista nostimesta nostovarusteet.
2. Aseta yksi holkki vaa'an yläliitoskohtaan.
3. Kiinnitä LikoScale-sovitinpakkaus asennusohjeiden mukaan.
4. Kiinnitä vaaka nostimeen.
5. Kiinnitä nostovaruste vaa'an alle.

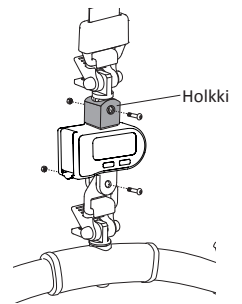

LikoGuard™-kattostonin: kiinteä asennus ja pikaliitinasennus

1. Asenna vaaka seuraavasti:

Vaihtoehto 1 kiinteän asennuksen avulla, käytä asennussarjaa 1, tuotenro 3308820.



Asenna nostotarvike asennusohjeen mukaisesti.

Aseta yksi holkki vaa'an alaliitoskohtaan.

Vaihtoehto 2 pikaliittimen avulla, käytä pikaliitinsarjaa 1, tuotenro 3308810.

Asenna nostotarvike asennusohjeen mukaisesti.

Aseta yksi holkki vaa'an alaliitoskohtaan.

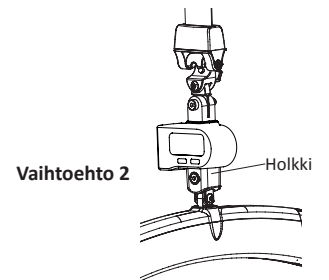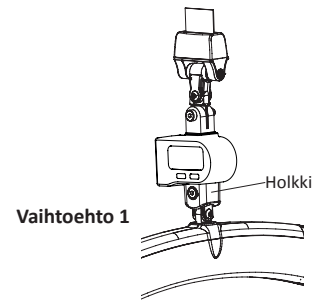

Käyttö

LikoScale 350 -lisävarusteen normaali käyttölämpötila on +5–35 °C ja suhteellinen kosteus ei saa ylittää 95 prosenttia.

Vaakaa ei saa säilyttää alle -20 °C:n tai yli +50 °C:n lämpötilassa.

Kun vaaka varastoidaan yli 6 kuukauden ajaksi, akku on poistettava. Noudata akun asennus-/vaihto-ohjeita.




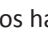
Varmista ennen punnitusta, että vaaka on asennettu sivujen 2–3 asennusohjeiden mukaisesti.

⚠ Ennen nostoa on tarkistettava, että nostovaruste riippuu pystysuorassa ja pääsee liikkumaan esteettömästi.

Punnitseminen LikoScale™ 350 -lisävarusteen avulla

Vaa'an voi nollata nostokankaan kanssa tai ilman sitä. Jos vaaka nollataan ilman, että nostokangas on kiinnitetty nostokaareen, avustettavan paino sisältää myös nostokankaan painon. Siksi nostokankaan paino on vähennettävä kokonaispainosta, jotta saadaan selville avustettavan todellinen paino.


Vaa'an nollaus nostokankaan kanssa kuvataan alla:

1. Liitä nostokangas nostokaareen.
2. Käynnistä vaaka painamalla -painiketta.
3. Nollaa vaaka painamalla -painiketta.
Näyttö tekee pari sekuntia kestäväen osatarkastuksen vaa'an asettuessa. Kun vaaka on valmis, arvo **0.0** tulee näkyviin.
Huomaa! Nollauksen voi tehdä enintään 35 kg:n kuormalla.
4. Poista nostokangas nostokaaresta ja aseta nostokangas avustettavalle nostokankaan ja nostimen käyttöoppaan mukaisesti. Liitä nostokangas nostokaareen.
5. Nosta nostokaarta niin, että avustettava nousee hieman. Älä koskaan nosta avustettavaa korkeammalle kuin tarpeen.
6. Kun nostoliike on tasaantunut, paina -painiketta. Avustettavan paino näkyy nyt näytössä. Vaa'an virta katkeaa automaattisesti noin 60 sekunnin jälkeen. Jos haluat lisää lukemia, paina -painiketta.
7. Laske avustettavaa varovasti ja irrota nostokangas nostokaaresta.

Kalibrointi

Katso kalibrointiohjeet valmistajan käyttöoppaasta tai ota yhteyttä Hill-Rom.

Tekniset tiedot

Tarkkuusluokka:	Luokka III NAWI 2014/31/EU -direktiivin vaatimusten mukaan.
Lukema:	Tarkkuus 0,2 kg
Kestokyky:	10-99,9 kg +/- 0,2 kg 100-400 kg +/- 0,4 kg
Suurin sallittu kuormitus:	400 kg
Pienin sallittu kuormitus:	10 kg
Nollaus:	Yksi nollauspainike ()
Virtalähde:	Akku 9 V
Akku:	9 V Alkali (PP3, MN1604, 6LR61, E-block). Akun kesto: noin 3000 lukemaa
Näyttö:	Digitaalinen, nestekide (LCD)
Koko:	110 x 45 x 134 mm (P x L x K)
Paino:	0,53 kg
Lämpötila-alue:	+5 – +35 °C
Kosteusalue:	0 - 95 %
Painovoima-alue:	Aseta painovoiman mukainen kiihtyvyydys valmistajan käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

