


Pèse-personne LikoScale™ 350



Mode d'emploi*

Art. n° 3156228

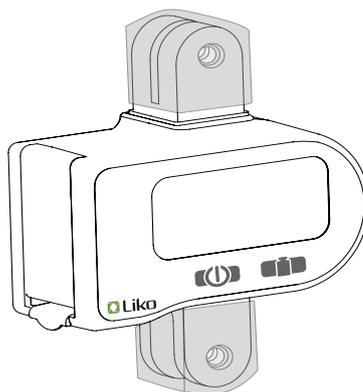

Le pèse-personne LikoScale 350 est un dispositif de pesée pratique et simple à utiliser, pour déterminer le poids des patients placés dans les lève-personnes Liko mobiles ou stationnaires. Associé aux lève-personnes et accessoires de levage Liko, le LikoScale 350 permet une pesée sûre et aisée.

Le poids est indiqué en kilogrammes sur l'écran numérique du pèse-personne.

Le pèse-personne LikoScale 350 est homologué selon la Directive européenne NAWI 2014/31/EU (Instruments de pesage à fonctionnement non automatique). Il ne doit être utilisé qu'avec des lève-personnes et accessoires approuvés, conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Le pèse-personne LikoScale 350 peut être utilisé avec les lève-personnes Liko suivants :

Lève-personnes mobile **Viking™** (S, M, L, XL)

- nécessite l'adaptateur 12 mm, art. n° 2016504

Lève-personnes mobile **Uno™** (tous les modèles)

- Les modèles Uno à partir du numéro de série 31825 nécessitent l'adaptateur 12 mm, art. n° 2016504.

- Les modèles Uno à partir du numéro de série 31824 nécessitent l'adaptateur 8 mm, art. n° 2016502.

Lève-personnes mobile **Golvo™** (tous les modèles)

Lève-personnes plafonnier **Likorall™** (tous les modèles)

Lève-personnes plafonnier **Multirall™** (tous les modèles)

Lève-personnes plafonnier **Liko™ MasterLift** (tous les modèles)

Lève-personnes plafonnier **LikoGuard™** (tous les modèles)

- Exige le Kit de fixation rapide 1, art. n° 3308810 ou le Kit Montage fixe 1, art. n°3308820.

Étant donné que la hauteur de levage est limitée lorsque le pèse-personne LikoScale est utilisé en association avec les lève-personnes mobiles LikoLight™ ou Viking™ XS, nous ne recommandons pas ces configurations.

* Ce mode d'emploi vient en complément de la documentation fournie par le fabricant du pèse-personne.

Il est destiné à nos clients et a pour but de simplifier l'utilisation du pèse-personne LikoScale avec les produits Liko.

Pour des informations détaillées concernant le pèse-personne, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation du fabricant (fournie).

Avant le montage, vérifiez que vous avez bien tous les éléments suivants :

- Kit d'outils, 2 vis, 2 contre-écrous
- Déclaration de Conformité
- 2 manchons
- Notice d'utilisation du fabricant
- Pile
- Déclaration d'étalonnage
- Mode d'emploi Liko

Mise en place et remplacement de la pile


Le pèse-personne LikoScale 350 est fourni avec une pile 9 V, dont la durée de vie est d'environ 3000 pesées.

Mise en place de la pile :

1. Ouvrez la trappe sur le côté du pèse-personne.
2. Insérez la pile.
3. Refermez la trappe.

Lorsque la pile doit être remplacée, un petit symbole représentant une pile apparaîtra à gauche de l'écran.

REMARQUE ! Les piles usagées doivent être déposées à la déchetterie la plus proche.

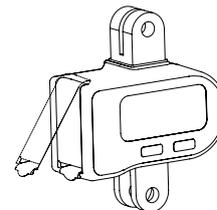

Instructions de montage

Le pèse-personne LikoScale 350 est fourni avec deux manchons. Le type de fixation présente au-dessus et en-dessous du pèse-personne, ainsi que le type d'étrier que vous possédez, conditionnent l'utilisation, ou non, des deux manchons. Respectez les instructions de montage correspondant à votre lève-personnes, au point de fixation et à l'étrier.

Lève-personnes mobiles Viking™ et Uno™ : montage fixe avec adaptateur

1. Retirez l'accessoire de levage du lève-personnes.
2. Montez l'adaptateur approprié (cf. page précédente) sur le lève-personnes, conformément aux instructions de montage.
3. Point de fixation sous le pèse-personne :

Configuration 1, avec un étrier Universel

Placez un manchon sur le point de fixation inférieur du pèse-personne.



Montez l'accessoire de levage sous le pèse-personne, à l'aide du boulon et du contre-écrou fournis.

Configuration 2, avec un étrier standard

Montez l'accessoire de levage sous le pèse-personne, à l'aide du boulon et du contre-écrou fournis.

4. Placez un manchon sur le point de fixation supérieur du pèse-personne. Montez le pèse-personne sur l'adaptateur par son point de fixation supérieur, à l'aide du boulon et du contre-écrou fournis.


⚠ Lors du démontage du pèse-personne, déposez l'adaptateur du lève-personnes avant d'y remonter un accessoire de levage.

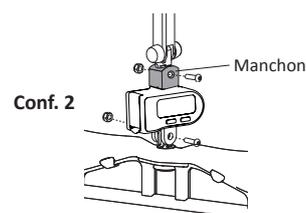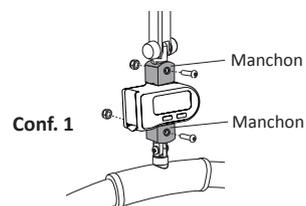

Lève-personnes mobiles Viking™ et Uno™ : montage avec fixation rapide Quick-release

Les lève-personnes Liko équipés de l'attache rapide Q-Link nécessitent l'adaptateur pour LikoScale, art. n° 3156232

1. Retirez l'accessoire de levage du lève-personnes.
2. Placez un manchon sur le point de fixation supérieur du pèse-personne.
3. Montez l'adaptateur pour LikoScale conformément aux instructions de montage.
4. Montez le pèse-personne sur le lève-personnes.
5. Montez l'accessoire de levage sous le pèse-personne.

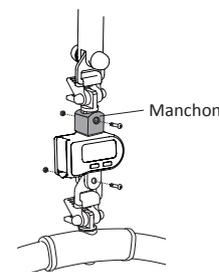

Lève-personnes plafonniers Likorall™, MasterLift, lève-personnes mobile Golvo™ : montage fixe

1. Retirez l'accessoire de levage du lève-personnes.
2. Point de fixation sous le pèse-personne :

Configuration 1, avec un étrier Universel



Placez un manchon sur le point de fixation inférieur du pèse-personne.

Montez l'accessoire de levage sous le pèse-personne, à l'aide du boulon et du contre-écrou fournis.

Configuration 2, avec un étrier standard

Montez l'accessoire de levage sous le pèse-personne, à l'aide du boulon et du contre-écrou fournis.




3. Montez le pèse-personne sur le lève-personne, à l'aide du boulon et du contre-écrou fournis.

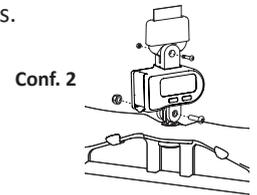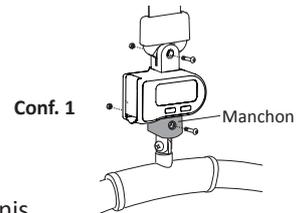

Lève-personnes plafonniers Multirall™, Likorall™, MasterLift et lève-personnes mobile Golvo™ : montage avec fixation rapide Quick-release

Les lève-personnes Liko équipés de l'attache rapide Q-Link nécessitent l'adaptateur pour LikoScale, art. n° 3156232

1. Retirez l'accessoire de levage du lève-personnes.
2. Placez un manchon sur le point de fixation supérieur du pèse-personne.
3. Montez l'adaptateur pour LikoScale conformément aux instructions de montage.
4. Montez le pèse-personne sur le lève-personnes.
5. Montez l'accessoire de levage sous le pèse-personne.

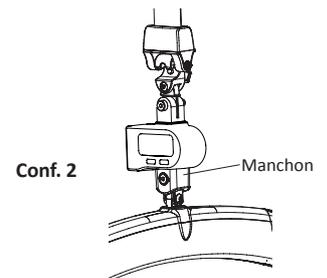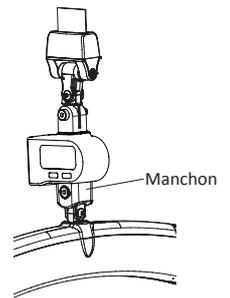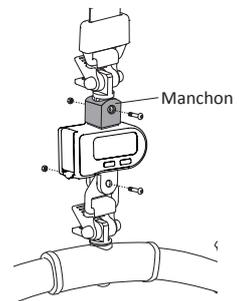

Lève-personnes plafonnier LikoGuard™ : montage fixe et avec fixation rapide Quick-release

1. Montez le pèse-personne selon l'une de ces configurations :

Configuration 1, avec fixation fixe, utilisez le Kit Montage fixe 1, art. n° 3308820.

Montez l'accessoire de levage conformément aux instructions de montage.

Placez un manchon sur le point de fixation inférieur du pèse-personne.

Configuration 2, avec fixation rapide Quick-release, utilisez le Kit de fixation rapide, art. n° 3308810.

Montez l'accessoire de levage conformément aux instructions de montage.

Placez un manchon sur le point de fixation inférieur du pèse-personne.

Fonctionnement

La plage normale de fonctionnement de l'accessoire LikoScale 350 est une température comprise entre +5 °C et +35 °C, pour une humidité relative ne dépassant pas 95 %.

Le pèse-personne ne doit pas être stocké à des températures inférieures à -20 °C ou supérieures à +50 °C.

Lorsque le pèse-personne est stocké pendant plus de 6 mois, la pile doit être retirée. Suivez les instructions de mise en place et de remplacement de la pile.

Avant de procéder à la pesée, assurez-vous que le pèse-personne a été installé conformément aux « Instructions de montage » (pages 2 et 3).

⚠ Avant le levage, vérifiez que l'accessoire de levage est suspendu verticalement et peut être manœuvré librement.

Pesée avec le pèse-personne LikoScale™ 350

Le pèse-personne peut être taré avec ou sans harnais. Si le pèse-personne est taré sans que le harnais soit fixé à l'étrier, le poids du patient comprendra le poids du harnais. Par conséquent, le poids du harnais doit être soustrait pour obtenir le poids réel du patient.

La procédure de tarage du pèse-personne quand le harnais est en place est décrite ci-dessous :

1. Fixez le harnais à l'étrier.
2. Allumez le pèse-personne en appuyant sur la touche .
3. Tarez le pèse-personne en appuyant sur la touche .
Des traits défilent sur l'écran durant quelques secondes pendant le tarage du pèse-personne. Lorsque le pèse-personne est prêt, la valeur « 0.0 » apparaît à l'écran.
Remarque ! Il n'est pas possible de tarer à zéro plus de 35 kg.
4. Retirez le harnais de l'étrier et mettez-le en place sur le patient en respectant la notice d'utilisation du harnais et du lève-personnes. Fixez le harnais à l'étrier.
5. Levez l'étrier de manière à ce que le patient soit soulevé lentement. Ne jamais lever un patient plus haut que nécessaire.
6. Lorsque le mouvement de levage s'est stabilisé, appuyez sur la touche . Le poids du patient peut être lu sur l'écran. Le pèse-personne s'éteint automatiquement après 60 secondes environ. Pour effectuer d'autres pesées, appuyez sur la touche .
7. Redescendez délicatement le patient puis retirez le harnais de l'étrier.

Étalonnage

Pour l'étalonnage, consultez la notice d'utilisation du fabricant ou contactez Hill-Rom.

Caractéristiques techniques

Classe de précision :	Classe III conformément aux exigences de la Directive NAWI 2014/31/EU.
Graduation :	Jusqu'à 200 g
Tolérance :	+/- 200 g de 10 à 99,90 kg +/- 400 g de 100 à 400 kg
Portée maximale :	400 kg
Portée minimale :	10 kg
Tarage :	Via une touche de tarage ()
Alimentation électrique :	Pile 9 V
Pile :	Alcaline 9 V (PP3, MN1604, 6LR61, E-block). Durée de vie de la pile : environ 3000 pesées
Écran :	Numérique, à cristaux liquides (LCD)
Dimensions :	110 x 45 x 134 mm (L x l x H)
Poids :	0,53 kg
Plage de température :	de +5 °C à +35 °C
Plage d'humidité :	de 0 % à 95 %
Zone de gravité :	Pour régler l'accélération gravitationnelle, se reporter aux instructions du fabricant.

