

Productbeschrijving

De MultiStraps zijn speciaal ontwikkeld voor veelzijdig gebruik in de gezondheidszorg. De MultiStraps worden gebruikt voor het tillen en ondersteunen van delen van het lichaam van de patiënt om onderzoek, zorg en behandeling te vergemakkelijken. De MultiStraps kunnen ook worden gebruikt om een patiënt in bed te draaien en de patiënt in een laterale positie te ondersteunen. In plaats van deze taken handmatig uit te voeren, dient het verplegend personeel de MultiStraps samen met een lift te gebruiken, waardoor mogelijk zwaar en schadelijk werk wordt vermeden.

Geschikte toepassingsgebieden zijn:

- behandeling van wonden, bijv. brandwonden
- hygiëne
- behandeling, bijv. katheterisatie
- onderzoek
- plaatsing van bedsteek
- aan-/uitkleden
- op de zij draaien.

De MultiStraps kunnen alleen of in paren worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het tillen van beide benen van de patiënt tijdens katheterisatie.

De MultiStraps zijn verkrijgbaar in verschillende modellen/breedtes.

De kleinere MultiStraps zijn vaak gemakkelijker te plaatsen en geven betere toegang tot een groter huidoppervlak. Kies een bredere MultiStrap voor een groter ondersteund gebied en betere drukverdeling.

De MultiStraps zijn verkrijgbaar in twee materialen, polyester en non-woven, beide met drukvereffenende verstevigde pads. Het polyester ontwerp is duurzaam en gebruiksvriendelijk. Het non-woven ontwerp is bedoeld voor kortdurend gebruik en moet worden weggegooid wanneer het product vuil is of wanneer de patiënt het niet meer nodig heeft.

Neem voor meer informatie over non-woven Solo MultiStrap contact op met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.

De MultiStraps kunnen in combinatie met mobiele liften of plafondliften van Liko worden gebruikt.

⚠ De MultiStraps zijn niet bedoeld om de patiënt te tillen en vervolgens te verplaatsen van de ene locatie naar de andere. Voor deze toepassingen raden wij het gebruik van een van de Liko-tilbanden aan, die in veel modellen verkrijgbaar zijn.





















In dit document wordt de persoon die wordt opgetild de patiënt genoemd, en de persoon die hierbij helpt de zorgverlener.

BELANGRIJK!

Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen voor zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn voor de lift die u wilt gebruiken. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. U moet weten of de patiënt het tillen aan kan. Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Symboolbeschrijving

Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

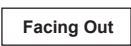Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing. Wordt gebruikt waar extra zorg en aandacht nodig zijn.
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing
	CE-markering
	Juridisch fabrikant
	Productiedatum
	Referentienummer
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Niet stomen
	Niet strijken
	Drogen in de droogtrommel
	Niet in de droger
	Wassen Het symbool komt altijd voor in combinatie met de aanbevolen temperatuur in °C en °F.
	Latexvrij
	Periodieke inspectie
	Niet bleken
	Drogen aan de waslijn in de schaduw
	Omhoog gericht en symbool aan de buitenkant van de apparatuur.
	Symbool aan de buitenkant van de apparatuur.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) JMMMD (21) 012345678910</small>	GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten. (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer

Veiligheidsinstructies

Bedenk vóór het tillen het volgende:

- kies de MultiStrap die het meest geschikt is voor de betreffende taak.
- let op of er sprake is van een gevoelige huid, drukgevoeligheid of pijn op de plekken waar de MultiStraps moeten worden aangebracht.
- zorg ervoor dat de patiënt de juiste mobiliteit in de gewrichten heeft die nodig is om lichaamsdelen passief te tillen met de MultiStraps.
- plan het tillen voordat het wordt uitgevoerd, zodat het zo veilig en soepel mogelijk verloopt.
- hoewel de tiljucken van Liko zijn uitgerust met veiligheidsclips, moet er extra voorzichtig te werk worden gegaan. Controleer voordat ledematen worden getild, terwijl de banden volledig gestrekt zijn, of de bandlussen correct aan het tiljuk zijn bevestigd.
- laat een patiënt die is opgetild nooit zonder toezicht.
- tijdens het tillen/verplaatsen moeten de wielen van het bed zijn vastgezet. Deze aanbeveling geldt met name bij het omdraaien van patiënten.
- gebruik bedrails tijdens het omdraaien; dit is vooral belangrijk wanneer slechts één zorgverlener de taak uitvoert.
- plan het tillen voordat het wordt uitgevoerd, zodat het zo veilig en soepel mogelijk verloopt.
- werk altijd ergonomisch.



Medisch hulpmiddel, productklasse I

Geregistreerd ontwerp

Productwijzigingen

De producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en informatie over productverbeteringen.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko is gecertificeerd conform de ISO 9001-kwaliteitscertificatie en de daaraan gelijkwaardige ISO 13485-kwaliteitscertificatie voor de medische hulpmiddelenindustrie.

Liko is ook gecertificeerd conform de milieustandaard ISO 14001.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Verzorging en onderhoud

Controleer de MultiStrap vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigingen:

- materiaal
- banden
- zomen
- bandlussen

Gebruik geen beschadigde tilaccessoires.

Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Wasinstructies: zie het productlabel van de MultiStrap.

Verwachte levensduur

Het product heeft een verwachte levensduur van 2-5 jaar of langer bij normaal gebruik. De levensduur is afhankelijk van het materiaal, de gebruiksfrequentie, de wasprocedure en het gedragen gewicht.

Periodieke inspectie

Het product moet minstens om de 6 maanden worden geïnspecteerd. Frequentere inspectie is mogelijk nodig als de producten vaker dan normaal worden gebruikt of gewassen. Zie het protocol van Liko voor de periodieke inspectie van het betreffende product. Voor protocollen kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.


Recyclinginstructies

Het gehele product moet worden gesorteerd als brandbaar afval.


Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan verwijdering. Klanten moeten zich houden aan alle federale, landelijke, regionale en/of lokale wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.

In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hill-Rom voor advies over protocollen over veilig afvoeren.

Definities

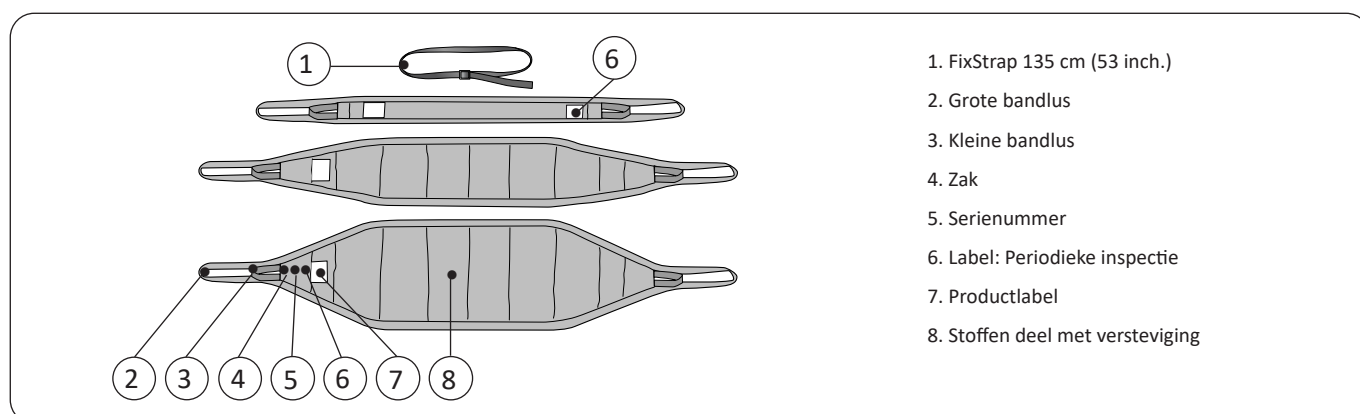

Gebruik

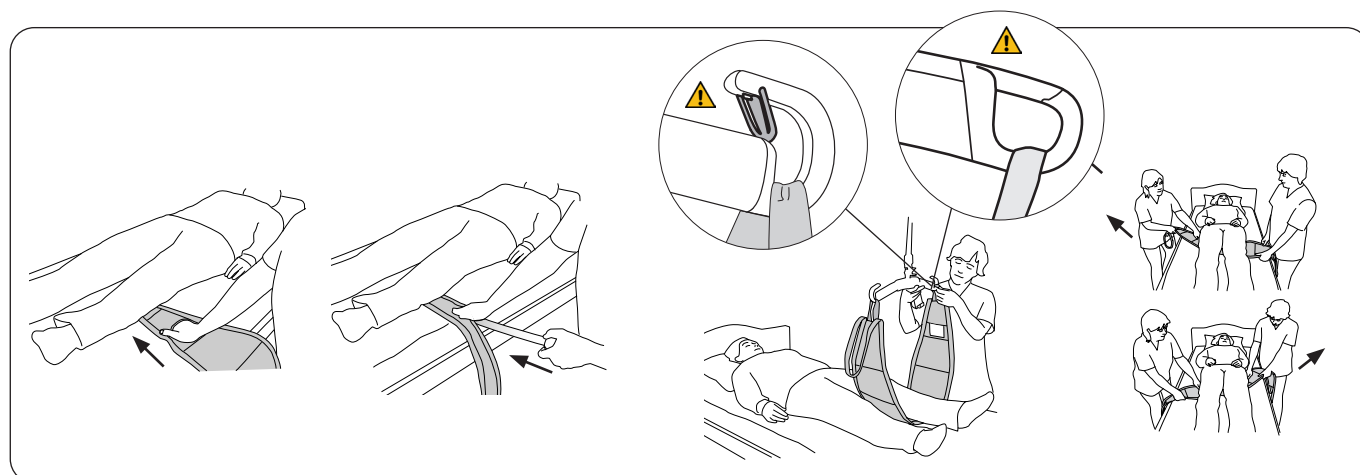

Breng de MultiStrap aan onder het lichaamsdeel dat moet worden getild/ondersteund. Vouw de bandlus onder de MultiStrap en duw deze onder het lichaam van de patiënt. Steek uw hand of gebruik de spatel in de MultiStrap-zak om het aanbrengen te vergemakkelijken (zie bovenstaande afbeeldingen).

Haal de bandlus er aan de andere kant uit en trek de MultiStrap naar voren zodat het lichaamsdeel in het midden van de band wordt geplaatst.

Bevestig de bandlussen aan het tiljuk. Gebruik de kleine bandlus als de tilhoogte onvoldoende is.


De MultiStrap kan ook daar worden geplaatst waar de meeste ruimte is, bijvoorbeeld onder de knieën, en vervolgens voorzichtig op zijn plaats onder de patiënt worden getrokken. Dit kan vereenvoudigd worden door de MultiStrap afwisselend van links naar rechts te trekken totdat deze op de gewenste plek zit, bijv. onder de billen.

OPMERKING: de MultiStrap kan ook worden gebruikt in combinatie met de HandySheet™, die wordt aanbevolen voor zware patiënten of wanneer u extra voorzichtig moet zijn met de patiënt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.


Tillen en ondersteunen

Plaats de MultiStrap onder het deel van het lichaam van de patiënt dat moet worden getild/ondersteund. Controleer voorafgaand aan het tillen of de bandlussen goed aan het tiljuk zijn bevestigd. Til tot de gewenste hoogte.


Voorbeeld

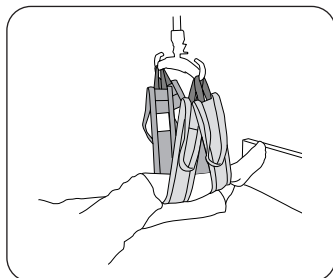


Afb. 1. Een been met twee MultiStraps tillen/ondersteunen

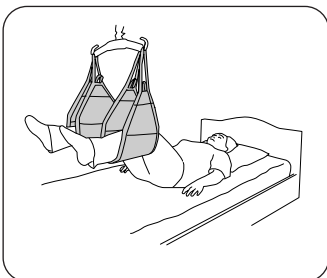

Afb. 2. Beide benen met twee MultiStraps tillen/ondersteunen

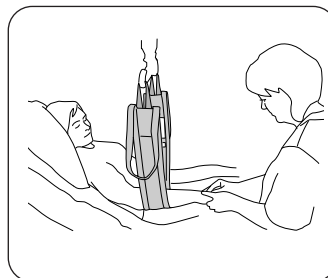

Afb. 3. Arm tillen/ondersteunen



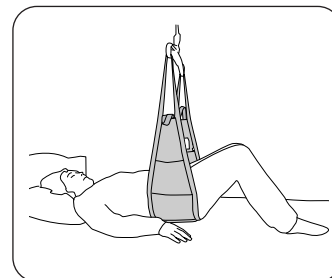


Afb. 4. Billen tillen/ondersteunen

Er wordt een tiljuk met tweepuntsophanging aanbevolen voor het tillen/ondersteunen conform bovenstaande voorbeelden. Er kunnen één MultiStrap (afb. 3) of twee MultiStraps (afb. 1) worden gebruikt.

Op de zij draaien

De patiënt op de zij draaien kan worden gedaan door één enkele zorgverlener, maar we raden aan dat twee zorgverleners elkaar helpen. Dit is een tijdsbesparende en efficiënte manier van werken. Gebruik de bedrails, met name als slechts één zorgverlener het draaien uitvoert.

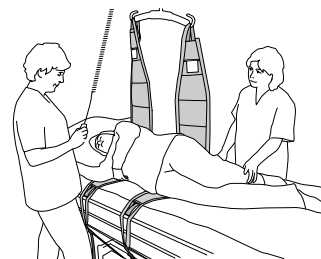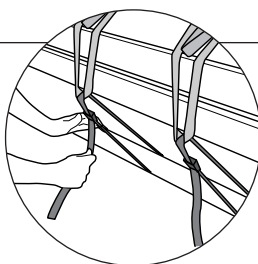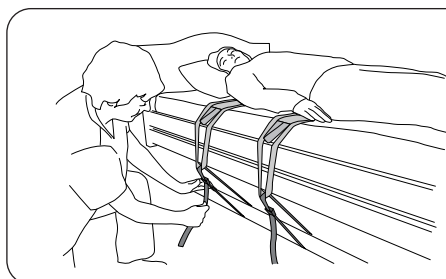


Gebruik twee MultiStraps; plaats de ene onder de schouders en de andere onder de heupen. Indien nodig kunnen de bandlussen op een geschikte plek aan het bed worden bevestigd met behulp van FixStraps (zie pos. 1, pag. 4). Dit houdt de MultiStraps op hun plek tijdens het draaien.

Bereid de handeling voor door de patiënt zo te plaatsen dat het draaien mogelijk is; één arm naar de zijkant en één been over het andere. Til de patiënt zo dat deze zijwaarts wordt gedraaid met behulp van de lift. Til de patiënt niet zo hoog dat er het gevaar bestaat dat de patiënt omrolt. Pas de houding van de patiënt zo aan dat deze comfortabel is.


⚠ Til niet te hoog!

Wanneer de patiënt op de zij moet worden gedraaid, raden we een tiljuk met een tweepuntsophanging aan.

Verwijderen

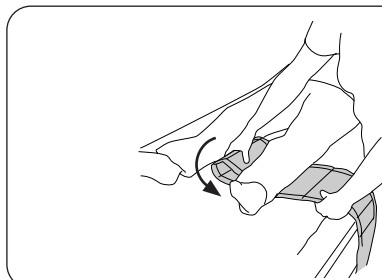

Afb. 5.

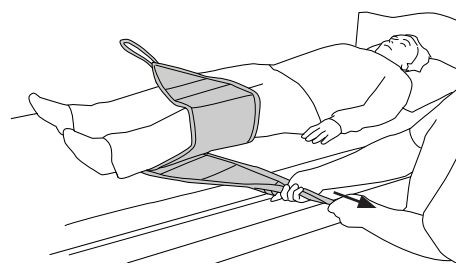

Afb. 6.

Vouw de bandlus onder de MultiStrap (afb. 5). Pak de bandlus vast en verwijder de MultiStrap voorzichtig (afb. 6).

De MultiStrap kan ook voorzichtig naar buiten worden getrokken wanneer er extra ruimte is, bijvoorbeeld onder de knieën.

Voor extra voorzichtig verwijderen gebruikt u een HandySheet™. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.

Overzicht MultiStrap™

Naam	Breedte	Productnr.	Max. belasting	Materiaal
MultiStrap standaard, incl. FixStrap*	10 cm	3695115	200 kg	100% polyester
MultiStrap breed, incl. FixStrap*	25 cm	3695116	200 kg	100% polyester
MultiStrap Ultra, incl. FixStrap*	40 cm	3695117	200 kg	100% polyester

Om de maximale belasting te behouden, zijn een lift/accessoires nodig voor dezelfde of een hogere belasting.

Accessoires: Spatula Mod 600 IC (geschikt voor MultiStrap standaard en breed) 3684002
*FixStrap 135 cm (53 inch.) 3696001

Aanbevolen combinaties

MultiStrap kan in combinatie met de volgende tiljucken worden gebruikt:
Tiljuk met tweepuntsophanging: Universal SlingBar 350/450, SlingGuard 450.

