

Инструкция за употреба

Octo Liftsheet е предназначен за употреба за повдигане и прехвърляне на пациенти в хоризонтална позиция. Той е предназначен за употреба само с приспособлението OctoStretch™, продуктове № 3156056.

ВАЖНО!

Повдигането и преместването на пациент винаги е свързано с определено ниво на риск. Преди употреба прочетете инструкцията за употреба както за приспособлението за повдигане на пациенти, така и за приспособлението Liko OctoStretch. Важно е да разберете напълно съдържанието на инструкцията за употреба. Оборудването трябва да се използва единствено от обучен персонал.

Бъдете внимателни и предпазливи по време на употреба. В качеството си на обгрижващо лице Вие винаги носите отговорност за безопасността на пациента. Ако имате неясноти, свържете се с производителя или доставчика.

Описание на символите

Тези символи могат да бъдат намерени в този документ и/или върху продукта.

Символ	Описание
	Предупреждение: тази ситуация изисква допълнителни грижи и внимание.
	CE маркировка
	Законен производител
	Дата на производство
	Преди употреба прочетете инструкцията за употреба.
	Идентификатор на продукта
	Сериен номер
	Медицинско изделие
	Да не се използва химическо почистване
	Да не се глади
	Да не се суши в сушилна машина
	Пране Символът винаги е в комбинация с препоръчителната температура в °C и °F.
	Не съдържа латекс
	Да не се почиства с белина
	Периодична инспекция
	Посока нагоре и символ от външната страна на продукта.
	Символ от външната страна на продукта.
	GS1 матричен баркод с данни, който може да съдържа следната информация. (01) Глобален номер на търговската единица (11) Дата на производство (21) Сериен номер

 Медицинско изделие от клас I продукт

Инструкции по безопасност

Промени в продуктите

Продуктите на Liko са в процес на непрекъснато развитие и по тази причина си запазваме правото да извършваме промени в продуктите без предизвестие. Свържете се с Вашия представител на Hill-Rom за съвет и информацията относно надстройки на продуктите.

Design and Quality by Liko in Sweden

Системата за управление както за производството, така и за развитието на продукта, е сертифицирана в съответствие с ISO9001 и неговия еквивалент за индустрията на медицинските изделия – ISO13485. Системата за управление е сертифицирана и в съответствие със стандарта за околна среда ISO14001.

Съобщение за потребители и/или пациенти в ЕС

Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, трябва да се докладва на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която е установен потребителят и/или пациентът.

Грижа и поддръжка

Проверявайте продукта преди всяка употреба. Проверявайте следните точки по отношение на износване и повреди:

- Тъкан
- Шевове
- Ремъци

⚠ Не използвайте повредени приспособления за повдигане.

Ако имате неясноти, моля, свържете се с производителя или доставчика.

Инструкции за пране

Моля, вижте етикета на продукта на приспособлението за повдигане и прикрепеното приложение „Грижа и поддръжка за слингове на Liko“.

Периодична инспекция

Продуктът трябва да бъде инспектиран поне веднъж на всеки 6 месеца. Може да се изискват по-чести проверки, ако продуктът се използва или пере по-често от нормалното. За протоколи се свържете с представителя на Hill-Rom.

Предвиждан полезен живот

Продуктът има предвиждан полезен живот от 5 години. Предвижданият полезен живот се базира на 10 използвания дневно и изпиране един път седмично – в съответствие с инструкциите за пране. Hill-Rom препоръчва продуктът да се използва само в рамките на неговия предвиждан полезен живот.

Инструкции за рециклиране


Целият LiftSheet трябва да се сортира като горим отпадък.

Hillrom оценява и предоставя насоки на своите потребители относно безопасното боравене и изхвърляне на изделията, за да съдейства при предотвратяване на наранявания, включително, но не само: порязвания, убождания на кожата, ожулвания, както и всяко необходимо почистване и дезинфекция на медицинското изделие след употреба и преди изхвърлянето му. Клиентите трябва да се придържат към всички федерални, щатски, регионални и/или местни закони и разпоредби, които се отнасят до безопасното изхвърляне на медицински изделия и аксесоари.

При съмнение потребителят на изделието трябва да се свърже първо с отдела по техническо обслужване на Hillrom за указанията относно протоколите за безопасно изхвърляне.

Общ преглед на Liko™ Octo LiftSheet™

Име	Размер	Продуктов №	Материал	Дължина (a X b)	Макс. натоварване
Octo LiftSheet	M	3683105	Полиестер	160 x 50 cm	200 kg
Octo LiftSheet	L	3683106	Полиестер	170 x 90 cm	200 kg

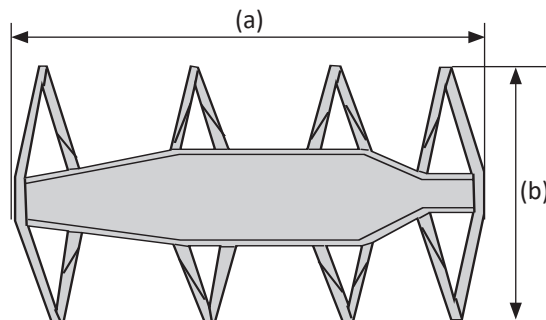

www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Швеция
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom