

## Instrukcijų vadovas

















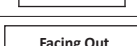

„Octo LiftSheet“ yra kėlimo paklodė, skirta horizontalioje padėtyje gulintiems pacientams pakelti ir perkelti. Ji skirta naudoti tik su „OctoStretch™“, gaminio nr. 3156056.

### SVARBU!

Keliant ir perkeliant pacientą, visada yra tam tikra rizika. Prieš naudodami perskaitykite pacientų keltuvo ir „Liko OctoStretch“ priedo instrukcijų vadovą. Prieš naudojant svarbu visiškai suprasti instrukcijų vadovo turinį. Įrangą turėtų naudoti tik parengti darbuotojai. Naudodamiesi ja būkite atsargūs ir dėmesingi. Kaip slaugytojai, jūs visada esate atsakingi už paciento saugą. Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

## Simbolių aprašymas

Šiuos simbolius rasite dokumente ir (arba) ant paties gaminio.

Simbolis	Aprašymas
	Ispėjimas. Šiuo atveju reikalingas ypatingas atsargumas ir dėmesys.
	CE ženklas
	Oficialus gamintojas
	Pagaminimo data
	Prieš naudodami perskaitykite instrukcijų vadovą.
	Gaminio identifikatorius
	Serijos numeris
	Medicinos prietaisas
	Nevalyti chemiškai
	Nelyginti
	Nedžiovinti būgninėje džiovyklėje
	Skalbimas Simbolis visada pateikiamas kartu su rekomenduojama temperatūra °C ir °F
	Be latekso
	Nebalinti
	Periodinė patikra
	Kryptis aukštyn; simbolis gaminio išorėje.
	Simbolis gaminio išorėje.
	GS1 duomenų matricos brūkšniame kode gali būti pateikiama toliau nurodyta informacija. (01) Visuotinis prekės numeris (11) Gamybos data (21) Serijos numeris

 I klasės medicinos prietaisas

# Saugumo nurodymai

## Gaminio pakeitimai

„Liko“ gaminiai nuolat tobulinami, todėl pasilikame teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo. Dėl patarimų ir informacijos apie atnaujintus gaminius kreipkitės į savo „Hill-Rom“ atstovą.

## Design and Quality by Liko in Sweden

Medicinos prietaisų projektavimo ir gamybos kokybės vadybos sistema yra sertifikuota pagal ISO9001 ir jos atitikmenį medicinos prietaisų pramonei (ISO13485). Vadybos sistema taip pat sertifikuota pagal aplinkos apsaugos standartą ISO14001.

## Pastaba ES naudotojams ir (arba) pacientams

Įvykus su prietaisu susijusiam rimtam incidentui, apie tai turi būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

## Techninė ir kita priežiūra

Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite gaminį. Patikrinkite šiuos dalykus, ar nėra nusidėvėjimo ir pažeidimų:

- audinį,
- siūles,
- kilpas.

### ⚠ Nenaudokite pažeistų kėlimo priedų.

Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

## Skalbimo nurodymai

Žr. kėlimo priedo etiketėje ir priede „Liko“ diržų techninė ir kita priežiūra“ esančią informaciją.

## Periodinė patikra

Gaminį reikia tikrinti bent kartą per 6 mėnesius. Gali reikėti patikrą atlikti dažniau, jei gaminys naudojamas ar skalbiamas dažniau nei įprastai. Dėl protokolų kreipkitės į „Hill-Rom“ atstovą.

## Numatyta eksploataavimo trukmė

Numatytas gaminio naudojimo laikas yra 5 metai. Tikėtina eksploataavimo trukmė apskaičiuota naudojant 10 kartų per dieną ir plaunant kartą per savaitę vadovaujantis skalbimo instrukcijomis. „Hill-Rom“ rekomenduoja gaminį naudoti tik jo tikėtinos eksploataavimo trukmės laikotarpiu.

## Perdirbimo instrukcijos

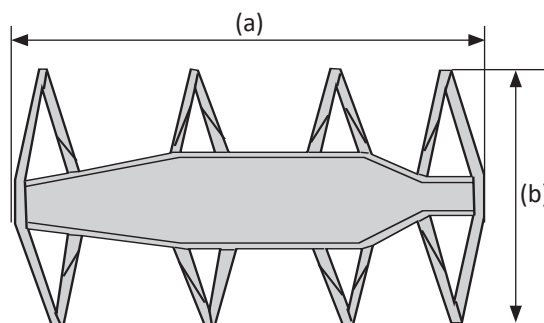
Visa „LiftSheet“ paklodė turėtų būti rūšiuojama kaip degios atliekos.

„Hill-Rom“ įvertina ir pateikia nurodymų naudotojams, kaip saugiai tvarkyti ir likviduoti bendrovės gaminamus prietaisus, kad būtų išvengta sužalojimų, įskaitant įpjovimus, odos įdūrimus ir nubrozdinimus, bet jais neapsiribojant, taip pat nurodo, kaip reikia valyti ir dezinfekuoti medicinos prietaisą jį panaudojus ir prieš likviduojant. Klientai turi paisyti visų federalinių, šalies, regioninių ir (arba) vietinių įstatymų ir reglamentų dėl saugaus medicinos prietaisų ir jų priedų likvidavimo.

Jei kiltų abejonių, prietaiso naudotojas turi iš pradžių kreiptis į „Hill-Rom“ techninės pagalbos skyrių dėl saugaus likvidavimo protokolų nurodymų.

## „Liko™ Octo LiftSheet™“ apžvalga

Pavadinimas	Dydis	Gaminio nr.	Medžiaga	Ilgis (a X b)	Didž. apkrova
„Octo LiftSheet“	M	3683105	Poliesteris	160 x 50 cm (63 x 20 in)	200 kg (440 lbs)
„Octo LiftSheet“	L	3683106	Poliesteris	170 x 90 cm (67 x 35 in)	200 kg (440 lbs)



www.hillrom.com

„Liko AB“  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Švedija  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc..

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

Hill-Rom