

Instrukcja obsługi



















Nosidło Octo LiftSheet jest przeznaczone do podnoszenia i przenoszenia pacjentów w pozycji leżącej. Wyrób może być używany wyłącznie z uchwytem nośnym OctoStretch™, nr prod. 3156056.


WAŻNE!

Podnoszenie i przenoszenie pacjentów zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Przed przystąpieniem do użytkowania nosidła oraz uchwyty nośnego Liko OctoStretch należy zapoznać się z ich instrukcjami obsługi. Ważne jest dokładne zrozumienie informacji zawartych w instrukcji obsługi. Wyrób może być używany wyłącznie przez przeszkolony personel. Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Za bezpieczeństwo pacjenta zawsze odpowiada opiekun. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą.

Opis symboli

Przedstawione symbole znajdują się w niniejszym dokumencie i/lub na produkcie.

Symbol	Opis
	Ostrzeżenie; sytuacja ta wymaga szczególnej uwagi i ostrożności
	Oznaczenie CE
	Producent odpowiedzialny
	Data produkcji
	Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi.
	Identyfikator wyrobu
	Numer seryjny
	Wyrób medyczny
	Nie czyścić chemicznie
	Nie prasować
	Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Mycie Symbol jest zawsze połączony z zalecaną temperaturą w °C i °F
	Nie zawiera lateksu
	Nie wybielać
	Przeglądy okresowe
	Kierunek do góry i symbol na zewnętrznej części produktu
	Symbol na zewnętrznej części produktu
	Kod kreskowy matrycy danych GS1 może zawierać poniższe informacje: (01) Globalny numer jednostki handlowej (11) Data produkcji (21) Numer seryjny

 Wyrób medyczny klasy I

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zmiany w produkcji

Produkty Liko stale podlegają procesowi rozwoju i z tego względu firma Liko zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje oraz wskazówki dotyczące modernizacji produktów można uzyskać u przedstawiciela firmy Hill-Rom.

Design and Quality by Liko in Sweden

System zarządzania produkcją i projektowaniem produktu posiada certyfikat zgodności z normą ISO 9001 i jej odpowiednikiem dla wyrobów medycznych ISO 13485. System zarządzania posiada również certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Informacja dla użytkowników i/lub pacjentów w UE

Wszelkie poważne wypadki, które wystąpiły w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik i/lub pacjent.

Serwis i konserwacja

Produkt należy sprawdzić przed każdym użyciem. Wszystkie wymienione poniżej elementy należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub zużycia:

- Tkanina
- Szwy
- Pętle

⚠ Nie używać uszkodzonych akcesoriów do podnoszenia.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą.

Instrukcje dotyczące czyszczenia

Dostępne na etykiecie akcesorium do podnoszenia oraz w załączniku „Serwis i konserwacja nosideł Liko”.

Przeglądy okresowe

Produkt musi być sprawdzany co najmniej raz na 6 miesięcy. Jeśli częstotliwość użytkowania lub czyszczenia produktu jest większa od standardowej, mogą być wymagane częstsze przeglądy. W sprawie protokołów należy kontaktować się z przedstawicielem firmy Hill-Rom.

Okres eksploatacji produktu

Przewidywany okres eksploatacji produktu wynosi 5 lat. Okres eksploatacji produktu określono, przyjmując 10 użyci dziennie i jedno czyszczenie tygodniowo zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia. Firma Hill-Rom zaleca stosowanie produktu wyłącznie w trakcie jego okresu eksploatacji.

Wskazówki dotyczące utylizacji


Całe nosidło LiftSheet jest odpadem palnym.

Firma Hill-Rom dokonuje oceny i udziela użytkownikom wskazówek dotyczących bezpiecznej obsługi i usuwania swoich wyrobów w celu zapobiegania obrażeniom, takim jak skaleczenia, przebicie skóry i otarcia, oraz wszelkich wymaganych czynności związanych z czyszczeniem i dezynfekcją wyrobu medycznego po użyciu i przed jego usunięciem. Klienci powinni przestrzegać wszystkich przepisów krajowych, wojewódzkich, regionalnych i/lub lokalnych w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów i akcesoriów medycznych.

W razie wątpliwości użytkownik powinien najpierw skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Hillrom, który udzieli wskazówek dotyczących bezpiecznej utylizacji.

Nosidła Liko™ Octo LiftSheet™ – informacje ogólne

Nazwa	Rozmiar	Nr prod.	Materiał	Wymiary (a × b)	Maks. obciążenie
Octo LiftSheet	M	3683105	Poliester	160 × 50 cm	200 kg
Octo LiftSheet	L	3683106	Poliester	170 × 90 cm	200 kg

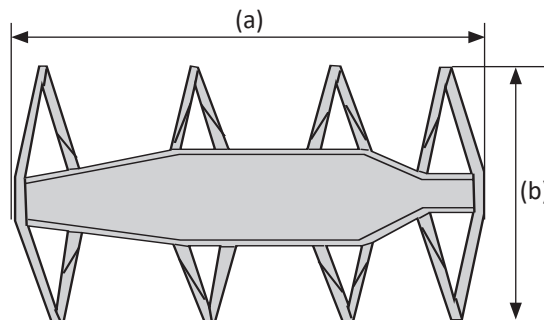

www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Szwecja
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom