

## Bruksanvisning
















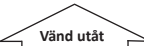
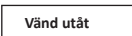

Lyftduk Bläckfisken är avsedd för lyft och överflyttning av brukare i horisontellt läge. Den är endast avsedd för användning med tillbehöret Planlyft Bläckfisken, art.nr 3156056.

### **VIKTIGT!**

Lyft och överflyttning av en person medför alltid en viss risk. Läs bruksanvisningen för både patientlyften och Liko Planlyft Bläckfisken före användning. Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen. Utrustningen får endast användas av utbildad personal. Iakttag försiktighet och omsorg vid användandet. Som medhjälpare är du alltid ansvarig för brukarens säkerhet. Kontakta tillverkaren eller leverantören om något är oklart.

## Symbolbeskrivning

Dessa symboler finns i det här dokumentet och/eller på produkten.

Symbol	Beskrivning
	Varning! Den här situationen kräver extra försiktighet och uppmärksamhet.
	CE-märkning
	Juridisk tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Läs bruksanvisningen före användning.
	Produktidentifikation
	Serienummer
	Medicinteknisk produkt
	Ej kemtvätt
	Ej strykning
	Ej torktumling
	Tvätt Symbolen förekommer alltid i kombination med rekommenderad temperatur i °C och °F.
	Latexfri
	Ej blekning
	Periodisk inspektion
	Riktning uppåt och symbol på produktens utsida.
	Symbol på produktens utsida.
	GS1-datamatrixstreckkod som kan innehålla följande information. (01) GTIN-artikelnummer (11) Produktionsdatum (21) Serienummer

 Medicinteknisk produkt klass I

# Säkerhetsföreskrifter

## Produktändringar

Likos produkter utvecklas ständigt varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i produkter utan föregående notis. Kontakta en representant för Hill-Rom för att få information, råd och eventuella uppdateringar.

## Design and Quality by Liko in Sweden

Hanteringssystemet för både tillverkning och utveckling av produkten är certifierat i enlighet med ISO9001 och dess motsvarighet för den medicintekniska branschen, ISO13485. Hanteringssystemet är även certifierat i enlighet med miljöstandarden ISO14001.

## Meddelande till användare och brukare i EU

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i relation till produkten ska rapporteras till tillverkaren och berörd myndighet i medlemsstaten där användaren och/eller brukaren befinner sig.

## Tillsyn och skötsel

Kontrollera produkten före varje användning. Kontrollera att följande inte uppvisar tecken på slitage och skador:

- tyg
- sömmar
- upphängningsöglor.

**⚠ Använd inte trasiga lyfttillbehör.**

Kontakta tillverkaren eller leverantören om något är oklart.

## Tvättinstruktioner

Se produktetiketten på lyfttillbehöret samt den bifogade bilagan "Skötselråd för Likos lyftselar".

## Periodisk inspektion

Produkten måste inspekteras minst en gång var sjätte månad. Mer frekventa inspektioner kan krävas om produkten används eller tvättas oftare än normalt. Kontakta en representant för Hill-Rom för information om protokoll.

## Förväntad livslängd

Produkten har en förväntad livslängd på 5 år. Den förväntade livslängden baseras på 10 användningar per dag och tvättning en gång i veckan, enligt tvättanvisningarna. Hill-Rom rekommenderar att produkten endast används under sin förväntade livslängd.

## Återvinningsinstruktioner


Hela lyftduken ska sorteras som brännbart avfall.

Hill-Rom gör utvärderingar och vägleder användarna om säker hantering och kassering av produkter för att förebygga skador, inklusive, men inte begränsat till: skärsår, sticksår, skrubbsår och eventuell rengöring och desinficering av den medicintekniska produkten efter användning och före kassering. Kunderna bör följa alla federala, statliga, regionala och/eller lokala lagar och förordningar som gäller säker kassering av medicinsk utrustning och tillbehör.

Vid tveksamhet ska användaren av enheten i första hand kontakta Hill-Roms tekniska support för att få råd om säker kassering.

## Översikt över Liko™ Lyftduk Bläckfisken

Benämning	Storlek	Art.nr	Material	Längd (a x b)	Maxlast
Lyftduk Bläckfisken	M	3683105	Polyester	160 x 50 cm	200 kg
Lyftduk Bläckfisken	L	3683106	Polyester	170 x 90 cm	200 kg

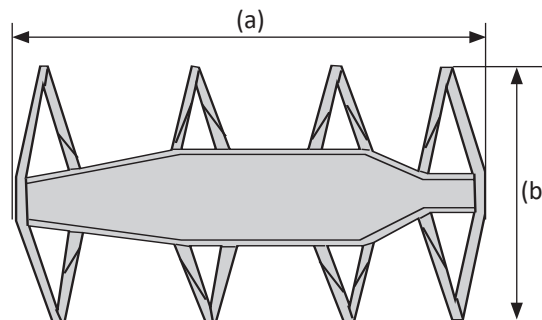

[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sverige  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**