

Talimat Kılavuzu



















Octo Liftsheet, hastaları yatay pozisyonda kaldırmak ve taşımak için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca OctoStretch™ aksesuarı, Ürün No. 3156056 ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


ÖNEMLİ!

Hastanın kaldırılması ve taşınması her zaman belirli bir seviyede risk teşkil eder. Kullanım öncesinde hem hasta liftine hem de Liko OctoStretch aksesuarına yönelik talimat kılavuzunu okuyun. Talimat kılavuzu içeriğinin tamamen anlaşılması önemlidir. Ekipman yalnızca eğitilmiş personel tarafından kullanılmalıdır. Kullanım sırasında özenli ve dikkatli davranın. Bakım veren kişi olarak hastanın güvenliğinden her zaman siz sorumlusunuz. Emin olmadığınız bir konu varsa üretici veya tedarikçi ile iletişime geçin.

Sembol Açıklaması

Bu semboller, bu belgede ve/veya ürün üzerinde bulunabilir.

Sembol	Açıklama
	Uyarı: Bu durum ekstra özen ve dikkat gerektirir.
	CE işareti
	Yasal üretici
	Üretim tarihi
	Kullanmadan önce talimat kılavuzunu okuyun.
	Ürün Tanımlayıcısı
	Seri Numarası
	Tıbbi cihaz
	Kuru temizleme yapmayın
	Ütü yapmayın
	Tamburlu kurutma yapmayın
	Yıkama Sembol, her zaman °C ve °F cinsinden önerilen sıcaklıkla birlikte kullanılır.
	Lateks içermez
	Çamaşır suyu kullanmayın
	Düzenli denetleme
	Yukarı bakacak şekilde ve sembol ürünün dışında.
	Sembol ürünün dışında.
	Aşağıdaki bilgileri içerebilen GS1 Veri Matrisi Barkodu. (01) Küresel Ticari Ürün Numarası (11) Üretim Tarihi (21) Seri Numarası

 Tıbbi Cihaz Sınıf I Ürünü

Güvenlik Talimatları

Ürün Değişiklikleri

Liko ürünleri sürekli geliştirmeye tabidir; bu nedenle önceden haber vermeksizin üründe değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. Ürün yükseltmeleri hakkında öneri ve bilgi için Hill-Rom temsilcinizle iletişime geçin.

Design and Quality by Liko in Sweden

Ürünün hem üretim hem de geliştirme aşamasının yönetim sistemi, ISO9001'e ve onun tıbbi cihaz endüstrisindeki karşılığı olan ISO13485'e göre sertifikalıdır. Yönetim sistemi ayrıca çevre standardı ISO14001 uyarınca sertifikalıdır.

AB'deki Kullanıcılara ve/veya Hastalara Bildirim

Cihazla ilgili meydana gelen tüm ciddi olaylar, üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Ülkenin yetkili makamına bildirilmelidir.

Bakım ve Onarım

Her kullanım öncesinde ürünü kontrol edin. Aşağıdaki parçaları aşınma ve hasara karşı kontrol edin:

- Kumaş
- Dikiş yerleri
- Halkalar

⚠️ Hasarlı kaldırma aksesuarlarını kullanmayın.

Emin olmadığınız konular varsa lütfen üretici veya tedarikçi ile iletişime geçin.

Yıkama talimatları

Lütfen kaldırma aksesuarının ürün etiketine ve ekteki "Liko Askılarının Bakım ve Onarımı" ekine bakın.

Düzenli Denetleme

Ürün, en az 6 ayda bir denetlenmelidir. Ürün normalden fazla kullanılıyorsa veya yıkaniyorsa daha sık denetleme gerekebilir. Protokoller için lütfen Hill-Rom temsilcinizle iletişime geçin.

Beklenen Kullanım Ömrü

Ürünün beklenen kullanım ömrü 5 yıldır. Beklenen kullanım ömrü, yıkama talimatlarına göre günde 10 kullanım ve haftada bir yıkama esas alınarak hesaplanmaktadır. Hill-Rom, ürünün yalnızca beklenen kullanım ömrü boyunca kullanılmasını önerir.

Geri Dönüşüm Talimatları


LiftSheet ürününün tamamı, Yanıcı atık olarak sınıflandırılmalıdır.

Kesik, cilt ponksiyonu ve sıyrık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaralanmaların önlenmesine yardımcı olmak için Hillrom; cihazların güvenli şekilde kullanılmasını ve atılmasını, kullanım sonrasında ve atılmadan önce tıbbi cihaza yönelik gerekli tüm temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini değerlendirir ve bu konularda kullanıcılarına rehberlik sağlar. Müşteriler, tıbbi cihazların ve aksesuarların güvenli bir şekilde atılmasına ilişkin tüm federal, eyalet düzeyindeki, bölgesel ve/veya yerel yasalara ve düzenlemelere uymalıdır.

Emin olunmadığı durumlarda cihaz kullanıcısı, güvenli atma protokolleriyle ilgili rehberlik için öncelikle Hillrom Teknik Destek birimi ile iletişime geçmelidir.

Genel Bakış Liko™ Octo LiftSheet™

İsim	Boyut	Ürün No.	Malzeme	Uzunluk (a X b)	Azami Yük
Octo LiftSheet	M	3683105	Polyester	160x50 cm	200 kg
Octo LiftSheet	L	3683106	Polyester	170x90 cm	200 kg

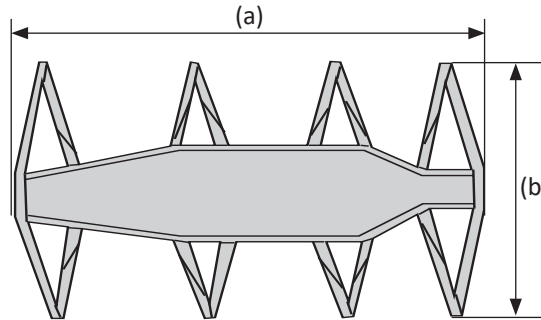

www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom