

Návod k použití















Solo Octo LiftSheet je jednorázový zvedací pás pro zvedání a přemísťování pacientů ve vodorovné poloze. Je určen výhradně k použití společně s příslušenstvím Liko OctoStretch, č. výrobku 3156056.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Zvedání a přenášení pacientů vždy znamená určitou míru rizika. Před použitím si přečtěte návod k použití zvedáku a Liko OctoStretch. Je důležité úplně porozumět obsahu návodu k použití. Toto zařízení smí obsluhovat pouze vyškolený personál. Při používání dbejte opatrnosti. Jako ošetřující personál vždy zodpovídáte za bezpečnost pacienta. Pokud je vám něco nejasné, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Popis symbolů

V tomto dokumentu nebo na výrobku se můžete setkat s těmito symboly.

Symbol	Popis
	Výstraha: Tato situace vyžaduje zvláštní péči a pozornost.
	Před použitím si prostudujte návod k použití.
	Značka CE
	Zákonný výrobce
	Datum výroby
	Identifikátor produktu
	Sériové číslo
	Zdravotnický prostředek
	Neperte
	Neobsahuje latex
	Nepoužívat Produkt (Pouze produkty Solo a viditelné po vyprání, je-li použití zakázáno).
	Směr vzhůru a symbol na vnější části produktu.
	Symbol na vnější části produktu.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) RRMDD (21) 012345678910</small>	Čárový kód datové matice GS1, který může obsahovat následující informace. (01) Číslo globální obchodní položky (11) Datum výroby (21) Sériové číslo

Bezpečnostní pokyny

 Zdravotnický prostředek třídy I

Změny výrobků

Výrobky Liko prochází neustálým vývojem, a proto si vyhrazujeme právo na změnu výrobku bez předchozího upozornění. Informace o aktualizaci výrobní řady Liko™ poskytne autorizovaný zástupce společnosti Hill-Rom.

Design and Quality by Liko in Sweden

Společnost Liko je certifikovaná podle normy řízení kvality ISO 9001 a jejího ekvivalentu v oboru zdravotnických prostředků, ISO 13485. Společnost Liko také splňuje požadavky normy pro ochranu životního prostředí ISO14001.

Upozornění pro uživatele a/nebo pacienty v EU

Všechny závažné příhody, ke kterým dojde v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, musí být hlášeny výrobci a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.

Péče a kontrola

Před každým použitím produkt zkontrolujte. Zkontrolujte následující prvky, zda nejsou opotřebené a poškozené:

- Tkanina
- Popruhy
- Švy
- Smyčky

⚠ Nepoužívejte poškozené zvedací příslušenství.

Pokud něčemu nerozumíte, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.



NEPERTE. Na varovném štítku umístěném na zadní straně zvedacího pásu je zobrazen symbol NEPERTE. Jestliže se zvedací pás vypere, tento štítek se rozpadne a nezobrazuje symbol NEPOUŽÍVAT. Zvedací pás musí být potom zlikvidován.

Předpokládaná životnost

⚠ DŮLEŽITÉ!

Solo Octo Liftsheet je jednorázová položka, která je určena pouze pro jednotlivé použití.

Když je určena správná velikost pro daného pacienta, napište jméno pacienta na štítek produktu na zadní straně zvedacího pásu.

Solo Octo Liftsheet již nesmí být dále používán:

- je-li znečištěn nebo je-li podezření, že byl kontaminován
- je-li poškozen
- pokud jej pacient již nepotřebuje.


Pokyny pro recyklaci

Celý produkt by měl být tříděn jako spalitelný odpad.

Společnost Hill-Rom poskytuje svým uživatelům vyhodnocení a pokyny k bezpečné manipulaci a likvidaci jejich zařízení a pomáhá tak s prevencí poranění, mimo jiné pořezání, propíchnutí kůže, odřenin. Poskytuje také pokyny k požadovanému čištění a dezinfekci zdravotnického prostředku po použití a před jeho likvidací. Zákazníci by se měli řídit všemi místními a národními zákony a směrnicemi, které se týkají bezpečné likvidace zdravotnických prostředků a příslušenství.

V případě pochybnosti má uživatel nejprve kontaktovat technickou podporu společnosti Hill-Rom a vyžádat si protokoly bezpečné likvidace.

Přehled Solo Octo LiftSheet™

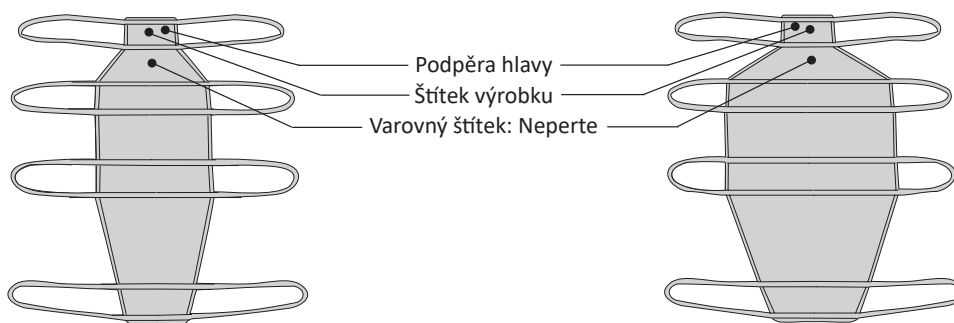

3683905 - Solo Octo Liftsheet, střední
Velikost pásu: 500 x 1600 mm (ŠxD)

3683906 - Solo Octo Liftsheet, velký
Velikost pásu: 900 x 1700 mm (ŠxD)

Maximální zatížení: 200 kg



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švédsko
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom