

Brugsanvisning












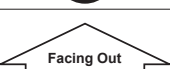


Solo Octo LiftSheet er et engangs-løftelagen til løft og flytning af brugere i vandret stilling. Det er kun beregnet til brug sammen med tilbehøret Liko OctoStretch, varenr. 3156056.

VIGTIGT!

Løft og forflytning af en person medfører altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til både liften og Liko OctoStretch før brug. Det er vigtigt at have læst og forstået indholdet i brugsanvisningen. Udstyret bør kun anvendes af trænet personale. Udvis forsigtighed og omsorg ved brug. Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed. Hvis noget er uklart, skal du kontakte producenten eller leverandøren.

Symbolbeskrivelse

Disse symboler findes i dette dokument og/eller på produktet.

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Denne situation kræver ekstra forsigtighed og opmærksomhed.
	Læs brugsanvisningen før brug
	CE-mærke
	Juridisk producent
	Produktionsdato
	Produktidentifikator
	Serienummer
	Medicinsk udstyr
	Tåler ikke vask
	Latexfri
	Anvend ikke produktet (Kun Solo-produkter og synlig efter vask, når anvendelse er forbudt).
	Retning opad og symbol på ydersiden af produktet
	Symbol på ydersiden af produktet.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) AAMMDD (21) 012345678910</small>	GS1 Datamatrixstregkode, der kan indeholde følgende oplysninger. (01) Globalt handelsvarenummer (11) Produktionsdato (21) Serienummer

Sikkerhedsanvisninger

 Medicinsk Klasse I-produkt

Produktændringer

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til at foretage produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt din repræsentant fra Hill-Rom for rådgivning og information om produktopgraderinger.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko er kvalitetscertificeret iht. ISO 9001, og virksomhedens produktion overholder EU-direktivet ISO 13485 om medicinsk udstyr. Liko er også miljøgodkendt iht. ISO 14001.

Meddelelse til brugere og/eller patienter i EU

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er registreret.


Vedligeholdelse og eftersyn

Efterse produktet før hver brug. Kontrollér følgende punkter for slid og beskadigelse:

- Stof
- Bånd
- Sømme
- Stropløkker

⚠ Anvend ikke beskadiget løftetilbehør.

Hvis noget er uklart, bedes du kontakte fabrikanten eller leverandøren.

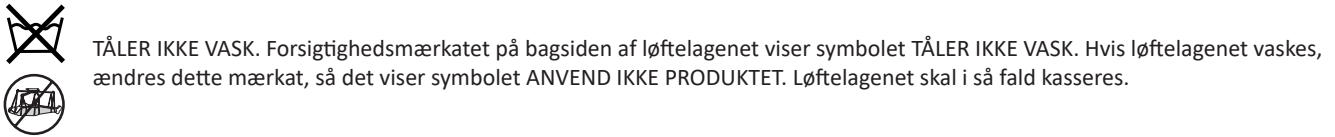

Forventet levetid

⚠ VIGTIGT!

Solo Octo Liftsheet er en forbrugsartikel, der kun er beregnet til brug med en enkelt bruger.

Når den korrekte størrelse er blevet bestemt for en given bruger, skal brugerens navn skrives på produktmærket på bagsiden af løftelagenet.

Solo Octo Liftsheet bør ikke længere benyttes:

- hvis det er snavset eller mistænkes at være kontamineret
- hvis det er beskadiget
- når brugeren ikke længere behøver det.


Anvisninger for genanvendelse

Hele produktet skal sorteres som brændbart affald.

Hill-Rom evaluerer og giver vejledning til sine brugere om sikker håndtering og bortskaffelse af sit udstyr for at hjælpe med at forebygge skader, herunder bl.a. snitsår, punkteringer af hud og hudafskrabninger, og om eventuel nødvendig rengøring og desinfektion af det medicinske udstyr efter brug og før bortskaffelse. Kunderne skal overholde alle føderale, statslige, regionale og/eller lokale love og bestemmelser, som vedrører sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr og tilbehør.

I tvivlsspørgsmål skal brugeren af enheden først kontakte Hill-Roms tekniske support for at få vejledning angående protokoller for sikker bortskaffelse.

Øversigt over Solo Octo LiftSheet™

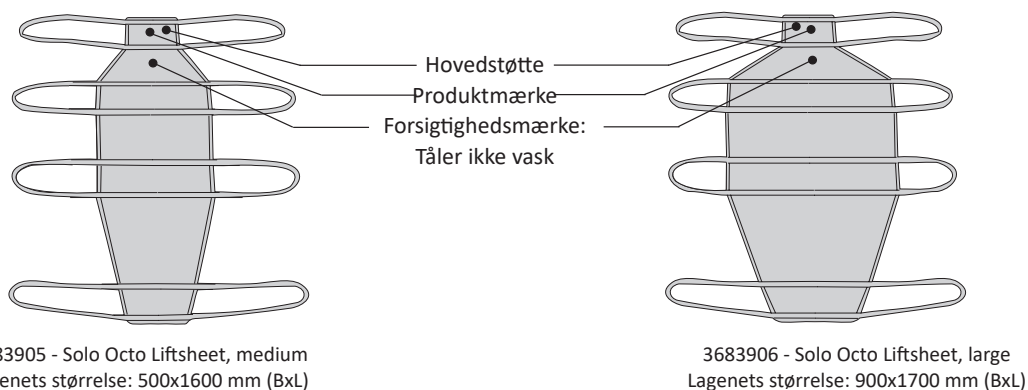

Maksimal belastning: 200 kg



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sverige
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom