

Εγχειρίδιο χρήσης












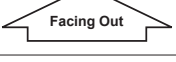
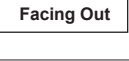

Το Solo Octo LiftSheet είναι ένα σεντόνι ανύψωσης μίας χρήσης για την ανύψωση και μεταφορά ασθενών σε οριζόντια θέση. Προορίζεται μόνο για χρήση με το εξάρτημα Liko OctoStretch, αρ. προϊόντος 3156056.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η ανύψωση και μεταφορά ενός ασθενούς ενέχει πάντα κάποιον βαθμό κινδύνου. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης για τον γερανό και το Liko OctoStretch για την ανύψωση ασθενών πριν από τη χρήση. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως τα περιεχόμενα του εγχειριδίου χρήσης. Ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση. Ως φροντιστές, είστε πάντα υπεύθυνοι για την ασφάλεια του ασθενούς. Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.

Περιγραφή συμβόλων

Τα σύμβολα αυτά εμφανίζονται σε αυτό το έγγραφο ή/και στο προϊόν.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση: σε αυτήν την κατάσταση απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση
	Σήμανση CE
	Νόμιμος κατασκευαστής
	Ημερομηνία κατασκευής
	Αναγνωριστικό προϊόντος
	Σειριακός αριθμός
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Μην πλένετε
	Χωρίς λατέξ
	Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν (Μόνο προϊόντα Solo και παραμένει ορατό μετά το πλύσιμο, όταν η χρήση απαγορεύεται).
	Κατεύθυνση προς τα επάνω και σύμβολο στο εξωτερικό του προϊόντος
	Σύμβολο στο εξωτερικό του προϊόντος.
 (01) 0100887761997127 (11) YYMMDD (21) 012345678910	Γραμμωτός κώδικας μήτρας δεδομένων GS1 που μπορεί να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες. (01) Διεθνής κωδικός μονάδων εμπορίας (11) Ημερομηνία παραγωγής (21) Σειριακός αριθμός

Οδηγίες ασφάλειας

 Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I

Αλλαγές προϊόντων

Τα προϊόντα της Liko αναπτύσσονται συνεχώς και για τον λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών σε αυτά χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom της περιοχής σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τις αναβαθμίσεις των προϊόντων.

Design and Quality by Liko in Sweden

7EL160182 Αναθ. 3
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2021

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom

Η Liko διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 και κατά το αντίστοιχο πρότυπο για τη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO 13485.

Η Liko διαθέτει, επίσης, πιστοποίηση κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001.

Ειδοποίηση προς χρήστες ή/και ασθενείς στην ΕΕ

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με αυτήν τη συσκευή θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Φροντίδα και επιθεώρηση

Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Ελέγχετε τα παρακάτω σημεία για φθορά και ζημιά:

- Ύφασμα
- Ιμάντες
- Ραφές
- Θηλιές

⚠ Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ανύψωσης που έχουν υποστεί βλάβη.

Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.



ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ. Η ετικέτα προσοχής που βρίσκεται στο πίσω μέρος του σεντονιού ανύψωσης περιλαμβάνει το σύμβολο

ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ. Αν το σεντόνι ανύψωσης πλυθεί, αποδομείται και εμφανίζεται το σύμβολο **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ**. Σε αυτήν την περίπτωση, το σεντόνι ανύψωσης πρέπει να απορρίπτεται.

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το Solo Octo Liftsheet είναι ένα προϊόν μίας χρήσης, που προορίζεται μόνο για μεμονωμένη χρήση.

Αφού προσδιοριστεί το σωστό μέγεθος για έναν συγκεκριμένο ασθενή, σημειώστε το όνομα του ασθενούς στην ετικέτα του προϊόντος, στο πίσω μέρος του σεντονιού ανύψωσης.

Το Solo Octo Liftsheet δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον:

- εάν είναι λερωμένο ή εάν υπάρχει υποψία ότι είναι μολυσμένο
- εάν είναι κατεστραμμένο
- όταν δεν το χρειάζεται πλέον ο ασθενής.


Οδηγίες ανακύκλωσης

Το σύνολο του προϊόντος θα πρέπει να ταξινομείται ως καύσιμο απόβλητο.

Η Hill-Rom αξιολογεί και παρέχει καθοδήγηση στους χρήστες των προϊόντων της σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την ασφαλή απόρριψη των συσκευών της ώστε να συμβάλει στην αποτροπή τραυματισμών όπως (αναφέρονται ενδεικτικά): εγκοπές, διατρήσεις του δέρματος, γδαρσίματα, αλλά και σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος που απαιτούνται μετά τη χρήση και πριν από την απόρριψή του. Οι πελάτες θα πρέπει να τηρούν το σύνολο των ομοσπονδιακών, πολιτειακών, περιφερειακών ή/και τοπικών νομοθεσιών και κανονισμών όσον αφορά την ασφαλή απόρριψη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξαρτημάτων.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τη Hill-Rom για οδηγίες σχετικά με πρωτόκολλα ασφαλούς απόρριψης.

Επισκόπηση του Solo Octo LiftSheet™

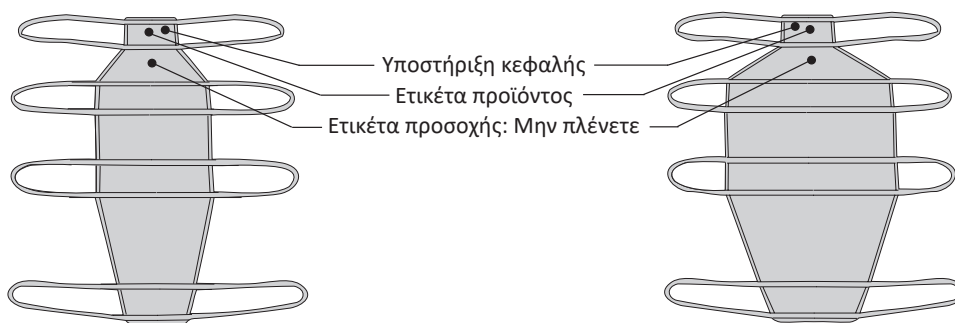

3683905 - Solo Octo Liftsheet, μεσαίου μεγέθους
Μέγεθος σεντονιού: 500x1600 mm (ΠxΜ)

3683906 - Solo Octo Liftsheet, μεγάλου μεγέθους
Μέγεθος σεντονιού: 900x1700 mm (ΠxΜ)

Μέγιστο φορτίο: 200 kg



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Σουηδία
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom