

Guía de instrucciones












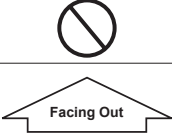


Solo Octo LiftSheet es una sábana de elevación desechable para levantar y trasladar pacientes en posición horizontal. Está diseñada para su uso exclusivo con el accesorio Liko OctoStretch, n.º de prod. 3156056.

IMPORTANTE

La elevación y el traslado de un paciente siempre implican un cierto riesgo. Antes de usarlas, lea la guía de instrucciones de la grúa de pacientes y de Liko OctoStretch. Es importante comprender la totalidad del contenido de la guía de instrucciones. El equipo solo debe ser utilizado por personal capacitado. Tenga cuidado y precaución durante su uso. Como cuidador, usted es el responsable de la seguridad del paciente. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o el proveedor.

Descripción de los símbolos

Estos símbolos se pueden encontrar en este documento o en el producto.

Símbolo	Descripción
	Advertencia: Esta situación requiere cuidado y atención especial.
	Lea la guía de instrucciones antes de utilizarla.
	Marca CE
	Fabricante legal
	Fecha de fabricación
	Identificador de producto
	Número de serie
	Dispositivo médico
	No lavar
	No contiene látex
	No utilizar el producto (Únicamente aparece tras el lavado de los productos Solo cuando su uso está prohibido).
	Dirección hacia arriba y símbolo en la parte exterior del producto
	Símbolo en la parte exterior del equipo
	El código de barras Data Matrix GS1 puede contener la siguiente información. (01) Número global de artículo comercial (11) Fecha de fabricación (21) Número de serie

Instrucciones de seguridad

 Producto técnico-médico de clase I

Modificaciones en los productos

Los productos Liko están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en ellos sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Hill-Rom para obtener asesoramiento e información sobre actualizaciones de productos.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko posee la certificación de calidad de acuerdo a la ISO 9001 y su certificación correspondiente para empresas médico-técnicas, ISO 13485. Liko también posee la certificación medioambiental de acuerdo a la ISO 14001.

Aviso para usuarios o pacientes de la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentran el usuario o el paciente.

Cuidado e inspección

Compruebe el producto antes de cada uso. Compruebe los siguientes puntos en relación con el uso y desgaste:

- Tejido
- Cintas
- Costuras
- Lazos

⚠ No utilice accesorios de elevación que no estén en buen estado.

Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o proveedor.



NO LAVAR. La etiqueta de precaución situada en la parte trasera de la sábana de elevación muestra el símbolo de NO LAVAR. Si se lava la sábana de elevación, la etiqueta se desintegrará para mostrar el símbolo de NO UTILIZAR. Por lo tanto, la sábana deberá desecharse.

Tiempo de vida útil estimado

⚠ IMPORTANTE

La Solo Octo Liftsheet es un artículo desechable diseñado para utilizarse con un único paciente.

Una vez determinada la talla correcta para un paciente concreto, escriba su nombre en la etiqueta del producto que hay en la parte posterior de la sábana de elevación.

La Solo Octo Liftsheet no se debe utilizar:

- si no está limpia o si se sospecha que se ha contaminado
- si está dañada
- cuando el paciente ya no la necesite


Instrucciones de reciclaje

Todo el producto debe clasificarse como residuo combustible.

Hill-Rom evalúa y proporciona orientación a los usuarios sobre la manipulación y la eliminación seguras de sus dispositivos para ayudar a prevenir lesiones, entre las que se incluyen cortes, punciones en la piel o abrasiones, y sobre la limpieza y desinfección del dispositivo médico necesarias después de su uso y antes de su eliminación. Los clientes deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los dispositivos y accesorios médicos.

En caso de duda, el usuario del dispositivo debe ponerse en contacto primero con el servicio de asistencia técnica de Hill-Rom para obtener orientación sobre los protocolos de eliminación segura.

Resumen de Solo Octo LiftSheet™

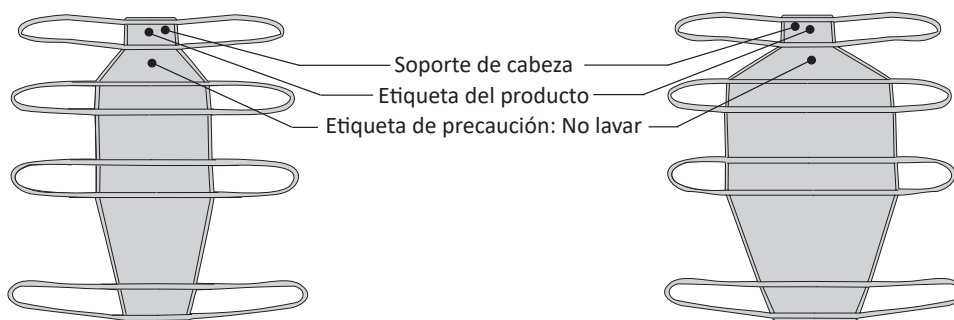

3683905 - Solo Octo Liftsheet, mediana

Talla de la sábana: 500 x 1600 mm/19,7 x 63 pulg. (An. x Lo.)

3683906 - Solo Octo Liftsheet, grande

Talla de la sábana: 900 x 1700 mm/35,4 x 67 pulg. (An. x Lo.)

Carga máxima: 200 kg/440 lb.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Suecia
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom