

Käyttöohje












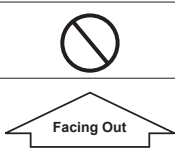
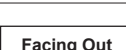

Solo Octo LiftSheet on kertakäyttöinen nostolakana, joka on tarkoitettu avustettavien nostamiseen ja siirtämiseen vaaka-asennossa. Se on tarkoitettu käytettäväksi vain Liko OctoStretch -lisävarusteen kanssa (tuotenumero 3156056).

TÄRKEÄÄ!

Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue nostimen ja Liko OctoStretch -varusteen käyttöohje ennen käyttöä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Tätä varustetta saa käyttää vain koulutettu henkilökunta. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan turvallisuudesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Symbolien kuvaus

Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja.

Symboli	Kuvaus
	Varoitus: tämä tilanne edellyttää erityistä varovaisuutta ja huomiota.
	Lue käyttöohje ennen käyttöä
	CE-merkintä
	Laillinen valmistaja
	Valmistuspäivämäärä
	Tuotetunniste
	Sarjanumero
	Lääkinnällinen laite
	Älä pese
	Lateksiton
	Älä käytä tuotetta (Vain Solo-tuotteissa. Tulee näkyviin pesun jälkeen, kun käyttö on kiellettyä.)
	Suunta ylöspäin; tuotteen ulkopinnalla esiintyvä symboli
	Tuotteen ulkopinnalla esiintyvä symboli
	GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja: (01) kansainvälinen tuotenumero (11) tuotantopäivä (21) sarjanumero

Turvaohjeet

 Lääkinnällinen luokan I laite

Tuotemuutokset

Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakkoilmoitusta. Ohjeita ja lisätietoja mahdollisista päivityksistä saa Hill-Romin edustajalta.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko on laatusertifioitu standardin ISO 9001 ja vastaavan lääkitätekniikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO 13485 mukaisesti.
Liko on ympäristösertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.

Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan asianmukaiselle viranomaiselle.

Hoito ja tarkastus

Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat osat kulumisen ja vaurioiden varalta:

- Kangas
- Hihnat
- Saumat
- Lenkit

⚠ Älä käytä vahingoittuneita nostovarusteita.

Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.



ÄLÄ PESE. Nostolakanan takana olevassa varoitusmerkinnässä on ÄLÄ PESE -symboli. Jos nostolakana pestään, lappu hapertuu niin, että näkyviin tulee ÄLÄ KÄYTÄ -symboli. Tällöin nostolakana on hävitettävä.



Odotettu käyttöikä

⚠ TÄRKEÄÄ!

Solo Octo Liftsheet on kertakäyttöinen tuote, joka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.

Kun avustettavalle on löytynyt sopivan kokoinen nostolakana, kirjoita avustettavan nimi nostolakanan takaosassa olevaan tuotelappuun.

Solo Octo Liftsheet -nostolakanaa ei saa enää käyttää,

- jos se on likaantunut tai sen epäillään kontaminoituneen
- jos se on vaurioitunut
- kun avustettava ei enää tarvitse sitä.


Kierrätysohjeet

Koko tuote on lajiteltava poltettaviin jätteisiin.

Hill-Rom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä auttaakseen ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinnällisten laitteiden puhdistamisessa ja desinfiomisessa käytön jälkeen ja ennen hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinnällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, alueellisia ja paikallisia säännöksiä.

Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteyttä Hill-Romin tekniseen tukeen ja pyydyttävä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Tuotekuvaus – Solo Octo LiftSheet™

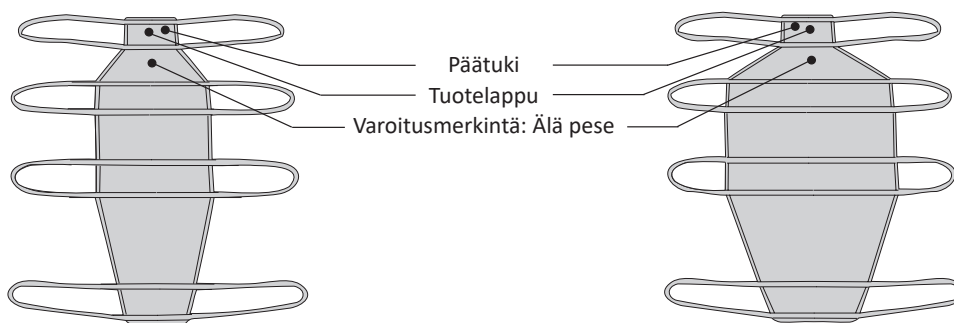

3683905 – Solo Octo Liftsheet, keskikokoinen
Lakanan mitat: 500 x 1 600 mm (L x P)

3683906 – Solo Octo Liftsheet, suuri
Lakanan mitat: 900 x 1 700 mm (L x P)

Enimmäiskuormitus: 200 kg



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Ruotsi
+46 (0)920 474 700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom