

Notice d'utilisation












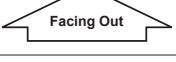
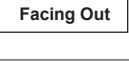

Solo Octo LiftSheet est une toile de levage jetable permettant de lever et de transférer les patients en position horizontale. Elle est conçue uniquement pour l'accessoire Liko OctoStretch, Art. n° 3156056.

IMPORTANT !


Le levage et le transfert d'un patient sont toujours associés à un certain niveau de risque. Consultez au préalable la notice d'utilisation du lève-personnes et du Liko OctoStretch. Il est important de bien comprendre l'ensemble du contenu de la notice d'utilisation. Le dispositif ne doit être utilisé que par du personnel qualifié. Faites preuve de précautions et d'attention lors de l'utilisation. En tant que soignant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. En cas de doute, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur.

Description des symboles

Ces symboles se trouvent dans ce document et/ou sur le produit.

Symbole	Description
	Avertissement ; cette situation exige une attention et un soin particuliers.
	Lire au préalable la notice d'utilisation
	Marquage CE
	Fabricant légal
	Date de fabrication
	Identifiant du produit
	Numéro de série
	Dispositif médical
	Ne pas laver
	Sans latex
	Ne pas utiliser ce produit (Seulement sur les produits Solo et visible après lavage lorsque leur utilisation est interdite).
	Position vers le haut et symbole à l'extérieur de l'équipement
	Symbole à l'extérieur de l'équipement.
	Code-barres de la matrice de données GS1 pouvant contenir les informations suivantes. (01) Code article international (11) Date de production (21) Numéro de série

Consignes de sécurité

 Dispositif médical de classe I

Modifications des produits

Les produits Liko font l'objet d'améliorations constantes. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de les modifier sans notification préalable. Contactez votre représentant Hill-Rom pour obtenir des conseils ou des renseignements sur d'éventuelles mises à niveau.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.
Liko est également certifié ISO 14001 Environnement.

Avis aux utilisateurs et/ou aux patients de l'UE

Tout incident grave survenu au niveau du dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Entretien et inspection

Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Vérifiez plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages sur les points suivants :

- tissu
- sangles
- coutures
- boucles

⚠ Vous ne devez en aucun cas utiliser des accessoires de levage endommagés.

En cas de doute, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur.



NE PAS LAVÉ. L'étiquette de mise en garde située à l'arrière de la toile de levage affiche le symbole NE PAS LAVÉ. Si la toile de levage est lavée, cette étiquette se désintègre pour afficher le symbole NE PAS UTILISER. La toile de levage doit ensuite être jetée.

Durée de vie estimée

⚠ IMPORTANT !

Solo Octo Liftsheet est un article jetable, destiné exclusivement à un usage individuel.

Après détermination de la dimension appropriée à un patient en particulier, inscrivez le nom de celui-ci sur l'étiquette du produit, à l'arrière de la toile de levage.

Cessez d'utiliser la toile de levage Solo Octo Liftsheet :

- si elle est souillée ou en cas de probable contamination
- si elle est endommagée
- quand le patient n'en a plus besoin.


Instructions de recyclage

L'ensemble du produit doit être jeté en tant que déchet combustible.

Hill-Rom évalue et fournit des conseils à ses utilisateurs sur la manipulation et la mise au rebut en toute sécurité de ses dispositifs afin de les aider à prévenir les blessures, notamment les coupures, les perforations de la peau et les abrasions, ainsi que tout nettoyage et désinfection requis du dispositif médical après utilisation et avant sa mise au rebut. Les clients doivent respecter toutes les lois et réglementations fédérales, régionales et/ou locales relatives à la mise au rebut en toute sécurité des dispositifs et accessoires médicaux.

En cas de doute, l'utilisateur du dispositif doit d'abord contacter le service d'assistance technique de Hill-Rom qui le guidera sur les protocoles de mise au rebut en toute sécurité.

Aperçu du Solo Octo LiftSheet™

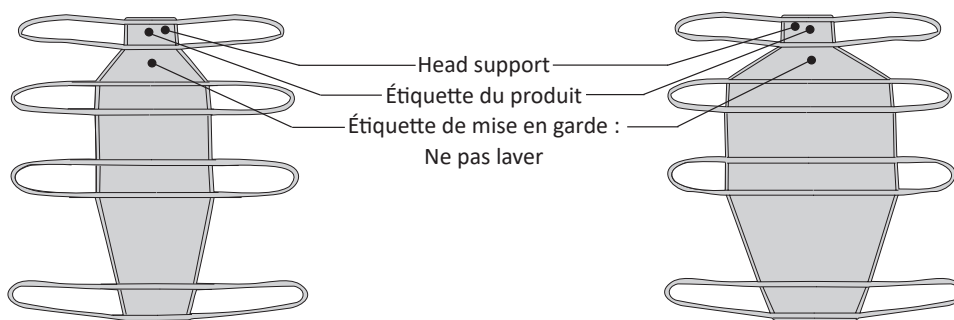

3683905 - Solo Octo Liftsheet, moyen
Taille de la toile : 500 x 1 600 mm (19,7 x 63 po) (L x l)

3683906 - Solo Octo Liftsheet, large
Taille de la toile : 900 x 1 700 mm (35,4 x 67 po) (L x l)

Charge maximale : 200 kg (440 lb)



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Suède
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom