

Istruzioni per l'uso












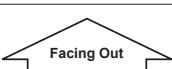


Solo Octo LiftSheet è un telo di sollevamento monouso per il sollevamento e il trasferimento dei pazienti in posizione orizzontale. È destinato esclusivamente all'uso con l'accessorio Liko OctoStretch, Art. n. 3156056.

IMPORTANTE!


Il sollevamento e il trasferimento di un paziente comportano sempre un certo livello di rischio. Leggere le istruzioni per l'uso del sollevatore paziente e di Liko OctoStretch prima dell'uso. È importante comprendere appieno il contenuto delle istruzioni per l'uso. L'apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente da personale addestrato. Durante l'uso, procedere con la massima cura e prudenza. L'operatore è sempre responsabile della sicurezza del paziente. In caso di dubbi, contattare il produttore o il fornitore.

Descrizione dei simboli

È possibile trovare i seguenti simboli in questo documento e/o sul prodotto.

Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: questa situazione necessita di un livello maggiore di cura e attenzione.
	Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso
	Marchio CE
	Produttore legale
	Data di produzione
	Identificatore del prodotto
	Numero di serie
	Dispositivo medico
	Non lavare
	Senza lattice
	Non utilizzare il prodotto (Esclusivamente prodotti Solo e visibile dopo il lavaggio quando l'uso è vietato).
	Direzione verso l'alto e simbolo all'esterno del prodotto
	Simbolo all'esterno del prodotto.
 (01) 0100887761997127 (11) AAMMGG (21) 012345678910	Codice a barre Data Matrix GS1 che può contenere le seguenti informazioni. (01) Global Trade Item Number (11) Data di produzione (21) Numero di serie

Avvertenze di sicurezza

 Dispositivo medico di classe I

Modifiche sui prodotti

I prodotti Liko sono in continuo sviluppo e questo è il motivo per cui ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso. Contattare il rappresentante Hill-Rom per consigli e informazioni sugli aggiornamenti dei prodotti.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko ha ottenuto la certificazione qualitativa conforme a ISO 9001 e all'equivalente specifica per il settore dei dispositivi medici, ISO 13485. Liko ha anche ottenuto la certificazione in conformità con lo standard ambientale ISO 14001.

Avviso per gli utenti e/o i pazienti nell'UE

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

Cura e ispezione

Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Ispezionare i seguenti punti al fine di riscontrare eventuali segni di usura o danneggiamento:

- Tessuto
- Passanti
- Cuciture
- Occhielli

⚠ Non utilizzare accessori di sollevamento danneggiati.

In caso di dubbi, contattare il produttore o il fornitore.



NON LAVARE. L'etichetta di attenzione posta sul retro del telo di sollevamento riporta il simbolo NON LAVARE. Se il telo di sollevamento viene lavato, questa etichetta si cancella e compare il simbolo NON UTILIZZARE. A questo punto, è necessario smaltire il telo di sollevamento.

Durata stimata

⚠ IMPORTANTE!

Solo Octo LiftSheet è un articolo monouso, destinato pertanto all'utilizzo su un solo paziente.

Una volta scelta la taglia più adatta per un particolare paziente, scrivere il nome del paziente sull'etichetta del prodotto sul retro del telo di sollevamento.

Interrompere l'uso del telo Solo Octo LiftSheet:

- se è consumata o se si sospetta una contaminazione
- se è danneggiata
- quando il paziente non ne ha più bisogno.


Istruzioni di riciclaggio

L'intero prodotto deve essere smaltito come rifiuto combustibile.

Hill-Rom valuta e fornisce indicazioni agli utenti in merito alla manipolazione e allo smaltimento sicuri dei propri dispositivi per contribuire alla prevenzione delle lesioni inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tagli, forature della pelle, abrasioni, nonché in merito alla pulizia e alla disinfezione necessarie del dispositivo medico dopo l'uso e prima dello smaltimento. I clienti devono attenersi a tutte le leggi e normative federali, statali, regionali e/o locali in materia di smaltimento sicuro di dispositivi e accessori medicali.

In caso di dubbi, l'utente del dispositivo dovrà prima contattare l'assistenza tecnica Hill-Rom per indicazioni sui protocolli di smaltimento sicuri.

Panoramica del telo Solo Octo LiftSheet™

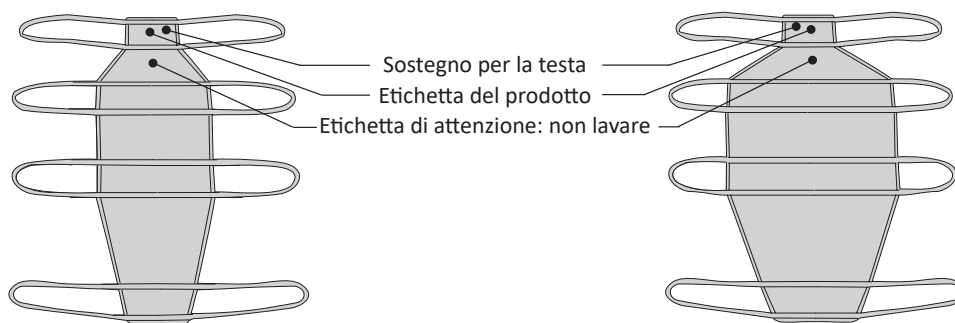

3683905 - Solo Octo LiftSheet, Medium
Dimensioni telo: 500x1600 mm (LxP)

3683906 - Solo Octo LiftSheet, Large
Dimensioni telo: 900x1700 mm (LxP)

Carico massimo: 200 kg



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom