

Instrukcijų vadovas












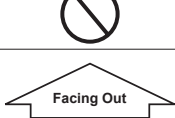


„Solo Octo LiftSheet“ yra vienkartinis kėlimo paklotas, skirtas horizontalioje padėtyje gulintiems pacientams pakelti ir perkelti. Jis skirtas naudoti tik su „Liko OctoStretch“ papildomu paklotu, gaminio nr. 3156056.

SVARBU!


Keliant ir perkeliant pacientą, visada yra tam tikra rizika. Prieš naudodami perskaitykite pacientų keltuvo ir „Liko OctoStretch“ instrukcijų vadovą. Prieš naudojant svarbu visiškai suprasti instrukcijų vadovo turinį. Įrangą turėtų naudoti tik parengti darbuotojai. Naudodamiesi jais būkite atsargūs ir dėmesingi. Kaip slaugytojai, jūs visada esate atsakingi už paciento saugumą. Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

Simbolių aprašymas

Šiuos simbolius rasite dokumente ir (arba) ant paties gaminio.

Simbolis	Aprašymas
	Ispėjimas. Šiuo atveju reikalingi ypatingi atsargumas ir dėmesys.
	Prieš naudodami perskaitykite instrukcijų vadovą
	CE ženklas
	Oficialus gamintojas
	Pagaminimo data
	Gaminio identifikatorius
	Serijos numeris
	Medicinos prietaisas
	Neskalbti
	Be latekso
	Nenaudokite gaminio (Tik „Solo“ gaminiai ir matoma po skalbimo, kai naudoti yra draudžiama).
	Kryptis aukštyn ir simbolis gaminio išorėje
	Simbolis gaminio išorėje.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) MMmmDD (21) 012345678910</small>	GS1 duomenų matricos brūkšniame kode gali būti pateikiama toliau nurodyta informacija. (01) Visuotinis prekės numeris (11) Gamybos data (21) Serijos numeris

Saugumo nurodymai

 I klasės medicinos prietaisas

Gaminio pakeitimai

„Liko“ gaminiai nuolat tobulinami, todėl pasiliegame teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo. Dėl patarimų ir informacijos apie atnaujintus gaminius kreipkitės į savo „Hill-Rom“ atstovą.

Design and Quality by Liko in Sweden

„Liko“ suteiktas kokybės sertifikatas pagal ISO 9001 ir šio standarto atitiktumą medicinos prietaisų pramonei, ISO 13485.
„Liko“ taip pat yra sertifikuota pagal aplinkosaugos standartą ISO 14001.

Pastaba ES naudotojams ir (ar) pacientams

Įvykus su prietaisu susijusiam rimtam incidentui, apie tai turi būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir (ar) pacientas, kompetentingai institucijai.

Priežiūra ir patikra

Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite gaminį. Patikrinkite šiuos dalykus, ar nėra nusidėvėjimo ir pažeidimų:

- audinį;
- dirželius;
- siūles;
- kilpas.

⚠ Nenaudokite pažeistų kėlimo priedų.

Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.



NESKALBTI. Perspėjimo etiketė pakloto išvirškiojoje pusėje yra su simboliu NESKALBTI. Jei kėlimo paklotas išskalbiamas, ši etiketė suyra ir matomas simbolis NENAUDOTI. Tuomet kėlimo paklotą būtina likviduoti.



Numatyta eksploataavimo trukmė

⚠ SVARBU!

„Solo Octo Liftsheet“ papildomas paklotas yra vienkartinis ir skirtas naudoti tik individualioms reikmėms.

Įvertinę, koks tiksliai dydis reikalingas konkrečiam pacientui, kėlimo pakloto išvirškiojoje pusėje, ant gaminio etiketės užrašykite paciento vardą.

„Solo Octo Liftsheet“ nebegalima naudoti:

- jam užsiteršus ar įtariant, kad yra suterštas;
- apgadinus;
- kai pacientui nebėra reikalingas.


Perdirbimo instrukcijos

Visas gaminys turėtų būti rūšiuojamas kaip degios atliekos.

„Hill-Rom“ įvertina ir pateikia nurodymų naudotojams, kaip saugiai tvarkyti ir likviduoti bendrovės gaminamus prietaisus, kad būtų išvengta sužalojimų, įskaitant įpjovimus, odos įdūrimus ir nubrozdinimus, bet jais neapsiribojant, taip pat nurodo, kaip reikia valyti ir dezinfekuoti medicinos prietaisą jį panaudojus ir prieš likviduojant. Klientai turi paisyti visų federalinių, šalies, regioninių ir (ar) vietinių įstatymų ir reglamentų dėl saugaus medicinos prietaisų ir jų priedų likvidavimo.

Kilus abejonų, prietaiso naudotojas turi iš pradžių kreiptis į „Hill-Rom“ techninės pagalbos skyrių dėl saugaus likvidavimo protokolų nurodymų.

„Solo Octo LiftSheet™“ apžvalga

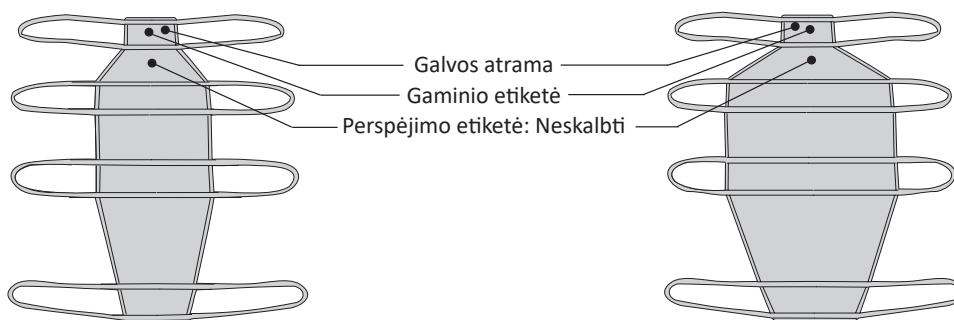

3683905 – „Solo Octo Liftsheet“, vidutinis
Pakloto dydis: 500 x 1600 mm / 19,7 x 63 col. (Pxl)

3683906 – „Solo Octo Liftsheet“, didelis
Pakloto dydis: 900 x 1700 mm / 35,4 x 67 col. (Pxl)

Didžiausia apkrova: 200 kg / 440 sv.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden (Švedija)
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom