

Instrukciju rokasgrāmata












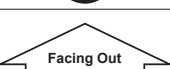
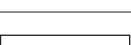

Solo Octo LiftSheet ir vienreizlietojams pacelšanas palags pacientu celšanai un pārvietošanai horizontālā stāvoklī. Šo izstrādājumu ir paredzēts izmantot tikai ar Liko OctoStretch piederumu, izstr. Nr. 3156056.

 **SVARĪGI!**


Pacienta celšana un pārvietošana vienmēr ir saistīta ar noteiktu riska līmeni. Pirms izmantošanas izlasiet informāciju instrukciju rokasgrāmatā gan par pacienta celšanu, gan Liko OctoStretch izmantošanu. Ir svarīgi pilnībā izprast instrukciju rokasgrāmatas saturu. Aprikojumu drīkst lietot tikai apmācīts personāls. Lietošanas laikā rīkojieties uzmanīgi un piesardzīgi. Aprūpētājs vienmēr ir atbildīgs par pacienta drošību. Ja rodas neskaidrības, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

Simbolu apraksts

Šajā dokumentā un/vai uz izstrādājuma ir izmantoti tālāk norādītie simboli.

Simbols	Apraksts
	Uzmanību! Šajā situācijā jāievēro īpaša rūpība un piesardzība.
	Pirms lietošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatu
	CE zīme
	Juridiskais ražotājs
	Ražošanas datums
	Izstrādājuma identifikators
	Sērijas numurs
	Medicīniska ierīce
	Nemazgāt
	Nesatur lateksu
	Nelietot izstrādājumu (Tikai Solo izstrādājumiem, redzams pēc mazgāšanas, kad lietošana ir aizliegta).
	Virziena norāde uz augšu un simbols izstrādājuma ārpusē
	Simbols izstrādājuma ārpusē
	GS1 datu matricas svītrkods, kas var ietvert šādu informāciju: (01) Globālais tirdzniecības identifikācijas numurs (11) Ražošanas datums (21) Sērijas numurs

Drošības instrukcijas

 I klases medicīniska ierīce

Izstrādājuma izmaiņas

Liko izstrādājumi tiek nepārtraukti uzlaboti, tāpēc mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izstrādājumu izmaiņas. Lai saņemtu konsultācijas un informāciju par izstrādājumu uzlabojumiem, sazinieties ar uzņēmuma Hill-Rom pārstāvi.

Design and Quality by Liko in Sweden

„Liko” kvalitātes sistēma ir sertificēta saskaņā ar standartu ISO 9001 un tā ekvivalentu medicīnas ierīču ražošanas nozarei — ISO 13485. „Liko” ir sertificēts arī saskaņā ar vides standartu ISO 14001.

Paziņojums lietotājiem un/vai pacientiem ES

Par jebkuru nopietnu ar ierīci saistītu negadījumu ir jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs veic uzņēmējdarbību un/vai dzīvo pacients.

Aprūpe un pārbaude

Pārbaudiet izstrādājumu pirms katras lietošanas reizes. Pārbaudiet, vai tālāk norādītās daļas nav nolietojušās vai bojātas:

- audums;
- siksnas;
- šuves;
- cilpas.

⚠ Nelietojiet bojātus celšanas piederumus.

Ja rodas neskaidrības, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.



NEMAZGĀT. Brīdinājuma etiķete, kas ir novietota pacelšanas palaga aizmugurē, ir redzams simbols NEMAZGĀT. Ja pacelšanas palags tiek mazgāts, šī etiķete atdalās, atklājot simbolu NELIETOT. Šādā gadījumā no pacelšanas palaga ir jāatbrīvojas.



Paredzētais kalpošanas laiks

⚠ SVARĪGI!

Solo Octo Liftsheet piederums ir vienreizlietojams un paredzēts tikai individuālai lietošanai.

Kad ir noteikts pareizais izmērs attiecīgajam pacientam, uzrakstiet pacienta vārdu uz izstrādājuma etiķetes pacelšanas palaga aizmugurē.

Solo Octo Liftsheet vairs nevar izmantot:

- ja tas ir notraipīts vai ja radušās aizdomas, ka tas ir piesārņots;
- ja tas ir bojāts;
- ja pacientam tas vairs nav nepieciešams.


Norādījumi par pārstrādi

Viss izstrādājums ir jāšķiro kā degamie atkritumi.

Hill-Rom novērtē un sniedz norādījumus lietotājiem par ierīču drošu izmantošanu un likvidēšanu, lai palīdzētu novērst savainojumus, tostarp (bet ne tikai) ādas iegriezumus, pārduršanu, nobrāzumus, kā arī par jebkuru nepieciešamo medicīniskās ierīces tīrīšanu un dezinfekciju pēc lietošanas un pirms tās likvidēšanas. Klientiem ir jāievēro visi federālie, valsts, reģionālie un/vai vietējie tiesību akti un noteikumi, kas attiecas uz medicīnisko ierīču un piederumu drošu likvidēšanu.

Šaubu gadījumā ierīces lietotājam vispirms ir jāsaazinās ar Hill-Rom tehniskā atbalsta dienesta pārstāvi, lai saņemtu norādījumus par drošas likvidēšanas protokoliem.

Pārskats par Solo Octo LiftSheet™

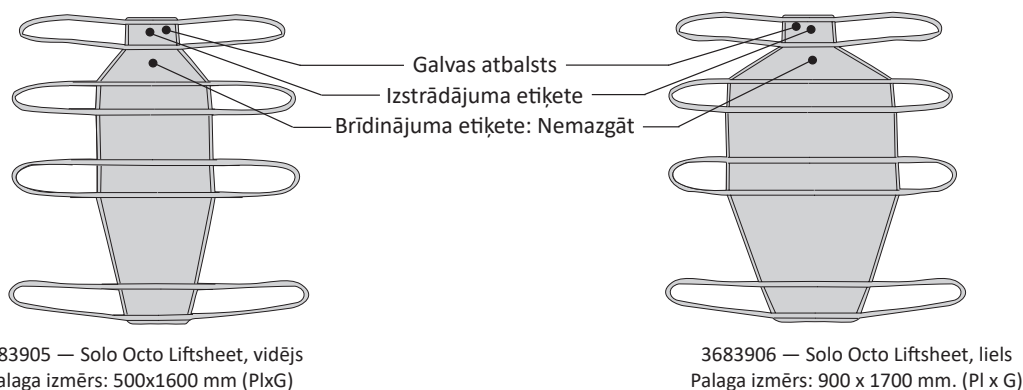

Maksimālā slodze: 200 kg



Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Zviedrija
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom